

# alvaskin

## Brukerhåndbok



**Skann QR-koden for å se hvordan du bruker Alvaskin®**

Dersom du har noen spørsmål vennligst  
send oss en e-post på [hello@alvaskin.com](mailto:hello@alvaskin.com).

**Les brukerhåndboken nøye før du bruker enheten, og sjekk  
at din hud- og kroppshårfarge passer for IPL.**

Skann QR-koden over for sist oppdaterte versjon av brukerhåndboken.  
Versjon 1.0.3.2

# Innholdsfortegnelse

Bli kjent med Alvaskin® IPL	s. 1
Sikkerhet	s. 4
Illustrasjon av maskinen	s. 5
Hvem kan bruke Alvaskin?	s. 6
Hvilke hudtoner og hårfarger er det egnet for?	s. 7
Hvor kan jeg ikke bruke Alvaskin?	s. 8
Forholdsregler ved bruk	s. 9
Hvordan bruke Alvaskin	s. 11
Hudtest og bruksplan	s. 14
Bruk i ansiktet for kvinner	s. 15
Tre ulike moduser	s. 16
Etter bruk og resultater	s. 17
Mulige bivirkninger	s. 18
Rengjøring, oppbevaring og avhending	s. 21

## **Bli kjent med Alvaskin® IPL Hårfjerner**

Alvaskin® IPL Hårfjerner er et elektrisk apparat. Derfor må du lese og følge produktets sikkerhetsreglene nøye. Alvaskin® IPL Hårfjerner krever tilkobling til strøm under bruk, men er utstyrt med en lang fleksibel ledning. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med brukerhåndboken før hver behandling. Alvaskin® påtar seg ikke ansvar for noen skader forårsaket av uaktsomhet eller feil bruk av apparatet.

### **Tiltenkt bruk**

Alvaskin® IPL Hårfjerner er tiltenkt å stoppe sjenerende og uønsket hårvekst og forårsake permanent hårreduksjon på lang sikt. Permanent hårreduksjon er definert som en langvarig stabil reduksjon i antall hår som vokser opp etter behandling.

Alvaskin® IPL Hårfjerner er utviklet for kosmetiske formål og er ikke en medisinsk enhet. Bruk Alvaskin® IPL for fjerning av uønskede hår på områder som underarmer, bikinilinje, armer, ben, ansikt (kun under kinnbenet), rygg, skuldre, og bryst for optimal effektivitet og sikkerhet.

For å følge progresjonen og se resultatene underveis, ta bilde før du starter å bruke apparatet,

## Hvordan fungerer Alvaskin® IPL

### Kort om hårvekst

Menneskelig hårvekst følger en syklus som omfatter tre faser: anagen (vekstfase), katagen (overgangsfase), og telogen (hvilefase).

#### 1) Vekstfase:

I denne fasen vokser håret aktivt fra hårsekkene. Det er den mest ideelle fasen for IPL-behandling siden håret er festet til hårsekken og har en høy konsentrasjon av melanin. Dette øker absorpsjonen av IPL-lys, noe som er nøkkelen til en mest mulig effektiv behandling.

#### 2) Overgangsfase:

Hårveksten stanser i denne fasen, og hårsekkene forbereder seg på neste fase, hvilefasen, ved å krympe. Behandling med IPL har mindre effekt, fordi håret begynner å løsne seg fra hårsekken, og veksten avtar sakte men sikkert.

#### 3) Hvilefase:

Under denne fasen er IPL-behandling minst effektiv. Hårene er ikke i aktiv vekst og inneholder derfor mindre melanin, noe som fører til redusert absorpsjon av IPL-lys.


## Slik fungerer det



Hårsekker er mest mottakelig for IPL-behandling når de er i vekstfase (1), men de er ikke i den fasen samtidig. Derfor må behandlingen gjentas over tid, slik at når de andre hårsekkene er i vekstfasen så stoppes de også.



Apparatet stimulerer hårsekken til å gå i hvilefase ved å utsette de for varme som skapes av IPL-lyset. Varmen ledes ned til hårsekken ved hjelp av melaninet i håret, og jo mørkere hår, jo mer varme absorberes.

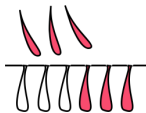

Når hårsekker i vekstfasen blir utsatt for varmen fra IPL-lyset, så skades de og evnen til å produsere nye hår svekkes. Håret som er festet i hårsekken vil falle ut raskere enn vanlig, og det normalt etter 1-2 uker.



Optimalt hårfjerningsresultat vil normalt kreve gjentatt behandling over en 12 ukers periode, for å sikre at man har truffet alle hårsekkene i vekstfasen. Det må også anvendes nok styrke på IPL-lyset for best resultat.

## Sikkerhet

IPL (Intense Pulsed Light)-teknologien i dette apparatet er utviklet for sikker bruk hjemme av privatpersoner, med et energinivå som er lavere enn det som brukes i profesjonelle klinikker.

Det lavere energinivået minsker risikoen for skader eller komplikasjoner, og gjør apparatet tryggere å bruke. For å beskytte øynene dine, er apparatet utstyrt med en sikkerhetsmekanisme som sikrer at lysimpulsene kun aktiveres når apparatet har full kontakt med huden.

Det er viktig å ikke trykke apparatet for hardt mot huden. Glassdelen som sender ut lysimpulsene, skal ikke berøre huden direkte. Kun plastdelen rundt behandlingsvinduet skal være i kontakt med huden din.

Unngå å se direkte inn i apparatets behandlingsvindu, og forsøk ikke å aktivere enheten mens du peker den mot øynene dine.

Det rosa lyset på forsiden av apparatet vil blinke når det er i kontakt med huden. Hvis lyset blinker uten at apparatet har kontakt med huden, bør du avslutte bruken umiddelbart. Ikke bruk apparatet på samme område mer enn én gang per uke. Å gjøre det vil ikke forbedre eller fremskynde resultatene, og kan i stedet skade huden din.



<b>Lampetype</b>	Xenon Quartz Raytube
<b>Teknologi</b>	Intens Pulserende Lys
<b>Bølgelengde</b>	470-1100 nm
<b>Energinivå</b>	1,5-4,9 cm2
<b>Lysimpulser</b>	500 000

<b>Strømadapter</b>	Input: 100-240AC Output: 12V 3A DC
<b>Mål</b>	124x83 mm
<b>Vekt</b>	186 gram
<b>Driftstemp.</b>	5-30°C

## Hvem kan bruke Alvaskin?

### Ikke bruk dette produktet dersom...

- Du er gravid, ammer eller er under 18 år
- Du vil bruke den på et område som ikke er egnet for IPL
- Du har hatt forstadier til, har eller har hatt hudkreft
- Du har tatt selvbruning eller selvbruningsprodukter
- Du har en kronisk sykdom eller kronisk hudsykdom
- Du har skadet hud i området som du skal bruke den på
- Du har åreknuter eller spindelvevsårer i behandlingsområdet.
- Du er følsom for sollys på grunn av medisiner
- Du har nylig utført en peeling på behandlingsområdet.
- Du har epilepsi - det sterke lyset kan forårsake anfall
- Du har pacemaker eller lignende medisinske utstyr i kroppen
- Du har en mørk hudtone, eller huden din er solbrun eller solbrent, noe som gjør den mørkere enn din faktiske hudtone. Solbrun eller solbrent hud øker risikoen for bivirkninger ved bruk av apparatet.

Hvis forholdene som er listet overfor gjelder deg, må du ikke bruke apparatet, da det kan skade eller forverre huden din. Hvis du er usikker på om dette er trygt for deg bør du rådføre deg din legen for å forsikre deg om at du er egnet for bruk av apparatet.



## Hvilke hudtoner er Alvaskin® egnet for, og ikke?


Oversikten under vises hudfarger som er egnet for Alvaskin®. Hvis området du skal bruke den på ikke er egnet for bruk, så skal du ikke bruke apparatet. Bruk av Alvaskin® på uegnet hudprofil kan føre til uønskede bivirkninger som: hyperpigmentering, hypopigmentering, forbrenning, smerter og risiko for arrdannelse.



**NB!** Hudfargen din kan endres, f.eks. etter soling. Den kan bli mørkere enn den var ved sist behandling. Derfor er det viktig at du sammenligner hvert område opp mot fargekartet og utfører hudtest ved endring.

I enkelte områder kan huden din være mørkere enn andre, så ikke bruk den samme styrken på alle områder uten å kontrollere fargekartet først.

## Hvor effektiv er Alvaskin® på forskjellige hårfarger?

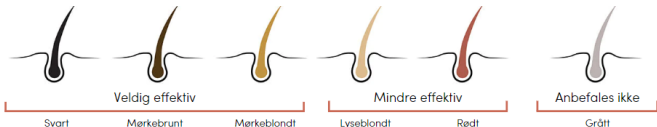

## Hvor kan jeg ikke bruke Alvaskin?

### Ikke bruk på ...

- Hodebunn, øyenbryn eller hvor som helst i nærheten av eller rundt øynene. Bruk i disse områdene kan skade øynene dine.
- Tatoveringer eller permanent sminke. Dette kan resultere i forbrenning og fargeforandring i huden, såkalt hypopigmentering eller hyperpigmentering.
- Brystvorter, kjønnsorganer eller rundt anus. Disse områdene kan ha en mørkere hudfarge og/eller større hårtetthet, og bruk av enheten i disse områdene kan forårsake uønskede bivirkninger.
- Føflekker, fregner, store blodårer, mørkere pigmentflekker, arr eller andre uregelmessigheter i huden som ikke er undersøkt av lege. Det kan resultere i uønskede bivirkninger og kan gjøre det vanskeligere å identifisere hudrelaterte sykdommer (f.eks. hudkreft).
- Skjegg eller ansiktshår hos menn.

Når du bruker enheten så skal den kun "zappe" når den er i kontakt med huden din. Hvis det skjer uten å være i kontakt med hud, så ta kontakt med oss og avbryt bruken. Ikke se inn i behandlingsvinduet og zappe, da det kan skade øynene dine. Ikke bruk apparatet mer enn en gang per uke per område. Mer bruk per uke vil ikke gi raskere resultater.

## **Forholdsregler ved bruk**

Enheten er beregnet for en enkelt bruker, og det er ikke ment for bruk av personer under 18 år. Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, kan bruke enheten hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av enheten og forstår farene som er involvert.

Hold alltid enheten utenfor barns rekkevidde. Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med enheten. Apparatet er ikke vanntett, unngå kontakt med vann.

## **Elektrisk og brannsikkerhet**

Kontroller alltid enheten og ledningene regelmessig for synlige tegn på skade. Ikke bruk enheten hvis det oppstår skader eller sprekker. Elektrisk støt kan oppstå ved bruk av en skadet enhet. I tilfelle feil, ta kontakt med oss umiddelbart. Ukvalifisert reparasjonsarbeid kan føre til ekstreme farer for brukeren. Trekk alltid ut ledningen til enheten etter bruk.

Hvis enheten er skadet, hvis den blir for varm under bruk, så varm at du ikke kan ta på plastdekselet, eller du merker endringer i kvaliteten, ta kontakt med oss umiddelbart. Ikke fortsett å bruke enheten, da det kan føre til skade på huden din.

## FARE

- Forsøk aldri å reparere eller åpne enheten selv. Dette kan utsette deg for farlig elektrisk spenning og pulserende lysenergi, med risiko for alvorlige kroppsskader og permanent øyeskade.
- Unngå bruk nær vann eller på våte overflater, som i badekar, dusjer, ved vasker eller nær beholdere med vann. Bruk av en våt enhet kan føre til elektrisk støt.
- Ikke bruk enheten hvis den viser tegn til skade, som sprekker i dekselet eller skader på ledningen. Interne komponenter kan inneholde farlige elektriske ladninger.
- Sørg for at glassfilteret ikke er sprukket eller har mangler, og unngå å røre ved det under eller rett etter bruk da det blir varmt. Det er viktig å inspisere for skader regelmessig.
- Ikke bruk petroleumsbaserte eller brennbare rengjøringsmidler (som alkohol eller aceton) på enheten, da dette kan utgjøre en brannrisiko. Unngå også sterke rengjøringsmidler som kan skade enheten eller ripe opp glassfilteret.
- Enheten er kun ment for fjerning av uønsket hårvekst på huden. Ikke trykk på behandlingsknappen med mindre behandlingsvinduet er i kontakt med huden. Hold ventilasjonsåpningene fri for blokkering for å unngå overoppheting, som kan lede til elektrisk støt eller brann.

Følg disse forholdsreglene nøye for å sikre trygg bruk av enheten.

## Hvordan bruke Alvaskin?

### Klargjøring før bruk

Før behandling, sørg for at huden er ren, tørr, hårfri, fri kremer eller andre påføringer. Dette forhindrer at hår og rester fester og smelter seg fast til behandlingsvinduet. For ansiktshår, anbefales barbering/naping; for kroppshår, bruk barberhøvel. Ved bruk av pinsett, vent noen dager før du bruker Alvaskin® for å la et nytt hår vokse til hudoverflaten.

Vær oppmerksom på at enheten kan bli varm under bruk, så påse at viften er fri, slik at enheten ikke blir overopphet unødvendig.

### Skru på enheten

Koble enheten til strøm med hovedledningen og trykk kort på den blinkende grønne knappen bak på maskinen for å slå den på. En vifte vil slå seg på og det blinkende grønne lyset vil lyse konstant istedenfor.

For å slå av, trykk og hold inn samme knapp i 1-2 sekund. Ta deretter ut ledningen etter den er avslått. Hvis det ikke går, trekk ut stikkkontakten.

Ved oppstart vil to lys lyse på fronten: et blått og et rosa. Det rosa lyset blinker når Alvaskin® har hudkontakt og er klar for å zappe. Blinkingen opphører når det ikke er hudkontakt, og da holder lyset seg konstant.


## Endre styrke og bruk

På maskinens framside vil du se et rosa lys, og et blått lys som viser styrke. Ett blått lys betyr laveste styrke, mens fem blå lys viser høyeste nivå. For å justere styrken, trykk kort på den grønne knappen bak, den du brukte for å slå på apparatet. Hvert trykk øker styrken med ett nivå, og du kan se det valgte nivået ved antall tente blå lys på fronten.


Apparatet starter automatisk på laveste styrke. Når du har funnet den høyeste styrken du tåler ved hjelp av hudtesten, plasser apparatet forsiktig mot huden og påse at hele behandlingsvinduet er dekket. Apparatet skal ikke presses hardt mot huden, da det kan medføre skade.

Når det rosa indikatorlyset blinker, så kan du trykke på den store knappen foran for å aktivere et zap. Deretter slutter det rosa lyse å blinke mens apparatet lader opp til neste zap. Når det rosa lyset begynner å blinke igjen etter 1-3 sekunder, er det klart for å bruke apparatet igjen.



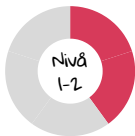

Utformet for bruk på sensitive områder som bikinilinje, brasiliansk voksing og overleppe, samt ideelt for de som opplever ubehag ved høyere styrker.

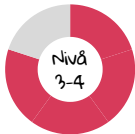

Dette kan brukes etter par uker inn i behandlingen på dine mer sensitive områder, eller for de med moderat følsomhet. Best for armhuler og mage.



Vi anbefaler nivå 5 for de områdene med lav følsomhet eller for mindre sensitive områder som armer, ben og rygg. Normalt har du jobbet deg over fra 1 til nivå 5.

**NB!** Du må gjennomføre en hudtest på hvert område og hver styrke du planlegger å bruke den på. Opplever du ubehag på behandlingsstedet, bruk en lavere innstilling. Ønskede resultater kan fortsatt oppnås på lavere nivåer, selv om det kan ta lengre tid. Siden ulike områder kan reagere forskjellig på IPL, er det viktig å tilpasse styrken etter behov.

## Hudtest

En hudtest må gjennomføres første gangen du bruker apparatet, du skal bruke det på et nytt nivå/område på kroppen eller du har vært utsatt for sol. Apparatet skal ikke presses hardt mot huden, men forsiktig inntil.

1. Velg et diskret område som tilsvarer to blink ved siden av hverandre\*.
2. Sørg for at området er hårfritt, tørt, rent og fritt for kremer/serum.
3. Sett styrke til 1 eller øk med én styrke fra sist hudtest du gjorde.
4. Sett apparatet til huden, zapp én gang, flytt til siden og zapp igjen.
5. Vent 48 timer før du evaluerer testområdet for reaksjoner.
6. Hvis du ikke får noe reaksjon, så har du bestått hudtesten.
7. Gjenta hudtesten med økt styrke for å finne høyeste styrke du tåler.

Hvis du får reaksjoner, stopp bruken og kontakt oss på e-post. \*For hudtesten i ansiktet anbefales det å velge et diskret sted under haken.

## Behandlingsplan

Permanent hårfjerning oppnås normalt ved 1 ukentlig behandling i 12 uker på høyeste styrke man tåler. Når hårveksten ikke lengre vokser ut, gjør 1 behandling per 1-2 måned basert på ditt behov. Før du starter 12-ukers behandlingen, må du gradvis øke styrken ved å utføre hudtesten per styrke (1-5). Når du har nådd maksimal styrke som du tåler, så er du klar for å gjøre 12-ukers behandlingsprogrammet.



## **Bruk i ansiktet for kvinner**

Før du bruker den i ansiktet, må du ha gjort en hudtest for hver styrke du skal bruke. Utfør hudtesten på et diskret område, f.eks. under haken for å redusere synlighet av eventuell reaksjon.

Det er viktig å ikke presse apparatet for hardt til huden. Det skal settes forsiktig til huden. Før du trykker på behandlingsknappen, må du lukke øynene. Ikke bruk den samme område mer enn en gang i uka.

Unngå kontakt med sensitive områder som lepper og nesebor. Press leppene sammen for å unngå ubehag som kan skyldes IPL-lyset.

Rødhet kan oppstå ved behandling under haken, da hårene er tettere og grovere. Det er vanligvis midlertidig og forsvinner normalt etter 24 timer.

## **Verdt å merke seg**

- Hvis rødhet eller en brennende følelse oppstår og varer i flere minutter, må du bruke en kjølig klut for å berolige området.
- Hvis du observerer pigmentendringer, hyperpigmentering eller hypopigmentering, avslutt bruken og kontakt oss på e-post.
- Det kan skyldes en underliggende medisinsk tilstand eller at du ikke har passende hudprofil for IPL-apparatet.

## Tre ulike moduser

Apparatet er utstyrt med tre ulike moduser som gjør det lettere å bruke den på deler av kroppen, sørger for at alle områder blir tatt og gjør behandlingen raskere. Merk, det er viktig å unngå å bruke den på samme område mer enn én gang i løpet av en behandlingsøkt.

### Stamp Modus

Hvert enkelt klikk på “pulse”-knappen forårsaker et blink. Dette er standardmodus på enheten, og krever kontakt med huden.

- Bra for underarmene, bikiniområdet og ansiktet.

### Glide Modus

Legg apparatet inntil huden og hold inn “pulse”-knappen. Alvaskin® vil da automatisk blinke med jevne mellomrom, og du kan gli apparatet langs området du ønsker å bruke den på. Da slipper du å løfte maskinen fra huden mellom hvert blink, og er perfekt for områder som leggene.

- Bra for bein og overkropp.

### Auto Modus

Hold inne “pulse”-knappen uten at maskinen er i kontakt med huden. Her vil du kunne ha mer kontroll på når maskinen blinker, da den kun blinker når den er i kontakt med huden. Her må du løfte maskinen mellom hvert blink, men i motsetning til Stamp Modus slipper du å trykke på “pulse”-knappen før hvert blink.

## Etter bruk

Etter bruk må du koble strømforsyningen fra stikkontakten. Vi anbefaler å bruke solkrem >30 SPF når området kan bli utsatt for sol. Unngå eksponering for sol og kunstige lyskilder, som solarium.

Unngå aktivitet eller hudprodukter som kan irritere huden din 24 timer. F.eks.: boblebad eller badstue, bruk av tettsittende klær, blekekremmer, parfymerte produkter eller peelingprodukter. Det kan forårsake irritasjon, som kløe og rødhet, på de områdene du har brukt den på.

## Resultater

Resultater varierer fra person til person. Noen merker en hårreduksjon etter bare 4 uker, mens andre må vente lengre. Det viktigste er å utføre behandlingen på den høyeste styrken huden din tåler, basert på hudtesten, i 12 sammenhengende uker, én gang i uka.

Uke 1-3: Opptil 30 % reduksjon i hårvekst.

Uke 4-7: Opptil 50 % reduksjon i hårvekst.

Uke 8-12: Opptil 100 % reduksjon i hårvekst.

Dersom du ikke ser resultater i uke 4-6, bør du utføre hudtesten for å avdekke om du tåler høyere styrke. De som får best resultat gjør det på styrke 5, men det passer nødvendigvis ikke for alle.

## Mulige bivirkninger

Noen vil oppleve noe ubehag som varme, rødhet eller kribling i huden, når de bruker enheten - dette er normalt. Reaksjoner forsvinner vanligvis innen 24 timer. Bivirkningene er vanligvis øyeblikkelige eller vises innen 24 timer. I sjeldne tilfeller kan det ta opptil 72 timer før de vises. Kontakt legen din hvis du opplever unormale hudreaksjoner.

## Mulige årsaker til at du opplever ubehag ved bruk av apparatet

- Du nylig har eksponert området som du har brukt den på for sol og/eller har en mørkere hudtone enn vanlig - vent til hudtonen din har normalisert seg før du bruker enheten
- Du presser apparatet for hardt mot huden. Unngå å press apparatet så hardt mot huden at glasset på apparatet kommer i kontakt med huden din. Den eneste delen av apparatet som skal være i kontakt med huden din, er plastdelen som omgir hodet på apparatet.
- Du bruker enheten med for høy styrke for din hudtype og/eller for det spesifikke området - prøv å senke nivået og test apparatet igjen, hvis det fortsatt føles ubehagelig, kan det hende at huden din ikke tåler IPL-lyset, og du bør slutte å bruke Alvaskin® IPL.

**NB!** Om bruken blir smertefull, juster ned styrken til et nivå som er komfortabelt. Ved hudreaksjoner utover mild rødhet, avbryt bruken.

## Vanlige hudreaksjoner

- Varm eller kriblende følelse under bruk som vanligvis forsvinner etter noen sekunder til et minutt og avtar ved fortsatt bruk. Dette er forventet og normalt ved bruk av IPL. Du kan fortsette å bruke enheten som beskrevet.
- Intens smerte eller ubehag under bruk, eller som vedvarer etter fullført økt. Slutt å bruke enheten og kontakt legen din før du bruker apparatet igjen.
- Det kan oppstå en reaksjon som ligner på solbrenthet i det området du har brukt den på i en kort periode. Hvis denne ikke forsvinner innen tre dager, anbefaler vi at du oppsøker lege.
- Tørr hud og kløe kan oppstå på grunn av barbering eller kombinasjonen av barbering og IPL. Dette er normalt ufarlig og forsvinner som regel i løpet av noen dager. Du kan kjøle ned området med en ispose eller en våt ansiktsklut. Hvis tørrheten ikke gir seg, kan du påføre en fuktighetskrem uten parfyme på det området 24 timer etter du har brukt den sist.

## Mulige bivirkninger i svært sjeldne tilfeller

- Forbrenning, mye rødhet og opphovning: Disse reaksjonene er svært sjeldne. De er som regel et resultat av en styrke som er altfor høy for hudfargen din. Hvis reaksjonen ikke forsvinner etter 3 dager, anbefaler vi deg å ta kontakt med lege og avslutte behandlingen.

- Misfarging av hud: Dette forekommer svært sjeldent. Misfarging av huden viser seg som en mørkere eller lysere flekk sammenlignet med området rundt. Dette er en følge av at styrken er for høy for hudfargen din.
- I sjeldne tilfeller (vanligvis som følge av for høy styrke på for mørk hud) kan pigmentendringen vare lenger enn vanlig. Ved første tegn på en slik misfarging bør du slutte å bruke maskinen. Hvis denne misfargingen vedvarer over flere uker, bør du kontakte legen din.
- Økning i hårvekst i området du har brukt den: Mer sannsynlig å se hos personer fra Middelhavsområdene, Midtøsten og Sørøst-Asia. Hvis denne økningen vedvarer over flere uker, må du slutte å bruke enheten og konsultere legen din.
- Hudinfeksjon og -betennelse: Dette oppstår svært sjelden, og kan være et resultat av å bruke apparatet på sår eller kutt som oppstod under barbering, på allerede eksisterende sår eller inngrodde hår.
- Sterk smerte: Dette kan oppstå under eller etter bruk hvis du har brukt apparatet på ubarbert hud (eller et område som ble forlatt ubarbert ved et uhell), hvis du bruker apparatet med en styrke som er for høy for hudfargen din, hvis du bruker den på samme område flere ganger under samme bruk, eller hvis du bruker det på åpne sår, betennelser, infeksjoner, tatoveringer, brannskader osv.

## **Rengjøring og oppbevaring**

Etter hver økt skal hudfargesensorene og vinduet inspiseres for skader og tørkes av med en tørr, lofri klut. Hvis du ser merker eller svarte flekker, må du rengjøre dem med en gang. Ikke berør eller rengjør glassfilteret etter bruk, la det avkjøles.

Ikke skyll eller dypp enheten i vann eller annen væske. For å sikre maksimal ytelse, hold tilbehøret med de innebygde reflektorene fri for smuss, hår eller annet rusk. Ikke rengjør i vann, men bruk en tørr klut for å rengjøre dem forsiktig. Oppbevar enheten på et kjølig, tørt sted. Forsikre deg om at vinduet og hudsensorene er beskyttet mot skader.

## **Avhending**

Produktet inneholder resirkulerbart elektronisk avfall. For å beskytte miljøet må du ikke kaste det i husholdningsavfallet, men ta det med til lokale innsamlingssteder. Med forbehold om endringer uten varsel.

## **Hold deg oppdatert**

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre kunders opplevelse og tilby nyttig og relevant informasjon. For den mest oppdaterte informasjonen, sjekk brukerhåndboken som er tilgjengelig på nettstedet vårt. Skann QR-koden på forsiden av dette heftet for å bli tatt dit automatisk.

Hvis du har spørsmål, kan du sende oss  
en e-post på [hello@alvaskin.com](mailto:hello@alvaskin.com).

**Importert og markedsført av:**

Mado AS, Bjørumsvegen 15,  
4820 Froland, Norge.

alvaskin