

取扱説明書

LOMAYAフェイスローラー

LMB-M6



この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で返品交換を行うことをお約束するものです。保証期間内では大切に保管してください。

- ◆保証期間：お買い上げから12ヶ月
- ◆保証期間内に製品の初期不良、自然故障など、通常使用における不具合には保証対応させていただいております。
- ◆販売元のショッピングモール経由での返品交換は、状況によって、全額返金や新品交換ができない場合もあります。
- ◆下記窓口を通じて直接当社まで連絡していただければ、お客様のご期待に添えるように善処いたしますので、ご遠慮なくお問い合わせいただけたら、幸いに存じます。

- 商品発送の際、付属品が不足になった場合、販売店に連絡していただければ、再発送する対応ができます。
- 故障によりお買い上げの商品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
- 記録メディアを搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理、交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
- 本書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書はおお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

アフタサービスについてご不明な点がございましたら、下記お客様サポート受付窓口まで、御連絡ください。

お使いのスマートフォンや携帯電話を利用してQRコードを読み取り以下アドレス(URL)を開きます。



<http://www.lomaya.co.jp/pages/service>

※保証期間が過ぎても、生涯に渡り様々なサポートを提供しておりますので、お気軽に御用命ください。



安全上のご注意

- 使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

警告

■絶対に分解、修理、改造をおこなわない

- 異常動作によるけがの原因になります。

■次のような方は使用しない
事故や肌・身体トラブルのおそれがあります。

- 金属アレルギー体質の方
- 皮ふに知覚障害のある方
- 皮ふ感染症、皮ふ炎などの方

- 妊娠初期の不安定期の方、出産直後の方、または妊娠中で体調がすぐれない方（妊娠高血圧症候群の方など）
- 出血性疾患（血友病など）の方
- 体調がすぐれない方
- 紫斑になりやすい方
- 薬を服用中の方
- 飲酒している方
- 疲労の激しい方

■お子様や、取り扱いに慣れない方だけで使用させたり、手の届くところで使用しない、保管しない

- 誤使用により思わぬ事故やけがの原因になります。

■落としたり、踏んだり、強い衝撃を与えない

- 破損して、けがの原因になります。

■本体のすきまなどに、ピンなどの異物を入れない、刺さない

- 故障の原因になります。

■次のような部位には使用しない
事故や肌・身体トラブルのおそれがあります。

- 傷口や目、口などの粘膜部位
- はれもの、にきび、化膿性疾患のある部位
- 過度の日焼けなど、肌に異常のある部位
- 当日、脱毛処理をした部位
- 整形手術をした部位
- 背骨など、骨が出っばっている部位
- 金属・プラスチック・シリコンなどを埋め込んだ部位
- 指やのど、アキレス腱などの細い部位

■次のような方は、必ず医師にご相談のうえ、使用する

- アレルギー体質の方
- 敏感肌の方
- 骨粗しょう症など、骨に異常のある方
- 手術直後の方
- 医療用ステンレスやクリップを使用している方
- インプラントを使用している方
- その他医療機関で治療中の方

注意

■本品を本来の目的以外で使用しない、人間以外に使用しない

- 事故の原因になります。

■肌へ強く押しあてない、同じ場所にあて続けけない

- けがや肌を傷つける原因になります。

■本体を水に浸けたり、大量の水をかけたりしない

- 完全防水ではありませんので、長時間に浸水させると、ショートによる感電の原因と故障になります。


■乾燥肌、敏感肌の方は、必ず保湿を行ってから使用する

- けがや肌を傷つける原因になります。

■ソーラーパネルを強く押さえない

- 故障の原因になります。

各部のなまえ

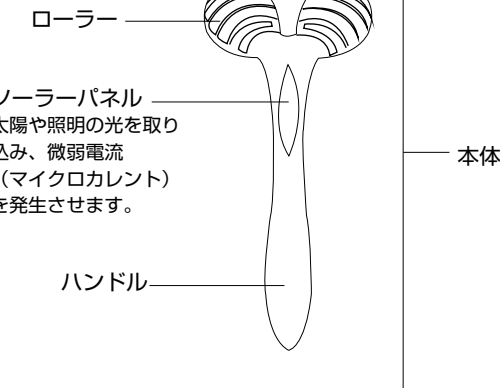

使いかた

■お使いになるまえに、お肌への影響をテストするお肌にニキビや吹出物で炎症を起こしていたり、異常がないか確認します。炎症や異常がある場合は使用しないでください。

■使用上のご注意

- 使い始めは弱い力で使用し、力の加減に注意して肌の様子を見ながら使用してください。無理な力を加えると、肌をいためたり、本品が破損したりする恐れがあります。※弱い力で使用しても、十分に体感が得られます。
- 使用中または使用後に赤み、はれ、かゆみなどの異常が生じる場合は使用を中止し、医師に相談してください。※心配な方は、お使いになるまえに、お肌への影響をテストしてください。


■使いかた

ハンドルを持ち、ローラーを肌にあて、転がす

- ※肌へ強く押しあてない、同じ場所にあて続けけない
- ローラーが肌を吸い上げる強さは、ハンドルを持つ角度で調整できます。


■ローラーを前に進める場合

- ハンドルを徐々に起こして、吸い上げの強さを確認してください。肌に痛みを感じたら、ハンドルを寝かせてください。

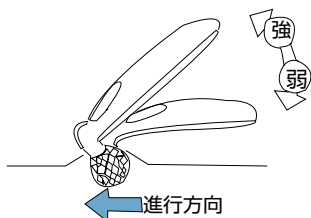

■ローラーを後ろに引く場合

- ハンドルを徐々に寝かせて、吸い上げの強さを確認してください。肌に痛みを感じたら、ハンドルを起こしてください。

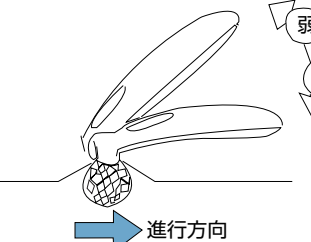

ローリング方法

顔や身体のラインに沿って、肌の柔らかい部分をつまみ上げるように、両方向を基本としてローリング。

■フェイスラインケア

- 口角から頬骨の下を通して耳横までローリング。




■フェイスケア

- 片方のローラーで頬を持ち上げるように、口角から鼻横まで上下にやさしくローリング。



■ネックケア

- 肩と首の付け根から頭に向かい、首筋に沿って上下にローリング。

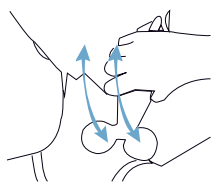


■二の腕ケア

- ひじから脇下に向かって、引き上げるようにローリング。




■バストケア

- 脇下を押しながら胸の中央に向かって、バストを引き寄せるようにローリング。

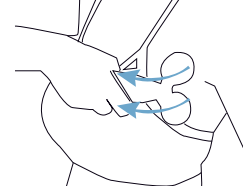

■ウエストケア

- 体側に沿って動かし、引き上げるようにローリング。

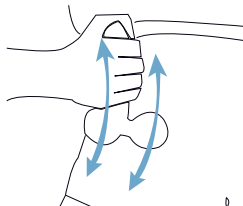

お手入れと保管のしかた

※ご注意

シンナー・ベンジンなどでは、拭かないでください。部品の変形や割れなど故障のおそれがあります。

■お手入れ

- 水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよくしぼって汚れをふき取ります。落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかいふきんで汚れをふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようきれいにふき取ります。
- 風通しの良い日陰で自然乾燥させます

■保管方法

- お手入れをしたあと、以下の場所に保管してください。
- 直射日光の当たらないところ
- 小さなお子様の手の届かないところ
- 湿度やほこりの少ないところ

よくあるご質問

Q. 顔以外に使用できますか？

A. お顔以外にもご使用いただけます。ただし、のど、粘膜部分、傷がある部分、お肌が炎症を起こしている部分には使用しないでください。

Q. メイクをしたまま使用できますか？

A. 素肌でもメイクの上からでもご使用いただけます。

Q. どのくらいの力、速さで動かせばいいですか？

A. 弱い力で使用しても十分な体感は得られますので、力はいれずにやさしく、ゆっくり動かしてください。強い力で激しく動かすと肌に負担をかけるおそれがあります。

Q. ソーラーパネルの役割は何ですか？

A. 太陽や照明の光を取り込むことにより、マイクロカレントを発生させています。

仕様	
品名	LOMAYAフェイスローラー
品番	LMB-M6
カラー	シルバー
外形寸法	155*73*35mm
防水等級	IPX7
質量	81g
主な材質	ABS樹脂、亜鉛合金、アクリル、ポリシリコン

※デザインおよび仕様については、予告なしに変更することがございます