

Lomaya

取扱説明書

レッグケア

LMH-L20



この度は弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

●読み終わった後もこの取扱説明書は大切に保管してください。

使用中に何かご不具合やご不明な点などがございましたら、いつでもでもお気軽にお問合わせてください。

service@lomaya.co.jp

目次

最初にご確認ください.....	P1
安全上の注意.....	P1~P6
各部の名称	P7
使い方.....	P8~P11
●充電方法.....	P8
●使用手順.....	P9
●リモコンの使い方.....	P10~P11
保管について.....	P11
故障かな!と思ったら.....	P11~P12
仕様.....	P12

最初にご確認ください

本商品を使用の前に、セット内容をご確認ください。万が一、梱包品に不足、また破損品があった場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。

セット内容

- | | |
|-----------------------|----|
| ①レッグケア本体(左右)..... | 1台 |
| ②USBケーブル(TYPE-C)..... | 2本 |
| ③取扱説明書(本書)..... | 1部 |

※欠品や破損があった場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。

安全上のご注意

- 使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 次の絵表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。






警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注 意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■ 次の絵表示の区分は、お守り頂く内容を説明しています。

	記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。

警 告

次の人は医師に相談してご使用ください。

- 悪性腫瘍のある人
- 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環傷害による知覚傷害のある人
- 皮膚に創傷のある人
- 安静を必要とする人
- 体温38℃以上(有熱期の人例)急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱している時
- 事故や体調不良の原因になります。
- 圧迫により一時的内出血が発生することがあります。
- 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼痛性)疾患の人
- かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人
- 体力の衰えた人
- 重度の血行傷害や血液疾患のある人
- 腱鞘炎の人

身体に異常を感じた時は、すぐに使用を中止してください。

- 医師に相談して指示に従ってください。

足首などふくらはぎの周辺にアクセサリや衣服の装飾など、硬い物を着けたまま使用しないでください。

- 事故やケガの原因になります。

子供に使用させないでください。また、本体の上に乗らせたり遊ばせたりしないでください。

- 事故やケガ、体調不良の原因になります。

自分で意思表示できない人や身体の不自由な人には、一人で使わせないでください。

- ケガや体調不良の原因になります。



ほかの治療器と同時に使用しないでください。

- 気分が悪くなったり、体調不良の原因になります。
- ケガの原因になります

ふくらはぎ以外に使用しないでください。

- 事故やケガの原因になります。

車の運転や機械の操作など、危険を伴う作業中に使用しないでください。

- 事故やケガの原因になります。

足のケア以外の目的に使用しないでください。

- 事故や故障の原因になります。
- ケガや体調不良の原因になります。

ストーブなど熱い物の近くや、電気毛布、コタツ、ふとんの中などで使用しないでください。

- やけどや火災の原因になります。

水回り・風呂場など湿気のある場所では絶対に
使用しない

火災・感電の原因になります。

本体を水につけたり、本体に水をかけない

火災・感電の原因になります。

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、重いもの
を載せたり、挟み込んだりしない

火災・感電の原因になります。

小さなお子供が手の届く場所に置かない

火災・感電・けがの原因になります。



お手入れに水道水以外は使用しない

火災・有毒ガスが発生する原因になります。

本体の隙間などにピンや針金などの異物を入れ
ない

火傷・感電・けがの原因になります。

故障や破損した状態で使用しない

火災・感電・けがの原因になります。

引火性のもの、可燃性のもののそばで使用しない
火災の原因になります。

油煙の舞う場所や近くで使用しない

火災の原因になります。

分解、修理、改造しないでください。

火災・感電・けがの原因となります。



注意

使用前に本体カバーの内側に異物が入っていないことを確認してください。

- 事故やケガの原因になります。



本商品が動かなくなったり異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、お客様サービスセンターへ修理の依頼をしてください。

- 加熱やショートなどによる事故、トラブル、故障につながる原因になります。

レッグケアは20分以上行わないでください。

- 筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果をまねくことがあります。



食後すぐのご使用は控えてください。

- 体調不良の原因になります。

使用中、眠らないでください。

- 事故やケガの原因になります。

酒に酔った状態で使用しないでください。

- 事故やケガの原因になります。

本体の上に立ったり、乗ったり、座ったりしないでください。

- ケガや、本商品が破損する原因になります。

本体を落としたり、強い衝撃をあたえないでください。

- 感電や火災、故障の原因になります。

濡れた状態の本体カバーを取り付けしないでください。


- 感電や火災の原因になります。



次のような場所で使用したり、保管したりしないでください。

- 直射日光が当たる場所
- 高温多湿の場所
- 水のかかる場所
- ほこりの多い場所
- 火気の近く
- 振動衝撃の加わりやすい場所
- 強電磁界下

各部のなまえ

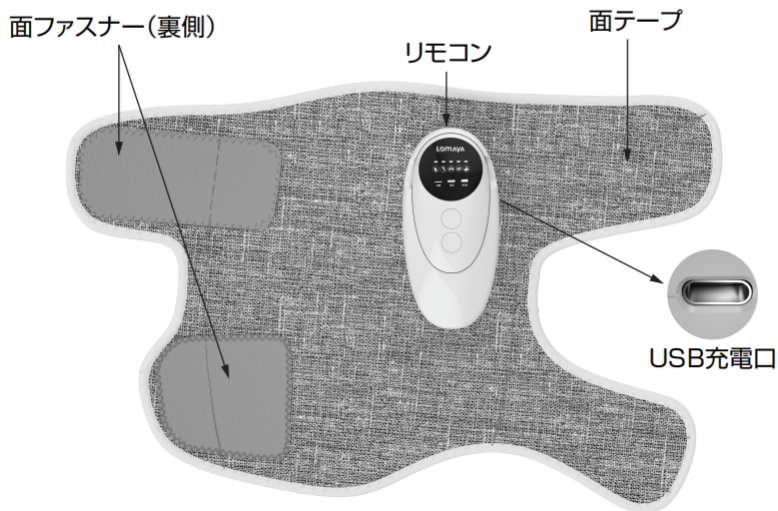


※内側の生地は抗菌処理済みとなっています。




使い方

充電方法

- USB ケーブルをパソコン、ACアダプターなどのUSBポートに接続する
- 充電中に本電池電量ランプが点滅します。

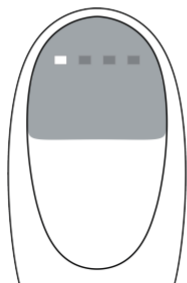

- 充電満了後、電池電量のランプが4格点灯します。

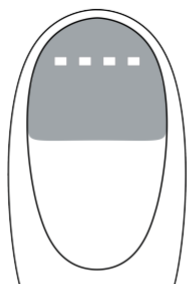

充電時間	2時間
使用時間	90分

※リモコンに使用されている電池はコイン型リチウム電池CR2032です。(別売り)


使用手順

①面ファスナーを外し、ふくらはぎに巻きつける。

- 装着時に、操作パネルが上面となるように巻いてください。
- ストッキングや靴下、ズボンなどの上から巻いてください。
※素足で使うと、足に使用跡がつく場合があります。
※ストッキングを覆って使う時は、面ファスナーがつかないように注意してください。


②面ファスナーがはがれないよう、手でしっかりと抑えて固定する。

- 巻きつけが弱いと使用感が良くない場合があるので、注意してください。
- 巻きつけの強さは、お好みに合わせて調整してください。

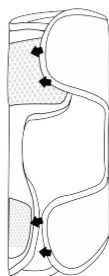


③リモコンの電源スイッチを「ビッ」と音がするまで長押し（約2秒）する。

- 運転を途中で止める時は、電源スイッチを再度長押し（約2秒）押ししてください。
- 電源をいれてから約20分後に自動で電源が切れます。

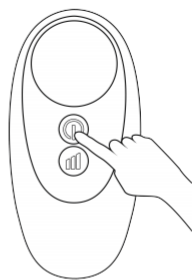

④操作が終わったら、面ファスナーをはがしてふくらはぎから取り外す。

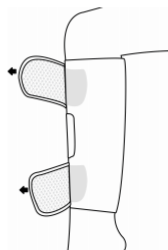

リモコンの使い方

本製品のリモコンを本体につけても、外しても使用可能です。



(付ける時)



(外しても利用可能)

本製品には強度モードが
5段階切り替えます。

- ①モード:お任せ
- ②モード:しぼり上げ
- ③モード:ソフト揉み
- ④モード:押す
- ⑤モード:刺激

強度モード



- 電源スイッチを2秒くらい長押しして強度モードが始まります。
- 電源スイッチを一回ごとに押すと、強度モードの切替ランプが点灯します。
 - ※強度モードを選択後、何も操作しない場合はランプが約20秒後に点滅します。(本体はまだ正常に運転します。)
 - ※最初に電源スイッチを入れて、強度モードランプと温感モードランプが同時点灯します。(温感モード変更しない場合に、ずっと低温になります)

温感モード

本製品には3段階温感モードが付きます。

LOW(38℃)

MID(40℃)

HIGH(42℃)



- 電源スイッチを入れて、強度モードランプと温感モードランプが同時点灯します。
 - 温感モードスイッチを一回ごとに押すと、温度をLOW--MID--HIGHに切り替えます。
- ※本体をファンヒーターなど熱いものの近くや、布団やコタツの中に入れて使用しないでください。

保管について

- 必ず電源スイッチを切れていることを確認し、高温・多湿・直射日光の当たる場所やほこりの多い場所を避けて保管してください。
- 小さな子供の手の届くところに置かないでください。

故障かなと思ったら

お買い上げの販売店または当社にご相談前に一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買い上げの販売店または当社までご連絡ください。

状態	考えられる原因	解決方法
運転時の音が気になる	構造上、音が出る ことがある	故障ではありませんので、そのままお使いください
突然停止してしまっ た	使い始めてから20 分以上経ち、自動 で電源が切れた	故障ではありません、 そのままお使いくだ さい
	本体の電池切れ	充電してください
動かない	本体の電池切れ	充電してください

製品仕様

品名	レッグケア
品番	LMH-L20
入力電源	5V
定格電力	6.5W
バッテリー	2500mAh
サイズ	570*360*2.8mm (片足)
材質	ABS+ポリエステル
重さ	約380g(片足)
付属品	レッグケア本体(左右)、USBケ ーブル(Type-C)×2、取扱説明書

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

12ヶ月保証と アフターサービス

よくお読みください

商品について、ご不明な点がございましたら、下記のカスタマーサービスまで、ご連絡ください。お使いのスマートフォンや携帯を利用してQRコードを読み取り、以下アドレス(URL)を開きます。



URL:

<http://www.lomaya.co.jp/pages/service>

カスタマーサービス

保障期間：お買い上げ日から 12ヶ月間

●保証期間内に、初期不良、自然故障など、通常使用における不具合には保証対応させていただいております。（消耗品は抜く）

販売元のショッピングモール経由での返品交換は、状況によって、全額返金や新品交換ができない場合もあります

●不具合などが発生した場合、当社までご連絡していただければ、お客様のご期待に添えるよう善処いたしますので、ご遠慮なくお問い合わせいた

- ・ 付属品などが欠品していた場合、販売店に連絡していただければ、再送いたします。
- ・ 本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねます。
- ・ 記録メディアを搭載または使用する製品の場合、故障または修理、交換により記録内容が消失などする場合がありますが、記録内容についての保証はいたしません。
- ・ 本書は日本国内においてのみ有効です。

This Warranty is valid only in Japan.

※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中自然故障、初期不良、通常使用における不具合が発生した場合には返品交換を行うことをお約束するものです。製品に故障及び不具合が発生した場合には、下記の内容を連絡してください。

品番	LMH-L20
保証期間	お買い上げ日から 本体 12ヶ月
※お買い上げ日	年 月 日
※販売店名	
※故障の状況	

※本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

〒 333-0843
埼玉県川口市前上町 5-31-1F
URL : www.lomaya.co.jp



LINE 公式アカウント