

LOMAYA

# 取扱説明書

IPL光脱毛器

ICE-SENSE



この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・ 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ・ 読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。



## 目次

最初にご確認ください	P.1
安全上のご注意	P.1
使用上のご注意	P.6
各部のなまえ	P.9
LCDディスプレイ表示の説明	P.10
基本的な操作説明	P.11
お使いになる前に	P.13
製品の使いかた	P.20
故障かな?と思ったら	P.32
製品仕様	P.39
保証とアフターサービス	P.41



## 最初にご確認ください

本商品を使用する前に、セット内容をご確認ください。万一、梱包品に不足、または破損品があった場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

IPL光脱毛器(本体).....	1台
電源アダプタ.....	1個
サングラス.....	1個
アタッチメント.....	2個
カミソリ.....	1個
取扱説明書兼保証書(本紙) .....	1部

※部品の欠品や破損があった場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

## 安全上のご注意

- 使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 次の絵表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。



## 警告


この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。





## 注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

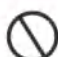■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明していません。

 禁止（してはいけないこと）を示す記号です。

 分解してはいけないことを示す記号です。

 指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。

## 警告

この製品の電源を入れる前に、電源アダプタに表示されている電圧がご使用になる地域の電圧に適しているか確認してください。



電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。

万一、異常が発生したら電源アダプタをすぐに抜く。動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。



お肌に異常が生じていないかよく注意して使用する。お肌にあわない場合は使用を中止してください。



本体および電源アダプタは改造しない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしないでください。火災、感電、ケガの原因となります。



取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。ケガをしたり、本製品が故障する原因となります。

電源アダプタが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しない。感電・ショート・発火の原因になります。

電源アダプタを傷付けたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

本体・電源アダプタを水につけたり、水をかけたりしない。故障や、ショート・感電の原因になります。

濡れた手で抜き差ししない。感電やケガをすることがあります。

乳幼児の手の届くところにこの製品を置かないでください。

お子様がこの製品で遊ばないように管理してください。

光をのぞきこんだり、人に向けたりしないでください。目を傷める原因となります。

暗い部屋で使用しない。目を傷める原因となります。

ファンが作動しない(「ブーン」と音がしない)ときは使用しない。そのまま使用すると発煙発火・故障・ケガの原因となります。

通風孔をふさいだまま使用しない。発煙・発火の原因となります。



製品に異物を挿入しないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。

フラッシュ使用直後にフィルター(ガラス板)に触れない。使用直後のフィルターは高温になるため、指でフィルターに触れると、やけどの原因となります。

過剰な連続使用はしない。ケガ・発熱・ガラス管の割れなどの原因となります。

引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しない。火災・感電・ケガの原因となります。





自分で意思表示ができない人（幼児を含む）に使用させないでください。また、おからだの不自由な人だけでは使用しないでください。事故やケガの原因になります。



## 注意



電源アダプタの電源プラグを抜くときは、電源コード部を持たずに必ず先端の電源プラグ部を持って引き抜く。感電やショートして発火することがあります。

使用時以外は、電源アダプタをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。



使用前に照射口の割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は、使用しない。お肌の傷などのトラブルや、症状悪化の原因となります。

この製品が破損または故障した場合は、使用しないでください。ケガの原因になります。

製品本体に強いショックを与えたり、落としたり、激しく振ったりしないでください。

## 使用上のご注意

- この製品は顔(鼻下、あご、もみあげ)、ワキの下、腕、腹部、ビキニエリア、VIOゾーン、脚の除毛後のお手入れをするためのものです。それ以外の目的で使用しないでください。
- この製品を浴室、シャワー室のような湿気の多い場所では使用しないでください。
- この製品の使用は室温5℃～40℃、相対湿度≤75%の環境下で行ってください。
- 必ず交流100～240Vで使用してください。
- 同じ箇所に1日に2回以上使用しないでください。
- 通風孔をふさがないでください。本体が過熱して故障の原因になります。
- 日焼けをしてから約2週間はこの製品を使用しないでください。詳しくはP.13「日焼けについて」の項をお読みください。
- 肌以外のものに向けて光を照射しないでください。故障の原因になります。
- ご自身の肌タイプに合った出力レベル設定でお使いください。それよりも高い出力レベル設定でご使用になると、肌トラブルのリスクが高まります。
- 暗いところでは使用しないでください。目に一時的な刺激を感じる場合があります。
- 15歳未満の方はご使用いただけません。15～18歳の方は保護者同意の上、保護者監視のもとでお使いください。





下記に該当する箇所には、この製品を使用しないでください

- 頭部、髪、うなじ、喉仏、額、眉、目や目の周り、耳、唇、口内、乳首、乳輪、へそ内部、粘膜
- シリコン注入物、ペースメーカー、皮下埋め込み式カテーテル（ポート）、ピアス、ボディピアス
- いぼ、ほくろ、そばかす、大静脈、しみ、濃い色素斑の見える箇所、傷跡、皮膚に異常の見える箇所
- 刺青（タトゥー）、ボディペイント、アートメイクのある箇所
- 長時間効果が持続する制汗剤を使用している箇所



下記に該当する方は、この製品を使用しないでください

- 妊娠中、授乳中の方
- お手入れ箇所の肌色・毛の色が適さない方  
・ 生来の毛の色が、明るい金色、白色、灰色、赤色の方  
・ 肌タイプV（肌タイプ5）またはVI（肌タイプ6）と診断されたことがある方、または元の肌の色が濃い褐色・黒に近い色の方
- 現在医師の治療を受けている方
- 皮膚がんまたはお手入れしようとする範囲に何らかのがん疾患がある方

- お手入れしようとする範囲にがんの兆候または異常なホクロがある方
- 心臓に疾患のある方
- お手入れしようとする範囲に下肢静脈瘤、血管拡張症などの血管病の既往歴がある方
- 光に対して過度に敏感または発赤しやすい方、アレルギー反応のある方
- お手入れしようとする範囲に皮膚感染、アトピー、やけど、毛根の炎症、裂傷、ヘルペスなど皮膚疾患のある方
- お手入れしようとする範囲を過去3週間以内に手術した方
- 出血障害のある方
- 皮膚のケロイド症状、創傷治癒欠損などの膠原病の既往歴がある方
- 糖尿病、紅斑性狼瘡、ポルフィリン症、うっ血性心臓病などの疾患がある方
- HIV（ヒト免疫不全ウイルス）感染者、またはAIDS（後天性免疫不全症候群）既往の方
- ヒアルロン酸、ベータヒアルロン酸、イソトレチノイン、アゼライン酸で皮膚を治療中の方
- イソトレチノインを使用したにきび・酒さなどの治療を過去6カ月以内に受けた方
- 鎮痛剤の服用をしている方
- 感光性を強める性質のある薬を使用している方

- 抗凝血剤を使用している方やアスピリンを多用する方
- 免疫抑制剤を使用している方

※ご自分がこの製品の使用に適するかどうか不明な場合、また、使用中に異常を感じた場合は、皮膚科医にご相談ください。



## 各部のなまえ



### 本体

- 1.UVフィルター付き照射ウィンドウ 2.冷却プレート  
 3.肌色センサー/タッチセンサー 4.通風孔（吸気孔）  
 5.通風孔（排気口） 6.LCDディスプレイ 7.電源ボタン  
 8.モードボタン 9.指示ランプ 10.角度調節部  
 11.照射ボタン 12.グリップ部 13.電源コネクタ受部

## アタッチメント

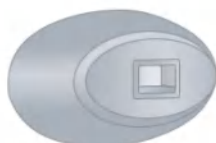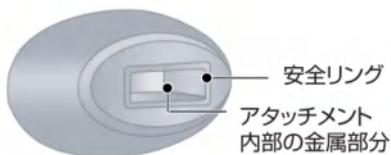

サングラス



カミソリ



## 電源アダプタ



## LCDディスプレイ表示の説明



# 基本的な操作説明

## ● 電源のON/OFFについて

### 電源をONにする

・電源アダプタを本体とコンセントに接続すると、READYランプが一回青く点滅し、スタンバイ完了です。電源ボタンを（約2s）長押しすると、電源をオンにします。

### 電源をOFFにする

・電源ボタンを（約2s）長押しすると、ディスプレイに30秒のカウントダウンが表示されます。その間冷却ファンは正常に作動し、本体を放熱します。カウントダウンが終わったら、機器は完全に閉じます。

・電源を入れたまま未使用状態が5分間継続すると、電源が自動的に切れます。


※使用しない時は、電源アダプタをコンセントから抜いてください。

## ● 照射機能とレベルを選ぶ

モードとレベルを選ぶ前に、一度肌色センサーでお肌の色を読み取り、お肌に適切なレベルに自動調整してから、照射モードとレベルを変更できます。

### 照射レベルを選ぶ

電源ボタンを押すごとに照射レベルを変更できます。  
（照射レベルを9段階に設定できます）

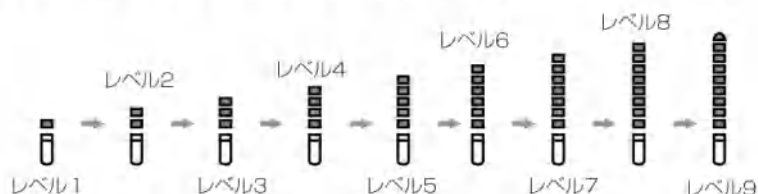

※使い始めは必ずレベル1から使用してください。

## 照射機能を選ぶ

モードボタンを押すごとに照射機能を変更できます。  
(HR、SC、RAの3つの機能を選べます)

HR	脱毛
SC	スキンケア
RA	美肌

## ● 冷却機能のON/OFFについて

モードボタンを（約2s）長押しごとに冷却機能のON/OFFを切り替えます。


### 冷却機能をONにする

脱毛器が起動すると、冷却機能もオンにします。

### 冷却機能をOFFにする

起動状態で、モードボタンを（約2s）長押しと、冷却機能もオフにします。

※使用中は、冷却機能をオンにすることをおすすめします。冷却機能を持ち、低刺激なので、痛みを感じない。また、お肌を冷やすことで美肌効果も期待できます。

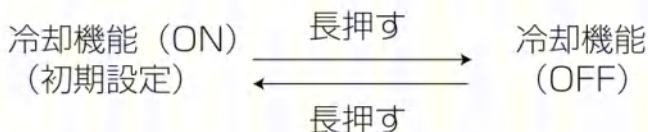



## ● 照射する

照射口全体と肌色センサー/タッチセンサーをお肌にしっかりと当てて、指示ランプが青色に点灯してから照射ができます。照射モードは次の2種類から選べます。


### 手動モード（1回ずつ照射する基本モード）

起動時初期設定は手動モードです。照射ボタンを1回押すと、1回照射します。

### 自動モード（連射モード）

照射ボタンを（約2s）長押しすると、自動モードになり、光が一定間隔で自動的に照射し続けます。

※同じ箇所に続けて光を照射しないようご注意ください。

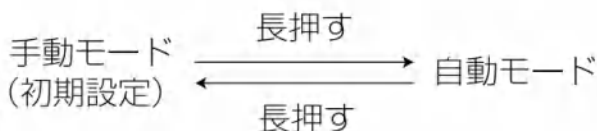

## お使いになる前に

お使いになる前に、以下の内容を必ず確認してください。

## ● 日焼けについて

### 製品を使用する前に日焼けをした場合

日焼けをした後は、最低2週間あけてから製品を使用してください。製品を使用する前に、お手入れする箇所にはスキンテストをし、日焼けした後の肌色に合わせて適切な出

カレベルに調節してください。

※短時間、間接的に日光を浴びた程度の場合は、製品をご使用いただくことができます。

## お手入れ後の日焼け

お手入れ後、48時間は日焼けをしないようにしてください。また、外出する際はお手入れした部位にSPF50以上の日焼け止めを塗り、お手入れした箇所が紫外線に当たることを避けてください。48時間経った後でも赤みなどが見られる場合は紫外線を避けてください。その後も約2週間程度はSPF30以上の日焼け止めを塗り、肌を保護してください。

※SPFとはSun Protection Factor（サン プロテクション ファクター）の略で紫外線防御指数とも言います。日焼け止め乳液などに表記されている、紫外線の防止効果を表す指標です。

## クリームによる日焼け

タンニング（日焼け）を促進するクリームなどを使うといった人工的なタンニングをした場合は、その日焼けが引くまで待ってからこの製品をお使いください。また、上記「製品を使用する前に日焼けをした場合」、「お手入れ後の日焼け」の手順に従ってください。

### ● お手入れ箇所の準備

お手入れの前に、お手入れする箇所の毛を剃ってください。肌を清潔にし、剃り残しの毛がないこと、水や油分が付着していないことを確認してください。





## 注 意

※事前に体毛を剃らなかつたり、剃り方が不十分だったりすると肌トラブルが生じるおそれがあります。また、汚れや体毛が製品内にたまります。

※毛抜き、ワックスなどで脱毛した場合、毛が再び生えてくるまではこの製品を使用しないでください。毛が伸びてきたら、脱毛クリームなどは使わずに毛を剃ってください。毛を適切に剃らずにこの製品を使用すると、本来の効果が得られません。

※毛を剃った際に切り傷などができた場合、傷が治るまでその箇所はお手入れしないでください。

※毛を剃った際に皮膚の炎症を起こした場合、炎症が治まるまでその箇所はお手入れしないでください。

### 出力レベルの設定






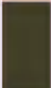
1. 本製品は肌色センサーを搭載しています。起動後、本製品を肌に当てます。肌の色を読み取ります。読み取りが完了すると、推奨する出力レベルを自動的に設定します。  
(※本製品を初めてご使用になる場合、スキンテストの結果を参考に、適切なレベルを設定してください。)

※肌の色が本製品の使用に適さない場合は、指示ランプが点灯しない、照射ボタンを押しても光を照射できません。

2. 手動で設定する場合は下記「肌色チャート」をお読みいただき、出力レベルをご自身の肌や体毛の色に適した高さ、またご自身が快適に感じる（痛みを感じない）レベルに設定してください。
3. 体の部位によっては出力レベルを変える必要があります。ご自分に合った無理のない出力レベルでご使用ください。光を照射し、温かさや少し熱さを感じる程度であれば問題ありませんが、痛みを感じるような出力レベルでは使

用しないでください。肌の色が濃い方は、肌が光を吸収しやすい性質のため、無理な出力レベルで使用すると肌トラブルのリスクが高くなります。そのため、低い出力レベルでのご使用をおすすめしています。

## 肌色チャート（推奨出力レベル）

肌色と特徴	体毛の色	濃い金色／茶色／ 濃い茶色／黒色	白色／灰色／赤色 ／ 明るい金色
ホワイト (きわめて明るい肌色) 日光浴をすると肌が赤くなるが日焼けが残らない			×
ベージュ (明るい肌色) 日光で比較的肌が赤く反応しやすく、日焼けはわずかしかない			×
ライト ブラウン (標準的な肌色) 日光でまれに赤くなることがあるが、すぐ落ちて肌色が濃くなる			×
マイルド ブラウン (小麦色) 日光にあたってても皮膚が赤くならず、すぐに肌色が濃くなる			×
ダーク ブラウン (褐色) 日光にあたってても皮膚が赤くならず、よく日焼けする・肌色が濃くなる		×	×
黒色に近いブラウン 非常に日焼けしやすい		×	×

- 「肌色チャート」の×印に当てはまる場合は、この製品の使用に適しません。肌の状態は、環境などにより普段と異なる反応を示すことがあります。

## ご注意

- ご自身がこの製品の使用に適しているかどうか判断するため、**P.7「下記に該当する方は、この製品を使用しないでください」**をお読みください。特に自然光や人工的な方法で日焼け・タンニングを行った方は、肌色が前回のお手入れの時よりも濃くなっている可能性があります。上記「肌色チャート」をお読みいただき、適切な出力レベルに設定してからご使用ください。
- 例外として使用できない箇所については、**P.7「下記に該当する箇所には、この製品を使用しないでください」**の項をお読みください。
- お手入れの際、ひどく痛みが生じる場合は、痛みを感じないレベルまで出力レベルを下げてください。赤みや肌トラブルがひどくなった場合には、お手入れをすぐに中止し、**P.28「肌トラブルについて」**の項をお読みください。
- 他の部位へ移動した場合、あるいは、最近日に焼けた箇所に移動した場合は、適切な出力レベルを選択するために、スキンテストを行ってください。
- お手入れする箇所により肌の色は異なります。それぞれの箇所に応じた出力レベルを設定してください。
- 本製品を使用しても通常は痛みを感じることはありません。痛みなどの不快感がある場合は、出力レベルを下げてください。
- 照射ウィンドウ、アタッチメントに異常がないことを確認してください**

破損や変形があるときは使用しないでください。  
汚れている場合は必ずお手入れをしてください。

※故障・劣化・やけど・けが・肌トラブルの原因となります



## ● 使用環境の明るさについて

光のまぶしさをやわらげるため、明るい室内でご使用ください。

※暗い部屋で使用しない。目を傷める原因となります。

## ● 適切なアタッチメントを選ぶ

安心して効果的なお手入れをするために、お手入れする体の箇所に合わせてアタッチメントを選んでください。

※暗い部屋で使用しない。目を傷める原因となります。

### 【取り付け方】



**アタッチメントは正しい向きでなければ本体に装着できません。**

アタッチメントを取り付けるときはアタッチメントの向きを確認し、本体照射口の上からかぶせるようにして装着します。マグネット式なので、かぶせるだけで装着できます。




### 【取り外し方】

アタッチメントを取り外すときは、アタッチメントの両側を持って手前に引っ張ります。

※照射ウィンドウとアタッチメントの間に異物が入り込まないようにしてください。

## ● 本体の4cm<sup>2</sup>の照射口

体の首より下の部位で広い範囲をケアするためのアタッチメントです。照射範囲が4cm<sup>2</sup>と広いので、面積の広い部位のお手入れに適しています。

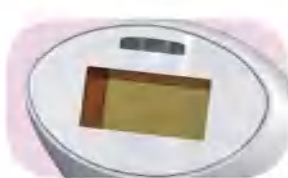



## おすすめ使用部位



ウデ



アシ

### ● 2cmの照射口のアタッチメント

脚や手の狭い範囲のお手入れに適したアタッチメントです。



## おすすめ使用部位



ワキ



ビキニライン

### ● 1cmの照射口のアタッチメント

体の特に敏感な部分をケアするためのアタッチメントです。頬骨よりも下の顔の部分（鼻下、あご、もみあげ）などを精確にお手入れに適しています。



## おすすめ使用部位



指



フェイス  
(ほお)



フェイス（口まわり）  
※唇には使用できません。

Vライン



Iライン



Oライン



※粘膜には使用できません

うしろ側

## 使用禁止部位

ケアする際は、以下の部位に使用しないでください。

※目の周り、眉毛の周りには使用しないでください。



## 製品の使いかた

この製品をご使用になる前に必ず、P.13「お使いになる前に」の項をお読みください。

### ● 初回使用時のスキントテストの仕方

本製品を初めてご使用になる場合、または日焼けをした後にご使用になる場合は、ご使用前にスキントテストを行い、肌の状態を確認してください。

#### 1. 照射テストする箇所を選びます。

※お手入れしたい部分に適したアタッチメントを選んでください。P.18「適切なアタッチメントを選ぶ」の項をお読みください。

※お手入れしたい箇所に近い部分の肌を選んでください。製品が扱いにくい部分や肌が敏感な箇所（膝や骨のある箇所）では、スキントテストを行わないでください。

※「肌色チャート」については、P.15「出力レベルの設定」の項をお読みください。

2. 電源ボタンを長押しして、電源をONにします。
3. 出力レベルが1に設定されていることを確認します（P.15「出力レベルの設定」の項をお読みください）。
4. 製品を肌に直角になるように当てます。こうすることでタッチセンサーが肌に接触します。指示ランプが青色に点灯すると、照射できます。

※タッチセンサーは、製品が肌に接触していない場合に、意図しない照射を防ぐためのものです。タッチセンサーが肌に正しく接触すると、指示ランプが青色に点灯します。

5. 照射ボタンを1度押しして、光を照射します。
6. 次の箇所に製品をすべらせて移動します。出力レベルを1レベル上げ、照射ボタンを押します。
7. 再び次の箇所に製品をすべらせて移動させ、照射ボタンを押します。5～7の操作を繰り返し、ご自分が快適に感じられる（痛みなどを感じない）範囲内でレベル1から順にご自分の肌のP.16「肌色チャート」に記載の出力レベルまで行います。
8. スキンテストが終了したら、電源ボタンを長押しして、電源をOFFにします。
9. スキンテスト後に24時間待ってから、肌の状態を確認します。皮膚に異常（赤み・痛み・水疱・肌の色の变化など）が見られなければは使用が可能です。異常が起きなかった出力レベルを選んで今後のお手入れを行ってください。

※前回お手入れしたときから、日焼けなどで肌の色が変わった場合は、スキンテストを行ってください。スキンテスト後は、30分程度待ってからお手入れを行ってください。



## 注意

皮膚に異常（赤み・痛み・水疱・肌の色の变化など）が起きた場合やテスト照射の結果について不確かな点がある場合は、本製品のご使用を中止し、お客様サポートセンターまたは医師にご相談ください。

### ● 2回目以降の使用方法

**本製品は充電式ではないため、電源アダプタをつないだままお使いください。**

※ご使用後は都度コンセントから抜いてください。

1. ご使用前には毎回必ずUVフィルター付き照射口とアタッチメント内部の金属部分を清潔にしてください。詳しい清掃のしかたはP.30「製品のメンテナンス方法」の項をお読みください。
2. お手入れ箇所に適したアタッチメントを選びます。
3. 電源アダプタの電源コネクタ部を本体の電源コネクタ受部に差し込み、電源アダプタの電源プラグ部をコンセントに差し込みます。
4. 電源ボタンを（約2s）長押しして、電源をONにします。  
※使用中に製品が温かくなったり、ファンの音がしたりしますが、故障や異常ではありません。
5. 付属のサングラスを着用します。
6. 自分に使いたい照射機能を選びます。  
（モードボタンを押すごとに照射機能を変更できます。）  
※HR脱毛、SCスキンケア、RA美肌の3つのモードを選べます。
7. 肌色チャートとスキンテストの結果を参考に、ご自分に適した出力レベルを選び、肌の状態や反応のしかたを注意深く見ながら使用してください。

8. 製品の照射口を肌に直角になるように当て、指示ランプが青色に点灯したら、お手入れを開始できます。

※肌が特にやわらかい部位には、「安全リング」がしっかりと当たるように、製品を押し当てます。



### 【READYランプについて】

本体の背部にある指示ランプが青色に点灯すると、製品の照射口が肌にきちんと当たっており、光を照射する準備が整ったサインです。

※タッチセンサーは製品が肌に接触していない場合に、意図しない照射を防ぐためのものです。「タッチセンサー」がきちんと肌に当たらないと指示ランプは点灯しません。



### 【グリップ部を角度を調節可能】

お手入れする体の箇所に合わせて、角度を調節します。

※グリップ部は上下に30°までの角度を調節可能です。

9. 照射ボタンを押して光を照射します。照射された箇所は照射により温かく感じられます。照射のしかたは次の2種類から選べます。

※照射すると、LCDディスプレイに今回使用した照射回数が表示されます。

## 【手動モード】

照射口を肌に当て、照射ボタンを1度押します。1箇所に照射したら、次の箇所に移動させ、再び照射ボタンを押します。

**お手入れ箇所：ひざ、足首などの部位を正確にお手入れ**

## 【自動モード】

照射ボタンを（約2s）長押しすると、自動モードになります。照射口が肌に直角に当たっている状態で、光が一定間隔で自動的に照射され続けます。1箇所に照射したら、次の箇所へとすべらせて移動させます。※自動モードで100回連続照射をすると、自動モードから自動的に手動モードに切り替えられます。自動モードをもう一度使いたい場合、照射ボタンを長押しすると自動モードに戻ります。

## 【ご注意】


※同じ箇所に何度も照射しないでください。照射レンズは照射のたびに、必ず前回の位置と一部重なっている新しい場所に移動します。同じ箇所に何度も照射すると不快感や皮膚の温度上昇が発生し、皮膚を傷つけることがあります。

※鉛筆やペンで照射する箇所に印をつけないでください。肌トラブルの危険性が高まります。

## 【照射範囲】

お手入れしたい箇所に照射できていない箇所がないようにしてください。

※UVフィルター付き照射ウィンドウの「安全リング」が当たっている部分は、光が照射されません。

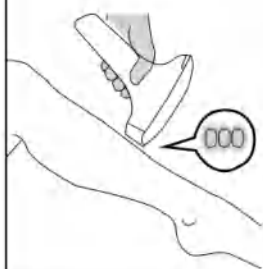

- UVフィルター付き照射ウィンドウの「安全リング」が当たる範囲
- 光が照射される範囲（UVフィルター付き照射ウィンドウの面積）



10. お手入れが完了したら、電源ボタンを（約2s）長押しして電源をOFFにします。

### 【30秒放熱機能】

電源ボタンを長押しすると、ディスプレイに30秒のカウントダウンが表示されます。その間冷却ファンは正常に作動し、本体を放熱します。カウントダウンが終わったら、機器は完全に閉じます。

※機械が完全に閉まったら、電源アダプターをコンセントから抜いてください。

### 【自動電源オフ機能】

※本体の過度な温度上昇を防ぐため、電源を入れたまま未使用状態が5分間継続すると、電源が自動的にオフにします。

※使用しない時は、電源アダプタをコンセントから抜いてください。

11. アタッチメントやUVフィルター付き照射ウィンドウがほこりや毛などで汚れていないことを確認します。



注意

使用直後はアタッチメントやUVフィルター付き照射ウィンドウの発光面に触らないでください。やけどのおそれがあります。

## お手入れ後のケア

お手入れ後にほてりやかゆみを感じる場合、保冷剤や濡れタオルなどで肌を冷やしてください。また、肌の乾燥を感じる場合は保湿剤などで肌を保湿してください。

※刺激性のある化粧品は避けてください。

## お手入れのためのガイドライン

定期的にお手入れすることでなめらかな肌を維持する効果があります。

### 手入れの平均的な所要時間

部位	平均的な 所要時間	推奨アタッチメント
鼻下／あご ／もみあげ	約1分	1 cm <sup>2</sup> の照射口のアタッチメント
片方のワキ の下	約1分	1 cm <sup>2</sup> の照射口のアタッチメント 2 cm <sup>2</sup> の照射口のアタッチメント
ビキニライ ン片側	約1分	1 cm <sup>2</sup> の照射口のアタッチメント 2 cm <sup>2</sup> の照射口のアタッチメント
ビキニエリ ア全体	約4分	1 cm <sup>2</sup> の照射口のアタッチメント 2 cm <sup>2</sup> の照射口のアタッチメント
片方の ひざ下	約8分	本体の4 cm <sup>2</sup> の照射口 2 cm <sup>2</sup> の照射口のアタッチメント 1 cm <sup>2</sup> の照射口のアタッチメント
片脚全体	約14分	本体の4 cm <sup>2</sup> の照射口 2 cm <sup>2</sup> の照射口のアタッチメント 1 cm <sup>2</sup> の照射口のアタッチメント

※上記の平均的な所要時間は自社実施のテストにより計算された時間です。実際の処理時間には個人差があります。



## 注意

- 目や目のまわりには絶対に使用しないでください。
- 頭部、髪、うなじ、喉仏、額、眉、耳、唇、口内、乳首、乳輪、へそ内部、粘膜には使用できません。
- その他の例外として使用できない箇所についてはP.7「下記に該当する箇所には、この製品を使用しないでください」の項をお読みください。

### お手入れの頻度

#### ● 最初の1ヶ月【初期（1週間に1～2回）】

最初の1ヶ月のお手入れは、1週間に1~2回のお手入れをお勧めします。

#### ● 2ヶ月目【お手入れ（2週間に1回）】

最初の1ヶ月のお手入れのあとは、2週間に1回のお手入れをお勧めします。

#### ● 3ヶ月目以降【お手入れ（2～4週間に1回）】

3ヶ月目以降、お手入れ後の状態を維持するためのお手入れになります。2~4週間に1回のお手入れをお勧めします。毛の成長度合いやお手入れした箇所などによるため、最適なお手入れの間隔は人により異なります。

※お手入れした箇所を別の脱毛方法（ワックス脱毛など）に変更した場合は、本来のお手入れ効果を得られないことがあります。

※本製品でのお手入れ期間中に更に脱毛したい場合は、他の一般的な脱毛処理を行ってください。



## 注意

本製品を1週間に2回以上は使用しないでください。過度にお手入れをしても効果は変わらず、肌トラブルの危険性が高まります。

※お手入れる時、同じ部分に1日2回以上、フラッシュを照射しないでください。

※お手入れのスケジュールを忘れないように、日程表などにメモしておくことをお勧めします。

※お手入れの回数を増やしても、お手入れ効果を早めることはできません。

※過剰な連続使用はしない。10分使用した場合は10分以上休める。けが・発熱・ガラス管の割れなどの原因となります。

※お肌がフィルター(発光面)に接触しないようご注意ください。動作中はフィルター(発光面)が非常に高温になります。やけどのおそれがあるため、お肌がフィルター(発光面)に接触しないようご注意ください。

・お肌が柔らかい箇所、脂肪が多い箇所には強く押し付けしないでください。

・ひじ、ひざ等、丸みを帯びている部位への使用は、十分にご注意ください。

※効果は使用する部位や個人によって異なります。

### 肌トラブルについて

●わずかな赤みが出たり、ちくちく、ひりひりしたり、または多少熱く感じるといったことがあります。通常はすぐにこれらの症状は消えて感じなくなります。

●やけどのような状態が少しの間あらわれることもありま

す。3日以内にこの症状がおさまらない場合は、皮膚科医の診察を受けてください。

●肌が乾燥したり、かゆみが出たりすることがありますが、これらの症状は除毛によるものと、光によるものとの組み合わせと考えられます。通常は数日でおさまりますが、かゆみに対しては肌を保冷剤や濡れタオルなどで冷やしてください。肌の乾燥が続く場合は保湿剤などで肌を保湿するなどしてください。

※まれに起こる皮膚トラブル、やけど、皮膚の強い赤み、皮膚の腫れは、ご自身の肌色に対して光の強さが強すぎる場合にまれに起こることがあります。もしもこれらの症状が3日以内に消えない場合は、皮膚科医の診察を受けてください。再び使用する場合は、完全に皮膚が健康な状態に戻ってから、弱い光で使い始めてください。

**皮膚の変色：**色素沈着（肌の色が濃くなる）または色素脱色（肌の色が薄くなる）は、ご自身の肌色に対して光の強さが強すぎる場合にまれに起こることがあります。これらの症状があらわれた場合は、皮膚科医の診察を受けてください。

**皮膚感染および炎症：**除毛の際などにできた傷のある箇所、元々傷があった箇所、埋没毛にこの製品を使用したことが原因で起こる可能性があります。

※極度の痛み：お手入れ前に除毛をせずにこの製品を使用すると、強い痛みが生じる場合があります。また、ご自分の肌に適した出力レベルよりも高い設定でご使用になったり、同じ箇所に2回以上照射したり、傷や炎症、感染症、タトゥー（刺青）、やけどなどのある箇所に使用しても、強い痛みが生じる場合があります。より詳しい情報については、P.7「下記に該当する箇所には、この製品を使用しないでください」および「下記に該当する方は、この製品を使用しないでください」の項をお読みください。



## お手入れ後の注意

- お手入れ直後の箇所に、香水や化粧品を塗布しないでください。
- ワキの下のお手入れをした直後に制汗剤を使用しないでください。赤みが完全に引くまで使用をお控えください。
- 紫外線に当たる際の注意事項、また人工的な日焼けについては、P.13「日焼けについて」の項をお読みください。

## 製品のメンテナンス方法

**製品の性能を最適に保つため、毎回ご使用になる前と後に必ず製品の清掃を行い、必要に応じてお手入れの最中にも清掃を行ってください。**

### 本体のお掃除

清潔な乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスポンジや布で拭き取ってください。

※アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

1. 清潔な乾いた布でアタッチメントや照射ウィンドウの表面の汚れを拭き取ってください。

※アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。



2. 綿棒や柔らかい布でアタッチメントや照射ウィンドウの金属部分とフィルター部分に付いた汚れや、毛くずを取り除いてください。

※指紋などの汚れも拭き取り、きれいに保ってください。フィルターが焦げたり、フラッシュの性能低下、故障、肌トラブルの原因となります。



## 注意

- お掃除する際は必ず電源をオフにし、電源アダプターを本体と壁面コンセントから抜いてください。感電・ショート・発火の原因となります。
- UVフィルター付き照射ウィンドウおよびアタッチメントは使用中熱くなります。清掃を行う前に必ず冷ましてください。
- 本体内部に水が入らないようにお掃除する。感電・ショート・発火の原因となります。
- UVフィルター付き照射ウィンドウやその内部の金属部分に、傷をつけないでください。
- この製品は、使用の都度、掃除をしてください。

## 保管について

- 包装ケースやポーチなどに入れてほこりがつきにくい場所で保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体やアタッチメントのお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、電源アダプターを壁面コンセントから抜いて保管してください。

- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所でのご使用および保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

## 製品を廃棄するとき

本製品を廃棄するときは、各自治体の処理方法に従い廃棄してください。

## 故障かな?と思ったら

製品使用中、故障が発生する場合、一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買い上げの販売店に対応を依頼してください。

## 電源ボタンを押しても作動しない

▶電源アダプタの電源プラグ部はコンセントにきちんと差し込まれていますか？

本体の電源コネクタ受部に電源アダプタの電源コネクタ部がきちんと差し込まれているか確認してください。

## 電源をONにしたが、照射機能とレベルを変更できない

▶照射機能とレベルを選び前に、一度肌色センサーがお肌の色を読み取り、お肌に適切なレベルに自動調整したから、照射機能とレベルを変更できます。

▶製品の電源をいったん切り、再度電源を入れてリセットしてください。

アタッチメントを肌に当てても、指示ランプが点灯しない

▶アタッチメントの「安全リング」がしっかりと肌に当たっていますか？

製品を肌に直角になるように当て、「安全センサー」がすべてしっかりと肌に接触していることを確かめてください。指示ランプが点灯したら、照射できます。

上記の方法でうまくいかない場合、例えばひじから下などの肌にぴったりと製品を当てやすい箇所で同じ動作を行い確認します。

▶「安全リング」が汚れていませんか？

「安全リング」をきれいに清掃してください。

▶オーバーヒートプロテクション機能が起動しています。

製品使用中、フラッシュがまぶしい

▶製品使用中、照射口がお肌から浮いていませんか？

照射口をお肌にしっかり密着させてください。  
付属のサングラスを着用してから使用してください。

使用中に「ブーン」と音がする

▶冷却ファンの動作音です。異常・故障ではありません。

## 使用中に製品本体が温くなる

▶冷却ファンは正常に作動していることを確かめてください。

「ブーン」と音がしている場合、使用中製品本体が温くなるのは正常です。そのままご使用ください。

「ブーン」と音がしていない場合、本製品の使用を中止して、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

▶通風孔（吸気孔）が手やタオルで塞がれていませんか？

手やタオルを通風孔から外してください。

## 使用中に安全リングが熱くなる

▶肌に当たって安全リングが熱いと感じる場合、いったん製品の電源を切り、製品を冷ましてから使用してください。

## 製品からおかしな臭いがする

▶アタッチメント、またはUVフィルター付き照射ウィンドウが汚れていませんか？

アタッチメント、またはUVフィルター付き照射ウィンドウを清潔にしてください。

▶お手入れ箇所をしっかりと除毛していますか？

お手入れ箇所の毛を除毛せずにこの製品を使用すると、毛が焦げて臭いがすることがあります。製品を使用する前に、除毛をしてください。もし除毛によって肌が負けてしまう場合は、できるだけ毛を短くカットしてください。

### ▶製品をほこりの多い場所に保管していませんか？

臭いは数回照射するうちに消えてなくなります。

## お手入れの最中に、いつもよりも肌が敏感に感じる

### ▶出力レベルが高すぎませんか？

ご自分にあった出力レベルを選んでいるか確認し、必要があれば出力レベルを低くしてください。P.15「出力レベルの設定」の項をお読みください。

### ▶お手入れ箇所の除毛をしていますか？

製品を使用する前に、除毛をしてください。もし除毛によって肌が負けてしまう場合は、できるだけ毛を短くカットしてください。

### ▶UVフィルター付き照射ウィンドウのUVフィルターが壊れていませんか？

UVフィルターが壊れている場合は、製品を使用しないでください。フィルターは交換できないため、お買い上げの販売店に問い合わせてください。

### ▶この製品を使用してはいけない箇所に使用していませんか？

頭部、髪、うなじ、喉仏、額、眉、目や目の周り、耳、唇、口内、乳首、乳輪、へそ内部、粘膜には使用できません。

## お手入れの後に、皮膚に赤みが出る

### ▶少しの赤みは正常な反応で、通常すぐにおさまります。



## いつもよりも、お手入れ後の肌の反応が長く続く

**▶ご自分に合った出力レベルよりも高い設定で使用していませんか？**

**P.15「出力レベルの設定」**の項をお読みいただき、適切なレベルを設定してください。肌の反応が3日以上続く場合は、皮膚科医の診察を受けてください。

## この製品を使用して、ひどい痛みを感じた

**▶お手入れ箇所の除毛を適切に行っていますか？**

この製品を使用する前に除毛処理を行ってください。肌が敏感で除毛によって肌が荒れてしまう場合は、できるだけ毛を短くカットし、また出力レベルを低く設定してお使いください。

**▶この製品を使用してはいけない箇所に使用していませんか？**

頭部、髪、うなじ、喉仏、額、眉、目や目の周り、耳、唇、口内、乳首、乳輪、へそ内部、粘膜には使用できません。

**▶ご自分に合った出力レベルよりも高い設定で使用していませんか？**

出力レベルをご自分に適した設定へ下げてください。

**P.15「出力レベルの設定」**の項をお読みください。

**▶UVフィルター付き照射ウィンドウ、または赤みがかかったガラス部分が壊れていませんか？**

UVフィルター付き照射ウィンドウやガラスが壊れている場合は、製品を使用しないでください。フィルターは交換できないため、お買い上げの販売店に問い合わせてください。



**▶生来の肌色、体毛の色はこの製品の使用に適していますか？**

生来の体毛の色が、明るい金色、白色、灰色、赤色の方や、肌の色が濃い褐色・黒に近い色の方はこの製品を使用しないでください。

### **お手入れ効果が自分の満足するレベルではない**

**▶ご自分に合った出力レベルよりも低い設定で使用していませんか？**

**P.15「出力レベルの設定」**の項をよく読み、出力レベルを適正にセットしてください。

**▶お手入れ箇所にまんべんなく光を照射しましたか？**

**P.22「2回目以降の使用方法」**の項のステップ9をお読みください。

**▶推奨される使用方法に従っていますか？（お手入れと次のお手入れの間隔があきすぎていませんか？）**

最初の4～5回は、2週間ごとのお手入れをお勧めしています。その後は、4～8週間ごとにお手入れを続けてください。最適なお手入れの頻度は、個人の体質や、また身体の部位によっても差があります。お手入れの効果が感じられない場合はお手入れの頻度を上げることをお勧めします。

**▶生来の肌色、体毛の色はこの製品の使用に適していますか？**

生来の体毛の色が、明るい金色、白色、灰色、赤色の方や、肌の色が濃い褐色・黒に近い色の方はこの製品を使用しないでください。

 注意

※絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

## 製品仕様

### 本体

商品名	IPL光脱毛器
品番	ICE-SENSE
光源技術	IPL（パルス光）
エネルギー	26J（最大）
電源方式	交流式（専用電源アダプタ使用）
消費電力	72W（最大）
照射機能	HR脱毛、SCスキンケア、RA美肌
冷却機能	あり
照射レベル	9階段レベル
照射モード	手動モード/自動モード
照射回数	無限回数
照射面積	4cm <sup>2</sup> /2cm <sup>2</sup> /1cm <sup>2</sup>
本体サイズ	17.3cm*10cm*20cm
本体重量	約484g
使用環境	室温5℃～40℃、相対湿度≤75%

## AC アダプター

<b>入力電圧</b>	AC100-240V、50/60Hz、1.5A
<b>出力</b>	DC12v、6000mA

※製品の仕様や外観などは、改善などのため予告なく変更することがあります。

# 12ヶ月保証と アフターサービス

よくお読みください

商品について、ご不明な点がございましたら、下記のカスタマーサービスまで、ご連絡ください。お使いのスマートフォンや携帯を利用してQRコードを読み取り、以下アドレス(URL)を開きます。



カスタマーサービス

**URL:**

<http://www.lomaya.co.jp/pages/service>

## 保障期間：お買い上げ日から 12ヶ月間

●保証期間内に、初期不良、自然故障など、通常使用における不具合には保証対応させていただいております。(消耗品は抜く)

販売元のショッピングモール経由での返品交換は、状況によって、全額返金や新品交換ができない場合もあります

●不具合などが発生した場合、当社までご連絡していただければ、お客様のご期待に添えるよう善処いたしますので、ご遠慮なくお問い合わせいた

- ・ 付属品などが欠品していた場合、販売店に連絡していただければ、再送いたします。
- ・ 本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねます。
- ・ 記録メディアを搭載または使用する製品の場合、故障または修理、交換により記録内容が消失などする場合がありますが、記録内容についての保証はいたしません。
- ・ 本書は日本国内においてのみ有効です。

This Warranty is valid only in Japan.

※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

# 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中自然故障、初期不良、通常使用における不具合が発生した場合には返品交換を行うことをお約束するものです。製品に故障及び不具合が発生した場合には、下記の内容を連絡してください。

品番	ICE-SENSE		
保証期間	お買い上げ日から	本体 12ヶ月	
※お買い上げ日	年	月	日
※販売店名			
※故障の状況			

※本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

〒333-0843  
埼玉県川口市前上町 5-31-1F  
URL : [www.lomaya.co.jp](http://www.lomaya.co.jp)



LINE 公式アカウント