

SISTEMA DE DEPILACIÓN

KAITLYN
SKIN ARTIST PRODUCTS

De uso doméstico

Manual del usuario

Gracias por elegir nuestro sistema IPL.

Para

que el producto resulte más eficaz al utilizarlo, lea atentamente el manual del usuario antes de utilizarlo.

kaitlynskinartistproducts@gmail.com

1. Consejos de seguridad

Para proteger la piel, no es adecuado que lo utilicen los siguientes clientes.

- Sabe que tiene un trastorno cutáneo.
- Tiene una enfermedad de la piel como una dermatitis alérgica, eccema, etc.
- Tiene fotosensibilización.
- Si tiene la menstruación, está embarazada o durante la lactancia.
- Si tiene quemaduras solares.
- Piel negra o quemada por el sol (consulte la tabla de contraste de color específico)
- Nevus negro o fucsia.
- Piel lesionada, con costra o herida curada, cáncer o hemangioma.
- En el área de los ojos y cualquier zona artificial estética, protésica o plástica.

2. Introducción del producto

2.1 Lista de contenido:

Máquina IPL, adaptador de corriente, garantía, manual de instrucciones.

2.2 Descripción de la estructura



3. Especificaciones técnicas

Tubo de lámpara	Tubo de cuarzo de xenón
Fuente de luz	Luz pulsada intensa
Frecuencia energética	1,5-3,9 J/cm ²
Tamaño de enfoque	33*10 mm ²
Longitud de onda	470 nm~1100 nm
Vida del tubo de lámpara	500 000 veces
Adaptador	AC100~240 V @ 12 V DC 3 A
Peso	186 g
Tamaño	124*83*48,5 mm ³
Rango de temperatura de funcionamiento	5~30 °C
Rango de humedad de funcionamiento	Humedad relativa 30 %~60 %

4. Introducción de las funciones

Este producto se puede utilizar para: el exceso de vello como el de los labios, las axilas, el vello corporal de las extremidades, de la frente, etc. La depilación indolora es adecuada para vello negro y personas de vello oscuro, no es adecuada para vello blanco, gris o rubio (consulte la siguiente tabla de contraste de color)

Color de la piel \ Color del vello	Blanca	Amarilla	Marrón medio	Marrón claro	Marrón	Marrón oscuro/negro
Blanco/gris	X	X	X	X	X	X
Pelirrojo	X	X	X	X	X	X
Dorado claro	X	X	X	X	X	X
Castaño claro	✓	✓	✓	✓	✓	X
Castaño	✓	✓	✓	✓	✓	X
Castaño oscuro	✓	✓	✓	✓	✓	X
Negro	✓	✓	✓	✓	✓	X

Tabla de contraste del color de piel y del cabello

5. Instrucciones de uso


5.1 Utilice una toallita médica con alcohol para limpiar la ventana de vidrio.

5.2 Presione el "botón de encendido" durante un segundo, el dispositivo se iniciará y empezará a funcionar (la luz indicadora verde aparecerá encendida y podrá escuchar que el sistema está funcionando).

Nota:

- Verá que la luz indicadora roja está encendida después de iniciarse.
- Después, debe mover la ventana de flash hacia su piel, verá que la luz indicadora roja parpadea, porque hay un sensor de inducción del cuerpo humano integrado en la ventana del flash y el sensor detectará la piel cuando se acerque a ella.
- El indicador de luz roja debe parpadear. En caso contrario, el dispositivo no funcionará. Si ve que el indicador rojo no está parpadeando, acérquelo a su piel hasta que parpadee.

5.3 Haga clic en el "botón de encendido" para seleccionar el nivel de intensidad adecuado. Hay cinco niveles de intensidad indicados con luces indicadoras azules. En el diagrama que se muestra a continuación, aparece el nivel de intensidad de baja a alta potencia. El nivel 1 es la configuración de potencia mínima, el nivel 5 es la intensidad de potencia máxima. Cualquier ajuste se puede realizar en la secuencia que se enseña haciendo clic en el botón de encendido.

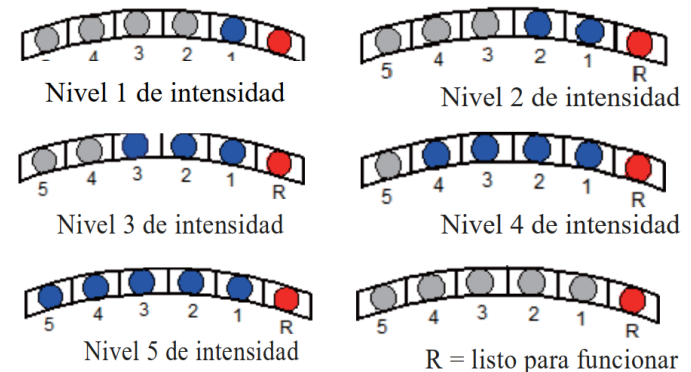

5.4 Una vez que se establece el nivel de intensidad, mueva la ventana del flash hacia la piel de manera que pueda cubrir la ventana del flash por completo. Verá que la luz indicadora roja parpadea. Después, haga clic en el botón del flash, el dispositivo parpadeará una vez; después de cada flash, la luz indicadora roja se apagará para cargar la energía, después de 1 a 3 segundos, la luz volverá a indicar que el dispositivo está listo para usarse otra vez.

Nota:

-Para conseguir resultados perfectos, se aconseja que el proceso de depilación se repita de 2 a 3 veces y se asegure de que el dispositivo pase por todas las partes del cuerpo sin repetir ni omitir ninguna.

-El dispositivo no funciona bien si la luz indicadora roja permanece encendida sin parpadear. En este caso, siga los pasos que le indicamos a continuación:

-Asegúrese de que la "ventana de flash" esté lo suficientemente cerca de la piel.

-Si la luz indicadora roja aún está encendida, muévela hacia su piel durante 3-5 segundos y compruebe que haya vuelto a funcionar de manera normal.

-Reinícielo en caso de error en esta operación.

-Si la operación anterior no puede solucionar el problema, contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

5.5 Si el dispositivo no se usa durante 5 minutos, entrará en modo de suspensión. Haga clic en el botón de encendido para reactivarlo. Nota: al reiniciar, la intensidad volverá al nivel 1

5.6 Presione el botón de encendido durante 3 segundos para apagarlo.

5.7 Cuando termine de usarlo, limpie la ventana del flash con una toallita húmeda con alcohol médico que le sugerimos.

Nota:

Después de utilizar el dispositivo de manera frecuente, habrá una mancha blanca de rocío dentro de la lente, esto no afectará el uso normal ni a la vida útil del dispositivo.

6. Proceso de mantenimiento del vello

6.1 Ponerlo a prueba antes de utilizarlo

Se recomienda encarecidamente que eche un vistazo a la reacción adversa llevando a cabo un test de piel dos horas antes de cualquier procedimiento de eliminación de vello.

Método del test:

En una pequeña área de la piel situada en el interior de la parte superior del brazo (el medio), pase el dispositivo de una a dos veces por el mismo lugar yendo de menos intensidad a más.

Tras dos horas, si nota enrojecimiento, quemaduras, dolor punzante u otros síntomas, consulte al doctor antes de usar el dispositivo de nuevo. Si nota una pequeña incomodidad, vuelva a usar el dispositivo con un ajuste de menor intensidad. No obstante, si la incomodidad persiste, consulte al doctor antes de seguir usándolo.

Color de la piel \ Partes del cuerpo	Blanca	Amanilla	Marrón medio	Marrón claro	Marrón	Marrón oscuro/negro
Axilas	Nivel 3-5 3-4 veces	Nivel 3-5 3-4 veces	Nivel 3-4 2-3 veces	Nivel 2-3 2-3 veces	Nivel 2-3 2-3 veces	no aplicable
Brazos	Nivel 3-5 3-4 veces	Nivel 2-4 3-4 veces	Nivel 2-4 2-3 veces	Nivel 1-3 2-3 veces	Nivel 1-3 2-3 veces	no aplicable
Piernas	Nivel 3-5 3-4 veces	Nivel 2-4 3-4 veces	Nivel 2-4 2-3 veces	Nivel 1-3 2-3 veces	Nivel 1-3 2-3 veces	no aplicable
Zona de alrededor de la boca	Nivel 3-4 3-4 veces	Nivel 2-3 3-4 veces	Nivel 2-3 2-3 veces	Nivel 1-2 2-3 veces	Nivel 1-2 2-3 veces	no aplicable
Cara	Nivel 3-4 3-4 veces	Nivel 2-3 3-4 veces	Nivel 2-3 2-3 veces	Nivel 1-2 2-3 veces	Nivel 1-2 2-3 veces	no aplicable

Tabla de contraste de nivel de intensidad y color de piel

Nota:

-Úselo de seis a diez veces como ciclo de eliminación del vello

-Úselo una vez cada dos semanas hasta un máximo de seis veces

-Úselo una vez cada cuatro semanas cuando lo use de seis a diez veces

-Si ve que le crece nuevo vello fino después de usarlo, úselo una vez cada dos o tres meses en el lugar en cuestión, y continúe obteniendo resultados satisfactorios.

-Se sugiere que, para obtener los mejores resultados posibles, lo use muchas veces durante un período de tiempo determinado en las áreas de vello grueso

-El uso será distinto dependiendo de la persona. Úselo de manera menos frecuente cuando el área de vello crezca poco, alrededor de un 30 %.

7. Notas de operación del dispositivo

7.1 No dirija el flash cerca de los ojos o directamente sobre los mismos cuando lo esté usando.

7.2 Después de usarlo, es normal que la piel se enrojezca un poco. Puede calmar la zona con agua helada o una toalla húmeda fría.

7.3 No limpie la ventana del flash directamente con alcohol en spray.

7.4 No lo utilice junto a otros productos cosméticos como, por ejemplo, productos de gel acuoso.

7.5 Trate de no comer comida fotosensible mientras lo está usando (p. ej. espinacas, coles, mostaza, etc.)

7.6 Para obtener unos mejores resultados utilice el ajuste de energía más alta (advertencia: solo lo haga tras haber seguido las instrucciones especificadas anteriormente).

7.7 Cuanto más oscura sea su piel, menos aparentes serán las reacciones cutáneas y estas pueden retrasarse. En este caso, asegúrese que ha esperado dos horas antes de aumentar la intensidad.

7.8 Después de usar este producto, continúe cuidando de su piel hidratándola y usando bloqueador solar como de normal.

7.9 Evite exponerse a luz ultravioleta mientras lo usa y siempre proteja la piel cuando esté fuera expuesto al sol. Asimismo, trate de no exponerse durante mucho tiempo a la radiación de los ordenadores al trabajar. Para ello, protéjase con bloqueador solar o protector solar.

7.10 No bloquee la entrada de aire ni la salida de refrigeración para que la refrigeración del dispositivo no se vea afectada.

7.11 Los vellos atascados en el dispositivo pueden causar algunos puntos en blanco, pero no afectará al rendimiento del dispositivo ni al uso normal.

7.12 En los últimos años de vida útil, en el muro interior de la bombilla aparecerán zonas en diferentes grados de negro. Esto es el resultado del normal proceso de envejecimiento de los tubos. No tenga miedo de seguir usándolo como siempre siguiendo los parámetros especificados.

7.13 Este producto no impermeable, por ello, evite que entre en contacto con el agua.

7.14 Si hay alguna falla, desconecte de inmediato el dispositivo. Si ve que la cubierta del producto o el cristal de la ventana del flash están rotos, devuélvalo a la fábrica para que le realicen el mantenimiento.

7.15 No almacene el dispositivo cerca de campos magnéticos fuertes, humedad, polvo o espacios con altas temperaturas.

7.16 Evite que sufra daños y manténgalo fuera del alcance y la vista de los niños.

7.17 Está prohibido darle un uso diferente al permitido.

7.18 Está prohibido abrir este dispositivo a menos que se trate de nuestro personal autorizado. De lo contrario, existe peligro de descarga eléctrica.