

Благодарим Ви, че закупихте импулсния масажор за тяло DARS!

Преди да използвате масажора, моля, прочетете инструкциите за употреба. След като прочетете, моля, съхранявайте това ръководство в добро състояние за бъдещи справки, ако е необходимо.

Обърнете специално внимание на раздела „Мерки за безопасност“.

Ние си запазваме правото да правим промени в дизайна и допълнения към описанията на нашите продукти. Възможни са промени без предизвестие, това се отнася за цвета и компонентите на продукта.

Устройството не е медицинско оборудване.

СЪДЪРЖАНИЕ

Описание и предназначение на устройството

Мерки за сигурност

Описание на устройството

контрол

Провеждане на процедури

Частни методи

Възможни неизправности и тяхното отстраняване

Поддръжка и обслужване

Изхвърляне

Спецификации

ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Импулсният масажор "DARS" е предназначен да въздейства върху тъканите на човешкото тяло с променлив импулсен ток с високо напрежение и ниска енергия през напълнен с газ стъклен електрод. Използва се в козметологията, спорта и домашна употреба.

Помага за премахване на главоболието, нормализира съня и подобрява работоспособността. Чрез активиране на метаболитните процеси и кръвообращението се подобрява проникването на козметиката в кожата и подкожните слоеве и се повишава мускулният тонус.

КАК РАБОТИ ТОЙ?

Работата на устройството се основава на въздействието на променлив ток с високо напрежение върху човешкото тяло чрез напълнен с газ стъклен електрод.

Ефектът се причинява от импулсни променливи токове с висока честота (100–100 kHz) и високо напрежение (около 2 kW), но при относително ниска сила на тока (до 100–200 µA). Променливите токове при слаб ток не водят до йонни промени в мембраните, не водят до повишаване на температурата и не предизвикват свиване на мускулната тъкан. Положителният ефект се постига чрез подобряване на оттока на венозна кръв и лимфа, като по този начин се ускорява метаболизма на тъканите.

Редовната употреба на този уред подобрява съдовия тонус и укрепва имунната система, подобрява съня, повишава работоспособността, намалява главоболието и умората.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Моля, прочетете внимателно инструкциите за експлоатация, преди да използвате уреда!

- Преди да свържете към електрическата мрежа, уверете се, че контролът на интензитета е в положение ИЗКЛ.
- Да не се използва в помещения с висока влажност (баня, душ, басейн и др.)
- Не включвайте напрежението без електродът да е поставен в основата.
- Не включвайте и не използвайте устройството с повредени компоненти.
- Преди да използвате устройството, трябва да премахнете всички метални бижута и часовници.
- Кожата и дрехите на пациента трябва да са сухи.
- Не докосвайте работния електрод и основата на апарата за дарсонвализация с никакви части на тялото по време на работа.
- Не изваждайте електрода от включено устройство.
- Интензивността на въздействието се регулира от по-ниска към по-висока според усещанията на потребителя.
- Разпръснато излагане или светкавично излагане на кожата с работещ електрод не е допустимо.
- Използването на гребен електрод е допустимо само върху суха, чиста коса без бижута.
- Не докосвайте ухото с електрода.
- Ако по време на употреба пациентът почувства замайване или неразположение, трябва да спрете да използвате устройството.
- Не оставяйте устройството включено без да работи.
- Когато работите с устройството, не позволявайте на потребителя да влиза в контакт със заземени предмети, а предметите, върху които се намира човек, трябва да са изработени от непроводим материал.
- Дръжте работното устройство с ръка, разположена не по-близо от 30–40 mm от точката, където електродът излиза от корпуса.
- Този масажор не е предназначен за употреба от лица с намалени умствени, физически или сетивни способности;
- Устройството трябва да се пази на място, недостъпно за деца. Не оставяйте уреда без надзор!
- Препоръчително е устройството да се съхранява далеч от пряка слънчева светлина и места с висока температура или влажност.
- Пазете устройството и особено стъклените електроди от удари.

ЗАБРАНЕНО:

- Не включвайте устройството, ако електродът не е свързан към него.
- Забранено е докосването на повърхността на електродите в областта на металните държачи на корпуса на устройството, докато устройството работи.
- Не кипете електродите.
- Не разглобявайте и не ремонтирайте устройството сами.
- Забранено е разглобяването на корпуса на устройството както при включено, така и след изключване (поради факта, че върху кондензаторите, използвани във веригата на устройството, може да остане остатъчно напрежение).
- Не работете с устройството, ако вода или други течности влязат в контакт с тялото му.
- Строго е забранено да работите с устройството, след като вода (или друга течност) е попаднала в корпуса.


Непълнен списък с препоръки за използване на импулсен масажор:

- целулит;
- пустули, възпаление, акне, мазна пореста кожа;
- зряла, отпусната, набръчкана кожа с намален тургор;
- пърхот, стимулиране на растежа на косата;
- за ставите;
- и други.

Не може да се използва в следните случаи:

- злокачествени новообразувания;
- доброкачествени неоплазми с тенденция към прогресия;
- кръвене;
- имплантиран пейсмейкър;
- нарушения на кръвосъсирването;
- нарушения на чувствителността на кожата;
- епилепсия;
- тромбофлебит;
- бременност;
- сърдечна аритмия;
- изразени форми на розацея;
- хирзутизъм;
- активна белодробна туберкулоза;
- треска;
- сърдечно-съдова недостатъчност;
- гнойни процеси преди хирургично лечение;
- индивидуална непоносимост към електрически ток.

ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

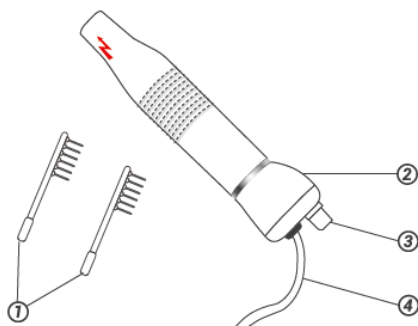

1. Стъклени електроди
2. База на устройството
3. Контрол на интензивността
4. Електрически кабел

Съдържание на доставката:

- Устройство — 1 бр.
- Електроден гребен - 2 бр.
- Потребителска опаковка - 1 бр.
- Ръководство за употреба - 1 бр.

Стъклени електроди са пълни с инертен газ.



Електроден гребен използвани за лечение на скалпа.

КОНТРОЛ

1. Изберете желаните електрод и внимателно го поставете в металния държач, докато пасне идеално. Електродът трябва да се монтира и отстранява с малка сила. Не използвайте сила! Това може да повреди електрода.
2. Преди да свържете устройството към мрежата, уверете се, че копчето за управление е завъртяно докрай обратно на часовниковата стрелка, докато щракне в положение „ИЗКЛЮЧЕНО“.
3. Включете устройството, като завъртите копчето леко по посока на часовниковата стрелка (докато щракне). Внимателно приближете върха на електрода към повърхността на кожата. Задайте желаната сила на удара чрез плавно завъртане на копчето по посока на часовниковата стрелка - крайната позиция на копчето на устройството по посока на часовниковата стрелка съответства на максималната интензивност на удара. Бъди внимателен!
4. **внимание! Преди да смените електрода, трябва да изключите устройството, като завъртите контрола на интензитета до максималната позиция на стрелката обратно на часовниковата стрелка, докато щракне.**
5. Обслужвайте устройството само след пълното му изключване от мрежата!

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ

Има два начина да използвате импулсен масажор у дома:

- **Контакт („безшумен разряд“)**— вакуумният електрод на масажора действа върху определен участък от кожата, като е в пряк контакт с нея; няма въздушна междина между електрода и повърхността на кожата. При този ефект усещанията могат да бъдат слаби и може да се усети приятна топлина. Процедурите в режим „тихо нулиране“ нормализират секрецията на себум, повишават еластичността и тургора на кожата и предотвратяват появата на бръчки. Този метод помага за коригиране на стареенето и проблемна кожа, целулит, разширени вени, а също така подобрява растежа на косата.
- **Безконтактен („искров разряд“)**— електродът се намира на разстояние 1–4 mm от повърхността на кожата. Когато електродът се отстрани от кожата, възниква искров разряд, въздухът около масажора се насища с озон и се усеща леко изтръпване върху третираната област на кожата. Усещанията могат да включват следното: изтръпване, тихо прашене, интензивна миризма на озон. Може да забележите сини искри, наподобяващи тънки малки мълнии. Насърчава резорбцията на хематоми и заздравяването на рани.

В допълнение, както искрящият, така и тихият разряд на устройството имат подчертан бактерициден ефект. Желаният ефект се постига и в двата случая след средно 10-12 процедури.

- Въздействието се постига чрез бавни леки движения по основните масажни линии.
- След като приключите, изключете устройството, като завъртите копчето обратно на часовниковата стрелка, докато щракне, и го извадете от контакта. Поддържайте устройството и го съхранявайте в кутията за съхранение.
- Използването на гребен електрод е допустимо само върху суха, чиста коса без бижута.

ЧАСТНИ МЕТОДИ

- **Въздействие върху кожата на главата**(предотвратяване на косопад, мигрена). Извършва се върху чиста, суха коса, след сваляне на бижутата. Въздействието се осъществява с гребенчат електрод по контактен метод със средна интензивност. Електродът плавно и бавно се премества от челото към задната част на главата; ако косата е къса, се допуска движение в обратна посока. Общото време на процедурата е 10-15 минути. В края на процедурата се препоръчва да се втрият лечебни серуми в скалпа или да се направи маска за коса. Процедурите трябва да се извършват ежедневно. Курс от 20-30 процедури може да се повтаря 3-4 пъти годишно.

ВЪЗМОЖНИ ПОВРЕДИ И ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	ЛЕЧЕНИЕ
Устройството не работи	1. Устройството не е свързано към мрежата 2. Инсталиран контрол на интензитета на позиция "ИЗКЛ." 3. Напълненото с газ уплътнение е счупеностъклен електрод. 4. Устройството е дефектно	1. Свържете вашето устройство към мрежата. 2. Завъртете копчето за управление по посока на часовниковата стрелка, докато щракне. 3. Опитайте да инсталирате друг електрод. Ако е необходимо, свържете се със сервизен център или закупете нов електрод. Внимание! Никога не докосвайте гнездото, когато монтирате електроди, докато устройството е включено. 4. Свържете се със сервизния център.
Действието на уреда стана по-слабо.	Електродът е замърсен	Почистете електрода според инструкциите за поддръжка.

ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ

Почистване

- Преди да почистите устройството, уверете се, че устройството е изключено и бутонът OFF е натиснат. Използвайте влажна, мека кърпа за почистване.
- За почистване на електродите е разрешено да се използва неутрален препарат или алкохолен разтвор. Не кипете електродите.
- Корпусът на устройството и електродите трябва да бъдат напълно изсушени преди по-нататъшна употреба.

ВНИМАНИЕ!

Не използвайте бензин, разреждател или други корозивни течности, когато почиствате устройството. В противен случай може да възникне сериозна повреда на устройството.

грижа

- Уверете се, че уредът е изключен и захранващият кабел е изключен от контакта. Съхранявайте устройството на чисто и сухо място при температура между 5 °C и 45 °C и влажност на въздуха не повече от 60%.
- Избягвайте пряка слънчева светлина върху устройството

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Не препоръчваме да изхвърляте устройството в края на експлоатационния му живот заедно с битовите отпадъци. Изхвърлянето трябва да се извърши чрез подходящи пунктове за събиране. Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с местния орган за изхвърляне на отпадъци.

Опаковката също трябва да бъде рециклирана. Хартите, дървото, полиетиленът и пластмасата трябва да се изхвърлят отделно съгласно правилата за събиране, отчитане и изхвърляне на опаковките. Опаковката се изхвърля като отпадна хартия за рециклиране.



Не изхвърляйте заедно с битовите отпадъци



Картон, хартия

СПЕЦИФИКАЦИИ

Код на продавача:	GESS030
Форма на вълната	пулс с високочестотно пълнене
Честота на повторение на импулса	100 Hz $\pm$ 10 Hz
HF честота на пълнене	110 $\pm$ 50 kHz
Среден изходен ток	не повече от 150 μ A
Изходно напрежение	не повече от 8 kW, максимум до 16-25 kW
Захранване	мрежа 220 V $\pm$ 22 V, 50 Hz $\pm$ 0,5 Hz
Консумация на енергия	60 W
Размер на опаковката	276x65x160 мм
Нетно/бруто тегло	0,4/0,6 кг

Гаранционно обслужване

Гаранционното обслужване, при спазване на гаранционните условия, предполага безплатен ремонт на продуктите по време на гаранционния срок или тяхната замяна с подобни при невъзможност за ремонт. Задължението за гаранционен ремонт се поема от продаващата организация. Вижте опаковката за информация за контакт.