

M01

h i k a r i
epi handy

hikari epi ハンディ 取扱説明書

保証書付

このたびは、hikari epi ハンディをお買い上げいただきまして
誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
尚、本器を他の人に貸与や譲渡する場合は必ず
この取扱説明書もお付けください。

安全上のご注意

- この製品を安全に正しくご使用していただく為に、ご使用前に必ず[安全上のご注意]をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後はいつも手元においてご使用ください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

△危険	守らないと生命や身体に重大な被害を負うことが想定される内容
△警告	守らないと生命や身体に重大な被害が発生することが想定される内容
△注意	守らないと軽傷程度の被害または物損事故の発生が想定される内容

図記号の例	
⊘	この記号は禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、近くに文章で示します。
❗	この記号は強制(必ず守ること)を示します。具体的な強制内容は、近くに文章で示します。
△危険	
⊘	●誤動作を招くおそれがありますので、下記のような医療用電子機器との併用はしないでください。①ペースメーカーなどの体内植込み型医療用電子機器 ②人工心臓などの生命維持用電子医療機器③心電計などの装着型の医療用電子機器●入浴中や浴室など湿度の高い所ではご使用にならないでください。強い電気ショックを受ける、火傷、感電の原因となります。●指定以外の誤った使い方でご使用にならないでください。怪我や感電の原因となります。
△警告	
❗	次のような人または部位には、絶対にご使用にならないでください。事故やトラブルの原因となります。 <人>●日焼けなどで肌の色が黒い人●心臓に疾患がある人●医師の治療を受けている人●急性疾患、有熱性疾患、感染性疾患、結核性疾患の人●顔面神経痛の人●てんかんの人●光の点滅で気分が悪くなる人●ケロイド体質の人●その他体調のすぐれない人(37度以上の熱があるとき・血圧に異常があるとき・頭痛のあるとき)●皮膚に異常がある人(アトピー性皮膚炎の人・アレルギー体質で特に肌が敏感な人・化粧品による皮膚炎を起こしている人・過度の日焼けで肌が赤くヒリヒリし、炎症を起こしている人・ニキビが化膿し(黄ニキビ)炎症を起こしている人・かゆみやほてりのあるシミや、病的な(内臓疾患などによる)シミのある人)●ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で、毛細血管拡張を起こしている人●血友病患者●飲酒中や薬を服用中の人●疲労の激しい人●痛覚や知覚に障害のある人●自分で意思表示が出来ない人●乳幼児や18歳未満のお子様 <部位>●ほくろ●あざ●濃いシミ●眼球(上まぶた)●耳●頭皮●傷口●悪性腫瘍●美容整形をした直後の部位●目の周り●眉周り●唇●首●腹部(女性のみ)●外陰部●入れ墨、タトゥー、アートメイク●メイクの上●髪の毛●顔面黒皮症●肝斑●指定部位以外 ※通院中の方や妊娠中の方は医師にご相談の上、ご使用ください。
❗	電源を入れた状態で放置しないでください。
❗	他の電気製品(美容器など)との同時使用はしないでください。感電や故障の原因となったり、体調不良を起こしたりするおそれがあります。
❗	修理、分解、改造は行わないでください。感電および異常動作により、身体に重大な被害を与えるおそれがあります。


❗	本体の動作などに異常(熱くなるやこげるようなにおいがするなど)を感じた場合は、直ちに電源を切り、コンセントからアダプターを抜いて、お問い合わせ窓口までご連絡ください。
⊘	照射後、24時間(個人差あり)は皮膚を刺激するような、日焼け、サウナ、肌にとったりした服装、漂白剤、クリームなどは避けてください。肌のかゆみや赤みなどを引き起こす原因となります。
⊘	心臓の上、陰部、皮膚疾患のある部位などにはご使用にならないでください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。
⊘	同一箇所に連続照射しないでください。火傷や怪我の原因となります。
⊘	暗い場所ではご使用にならないでください。目を傷める原因となります。
△注意	
❗	身体に異常(気分が悪くなったり痛みを感じたりする)や皮膚に発赤やかぶれなどの異常を感じた場合は、直ちにご使用を中止してください。事故や怪我の原因となります。
❗	本製品の上に重いものを置いたり、衝撃(高い所からの落下など)を与えたりしないでください。事故や故障の原因となります。
❗	破損した状態でご使用にならないでください。事故や故障の原因となります。
❗	お手入れをするときは、シンナー、アルコール、ベンジン、灯油などの溶剤、薬品類、磨(みがき)粉などはご使用にならないでください。変色や変形の原因となります。
❗	ご使用中に停電または雷が鳴りだしたら直ちにご使用を中止してください。事故や故障の原因となります。
❗	日本以外ではご使用にならないでください。事故や故障の原因となります。
❗	アダプタープラグ、コンセントプラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分なままでご使用すると、感電や発火の原因となります。
❗	指定された電源電圧以外の電圧でご使用にならないでください。感電や発火の原因となります。本製品のアダプターの入力電圧はAC100~240Vです。
❗	アダプターを傷つけたり、重い物を乗せたり、はさみ込んだり、加工したりしないでください。発煙や発火の原因となります。
❗	アダプターコードを極端に折り曲げたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないでください。事故や故障の原因となります。
❗	交流100V以外の電源はご使用にならないでください。火災、事故、故障の原因となります。
❗	ご使用後は必ずコンセントからアダプターを抜いてください。事故や故障の原因となります。
❗	本製品は濡らしたり、水に浸けたり、水をかけたりしないでください。感電や故障の原因となります。
❗	専用のアダプター以外ではご使用にならないでください。発熱、発煙、発火、故障、怪我の原因となります。
❗	ご使用前に本体に変形、割れ、破損が無いかご確認ください。事故や怪我の原因となります。

△注意	
❗	落下時、破損時は直ちにご使用を中止してください。そのままご使用を続けると、発熱、発火、感電、怪我の原因となります。
❗	吸気口や排気口をふさいでご使用にならないでください。発熱、発煙、発火の原因となります。
❗	濡れた手でご使用にならないでください。発熱、感電、故障の原因となります。
❗	ストーブなどの暖房機器の近くでご使用や保管をしないでください。発熱や発火の原因となります。
❗	アダプタープラグを抜くときは、コードを持たず、必ずアダプタープラグをもって引き抜いてください。感電、ショート、発火の原因となります。
❗	お手入れの際は、必ずコンセントプラグを抜いてください。感電の原因となります。
❗	肌が濡れた状態でご使用にならないでください。感電の原因となります。
❗	ネックレスなどの金属装飾品をつけたままご使用にならないでください。事故や怪我の原因となります。
❗	照射部が汚れていないか定期的に点検してください。火傷や故障の原因となります。
❗	乳首、乳輪、へそにはご使用にならないでください。火傷や怪我の原因となります。
❗	目に直接照射しないでください。目を傷める原因となります。
❗	照射光を直接見ないでください。目を傷める原因となります。
❗	目の周り1.5cm以内は照射しないでください。目を傷める原因となります。
❗	照射直前や直後の当日の入浴は避けてください。肌を傷める原因となります。
❗	照射後24時間程度は直射日光を避けてください。肌を傷める原因となります。
❗	他人に照射しないでください。事故や怪我の原因となります。
❗	お子様やペットの近くで照射しないでください。火傷や怪我の原因となります。
❗	鏡などの反射しやすい物に向けて照射しないでください。目を傷める原因となります。
❗	肌の色が変化した場合、ご使用を中止し、医師にご相談ください。

本製品は、医療機器ではなく美容機器です。


ご使用いただける部位

- ご使用者自身にのみご使用ください。
- 照射する部位が確認できる状態でご使用ください。

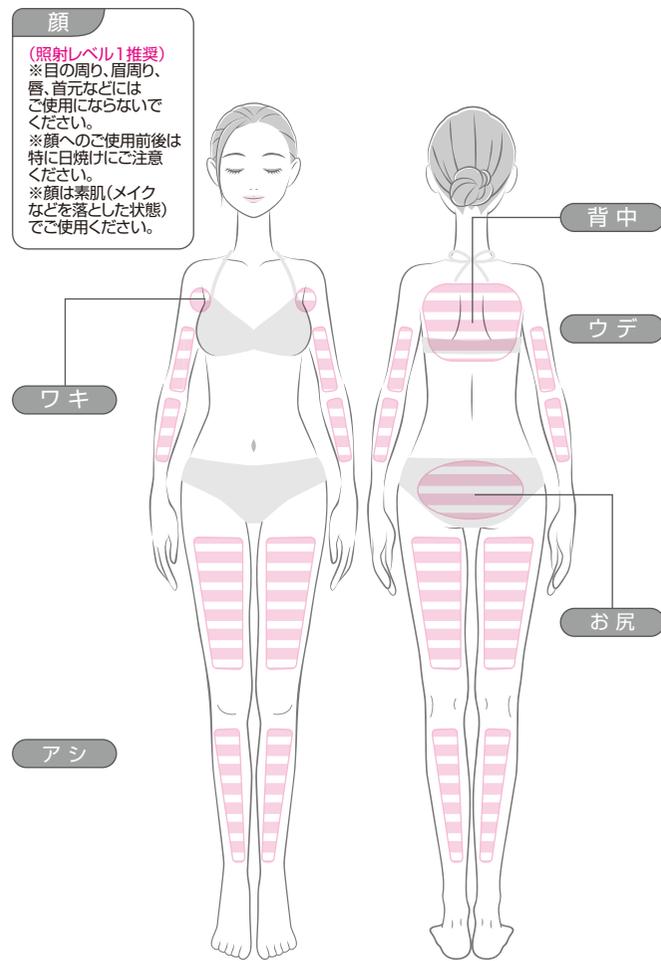


セット内容と各部の名称

本体

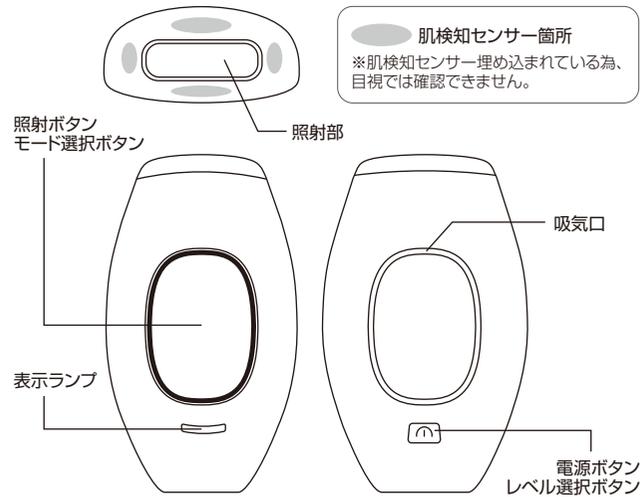

アダプター

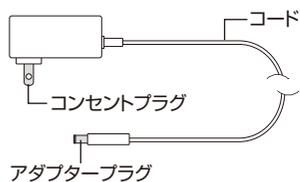

取扱説明書(本書)



ご使用の頻度

最初の 1~4週間	5~8週間目	9~12週間目
1~2週間に 1回程度	2週間に 1回程度	2週間~1ヶ月に 1回程度

△お使いになる頻度を守ってご使用ください。
△効果は、部位や個人の体質によって異なります。
△上記の頻度を超えてのご使用はおやめください。

お使いになる前に

■ 肌の色、毛の色をご確認ください

下図のカラーチャートで肌と毛の色をご確認ください。

肌のカラーチャート						
ホワイト	アイボリー	ベージュ	ライト ブラウン	ミディアム ブラウン	ダーク ブラウン	
✓	✓	✓	✓	✗	✗	
毛のカラーチャート						
ブラック	ダーク ブラウン	ミディアム ブラウン	ライト ブラウン	ブロンド	レッド	ホワイト グレー
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

■ 除毛してください

※カミソリは付属していません。

△毛が伸びていたり、肌の表面に毛が残っていたりすると火傷の原因となります。

△ワックスや毛抜きなど、毛を毛根から抜く処理はしないでください。



■ メイクなどを落としてください

素肌(メイク、日焼け止め、ローション、クリーム、香水などを洗い流した状態)でご使用ください。

△メイクの上からご使用すると肌トラブルの原因となります。

パッチテスト

初めてご使用するときや、しばらくご使用しなかったときは、肌トラブルが起きないか確認する為にパッチテストを行ってください。
①ご使用したい部位に出力レベル1で1回テスト照射してください。
②48時間後にテスト照射した箇所に異常がないかご確認ください。

△パッチテストはシングルモードで行ってください。
△パッチテストを行った箇所は1週間照射しないでください。
△肌に炎症(赤くなるなど)が発生した場合はご使用を中止し、2日たっても炎症が続く場合は、医師にご相談ください。


アダプターの接続方法

1.下図を参考に①→②の順番で接続してください。

2.電源ボタン/レベル選択ボタンが緑点滅し、スタンバイ状態になります。



緑点滅：スタンバイ状態

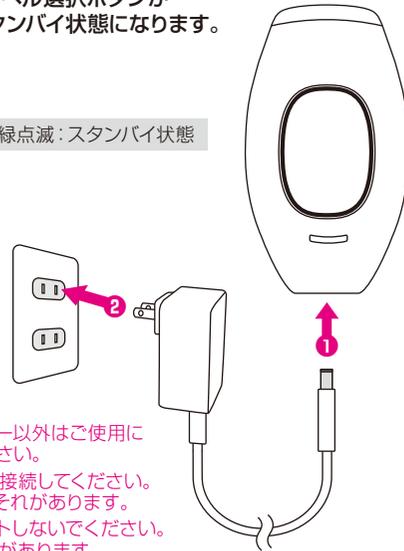

△専用のアダプター以外のご使用にならないでください。
△必ず順番通りに接続してください。ショートするおそれがあります。
△濡れた手でセットしないでください。感電するおそれがあります。

ご使用方法

△必ずご使用になる時の出力レベルはレベル1からご使用ください。
△照射前にお手持ちのサングラスなどを着用し、目を保護してください。
△部屋を明るくしてご使用ください。
△強い光が照射される為、近くに人やペットがいないことをご確認ください。
△ご使用時に強い光が照射されます。ご使用箇所を直視しないようにご注意ください。
△顔にご使用する際は、必ず目を閉じてご使用ください。
△本製品は防水機能がありませんので、照射時にジェルなどは併用しないでください。

電源を入れる

1.電源ボタン/レベル選択を短押しします。



2.電源ボタン/レベル選択が緑点灯します。



3.表示ランプが赤色と青色に点灯します。



※電源が入るとシングルモードの出力レベル1になっています。

※電源を入れた状態で5分間操作がないと自動で電源が切れ、スタンバイ状態になります。

出力レベルを切り替える

△必ずご使用になるときの出力レベルはレベル1からご使用ください。


1.電源ボタン/レベル選択を短押しします。

※レベル1からレベル5まで選択できます。



2.電源ボタン/レベル選択を短押しするごとにレベル1からレベル5までカウントアップされレベル5までいくとレベル1までカウントダウンされます。

※表示ランプの青色の表示数によってレベルがわかります。(右図参照)

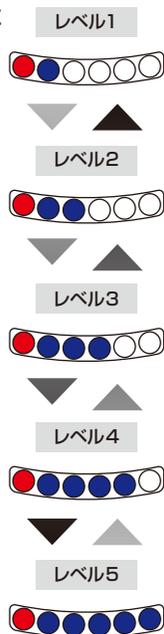

モードを切り替える

1.照射ボタン/モード選択ボタンを3秒長押しします。

※電源を入れた時点では、シングルモードになっています。



2.表示ランプの青色ランプが点滅し連続照射モードになります。

3.再び照射ボタン/モード選択ボタンを短押しします。



4.表示ランプの青色ランプが点灯しシングルモードになります。

モードの使い分け

青点灯：シングルモード	青点滅：連続照射モード
狭い範囲や敏感な部位をケアしたいときに	広い範囲を効率的にケアしたいときに

△レベルが強くなると熱を強く感じますが異常ではありません。
 △使用時に毛が焼けることによる煙やにおいが発生する場合があります。
 △同じ箇所に連続で照射しないでください。
 △ご使用後に肌の熱、ほてり、赤みなどが気になる場合は、冷やしたタオルなどを当ててください。
 △強い痛みを感じた場合は、直ちにご使用を中止してください。

シングルモード

△照射前にお手持ちのサングラスなどを着用し
目を保護してください。

1. 使用したい部位に照射部を押し当てます。

※照射部と照射したい箇所に隙間がないように
当ててください。




2. 表示ランプの赤色ランプが点滅します。

※肌検知センサーにきちんと肌が
触れていないと赤色ランプは点滅しません。

3. 照射ボタン/モード選択ボタンを
短押しして照射します。

※肌検知センサーにきちんと肌が
触れていないと照射できません。
※吸気口や排気口をふさがらないでください。

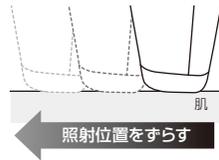4. 照射位置をずらして1~3を
繰り返します。

△照射の箇所がかぶらないようにご注意ください。

連続照射モード

△照射前にお手持ちのサングラスなどを着用し
目を保護してください。


1. 使用したい部位に照射部を押し当てます。

※照射部と照射したい箇所に隙間がないように
当ててください。
※吸気口や排気口をふさがらないでください。




2. 自動で照射がはじまります。

※肌検知センサーが肌を検知すると
すぐに照射されます。

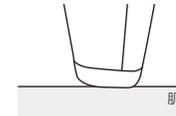3. 押し当てたまま照射位置を
少しずらして照射を繰り返します。

※本体を同じスピードで滑らせるように
動かしてください。
※照射できる間隔は1~3秒です。
出力レベルにより異なります。

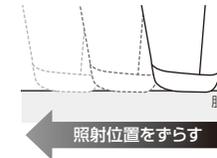

△照射の箇所がかぶらないようにご注意ください。

電源を切る


1. 電源ボタン/レベル選択ボタンを
3秒長押しします。2. 電源ボタン/レベル選択ボタンが
緑点滅します。

3. コンセントからアダプターを抜きます。

お手入れ方法

照射部

照射部が汚れている場合は、綿棒または糸くずの出ない布に消毒用アルコールなどを使用して、照射部のガラスの汚れを拭き取り清掃してください。そのままにしておくとガラス面の汚れが取れなくなる場合があります。

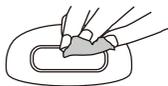

本体

衛生性を保つ為、ご使用の度にお手入れを行ってください。お手入れを行う際は必ず電源を切り、コンセントからアダプターを抜いた状態で行ってください。本体に付着した汚れを乾いた布で優しく拭き取ってください。



本体は水洗いしないでください。



薬品類、洗剤、オイルはご使用にならないでください。



△本製品には防水機能はありません。
水に浸けたり、水をかけたりしないでください。

△シンナー、アルコール、ベンジン、灯油などの溶剤、薬品類、磨(みがき)粉などをご使用にならないでください。
変色や変形の原因となります。

保管方法

ご使用にならない場合は以下の点にご注意の上、保管してください。



乳幼児やお子様の手の届かない場所に保管してください。



直射日光の当たらない場所に保管してください。



温度、湿度の高くない場所に保管してください。

破棄する場合は

本器およびパッケージなどをゴミとして廃棄する場合はお住まいの自治体の定める区分に従って破棄してください。

製品仕様

本体サイズ	約 W83×D48.5×H124mm
本体重量	約 186g
電源(入力)	AC100~240V 50/60Hz
電源(出力)	DC12V 3A
消費電力	最大36W

製品の仕様およびデザインは改善などの為、予告なく変更する場合があります。

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、この取扱説明書をよくお読みいただき下記の点をもう一度チェックしてください。故障の場合は本体の分解などはせずにお問い合わせ窓口までご連絡ください。

現象	原因	対処方法
照射されない	肌検知センサーが反応していない	きちんと肌検知センサーに触れてください。
モード切り替えができない	照射ボタン/モード選択ボタンを長押しする時間が短い	照射ボタン/モード選択ボタンを長押し(3秒間)してください。
電源が切れる	5分間操作していない	電源を入れた状態で5分間操作がないと自動で電源が切れます。

商品についてのお問い合わせ窓口は下記まで

株式会社ジャパンギャルズSC

☎ 0120-62-6670

受付時間 9:00~18:00 (土日祝日を除く)

japangalssc.jp