

品質保証書

このたびは、エステナード リフティをお買い求めいただきましてありがとうございます。本器は厳重な検査を行い高品質を確保しておりますが、通常のご使用において万一不具合が発生しました場合、保証規定によりお買い上げ後1年間は無償修理いたします。万が一、故障が生じた場合は、下記お問い合わせ先までご相談ください。

*本器の保証は、日本国内で使用の場合に限ります。 This warranty is valid only in Japan.

品名 エステナード リフティ 型番 K-ESL

お名前

ご住所

TEL

販売店

お買い上げ年月日

*お買い上げ年月日が記載されている「お買上明細書」と一緒に保管してください。

保証規定

- ①取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
- ②本体・電源アダプターが保証対象となります。(USBケーブルの断線と充電電池は保証対象外となります。)
- ③無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、商品と本書をご用意の上、発売元までご相談ください。
- ④無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。●使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷・公害・異常電圧。●お買い上げ後の輸送・転倒・落下等による故障及び損傷。●火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変による故障及び損傷。●本書の提示が無い場合。●本書に記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。●充電電池などの消耗品の部分交換の場合。●故障の原因が本製品以外に起因する場合。●車両・船舶などに搭載された場合の故障及び損傷。●一般家庭以外(例えば業務用など)にご使用された場合の故障及び損傷。
- ⑤本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ⑥この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものではありません。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。無償修理期間経過後の修理等については有償といたします。
- ⑦保証書に記載された個人情報、対象製品の保守サービス・安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。

発売元

健康コーポレーション株式会社
東京都新宿区北新宿2-21-1
info@kenkoucorp.com

お問い合わせ

0570-550-018 通話料
お客様負担
受付時間 10:00~20:00(年末年始・日祝日を除く)

安全上のご注意

●この製品を安全に正しくご使用していただくために、ご使用前は必ず[安全上のご注意]をよくお読みになり十分に理解してください。●お読みになった後は手元においてご使用ください。●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

図記号について



① 記号は禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な注意内容は①の中や近くに文章や絵で示します。



この記号は強制(必ず守ること)を示します。具体的な内容は、近くに文章で示します。左図は“特定しない一般的な使用者の行為”を示します。

⚠ 危険

守らないと生命や身体に重大な被害を負うことが想定される内容



●誤動作を招く恐れがありますので、下記のような医療用電子機器との併用は絶対にしないでください。①ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器②人工心肺などの生命維持用電子医療機器③心電計などの装着型の医療用電子機器●やけどや感電の恐れがありますので指定以外のご使用をなさらないでください。

⚠ 警告

守らないと生命や身体に重大な被害が発生することが想定される内容



次のような人または部位には、絶対にご使用にならないでください。<人>●心臓に疾患がある人●医師の治療を受けている人●急性疾患/有熱性疾患/感染性疾患/結核性疾患の人●顔面神経痛の人●ケロイド体質の人●金属アレルギーの人●その他体調がすぐれない人(37度以上の熱があるとき・血圧に異常があるとき・頭痛のあるとき)●皮膚に異常がある人(アトピー性皮膚炎の人・アレルギー体質で特に肌が敏感な人・化粧品による皮膚炎を起こしている人・過度の日焼けで肌が赤くヒリヒリし、炎症を起こしている人・ニキビが化膿し(黄ニキビ)、炎症を起こしている人・かゆみやほてりのあるシミや、病的な(内臓疾患などによる)シミのある人)●ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で、毛細血管拡張を起こしている人●ぜんそくの人●血友病患者●悪性腫瘍のある人●飲酒中や薬を服用中の人●疲労の激しい人●痛覚・知覚に障害のある人●インプラント・歯の矯正治療をしている人●妊娠中の人●生理中の人●授乳中の人<部位>●心臓の上●陰部●眼球部分●上まぶた●耳●喉ぼとけの周辺●口の中など粘膜の部位●皮膚疾患のある部位●肝斑●傷口●悪性腫瘍●顔面黒皮症●体内に金属やプラスチック・シリコンなどを埋め込んでいる部位●整形をされた部位●指定部位以外※通院中の方は医師にご相談の上、ご使用ください。



●本体に異常を感じた場合は、ただちに電源を切りご使用を中止して発売元に連絡してください。●指定の使用方法以外の目的にはご使用にならないでください。●感電事故の恐れがありますので、他の電気製品(美容器など)との同時使用はしないでください。●火災・感電・故障の原因になりますので異物を本体内部に入れないでください。●コンタクトレンズは、ご使用前に外してください。●強いショックを受ける恐れがありますので必ず身に付けている全ての金属類(ベルト・ネックレスなど)を外してください。●ヘッドを同じ箇所にあて続けしないでください。必ず肌の上を動かしながらご使用ください。●ヘッドが高温になる場合がありますので電源を入れた状態で放置しないでください。



ご使用後は必ずコンセントからACアダプターを抜いてください。また、濡れた手で抜き差しはしないでください。守らないと火災や発火の恐れがあります。

⚠ 注意

守らないと軽傷程度の被害または物損事故の発生が想定される内容



次のような行動または操作を守らないと、事故や故障の恐れがあります。●身体に異常(気分が悪くなる・痛みを感じる)特に発赤・カブレなどの皮膚の異常を感じたら直ちにご使用を中止してください。●3ヶ月以上ご使用にならなかった場合、発売元で点検(有償)を受けてください。本体内部に埃などが付着し、発火などの恐れがあります。●感電などの恐れがあるのでご自分での点検は絶対に行わないでください。●破損した製品はご使用にならないでください。●本体・電源アダプターの上に重い物を置いたり、衝撃(高い所からの落下など)を与えないでください。●本体・電源アダプターは濡らさないでください。●お手入れをするときはシンナー・アルコール・ベンジン・灯油などの溶剤や薬品類・磨粉・油分などはご使用にならないでください。●ご使用中に停電または雷が降りだしたら、ただちにご使用を中止してください。●USBケーブルは極端に折り曲げたり引っ張ったりしないでください。



温度・湿度の高い所での使用や保管はおやめください。強い電気ショックを受けたり、やけどや感電の恐れがあります。



乳幼児の手の届かない場所で保管し、乳幼児へのご使用をおやめください。



自分で意思表示ができない方へのご使用や、身体の不自由な方だけのご使用はおやめください。



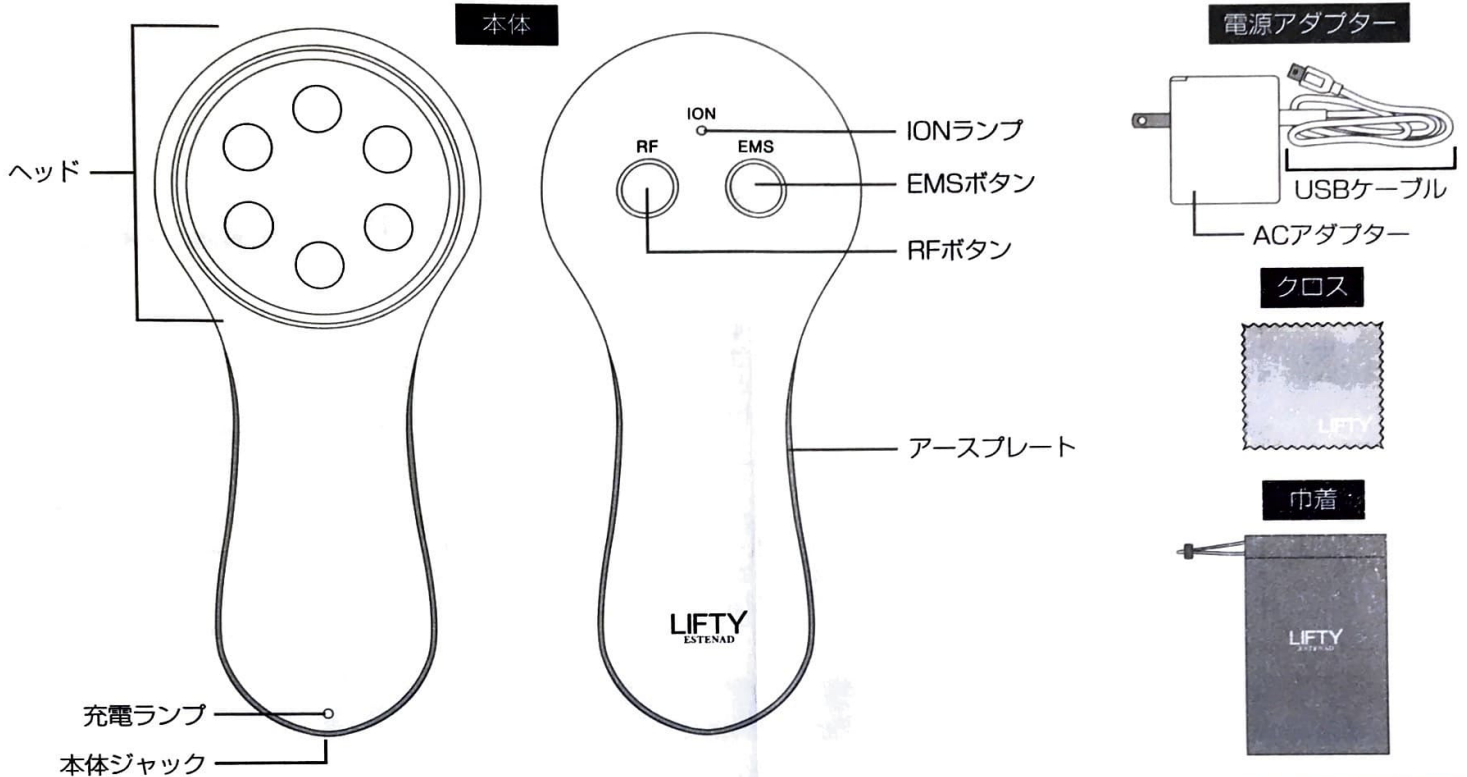
直射日光の当たらない場所で保管してください。

付属の電源アダプター以外をご使用されてトラブルなどが起きた場合は、一切責任を負いかねます。

充電電池の消耗を抑えるため、長期間ご使用にならない場合でも1か月に1度、充電することを推奨します。

セット内容


- 本体 ●電源アダプター ●取扱説明書(本書) ●巾着 ●クロス



製品仕様

サイズ	本体：約W68×D58×H154mm
	ACアダプター：約W29×D47×H60mm
重量	本体：約132g
	ACアダプター：約83g
定格電圧	AC100V-240V (50/60Hz)
充電端子	Micro USB
充電時間	約4時間
連続使用時間	最大約30分(RF+EMSモード・出力レベル強で使用した場合)
使用充電電池	リチウムイオン電池 (Li-ion)

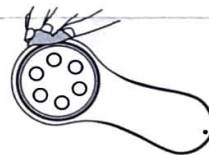お手入れ方法



本体 ご使用后、本体に付着したジェルや化粧水をティッシュなどで拭き取った後、付属のクロスで軽く拭いてください。

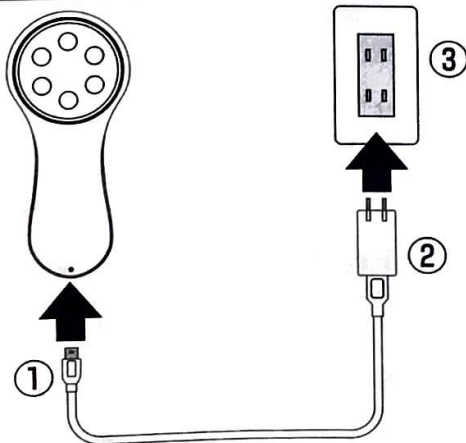
薬品類・洗剤・オイルのご使用や水洗いは故障や変形・変色の原因となるため、お控えください。



クロス クロスは直接、石鹸や洗剤などをつけずに手洗いでよくすすぎ、陰干ししてください。

充電方法

本体をご使用中は充電できません。



- ① USBケーブルを本体ジャックに差し込んでください。
- ② ACアダプターとUSBケーブルを接続してください。
- ③ ACアダプターをコンセントに差し込んでください。

充電中	充電ランプが赤色に点滅
満充電	充電ランプが緑色に点灯

- ④ 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜き、USBケーブルを本体から抜いてください。

電池の残量が少なくなると、「ピピピー」という電子音とともに自動的に電源が切れますので充電してください。

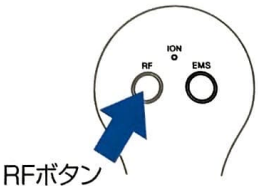
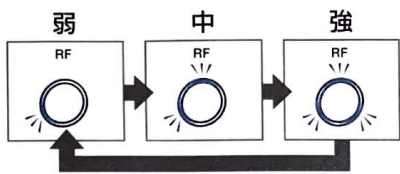
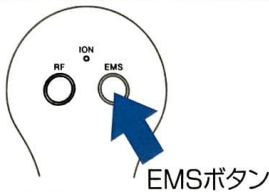
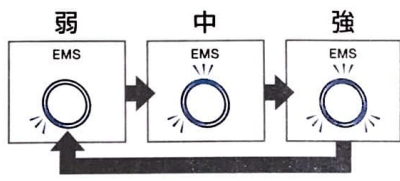
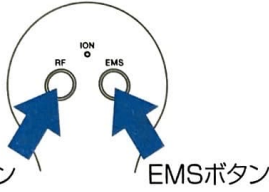
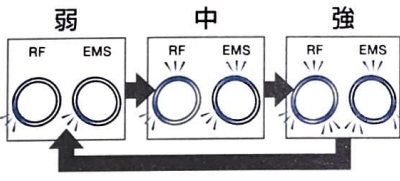


●感電の恐れがありますので濡れた手でケーブルを接続しないでください。●ショートを起こす恐れがありますので、USBケーブルと本体を先に接続してください。●充電を行いつつご使用になると、本体・充電器を傷める可能性があるのをおやめください。

充電中にエラーが発生した場合は、充電ランプが緑色に点滅します。USBケーブルを本体ジャックに接続し直しても充電ランプが緑色に点滅している場合は、充電を中止して発売元へご連絡ください。


各モードについて

全てのモードにIONが搭載されているため、常時IONランプが点灯します。

モード	ボタン	機能	出力レベル(3段階)
RFモード (RF+ION)		肌の深部まで温めながら、塗布したジェルなどの美容液成分の浸透*をサポートします。(*角質層)	
EMSモード (EMS+ION)		表情筋を刺激することで、肌の引き締めをサポートします。塗布したジェルなどの美容液成分の浸透*をサポートします。(*角質層)	
RF+EMSモード (RF+EMS+ION)		肌を温めながら筋肉を刺激し、ハリのある肌へアプローチします。塗布したジェルなどの美容液成分の浸透*をサポートします。(*角質層)	

基本のご使用方法

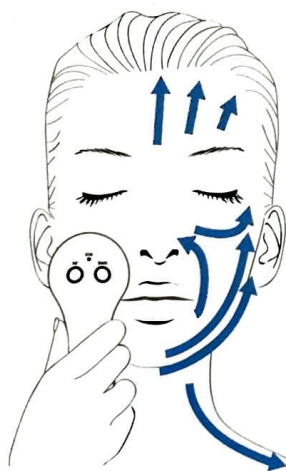本製品は筋肉や肌の内部に直接刺激を与えることで肌の引き締めや美容成分の浸透*をサポートする家庭用美容機器です。(*角質層) 電気刺激の体感には個人差があり、皮膚が薄い部分やその時の肌状態によっては痛みを感じる場合がございます。ご使用前に、必ず本書の「安全上のご注意」をご確認ください。



ご使用の目安
顔全体で
約5分



アースプレート

アースプレートに必ず触れるように持ってください

アースプレートとヘッドが同時に肌に触れることで、RF・EMS・IONの電気刺激が肌へ伝わります。(以下通電) そのため、アースプレートに必ず触れてご使用ください。

- 洗顔後の清潔な肌でご使用ください。
- ① トリートメント箇所(顔・デコルテなど)にジェルまたは化粧水をたっぷり馴染ませます。
- ※ ジェルや化粧水のようなとろみのある液体は、通電をよくし、肌摩擦によるトラブルも防げるため、必ずご使用ください。
- ② お好きなモードのボタンをそれぞれ長押しし電源を入れます。更に、ボタンを短押しし出力レベルを調整します。

ボタン長押し	電源ON・OFF
ボタン短押し	出力レベル調整(弱・中・強)

- RF+EMSモードの場合：各ボタンをそれぞれ長押しし、電源を入れてください。出力レベルもそれぞれのボタンで個々に調整できます。
- ※ 初めてご使用する場合や美顔器に慣れるまでは「弱」でご使用することを推奨いたします。

- ③ 側面のアースプレートに触れるように本体を握ります。

- ④ ヘッドを肌に軽くあて、下から上に滑らせながら、ゆっくり動かします。(左図参照)
- ※ 滑りが悪くなってきたらその都度、基礎化粧品を塗布してください。

- ⑤ ご使用しているモードのボタンを長押しし、電源を切ります。
- RF+EMSモードの場合：各ボタンをそれぞれ長押しし、電源を切ってください。

- 本体を操作する際は、ヘッドを肌に当てたままでなく、肌から離れた状態で行ってください。
- 最初にボタン操作を行ってから10分経過すると、「ピー」という電子音とともに自動的に電源が切れます。
- ご使用中にRFボタンとEMSボタンを同時に押すと、強制的に電源が切れます。

よくあるご質問

- Q** 使用できない部位やその他使用制限はありますか？
- A** 心臓、眼球部分、陰部、上まぶた、喉もとけ周辺などの部位にはご使用にならないでください。また、金属アレルギーの方、妊娠中の方、授乳中の方、生理中の方、皮膚に異常がある方、インプラント・歯の矯正治療をしている方などもご使用にならないでください。詳細に関しては、本書の「安全上のご注意」に記載しておりますので、ご確認ください。
- Q** ピリピリ感じますが、大丈夫ですか？
- A** 搭載しているRF-EMS機能の電気刺激によるものです。美顔器に慣れるまでは「弱」でご使用することを推奨いたします。強い痛みを感じた場合は、ご使用をお控えください。
- Q** ジェルまたは化粧水を塗ってからでないと思いませんか？
- A** 通電を良くし、肌摩擦によるトラブルを防ぐため、トリートメントの際はジェルまたは化粧水をたっぷり馴染ませてからご使用ください。
- Q** どんなジェルや化粧水を使えばいいですか？
- A** 美顔器を肌にあてて動かす際に、すべりが良くなるものであれば構いません。通電を良くするために設計した、エステナードシリーズのジェルのご使用を推奨いたします。
- Q** お化粧の上からでも使えますか？
- A** お化粧の上などの乾燥状態の肌では通電しにくく、肌摩擦も起きやすくなってしまいます。そのため、洗顔後の清潔な肌にジェルや化粧水をつけ、美顔器のすべりを十分に良くした状態でご使用ください。
- Q** RFモード(またはEMSモード)の体感が強い
- A** 最初は「弱」からご使用することを推奨いたします。「弱」でも強い痛みを感じる場合は、ご使用をお控えください。

- Q** RFモード(またはEMSモード)の体感が弱い/ない
- A** ・ジェルや化粧水を塗布していますか？
→塗布していないとRF(またはEMS)の電気刺激が伝わりにくくなってしまいます。
滑りが悪くなってきたら、再度ジェルを塗布してください。
・動かすスピードが速くないですか？
→トリートメントする際、美顔器をゆっくり動かすことでより体感を得やすくなります。
・アースプレートに触れていますか？
→RF-EMS-IONはアースプレートとヘッドが同時に肌に触れることで電気刺激が伝わります。
そのため、必ずアースプレートに触れてご使用ください。
・レベルが「弱」ではありませんか？
→初めて使用する場合や慣れるまでは「弱」でご使用することを推奨しておりますが、慣れてきたら少しずつレベルを上げてお好みの強さでご使用ください。
ただし、体感には個人差があります。
- Q** IONの出力レベル調整は出来ないのですか？
- A** IONはRF-EMSなどの電気刺激と違い、心地よさの体感に個人差がありませんので、出力レベルが一定となっております。
- Q** どのくらいの頻度で使用すればいいですか？
- A** 毎日ご使用すると、EMSの電気刺激は顔の筋肉(表情筋)疲労を起こす恐れがあるため、週2~3回程度を推奨いたします。
- Q** お風呂で使用できますか？
- A** 本製品は防水仕様ではございませんので、お風呂ではご使用にならないでください。
- Q** 肌に異常が出た時、どう対処したらいいですか？
- A** ご使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。

故障かな?と思ったら

- 症状** 電源が入らない/ランプがすぐに消える・点灯しない/薄くなった
- 原因** 本体の充電残量が少なくなっている可能性がありますので、充電を行ってください。
- 症状** 使用中に電源が切れる
- 原因** 最初にボタン操作を行ってから10分経過していませんか？最初にボタン操作を行ってから10分経過すると、自動的に電源が切れます。
- 症状** 充電ができない/充電ランプが点灯しない
- 原因** 電源アダプターと本体ジャックがしっかり接続されていない可能性があるのもう一度接続し直してください。また、本体の電源が入っていたり、本体のご使用中は充電ができないため充電ランプも点灯しません。
- 症状** 充電中「キーン」という音がする
- 原因** 製品の特性上、充電中に音が出ることがありますが異常ではありません。

- 症状** 本体が熱い
- 原因** 製品の特性上、使用中や充電中に本体が暖かくなりますが、異常を感じる際はご使用を中止し、発売元へご連絡ください。
- 症状** 使用中、カチッと音がする
- 原因** 製品の特性上、ION出力の際に約5秒間隔でカチッと音がしますが異常ではありません。
- 症状** 肌に触れた時、静電気のようにビリッとくる時がある
- 原因** RF-EMSの特性上、静電気のような電気が肌に流れる場合があります。ジェルを多めに塗布していただくことで軽減できますので、ジェルが乾いてきたら再度塗布してください。
- 症状** どのモードでもIONの体感が弱い
- 原因** IONは肌へ伝わる電気刺激が非常に微弱なため、ほとんどの人に体感がありません。
- 症状** RF-EMSボタンを押したのに、IONランプが点灯している
- 原因** RFモード・EMSモード・RF+EMSモードの全てのモードにIONが搭載されておりますので、IONランプが点灯いたします。

廃棄する場合

本器およびパッケージなどをゴミとして廃棄する場合は、お住まいの市町村の定める区分に従ってください。