


6 操作方法


アダプターの接続 (アダプターでご使用する場合)

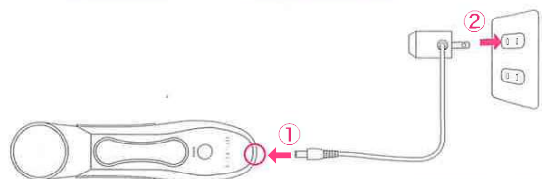

- ①アダプタープラグを本体ジャックに差し込んでください。
- ②アダプターをコンセントに差し込んでしっかりと接続してください。

<危険> ●感電の恐れがありますので濡れた手でコードを接続しないでください。 ●ショートを起こす恐れがありますので、アダプタープラグと本体を先に接続してください。 ●アダプターでご使用する場合は、電池を取りはずしてください。

電池のセットのしかた (電池でご使用する場合)

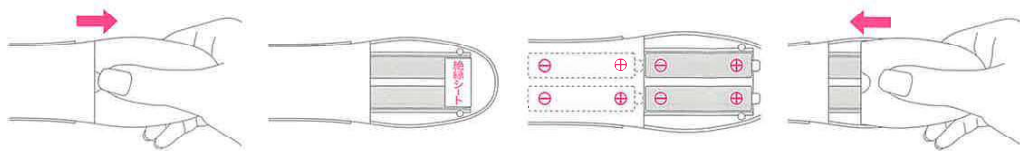

- ①本体背面の電池カバーを軽く押しながら矢印の方向にスライドさせて開けてください。
- ※はじめてご使用になる際は、紙(絶縁シート)を引き抜いてください。
- ②電池の向きを間違えないように、**単三形アルカリ乾電池(4本)**をセットしてください。
- ③電池カバーを矢印の方向に力チャツと音がするまで閉めてください。

<電池の交換時期> ●電流が入らなくなった・ブザー音が小さくなった・液晶画面の表示が薄い・点滅する・点灯しなくなった場合は、新しい電池と交換してください。(マンガン乾電池・海外製品・充電式の二次電池はご使用にならないでください。) **<注意>** ●付属の電池はテスト用電池のため、ご使用後すぐに残量がなくなる場合があります。 ●電池をセットしたまま長期間放置すると、液漏れの恐れがありますので長期間ご使用にならない場合は、電池を取りはずして保管してください。

電源スイッチ操作



※最後に電源スイッチを押してから10分経過しますと「ピー」と鳴り、電源が自動的にOFFになります

7 トリートメント方法

△ ご注意



△ 危険
電源を入れた状態で放置するとヘッド部が高温になる場合があります。ご使用前は、必ずヘッド部の温度を指先で確認してご使用ください。




耳の付近でトリートメントを行うと「キーン」という昇圧回線の音や「ジー」という耳小骨への骨伝導による音が聞こえる場合がありますが、故障ではございません。



眼球部分・上まぶた・喉ぼとけ周辺はご使用にならないでください。
1カ所に長時間固定したままにせず少しずつ移動させてください。
ジェルを付けずに強くお肌をごすらないでください。

Wモード (ソニック[弱]&イオン⊖)

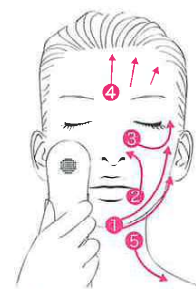

ご使用の目安
●1日1回程度 (用途によって異なります)
●お顔全体で約5分




出力はアースプレートに手が触れた状態で、ヘッド部とお肌に触れた時、「ピッ」と鳴り液晶画面に[SKIN SENSOR]が表示されてスタートします

- ①ジェルを500円硬貨大にとり、お顔半分にあく等に伸ばしてください。
- ②本体の電源スイッチを1回押します。**[Wトリートメント]**が画面に表示されます。
- ③ヘッド部をお肌に軽く押しあて、円を描くように**下から上にひきあげ、ゆっくり移動**させてください。(左図参照)
- ④ご使用後は電源OFFにして、本体に付着した汚れをティッシュや柔らかい布などでよく拭き取ってください。
※汚れの拭き残しは、ヘッド部の腐食の原因となりますのでご注意ください。
※アダプターでご使用した場合は電源OFF後、本体とコンセントからアダプターを取りはずしてください。



※お肌が乾いてきたらトリートメント部位に再度、ジェルを塗布してください

リフトモード (ソニック[強])

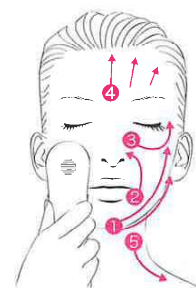

ご使用の目安
●1日1回程度 (用途によって異なります)
●お顔全体で約5分



出力はアースプレートに手が触れた状態で、ヘッド部とお肌に触れた時、「ピッ」と鳴り液晶画面に[SKIN SENSOR]が表示されてスタートします

- ①ジェルを500円硬貨大にとり、お顔半分にあく等に伸ばしてください。
- ②本体の電源スイッチを2回押します。**[リフト]**が画面に表示されます。
- ③ヘッド部をお肌に軽く押しあて、円を描くように**下から上にひきあげ、ゆっくり移動**させてください。(左図参照)
- ④ご使用後は電源OFFにして、本体に付着した汚れをティッシュや柔らかい布などでよく拭き取ってください。
※汚れの拭き残しは、ヘッド部の腐食の原因となりますのでご注意ください。
※アダプターでご使用した場合は電源OFF後、本体とコンセントからアダプターを取りはずしてください。



※電池の消耗が早くなりますのでアダプターモードでのご使用をおすすめします
※お肌が乾いてきたらトリートメント部位に再度、ジェルを塗布してください

クリアモード (ソニック[弱]&イオン⊕)





ご使用の目安
●週1回程度 (用途によって異なります)
●お顔全体で約5分



出力はアースプレートに手が触れた状態で、ヘッド部とお肌に触れた時、「ピッ」と鳴り液晶画面に[SKIN SENSOR]が表示されてスタートします

- ①市販のコットンをお肌にあく等に含ませてください。 ※コットンとアースプレートが接触しないようにセットしてください。
- ②本体の電源スイッチを3回押します。**[クレンジング]**が画面に表示されます。
- ③ヘッド部をお肌に軽く押しあて、1カ所につき約**10秒程度あて**てください。(左図参照)
- ④ご使用後は電源OFFにして、コットンをはずしてください。ご使用済みのコットンは捨て、本体に付着した汚れをティッシュや柔らかい布などでよく拭き取ってください。
※汚れの拭き残しは、ヘッド部の腐食の原因となりますのでご注意ください。
※アダプターでご使用した場合は電源OFF後、本体とコンセントからアダプターを取りはずしてください。

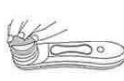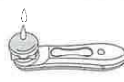

※コットンに含ませた水が乾いてきたら、補充してください