


Ulike

Air3 IPL 光美容器

取扱説明書

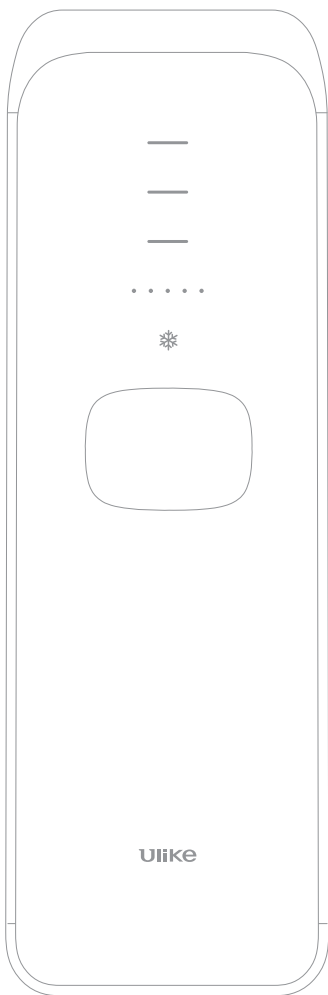

はじめに

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。保証書は取扱説明書とともに大切に保管してください。

使用中に不具合が発生した場合は、弊社までお問い合わせください：

050-5479-9151

10:00 ~ 17:00 ※土・日・祝日除く

jpsupport@ulikeglobal.com

目次

製品特長	P.02
安全上のご注意	P.03
ご使用前の前に	P.09
同梱品	P.10
各部の名前(本体)	P.11
使用可能部位と照射周期	P.12
使用前の準備	P.13
使い方	P.15
ご使用後	P.19
メンテナンスと保管	P.20
よくあるご質問	P.21
保証とアフターサービス	P.23
製品仕様	P.24
保証書	P.25

製品特長

サファイア冷感技術(肌冷却機能)

照射口の平面ヘッドには、サファイア冷感技術を採用しています。照射後の皮膚表面を効果的に冷やし肌を落ち着かせるため、熱傷ややけどがおこりにくくなります。

サファイア平面ヘッドは、拭くだけで汚れが取れる簡単設計になっています。

高寿命ランプ

交換不要の一体型ランプホルダーを使用しており、複数の部位(顔、ワキ、腕、脚、VIO など)にお使いいただけます。

高価なランプユニットや消耗品を買う必要はありません。

フィルタリングシステム

弊社独自のフィルタリングシステムにより、光美容に効果のない短波長と有害な光線を排除し、効果のある有効波長を最大限に照射します。

コンパクト設計




コンパクトで持ち運びにも便利です。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
--	--


安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

危険

肌や身体へのトラブルを防ぐために

-  ● 目には直接照射しない
(失明や目を傷める原因)
- 持病や精神疾患のある人、本製品の使用に不安がある人は使用しない
(誤った使い方による肌トラブルの原因)
-  ● 本書をよく読み、本製品の特長と安全上のご注意を理解できる人のみ使用する
(誤った使い方による肌トラブルの原因)

本体は

-  ● 吸排気口をふさいだまま使用しない
(火災ややけどの原因)
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない
(やけど・感電・けがの原因)



- 18 歳未満の人は使用しない
- 18 歳未満の人の近くで使用しない
(やけどや肌トラブルの原因)



- ランプ照射口にいかなるものも入っていないことを確認してから使用する
(火災・やけど・けがなどの原因)

お使いのときは



- 可燃性爆発物(スプレーやガソリンなどを含む)の近くで使用しない
(火災や感電の原因)



警告

肌や身体へのトラブルを防ぐために



- 照射後すぐのワキには、制汗剤を使用しない
- 照射後 48 時間は、照射した部分に紫外線をあてない
(毛囊炎の原因)



- 使用後、肌に激しい痛みがある場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する
(症状悪化の原因)

異常・故障時には



- 直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
(火災・感電・けがの原因)

< 異常・故障例 >

本体、アダプター、コードが

- 変形したり異常に熱い
- こげ臭いにおいがする
- 使用中に異常な音がする

→ すぐに、弊社の「お問い合わせ窓口」(P.25)までご連絡ください

電源は



- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない
(感電やけがの原因)
- コードや電源プラグを傷めない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、
重いものを載せる、挟み込む など
- AC アダプター・電源コードが傷んだり、コンセントへの
差し込みがゆるいときは使用しない
(やけど・感電・ショートによる火災などの原因)
- 専用の AC アダプター・電源コード以外は使用しない
また、専用の AC アダプター・電源コードを他の商品に
使用しない
(やけどやショートによる火災などの原因)
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)



- 電源プラグ・アダプター用プラグは、根元まで確実に
差し込む
(火災や感電の原因)
- 掃除の際は、電源プラグをコンセントから抜く
(感電やけがの原因)
- 電源プラグ・アダプターソケット・アダプター用プラグに
ほこりが付着しないように定期的に掃除する
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)
→ 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください

本体は



- 電源を入れても内蔵ファンが動かない(ブンブンという
音がしない)場合は使用しない
(発火による火災などのおそれ)



- 使用前後は、本体やランプ照射口の汚れを確認し、
清掃する
(火災・やけど・けがなどの原因)

本体・ACアダプター・電源コードは



- 浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない
(感電や火災の原因)
- 水につけたり、水洗いしない
- 浴室や湿気の多い所で使用しない
(感電やショートによる火災の原因)

お使いのときは



- 衣類や髪の毛、黒いものに照射しない
(焦げたり、変色する原因)
- 磁気の影響を受けるものの近くで使用しない
(本製品の磁気がペースメーカーの作動に影響を与えるおそれ)
- ペットに使用しない
(けがの原因)

照射するときは



- 同じ箇所に繰り返し照射しない
(やけどや肌トラブルの原因)



- 付属のゴーグルを着用し、ランプ照射口を肌に密着させて使用する
(目を傷める原因)

注意

肌を守るために



- 次のような人は使用しない
 - 生理中や妊娠中、授乳中の人
 - アレルギー体質やケロイド治療中、敏感肌など肌の弱い人
 - 糖尿病や皮膚病、アレルギー性皮膚炎のある人
 - 光線過敏症と診断されたことがある人

- 皮膚に損傷(例：やけど、水疱、切り傷、皮膚疾患、細菌による感染症状など)がある人
- 重度心臓病、中・重度高血圧、悪性腫瘍、毛囊炎、感染性皮膚病、熱傷性皮膚病を患った人
- アスピリン、免疫抑制剤、イソトレチノイン、抗凝固薬などの薬を服用中の人
- コラーゲン代謝異常を患った人
(瘢痕既往歴や創傷治癒不良既往歴のある人を含む)
- 免疫疾患を患った人
(HIV 感染症、紅斑性狼瘡、ポルフィリン症などを含む)
- 出血性疾患を患った人
(フルーツ酸(AHA)、サリチル酸(BHA)またはアゼライン酸)を服用している人への使用は禁止されています)
- フィラー(充填剤)や毒素製剤を注射した人



- **エッセンシャルオイル類と一緒に使わない**
(肌トラブルの原因)



- **薬を継続して服用している人は医師に相談する**
(服用される薬によっては肌が光刺激に敏感になり、肌トラブルの原因)
- **直近 30 日以内に化学的な治療方法でムダ毛ケアをした人で、短期間内に肌美白製品を使った人や、ビタミン A を含んだ化粧品を使った人は、期間を置いてから本製品を使用する**
(肌トラブルの原因)

電源は



- **電源プラグ・器具用プラグ・アダプター用プラグにピンやゴミを付着させない**
(感電やショートによる火災などの原因)
- **収納時にコードをアダプターや本体に巻きつけない**
(コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因)
- **電源プラグ・器具用プラグ・アダプター用プラグを抜くときは、コードを持って抜かない**
(感電やショートによる火災などの原因)



- **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く**
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

お使いのときは




- ご使用前に本体や照射口の変形・割れ・破損がないか確認する
(肌を傷つけたり、けがの原因)

照射するときは



- 下記の場合や部位には使用しない
 - 髪の毛、眉毛
 - 整形、手術部位
 - ニキビ部位
 - 肝斑(かんぱん)や痣など暗褐色または黒色の肌部分
 - 大静脈
 - タトゥー、ボディペインティングの施術箇所
 - 日焼けした部位
 - 静脈瘤や血管拡張症などの血管疾患を患っている部位
 - 単純ヘルペス、皮膚病変、血種の治療部位

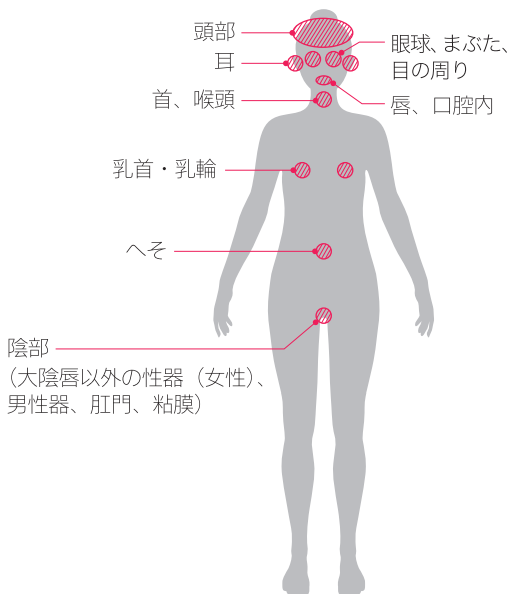

- 使用時や使用直後に以下の高温部に触れない
 - 照射口、照射口内部
(やけどの原因)

ご使用の前に

本書をよくお読みになり、いつでも確認できるよう大切に保管してください。

必ず本書に記載された使用方法に従いご使用ください。

本製品の取り扱いについて

- 本製品に強い振動や衝撃、圧力をかけないでください。
- 使用後は、電源を切ってください。電源が入っている状態で放置しないでください。
- 使用推奨温度は5℃～30℃です。
- 使用環境の温度差が20度以上(低温から高温に移行、またはその逆)になった場合は、電源を切って本製品を約2時間放置し、本体が周囲の温度になじんでから再び使用してください。
- 直射日光や紫外線ランプの下に長時間放置しないでください。
- 本製品は、防水仕様ではありません。入浴中やシャワー中は使用できません。使用前後は、本体や電源アダプターなどが濡れていないことを確認してください。

使用について

- 暗い所では使用しないでください。
- 治療目的の使用はできません。
- 本製品を使用する際は、ケアする部位が乾いている必要があります。保湿液などを使用した場合は、完全に肌に吸収されるまでお待ちください。
- 本製品の連続使用可能時間は1時間です。1時間使用した場合は、一度電源を切り、10分は本体を休ませてください。10分後から再度使用いただけます。
- 本製品を使用中に一時置くときは、必ず背面の排気口と吸気口を上に向けて置いてください。




副作用について


- 次のような副作用をおこす場合があります。
 - 皮膚の熱傷(やけど)
 - 局所の腫れ
 - 毛囊炎、水疱
 - 紅斑、色素沈着
 - かゆみ、痛み
 - 傷跡

上記以外の副作用がおこる場合があります。本製品の使用に不安がある方は、事前に医療機関に相談してください。

同梱品

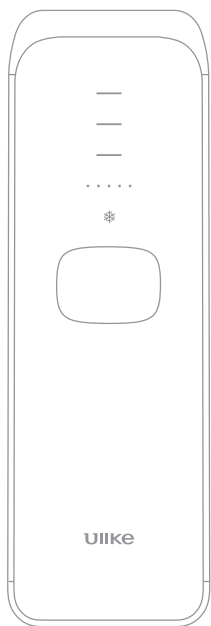

本体

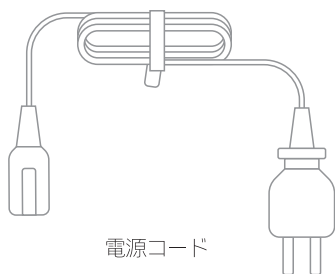

電源コード*




アダプター



取扱説明書




ゴーグル

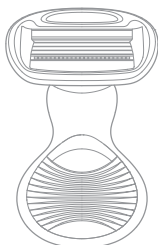


カミソリ

各部の名前（本体）

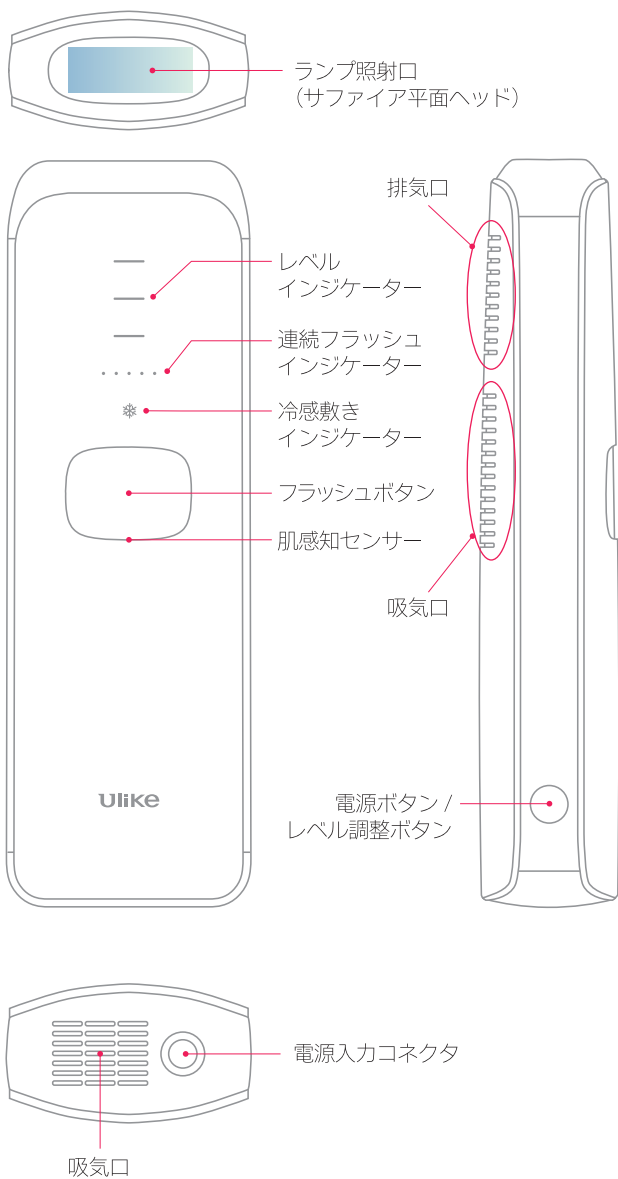

使用可能部位と照射周期

使用可能部位

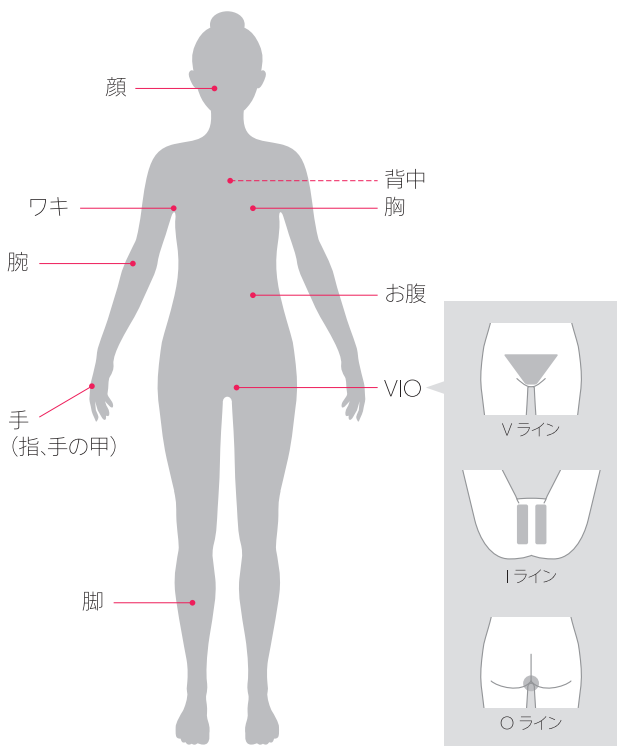

照射する周期について

1 ~ 4 週目

週 3 回使用

4 週目以降

2 週間または 1 か月に 1 回使用

使用前の準備

1 使用する部位を除毛する

① メイクなどを落とします。

- メイクや日焼け止め、香水などは洗い流してください。



② 除毛します。

- 照射前には必ず除毛してください。
- 毛を抜いたりせず、カミソリで剃ってください。



③ 洗い流します。

- 肌に付着した毛クズやシェービング剤などをしっかり洗い流してください。

④ ふき取ります。

- 肌に付着した毛クズ・水分・汗はしっかりとふき取ってください。
- 化粧水や保湿剤などを使用した場合は、完全に乾かし、脂分などが残っていないことを確認してください。

⑤ 肌に異常がないか確認します。



2 パッチテストを行う

初めて使用するときや、しばらく使用しなかったとき、出力モードを変更するときは、肌トラブルがおきないかを事前にチェックしてください。

- 詳しい使い方は P.15 ~ 18 をお読みください。



2 時間後にケアした部位を確認する



ソフトモードで使用できます。

- 出力モードを変えて照射する場合は、ボディモード→パワフルモードの順にパッチテストを行ってください。



使用を中止し、肌を冷却・保湿してから医師に相談してください。

- 照射レベルの強いモードでパッチテストした場合は、出力モードを下げてご使用ください。
出力モードの目安(P.16)


パッチテストで肌に異常がなかった場合でも、体質や体調によっては、肌が一時的に赤くなったり痛みが生じることがあります。

→ 2 時間ほど、様子を見てください。

使い方

1 電源を入れる

- ① 電源コードをアダプターに接続します。
- ② アダプターと本体を接続します。
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込みます。

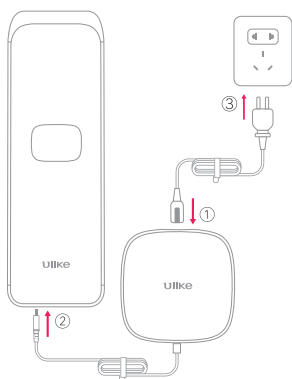


- ④ 電源／レベル調整ボタンを押します。
 - レベルインジケータと冷感敷きインジケータが点灯します。

(本体側面)



電源／レベル調整
ボタン

(本体正面)

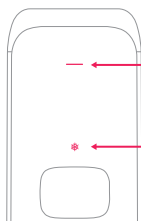

レベルインジケータ
(点灯)

冷感敷きインジケータ
(点灯)

2 出力モードを選ぶ

① 電源／レベル調整ボタンを押します。

- 押すたびに出力モードが切り替わります。
- 肌質に合わせて出力モードを調整してください。
(出力モードは、事前にパッチテスト(P.14)で確認したモードをご使用ください)



出力モードの目安

3段階で照射強度を設定できます。

ご自身の肌色と毛髪色を下図と照らし合わせて出力モードを設定してください。


毛髪色 \ 肌色	ホワイ	ベージュ	ライト ブラウン	ミドル ブラウン	ダーク ブラウン	ブラウン-ブラック 及びもっと深い色
	ホワイ/グレー	×	×	×	×	×
レッド	×	×	×	×	×	×
ライトゴールド	×	×	×	×	×	×
ダークゴールド/ ライトブラウン	=/≡	=/≡	=/≡	-/≡	×	×
ブラウン	=/≡	=/≡	=/≡	-/≡	×	×
ダークブラウン	=/≡	=/≡	=/≡	-/≡	×	×
ブラック	=/≡	=/≡	=/≡	-/≡	×	×

— ソフトモード、 = ボディモード、 ≡ パワフルモード、 × 使用できません。

- 照射後は、肌に熱を感じることがあります。
痛みや違和感がある場合は、出力モードを照射レベルの弱いモードに変更してください。
- 初めて使用するときは、ソフトモードから使用してください。
- 肌色が濃い人は皮膚アレルギーをおこしやすいので、ソフトモードまたはボディモードをおすすめします。

3 肌に照射する

- ① 付属のゴーグルを着用します。
- ② 脱毛する部位にランプ照射口を押しあてます。
 - 肌感知センサーが点灯します。
- ③ 肌感知センサーが点灯した状態でフラッシュボタンを押します。
 - 押すたびに 1 回照射されます。
(ワンショット照射モード)

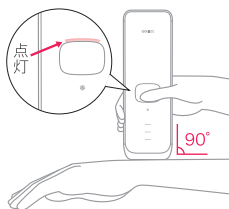

お肌に痛みややけどのような異常を感じたら

操作を 10 秒ほど中断し、ランプ照射口を冷ましてから再度使用してください。

照射モードについて

1 回ずつ照射することも、連続照射することもできます。
照射部位に合わせて照射モードを選んでください。

ワンショット照射モード 指、唇の周りなどの狭い部分

1 回ずつ手動で照射できます。

AI 連続照射モード 腕、足などの広い部分

連続で自動照射されます。

- ① 脱毛する部位にランプ照射口を押しあてます。
 - 肌感知センサーが点灯します。
- ② 肌感知センサーが点灯した状態で、フラッシュボタンを長押し(約 1.2 秒間)します。
 - 連続フラッシュインジケーターが点灯し、連続照射モードが始まります。
- ③ 脱毛する部位に対して 2 回ほど往復して使用します。
 - 照射部位にフラッシュが均等に当たるようにして、光漏れがないようにしてください。

均一に脱毛するポイント

照射間隔に合わせて肌にあてる位置を調整してください。

- 出力モードにより照射間隔が異なります。
ソフトモードの照射間隔: 短 / ボディモードの照射間隔: 長

上手に使用するコツ


熱感を軽減するには

連続して使用した場合、本体に蓄積されたエネルギーにより冷却効果が得られにくくなる場合があります。

その場合は、一箇所照射する毎に、照射した部位に照射口のサファイア平面ヘッドをあて、30秒ほど上下に往復させて肌を冷却してください。

これにより、肌を落ち着かせると同時に、サファイアの冷却効果を最大限に得られます。


もしご使用中にお肌に熱を感じた場合は、操作を10秒ほど中断し、ランプ照射口を冷ましてから再度使用してください。

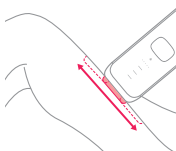

脱毛効果を得るために


照射時は、ランプ照射口を皮膚にしっかりと押しあて、毛嚢の根元に十分接触させます。

毛嚢がより多くのエネルギーを吸収し、より良い脱毛効果が得られます。また、サファイア平面ヘッドが皮膚に密着し冷やすため、よりよく皮膚を保護できます。

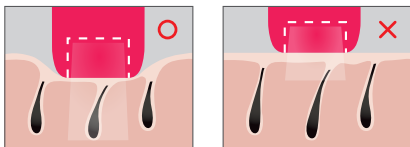

4 電源を切る

- ① 電源 / レベル調整ボタンを長押しして電源を切ります。
- ② コンセントから電源プラグを抜きます。
- ③ 本体からアダプターを外します。
- ④ 電源コードとアダプターを外します。

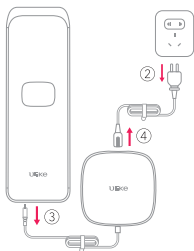


ご使用後

- 照射後 6 時間は、照射部位を水に濡らさないでください。
6 時間経過後に保湿液などで肌を保湿してください。



- 照射後 48 時間は、照射部位に紫外線をあてないでください。
外出する際は、日焼け止めを肌に塗ってください。

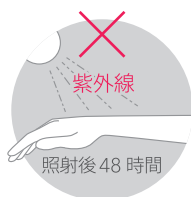

- 照射部位には、香水やシートマスク、スクラブ配合の化粧品類を使わないでください。



- 本製品の使用期間中は、エステサロンやその他の商品を併用しないでください。
- 本製品の使用期間中、もしくは使用後に整形手術をされる場合は、医師に相談してください。
- 肌に異常を感じた場合は、直ちに本製品の使用を中止し、医師に相談してください。

メンテナンスと保管


メンテナンス

正しくメンテナンスがされていない場合、本来の性能を十分に発揮できません。下記の手順に従ってメンテナンスをしてください。

- ① 本体の電源を切り、本体を冷まします。
- ② 本体に破損などがいないか確認します。
- ③ 柔らかいきれいな布で拭いて各部の汚れを取り除きます。



- スチールウールや研磨剤の入った洗剤（歯磨き粉など）や腐食性液体（ガソリン・オイル・アセトンなど）を使用してメンテナンスをしないでください。
- 汚れがひどい場合は、95% 以下の高濃度アルコールを数滴使用してください。

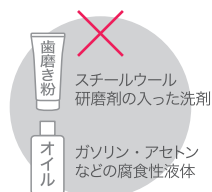

本体や付属品、アクセサリーは水洗いできません。

保管

本製品を長期間使用しないときは、ほこりが無く乾燥した室内（-10℃～60℃）で保管してください。

本製品を廃棄するときのお願い

一般生活ゴミと一緒に捨てないでください。
各地方自治体の指示に従って廃棄してください。

よくあるご質問

Q1 ムダ毛をあらかじめ処理するのはなぜですか？

A 本製品は、皮膚表面の体毛ではなく、毛囊中のメラニンに作用することで美容効果が得られます。皮膚表面の体毛をあらかじめ処理することで、毛囊にIPLフラッシュの効果を最大限作用させることができます。

Q2 どうすればサファイアの効果を最大限に得られますか？

A 冷感の効果をより長く持続させるには、一箇所照射する毎に、照射した部位に照射口のサファイア平面ヘッドをあて、30秒ほど上下に往復させてください。この動作により肌が落ち着き、サファイアの冷却効果がより高まります。

Q3 なぜ本製品を使用する際に、照射面を肌に完全に密着させないといけないのですか？

A 肌にしっかり密着させることで、照射エネルギーを十分に吸収させることができます。また、サファイア平面ヘッドを肌に触れさせることで、皮膚表面を冷やし、より安全に本製品を使用できます。

Q4 本製品を使用する前に、スキンケア商品を使ってもいいですか？

A 本製品を使用する際は、ケアする部位が乾いている必要があります。保湿液などを使用した場合は、完全に肌に吸収されるまでお待ちください。

Q5 使用サイクルと頻度はどれくらいですか？

A 1～4週目は、週3回ご使用ください。
4週目以降は、2週間または1か月に1回ご使用ください。

Q6 照射口から光が出ないことがあるのはなぜですか？

- A** 安全のため、照射口が肌に密着しないと光を照射しません。ご使用中は、必ず照射面が肌に垂直になるように接触させてください。
肌感知センサーが白く点灯すると、光を照射できます。

Q7 おすすめ照射レベルはどれくらいですか？

- A** 照射モードには3段階あり、「ソフトモード」→「ボディモード」→「パワフルモード」の順で照射レベルが高くなります。
初めて使用する場合は、照射レベルが一番低い「ソフトモード」からスタートし、適度なレベルになるまで少しずつ調整してください。
照射レベルが一番高いのは、「パワフルモード」になります。

保証とアフターサービス

以下の場合には保証を受けられませんのでお気をつけください。

1. 火災・地震・洪水などの予測できない天災による製品破損。
2. お客様による誤操作、使用上の誤り、その他、通常条件とは異なる環境下での使用による本製品の故障および破損。
3. お客様による本体の分解、または不適切な保管条件(ネズミ被害や液体浸透など)による本製品の破損。
4. 本製品の推奨使用環境外での使用による破損、または作業負荷を超えたことによる破損。
5. その他、弊社製品に起因しない故障や破損。
6. 本製品の機能、または使用による間接的損失(お客様の事業利益損失、事業中断、本製品使用によるその他の損失、本製品の使用に必要な交換部品、装置またはサービスによるコスト、お客様のクレームなど)については、弊社はその責任を負いません。

本製品をご購入の領収書と保証カードは再発行いたしませんので、大切に保管してください。

本製品を使用中に不具合が発生した場合は、弊社までお問い合わせください。

お問い合わせ窓口

使用中に不具合が発生した場合は、弊社までお問い合わせください：

050-5479-9151

10:00 ~ 17:00 ※土・日・祝日除く

jpsupport@ulikeglobal.com

製品仕様

基本パラメータ

Air シリーズ	仕様	
	製品名	: Air3 IPL光美容器
	製品モデル	: UI06
	寸法	: 179*58*34mm
	定格入力	: 24V≒2.8A
	定格出力	: 67.2W
	照射レベル	: 3段階
	照射面積	: 3.3cm ²
	出力波長	: 550-1200nm
	パルスタイム	: 0.4s-3s
	パルス繰り返し周波数	: 0.33Hz-2.5Hz
	製造者	: シンセンUlikeスマート 電子株式会社
	住所	: 中国広東省深セン市南山区 粤海街道科技园社区 科苑路8号訊美科技広場1号 楼810

保管・持ち運び条件		動作条件	
保管温度	-10℃~60℃	使用温度	5℃~30℃
湿度	≤90%RH	湿度	≤80%RH
相对压力	50kPa~106kPa	相对压力	80kPa~106kPa

Ulike

光美容器 保証書

本書は、「保証とアフターサービス」に記載の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店または、弊社の「お問い合わせ窓口」(ページ下部)にご連絡ください。

お客様にご記入いただいた保証書の記載内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

商品名				
保証期間		お買い上げ日から 本体2年間		
お買い上げ日 [※]		年	月	日
※ お客様	ご住所			
			
	お名前 様			
.....				
電話 () -				
※ 販売店	住所・販売店名			
			
	電話 () -			

※印欄に記入なきものは無効です。

保証規定や請求方法について詳しくは、以下のサイトをご覧ください。

<https://jp.ulike.com/pages/warranty-policy>

