


取扱説明書  
保証書付

COSBEAUTY

COSBEAUTY

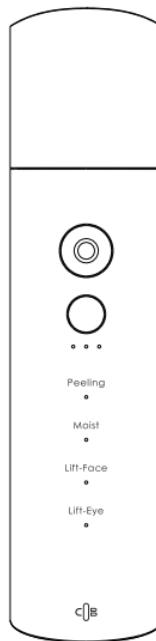

コスピューティー ローリープラス  
エアロビク スカルプター™ スキンケアエキスパート

このたびは、COSBEAUTY 製品をお買い上げ  
いただき、まことにありがとうございます。

本書は製品の説明書および保証書となります。  
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのう  
え、正しく安全にお使いください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの  
記入を確かめ、説明書とともに大切に保管し  
てください。

## 目次

目次	1
安全上の注意	2～8
各部名称・セット内容	9～11
仕様	12
ご使用の前に	13～18
プログラム一覧	19～20
Peeling Mode	21～22
Moist Mode	23～24
Lift - Face Mode	25～26
Lift - Eye Mode	27～28
お手入れ方法・保管方法	29
こんなときには	30～34
Q&A	35
保証と個人情報の取り扱い	36～37
保証書	38
お問い合わせ先	38

## 安全上の注意

●ご使用になる前に、こちらの「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産の損失を未然に防ぐものです。必ずお守りください。



### 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性があり、リスクの度合いが高いと想定される内容を示します。



### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



### 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは、家屋、家財、家畜、ペットに関わる拡大損害を示します。



### 禁止

禁止の行為であることを知らせるものです。



### 行為を強制

指示する内容を知らせるものです。

## 安全上の注意



危険

- 禁止 下記の電子機器との併用は絶対にしないでください。
- ペースメーカーなどの体内植込型医用電子機器。
  - 人工肺などの生命維持用医用電子機器。
  - 心電計等の装置型医用電子機器。
  - 他の治療器具との同時使用はしないでください。誤作動をまねく恐れがあります。



警告

- 禁止 次の人は医師と相談してご使用ください。
- アトピー性皮膚炎の方 ●アレルギー体质・金属アレルギーの方 ●特に肌が敏感な方 ●ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で、毛細血管拡張を起こしている方 ●心臓に障害のある方 ●急性（疼痛性）疾患のある方 ●悪性腫瘍のある方 ●顔面神経痛の方 ●妊娠中、授乳中の方 ●生理中の方 ●有熱性疾患の方 ●血圧異常の方 ●感染性疾患の方 ●結核症疾患の方 ●血友病疾患の方 ●歯の治療中の方 ●飲酒、薬を服用中、疲労が著しい方 ●目の手術をしたことがある方 ●強度の近視の方 ●現在病院で治療中の方

## 安全上の注意



警告

- 禁止 次の部位には使用しないでください。
- 目や耳のまわり、眼球及び上まぶた
  - 切り傷・整形手術をした部位
  - 口内や陰部、粘膜など
  - 医師の指示のもと通院を要している方
  - ニキビや吹出物で炎症を起こしている部分
  - 化粧品などで、炎症を起こしている部分
  - 痛覚、知覚障害を起こしている部分
  - 皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部分
  - 痒みやほり、物理的刺激などによる病的なシミのある部分
  - 肌に炎症や異常を感じている部分
- 指定された用途以外の目的で使用しないでください。
- 100~240V以外の電源を使用しないでください。火災や感電の可能性があります。
  - 本体や付属品が破損や変形している時は使用しないでください。
  - 電源コードに負担をかけないでください。（無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重い物をのせない・熱いものに近づけない・束ねない・はさみ込みない・加工しない）
  - ご使用後は本体や台座の水分をふき取ってください。本体背面の充電端子の部分に水分が残っていると、充電時にショートするおそれがあります。

## 安全上の注意



警告



トする恐れがあります。

- 充電アダプターは防水ではありませんので、濡れた手で触れたりコンセントを抜き差ししないでください。
- 台座及び充電アダプターは防水ではありませんので、浴室や湿気の多い場所で使用しないでください。
- 自動車を運転しながら使用しないでください。強い刺激を受けると重大な事故やトラブルにつながる恐れがあります。
- 電源を入れた状態で長時間放置しないでください。事故や故障の原因になります。
- ほかの電気製品（美顔器など）との同時使用はしないでください。
- 絶対に製品を改造・分解・修理しないでください。
- 乳幼児や子供に使用したり、手の届くところでの使用や保管をしないでください。
- 意思表示のできない方に使用しないでください。



必ず  
守る

- 使用しない時は、充電アダプターをコンセントから抜いてください。
- 本体に異音や異常（過熱や焦げた臭いがする等）を感じた場合はご使用を中止し、電源を切ってください。
- 使用時間や使用頻度は取扱説明書の内容をよく読み、守ってください。

## 安全上の注意



警告



- 使用中に痛みや不調を感じた時や、使用後、肌に異常を感じた時は使用を中止して専門医に相談してください。
- 使いはじめの方は、肌の様子を見ながら使用してください。



注意



禁止

- プレート部分を肌に強く押しつけたり、同一の部位にあて続けないでください。
- 美容目的以外には使用しないでください。
- 落としたり、ぶつけたり、本体に強い衝撃を与えないでください。感電・発火・けがの恐れがあります。
- 損傷した場合は使用しないでください。感電・発火・けがの恐れがあります。
- 本製品に付属している充電アダプター以外使用しないでください。故障の原因となります。
- 充電アダプターをお手入れするときは、必ずコンセントから抜いてください。
- 充電アダプターが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
- 業務用として使用しないでください。また、不特定多数の人が使用する場所に置かないでください。

## 安全上の注意



注意



禁止

- ベンジン・シンナー・アルコールなどの薬品や殺菌・消毒剤で拭いたりしないでください。変形、変色、ひび割れなど故障・破損の原因となります。
- 家族および他人と共有しないでください。感染症の恐れがあります。
- ペットや家畜等の動物には使用したり、ふれる可能性のある場所に保管しないでください。
- ドライヤー等の熱風はあてないでください。高温による変形の恐れがあります。
- 本体や充電台座に水をかけたり、水につけたりしないでください。
- 本体、充電台座、及び充電アダプターを浴室や高温、多湿、直射光の当たる場所に保管しないでください。



必ず  
守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用してください。
- 使用中に身体へ違和感を感じた場合は、使用を中止してください。
- 使用中、使用後に肌の異常がみられるときは使用を中止し、医師に相談してください。
- 肌の状態にあわせて使用してください。
- 日焼け直後や、刺激の強い化粧品との併用は控えてください。

## 安全上の注意



注意




必ず  
守る

- 使用時は、プレートと肌との間に常に化粧水もしくは水分があるようにしてください。水分が少ないと肌トラブルの原因となります。
- 使用後は必ず電源を切ってください。
- プラグの脱着時は、プラグ部分をもって確実に差し込んでください。コードをもって引き抜きますと故障の原因となります。
- 使用後は清潔な布を水で濡らして固く絞り、プレートや本体の汚れをふき取ってください。薬品等は絶対に使用しないでください。


## セット内容

### 本体

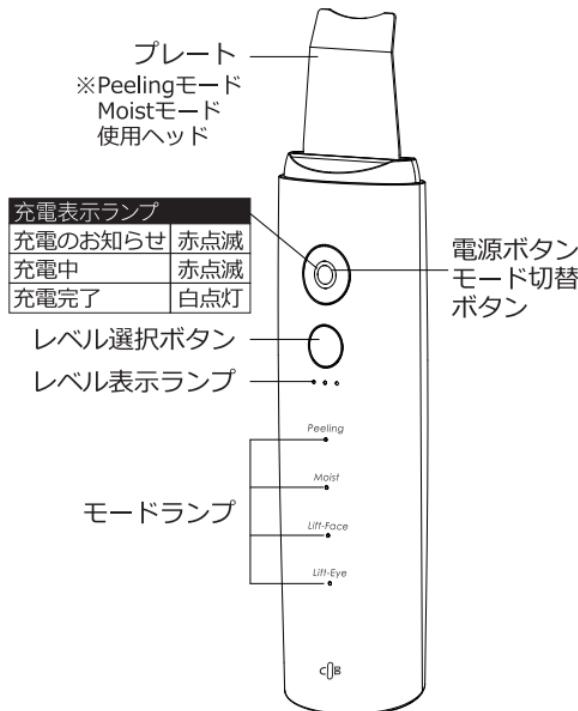

## 各部名称

### 本体

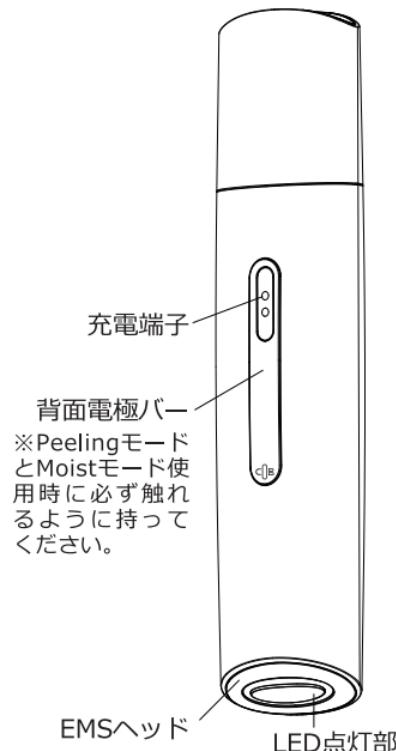

## 各部名称

### 付属品


キャップ



台座



充電アダプター

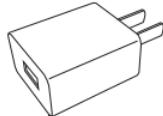

充電コード



クリーニング  
クロス



取扱説明書  
※保証書付



※構造上のため、当製品は修理対応および電池交換ができない製品です。

## 仕様

製品名 : COSBEAUTY LORY + AerobicSculptor™ Skin Refined Device  
(コスビューティー ローリープラス エアロビクスカルプター™ スキンケアエキスパート)

サイズ : 本体 約W41×H170.9×D21.9(mm)  
重量 : 本体 約105g/ 台座 約57g  
電源 : 充電式  
充電時間 : 80分

※充電時間は、使用環境  
・使用頻度によって変わります。  
使用電池 : リチウムイオン電池 400mAh  
材質 : ABS、ステンレス  
防水等級 : IPX7 (本体)  
※本体以外の付属品は防水ではありません。

消費電力 : 約5W (充電時)

アダプター

電源 : 入力AC100-240V 50/60Hz  
出力DC 5V 1A

MADE IN CHINA

### 電池の破棄

本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。廃棄の際はお客様がお住いの各自治体にお問い合わせの上、指示に従って廃棄してください。

## ご使用の前に

⚠ ご使用の前にお読みになり、お守りください。

### 防水性能について

本体の防水性等級はIPX7(JIS規格)に相当します。入浴中やシャワーを浴びながら使用出来ます。

**本体は完全防水ではありませんので、水回りのご使用する際は以下の点にご注意ください。その他付属品は防水仕様ではありませんので、ご注意ください。**

✗ 強い水流を長時間かけ続けない。



✗ 本体を洗面器の中や浴槽に浸水させない。

✗ 濡れる可能性のある場所で充電しない。  
湿度の高い場所で保管しない。

### 使用禁止の部位

斜線の目・耳・喉ぼとけの周囲、唇には使用しないでください。



## ご使用の前に

### 皮フ試験（パッチテスト）

肌トラブル防止のため、使用する化粧品と本製品との相性を事前にご確認ください。

- 1.腕の内側を石けんで洗い、タオルで水分を拭き取る。
- 2.Moist モードに設定する。
- 3.腕の内側に、水または化粧水を塗布し動かしながら約10秒間あてる。
- 4.Lift-Faceモードに設定して、腕の内側に化粧水や美容ジェル(水溶性ジェルまたはEMS専用ジェル)を塗布して約1分間動かしてください。
- 5.48時間が経過した後、肌に異常がないか確認してください。肌に異常が見られる場合は、使用をお控えください。



### 使用前のケア

本製品をご使用前に洗顔を行ってください。刺激の強い洗顔料は使用しないでください。また、除毛直後の肌には使用しないでください。

### 使用時の注意

- ・プレートと肌の間には常に水分が十分にある状態で使用してください。
- ・眼球や耳の付近に使用しないでください。
- ・頬骨や耳の近くに使用した際、振動音が大きく感じことがあります。
- ・皮膚の薄い部分に使用する際は、肌の様子をみながら使用してください。

## ご使用の前に

### 使用時の注意

- ・プレートを肌に強く押しあてないでください。
- ・一ヶ所に止めず、常に移動させながら使用してください。
- ・にきびや肌の炎症等、異常がある部位に使用しないでください。
- ・下記のような製品は本製品と一緒に使用しないでください。  
<使用に適さないもの>

オイル・スクラブ系・刺激の強い化粧水、ピーリング剤、洗顔料

### 充電方法

#### ①ご使用の前にお読みになり、お守りください。

- 購入直後や初めて本製品を使用する時は、必ず本体を充電してください。電池の性能を十分に発揮させるため、**長期間使用しない場合は、最低3ヶ月毎ごとにフル充電してください。**
- 定格を超える使い方をしないでください。(たとえば配線などで、定格を超えると火災の原因となります。)
- 充電ランプが**点滅から点灯**に変わったら充電完了となります。
- ご使用後は本体や背面の充電端子及びヘッド部についた水分や汚れをしっかりとふき取ってください。水分と汚れが残っていると、充電時にショートする恐れがあります。


## 充電方法

### ●本体を充電する

- 1.専用の充電コードを充電アダプターに差し込みます。
- 2.充電アダプターをコンセントに差し込みます。
- 3.専用の充電コードを本体背面の充電端子に接続します。

### ●充電が完了する

- 1.コンセントを抜くか、充電コードから本体を外してください。
- 2.充電完了後に長時間充電を続けるとバッテリーの寿命が著しく短くなります。

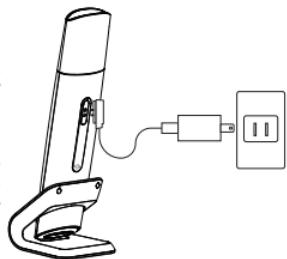

### ●充電ランプ表示

充電のお知らせ	赤点滅
充電中	赤点滅
充電完了	白点灯
本体作動中	白点灯

### ●充電時間の目安

充電時間	約80分
作動時間	約40分 <sup>※1</sup>

※1. 作動時間は満充電直後からの時間です。


使用頻度・使用モード・使用環境によって変わります。  
Peelingモード使用時。

※2. 充電推奨温度は5℃～35℃です。

推奨温度外は、充電しない場合があります。

## ご使用の前に

### 電源を入れる

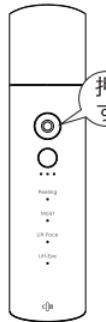

電源ボタンを1回短押しすると本体の電源が入り、スタンバイモード(全てのランプが点灯)になります。

### 電源を入れる


電源ボタン (◎) を押すたびに下記の順番にモード切り替わり、該当モードのランプが点灯します。

Peeling	Moist	Lift - Face	Lift - Eye
Peeling	Moist	Peeling	Peeling
Moist	Moist	Moist	Moist
Lift-Face	Lift-Face	Lift-Face	Lift-Face
Lift-Eye	Lift-Eye	Lift-Eye	Lift-Eye

※選んだモードの使用ヘッド

## レベルを選択する

各モードでレベルボタン ○ を押すたびに下記の順番に出力レベルが切り替わります。

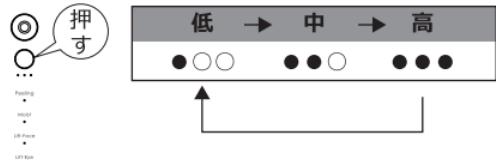

※ご注意：初めてのご使用時は必ず低いレベルからご使用ください。

### 本体の電源を切る

- 電源ボタンを長押しする(約2.5秒)と本体の電源が切れます。
- スタンバイモードで約15秒間何も操作しない場合、自動的に電源が切れます。
- 各モードで5分間連続使用すると自動的に電源が切れます。

### タイマー機能

オーバーケア防止のため、各モードで約5秒ごとに、「ピー」という音が鳴り、ケア時間の目安をお知らせします。  
音が鳴ったら他の部位へ移動の合図です。

## プログラム一覧

目的に応じて、モードを選択してください。

モード (搭載機能)	使用部位	目的	使用 ヘッド
Peelingモード (超音波+イオン導出)	顔※1	[P.21-P.22] 毛穴の黒ずみや余分な皮脂、古い角質を除去し、なめらかな肌へ。	
Moistモード (超音波+イオン誘導)	顔※2	[P.23-P.24] 化粧品のビタミンCや保湿成分を角質層までしっかりと浸透させる。	
Lift-Faceモード ※6 (赤色LED+複合EMS)	顔、首※3	[P.25-P.26] 電気刺激によって筋肉を収縮させて、顔のトレーニングになり、すっきりした顔へ。	
Lift-Eyeモード (複EMS)	目元※4	[P.27-P.28] ふっくら明るい印象へ	

## プログラム一覧

モード	併用する化粧品	目安時間※5 使用頻度	レベル
Peelingモード	水拭き取り化粧水	1~3分/回 1~2回/週	3段階
Moistモード	・ビタミンCや保湿成分を含む化粧水または美容液 ・イオン誘導に適した化粧水 ・シートマスク	3~5分/回 2~3回/週	3段階
Lift-Faceモード ※6	水溶性ジェル* EMS美顔器専用ジェル 水溶性の美容液	3~5分/回 2~3回/週	3段階
Lift-Eyeモード	水溶性ジェル* EMS美顔器専用ジェル 水溶性の美容液	1~2分/回 2~3回/週	3段階

※1※2※3※4 使用禁止部位および使用時のご注意はP.14-P.15をご参照ください。

※5 目安時間です。お肌の状態に合わせてお使いください。同じ場所に何度も繰り返し使用しないでください。1日全てのモード合計10分以上は使用しないでください。

※6 LED光を直接のぞき込まないでください。

## ピーリングモード

超音波とプラスイオンの力で、肌表面の古い角質や毛穴の汚れを吹き飛ばし、取り除きます。

**1.メイクを落とし、洗顔後にご使用ください。**

**2.電源を入れ、肌の状態に合わせてモードをお選びください。**

初めてご使用時は必ず低いレベルからご使用ください。デリケートな部位は弱いレベルで、頑固な汚れには強いレベルをおすすめします。

**3.霧吹き等で肌にしっかりと水をつけ、肌にあててケアを開始します。**


肌に対して約30度の角度でプレートをあてて「優しくなでるように」

矢印の方向に動かしてください。

※肌表面の水分が少なくなった場合は、水分を補充してください。

※プレートを肌に強く押しあてたり、一定の部位にあて続けないでください。

## ピーリングモード

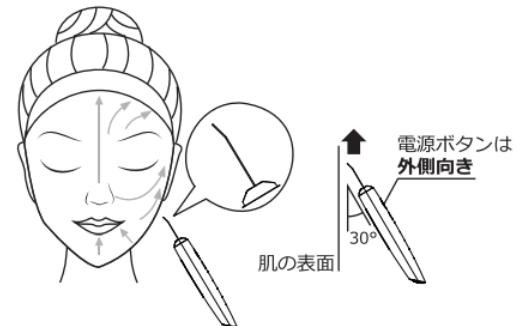

**4.使用後は美容液や化粧水などで肌を整えてください。**

**5.本体電源を切り、本体についた水分をしっかりとふき取ります。**

**! 使用上にご注意ください。**

- 温かい蒸しタオルで顔を温めた後や、入浴後に肌が温まった状態でのご使用をおすすめです。
- ご使用中に本体や背面の充電端子についた水滴を拭き取りながらご使用ください。
- 目や耳の周囲、眼球の付近に使用しないでください。
- ニキビや吹出物がある部位、肌の炎症等、異常がある部位に使用しないでください。
- 使用時に背面の電極バー(銀色の部位)必ず触れるよう持ってください。

## プログラム | Moist Mode

### モイストモード

超音波とイオン誘導の同時作用で、ビタミンCや保湿成分を含む化粧品の浸透率を高めます。  
(※角質層まで)

- 1.メイクを落とし、洗顔後にご使用ください。
- 2.電源を入れ、肌の状態に合わせてレベルを選択します。  
初めてのご使用は必ず低いレベルからご使用ください。
- 3.肌にしっかりと化粧水または美容液を塗布してご使用ください。  
肌に対して約30度の角度でプレートをあてて  
「優しくなでるように」  
矢印の方向に移動させます。  
※肌の表面に水分が少なくなった場合は、補充をしてください。  
※プレートを肌に強く押しあてたり、一定の部位にあて続けないでください。

## プログラム | Moist Mode

### モイストモード



- 4.使用後は美容液や乳液などで肌を整えてください。
- 5.本体の電源を切り、本体についた水分をしっかりと拭き取ります。

#### ① 使用上にご注意ください。

- ・使用時に背面の電極バー(銀色の部位)必ず触れるようを持ってください。
- ・シートマスクの上からでもご使用いただけます。

## リフトフェイス モード

赤色LEDと複合EMSで、気になるフェイスラインや表情筋に集中ケアを行い、顔のトレーニングをサポートします。継続使用することでハリ、弾むような明るい肌へ導きます。

- 1.メイクを落とし、洗顔後にご使用ください。**
- 2.電源を入れ、肌の状態やお好みに合わせてレベルを選択します。**  
初めてご使用になる場合、デリケートな部位及び使いかたに慣れるまでは、必ず低いレベルで使用してください。
- 3.肌にしっかりと水溶性ジェルもしくはEMS専用ジェルを塗布してご使用ください。**  
常に十分にある状態で使用してください。  
※肌が乾燥していたり、水分が少ないとチクチクと刺激を感じる場合があります。
- 4.矢印の方向に軽く押すように「押しあて→離す→移動」を行ってください。**  
1回の押しあては約3~5秒ケアをしてください。  
※EMSヘッドを肌に強く押しあてたり、同じ部位に2回以上あて続けないでください。

## リフトフェイス モード



- 5.使用後は普段のスキンケア化粧品で肌を整えてください。**
- 6.本体の電源を切り、清潔な状態で保管してください。**

### ① 使用上にご注意ください。

- ・油性化粧品等を使用すると通電を妨げ、肌ケアは正常にできない場合があります。
- ・シートマスクの上からでもご使用いただけます。
- ・EMSを感じない場合はレベルを上げてください。また、肌にジェルや水溶性の美容液をしっかりと塗布して肌を濡らせてください。肌が乾燥しているとチクチクと刺激を感じる場合があります。
- ・痛みを感じる場合はレベルを下げてください。また、肌にジェルや水溶性の美容液をしっかりと塗布して肌を濡らせてください。

## リフトアイ モード

複合EMSで、目もとに優しい刺激を与えながら、明るい印象のある目もとへ導きます。

- 1.メイクを落とし、洗顔後にご使用ください。
- 2.電源を入れ、Lift-Eyeモードに設定して肌の状態合わせてレベルを選択します。  
初めてご使用になる場合、デリケートな部位及び使いかたに慣れるまでは、必ず低いレベルで使用してください。
- 3.肌にしっかりと水溶性ジェルもしくはEMS専用ジェルを塗布してご使用ください。  
常に十分にある状態で使用してください。  
※肌が乾燥していたり、水分が少ないとチクチクと刺激を感じる場合があります。
- 4.矢印の方向に軽く押すように「押しあて→離す→移動」を行ってください。  
1回の押しあては約3~5秒ケアをしてください。  
※EMSヘッドを肌に強く押しあてたり、同じ部位に2回以上あて続けないでください。

## リフトアイ モード



※まぶたには使用しないでください。

- 5.使用後は普段のスキンケア化粧品で目もとを整えてください。
- 6.本体の電源を切り、清潔な状態で保管してください。

## ① 使用上にご注意ください。

- ・油性化粧品等を使用すると通電を妨げ、肌ケアは正常にできない場合があります。
- ・アイマスクまたは水溶性の美容液の上からでもご使用いただけます。

## お手入れ方法

- 使用後は本製品を清潔に保つために、毎回お掃除をしてください。
- お手入れ及び、本製品を移動させる場合は安全のため電源を切り、ケーブル類を抜いてから行ってください。
- 本体および本体背面の充電端子が汚れていると、正常に充電できなくなることがあります。
- 使用後は清潔な布を水で濡らして固く絞り、ブレードや本体の汚れをふき取ってください。薬品等は絶対に使用しないでください。
- 本体や充電台座に水をかけたり、水中に沈めないでください。

## 保管方法

- 長期間使用しない場合は、最低3ヶ月ごとにフル充電してください。  
バッテリー残量がゼロの状態で長期間保管すると、バッテリーの寿命が著しく短くなります。また、過放電状態で長期保管すると、充電不可能の場合があります。
- 長期間使用しないときは本製品の掃除をして、よく乾かしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源を切り、充電アダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所には放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手やペットの触れない場所に保管してください。

## こんなときには

### トラブル

電源が入らない

### 対処方法

電源ボタンを押していない

▶ 電源ボタンを押してスタンバイモードにしてから操作してください。

充電されていない

▶ 本体を充電してください。

充電されていない

▶ 本体背面の充電端子に充電コードを接続し、充電ランプが点滅や点灯しているか確認してください。

充電しても使用できない

電池の寿命

▶ 充電池の寿命です。  
※電池の交換は行えません。

充電ランプが点滅している

バッテリー残量が少ない

▶ 充電してください。

## こんなときには

### トラブル

充電されない  
(充電ランプ  
がつかない)

### 対処方法

充電アダプターが壁面コンセントに差し込まれていない

▶ 充電アダプターを壁面コンセントに直接差し込んでください。

充電コードが本体背面の充電端子にしっかりと接触していない

▶ 充電コードを本体背面の充電端子にしっかりとつなげてください。また、充電コードの充電端子は正しい向きで本体背面の充電端子に接続してください。

充電コードや本体背面の充電端子が汚れている

▶ 清掃をしてください。

イオンを感じない

イオンは体感できません

▶ 基本的にイオンは微弱電流のため、体感することができません。

## こんなときには

### トラブル

使用後に本体が熱くなる

しばらく時間をおいてから使用してください

▶ 充電中は多少温度が高くなることがございます。連続使用すると本体温度が熱くなることがあります。

プレートが熱く感じる

肌とプレートとの間にしっかりと水分を保つ

▶ 水分が少ないと、肌とプレートの摩擦によって、プレートが熱く感じたり、肌トラブルの原因となります。

Peeling/  
Moistモードを正しく使うには

肌とプレートとの間にしっかりと水分を保つ

▶ 水分が少ないと電気の伝達が悪くなり、効果が低下したり、肌トラブルの原因となります。

▶ 本体背面の電極バー(銀色の部位)に触れるように持つてケアを行ってください。

## こんなときには

### トラブル

### 対処方法

使用中に肌がチクチクする

#### Peeling / Lift-Face / Lift-Eyeモードの場合

肌が乾燥していたり、水分が不足している可能性があります。肌に水もしくは水溶性ジェルを塗布してください。

#### Lift-Faceモードの場合

異なる部位で感じかたが違います。  
EMS専用ジェルまたは水溶性ジェルをつけ足してください。レベル1からご使用ください。

#### Moist モードの場合

体調や肌の調子が悪い、併用した化粧品が合わない等の可能性があります。  
肌に異常を感じる場合は、本製品のご使用をお控えください。

## こんなときには

### トラブル

### 対処方法

#### ご使用いただけます

バッテリの特性上、一度充電を切り、再び充電すると点滅が数分間程度続きますが、故障ではありません。

## よくある質問と回答

Q. 毎日プログラムを行っても大丈夫ですか？

A. P.20 の使用頻度をご参照ください。

過度な使用はお肌に負担をかける可能性があります。肌の様子を見ながら使用してください。

Q. 水・化粧水・美容液は1回にどれくらいの量を使用すればよいですか？

A. 肌が十分に濡れるように使用してください。

Q. Moist モードで使う化粧品の種類は？

A. ビタミンC、ビタミンC誘導体を含む化粧品を使用してください。

Q. 使用前の洗顔の注意点はありますか？

A. 刺激の強い洗顔料は使用しないでください。

Q. フェイスマスクをしながら使用できますか？

A. Moist モードでは使用可能です。

マスクの成分やお肌の個人差によってモイスト効果は異なります。

Q. バスルームで使用できますか？

A. 本製品は防水規格 IPX7 を取得しているため使用できますが、完全防水ではないため、本体に水をかけたり水中に沈めると、故障の原因となりますのでご注意ください。また、付属品は防水ではありません。

Q. どんな肌質でも使えますか？

A. ニキビや肌の炎症がひどいときや、金属アレルギーをお持ちの場合は、ご使用をお避けください。  
また、体調や使用時のお肌の状態により、本製品のモードがお肌に合わない場合もございます。  
詳しくは安全上の注意をご参照ください。

## 保証と個人情報の取り扱い

### 保証規定

- 1 保証期間内に本説明書に従い正しくお使い頂いたにもかかわらず故障した場合は、お買い上げいただいた国内でのみ本保証書記載内容に基づき保証いたします。但し、消耗品、付属品は除きます。
- 2 保証期間内でも次の場合は有料対応、もしくは保証期間外対応となります。
  - ①本保証書の所定事項の未記入、文字の改ざん、販売店名/販売日の記載がない場合。
  - ②お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び破損。
  - ③火災、地震、水害、その他の天変地異による故障及び損傷。
  - ④お客様による分解、修理、改造による故障及び損傷。
  - ⑤一般家庭用以外（業務用等）での使用時の故障及び損傷。
  - ⑥ご使用上の誤り(水などの液体こぼれ、水没、落下等)及び公害、異常電圧、指定外の使用電源などによる故障及び損傷。
  - ⑦お客様のご使用環境・保管方法(高温・多湿等)に起因して生じた故障・損傷。
  - ⑧当社指定の有寿命部品、消耗品(バッテリー等)の自然消耗、磨耗、劣化等により部品の交換が必要となった場合。
  - ⑨車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
  - ⑩接続している他の機器の異常による故障及び損傷。
- 3 保証期間中の対応は、お買い上げの販売店に保証書をご提示の上、ご依頼ください。
- 4 本保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 5 通信販売等で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が記載されているお買い上げ伝票と一緒に保管していただき、依頼時に保証書に添付してください。
- 6 当社は本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を製造終了日から、2年間保有しています。有償・無償交換問わず補修用性能部品の保有期間の終了をもって、本製品の修理や交換対応は終了となります。  
※製造終了情報について、弊社のホームページにてご確認ください。

## 保証と個人情報の取り扱い

### 免責事項と限定保証

- 1 本製品を使用・接続した際の機器の故障、破損、及びデータ等の損失については保証いたしかねます。
- 2 充電専用ケーブル電源アダプターおよび付属品は消耗品のため、保証対象外となります。
- 3 充電池は消耗品のため、保証対象外となります。また、構造上バッテリーの交換対応は致しかねます。

### 個人情報の取り扱い

- 1 お客様の個人情報は弊社の商品の発送、連絡、問い合わせ、回答、依頼作業、新商品・キャンペーン情報（広告を含む）の案内（電話・郵送・Eメール等の方法による）に利用致します。
- 2 弊社はお客様情報を第三者へ提供することはありません。但し、以下のいずれかに該当する場合を除きます。
  - ・弊社商品の発送等に必要な個人情報
  - ・法令に基づく場合
  - ・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合

## 保証書

保証期間 お買い上げ年月日より1年間

製品名：コスビューティー ローリープラス  
エアロビク スカルプター™  
スキンケアエキスパート

氏名：

住所：

電話番号：

ご購入日： 年 月 日

販売店名・取扱店印

### お問い合わせ先

コスビューティージャパン

お客様問い合わせ窓口 **03-6722-0547**

受付：10:00～17:00（土・日・祝日を除く）

※お買い上げ日が記載されている保証書、または購入明細をご用意の上、購入店舗へお問合せください。

製造元

株式会社COSBEAUTY JAPAN

〒108-0073 東京都港区三田1-3-39 勝田ビル6F

<https://jp.cos-beauty.com>