


COSBEAUTY

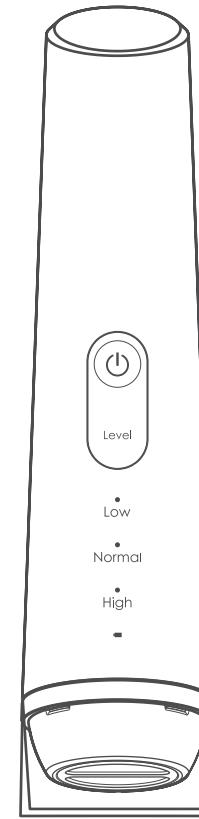

コスビューティー[®]
プラズマ美顔器 RISE R1 Air

本書は製品の説明書および保証書となります。
ご使用前に必ずよくお読み頂き大切に保管してください。

目次

目次	1
安全上の注意	2～4
セット内容	5
各部名称	6
仕様	7
ご使用の前に	8～9
充電方法	10
使用手順	11～12
お手入れ方法	12
保管方法	12
こんなときには	13～14
Q&A	15
保証と個人の取り扱い	16
保証書	17
お問い合わせ先	17

安全上の注意

●ご使用になる前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産の損失を未然に防ぐものです。必ずお守りください。

 **危険** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性があり、リスクの度合いが高いと想定される内容を示します。

 **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
※物的損害とは、家屋、家財、家畜、ペットに関わる拡大損害を示します。

 禁止の行為であることを知らせるものです。

 行為を強制・指示する内容を知らせるものです。

 **危険**

 下記の電子機器との併用は絶対にしないでください。
禁止

- ペースメーカーなどの体内植込型医用電子機器。
- 人工肺などの生命維持用医用電子機器。
- 心電計等の装置型医用電子機器。
- その他の治療器具との同時使用はしないでください。誤作動をまねく恐れがあります。

 **警告**

 次の人は医師と相談してご使用ください。
使用前相談

- アトピー性皮膚炎の方 ●アレルギー体質・金属アレルギーの方 ●特に肌が敏感な方 ●ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で、毛細血管拡張を起こしている方 ●心臓に障害のある方 ●急性（疼痛性）疾患のある方 ●悪性腫瘍のある方 ●顔面神經痛の方 ●妊娠中、授乳中の方 ●生理中の方 ●有熱性疾患の方 ●血圧異常の方 ●感染性疾患の方 ●結核症疾患の方 ●血友病疾患の方 ●歯の治療中の方 ●飲酒、薬を服用中、疲労が著しい方 ●目の手術をしたことがある方 ●強度の近視の方 ●現在病院で治療中の方

 次の部位には使用しないでください。
禁止

- ・目や耳のまわり、喉ばとけの周囲、唇、眼球及び上まぶた
- ・切り傷・整形手術をした部位・口内や陰部、粘膜など
- ・顔面黒皮症の部分
- ・化膿したニキビや吹出物がある部位
- ・化粧品などで、炎症を起こしている部分
- ・痛覚、知覚障害を起こしている部分

安全上の注意

- ・皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部分
- ・痒みやはとり、物理的刺激などによる病的なシミのある部分
- ・肌に炎症や異常を感じている部分
- ・過度の日焼けのある部位
- ・当日の脱毛処理や除毛処理をした部位



- 指定された用途以外の目的で使用しないでください。
- 100~240V以外の電源を使用しないでください。火災や感電の可能性があります。コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。(たとえば配線などで、定格を超えると発熱し、火災の原因となります。)
- 本体や付属品が破損や変形している時は使用しないでください。
- 充電コードに負担をかけないでください。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重い物をのせない・熱いものに近づけない・束ねない・はさみ込まない・加工しない)
- ご使用後は本体、ヘッド部の保護キャップに水分が付着した場合、しっかりとふき取ってください。水分が残っていると、充電時にショートする恐れがあります。または、故障の原因となります。
- 電源アダプターは防水ではありませんので、濡れた手で触れたりコンセントを抜き差ししないでください。
- 充電コード及び電源アダプターは防水ではありませんので、浴室や湿気の多い場所で使用しないでください。
- 自動車を運転しながら使用しないでください。強い刺激を受けると重大な事故やトラブルにつながる恐れがあります。
- 電源を入れた状態で長時間放置しないでください。事故や故障の原因になります。
- ほかの電気製品（美顔器など）との同時使用はしないでください。
- 絶対に製品を改造・分解・修理しないでください。
- 乳幼児や子供に使用したり、手の届くところでの使用や保管をしないでください。
- 意思表示のできない方に使用しないでください。



- 使用しない時は、電源アダプターをコンセントから抜いてください。
- 本体に異音や異常（過熱や焦げた臭いがする等）を感じた場合はご使用を中止し、電源を切ってください。
- 使用時間や使用頻度は取扱説明書の内容をよく読み、守ってください。
- 使用中に痛みや不調を感じた時や、使用後、肌に異常を感じた時は使用を中止して専門医に相談してください。
- 使いはじめの方は、肌の様子を見ながら使用してください。
- 使用中にオゾン臭が不快に感じる場合はご使用を中止し、換気をしてください。

△ 注意



- プレート部分を肌に強く押しつけたり、同一の部位にあて続けないでください。
- 美容目的以外には使用しないでください。
- 落としたり、ぶつけたり、本体に強い衝撃を与えないでください。感電・発火・けがの恐れがあります。
- 損傷した場合は使用しないでください。感電・発火・けがの恐れがあります。

安全上の注意




- 本製品に付属している電源アダプター以外使用しないでください。故障の原因となります。
- 電源アダプターをお手入れするときは、必ずコンセントから抜いてください。
- 電源アダプターが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
- 業務用として使用しないでください。また、不特定多数の人が使用する場所に置かないでください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなどの薬品や殺菌・消毒剤で拭いたりしないでください。変形、変色、ひび割れなど故障・破損の原因となります。
- 家族および他人と共に共有しないでください。感染症の恐れがあります。
- ペットや家畜等の動物には使用したり、ふれる可能性のある場所に保管しないでください。
- ドライヤー等の熱風はあてないでください。高温による変形の恐れがあります。
- 本体や電源アダプターに水をかけたり、水につけたりしないでください。
- 本体、充電コード及び電源アダプターを浴室や高温、多湿、直射日光当たる場所に保管しないでください。




- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用してください。
- 使用中に身体に違和感を感じた場合は、使用を中止してください。
- 使用中、使用後に肌の異常がみられるときは使用を中止し、医師に相談してください。
- 肌の状態にあわせて使用してください。
- 日焼け直後や、刺激の強い化粧品との併用は控えてください。
- 使用後は必ず電源を切ってください。
- プラグの脱着時は、プラグ部分をもって確実に差し込んでください。コードをもって引き抜きますと故障の原因となります。
- 使用後は清潔な布を水で濡らして固く絞り、プレートや本体の汚れをふき取ってください。薬品等は絶対に使用しないでください。
- ご使用前に、Plasmaヘッド部に水分が付着しないようにしっかりとふき取ってください。水気が残っているとチクチクと刺激を感じる場合があります。
- ご使用時は、化粧品を塗らずに、素肌にご使用ください。肌に付着した水分をしっかりとふき取ってください。お肌に水分が残っている場合は刺激を感じることがあります。
- 可燃性及び爆発危険性がある環境下には本製品を使用しないでください。


本体・キャップ

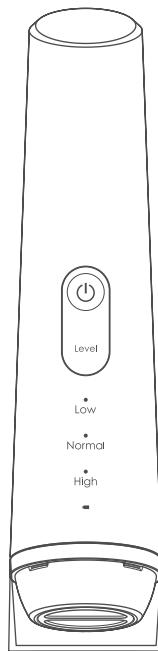

電源アダプター

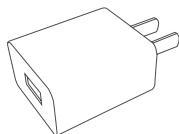



充電コード

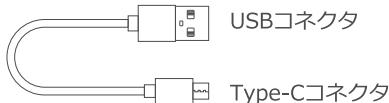

取扱説明書(保証書付)



※本体や付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

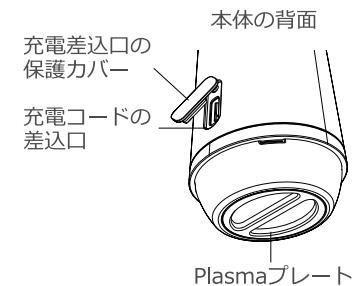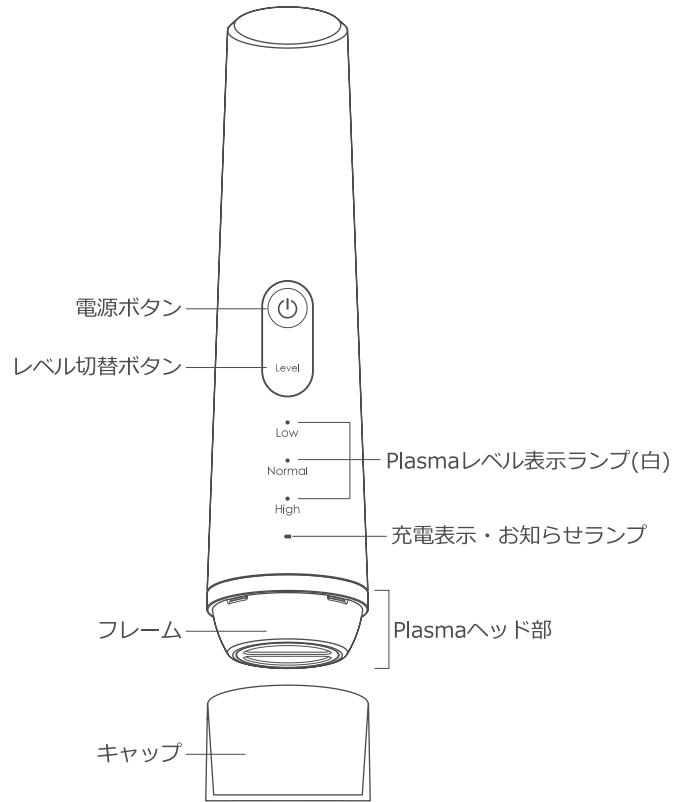

仕様

製品名：コスビューティー プラズマ美顔器 RISE R1 Air
サイズ：本体 約W39×H163×D45(mm)
重量：本体 約120g(キャップ含む)
電源：充電式
充電時間：約3時間
作動時間：約60分間
使用電池：リチウムイオン電池 1000mAh
材質：ABS・PC/本体、セラミック/プラズマプレート
防水性能：IPX5(本体)
※本体以外の付属品は防水仕様ではありません。
アダプター
電源：入力AC100-240V 50/60Hz
出力DC 5V 1A

MADE IN CHINA

電池の破棄

本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。廃棄の際はお客様がお住まいの各自治体にお問い合わせの上、指示に従って廃棄してください。

ご使用の前に

⚠ ご使用の前にお読みになり、お守りください。

防水性能について

本体の防水等級IPX5ですが、**完全防水ではありません**。水回りでご使用する際は以下の点にご注意ください。その他付属品は防水仕様ではありませんのでご注意ください。


✗ 浴室・シャワー室・湿気の多い所でのご使用はおやめください。

✗ Plasmaヘッド部に水滴を付着させない。
本体背面の充電差込口に浸水させない。

✗ 本体に直接水をかけない。
本体(Plasmaヘッド部を含む)を水洗しない。


✗ 本体を洗面器の中や
浴槽に浸水させない。

✗ 濡れる可能性のある場所で充電しない。
湿度の高い場所で保管しない。

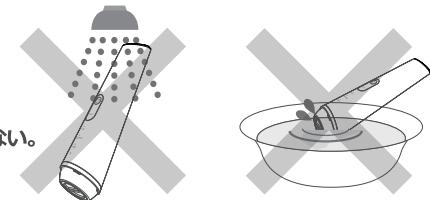

使用禁止の部位


斜線の目・耳・喉ぼとけの周囲、
唇には使用しないでください。

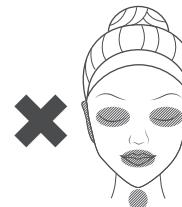

皮フ試験 (パッチテスト)

肌トラブル防止のため、本製品との相性を事前にご確認ください。

- 1.腕の内側を石けんで洗い、お肌を清潔な状態にする。
- 2.タオルで肌表面の水気をしっかりと拭き取ってください。
- 3.Lowレベルに設定する。
- 4.腕の内側に、化粧水を塗らずにPlasma美顔ヘッドを肌にあてて、約1分間優しく動かしてください。
- 5.48時間が経過した後、肌に異常がないか確認してください。肌に異常が見られる場合は、使用をお控えください。

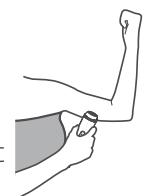


ご使用の前に

使用前に行うこと・守ること

1. 本体を充電してください。(10ページ参照)
2. メイクを落として、洗顔を行ってください。お肌を清潔な状態にします。
刺激の強い洗顔料は使用しないでください。
3. ピーリング直後の肌や除毛直後の肌には使用しないでください。
4. イヤリング等の金属アクセサリー及びコンタクトレンズを外します。
5. ご使用前に本体やPlasmaヘッド部に割れ・欠け・変形などの破損がないか確認してください。(肌を傷つける恐れがあります。)

ボタン操作とレベル切替

1. 初めに電源ボタンを1回押すと本体が起動し、低レベル(=LOW)になります。
2. Levelボタンを押すことでPlasmaレベルは下記の順番に切り替わります。
該当レベルのランプが点灯します。

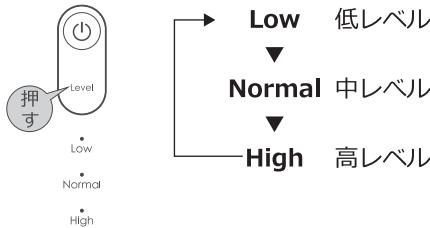

本体の電源を切る

1. 電源ボタンを長押す(約2秒)と本体電源がオフになります。
2. 各レベルで10分間作動すると、本体電源が自動的にオフします。

タイマー機能

オーバーケア防止のため、各レベルで約10秒ごとに、
1回「ピ」という音が鳴ります。ケア時間の目安をお知らせします。


充電方法

! ご使用の前にお読みになり、お守りください。

- 購入直後や初めて本製品を使用する時は、必ず本体を充電してください。
電池の性能を十分に発揮させるため、**長期間使用しない場合は、最低3ヶ月毎ごとにフル充電してください。**
- 定格を超える使い方をしないでください。
(たとえば配線などで、定格を超えると火災の原因となります。)
- 充電ランプが**点滅から点灯**に変わったら充電完了となります。
- ご使用後は本体や充電差込口及びヘッド部についた水分や汚れをしっかりとふき取ってください。水分と汚れが残っていると、充電時にショートする恐れがあります。

●本体を充電する

1. 専用のType-C充電コードを充電アダプターに接続します。
2. 充電アダプターをコンセントに差し込みます。
3. Type-Cコネクタを本体の充電口に差し込みます。

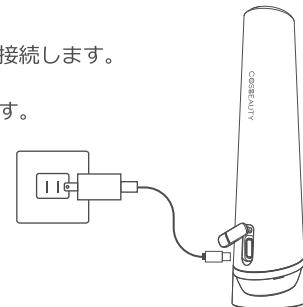

●充電が完了する

1. コンセントを抜くか、充電コードから本体を外してください。
2. 充電完了後に長時間充電を続けるとバッテリーの寿命が著しく短くなります。

●充電ランプ表示

充電のお知らせ	赤点滅
充電中	赤点滅
充電完了	白点灯
本体作動中	白点灯

●充電時間の目安

充電時間	約3時間
作動時間	約60分

※作動時間は満充電直後からの時間です。使用頻度・使用モード・使用環境によって変わります。

※充電推奨温度は5°C~35°Cです。推奨温度外は、充電しない場合があります。

使用手順

プラズマケア

プラズマの閃光エネルギーで、化粧品の角質層への浸透を促し、手塗りより本格的な浸透力を発揮します。肌のうるおい環境を整えて、健康な美肌を守ります。

1. 洗顔を行って、洗顔後に肌表面をしっかりと乾かします。
水気が残っているとチクチクと刺激を感じることがあります。

2. 電源ボタンを押して電源を入れます。

3. Levelボタンを押してレベルを選択します。

下記の図をご参照ください。

4. 化粧品を塗らずに、素肌にあてて、ヘッド部を軽く移動します。

下記の図のようにプラズマヘッド部を肌に優しく動かしてください。
肌にヘッド部を強く押しあてたりしないでください。

※強く押しあてると、プラズマは発生しない場合はあり、プラズマのバチバチの音がしません。



目的	整肌のケア (肌の調子を整え、健やかな肌を保つこと)	保湿の目的 ブライティングの目的 (化粧品の角質層への浸透を高める)
使用手順の図		
目安時間	<ul style="list-style-type: none">・5~10分 1回で合計で最大10分 (慣れるまでは合計3分程度がおすすめ)・1ヶ所は10秒~20秒がおすすめ	<ul style="list-style-type: none">・5~10分 1回で合計最大10分 (慣れるまでは合計3分程度がおすすめ)・1ライン3~5往復、1往復6秒~10秒が目安
使用頻度	毎日可能 1~2回程度	毎日可能 1回程度
使用後のお手入れにおすすめ化粧品	美容液・化粧水 <ul style="list-style-type: none">・お肌に優しい、無添加化粧品や低刺激化粧品が推奨	美容液・化粧水 <ul style="list-style-type: none">・お肌に優しい、防腐剤等無添加や低刺激化粧品が推奨・保湿目的：ヒアルロン酸やコラーゲンなどの保湿成分を含む美容液がおすすめ・ブライティング目的：ビタミンC、ビタミンC誘導体やプラセンタなどを含む美容液がおすすめ
レベルの選択	<ul style="list-style-type: none">・お肌の調子に合わせて、適切なレベルをお選びください。・初めて使用する時、使い慣れるまで、または敏感な部位に必ず低レベル(=Low)でご使用ください。	<ul style="list-style-type: none">・お肌の調子に合わせてレベルをお選びください。・初めてご使用時、または敏感な部位に低レベル(=Low)がおすすめ。・しっかりと浸透ケアしたいときは高レベル(=High)がおすすめ。※角質層まで

使用手順

ケア終了後、本体電源を切ります。

電源ボタンを長押し(約2秒)して電源が切れます。

使用後はお肌のお手入れをしてください。

使用後1時間程度は、日焼け止め及びメイクアップはお控えください。

7. 本体を清潔に保つために、使用後はお掃除してください。



使用上にご注意ください。

- ・ご使用前に、顔やPlasmaヘッド部についた水分をしっかりと拭き取ってください。
水分が残っていると、ピリピリの刺激感を感じることがあります。
- ・目や耳の周囲、眼球の付近に使用しないでください。
- ・化膿したニキビや吹出物がある部位、肌の炎症がある部位に使用しないでください。
- ・プラズマが発生する時は、軽度のオゾン臭が出ます。

お手入れ方法

- 使用後は本製品を清潔に保つために、毎回お掃除をしてください。
- お手入れ及び本製品を移動させる場合は安全のため電源を切り、ケーブル類を抜いてから行ってください。
- 使用後は清潔な布を水で濡らして固く絞り、プレートや本体の汚れをふき取ってください。薬品等は絶対に使用しないでください。
- Plasmaヘッド部は水洗いはできません。プラズマプレートのすき間に汚れが不付着した場合は、ティッシュや綿棒などを使って掃除をしてください。プレートを完全に乾燥させてから保管をしてください。
- 本体や付属品に水をかけたり、水中に沈めないでください。

保管方法

●長期間使用しない場合は、最低3ヶ月ごとにフル充電してください。

バッテリー残量がゼロの状態で長期間保管すると、バッテリーの寿命が著しく短くなります。

- 長期間使用しないときは本製品の掃除をして、よく乾かしてから保管してください。

- 使用しないときは、本体の電源を切り、充電アダプターをコンセントから抜いて保管してください。

- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所には放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。

- 子供の手やペットの触れない場所に保管してください。

こんなときには

トラブル	対処方法
電源が入らない	<p>電源ボタンを押していない</p> <p>電源ボタンを押してスタンバイモードにしてから操作してください。</p>
充電しても使用できない	<p>充電されていない</p> <p>充電可能な状態の充電専用のケーブルとアダプターに本体を設置して、充電ランプが点滅や点灯しているか確認してください。</p> <p>電池の寿命</p> <p>充電池の寿命です。 ※電池の交換は行えません。</p>
充電されない (充電ランプがつかない)	<p>充電アダプターが壁面コンセントに差し込まれていない</p> <p>充電アダプターを壁面コンセントに直接差し込んでください。</p> <p>充電ケーブルが差し込まれていない</p> <p>充電ケーブルが本体背面の充電差込口に奥まで差し込まれているか確認してください。</p> <p>充電差込口、充電専用ケーブル及びアダプターが汚れている</p> <p>乾いた柔らかい布で清掃してください。</p>
充電ランプが点滅している	<p>バッテリー残量が少ない</p> <p>充電してください。</p>

こんなときには

トラブル	対処方法
使用後に本体が熱くなる	<p>しばらく時間をおいてから使用してください</p> <p>充電中は多少温度が高くなることがあります。連続使用すると本体温度が熱くなることがあります。</p>
プラズマを感じない	<p>パチパチの音と軽度のオゾン臭を確認してください</p> <p>プラズマヘッド部を肌の上に軽くあてるとパチパチの音と軽度のオゾンが発生します。確認が取れない場合は、お客様問い合わせ窓口までご連絡ください。</p>
使用中に肌がチクチクする	<p>水気が残っている</p> <p>肌表面やPlasmaヘッド部(白いプレートを含む)に水気がないようにしっかりと拭き取ってください。</p> <p>選択したレベルはお肌の状態や肌部位に合わない</p> <p>お肌の状態に合わせて適切なレベルをお選びください。 初めてご使用時、または敏感な部位に必ず低レベルでご使用ください。</p>
	<p>肌の水分/保湿が不足、または肌の調子が不安定</p> <p>プラズマのご使用を中止してください。 肌に保湿ケアを十分に行、肌の調子を整えてください。</p>

Q&A

よくある質問と回答

Q. Plasmaモード使用後に、使用可能の化粧品の種類は？

A. プラズマ照射後の肌は化粧品が浸透しやすい状態になり、防腐剤等無添加の肌に優しい美容液をおすすめします。

Q. 使用前の洗顔の注意点はありますか？

A. 刺激の強い洗顔料は使用しないでください。

Q. バスルームで使用できますか？

A. 湿気が多いところではご使用お控えください。
ビリビリの刺激感を感じることがあります。

Q. どんな肌質でも使えますか？

A. ニキビや肌の炎症がひどいときや、金属アレルギーをお持ちの場合
は、ご使用をお避けください。
また、体調や使用時のお肌の状態により、本製品のモードがお肌に合わない場合もございます。
詳しくは安全上の注意をご参照ください。

保証と個人情報の取り扱い

保証規定

1. 保証期間内に本説明書に従い正しくお使い頂いたにもかかわらず故障した場合は、お買い上げいただいた国内でのみ本保証書記載内容に基づき保証いたします。但し、消耗品、付属品は除きます。
2. 保証期間内でも次の場合は有料対応、もしくは保証期間外対応となります。
 - ①本保証書の所定事項の未記入、文字の改ざん、販売店名/販売日の記載がない場合。
 - ②お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び破損。
 - ③火災、地震、水害、その他の天変地異による故障及び損傷。
 - ④お客様による分解、修理、改造による故障及び損傷。
 - ⑤一般家庭用以外（業務用等）での使用時の故障及び損傷。
 - ⑥ご使用上の誤り（水などの液体こぼれ、水没、落下等）及び公害、異常電圧、指定外の使用電源などによる故障及び損傷。
 - ⑦お客様のご使用環境・保管方法（高温・多湿等）に起因して生じた故障・損傷。
 - ⑧当社指定の有寿命部品、消耗品（バッテリー等）の自然消耗、磨耗、劣化等により部品の交換が必要となった場合。
 - ⑨車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - ⑩接続している他の機器の異常による故障及び損傷。
3. 保証期間中の対応は、お買い上げの販売店に保証書をご提示の上、ご依頼ください。
4. 本保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
5. 通信販売等で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が記載されているお買い上げ伝票と一緒に保管していただき、依頼時に保証書に添付してください。
6. 当社は本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を製造終了日から、2年間保有しています。有償・無償交換問わず補修用性能部品の保有期間の終了をもって、本製品の修理や交換対応は終了となります。
※製造終了情報について、弊社のホームページにてご確認ください。

免責事項と限定保証

1. 本製品を使用・接続した際の機器の故障、破損、及びデータ等の損失については保証いたしかねます。
2. 充電専用ケーブル電源アダプターおよび付属品は消耗品のため、保証対象外となります。
3. 充電池は消耗品のため、保証対象外となります。
また、構造上バッテリーの交換対応は致しかねます。

個人情報の取り扱い

1. お客様の個人情報は弊社の商品の発送、連絡、問い合わせ、回答、依頼作業、新商品・キャンペーン情報（広告を含む）の案内（電話・郵送・Eメール等の方法による）に利用致します。
2. 弊社はお客様情報を第三者へ提供することはありません。
但し、以下のいずれかに該当する場合を除きます。
 - ・弊社商品の発送等に必要な個人情報
 - ・法令に基づく場合
 - ・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合

保証書

保証期間 お買い上げ年月日より1年間

製品名：コスピューティー プラズマ美顔器 RISE R1 Air

氏名：

住所：

電話番号：

ご購入日： 年 月 日

販売店名・取扱店印

お問い合わせ先

コスピューティージャパン

お客様問い合わせ窓口 03-6722-0547

受付：10:00～17:00（土・日・祝日を除く）

※お買い上げ日が記載されている保証書、または購入明細をご用意の上、
購入店舗へお問合せください。

製造元

株式会社COSBEAUTY JAPAN

〒108-0073 東京都港区三田1-3-39 勝田ビル6F

www.cos-beauty.com info@j-cosbeauty.com