




COSBEAUTY  
IPL 光美容器



Touch a New Beautiful Life

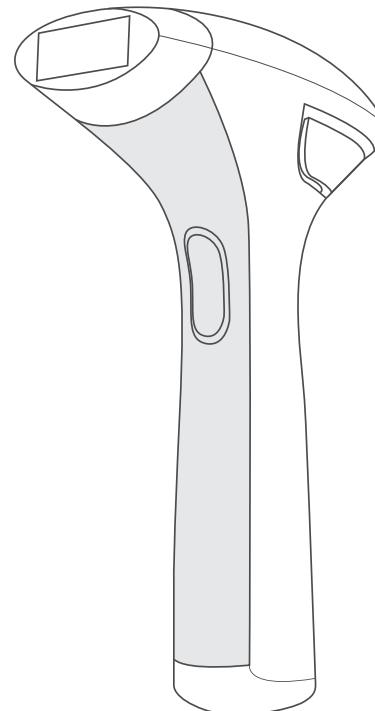

## 取扱説明書・保証書付

本書は製品の説明書および保証書となります。  
ご使用前に必ずよくお読み頂き大切に保管してください。

## 目次

|               |       |
|---------------|-------|
| 目次            | 1     |
| 安全上の注意        | 2~7   |
| 海外でのご利用について   | 8     |
| 各部名称・セット内容・表記 | 9.10  |
| 仕様・ご使用の前に     | 11    |
| 使用方法          | 12.13 |
| ムダ毛ケアの頻度について  | 14    |
| よくある質問        | 15    |
| カートリッジの交換方法   | 16    |
| お手入れについて      | 17    |
| 保管・点検         | 18    |
| こんなとき         | 19.20 |
| 保証と個人情報の取り扱い  | 21    |
| 保証書・お問い合わせ先   | 22    |

## 安全上の注意

- ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。  
異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。  
ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。  
注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをする事で生じると想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。  
※物的損害とは、家屋、家財、家畜、ペットに関わる拡大損害を示しています。



禁止の行為であることを知らせるものです。



行為を強制・指示する内容を知らせるものです。



注意する内容を知らせるものです。



警告

- 子供の近くで使用しない。  
フラッシュは強い光のため目を傷める危険があります。
- フラッシュ使用直後にフィルターに触れない。  
使用直後のフィルターは高温になるため、フィルターに触ると、やけどの原因になります。
- 通気口をふさいだまま使用しない。  
発煙・発火の原因となります。
- 目には直接照射しない。  
目を傷める原因となります。

## 安全上の注意



次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- 医師の治療を受けている人 ● 成長過程の人急性疾患
- 結核性疾患 ● 発熱している人 ● 高血圧伝染病患者
- 皮膚がん・悪性腫瘍 ● アレルギー体質血液疾患 ● 内臓疾患
- 皮膚病 ● アトピー性皮膚炎 ● 敏感肌または肌の弱い人
- 疲労が激しい人 ● 皮膚トラブルがある人 ● 体調がすぐれない人
- 酒気帯びの人 ● 眠気を誘う薬を服用中の人は
- 妊娠中・生理中・授乳中
- 物理的刺激などによる病的なシミのある人 ● てんかん
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- 過去三ヶ月以内に放射線治療や化学療法を受けた方



指定の部位以外や次のような部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- 切り傷 ● 整形手術をした部分 ● 口内や陰部、粘膜など ● 湿疹
- 過度に日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている部位 ● にきび
- 皮膚が化膿し炎症を起こしている部分 ● かゆみやはてりのある部分
- 母斑 ● 膨らんだホクロ ● ウィルス性のイボ ● しみ、ホクロ
- 大静脈 ● のどぼとけ ● 乳首、乳輪 ● へそ内部 ● 頭部 ● 眉毛
- 目と目の周り ● 脣とその付近 ● 頭髪 ● 外陰部、肛門、その周辺
- 刺青、タトゥー、ボディペイント ● そばかす ● イボ

ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。

または、使用後皮膚に異常が現れた場合には使用を中止して皮膚科医に相談してください。

- ゴムインプラント物、心拍調整器、インシュリン注射器または体にリンクを付けたところなど全ての人工物質の表面及び周り

ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。

または、使用後皮膚に異常が現れた場合には使用を中止して皮膚科医に相談してください。

## 安全上の注意

次のいずれかの薬物を服用している場合は使用しないでください。

- 現在または以前にα-ヒドロキシ酸(AHA)、β-ヒドロキシ酸(BHA)、また、イソトレチノインとアゼライン酸の治療を受けている場合。

- 過去6ヶ月以内に(内服または外部使用)Accutane® A酸またはRoaccutane® A酸を使用された方。

- 痛み止め薬を内服している方。

- 光敏感剤または薬物を内服している方は、薬の説明書をよく読んでください。但し、光敏感反応、光毒性反応または薬を飲んだ後、日光の照射を避ける必要があるなど説明がある場合は使用しないでください。

- 血液の抗凝結薬、大量にアスピリンを服用している方。

- 免疫抑制薬物の治療を受けている方。

ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。

- 
- 過剰な連続使用をしないでください。

業務用としての使用しないでください。

10分使用した場合は10分以上本体を休ませてください。

ケガ・発熱・ガラス管の割れなどの原因となります。

- 電源アダプターを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えないでください。また、重いものを乗せたり、挟み込んだりすると、アダプターケーブルが破損し、感電の原因となります。

- 異臭・異常発熱したときは使用しないでください。そのまま使用すると破損・発火の原因となります。

- 本体に重い物を置いたり使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えないでください。

ケガ・故障・ガラス管の割れなどの原因となります。

- 使用しないとき、お掃除するときは電源アダプターを壁面コンセントから抜いてください。

感電・ショート・発火の原因となります。

- 子供や身体の不自由な方だけでの使用は避けてください。

未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用してください。

ケガをする原因となります。

## 安全上の注意



### 警告

- タコ足配線をしないでください。発熱・発火・破損の原因となります。
- 分解や修理・改造はしないでください。火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。
- 引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しないでください。  
火災・ケガの原因となります。
- 照射部を直視しないでください。また、周りの人が見ないようにしてください。目を傷める原因となります。
- 暗い部屋で使用しないでください。目を傷める原因となります。また、製品が正常に動作しない場合があります。
- 電源アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  
感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相ください。
- 電源アダプターを引っ張って製品を移動したり、持ち上げたりしないでください。  
感電・ショート・発火・断線の原因となります。
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しないでください。  
ケガをしたり、本製品が故障する原因となります。
- 本体や電源アダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いしないでください。浴室や洗面台、湿気の多い所で使用しないでください。  
感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 電源アダプターを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください(金属部に触れないようにする)。  
また、ぬれた手で抜き差しはしないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
- 必ず交流100-240Vで使用してください。電源アダプターは根元まで確実に差し込んでください。  
火災・感電・故障の原因となります。
- 必ず専用の電源アダプターを使用してください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 照射口、肌センサーが汚れていないか定期的に確認・掃除をしてください。やけどや故障の原因となります。
- 万一異常が発生したら、すぐに使用を停止してください。動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。  
製品が正常に動作しない場合があります。



禁止



必ず  
守る

## 安全上の注意



### 警告

- 火のそばや炎天下、浴室などの高温多湿の場所、可燃性ガス、燃えやすいもののそばに放置しない。また、火中投入したり、熱器具に近づけない。発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。



### 注意

- 使用前に照射口、肌センサーに変形、変色、破損がないか確認し、破損・故障した場合は、使用しないでください。  
肌や指の傷、やけどなどのトラブルや、症状悪化の原因となります。
- 同じ部分に1日2回以上フラッシュを照射しないでください。  
・過度な照射をしても効果は変わりません。  
・1回の使用中に、照射部分が多少重複しても問題ありません。
- ワキの下のお手入れをした直後に制汗剤を使用しないでください。  
赤みが完全に引くまで使用をお控えください。
- 屋外で使用しないでください。本体が故障する原因となります。  
また正常に動作しない場合があります。
- 衣服や頭髪・物に照射しないでください。焦げたり、変色・破損の原因となります。
- ケア直後の箇所に、香水やメイクアップ化粧品を使用しないでください(保湿のためクリーム・ローション・日焼け止めは除く)。  
肌トラブルの原因となります。
- 本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かないでください。  
本体の表面に損傷を与える原因となります。
- ペットや家畜などには使用しないでください。ケガの原因になります。
- 肌に発疹・炎症・かゆみなどの異常を起こしている場合や、使用中、使用後に肌に異常がみられるときは使用しないでください。



禁止

## 安全上の注意



- 肌に発疹・炎症・かゆみなどの異常を起こしている場合は、ケアした日の入浴(シャワーは可)、運動、飲酒を控えてください。
- ご自身の肌にあったレベルで使用してください。初めて使用する時や慣れるまでは、必ずレベル1からご使用ください。
- 肌に毛くずが残っている場合は、取り除いてください。フラッシュ照射時に熱く感じる事があります。
- 毛が1mm以上の場合は、ムダ毛を処理してからフラッシュ照射をしてください。  
長いムダ毛を処理せずにフラッシュを照射すると、毛くずが製品に付着して焦げの原因となります。
- 使用後は毎回、製品に付着した毛くず・化粧品などを取り除いてください。焦げ、故障、肌トラブルの原因となります。
- 使用環境温度を守ってください。使用できる環境温度は5~35℃です。使用する場所の室温を確認してください。  
場所を変えた直後は、室温に対応しない事があります。故障破損の原因となります。
- フラッシュ照射後24時間は、照射した箇所が紫外線に当たる事を避けてください。  
24時間経った後でも赤みがみられる場合は、紫外線を避けてください。また、ケアをしている期間はお肌を保護してください。肌トラブルの原因となります。
- 使用後、肌のほてりが続く場合は、保冷剤や冷たいタオルなどで十分に冷やしてください。  
ケア後は個人の体質や使いかたにより、肌が熱をもつ事があります。異常が治まらない場合は医師にご相談ください。
- カートリッジに黒い汚れや化粧品、毛くずなどが付着していないか確認してから使用してください。  
カートリッジの焦げ、製品故障の原因となります。



必ず  
守る

## 海外でのご利用について



- 必ず交流100~240Vで使用する。  
火災・感電の原因となります。  
※海外からの修理保証への依頼には日本国内で発送受取が可能な連絡先、住所が必要となります。
- 必ずプラグ形状電圧を確認のうえ使用すること。  
発熱・発火・故障の原因となります。

- 本製品はAプラグです。それ以外の場合はプラグ交換アダプターをご使用ください。  
※付属品ではありません。


主なプラグ形状と使用国

| タイプ | プラグ形状 | 主な使用国  |
|-----|-------|--|
| A   |       | アメリカ、カナダ、ハワイ、スペイン、グアム島、サイパン島、タイ、韓国、台湾、中国、フィリピン、ベトナム、ブラジル、トルコなど |
| B3  |       | イギリス、スイス、中国、香港、インド、シンガポール、フィリピン、エジプト、南アフリカ共和国など                |
| BF  |       | カナダ、イギリス、イスラエル、タイ、韓国、シンガポール、中国、香港、エジプト、南アフリカ共和国など              |
| C   |       | イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、インド、タイ、韓国、中国、香港、マレーシア、トルコなど        |
| 0   |       | イギリス、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、台湾、中国、フィリピン、アルゼンチンなど             |


- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

## 各部名称・セット内容

### 本体

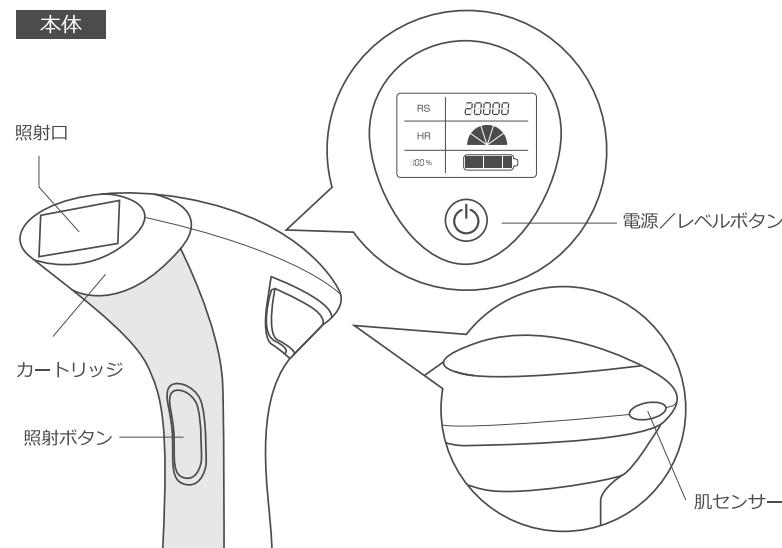

AC アダプター

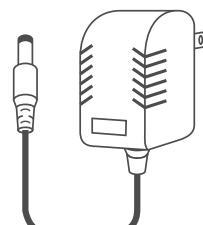

専用サングラス




取扱説明書



※保証書付

## 各部名称・表記

### ●操作表示部

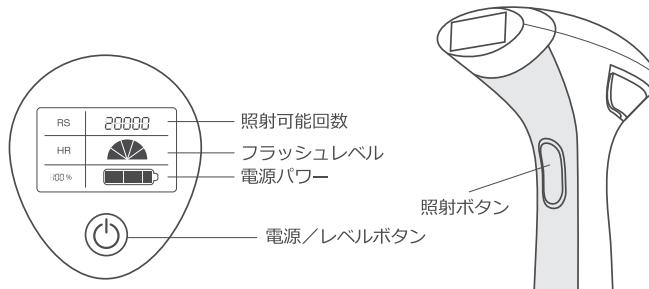

### ●電源/レベルボタン

電源オン:起動は電源ボタンを押します。

電源オフ:長押し(約3秒)します。上部液晶画面が消灯します。

### ●レベルボタン

フラッシュレベルの切り替えができます。

レベルは5段階あり、扇型のレベルランプで表示します。

| レベル1<br>電源オンレベル<br>切替時 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 |
|------------------------|------|------|------|------|
|                        |      |      |      |      |

※レベルを高くするほどフラッシュが熱く感じられます。

使い始めは必ずレベル1からご使用ください。

### ●照射ボタン

肌に照射口を当てるとフラッシュ照射できます。

照射口にセンサーがついており肌にしっかりと密着していないと照射されません。

※付属品のデザイン仕様は、品質向上のため予告なく  
変更する場合があります。

## 仕様

品名 : COSBEAUTY IPL 光美容器  
サイズ : 本体 約W80.5×H218.6×D144.6(mm)  
重量 : 約355g  
電源 : DC12V／3A  
消費電力 : 36W  
照射回数 : 20,000回  
アダプター : AC 100-240V 50/60Hz  
フラッシュレベル : 5段階  
Made in China

### 廃棄について

本製品を廃棄される場合は、各自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

## ご使用の前に

### ムダ毛ケアの準備

製品本来の効果を得るために、ムダ毛ケアの前は必ず行ってください。  
※ケアする部分の毛が1mm以上のときは前もってカミソリまたはシェーバー等で処理をしてください。  
※素肌でご使用ください。メイクは落とし、肌の水分や汗、ローション、乳液などは拭きとてください。

- 1 カミソリまたはシェーバーで施術する部分のムダ毛を処理。  
※肌表面にムダ毛が残っていると、やけどの危険があります。  
肌表面から毛くずを取り除いてください。  
※ケア前に毛抜き、ワックス等を使用した脱毛は行わないでください。
- 2 照射口、肌センサーにほこりや毛くずなどの汚れ、破損などの異常がないことを確認する。  
・汚れている場合は必ず掃除をしてください。  
製品の故障や劣化、やけどやケガ、肌トラブルの原因となります。

## 使用方法

### フラッシュ照射のしかた

製品を初めてご使用になる際は必ず下記手順に従ってご使用ください。  
フラッシュがまぶしいと感じる場合は付属のサングラスを着用してください。

- 1 ACアダプターを本体のアダプタープラグ差込口と壁面コンセントに、しっかりと差し込む。  
※本製品は充電式ではありません。  
電源を接続した状態で使用してください。
- 2 電源ボタンを押して電源をオンにする。  
本体上部にある液晶画面が明るくなり、照射可能回数、電源パワーが20%に表示されます。
- 3 背面にある肌センサー(P9)をケアしたい部位付近の目立たない箇所に押し当て照射可能かチェックをする。  
肌色が濃い部分や、日焼け肌など、やけどの可能性がある部分に対して、センサーが動き、本体が起動しない仕組みになっています。ケアが可能な場合は本体のファン音が起動して、液晶画面の電源パワーが100%になり、フラッシュレベルが表示されます。
- 4 レベルボタンを押してレベル1を選択する。  
フラッシュレベルは5段階あります。  
初めてお使いになる場合は必ずレベル1で行ってください。
- 5 照射口を肌にしっかりと密着させて、照射ボタンを押す。  
照射口が肌にしっかりと密着していないと照射できません。  
※照射部を直視しないでください。  
※フラッシュがまぶしいと感じる場合は付属のサングラスを着用してください。
- 6 電源ボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。  
上部の液晶画面が消灯します。
- 7 照射テスト後、24時間経ってからお肌を確認する。  
お肌に異常(赤みや水泡・ただれ等)がみられなければ製品の使用が可能です。

## 使用方法

### P 12 の照射テストで肌に異常が見られなかつた方

#### P 12 の 1 ~ 3 の手順参照

- 4 レベルボタンを押してレベルを選択する。  
フラッシュレベルは5段階あります。  
温かさや少しの熱さを感じるレベルに設定してご使用ください。  
痛みを感じるようなレベルでは使用しないでください。  
使用部位によってレベルを調整してください。
- 5 照射口を肌にしっかりと密着させて、照射ボタンを押す。  
照射口が肌にしっかりと密着していないと照射できません。  
※照射部を直視しないでください。
- 6 少しずつ照射位置を変えながらケアを行う。  
※照射口の大きさが一度にケアできる範囲です。  
※本体が異常に熱くなっていると感じた場合はただちに使用を中止してください。  
※ファンの音が変わることがあります。故障ではありません。  
ファンが止まっている場合はただちに使用を中止してください。
- 7 ケアを終了するときは、電源ボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。  
上部の液晶画面が消灯します。
- 8 化粧水・保湿ローションなどで照射したお肌を保湿する。  
※肌に赤みがある場合や熱をもっている場合は保冷剤やぬらしたタオル等で照射した肌を冷やしてください。
- 9 使用後はACアダプターを抜き、本体を清掃してください。

## ムダ毛ケアの頻度について

### 使用頻度の目安

最適なお手入れ頻度は、**使用する部位、毛質、体质等の個人差**があります。

#### 最初の 2 ヶ月

1~2 週間に 1 度



#### 3 ヶ月目以降

4~8 週間に 1 度

※効果を感じにくい場合でも、同じ場所に繰り返し使用しないでください。また、  
その場合は、3日に1回使用を限度としてお試しください。効果は使用する部位、  
毛質、体质等の個人差があります。

※フラッシュ照射後に、お肌の赤みが気になる場合、またはお肌が熱を持っている  
場合は、照射した部分を冷やしてください。



過度な使用をしない。

上記頻度を超えて使用する場合は、必ずお肌の状態を確認しながら  
使用してください。肌トラブルの原因となります。

注意

## よくある質問

### ●よくある質問と回答

Q. フラッシュが熱く感じたり、赤みや痛みが出るのですが？

A. フラッシュは多少の熱さを感じます。

熱さを感じる原因としては、長いムダ毛が残っていたり、日焼けしたお肌に照射した場合などがあります。  
ムダ毛を処理し、日焼けしていない状態で使用してください。  
赤みや痛みが出た場合は、ただちに使用を中止してお肌を冷却・保湿してください。治らない場合は、直ちに使用を中止して医師にご相談ください。

Q. 1日に何回も使用できますか？

A. 同じ部分に1日2回以上、フラッシュを照射しないでください。

Q. フラッシュ直後に、焦げたにおいがするのですが？

A. フラッシュによりムダ毛に熱が加わったため、毛の焦げたようなにおいがします。フラッシュ照射時以外で製品本体から異臭がする場合は、ただちに使用を中止して本体の電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いてください。また、販売店またはコスビューティーお客様お問い合わせ窓口にご連絡ください。

Q. 冷却・保湿ジェル等をぬった状態で使用できますか？

A. 故障の原因となるため使用しないでください。

Q. いくら充電しても電源パワー表示が20%のまま変わらないのですが？

A. 本製品は充電式ではありません。肌センサーで肌をチェック後、本体が起動すると表記が100%になります。

Q. 肌センサーでチェックしても本体が起動しないのですが？

A. 肌と肌センサーの間に隙間があったり、暗い場所で肌チェックをすると反応しない場合があります。明るい場所や、チェック箇所変えてお試しください。  
肌色が濃い部分、日焼けした肌にも安全センサーが働き、起動しない場合があります。

また延長コードやタコ足配線での使用も起動しない場合があります。

## カートリッジの交換方法

### カートリッジの着脱方法と交換について



カートリッジの交換時は、必ず本体の電源をOFFにしてからカートリッジを外してください。  
本体電源が入ったまま、カートリッジの脱着を行うと、ショット残数が0になり、ご使用いただけなくなりますのでご注意ください。

### ●取り外しかた

本体の電源を切り、アダプターを本体から外す。

カートリッジの左右を持ち、矢印の方向へ水平にスライドして取り外す。



### ●取り付けかた

カートリッジの溝と本体の装着部を合わせ、本体に押し付けるようにしながらカートリッジを根元までしっかりと差し込む。

### ●カートリッジの寿命

液晶画面の照射回数がフラッシュランプの残数です。

本機は最大20,000発カートリッジ対応です。

カートリッジが寿命を迎えたたら必ず新しいカートリッジと交換してください。

※寿命を過ぎたカートリッジは絶対に使用しないでください。

ガラス管が破損し、ケガをする原因となります。ガラス管が破損した時は、手にケガをしないように注意してください。破片が散らばらないように必ず新聞紙などの紙の上でカートリッジの照射面を下に向かた状態で取り外してください。

交換用カートリッジのご購入に関しましては、お買い上げの販売店またはコスビューティージャパンお客様お問い合わせ窓口にご相談ください。

## お手入れについて

### お掃除のしかた

照射口、肌センサー部は、使用後に毎回必ず掃除をしてください。  
その他の部分についても故障・動作不良を防ぐために、定期的に掃除をしてください。  
掃除する際は必ず電源をオフにし、アダプターを本体と壁面コンセントから抜いてから行ってください。

#### ●照射口・肌センサーの掃除

- 1** 掃除ブラシや水で湿らせて固くしぶった布で、照射口、肌センサーの毛くずや汚れを拭き取る。
- 2** 乾いた柔らかい布や綿棒で、フィルター（黄色いガラス）に付いた汚れを取り除く。  
※指紋などの汚れも拭き取り、きれいに保ってください。  
フィルターが汚れていると、焦げたり、機能低下、故障、肌トラブルの原因となります。

#### ●本体のお掃除

- 水で湿らせて固くしぶった布で、表面の汚れを拭き取る。
- ・汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスポンジや布で拭き取つてください。
  - ・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
  - ・本体は防水ではありません。水洗いをしないでください。

## 保管・点検

### 保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体やアタッチメントのお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターを壁面コンセントから抜いて保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のある場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- 子供の手やペットが届かない場所に保管してください。

### 点検について

- 長期間使用しなかった状態で本製品を再び使用するときは、使用前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困った場合には」を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえコスビューティーお客様問い合わせ窓口までご相談ください。

## こんなとき

### 困った場合には

| こんな症状                | 考えられる原因   | 処置方法   |
|----------------------|---|--|
| 電源が入らない<br>(電源が切れない) | ▶ ACアダプター本体<br>および壁面コンセント<br>に差し込まれていない<br><br>▶ 電源ボタンを正しく<br>押していない<br><br>▶ 暗い場所で使用している                                   | ▶ ACアダプターを本体<br>および壁面コンセント<br>に差し込んでください<br><br>▶ 電源ボタンを押す<br>(電源ボタンを長押し<br>する)<br><br>▶ 明るい場所で使用して<br>ください                                    |
| 電源が切れる               | ▶ 電源をオンにしてから<br>しばらく放置していた<br>ら(自動電源オフ)になっ<br>た<br><br>▶ ACアダプターが抜け<br>かけている  | ▶ 再度電源ボタンを押す<br>て本体を起動させてく<br>ださい<br><br>▶ アダプタープラグを<br>本体の奥までしっかりと<br>差し込んでください   |
| フラッシュが出ない            | ▶ ACアダプターが壁面<br>以外のコンセントに差<br>し込まれている<br><br>▶ 照射ボタンを押して<br>いない<br><br>▶ 照射準備が完了して<br>いない<br><br>▶ カートリッジがしっかりと<br>装着されていない | ▶ 壁面コンセントに差し<br>込んでください<br><br>▶ 照射ボタンを押してく<br>ださい<br><br>▶ 背面にある肌センサー<br>を照射部分にしっかりと<br>当て照射スタンバイをす<br>ください<br><br>▶ カートリッジをしっかりと<br>装着してください |

## こんなとき

| こんな症状                 | 考えられる原因  | 処置方法  |
|-----------------------|--|---|
| フラッシュが出ない             | ▶ 照射口が肌にしっかりと<br>密着していない。<br>すき間が空いている。  | ▶ 照射口をしっかりと<br>肌に密着させてく<br>ださい。   |
| フラッシュが熱く、<br>または痛く感じる | ▶ レベルが高い<br><br>▶ 同じ箇所に2回以上<br>照射している<br><br>▶ お肌の表面にムダ毛が<br>残っている<br><br>▶ 使用禁止部位に使<br>用している。 | ▶ レベルボタンを押して<br>レベルを下げてく<br>ださい<br><br>▶ 同じ箇所に2回以上<br>照射しないでく<br>ださい<br><br>▶ 1mm以上のムダ毛は<br>処理し毛くずを取り除<br>いてから照射してく<br>ださい<br><br>▶ 使用禁止部位を確<br>認してください |
| フラッシュがまぶしい            | ▶ 照射口全体が肌に触<br>れていない   | ▶ 照射口全体が肌に触<br>れるようにしてく<br>ださい。付属のサングラスを着<br>用してください  |
| 「ブーン」と音がする            | ▶ ファンの動作音です<br>異常・故障ではありません  |   |

## 保証と個人情報の取り扱い

### ●保証について

- 1 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします。
- 2 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。  
保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただくことがあります。
- 3 保証期間中でも有料修理となるケースがありますので、保証規定の説明をよくお読みください。
- 4 万一、故障が生じた場合は、販売店またはコスビューティージャパンお問い合わせ窓口にご相談ください。

#### 《保証規定》

- 1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
  - 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
  - 3.ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
  - 4.ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、コスビューティーお客様問い合わせ窓口にご相談ください。
  - 5.保証期間でも、つぎの場合は有料修理になります。  
(イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による販売店名欄の記入または押印がない場合による故障および損傷。  
(ロ) お買い上げ後の転倒落下などによる故障および損傷。
  - 6.本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This Warranty is Valid Only in Japan.
- (ハ)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。  
(ニ)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。  
(ホ)電池や消耗品などの部品交換の場合。  
(ヘ)一般家庭以外(例えは業務用の長時間)に使用された場合の故障および損傷。  
(ト)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。  
(チ)お買い上げ後の輸送・移動落下等による故障および損傷。  
(リ)保証書のご提示がない場合。  
(ヌ)保証書のお買い上げ年月日、お客様名・販売店名簿の記入または捺印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。  
※ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

### ●個人情報の取り扱い

- 1 お客様の個人情報は弊社の商品の発送、連絡、問い合わせ、回答、依頼作業、新商品・キャンペーン情報(広告を含む)の案内(電話・郵送・Eメール等の方法による)に利用致します。
- 2 弊社はお客様情報を第三者へ提供することはありません。  
但し、以下のいずれかに該当する場合を除きます。
  - ・弊社商品の発送等に必要な個人情報。
  - ・法令に基づく場合。
  - ・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合。

## 保証書

保証期間 お買い上げ年月日より1年間

製品名 : COSBEAUTY IPL光美容器

氏名 :

住所 :

COPY

電話番号 :

ご購入日 : 年 月 日

販売店名・取扱店印

## お問い合わせ先

コスビューティージャパン

お客様問い合わせ窓口 **03-6722-0547**

受付 : 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

※修理をご依頼される際は、お買い上げ日が記載されている保証書  
または購入明細をご用意ください。

製造元

株式会社COSBEAUTY JAPAN

〒108-0073 東京都港区三田1-3-39 勝田ビル6F  
www.cos-beauty.com info@j-cosbeauty.com  
NO.A80F08