




COSBEAUTY リフトアイロン

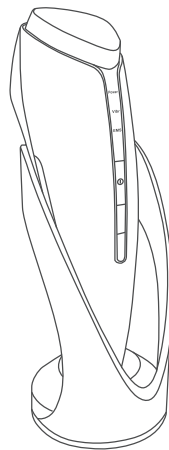

取扱説明書・保証書付

本書は製品の説明書および保証書となります。
ご使用前に必ずよくお読み頂き大切に保管してください。

目次

目次	1
安全上の注意	2～6
各部名称・セット内容	7.8
仕様	9
充電方法	10
ご使用前に	11.12
使用上の注意	13.14
プログラム一覧	15
保湿	16
弾力	17
ハリ・キメ	18
毛穴ひきしめ・メイク直し	19
ケアの方法	20.21
お手入れと保管方法	22
こんなときは	23～26
Q&A	27.28
保証と個人情報の取り扱い	29
保証書 / お問い合わせ先	30

安全上の注意

- ご使用になる前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産の損失を未然に防ぐものです。必ずお守りください。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性があり、リスクの度合いが高いと想定される内容を示します。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
※物的損害とは、家屋、家財、家畜、ペットに関わる拡大損害を示します。



禁止の行為であることを知らせるものです。



行為を強制・指示する内容を知らせるものです。



危険

下記の電子機器との併用は絶対にしてしないでください。



禁止

- ペースメーカーなどの体内挿入型医用電子機器。
- 人工肺などの生命維持用医用電子機器。
- 心電計等の装置型医用電子機器。
- その他の治療器具との同時使用はしないでください。誤作動をまねく恐れがあります。

安全上の注意



警告

次の人は医師と相談してご使用ください。

- アトピー性皮膚炎の方
- アレルギー体質・金属アレルギーの方
- 特に肌が敏感な方
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方
- 心臓に障害のある方
- 急性（疼痛性）疾患のある方
- 悪性腫瘍のある方
- 顔面神経痛の方
- 妊娠中、授乳中の方
- 生理中の方
- 有熱性疾患の方
- 血圧異常の方
- 感染性疾患の方
- 結核性疾患の方
- 血友病疾患の方
- 歯の治療中の方
- 飲酒、薬を服用中、疲労が著しい時



使用前
に相談

次の部位には使用しないでください。

- 目や耳のまわり、眼球及び上まぶた（HOT&COOLモード以外）
- 切り傷・整形手術をした部位・口内や陰部、粘膜など
- 顔面黒皮症の部分
- ニキビや吹き出物で炎症を起こしている部分
- 化粧品などで、炎症を起こしている部分
- 痛覚、知覚障害を起こしている部分
- 皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んだ部分
- 痒みやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部分
- 肌に炎症や異常を感じている部分
- 指定された用途以外の目的で使用しないでください



禁止

安全上の注意



禁止

- 100～240V以外の電源を使用しないでください。火災や感電の可能性があります。
- 本製品、電源コード、電源アダプターが破損や変形をしている時は使用しないでください。
- 電源コードに負担をかけないでください。（無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重い物をのせない・熱いものに近づけない・束ねない・はさみ込まない・加工しない）
- 充電台座、アダプターは防水ではありませんので濡れた手で触れたり、コンセントを抜き差ししないでください。
- 充電スタンド及び電源アダプターを浴室や湿気の多い場所で使用しないでください。
- 自動車を運転しながら使用しないでください。強い刺激を受けると重大な事故やトラブルにつながる恐れがあります。
- 電源を入れた状態で長時間放置しないでください。事故や故障の原因になります
- ほかの電気製品（美顔器など）との同時使用はしないでください。
- 絶対に製品を改造・分解・修理しないでください。
- 乳幼児や子供に使用したり、手の届くところでの使用や保管をしないでください。
- 意思表示のできない方に使用しないでください。



必ず
守る

- 使用しない時は、電源アダプターをコンセントから抜いてください。
- 本体に異音や異常（過熱や焦げた臭いがする等）を感じた場合はご使用を中止し、電源を切ってください。
- 使用時間や使用頻度は取扱説明書の内容をよく読み、守ってください。
- 使用中に痛みや不調を感じた時や、使用后、肌に異常を感じた時は使用を中止して専門医に相談してください。
- 使いはじめの方は、肌の様子を見ながら使用してください。

安全上の注意



注意

- プレート部分を肌に強く押しつけたり、5秒以上、同一の部位にあて続けしないでください。
- 美容目的以外には使用しないでください。
- 落としたり、ぶつけたり、本体に強い衝撃を与えないでください。感電・発火・けがの恐れがあります。
- 損傷した場合は使用しないでください。感電・発火・けがの恐れがあります。
- 本製品に付属している AC アダプター以外使用しないでください。故障の原因となります。
- 充電アダプターをお手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 充電アダプターが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
- 業務用として使用しないでください。また、不特定多数の人が使用する場所に置かないでください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなどの薬品や殺菌・消毒剤で拭いたりしないでください。変形、変色、ひび割れなど故障・破損の原因となります。
- 家族および他人と共有しないでください。感染症の恐れがあります。
- ペットや家畜等の動物には使用したり、ふれる可能性のある場所に保管しないでください。
- ドライヤー等の熱風はあてないでください。高温による変形の恐れがあります。
- 本体に強い水流を当てたり、水につけたりしないでください。
- 本体及び電源アダプターを浴室や高温、多湿、直射日光の当たる場所に保管しないでください。



禁止

安全上の注意




必ず
守る


- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用してください。
- 使用中に身体に違和感を感じた場合は、使用を中止してください。
- 使用中、使用後に肌の異常がみられるときは使用を中止し、医師に相談してください。
- 肌の状態にあわせて使用してください。
- 日焼け直後、ピーリングとの併用は控えてください。
- 使用する時はプレートから保護キャップを外してください。
- 本体を連続使用（主にクールモード）しないでください。本体内の温度が上昇し、クールモードの冷え方が弱くなったり安全の為、一定時間使用ができなくなったり、故障の原因となります。
- イオンモード使用時は、プレート面と肌との間に常に化粧品があるようにしてください。化粧品が少ないとイオンの伝達が悪くなり効果が低下したり、肌トラブルの原因となります。
- 使用後は必ず電源を切ってください。
- プラグの脱着時は、プラグ部分をもって確実に差し込んでください。コードをもって引き抜きますと故障の原因となります。
- 使用後は清潔な布を水で濡らして固く絞り、プレートや本体の汚れをふき取ってください。薬品等は絶対に使用しないでください。

各部名称・セット内容

本体

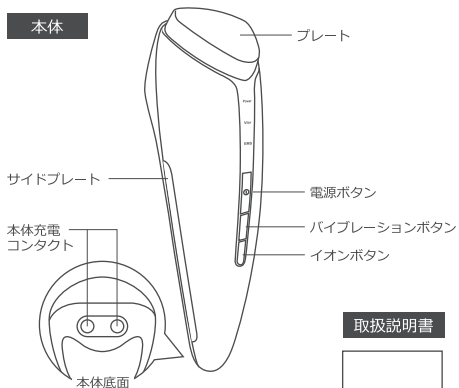

充電台座

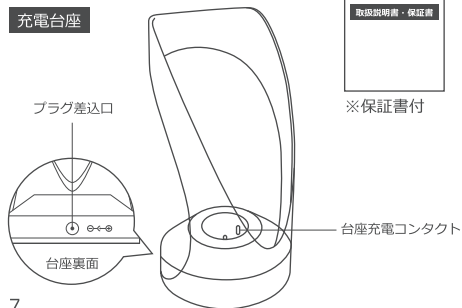


取扱説明書



※保証書付

各部名称・セット内容

充電アダプター

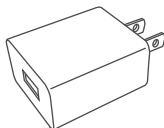


充電用ケーブル




保護キャップ



コットンリング

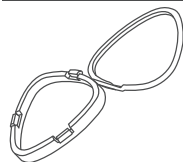

コットン

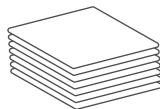

10枚

※別売は行っておりません。

仕様

品名：コンピューター リフトアイロン
サイズ：本体 約 W50×H156×D57 (mm)
重量：本体 約 150g / 充電台座 35g
電源：充電式 DC 5V 1000mAh Max
充電時間：約 3～4 時間
使用時間：約 40分
バッテリー：リチウムイオン電池 1000mAh
材質：ABS、アルミニウム (クロムメッキ)

アダプター

電源：入力 AC100-240V 50/60Hz 0.25A Max
出力 DC 5V 1.0A

Made in China

電池の破棄

本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。
廃棄の際はお客様がお住いの各自治体にお問い合わせの、
指示に従って廃棄してください。


充電方法



購入直後や長期間使用しなかった場合は必ず本体を
充電し、充電ランプが赤点滅から白点灯に変わった
ことを確認してから使用してください。

● 本体を充電する


1. ケーブルプラグを充電スタンドの
プラグ差込口に接続し、充電アダプター
を壁面コンセントに差し込む。
2. 充電スタンドに本体を設置する。

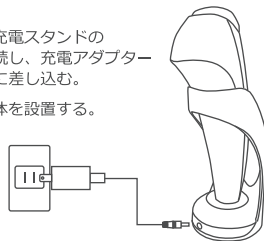

3. 充電中は Power 下の LED が
赤く点滅します。
4. 充電完了で Power 下の LED
が白く点灯します。

充電の目安

充電時間	動作時間
約 3～4 時間	約 40分

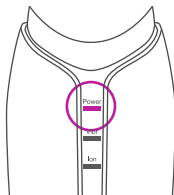

※満充電直後からの動作時間です。

※充電時間、動作時間は使用方法、使用環境、使用頻度によって変わります。


● 充電が完了したら

充電が完了したら必ず充電スタンドから本体を外してください。
充電完了から、長時間充電を続けるとバッテリーの寿命が著しく
短くなります。

ご使用前に

● 本体の表示とボタンの説明

使用前にLED表示とボタン操作の説明をご確認ください。

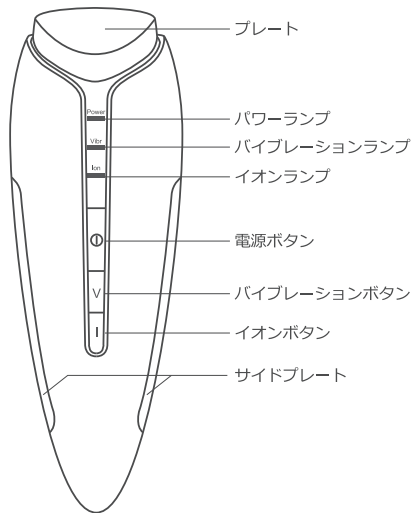

● 本体使用中のパワーランプ表示

白点灯 … スタンバイモード

赤点灯 … HOTモード

青点灯 … COOLモード

点 滅 … 充電残量の不足

ご使用前に

● HOTモード / COOLモードの起動

電源ボタン … スタンバイモード
を1回押す パワーランプが白色点灯します。

電源ボタン … HOTモード (プレート温度: 約42℃)
を2回押す パワーランプが赤色点灯します。
※3分後、自動的にCOOLモードになります。

電源ボタン … COOLモード (プレート温度: 約12℃)
を3回押す パワーランプが青色点灯します。
※4分後、自動的にスタンバイモードに戻ります。

● バイブレーションモードの起動

電源ボタン … スタンバイモード
を1回押す パワーランプが白色点灯します。

バイブレーションボタンを押す度に、
バイブレーションランプが白点灯 / 消灯し、
振動のON / OFF操作ができます。
※起動から7分後、自動的にスタンバイモードに戻ります。

● イオンモードの起動

電源ボタン … スタンバイモード
を1回押す パワーランプが白色点灯します。

イオンボタンを押す度にイオンランプが白点灯 / 消灯し、
イオンモードのON / OFF操作ができます。
※起動から7分後、自動的にスタンバイモードに戻ります。

● 電源をオフにする

電源ボタンを長押し(約2秒)すると本体電源がオフになります。
また、スタンバイモードで3分間、何も操作しないと自動的に
電源がオフになります。

使用上の注意

次の項目をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●プレート温度について

HOTモードは約42℃、COOLモードは約12℃の設定になっていますが周囲の環境温度、充電電池残量、連続使用回数による内部温度によって前後する場合があります。

HOTモードを使用する際は、プレートをすぐに顔に当てずに、指でプレートの温度を確認してから、お顔に当てるようにしてください。

●連続使用と安全停止機能について

本製品の使用時、及び使用後はプレート部分の温度を急速に変化させる為、内部に熱がたまりやすく、本体の温度が上昇しますが故障ではありません。

また、短時間に繰り返し使用するとCOOLモードの温度が冷えにくくなったり、内部の安全停止機能によって一時的に使用できなくなります。しばらく時間を置いてからご使用ください。


●COOLモードついて

COOLモードを連続使用すると製品の性質上、内部温度が上昇しやすく安全停止機能が働きやすくなります。内部温度が下がるまで、しばらく時間を置いてからご使用ください。

●イオンモードついて

必ず本体両方の【サイドプレート】に触れるように持ってください。サイドプレートに触れていないと、イオントリートメントが正常に行えません。

また、本体底面にある【充電コネクタ】に触れないようにしてください。電気が逃げてしまいイオントリートメントが正常に行えません。

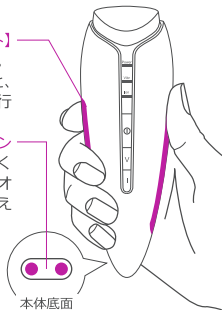

使用上の注意

●イオンモードを使用する時

イオンモードを使用する時は必ず油分や汚れを落とし、お肌を清潔な状態にしてからご使用ください。

HOTモード、COOLモード、バイブレーションモードはメイクの上からでもご使用になれます。


●コットンの付け方

HOTモード+イオン導入機能の際、付属のコットンリングを使用して、コットンを本体に取り付けます。

①本体にコットンリングを装着する。

②コットンをプレートの上に置く。

③コットンリングの上部を上から開けてコットンを挟んで固定する。

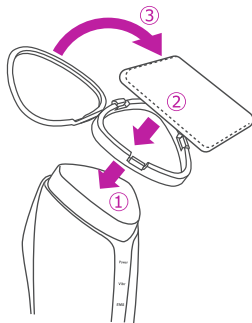

※使用するコットンが厚すぎると、コットンリングで挟めないことがあります。

※コットンリングを脱着する際は、無理な力を加えたりしないでください。破損の原因となります。

※付属のコットンはサービス品の為、別売しておりません。

※電源をオフにした状態で脱着してください。

プログラム一覧

ケアに応じて、下記のモードでトリートメントしてください。

目的	化粧品	モード	使用頻度・時間
保湿 ^{※1} (P16)	コットン + さらっとした化粧水	HOT+イオン	週2～3回 1ヶ所3分以内
	とろみが強い化粧水 もしくは シートマスク		
弾力 ^{※1}	とろみが強い化粧水 もしくは シートマスク	HOT+パイプ	
ハリ・キメ	使用しない	HOT ↓ COOL	毎日 1ヶ所7分以内
ひきしめ	使用しない	COOL	毎日 1ヶ所4分以内
メイク直し	使用しない	COOL	

- ※ イオンモードを使用する時は必ず油分や汚れを落とし、肌を清潔な状態にしてからご使用ください。
- ※ イオンモードは化粧品を使用しないとトリートメント効果が得られません。
- ※ COOLモード、パイプレーションモードはメイクの上からでもご使用になれます。

※1 使用化粧品の持つ効果によるケア

プログラム

● 保湿

1. メイクを落とし洗顔する。

油分や汚れを落とし、肌を清潔な状態にしてください。
ピーリングや除毛直後の肌には使用しないでください。

2. ご使用の化粧水を塗布、もしくはシートマスクをつける。

さらっとした化粧水を使用する時は、付属のコットンリングでコットンを装着し、コットンにご使用の化粧水を含ませてください。

3. HOTモード+イオンモードを起動させる。

電源ボタンを2回押す（HOTモードが起動）
イオンボタンを押す。

4. プレートの温度を指で確認してからトリートメントしたい部位にあてる。

肌とプレートの間に化粧水がある状態、もしくはシートマスクの上からプレートをあててください。
※プレート部分を肌に強く押しついたり5秒以上、同一の部位にあて続けしないでください。

- ※HOTモードは3分後、自動的にCOOLモードに移行します。
引き続きHOTモードを使用したい時はクールモード移行後、電源ボタンを2回押すことで、HOTモードが再起動します。
- ※イオンはイオンモード起動から7分後に自動的にオフになります。

5. 使い終わったら電源ボタンを約2秒長押しして、電源をオフにする。

パワーランプとイオンランプが消灯します。
電源ボタンを押さなくても、モード起動から一定時間経過すると、自動的に電源がオフになります。

プログラム

● 弾力

1. メイクを落として洗顔する。

油分や汚れを落とし、肌を清潔な状態にしてください。
ピーリングや除毛直後の肌には使用しないでください。

2. ご使用の化粧水を塗布、もしくはシートマスクをつける。

3. HOTモード+バイブモードを起動させる。

電源ボタンを2回押す（HOTモードが起動）
バイブレーションボタンを押す。

4. プレートの温度を指で確認してからトリートメントしたい部位にあてる。

肌とプレートの間化粧水がある状態、もしくはシートマスクの上からプレートをあててください。
※プレート部分を肌に強く押しつけたり5秒以上、同一の部位にあて続けしないでください。

※HOTモードは3分後、自動的にCOOLモードに移行します。
引き続きHOTモードを使用したい時はクールモード移行後、電源ボタンを2回押すことで、HOTモードが再起動します。
※バイブレーションはバイブレーションモード起動から7分後に自動的にオフになります。

5. 使い終わったら電源ボタンを約2秒長押しして、電源をオフにする。

パワーランプとバイブレーションランプが消灯します。
電源ボタンを押さなくても、モード起動から一定時間経過すると、自動的に電源がオフになります。

プログラム

● ハリ・キメ

1. メイクを落として洗顔する。

油分や汚れを落とし、肌を清潔な状態にしてください。
ピーリングや除毛直後の肌には使用しないでください。

2. HOT&COOLモードを起動させる。

電源ボタンを2回押す（HOTモードが起動）
※3分後、自動的にCOOLモードに移行します。

3. プレートの温度を指で確認してからトリートメントしたい部位にあてる。

HOTモードで3分間お肌を温めた後、
COOLモードで4分間冷却する。
温冷美容でお肌のハリとキメを整えます。
※プレート部分を肌に強く押しつけたり5秒以上、同一の部位にあて続けしないでください。

※HOTモードは3分後、自動的にCOOLモード4分間がスタートします。
合計7分のモードが終了するとスタンバイモードになります。
※再度、電源ボタンを押すとHOTモード→COOLモードのプログラムが再開しますが、繰り返し使用すると内部温度が上昇し正常な温度で作動しなくなりますので、しばらく時間を置いてからご使用ください。

4. 使い終わったら電源ボタンを約2秒長押しして、電源をオフにする。

パワーランプが消灯します。
電源ボタンを押さなくても、モード起動から一定時間経過すると、自動的に電源がオフになります。

● ひきしめ・メイク直し

1. COOLモードを起動させる。

電源ボタンを3回押す（COOLモードが起動）
※4分後、自動的にスタンバイモードに移行します。

2. プレートの温度を指で確認してからトリートメントしたい部位にあてる。

COOLモードで4分間冷却することで、肌をひきしめることができます。
また、メイク直しの前に使用することで、お化粧のノリがアップします。
※プレート部分をお肌強く押しつけたり5秒以上、同一の部位にあて続けられないでください。

※COOLモードは4分後、自動的にスタンバイモードになります。
※COOLモードを繰り返し使用すると内部温度が上昇しやすく、正常な温度で作動しなくなりますので、しばらく時間をおいてからご使用ください。

3. 使い終わったら電源ボタンを約2秒長押しして、電源をオフにする。

パワーランプが消灯します。
電源ボタンを押さなくても、モード起動から一定時間経過すると、自動的に電源がオフになります。

ケアの方法

①から⑥の順に、一ヶ所を約5～6回なぞるように、お顔の両面を行ってください。



①あご～耳たぶの下

あごの裏側から耳たぶの後ろまで動かします。



②口元

下から上へ弧を描くように動かします。



③フェイスライン

頬を引き上げるように口元からこめかみまで動かします。



④ほうれい線

小鼻の脇から顔の外側に向かって優しく引き上げるように動かします。



⑤目じり～こめかみ

目じりからこめかみに向かって優しく引き上げるように動かします。



⑥額

眉毛から髪を生え際に向かってやさしく動かします。

プログラム

1. 肌の保温が完了したら、電源ボタンを約2秒長押しして、電源をオフにする。

パワーランプが消灯します。

コットンリングを使用した際は取り外してください。

プレートに付着している化粧水や汚れをキレイにふき取ってください。



お手入れ方法

- 使用後は本製品を清潔に保つために、毎回お掃除をしてください。
- お手入れ及び、本製品を移動させる場合は安全のため電源を切り、充電用ケーブルを抜いてから行ってください。
- 使用後は清潔な布を水で濡らして固く絞り、プレートや本体の汚れをふき取ってください。薬品等は絶対に使用しないでください。
- 本体充電コンタクトおよび、台座充電コンタクトが汚れていると正常に充電できなくなることがあります。
- 本体に強い水流をあてたり、水中に沈めないでください。台座に水をかけないでください。

保管方法

- 長期間使用しないときは本製品の掃除をして、よく乾かしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所には放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手やペットの触れない場所に保管してください。
- 製品使用後は、バッテリー残量がゼロの状態から2時間程度充電をして保管してください。バッテリー残量がゼロの状態や満充電の状態でも長時間保管すると、バッテリーの寿命が著しく短くなります。

こんなときには

トラブル	対処方法
電源が入らない	電源ボタンを押していない 電源ボタンを押してスタンバイモードにしてから操作してください。
	充電されていない 本体を充電してください。
	内部が高温になっている しばらく時間をおいてから使用してください。
充電しても数分しか使えない	充電されていない パワーランプが白色点灯するまで充電してください。
	電池の寿命 充電電池の寿命です。 ※電池の交換は行えません。

こんなときには

トラブル	対処方法
充電されない (充電ランプがつかない)	ACアダプターが壁面コンセントに差し込まれていない ACアダプターを壁面コンセントに直接差し込んでください。
	ケーブルプラグが差し込まれていない プラグがアダプター、台座に奥まで差し込まれているか確認してください。
	本体充電コンタクトと台座充電コンタクトが汚れている 充電コンタクトを清掃してください。
パワーランプが点滅している	バッテリー残量が少ない 充電してください。
本体が熱い	しばらく時間をおいてから使用してください 本製品の使用時、及び使用後はプレート部分の温度を急速に変化させる為、内部に熱がたまりやすく、本体の温度が上昇しますが故障ではありません。

こんなときには

トラブル

対処方法

プレートが冷たく
ならない、または
熱い

連続使用している

▶ 短時間に繰り返し使用すると本体内部の温度が上昇し、COOLモードの温度が冷えにくくなったり、HOTモードで熱くなることがあります。しばらく時間を置いてからご使用ください。

環境温度や肌の温度によって左右されている

▶ 使用環境の温度によって、プレート温度は若干左右されます。冬場はHOTが温く、COOLは冷たすぎず。夏場はHOTが熱く感じ、COOLが温く感じる場合があります。

▶ イオンを感じない

イオンは体感できません

▶ イオンは微弱電流の為、体感することができません。

こんなときには

トラブル

対処方法

▶ イオンモードを
正しく使うには？

肌とプレートとの間にしっかりと化粧水を保つ

▶ 化粧品が少ないとイオンの伝達が悪くなり効果が低下したり、肌トラブルの原因となります。

▶ サイドプレートに触れるように本体を握り、本体下部の充電コンタクトに触らないようにしてください。

Q & A

●よくある質問と回答

Q. 毎日プログラムを行っても大丈夫ですか？

A. P15の使用頻度・時間をご参照ください。
過度な使用はお肌に負担をかける可能性があります。

Q. 化粧水や美容液は1回にどれくらい使用すればよいですか？

A. 普段と同量をご使用いただき、肌をしっかりと保湿してください。

Q. 化粧水や美容液の種類は？

A. 普段お客様が使用されている化粧品をお使いください。
※お使いの化粧品によってはHOTモードが合わない場合がございます。その際は、イオンモードのみでトリートメントを行ってください。

Q. クレンジングにも使えますか？

A. クレンジングにはご利用いただけません。
通常のクレンジングで顔の汚れをよく落とししてから使用してください。
※ピーリングなど刺激の強い洗顔後には使用しないでください。

Q. お風呂で使用できますか？

A. 本製品は防水規格IPX5を取得しておりますが本体に近距離で直接強い水流を当てたり、水中に沈めることはできません。
また充電台座は防水ではございません。

Q & A

●よくある質問と回答

Q. 化粧の上から使用できますか？

A. COOLモードの使用は可能です。メイク直しの前にCOOLモードを使用すると、お化粧のノリがアップします。

Q. どんな肌質でも使えますか？

A. ニキビや肌の炎症がひどいときや、金属アレルギーをお持ち場合はご使用をお避けください。
詳しくは安全上の注意をご参照ください。

保証と個人情報の取り扱い

保証規定

- 保証期間内に本説明書に従い正しくお使い頂いたにもかかわらず、故障した場合は、お買い上げいただいた国内でのみ本保証書記載内容に基づき無料修理いたします。但し、消耗品及び付属品は除きます。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理、もしくは修理不可となります。
 - 本保証書の所定事項の未記入、文字の改ざん、販売店名/販売日の記載がない場合。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び破損。
 - 火災、地震、水害、その他の天変地異による故障及び損傷。
 - お客様による分解、修理、改造による故障及び損傷。
 - 一般家庭用以外（業務用等）での使用時の故障及び損傷。
- 保証期間中の修理は、お買い上げの販売店に保証書をご提示の上ご依頼ください。
- 本保証書の再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 通信販売等で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が記載されている、お買い上げ伝票を一緒に保管しておき、修理依頼時に保証書に添付してください。

免責事項と限定保証

- 本製品を接続した接続機器の故障、破損、及びデータ等の損失については保証いたしかねます。
- 充電電池は消耗品の為、保証対象外となります。
また構造上バッテリーの交換対応は致しかねます。
- 本保証は製品が販売された国でのみ保証の対象となります。

個人情報の取り扱い

- お客様の個人情報は弊社の商品の発送、連絡、問い合わせ、回答、依頼作業、新商品・キャンペーン情報（広告を含む）の案内（電話・郵送・Eメール等の方法による）に利用致します。
- 弊社はお客様情報を第三者へ提供することはありません。但し、以下のいずれかに該当する場合を除きます。
 - 弊社商品の発送等に必要個人情報。
 - 法令に基づく場合。
 - 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合。

保証書

保証期間 お買い上げ年月日より1年間

製品名: COSBEAUTY リフトアイトロン

氏名:

住所:

電話番号: は保証書としてお使いいただけません

ご購入日: 年 月 日

販売店名・取扱店印

お問い合わせ先

コンピューティージャパン

お客様問い合わせ窓口 03-6722-0547

受付: 10:00 ~ 17:00 (土・日・祝日を除く)

※修理をご依頼される際は、お買い上げ日が記載されている保証書または購入明細をご用意ください。

製造元

株式会社 COSBEAUTY JAPAN

〒108-0073 東京都港区三田 1-3-39 勝田ビル 6F
www.cos-beauty.com info@j-cosbeauty.com