




## COSBEAUTY リフトアイロンプロ

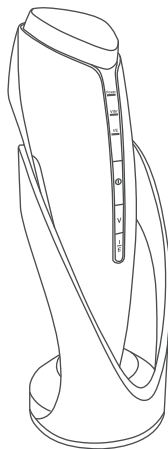

### 取扱説明書・保証書付

本書は製品の説明書および保証書となります。  
ご使用前に必ずよくお読み頂き大切に保管してください。

## 目次

目次	1
安全上の注意	2～6
各部名称・セット内容	7.8
仕様	9
ご使用前に	10～15
プログラム一覧	16
クレンジング	17
保湿・ブライトニング	19
ひきしめ・クール	21
アイケア	23
トレーニング	25
お手入れと保管方法	27
こんなときには	28～31
Q&A	32
保証と個人情報の取り扱い	33
保証書・お問い合わせ先	34

## 安全上の注意

- ご使用になる前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産の損失を未然に防ぐものです。必ずお守りください。



### 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性があり、リスクの度合いが高いと想定される内容を示します。



### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



### 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは、家屋、家財、家畜、ペットに関わる拡大損害を示します。



禁止の行為であることを知らせるものです。



行為を強制・指示する内容を知らせるものです。



### 危険

下記の電子機器との併用は絶対にしていただきません。



禁止

- ペースメーカーなどの体内挿入型医用電子機器。
- 人工肺などの生命維持用医用電子機器。
- 心電計等の装置型医用電子機器。
- その他の治療器具との同時使用はしないでください。誤作動をまねく恐れがあります。

## 安全上の注意



### 警告

次の人は医師と相談してご使用ください。

- アトピー性皮膚炎の方
- アレルギー体質・金属アレルギーの方
- 特に肌が敏感な方
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方
- 心臓に障害のある方
- 急性（疼痛性）疾患のある方
- 悪性腫瘍のある方
- 顔面神経痛の方
- 妊娠中、授乳中の方
- 生理中の方
- 有熱性疾患の方
- 血圧異常の方
- 感染性疾患の方
- 結核性疾患の方
- 血友病疾患の方
- 歯の治療中の方
- 飲酒、薬を服用中、疲労が著しい時



使用前  
に相談

次の部位には使用しないでください。

- 目や耳のまわり、眼球及び上まぶた（HOT&COOLモード以外）
- 切り傷・整形手術をした部位・口内や陰部、粘膜など
- 顔面黒皮症の部分
- ニキビや吹き出物で炎症を起こしている部分
- 化粧品などで、炎症を起こしている部分
- 痛覚、知覚障害を起こしている部分
- 皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んだ部分
- 痒みやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部分
- 肌に炎症や異常を感じている部分
- 指定された用途以外の目的で使用しないでください



禁止

## 安全上の注意



禁止

- 100～240V以外の電源を使用しないでください。火災や感電の可能性があります。
- 本製品、電源コード、電源アダプターが破損や変形をしている時は使用しないでください。
- 電源コードに負担をかけないでください。（無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重い物をのせない・熱いものに近づけない・束ねない・はさみ込まない・加工しない）
- 充電台座、アダプターは防水ではありませんので濡れた手で触れたり、コンセントを抜き差ししないでください。
- 充電スタンド及び電源アダプターを浴室や湿気の多い場所で使用しないでください。
- 自動車を運転しながら使用しないでください。強い刺激を受けると重大な事故やトラブルにつながる恐れがあります。
- 電源を入れた状態で長時間放置しないでください。事故や故障の原因になります
- ほかの電気製品（美顔器など）との同時使用はしないでください。
- 絶対に製品を改造・分解・修理しないでください。
- 乳幼児や子供に使用したり、手の届くところでの使用や保管をしないでください。
- 意思表示のできない方に使用しないでください。



必ず  
守る

- 使用しない時は、電源アダプターをコンセントから抜いてください。
- 本体に異音や異常（過熱や焦げた臭いがする等）を感じた場合はご使用を中止し、電源を切ってください。
- 使用時間や使用頻度は取扱説明書の内容をよく読み、守ってください。
- 使用中に痛みや不調を感じた時や、使用后、肌に異常を感じた時は使用を中止して専門医に相談してください。
- 使いはじめの方は、肌の様子を見ながら使用してください。

## 安全上の注意



### 注意

- プレート部分を肌に強く押しつけたり、5秒以上、同一の部位にあて続けしないでください。
- 美容目的以外には使用しないでください。
- 落としたり、ぶつけたり、本体に強い衝撃を与えないでください。感電・発火・けがの恐れがあります。
- 損傷した場合は使用しないでください。感電・発火・けがの恐れがあります。
- 本製品に付属している AC アダプター以外使用しないでください。故障の原因となります。
- 充電アダプターをお手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 充電アダプターが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
- 業務用として使用しないでください。また、不特定多数の人が使用する場所に置かないでください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなどの薬品や殺菌・消毒剤で拭いたりしないでください。変形、変色、ひび割れなど故障・破損の原因となります。
- 家族および他人と共有しないでください。感染症の恐れがあります。
- ペットや家畜等の動物には使用したり、ふれる可能性がある場所に保管しないでください。
- ドライヤー等の熱風はあてないでください。高温による変形の恐れがあります。
- 本体に強い水流を当てたり、水につけたりしないでください。
- 本体及び電源アダプターを浴室や高温、多湿、直射日光の当たる場所に保管しないでください。



禁止

## 安全上の注意




必ず守る


- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用してください。
- 使用中に身体に違和感を感じた場合は、使用を中止してください。
- 使用中、使用後に肌の異常がみられるときは使用を中止し、医師に相談してください。
- 肌の状態にあわせて使用してください。
- 日焼け直後、ピーリングとの併用は控えてください。
- 使用する時はプレートから保護キャップを外してください。
- 本体を連続使用（主に COOL モード）しないでください。本体内の温度が上昇し、COOL モードの冷え方が弱くなったり安全の為、一定時間使用ができなくなったり、故障の原因となります。
- イオンモード使用時は、プレート面と肌との間に常に化粧品があるようにしてください。化粧品が少ないとイオンの伝達が悪くなり効果が低下したり、肌トラブルの原因となります。
- 使用後は必ず電源を切ってください。
- プラグの脱着時は、プラグ部分をもって確実に差し込んでください。コードをもって引き抜きますと故障の原因となります。
- 使用後は清潔な布を水で濡らして固く絞り、プレートや本体の汚れをふき取ってください。薬品等は絶対に使用しないでください。

## 各部名称・セット内容

### 本体

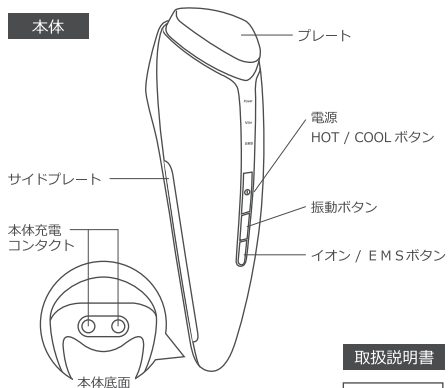

### 充電台座

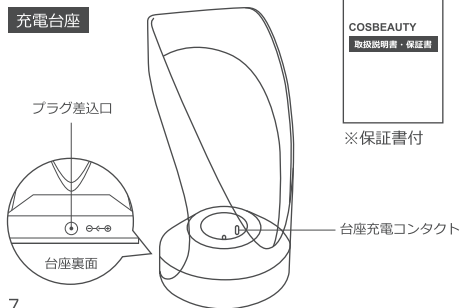


### 取扱説明書



※保証書付

## 各部名称・セット内容

### 充電アダプター

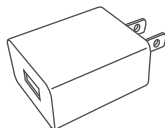

### 充電用ケーブル




### 保護キャップ



### コットンリング



### コットン

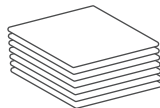

10枚

※別売は行っておりません。

## 仕様

品名：コスピューティー リフトアイロン プロ  
サイズ：本体 約 W50×H153×D60 (mm)  
重量：本体 約 150g / 充電台座 65g  
電源：充電式 DC 5V 1000mAh Max  
充電時間：約 3～4 時間  
使用時間：約 70 分  
バッテリー：リチウムイオン電池 1000mAh  
材質：ABS、アルミ (クロムメッキ)  
防水等級：IPX5  
※充電台座、充電器は防水ではありません。

### アダプター

電源：入力 AC100-240V 50/60Hz 0.25A Max  
出力 DC 5V 1.0A

Made in China

## 電池の破棄

本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。  
廃棄の際はお客様がお住いの各自治体にお問い合わせの上、  
指示に従って廃棄してください。


## ご使用前に

### ● 本体を充電する



購入直後や長期間使用しなかった場合は必ず本体を充電し、充電ランプが赤点滅から白点灯に変わったことを確認してから使用してください。

1. 充電ケーブルを充電スタンドに接続する。
2. 充電アダプターをコンセントに差し込む。
3. 充電スタンドに本体を設置する。

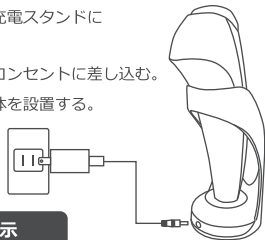


### 充電中のランプ表示

充電中	赤点滅
充電完了	白点灯

### 充電時間の目安

充電時間	約 240 分
作動時間	約 70 分

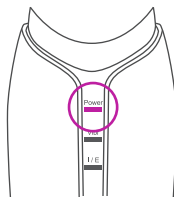


※満充電直後からの作動時間です。  
※充電時間、作動時間は、使用方法・使用環境・使用頻度によって変わります。

### ● 充電が完了したら

コンセントを抜くか、スタンドから本体を外してください。  
充電完了後に長時間充電を続けるとバッテリーの寿命が著しく短くなります。

## ご使用前に


### ● ボタンと LED 表示

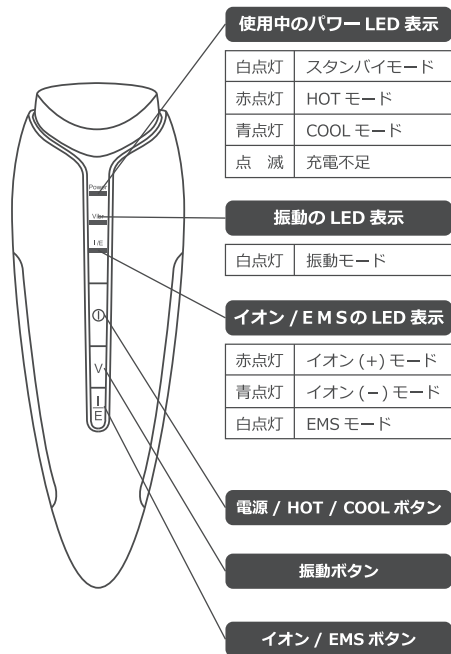


## ご使用前に

### ● ボタン操作とモード切替

#### HOTモード / COOLモードの起動

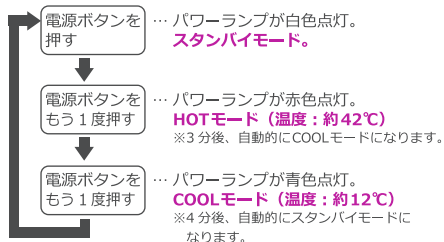


#### 振動モードの起動

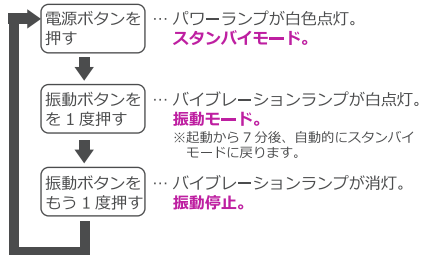

## ご使用前に

### ● ボタン操作とモード切替

#### イオン / EMS の起動

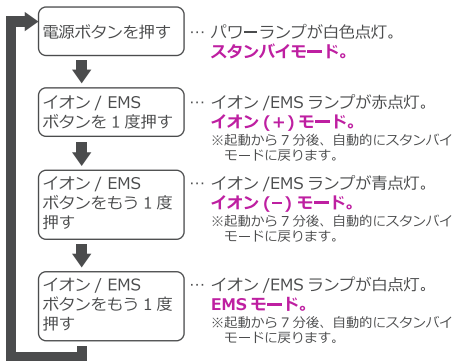

#### 本体の電源を切る

電源ボタンを長押し(約2秒)すると本体電源が切れます。また、スタンバイモードで3分間、何も操作しないと自動的に電源がオフになります。


## ご使用前に

 **ご使用前にお読みになり、お守りください。**

#### 皮膚試験 (パッチテスト)

肌トラブル防止のため、使用する化粧品と本製品との相性を、事前にご確認ください。

1. 腕の内側を石けんで洗い、タオルで水分を拭き取る。
2. 保湿・ブライトニングモードに設定する。(P.19 手順 1~4 参照)
3. 腕の内側に、化粧水または美容液を含んだコットン部分を動かしながら約 10 秒間あてる。
4. 48 時間が経過した後、肌に異常がないか確認する。

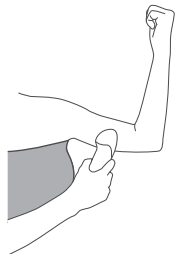

異常が見られる場合は、使用をお控えください。

#### 使用前の洗顔

本製品をご使用前に洗顔を行ってください。ピーリングや除毛直後の肌には使用しないでください。

#### プレートの温度チェック

HOTモードは約42℃、COOLモードは約12℃の設定になっていますが周囲の環境温度、充電電池残量、連続使用回数による内部温度によって前後する場合があります。  
**必ず指でプレートの温度を確認してから、ご使用ください。**

#### イオン / EMS モード使用時

イオンモード、EMSモードは眼球付近に使用しないでください。



## ご使用前に


### ● コットンリングの取付方法

①本体にコットンリングを装着する。


②コットンをプレートの上に置く。

③コットンリングの上部を上から閉めてコットンを挟んで固定する。

※使用するコットンが厚すぎると、リングで挟めないことがあります。

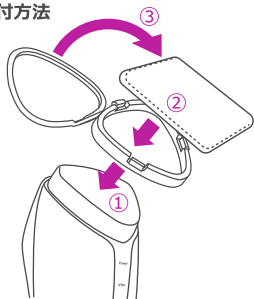

### ● コットンに化粧水を塗布する

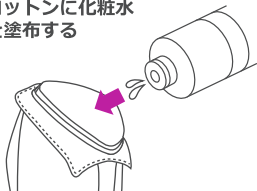

### ● コットンリングの外し方

矢印の方向からコットンリングを外します。

※コットンリングを外す際は、無理な力を加えないでください。破損の原因となります。



※付属のコットンサービス品の為、別売しておりません。  
※電源をオフにした状態で脱着してください。

## プログラム一覧

ケアに応じて、プログラム選択してください。

目的	モード	化粧品	使用頻度・時間
クレンジング (P.17)	HOT + 振動 + イオン(+)	コットンリング + 化粧水	毎日可能 3分
保湿 ブライトニング <sup>※1</sup> (P.19)	HOT + 振動 + イオン(-)	コットンリング + 化粧水・美容液 フェイスマスク	毎日可能 3分
ひきしめ クール (P.21)	COOL	無し	毎日可能 4分
アイケア (P.23)	HOT+振動 ↓ COOL+振動	無し または アイクリームか アイケアシート	毎日可能 7分
トレーニング <sup>※2</sup> (P.25)	HOT+EMS もしくは EMS ↓ COOL	コットンリング+水 または 美顔器用 EMS ジェル	1週間に 1~2回程度 3~7分/回

※1 ビタミンC成分を含む化粧品・美容液と使用する場合。  
ケアを行うご本人が、本体を持って行ってください。

※2 水もしくは、美顔器用EMSジェルを十分に塗布して使用してください。肌が乾燥していたり、水分が少ないとチクチクと刺激を感じる場合があります。  
また、油性化粧品等を使用すると通電を妨げ、正常にケアできない場合があります。

※ イオンモードとEMSモードは眼球付近に使用しないでください。

## ● クレンジング

1. プレートにコットンを取り付ける。(P.15 参照)
2. コットンに化粧水または、ふきとり化粧水を塗布する。  
コットンの裏側までしみこむようにしてください。
3. モードを設定する。

○電源ボタンを2回押す。

赤ランプ点灯




○振動ボタンを押す。

白ランプ点灯




○イオン / EMS ボタンを押す。

赤ランプ点灯

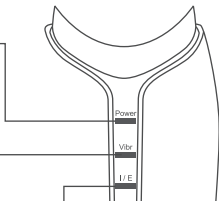

4. サイドプレートにしっかり触れるように本体を握る。

必ず本体両側の【サイドプレート】に触れるように持ってください。

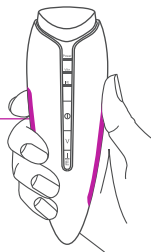

5. プレートの温度を指で確認してからトリートメントしたい部位にあてる。

6. 矢印の順に沿って肌にあてる。  
(左右同様に)

※プレート部分を肌に強く押しついたり5秒以上、同一の部位にあて続けな  
いでください。

※コットンの水分が少なくな  
った場合は補充してく  
ださい。



7. 使用後はコットンを外して電源をオフにする。

コットンの再利用はしないでください。肌トラブルの原因  
になります。

※HOTモードは3分後、自動的にCOOLモードに移行します。  
引き続きHOTモードを使用したい場合はCOOLモード移行後、  
電源ボタンを2回押すことで、HOTモードが再起動します。

※イオンモードと振動モードは、  
起動から7分後に自動的にオフになります。

## ● 保湿・ブライティング

1. プレートにコットンを取り付ける。(P.15 参照)  
※フェイスマスクを使用する際は不要です。
2. コットンに化粧水・美容液・乳液のいずれかを塗布する。  
コットンの裏側までしみこむようにしてください。  
※フェイスマスクを使用する際は不要です。

### 3. モードを設定する。

- 電源ボタンを2回押す。

赤ランプ点灯



- 振動ボタンを押す。

白ランプ点灯




- イオン / EMS ボタンを2回押す。

青ランプ点灯

### 4. サイドプレートにしっかり触れるように本体を握る。

必ず本体両側の【サイドプレート】に触れるように持ってください。

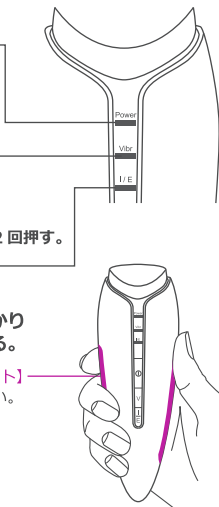

### 5. プレートの温度を指で確認してからトリートメントしたい部位にあてる。

### 6. 矢印の順に沿って肌にあてる。(左右同様に)

※プレート部分を肌に強く押しつけたり5秒以上、同一の部位にあて続けな  
いでください。

※コットンの水分が少なくな  
った場合は補充してく  
ださい。



### 7. 使用後はコットンを外して電源をオフにする。

コットンの再利用はしないでください。肌トラブルの原因  
になります。

※HOTモードは3分後、自動的にCOOLモードに移行します。  
引き続きHOTモードを使用したい場合はCOOLモード移行後、  
電源ボタンを2回押すことで、HOTモードが再起動します。


※イオンモードと振動モードは、  
起動から7分後に自動的にオフになります。

## ● ひきしめ・クール

### 1. モードを設定する。

○電源ボタンを3回押す。

青ランプ点灯

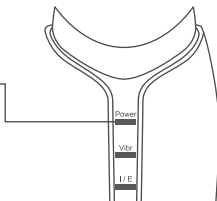

### 2. プレートの温度を指で確認してからトリートメントしたい部位にあてる。

### 3. 矢印の順に沿って肌にあてる。 (左右同様に)

※プレート部分を肌に強く押しつけたり5秒以上、同一の部位にあて続けしないでください。



### 4. 電源をオフにする。

※COOLモードは4分後、自動的にスタンバイモードに移行します。引き続きCOOLモードを使用したい場合は、スタンバイモード移行後、電源ボタンを2回押すことで、COOLモードが再起動します。

※COOLモードは繰り返し使用すると本体内部の温度が上昇しやすく、正常な温度で作動しなくなります。また、安全装置が起動し、本体内部の温度が下がるまでは作動しない場合があります。しばらく時間をおいてからご使用ください。

## ● アイケア

### 1. モードを設定する。

○電源ボタンを2回押す。


赤ランプ点灯



○振動ボタンを押す。

白ランプ点灯

※3分後、自動的にパワーランプが青点灯（COOLモード）に変わり、さらに4分後、スタンバイモードに戻ります。（合計7分間で、温冷と振動が停止します。）

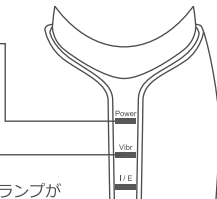

### 2. プレートの温度を指で確認してからトリートメントしたい部位にあてる。

### 3. 目の周りにあてる。 （左右同様に）

※本プログラムでは、**イオン / EMSを併用しないでください。**

※プレート部分を肌に強く押しつけたり5秒以上、同一の部位にあて続けしないでください。

※まぶたや、涙袋にあてる時は温度に注意してください。



### 4. 電源をオフにする。

※HOTモード + 振動で3分間作動した後、自動的にCOOLモード + 振動に切り替わり4分間作動します。この合計7分間が1セットのケアとなります。1セットが終了すると、自動的にスタンバイモードに戻ります。

## ● トレーニング

### 1. プレートにコットンを取り付ける。(P.15 参照)

※美顔器用 EMS ジェルを使用する際はコットンリング・コットンは不要です。プレートに直接、美顔器用 EMS ジェルを塗布してください。

### 2. コットンに化粧水または、ふきとり化粧水を塗布する。

コットンの裏側までしみこむようにしてください。  
※美顔器用 EMS ジェルを使用する際は不要です。

### 3. モードを設定する。

○電源ボタンを2回押す。

赤ランプ点灯




○振動ボタンを押す。

白ランプ点灯




○イオン / EMS ボタンを3回押す。

白ランプ点灯

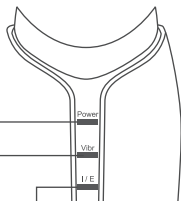

### 4. サイドプレートにしっかり触れるように本体を握る。

必ず本体両側の【サイドプレート】に触れるように持ってください。

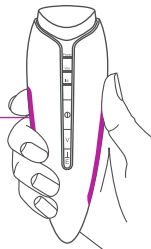


### 5. プレートの温度を指で確認してからトリートメントしたい部位にあてる。

### 6. 矢印の順に沿って肌にあてる。(左右同様に)

※プレート部分を肌になく押しつけたり5秒以上、同一の部位にあて続けな  
いでください。

※水分やジェルが少なくな  
った場合は補充して  
ください。

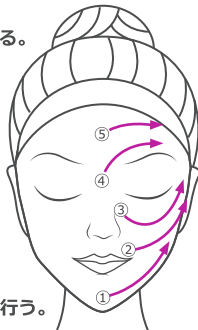

### 7. コットンを外してひきしめ・クールモードを行う。(P.21 参照)

コットンの再利用はしないでください。  
肌トラブルの原因になります。

### 8. 電源をオフにする。

※HOTモードは3分後、自動的にCOOLモードに移行します。  
引き続きHOTモードを使用したい場合はCOOLモード移行後、  
電源ボタンを2回押すことで、HOTモードが再起動します。

※EMSモードは、起動から7分後に自動的にオフになります。

## お手入れ方法

- 使用後は本製品を清潔に保つために、毎回お掃除をしてください。
- お手入れ及び、本製品を移動させる場合は安全のため電源を切り、充電用ケーブルを抜いてから行ってください。
- 使用後は清潔な布を水で濡らして固く絞り、プレートや本体の汚れをふき取ってください。薬品等は絶対に使用しないでください。
- 本体充電コンタクトおよび、台座充電コンタクトが汚れていると正常に充電できなくなることがあります。
- 本体に強い水流をあてたり、水中に沈めないでください。
- 台座に水をかけないでください。

## 保管方法

- 長期間使用しないときは本製品の掃除をして、よく乾かしてから保管してください。
- 使用しないときときは、本体の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所には放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手やペットの触れない場所に保管してください。
- 長時間使用しない場合は、最低3ヶ月ごとにフル充電し、バッテリーの寿命を維持してください。バッテリー残量がゼロの状態では長時間保管すると、バッテリーの寿命が著しく短くなります。

## こんなときには

### トラブル

電源が入らない

Power  
Vibr  
I/E ランプの3つ  
が青色点滅して  
電源が切れる

充電しても使用  
できない

### 対処方法

電源ボタンを押していない

電源ボタンを押してスタンバイモードにしてから操作してください。

充電されていない

本体を充電してください。

内部が高温になっている

本体の温度が上昇し、安全装置が起動しています。しばらく時間をおいてからご使用ください。  
※ COOLモードを連続使用すると、内部温度が上昇しやすくなります。

充電されていない

パワーランプが白色点灯するまで充電してください。

電池の寿命

充電電池の寿命です。  
※ 電池の交換は行えません。

## こんなときには

トラブル	対処方法
充電されない (充電ランプがつかない)	ACアダプターが壁面コンセントに差し込まれていない ACアダプターを壁面コンセントに直接差し込んでください。
	ケーブルプラグが差し込まれていない プラグがアダプター、台座に奥まで差し込まれているか確認してください。
	本体充電コンタクトと台座充電コンタクトが汚れている 充電コンタクトを清掃してください。
パワーランプが点滅している	バッテリー残量が少ない 充電してください。
使用後に本体が熱くなる	しばらく時間をおいてから使用してください 本製品の使用時、及び使用後はプレート部分の温度を急速に変化させる為、内部に熱がたまりやすく、本体の温度が上昇しますが故障ではありません。

## こんなときには

トラブル	対処方法
プレートが冷たくならない、または熱い	連続使用している 短時間に繰り返し使用すると本体内部の温度が上昇し、COOLモードの温度が冷えにくくなったり、HOTモードで熱くなることがあります。しばらく時間をおいてからご使用ください。
	環境温度や肌の温度によって左右されている 使用環境の温度によって、プレート温度は若干左右されます。冬場は肌の表面温度が低いため、HOTモードが熱く感じたりすることがあります。
イオンを感じない	イオンは体感できません イオンは微弱電流の為、体感することができません。



トラブル	対処方法
EMSモードで肌がチクチクする	<p>肌が乾燥していたり水分が不足している</p> <hr/> <p>水もしくは美颜器専用EMSジェルを塗布してください。</p>
イオン / EMSモードを正しく使うには？	<p>肌とプレートとの間にしっかりと水分を保つ</p> <hr/> <p>水分が少ないと電気の伝達が悪くなり効果が低下したり、肌トラブルの原因となります。</p> <hr/> <p>使用者する本人が本体サイドプレートに触れるように握って使用してください。</p>

よくある質問と回答

- Q. 毎日プログラムを行っても大丈夫ですか？  
 A. P,16の使用頻度・時間をご参照ください。  
 過度な使用はお肌に負担をかける可能性があります。  
 肌の様子を見ながらご使用ください。
- Q. 化粧水や美容液は1回にどれくらい使用すればよいですか？  
 A. コットンの裏側までしみこむようにしてください。
- Q. 化粧水や美容液の種類は？  
 A. 普段お客様が使用されている化粧品をお使いください。  
 ※お使いの化粧品によってはHOTモードが合わない場合がございます。  
 ※ブライティングはビタミンC成分を含む化粧品・美容液をご使用ください。
- Q. 使用前の洗顔はどのくらい？  
 A. ピーリングなど刺激の強い洗顔料は使用しないでください。
- Q. フェイスマスクでEMSを使用できますか？  
 A. お勧め致しかねます。マスクの材質、厚み、化粧品成分によって正常に通電しない可能性があります。
- Q. お風呂で使用できますか？  
 A. 本製品は防水規格IPX5を取得しておりますが本体に近距離で直接強い水流を当てたり、水中に沈めることはできません。  
 また充電台座、充電器は防水ではございません。
- Q. 化粧の上から使用できますか？  
 A. COOLモードの使用は可能です。メイク直しの前にCOOLモードを使用すると、お化粧のノリがアップします。
- Q. どんな肌質でも使えますか？  
 A. ニキビや肌の炎症がひどいときや、金属アレルギーをお持ち場合はご使用をお避けください。  
 詳しくは安全上の注意をご参照ください。

## 保証と個人情報の取り扱い

### 保証規定

- 保証期間内に本説明書に従い正しくお使い頂いたにもかかわらず、故障した場合は、お買い上げいただいた国内でのみ本保証書記載内容に基づき無料修理いたします。但し、消耗品及び付属品は除きます。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理、もしくは修理不可となります。
  - 本保証書の所定事項の未記入、文字の改ざん、販売店名/販売日の記載がない場合。
  - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び破損。
  - 火災、地震、水害、その他の天変地異による故障及び損傷。
  - お客様による分解、修理、改造による故障及び損傷。
  - 一般家庭用以外（業務用等）での使用時の故障及び損傷。
- 保証期間中の修理は、お買い上げの販売店に保証書をご提示の上ご依頼ください。
- 本保証書の再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 通信販売等で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が記載されている、お買い上げ伝票を一緒に保管しておき、修理依頼時に保証書に添付してください。

### 免責事項と限定保証

- 本製品を接続した接続機器の故障、破損、及びデータ等の損失については保証いたしかねます。
- 充電電池は消耗品の為、保証対象外となります。また構造上バッテリーの交換対応は致しかねます。
- 本保証は製品が販売された国でのみ保証の対象となります。

### 個人情報の取り扱い

- お客様の個人情報は弊社の商品の発送、連絡、問い合わせ、回答、依頼作業、新商品・キャンペーン情報（広告を含む）の案内（電話・郵送・Eメール等の方法による）に利用致します。
- 弊社はお客様情報を第三者へ提供することはありません。但し、以下のいずれかに該当する場合は除きます。
  - 弊社商品の発送等に必要個人情報。
  - 法令に基づく場合。
  - 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合。

## 保証書

保証期間 お買い上げ年月日より1年間

製品名: COSBEAUTY リフトアイロンプロ

氏名:

住所:

電話番号: は保証書としてお使いいただけません

ご購入日: 年 月 日

販売店名・取扱店印

## お問い合わせ先

コスビューティージャパン

**お客様問い合わせ窓口 03-6722-0547**

受付: 10:00 ~ 17:00 (土・日・祝日を除く)

※修理をご依頼される際は、お買い上げ日が記載されている保証書または購入明細をご用意ください。

製造元

株式会社 COSBEAUTY JAPAN

〒108-0073 東京都港区三田 1-3-39 勝田ビル 6F  
www.cos-beauty.com info@j-cosbeauty.com