

Massagepistol

Model nr. 27313



Sikkerhed


1. Læs denne manual og gem til senere brug.
2. Brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til.
3. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet er fuldt opladet.
4. Apparatet må ikke neddyppes i vand.
5. El-apparater er ikke legetøj – hold det væk fra børn og sørg for, at ledningen ikke hænger frit under opladning.
6. Apparatet må kun anvendes med originale tilbehørsdele.
7. Apparatet er kun til privat husholdningsbrug.
8. Brug aldrig produktet hvis det eller delene er fugtige eller våde.
9. Sluk altid produktet når det ikke er i brug.

Godt igang

Dette produkt giver en dybdegående massage til nakke, ryg, skulder og ben!
Oplad massagepistolen ved hjælp af det medfølgende USB kabel (stik medfølger ikke)

Tryk og hold power knappen inde i 3 sekunder og produktet tændes. På samme måde holdes knappen inde i 3 sekunder for at slukke.


Den starter i første rolige tempo. Hver gang der trykkes på start knappen skiftes der til en højere hastighed. Der er i alt 4 gear hvor højeste niveau er 3600 slag i minuttet

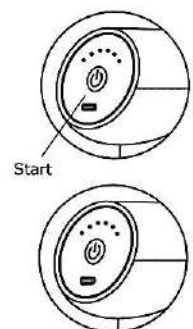

4 Massagehoveder

Gaffel hoved

Masserer effektivt om rygsøjle, ankler, lægge, akillessene og lår

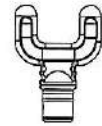

Bredt flat hoved

Til hele kroppen og særligt til større muskelgrupper som lår og baller




Patronformet hoved

Rammer det specifikke ømme punkt og yder mere dybdegående massage




Kugleformet hoved

Til almindelig massage over hele kroppen

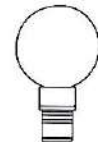

Skift af massagehoved

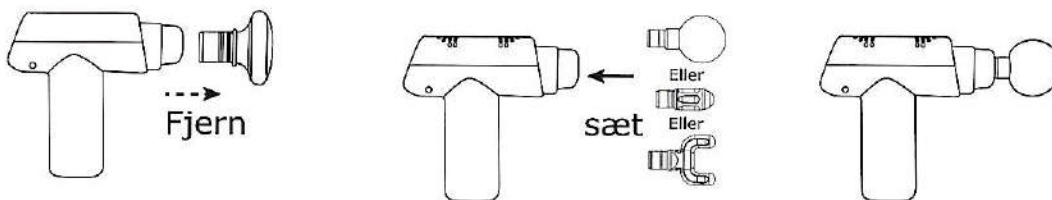

Sluk massagepistolen inden der skiftes massagehoved.

Bortskaffelse

Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads.



Tekniske specifikationer

Varenr. 27313

Max. 3600 slag per minut

USB Kabel (inklusive)

Fremstillet i Kina for
Condor DK Hvidovre
www.condornet.com