

Manuale d'uso

Motore del sistema di massaggio
Numero modello #P5170 12V \approx 9W

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE

Per l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature elettriche, è fondamentale rispettare alcune precauzioni di sicurezza basilari, tra cui:

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

LEGGERE ATTENTAMENTE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI

AVVERTENZA: PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE IL PRODOTTO ALL'ACQUA E PROTEGGERLO DALLA PIOGGIA. SOLO PER USO INTERNO.

AVVERTENZA: questo prodotto deve essere alimentato utilizzando un adattatore specifico con una tensione di ingresso pari a 230-240V AC/50-60Hz e una tensione di uscita di 12V/400mA, come specificato dal produttore.

AVVERTENZA: l'adattatore deve essere inserito in una presa con una tensione pari a 230-240V AC/50-60Hz.

AVVERTENZA: non posizionare o riporre questo prodotto in luoghi estremamente umidi o esposti all'acqua.

AVVERTENZA: il prodotto deve essere riposto in un luogo asciutto.

AVVERTENZA: posizionare il prodotto solo su una superficie libera, piana e solida.

AVVERTENZA: evitare che i bambini di età inferiore a 14 anni utilizzino questo prodotto.

AVVERTENZA: questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, a meno che non siano supervisionate o guidate da persone responsabili per la loro sicurezza. I bambini devono sempre essere controllati in modo che non giochino con il prodotto.

AVVERTENZA: non azionare il prodotto sotto le coperte o con un cuscino. Il rischio di surriscaldamento potrebbe causare incendi, rischi di scossa elettrica o lesioni alle persone.

AVVERTENZA: non mettersi in piedi sul prodotto.

AVVERTENZA: non trascinare questo prodotto dal cavo dell'adattatore o utilizzare il cavo come maniglia.

AVVERTENZA: tenere il cavo dell'adattatore e il telecomando lontano da superfici calde.

AVVERTENZA: non posizionare il cavo dell'adattatore e il telecomando in zone di passaggio e tenerli fuori dalla portata dei bambini.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di scossa elettrica, scollegare sempre il prodotto quando non è in uso. Staccare sempre la spina del prodotto se non c'è nessuno a controllarlo.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di scossa elettrica, scollegare sempre il prodotto prima della sua pulizia.

AVVERTENZA: consultare il proprio medico di fiducia prima di utilizzare il prodotto, in particolare in caso di problemi cardiaci e di circolazione, se si hanno lesioni sul corpo o se si soffre di patologie neurologiche, spinali o ortopediche.

AVVERTENZA: non utilizzare il prodotto se si è incinta o in caso di sospetta gravidanza.

AVVERTENZA: non utilizzare mai il prodotto per massaggiare testa, viso, mani, ginocchia, piedi o addome.

AVVERTENZA: per evitare stiramenti dei muscoli, che possono arrecare fastidi, il prodotto è dotato di un sistema di spegnimento automatico dopo 20 minuti. È inoltre consigliabile attendere 10 minuti prima di riutilizzare il prodotto per altri 20 minuti.

AVVERTENZA: smettere immediatamente di utilizzare il prodotto se si avvertono fastidi.

AVVERTENZA: NON fare cadere il telecomando. Utilizzare il telecomando solo con le mani asciutte.

NOTA: durante l'utilizzo si potrebbero sentire dei rumori provenienti dal sistema di massaggio. Tali rumori sono dovuti alla struttura del motore e non indicano quindi eventuali anomalie.

NOTA: con un utilizzo prolungato, alcune parti del prodotto potrebbero surriscaldarsi; si sconsiglia pertanto alle persone particolarmente sensibili al calore di utilizzare il prodotto in modo continuo per più sedute.

NOTA: NON esporre il prodotto alla luce diretta del sole e NON posizionarlo accanto ad altre apparecchiature elettriche.

NOTA: l'apparecchio genera una leggera vibrazione, che non è paragonabile a quella di un massaggio manuale.

NOTA: NON bere o mangiare durante il massaggio.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO

Istruzioni per l'installazione

Montaggio:

1. Stendere il prodotto su una superficie piana e uniforme.

2. Gonfiare il prodotto utilizzando una pompa ad aria. Evitare il sovragonfiaggio.


NOTA: pompa ad aria non inclusa.

NOTA: non collegare il prodotto all'alimentazione durante il gonfiaggio.

3. Inserire la spina dell'adattatore in un dispositivo a corrente residua solo quando il prodotto è pronto per l'uso.

NOTA: togliere gli oggetti duri dalle tasche per evitare di ferirsi durante il massaggio.

Fig. 1

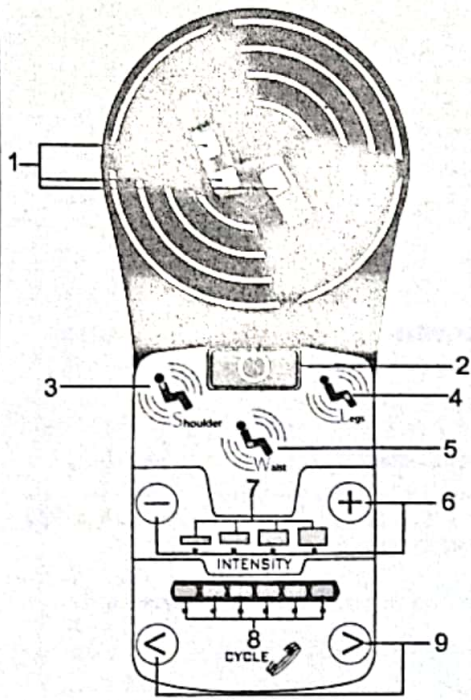

Funzionamento tramite telecomando (vedere Fig.1)

N. icona	Nome	Funzione
1	Indicatore zona massaggio	Indica la zona da massaggiare selezionata: spalle, vita e gambe.
2	Pulsante di accensione	Attiva/disattiva le funzioni di massaggio.
3	Pulsante massaggio spalle	Attiva il massaggio nella zona spalle.
4	Pulsante massaggio gambe	Attiva il massaggio nella zona gambe.
5	Pulsante massaggio vita	Attiva il massaggio nella zona vita
6	Pulsanti di aumento/riduzione dell'intensità	Aumentano o riducono l'intensità del massaggio.
7	Indicatori di intensità	Da sinistra a destra, indicano l'intensità da lento a veloce.
8	Indicatori di ciclo	Indicano il ciclo di massaggio selezionato.
9	Pulsante di regolazione ciclo	Da utilizzare per selezionare il ciclo di massaggio desiderato. Sono disponibili sei modalità. NOTA: premendo i pulsanti di massaggio spalle/vita/gambe, il ciclo di massaggio selezionato viene resettato.

NOTA: per la sicurezza dell'utente, il prodotto è dotato di un sistema di spegnimento automatico dopo 20 minuti.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

- Se il prodotto si sporca, staccare la spina e utilizzare un panno umido pulito per strofinare delicatamente tutte le superfici. Ripiegare e riporre il prodotto solo quando è completamente asciutto.
NOTA: non utilizzare detergenti aggressivi per la pulizia.
- Per la pulizia del telecomando o della zona attorno all'interruttore di accensione, utilizzare sempre un panno asciutto.
AVVERTENZA: utilizzando un panno bagnato sussiste il rischio di scossa elettrica.
- Lasciare fuoriuscire completamente l'aria prima di riporre il prodotto in un luogo fresco e asciutto.
- Non posizionare oggetti pesanti o affilati sul prodotto per evitare di danneggiarlo. Inoltre, per evitare che il prodotto si danneggi, non lasciarlo esposto direttamente alla luce del sole per lunghi periodi di tempo.
- Per la riparazione del prodotto utilizzare il materiale fornito con l'apposito kit.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Bestway si impegna a fornire prodotti di alta qualità. Tuttavia, se il prodotto acquistato presenta dei problemi, contattare direttamente l'azienda o un rivenditore autorizzato.

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per la diagnosi e la risoluzione dei problemi più comuni.

Problema	Possibili cause	Soluzioni
Il motore del sistema di massaggio non funziona	- Interruzione dell'alimentazione	- Controllare l'alimentatore e la spina dell'adattatore. - Se necessario, chiamare l'assistenza clienti
Le funzioni di massaggio si bloccano	- Si è attivata la funzionalità di spegnimento automatico	- Selezionare una funzione per riattivare il massaggio
Perdita d'aria	- Il prodotto è lacerato o forato	- Utilizzare l'apposita pezza per la riparazione

Smaltimento

☒ Significato del bidone a rotelle con una croce sopra:

Non smaltire le apparecchiature elettriche con i normali rifiuti solidi urbani, ma raccogliarli separatamente.

Per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili, contattare le autorità locali.

In caso di smaltimento delle apparecchiature elettriche in discariche, eventuali perdite di sostanze pericolose potrebbero inquinare la falda acquifera ed entrare nella catena alimentare, danneggiando così la salute e il benessere delle persone.

Come previsto dalla legge, in caso di sostituzione delle apparecchiature il venditore è obbligato a ritirare il vecchio dispositivo per il suo smaltimento gratuito.