



保管用

## 使用說明書

家用美容儀	Photo Plus Shiny	M18	
前言	1	使用後	26
安全注意事項	1	須知	28
海外使用注意事項	9	● 疑似故障	28
各部位的名稱及功能	10	● 常見問題	30
使用前	12	● 產品規格	31
使用方法	15	售後服務	32



## 前言




非常感謝您購買YA-MAN產品

- 為確保正確、安全使用，請仔細閱讀使用說明書。
- 閱讀後，請務必保管在能夠隨時取閱的場所。
- 將本產品轉讓給他人時，請務必附帶使用說明書。

## 安全注意事項




- 使用前，請仔細閱讀“安全注意事項”。
- 請按照規定步驟合理使用。
- 發生異常時，請立即停止使用。
- 如果在故障狀態下使用，可能會對身體產生不良影響，請務必注意。
- 此處的注意事項寫明了與安全有關的重要內容，請務必遵守。
- 注意事項分為「危險」、「警告」及「注意」，並清楚列明危險程度，以及錯誤操作可能造成的傷害。

### ● 關於注意事項

-  **危險** 不正當使用本產品會導致嚴重傷亡事故。
-  **警告** 不正當使用本產品可能會導致嚴重傷亡事故。
-  **注意** 不正當使用本產品可能會導致人身傷害或引起財物受損。

\* 所謂財物受損，是指波及房屋、家具以及家畜、寵物的損害。

### ● 關於標識符號

-  表示禁止的事項。
-  表示務必遵守的事項。
-  表示務必注意的事項。

## 危險 (關於使用和保管)

### ● 切勿在以下情況下使用

可能會導致醫用電子儀器發生故障

◆ 正在使用以下醫用電子儀器人士

心臟起搏器等體內植入式醫用電子儀器, 人造心肺機等維持生命用醫用電子儀器, 心電圖描寫器等穿戴型醫用電子儀器



禁止

## 警告 (關於使用和保管)

### ● 請勿於以下情況下使用,

否則可能會導致事故或出現其他問題。

- 患有或懷疑患有心臟病或相關疾病 · 無法表達自己的意圖 · 無法感知溫度或刺激
- 患有自身免疫性疾病

如有以下情況, 請使用前先諮詢醫生:

- 患有急性疾病 · 患有傳染病 · 患有惡性腫瘤 · 患有發熱性疾病
- 患有高血壓或血液疾病 · 發燒 · 因嚴重的周邊動脈阻塞 (例如糖尿病) 而導致的官感功能障礙
- 神經受損 · 患有皮膚病或異位性皮膚炎 · 正在定期接受醫生治療並且正在服藥
- 有過敏、接觸性皮炎、曾經患有皮膚相關疾病或在使用本產品時對皮膚有任何疑慮

### ● 對於以下身體部位, 或存在以下狀況, 切勿使用,

否則可能會導致事故或出現其他問題。


- 皮膚受損、出現皮疹、炎症或其他異常情況 · 受到酒精的影響
- 口腔內、陰部周圍或粘膜 · 眼球 · 上眼瞼 (冰感模式除外) · 下眼瞼和眼尾 (眼部護理模式和冰感模式除外)
- 喉嚨 · 凸起的痣 · 病毒感染性疣 · 骨折部位 · 醫學美容治療後出現內出血、腫脹或結痂症狀的部位
- \* 醫學美容治療後兩週內避免使用此產品。此期間後, 請諮詢醫生並在獲得許可後才使用此產品 (例如透明質酸注射、矽膠注射、肉毒桿菌毒素、埋線拉皮、雙眼皮手術、HIFU 等)
- 通過手術植入金屬的部位 (重建手術、整形手術、整容手術)。

### ● 請勿過度連續使用。

否則可能造成燙傷或低溫燙傷。



禁止

 **警告** (關於使用和保養)

● 請勿在肌膚較薄的部位、骨骼上方處長時間使用。  
否則會造成肌膚及身體的損傷。



禁止

● 請勿在指定部位以外使用本機。  
否則會引起受傷。

● 請確保滑動使用(EYE、COOL模式除外),請勿長時間貼於同一部位使用,請勿用於護理頭無法完全貼合的部位。  
否則會造成燙傷或低溫燙傷。

● 請勿投入火中或在高溫、高熱環境下充電、使用以及放置。  
否則會引起發熱、著火或故障。

● 請勿在易燃物品附近使用(酒精、稀釋劑、汽油、洗甲水、噴霧等)。  
否則會引起發熱、著火或受傷。

● 請勿在下列環境中保管或使用。

- 灰塵多、陽光直射的場所
- 易傾斜、震動、碰撞的場所;屋外
- 電磁波或磁場較強的場所
- 兒童可觸碰到的場所;有油煙、水蒸氣的場所
- 溫度變化劇烈的場所(空調、暖氣等旁邊)

會引起火災、觸電、事故或故障等。

● 散發異味及異常發熱時停止使用。  
否則會引起損壞或著火。



散發異味及  
異常發熱時  
禁止使用

● 請勿將重物壓在主機上,使用時請勿跌落或碰撞。  
會引起故障或受傷。



禁止碰撞

● 請勿放置於不穩定的場所。請勿跌落或碰撞主機。  
會引起機械故障,造成腳部受傷等。



禁止跌落

● 請勿讓兒童使用或避免殘疾人士單獨使用。  
未成年人請在征得監護者同意並陪同下使用。  
會引起故障或受傷。



使用限制

● 請勿讓無法表達自己意願、肌膚感知能力非常不敏感的人士使用。  
會引起故障或受傷。

● 請將主機、充電插頭置於兒童接觸不到的場所,  
勿讓兒童使用或玩耍。  
會引起故障或受傷。

● 請勿用於操作說明書中注明的以外用途。  
會引起受傷、產品故障等。



禁止用於  
其他用途



 **警告** (關於使用和保管)

- 請避免在飲水處、浴室內以及洗澡時使用。  
主機沾水後,可能會引起觸電、短路、故障或著火。
- 請勿用水沖洗主機,或使其沾水、浸水。  
主機沾水後,可能會引起觸電、短路、故障或著火。



禁止有水  
處使用

- 請勿拆分、修理和改造主機。  
會造成火災、觸電或受傷。  
如需維修,請聯絡經銷商。



禁止拆機

- 初次使用時,請務必事先進行肌膚適應性測試。  
會造成事故或受傷。
- 正在進行牙齒治療的人、牙齒內有填充物的人,請調低檔位,調整使用部位後再使用。  
EMS可能會造成面頰、下顎有較強的刺激感,若感到強烈不適時,請立即停止使用並諮詢專業醫生。
- 主機混入水、異物等情況,請立即關閉電源停止使用,並聯系經銷商。  
會造成火災或觸電。



務必遵守

 **警告** (關於使用和保管)

- 請勿放置在火旁、烈日下、浴室等高溫潮濕的場所。請勿投入火中。請勿在加熱、高溫的環境下充電、使用和放置。  
另外、請勿靠近發熱器具。  
本產品內置充電電池。會引起發熱、著火或破裂。



火災警告

- 請勿放入微波爐或高壓容器中。  
否則會引起發熱、著火或破裂。



破裂警告

 **注意** (關於使用和保管)

- 請勿集中在一處強力按壓使用。  
強力按壓或者集中在一處使用的話,容易造成肌膚受傷。
- 請勿將護理頭與其他金屬物質碰撞。  
否則會造成發熱、火災、故障、破損等。
- 使用前,請確認護理頭是否有開裂、破損、變形等問題。如發現有,請勿使用。  
會造成肌膚損失、故障等。
- 請勿在極熱、極寒等極端環境下使用。  
推薦使用環境溫度:約15°C~30°C。



禁止

 **注意** (關於使用和保管)

- 請勿使用酒精、稀釋劑、苯、洗甲水、汽油等溶劑、化學品、研磨粉等擦拭主機或充電底座。  
否則會造成主機表面劃傷。
- 請勿給寵物使用。  
否則會引起受傷。
- 電源開啟時,請勿放置於地板或家具上。使用後,請立即關閉電源。  
否則會造成家具損傷或引起受傷。
- 電源開啟時,請勿與其他電子產品(電熱毯、電榻榻米等)接觸使用。  
否則會造成故障或受傷。
- 請勿直視 LED 燈。使用 LED 燈護理上眼瞼、下眼瞼和外眼角時,請閉上眼睛,並將電極面置於距離肌膚5cm以上的位置進行使用。  
否則可能會對眼睛或皮膚造成傷害。
- 請勿連續使用COOL模式。  
連續使用的話,會造成冷感體感越來越弱。  
請間隔30分鐘以上再使用。
- 請勿與去角質護膚品或去角質面膜搭配使用。  
否則會造成肌膚問題。



禁止

- 
- 使用時請摘掉金屬飾品(手錶、項鍊、戒指、耳環等)。  
否則會造成事故或受傷。
  - 初次使用或尚未適應前,請務必從強度1開始使用。  
否則會造成事故或受傷。
  - 使用中若感到不適,請立即停止使用。  
會造成事故或受傷。



務必遵守

## 注意 (關於使用和保管)

- 護理頭和肌膚之間請及時補充護膚品,保持水潤。  
護膚品過少時傳導性會變差,可能會引起肌膚問題。
- 肌膚表面有刺痛感的情況,請調低強度、更換使用部位,並補充化妝水等滋潤皮膚後再使用。  
會造成皮膚刺痛感。
- 使用前,請先清潔護理頭。  
會引起肌膚問題。
- 使用中若感到不適,請立即停止使用。  
使用中若感到不適,請立即停止使用。
- 請根據下列時間和頻率進行使用。  
【日護理】
  - DAILY 模式:1次3分鐘,1天1次,可每天使用(不與週護理同一天使用)【週護理】
  - 「CLEAN」模式: 1次3分鐘,1週2-3次
  - 「DYHP」模式: 1次5分鐘,1週2-3次
  - 「EYE」 模式: 1次2分鐘,1週2-3次(眼周乾燥時,可最多1天2次,1週5天)
  - 「COOL」模式: 1次3分鐘,1週2-3次(可根據個人需求每天使用)請勿同時使用【日護理】和【週護理】。
- 請勿同一部位連續使用。  
若想同一部位再次使用,請至少間隔24小時以上。  
過度使用可能會損傷肌膚。  
上述時間和頻率僅供參考,請結合自身肌膚狀態,進行使用。
- 使用後,請參照【使用後】(P.26)要求,對主機上的臟污或護膚品進行清理。  
會造成事故或故障。



務必遵守

## 警告 (關於電源)

- 請勿損壞、加工、任意彎折、拉扯、扭護、捆紮充電用USB充電線。

請勿在USB充電線上放置重物,或扭護等,造成USB充電線破損,否則會引起火災或觸電。



禁止粗暴使用

- 移動、拿起產品時,請勿拉扯USB充電線。

否則會引起觸電、短路、火災或接觸不良等。



禁止拉扯充電線

- USB充電線受損或鬆動時,請停止使用。

否則會引起觸電、短路、火災或接觸不良等。維修事宜請諮詢經銷商。



禁止使用已破損充電線

- 從主機或插座上拔下USB充電線時,請務必手持USB前端拔出(請勿觸碰金屬部位)。

另外,請勿濕手插拔。

否則會引起觸電、短路、火災。



拔下插頭

- 護理機器時,請務必關閉電源。不使用時,請拔掉USB充電線。

另外,請勿濕手插拔。

否則會引起觸電、短路、火災。

- 請勿讓USB充電線沾水、浸水或水洗。否則會引起觸電、短路、火災。



禁止沾水

- 請使用充電底座進行充電,並確保USB充電線切實插入。

否則會引起觸電、短路、火災。

- 本產品請務必使用原裝USB充電線。

否則會引起觸電、短路、火災。

- 請確認好充電端口與USB充電線未殘留化妝品或沾水後再充電。

否則會引起觸電、短路、火災。

- 萬一發生異常,請立即切斷電源,停止使用。

發生功能異常、冒煙、異響、異味等不良的情況,請立即停止使用。

- 雷電天氣、地震等情況,請立即停止使用並切斷電源。正在充電的情況下,請拔出USB充電線。

- 充電底座內有化妝品殘留時,請勿充電。



禁止

## 海外使用注意事項



警告

- 請使用充電底座進行充電。  
否則會造成觸電、火災或短路。



務必遵守

- 請確認插頭、電壓情況後再使用。  
否則會造成觸電、火災或短路。




火災警告

- 有時因地區、住宿地不同,插頭形狀、電壓也稍有不同。請務必確認後再使用。
- 關於插頭轉換器請諮詢經銷商。


## 各個部位的名稱和功能

### 主機

●正面

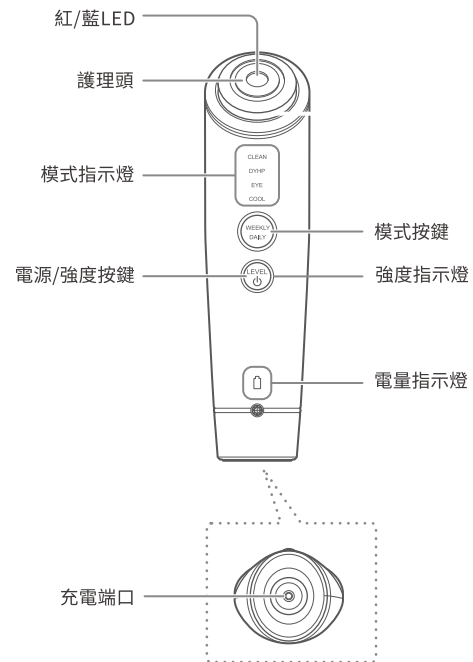

●背面

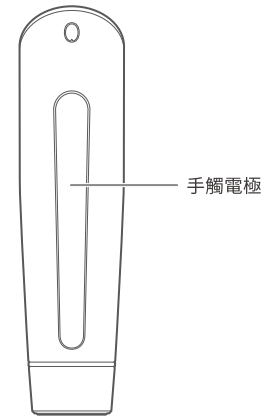

## 配件

- 充電底座



- 化妝棉固定扣  
(購買時,已裝置在主機護理頭上)



可將化妝棉定在護理頭上。(P.18)

- 充電用USB線  
(USB Type-C™)\*

- 使用說明書

※本機專用配件,充電時務必搭配使用。

※為提升品質,主機和配件的設計和規格如有改變,恕不另行通知。

## 功能

### 提醒功能

操作時間過半時,會響起【嘀】的提示音。  
每個模式的操作時間,請參考P.16~17。

### 待機功能 (僅支持週護理)

模式結束時會響起【滴滴】的提示音,下一個模式指示燈開始閃爍並進入待機狀態(待機狀態=功能停止運行狀態)  
每個模式的操作時間,請參考P.16~17。  
再次短按模式按鍵,指示燈閃爍中的模式開始啟動。  
COOL模式結束時,會發出【滴滴】的聲音,自動關機。

### 自動斷電功能


待機狀態保持5分鐘後,會發出【滴滴】的提示音,自動關機。




## 使用前

### 充電

#### 使用家用插座

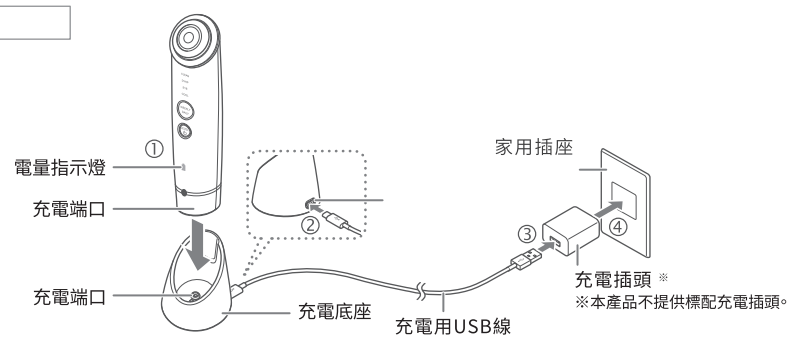

#### 使用電腦

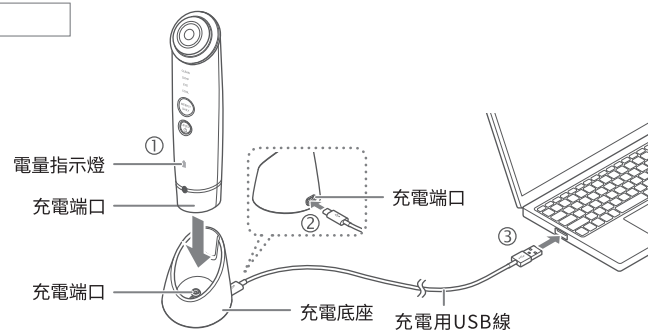

請參考上圖,充電時使用USB線連接充電底座進行充電。

※經過10秒後仍無法正常充電,請確認USB線或充電插頭的插口是否鬆動。

充電中	電量指示燈閃爍(白燈)。
充電結束	電量指示燈閃爍5秒後(白燈),滅燈。
充電時間	約3小時(室溫約25°C)因充電環境、剩餘電量以及充電插頭的不同,充電時間也稍有不同。
使用時間	約30分鐘(DYHP模式最大輸出時)因使用環境、使用強度、剩餘電量的不同,可使用時間也會稍有不同。

電量指示燈表示方式。

電量指示燈	
白燈	電量充足。
亮紅燈	電量不足,請充電。
紅燈閃爍	即將關機,請充電。

### 注意

- 使用充電插頭充電時,請勿使用排插,直接插入牆壁插座充電。
- 首次充電時,請務必充滿電以後再使用。
- 初次使用或長時間不使用時,即使電量顯示充足,也可能只能使用很短時間。請充電後再使用。
- 請使用原裝USB充電線。
- 請勿在浴室、洗漱台等高溫高濕的場所使用。

## 肌膚適應性測試

第一次使用時,請務必提前測試產品與肌膚的適應性。



**注意**

- 為防止發生肌膚問題,請務必事先測試。
- 測試部位出現起疹、發紅、發癢、刺痛等異常情況時,請立即停止測試。
- 肌膚感覺異常時請勿使用。

1

用肥皂等產品清潔手臂內側,並用毛巾等擦乾。

請務必完全擦乾,不留任何水分。

2

請在肌膚上塗上護膚品,並選擇DYHP模式的強度1  
測試3分鐘(P.19)。

3

請確認肌膚無異常情況。

如果24小時內肌膚沒有泛紅或發燙等異常情況,即可使用本產品。



## 使用方法

### 使用注意事項

使用前,請仔細閱讀下列注意事項。

- 初次使用本產品時,務必做過肌膚適應性測試後再使用 (P.14)。
- 請務必參考使用手法滑動使用。(眼部、冰敷模式除外)
- 使用RF (射頻) 時, 根據護膚品的功能以及品牌的不同,溫感也會有所不同。
- 請勿使用於上眼瞼(冰敷模式除外), 下眼瞼或眼尾(護眼模式及冰敷模式除外)。  
\*LED燈可用於上眼瞼、下眼瞼和眼尾。請閉上眼睛, 並將主機置於距離肌膚5cm以上的位置進行使用, 請勿直視LED燈。
- 使用時,請務必緊握手觸電極。
- 推薦使用環境溫度:約15°C~30°C。

## 模式介紹

	模式	技術	是否搭配化妝棉	推薦護膚品 <sup>*1</sup>	時間	強度	使用頻率 (參考)
日護理	DAILY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EMS</li> <li>• 離子導入</li> <li>• LED (紅)</li> </ul>	×	爽膚水或精華	約 3 分鐘	3種強度	每天 <sup>*2</sup> (請勿與週護理模式同一天使用)
週護理	CLEAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RF 射頻</li> <li>• 離子導出</li> <li>• 震動 (僅離子導出時)</li> </ul>	√	爽膚水	約 3 分鐘	3種強度	2~3次/週
	DYHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RF 射頻</li> <li>• DYHP超脈衝滲透</li> <li>• LED (紅)</li> <li>• EMS</li> </ul>	×	精華或面膜	約 5 分鐘	3種強度	
	EYE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RF 射頻</li> <li>• 微電流</li> </ul>	×	眼部精華	約 2 分鐘	3種強度	2~3次/週 <sup>*3</sup>

	模式	技術	化妝棉	推薦護膚品 <sup>※1</sup>	時間	檔位	使用頻率 (參考)
週護理	COOL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 冰敷</li> <li>• LED (藍)</li> </ul>	×	乳液或面霜 <sup>※4</sup>	約 3 分鐘	-	2~3次/週 <sup>※5</sup>

※1 使用個人護膚品時,請務必使用水溶性護膚品。請勿使用油性、磨砂類護膚品。  
會造成機器故障或肌膚問題。

※2 請勿與週護理模式同一天使用(EYE、COOL模式除外)。


※3 眼周乾燥時,可最多1天2次,1週5天。

※4 為加強保濕、護理效果,可使用乳液、面霜等進行護膚後再使用本模式。

※5 可根據個人需求每天使用。

## 化妝棉的使用方法

1 從護理頭上取下化妝棉固定扣。

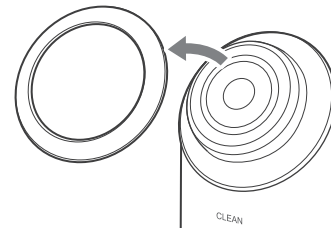

2 將1張化妝棉放於護理頭上,再將化妝棉固定扣推入,固定好化妝棉。

- 固定扣無法固定化妝棉的時候,請更換更大更薄的化妝棉。厚款化妝棉較難固定,使用時請先對半撕開。
- 如化妝棉過厚,肌膚對RF的溫熱感覺可能會變弱。

3 請使用爽膚水充分濕潤護理頭上的化妝棉。

- 搭配護膚品時,務必確保護膚品完全沾濕護理頭。

### 注意

- 如化妝棉變得乾燥,請及時補充護膚品。

## 基本使用方法

1

### 卸妝、清潔臉部。

- 去除肌膚油脂和臟污,保持肌膚乾淨清爽。
- ※ 上妝後也可使用冰敷模式。

2

### 根據護理需求,搭配護膚品使用。

- ※ 使用時,請先將護膚品充分塗抹於肌膚上。
- ※ 需注意,使用周護理的CLEAN模式時,請先在護理頭上裝置化妝棉,並用化妝水浸潤化妝棉後再使用。


化妝棉的安裝方式請參考P.18。

3

### 開機

長按電源/強度按鍵 (約3秒以上)

【嘀嗒】聲後,模式按鍵燈(DAILY)亮燈,DAILY模式啟動。

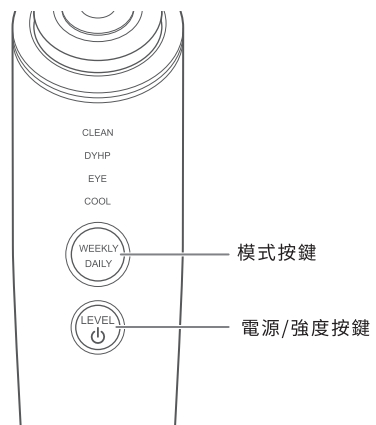




#### 4

### 選擇需求模式

長按模式按鍵, 切換日/週護理; 短按模式按鍵, 切換週護理的4個模式。  
選擇日護理時, 模式按鍵(DAILY)亮燈。  
選擇週護理時, 模式按鍵(WEEKLY)和所選模式指示燈同時亮燈。

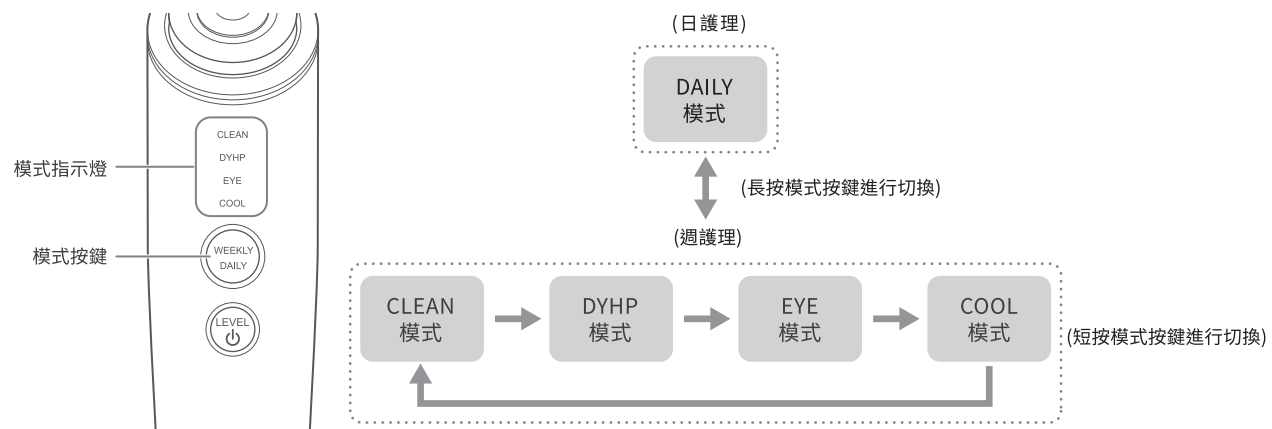

通過長按模式按鍵切換日護理和週護理。


使用週護理的任何模式時, 都可通過長按模式按鍵, 切換至日護理。

各個模式功能, 請參考【模式介紹】(P.16~17)。

5

### 選擇需求檔位 (強度)(COOL模式除外)

•短按電源按鍵/檔位按鍵,【嘀】聲後切換檔位。

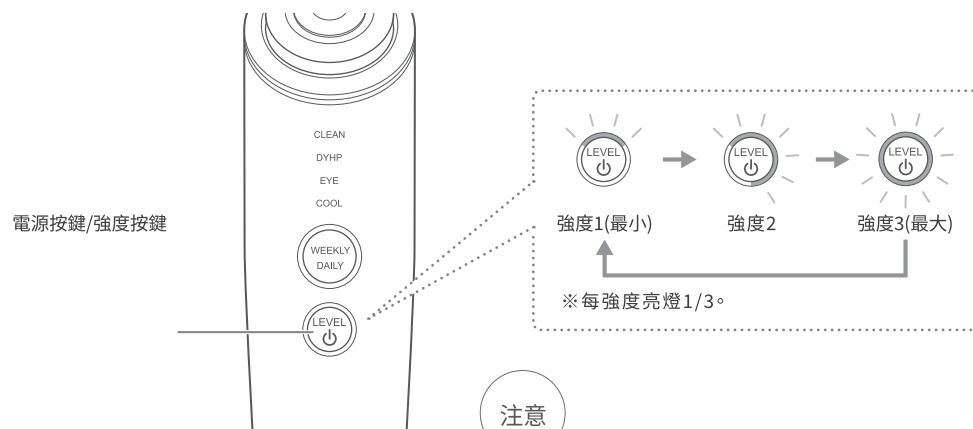

6

使用時,請緊握手觸電極 (背部銀色金屬電極條)。

- 如不握住手觸電極,可能會無法正常使用。

7

請將整個護理頭表面貼於肌膚使用。

- 日護理結束後會自動關機。
- 週護理的各個模式結束後,進入待機狀態 (COOL模式除外)。
- 短按模式按鍵,進入下一個護理模式。
- 中途想要關閉電源時,請長按電源/檔位按鍵。

- 使用手法請參考【滑動方式】。
- 各模式使用時間請參考P.16~17。

注意

- 使用時,請務必確認護理頭完全貼於肌膚上。

8

護理後,請進行儀器的清潔與保養。

- 使用後可按照個人需求決定是否再進行肌膚護理。

注意

- 每次使用結束後,請對儀器進行清潔和保養 (P.26)。

## 滑動方式

- 參考滑動速度:2cm/秒。
- ※如果熱感變強,請加快滑動速度。
- 操作時間過半時,會想起【嗶】聲提醒換臉使用。


## 日護理

如下圖所示,請按照箭頭方向滑動。  
LED燈可用於上眼瞼、下眼瞼和眼尾。

## 注意


- 使用時,護理頭請務必完全接觸肌膚。
- 務必滑動使用(眼部、冰敷模式除外)。
- 同一處連續使用會造成肌膚低溫燙傷。
- 請勿用於上眼瞼(冰敷模式除外)、下眼瞼或眼尾(冰敷模式和眼部護理除外)。
- \*LED燈可用於上眼瞼、下眼瞼和眼尾。請閉上眼睛,並將主機置於距離肌膚5cm以上的位置進行使用。  
請勿直視LED燈。

- 如箭頭所示繞圈使用
- 不可使用部位。

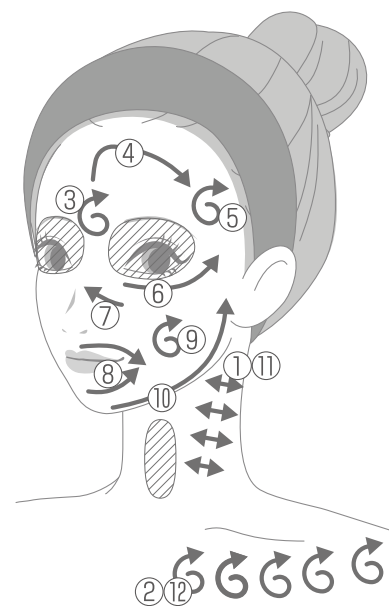


CLEAN模式

如下圖所示,請按照箭頭方向滑動。

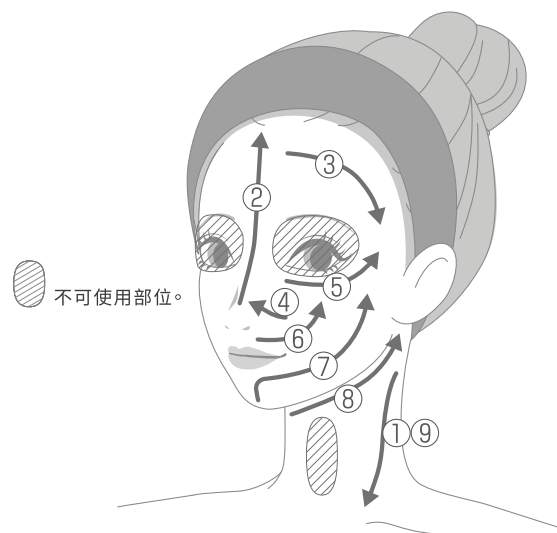


DYHP模式


如下圖所示,請按照箭頭方向移滑動。  
LED燈可用於上眼瞼、下眼瞼和眼尾。

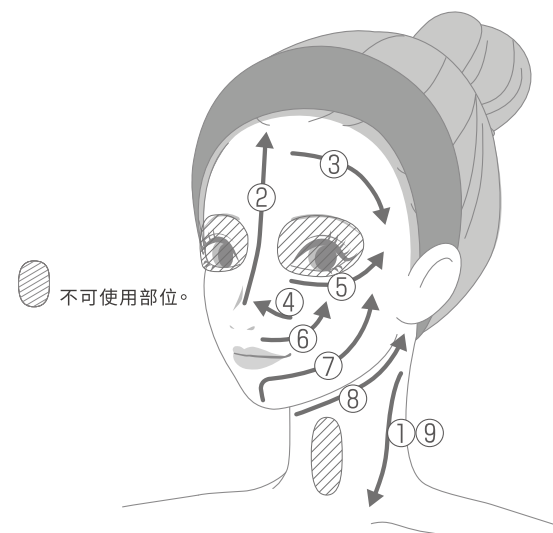

### EYE模式

沿眼頭至眼尾的方向,以【點按→離開→移動】的步驟重覆進行護理。  
貼臉停留時間為3秒左右。  
眼周感到乾燥時,可最多1天2次,1週5天。  
※請勿持續貼於同一部位使用3秒以上。  
※請勿貼於肌膚滑動使用。

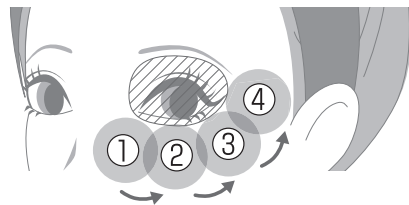

 不可以使用部位:上眼瞼、眼眶骨內肌膚  
※可適用於眼周(下眼瞼、眼尾)

### COOL模式

用於面部時,請以【點按→離開→移動】的步驟重覆按壓使用。  
本機可用於上眼瞼、下眼瞼和眼尾。  
當使用LED燈於眼瞼,請確保貼近眼睛,並將電極面置於距離肌膚5cm以上的位置進行使用。

## 使用後

### 保養方法

每次使用後,請及時清潔保養,保持主機潔淨。

#### 警告

- 保養時請勿充電,並切斷電源。

1

以沾濕了的毛巾,將機身及護理頭上的污漬  
擦拭乾淨。  
清洗化妝棉固定扣時,請先將其從機身上取下。

2

用乾布擦除所有部件上的水漬後再妥善保管。

#### 注意

- 主機和充電底座請勿進水、沾水。
- 請清潔好護理頭上的化妝品後再收納。
- 充電端口請勿殘留水分及護膚品。
- 請勿使用鹼性洗滌劑、酒精、稀釋劑、汽油、洗甲水等液體,以及藥物、磨砂粉等進行擦拭。



## 保管方法

---

- 長時間不使用時,請清潔好主機後再收納。
- 不使用時,請拔掉USB充電線。
- 請勿保管在壁爐、電熱器、浴室等高溫高濕,以及陽光直射、易跌落的場所。
- 請保管在兒童接觸不到、乾淨通風的場所。

## 維修及檢查

---

- 長時間未使用時,使用前請務必確認本產品處於正常、可安全操作的狀態下再使用。
- 本產品操作異常時,請在送交維修前參照【疑似故障】(P.28)內容,確認故障。故障仍未能排除時,請向經銷商進行諮詢。
- 本產品出現故障、劃傷時,請向經銷商進行諮詢。



## 須知

### 疑似故障

本產品使用過程中如果感覺到異常,請在送交維修前確認以下狀況。

癥狀	可能原因和處理方法
無法開機	→ 長按電源/強度按鍵3秒鐘以上(P.19)。
	→ 電量不足,請充電(P.12)。
不充電	→ 請確認充電插頭和USB充電線是否正確連接好(P.12)。
	→ 主機和充電底座接觸不正確,請正確連接(P.12)。
機身發熱	→ 連續使用。關閉電源靜置1小時以上。
強度不變	→ COOL模式無強度選擇。
COOL模式沒有冰感	→ 連續使用COOL模式。關閉電源靜置30分鐘以上。
	→ 在非推薦使用環境中使用。推薦使用環境15°C~30°C。
EMS過強(刺激、疼痛)	→ 按電源/強度按鍵調低強度。
	→ 護理頭沒有全部接觸肌膚。請在鏡子中確認護理頭完全接觸肌膚後再使用。

以下狀況	可能原因和處理方法
EMS強度太低 (感覺不到)	→ 短按電源/強度按鍵調高強度。
	→ 肌膚乾燥。請適量增加護膚品等保持肌膚濕潤。
	→ 沒有貼合面部肌肉紋理,請將護理頭沿著肌肉紋理滑動使用(P.23)。
灼熱 (COOL模式除外)	→ 使用時,沒有滑動護理頭。眼部、冰敷模式除外都需要滑動使用。
	→ 滑動速度較慢。請稍微提高滑動速度。
無熱感	→ 待機模式/自動關機(P.11)。短按模式按鍵,啟動所需模式(P.16)。
	→ 肌膚乾燥。請適量增加護膚品,保持肌膚濕潤。 → 滑動速度較快。請稍微降低滑動速度。

## 常見問題

Q 爽膚水一次使用多少合適?

A 搭配化妝棉使用時,建議將爽膚水完全浸潤化妝棉。  
請根據個人情況,及時補充爽膚水等,保持肌膚水潤。

Q 推薦使用時間和頻率是多少?

請根據下列時間和頻率進行使用。  
【日護理】  
DAILY模式:1次3分鐘,1天1次,可每天使用(不與週護理模式同一天使用)  
【週護理】  
「CLEAN」模式:1次3分鐘,1週2-3次  
「DYHP」模式:1次5分鐘,1週2-3次  
「EYE」模式:1次2分鐘,1週2-3次(眼周乾燥時,可最多1天2次,1週5天)  
「COOL」模式:1次3分鐘,1週2-3次(可根據個人需求每天使用)  
請勿同時使用【日護理】和【週護理】(眼部模式除外)。

Q 使用CLEAN、DYHP、EYE模式時,感覺不到溫熱感。

A 慢慢移動護理頭的同時,稍微用力按壓,使護理頭和肌膚接觸更充分。  
另外,可能是護膚品不足,請及時補充。

Q 化妝棉上沒有看到導出的髒污。

A 眼睛不容易看見的髒污也會被導出。  
污垢被導出後的附著狀態會因人而異。

Q RF輸出時,護理頭沒有熱感。

A RF不是讓護理頭髮熱,而是通過射頻讓真皮層發熱。

## 產品規格

額 定 輸 入	5 V = 1 A (充電底座)
額 定 輸 出	9 V = 0.55A (充電底座)
使 用 電 池	鋰電池 ※因使用環境、電池剩餘電量不同,使用時間也稍有不同。
充 電 時 間	約3小時
使 用 時 間	約30分鐘(DYHP模式最大輸出時) ※因充電環境、電池剩餘電量、使用強度、充電插頭的不同,充電時間也稍有不同。
外 形 尺 寸	主機(附固定扣): 約W47×D44×H176(mm)
產 品 重 量	主機(附固定扣):約210g
材 質	主機:ABS樹脂/矽膠 護理頭:PET樹脂/不銹鋼 手觸電極:不銹鋼
制 造 國 家	日本
配 件	充電底座…………… 1 個 充電用USB線(USB Type-C™)…………… 1 條 固定扣…………… 1個 (包裝時,裝置在主機護理頭上) 使用說明書
推 薦 使 用 環 境	15°C~30°C

## 售後服務

### 充電電池

- 充電電池為消耗品(不在質保範圍內)。
- 充電後使用時間極短時,可考慮電池壽命問題(充電次數大約是300次)。
- 需要更換充電電池時,請諮詢經銷商。


### 關於廢棄

- 廢棄本產品時,請依照當地法律規定進行廢棄。
- 本產品使用鋰電池。




## 電池拆卸方法


1 先使用尖細的工具，  
撬開螺釘蓋和橡膠墊  
後，拆掉螺釘。

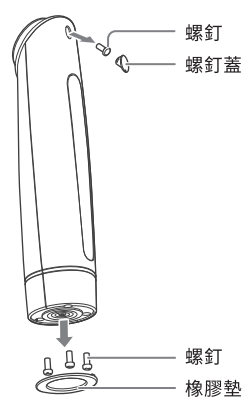


2 拆除底盤。

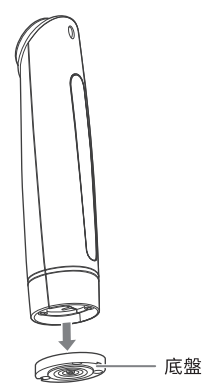


3 拆除後蓋。

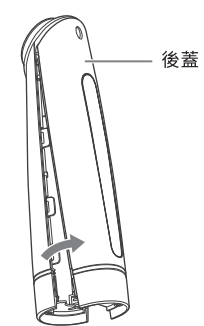

4 拆除電池連接線。

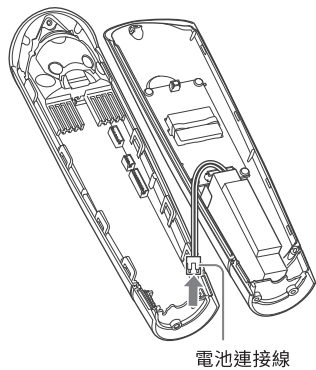

5 取出電池。

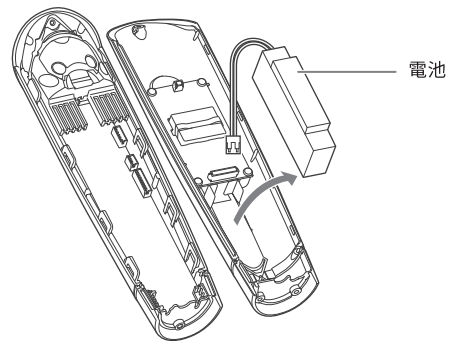

**注意** ●上圖為廢棄產品時的操作圖,並非修理圖紙,如自行拆卸導致主機故障,請恕無法提供正常的售後服務。  
會造成故障、火災等。



Memo

