

YAMAN  
TOKYO JAPAN

保管用

## 使用說明書

家用美容器

Photo PLUS Prestige S

M20



### 目錄

安全注意事項.....	1
在日本以外地區使用時的注意事項.....	6
特點.....	7
各部位的名稱.....	7
使用前.....	8
護理方法.....	13
護理完畢後.....	17
排除故障.....	18
售後服務.....	21
● 產品規格.....	21




衷心感謝閣下購買YA-MAN 產品。

- 為確保正確及安全使用，請仔細閱讀使用說明書。
- 閱讀後請妥善保管說明書，方便日後使用。
- 如將本產品轉讓他人使用，請連同本說明書一併提供。




# 安全注意事項

- 請仔細閱讀所有指示內容，以確保能安全及正確地使用本產品。
- 請按照操作手冊的指示進行操作。
- 如發生異常情況，請立即停止使用並聯絡當地經銷商進行維修。
- 於故障狀態下使用，可能會有對身體造成不良影響的危險，請立即停止使用。
- 此處的注意事項列明了與安全有關的重要內容，請務必遵守。
- 為清楚列明危害及損害程度，以及錯誤操作而發生的狀況分為「危險」、「警告」和「注意」三類。


## ● 注意事項的分類

	<b>危險</b> 不正當使用本產品會引起嚴重傷亡事故。
	<b>警告</b> 不正當使用本產品可能引致嚴重傷亡事故。
	<b>注意</b> 使用本產品時，如果進行錯誤的操作，有可能會導致人身傷害或財產損失*。 <small>*所謂財產損失，是指包括房屋、傢具以及家畜、寵物的損害。</small>

## ● 標示符號

	此符號表示禁止進行的事項。
	此符號表示務必遵守的事項。
	此符號表示該小心注意的事項。

## 危險

	切勿在以下情況下使用，否則可能會導致醫療儀器發生故障： <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 使用醫療儀器的人士。<ul style="list-style-type: none"><li>起搏器等植於體內使用輔助儀器。</li><li>人工心肺機等植於體內使用的儀器。</li><li>心電計等攜帶式裝置。</li></ul></li></ul>
---	---

## 警告

請勿於以下情況下使用，否則可能會導致事故或出現其他問題。

- 患有或懷疑患有心臟病或相關疾病
- 無法表達自己的意圖
- 無法感知溫度或刺激
- 患有自身免疫性疾病

如有以下情況，請使用前先諮詢醫生：

- 患有急性疾病
- 患有傳染病
- 患有惡性腫瘤
- 患有發熱性疾病
- 患有高血壓或血液疾病
- 發燒
- 因嚴重的周邊動脈阻塞（例如糖尿病）而導致的官感功能障礙
- 神經受損
- 患有皮膚病或異位性皮膚炎
- 正在定期接受醫生治療並且正在服藥
- 有過敏、接觸性皮炎、曾經患有皮膚相關疾病或在使用本產品時對皮膚有任何疑慮



禁止

對於以下身體部位，或存在以下狀況，切勿使用，否則可能會導致事故或出現其他問題。

- 皮膚受損、出現皮疹、炎症或其他異常情況
  - 受到酒精的影響
  - 口腔內、陰部周圍或粘膜
  - 眼球、上眼瞼（冰感模式除外）、下眼瞼和眼尾（冰感模式和眼部護理模式除外）。
  - 喉嚨
  - 凸起的痣
  - 病毒感染性疣
  - 骨折部位
  - 醫學美容治療後出現內出血、腫脹或結痂症狀的部位
- \*醫學美容治療後2週內避免使用此產品。此期間後，請諮詢醫生並在獲得許可後才使用此產品（例如透明質酸注射、矽膠注射、肉毒桿菌毒素、埋線拉皮、雙眼皮手術、HIFU等）
- 如不確定使用本產品是否安全，請在使用前諮詢醫生意見。



禁止

請勿長時間貼於同一位置上使用，並請於皮膚上移動位置。

否則可能會引致灼傷或凍傷。



禁止

請勿將機器置於火中或加熱，以及禁止在高溫環境中充電，使用，放置。

本產品內含充電電池。否則可能會導致過熱、起火、破裂而造成損壞。



限制使用對象

請放置於兒童無法觸及的地方，不可讓兒童使用。

否則可能會造成意外、身體受傷。



用途以外禁止

請勿作使用手冊以外的其他用途使用。

否則可能會造成身體受傷、產品故障。

## 警告



禁止

請勿在易燃物質（如酒精、稀釋劑、汽油、指甲油卸除劑或定型噴霧等）的附近使用。否則可能會引起起火、觸電或身體受傷。



禁止使用  
延長線

本產品必須使用專用電源插頭。電源插頭必須直接插入電源插座，請勿使用延長線。否則會導致觸電、短路或起火。



限制  
使用對象

請勿讓神志不清者使用。此外，請避免殘障人士單獨進行使用。否則可能會造成意外、身體受傷。



出現異味或  
異常發熱時  
請勿使用

若出現異味或異常發熱，請停止使用。否則可能會造成損壞引起起火。



務必遵守

請確保充電時電源插頭沒有沾水。否則會導致觸電、短路或起火。



禁止  
不當處理

請勿損害、加工、用力彎曲、拉扯、扭曲及捆扎電源插頭。

如果將電源插頭放置於重物下或被夾緊，可能會導致電源插頭破損，並導致觸電或起火。



禁止使用  
已損壞插座

請勿使用已損壞的電源插頭或已鬆動的插座。

否則會導致觸電、短路或起火。如需維修，請聯絡當地經銷商。



禁止淋水

請勿在浴室內或有水的地方使用電源插頭。請勿讓機身或電源插頭沾水，或用水清洗。

否則會導致觸電、短路或起火。



禁止拆解

請勿自行拆解維修或改裝。否則可能會導致起火、觸電或身體受傷。如需維修，請聯絡當地經銷商。



務必遵守

閒置及進行清潔時，請務必關閉電源。否則會導致觸電、短路或起火。

## 警告



務必遵守

只可連接100~240伏特交流電使用。（免費修理僅在日本國內對應）插入電源插頭時，必須確認完全插入。否則可能會造成起火、觸電或意外。



拔下  
電源插頭

閒置時請將插頭從插座中拔除。請勿以沾濕的雙手拔除或插入電源插頭。否則會導致觸電、短路或起火。



拔除插頭

拔除電源插頭時，請手握插頭前端拔出。請勿以沾濕的雙手拔除或插入電源插頭。

否則會導致觸電、短路或起火。



當心火災

請勿放置於靠近火源、熾熱陽光下、浴室等高溫潮濕地方。請勿置於熱能電器附近。否則可能會導致過熱、起火、破裂而造成損壞。



拔下  
電源插頭

萬一發生異常情況時，請立即拔除電源插頭。若出現運作異常、冒煙、發出怪聲或有異味時，切勿繼續使用。

## 注意



禁止

請勿在禁止使用部位進行使用(P.2)。

正接受牙齒治療或曾進行補牙人士，在進行離子導出導入、EMS、DYHP刺激時，可能會感到不適。使用時，請降低離子導出導入、EMS、DYHP的強度、並調整使用部位。



禁止

禁止以下事項。

否則可能會造成意外、損傷或機件受損。

- 皮膚出現紅疹、炎症、瘙癢等異常情況下請勿使用。
- 因機身掉落、碰撞造成損壞時請勿使用。
- 請勿作商業上使用或長時間連續使用。

## 在日本以外地區使用時的注意事項

### 注意



請勿以鹼性洗滌劑、酒精、稀釋液、汽油、指甲油卸除劑等塗抹機身。

禁止

否則可能會造成機身表面受損。



請勿用來護理寵物。  
否則可能會引起受傷。

禁止



請勿用電極面觸碰金屬表面。

禁止

否則可能會引致故障或受傷。



請勿放置於不平穩的地方，切勿摔跌或撞擊機器。

禁止掉落

否則可能會造成機器故障  
此外，若機器掉落在腳上可能會導致受傷。



請勿直視LED光。

禁止

使用LED燈護理眼瞼、下眼瞼和眼尾時，請務必閉上眼睛，並將電極面置於距離肌膚5cm以上的位置進行使用。

否則可能會引起眼部或皮膚受傷。



請不要連續使用冰感模式。

禁止

連續使用時，皮膚對冰冷溫度的感覺會變弱。  
請等待至少30分鐘之後再次使用。



務必遵守

請務必遵守以下事項。

否則可能會造成意外、身體受傷或機器故障。

- 請勿長時間使用於同一位置上。
- 請根據個人皮膚狀態進行使用。
- 請避免進行日光浴後，去角質護理或塗抹式面膜一並使用。
- 使用後請將電源關掉。



務必遵守

使用時若感到身體不適，請停止使用。

使用時需留意查看身體皮膚是否出現異常情況。  
如發現本產品不適合您的皮膚，請立即停止使用。



務必遵守

首次使用或尚未調節時，請務必使用強度1。

否則可能會造成意外、身體受傷。



### 警告



務必遵守

請務必使用100~240伏特交流電。(免費修理僅在日本國內對應)  
否則可能會引致起火、觸電或意外。



生火注意

請務必確認插頭形狀及電壓後再進行使用。  
否則可能會導致機身發熱、起火或故障。

- 插頭形狀、電壓可能會因地區及住宿地而有所不同。使用前請先進行確認。
- 關於電源插頭及插頭的轉換，請向旅行社或電器銷售店查詢。

## 特點


本產品通過RF射頻功能（無線電波，以下簡稱為RF）進行皮膚溫熱，是具有離子潔面、EMS機電刺激、Photo LED、冰感、DYHP、微電流功能的面部美容儀。使用者可按個人皮膚狀況及需要，選擇各模式組合進行使用。

- RF：溫熱達至深層肌膚\*，使肌膚處於更適合護理的狀態。
- 離子潔面：一般洗面難以去除的污垢可透過離子導出功能吸出面部。
- EMS：以電流刺激肌肉。
- Photo照射：以LED光照射肌膚進行護理。
- 冰感：以冰冷溫度貼於皮膚表面。
- DYHP：通過獨特波形的超脈衝滲透技術，幫助護膚品滲透\*至皮膚。
- 微電流：以微弱的電流針對眼部進行護理。

\*深至角質層

## 各部位的名稱


### ●本機

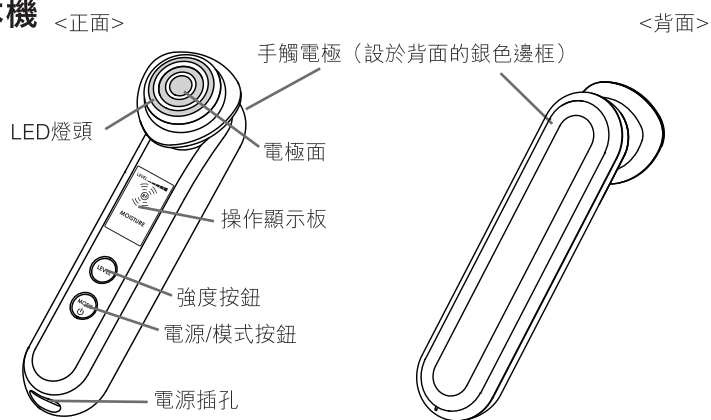


## 【配件】

### ●化妝棉固定扣 （銀圈）

※購買產品時已裝置於機器的電極頭上。  
※能將化妝棉固定於電極頭之上。

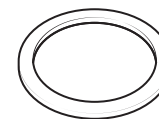

### ●電源插頭

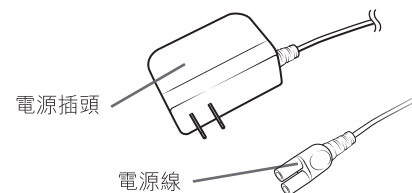


※主機、配件、電源插頭、電源線的設計和規格以提升品質為前提。如有更改，將不再另外通知。

## 使用前

### 操作顯示板



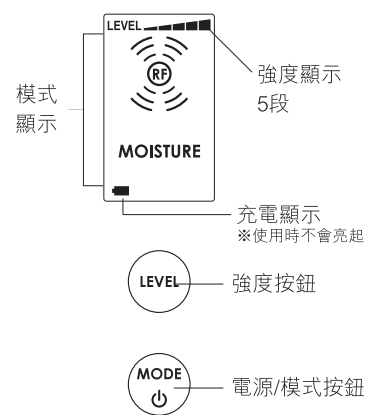


### ●操作顯示板及按鈕



- 長按電源/模式按鈕約3秒開啓電源。（自動進入清潔模式。）
- 各模式進行時可按電源/模式按鈕切換至其他模式。
- 使用清潔、保濕、EMS UP模式時，可調節強度。強度分為5級，可按強度按鈕選擇合適強度。  
※RF射頻、微電流、LED、冰感模式無法選擇強度。
- 長按電源/模式按鈕約3秒可關閉電源。

## ● 模式顯示

每次按下電源/模式按鈕，將以清潔模式→眼部護理→保濕模式→EMS UP模式→冰感模式→清潔模式<重覆>……的次序切換模式。

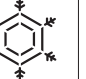模式	清潔模式 CLEAN	眼部護理 EYE CARE	保濕模式 MOISTURE	EMS UP	冰感模式 COOL
功能	RF/ 離子清潔	RF/ 微電流	RF/DYHP/ LED(紅光·琥珀光)	EMS / LED(紅光)	冷敷/ LED(藍光)
模式顯示	LEVEL  RF CLEAN	 EYE CARE	LEVEL  RF MOISTURE	LEVEL  EMS EMS UP	 COOL

※進行清潔模式及保濕模式護理時，模式顯示板上的RF會重覆顯示或隱藏。

## ● 強度顯示

選擇清潔模式後，按壓強度按鈕可調節離子導出強度。


選擇保濕模式後，按壓強度按鈕可調節DYHP的強度。

選擇EMS UP模式後，按壓強度按鈕可調節EMS強度。

強度分為5級，請選擇個人合適強度。


每次按下強度按鈕，將以強度1→強度2→強度3→強度4→強度5 <重覆>……的次序切換強度。

※RF射頻、微電流、LED、冰感模式無法選擇強度。首次使用或尚未適應時，請務必使用強度1。

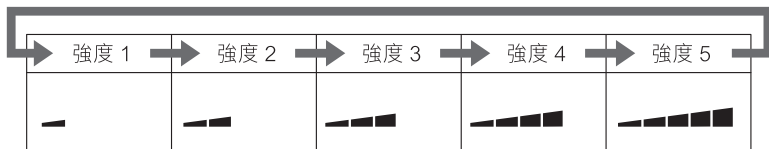

## ● 充電顯示

充電時，充電顯示燈會閃爍。  
充電完畢後充電顯示燈會點亮。  
※使用時不會亮起。

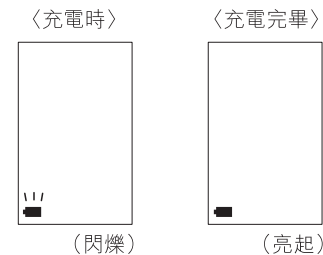

## ● 提醒功能

模式設定時間進行到一半的時候，會發出「嗶」的提示音。  
此時請切換到另一邊臉進行護理。

## ● 待機顯示及Auto off(自動關閉電源)

清潔、眼部護理、保濕、EMS UP模式結束後（各模式約3分鐘），下一個模式的顯示燈會閃爍，此時將進入待機狀態\*（非操作中的狀態）。

※按下電源/模式按鈕閃爍中的護理模式會開始運行。

※如停止操作約兩分鐘，提示音會響起，電源會自動關閉（Auto off）。

只有冰感模式完畢後，不會切換至待機模式，而且會自動關閉電源（Auto off）。（發出提示音，自動關閉電源。）

## 預先進行肌膚測試

※第一次使用本產品或護膚品時，請務必預先測試產品與肌膚的適應性。

### 1 清潔肌膚。

- 用肥皂清洗手臂內側，用毛巾等擦拭。

### 2 將護膚品(保濕霜或爽膚水)或清水塗抹再手腕內側，並在保濕模式下使用本產品3分鐘。

- 請勿擦拭或用水潤濕肌膚測試處的皮膚。

如果24小時內肌膚沒有出現異常情況（泛紅或發燙），則可以使用本產品。



注意

- 為防止發生肌膚問題，請務必事先測試。
- 實施部位出現發疹、泛紅、發癢、刺激等異常情況時，請立即停止測試。
- 肌膚感覺異常時請勿使用。

## 充電方法

本產品是充電式及必須在非連接電源插頭下使用。請務必在充電後使用產品。

如使用充電電池，請務必先進行充電。

- 開始使用時（購買後或長時間閒置）請務必先進行充電，並確認充電顯示燈由閃爍變為持續亮燈後才使用。

### ● 建議充電時間

充電時間	操作時間
約3小時	約30分鐘

- ※充電環境室溫約為25°C。
- ※此為充滿電池後可操作的時間。
- ※操作時間會因使用模式、使用強度及使用環境而異。
- ※充電及操作時間的方法因應環境、電池量而異。

### ● 充電方法

1 電源插頭的電源線插入機身的電源插口中。

2 電源插頭連接到插座。

- 本產品必須使用專用電源插頭。
- 電源插頭必須直接插入插座，請勿使用延長線。
- 充電開始時充電顯示燈會閃爍。充電完畢後充電顯示燈會持續亮燈。

3 充電完畢後，將電源插頭從插座中拔出，並把電源綫從機身上拔除。

## 模式


模式	特點	功能	建議使用方法	時間	強度	使用頻率 (建議)
清潔模式 <b>CLEAN</b>	將一般洗臉難以去除的污垢吸出，讓皮膚更清爽乾淨。	· RF射頻 · 離子清潔	RF離子深層潔淨薄膜 <sup>*3</sup> (或先備的化妝棉+爽膚水 <sup>*2</sup> )	約3分鐘	離子： 5級	每週 2~3次
眼部護理 <b>EYE CARE</b>	微電流對眼周肌膚進行護理。	· RF射頻 · 微電流		約2分鐘	無	每週5次
保濕模式 <b>MOISTURE</b>	讓護膚品更易滲透 <sup>*1</sup> 至角質層，讓皮膚更加水潤。	· RF射頻 · DYHP · LED(紅光·琥珀光)	RF離子導入保濕薄膜 <sup>*3</sup> (當水分不足時，請將殘留在面膜包裝袋內的化妝水添加後繼續使用。)	約3分鐘	DYHP： 5級	每週 2~3次
<b>EMS UP</b>	刺激肌肉，讓皮膚更富彈性。 ※可使用於肩頸部位。	· EMS · LED(紅光)		約3分鐘	EMS： 5級	
冰感模式 <b>COOL</b>	冰感功能可調整肌膚紋路並恢復彈性。	· 冰感 · LED(藍光)	請直接使用於皮膚。	約3分鐘	無	每日

- 使用時須於皮膚上滑動進行。(使用眼部護理及冰感模式時除外)
- 除清潔模式和冰感模式以外，可根據個人喜好選擇使用或不使用化妝棉。
- ※使用冰感模式後本機以及電極面會發熱。請勿連續使用。
- 使用後請將電源關閉，並保證機器至少休息30分鐘。
- ※1 深至角質層
- ※2 使用自備的護膚品時，必須使用水溶性產品。請勿使用油性產品或磨砂膏類產品。否則可能引起產品故障或對肌膚造成傷害。
- ※3 請參考P.21

## 護理方法

### 化妝棉的裝置方法

1 從主機拔出化妝棉固定扣。

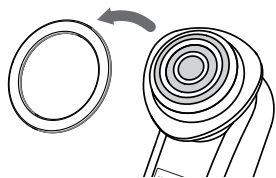

2 將1張化妝棉放於電極面上，再將化妝棉固定扣扣好。

- ※ 如化妝棉固定扣無法將化妝棉穩定扣上，請使用較大且較薄的化妝棉。因較厚的化妝棉固定起來比較困難，請對半撕開使用。
- ※ 如化妝棉過厚，會令皮膚對RF射頻的溫熱感覺變弱。

3 將爽膚水或凝膠沾於化妝棉上。

- ※ 爽膚水及凝膠須完全沾滿電極面。
- ※ 使用較清爽的爽膚水可能會令溫熱感覺減弱。  
建議的保濕產品：RF Booster Pad、較滋潤的爽膚水。
- ※ 使用後請將殘留於電極面上的爽膚水及凝膠徹底擦拭去除，或稍微用水清洗。清洗的時候，請勿將本產品泡入水中。

### 基本使用方法

#### ●使用時的注意事項

- 使用時須於皮膚上滑動進行。如持續貼於同一部位上可能會造成灼傷。
- 使用RF射頻時會因護膚品的種類或皮膚的狀態而感覺溫度有異。
- 請勿用於上眼瞼(冰感模式除外)、下眼瞼或眼尾(冰感模式和眼部護理除外)。  
※ LED燈可用於上眼瞼、下眼瞼和眼尾。請閉上眼睛，並將電極面置於距離肌膚5cm以上的位置進行使用。
- 請勿直視LED光。
- 手握機器時請務必確保能接觸到手觸電極。
- 建議使用環境溫度15°C~30°C

#### ●護理方法

1 請先清洗臉上的化妝品。

- 去除臉上油分及污垢，確保肌膚於潔淨的狀態。
- ※ 冰感模式也可在化妝狀態時使用。

2 必要時可裝上化妝棉並加上爽膚水。

3 長按電源/模式按鈕（約3秒）開啓電源。選擇模式、強度。

- 按電源/模式按鈕選擇模式。
- 按強度按鈕選擇強度。
- ※ RF、微電流、LED、冰感模式無法選擇強度。
- ※ 首次使用或尚未適應操作時，請務必使用強度1。

4 手握機器時請確保接觸到背面的手觸電極（背面銀色邊框）

- ※ 手握機器時請勿用手指觸摸充電接口。  
否則可能有電流的刺痛感。

5 將電極面貼於皮膚上滑動。(使用方法請參閱P.15~16)

- 各模式結束後將進入待機狀態（約2分鐘），按壓電源/模式按鈕可開始下個模式。  
（冰感模式結束後電源會自動關閉）。
- ※ 使用時請務必把電極頭完全貼在皮膚上。

6 長按電源/模式按鈕（約3秒）關閉電源。

- ※ 冰感模式結束後電源會自動關閉。

7 機器護理後進一步調整肌膚。

- 請塗上適量的保濕乳霜。
- ※ 請每次使用後都進行機身的清潔。（參考P.17）



## 護理方法


請按箭頭指示的方向於皮膚上滑動使用。

### <清潔・保濕模式>


- 感到灼熱時可稍微加快移動的速度。此外，使用化妝棉等可以減輕灼熱感。
- 請將整個電極面表面貼於肌膚上使用。
- 使用時須於皮膚上滑動進行。

因長時間使用於同一位置上可能會造成肌膚的灼傷或凍傷。


- 請勿將電極面貼於上眼瞼、下眼瞼和眼尾使用。

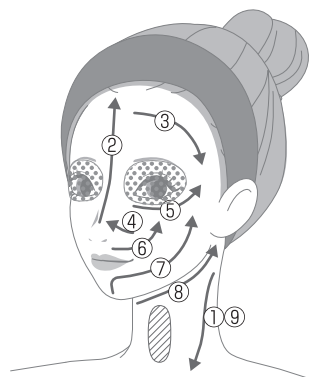

 不能使用的部位

 只限LED光使用的部位  
(使用方法請參考P.16)  
(只限保濕模式)  
※請閉上眼睛，並將電極面置於距離肌膚5cm以上的位置進行使用。

建議移動機器的速度：每秒移動2cm

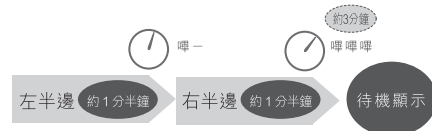



### <眼部護理模式>

按照從眼頭到眼尾的方向，以「貼合→拿開→移動」的步驟重覆按壓使用。

※請勿連續貼合3秒以上。

※貼合時，請勿移動電極面。

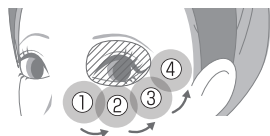

 不能使用部位：上眼瞼


※可在下眼瞼及眼尾使用。


貼合時間：每一處約3秒。




如特別在意眼周護理，推薦單側使用約2分鐘，共計約4分鐘。

### <EMS UP模式>

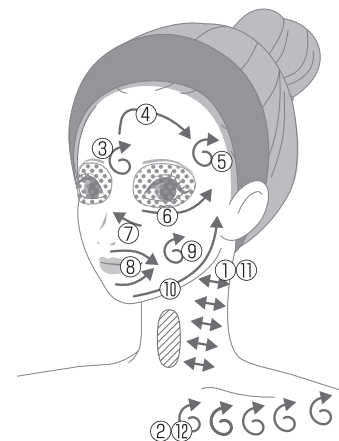

 如箭頭指示的方式打圈移動

 只限LED光使用的部位  
(使用方法請參考以下)  
※請閉上眼睛，並將電極頭置於距離肌膚5cm以上的位置進行使用。



### <冰感模式>

用於面部時，以「拿開→移動」的步驟重覆按壓使用。

※上眼瞼、下眼瞼和眼尾均可使用



### ●使用LED光(保濕・EMS UP・冰感模式)

對上眼瞼、下眼瞼和眼尾進行護理

請拆下RF Booster Pad或化妝棉，並閉上眼睛，將電極頭置於距離肌膚5cm以上的位置進行照射。



## 護理完畢後

## 排除故障

為保持本產品清潔，請於每次使用後進行清理。

### ●清潔及保管方法

1 關閉電源並將電源插頭拔除。

2 請用水沾濕毛巾並捲起，將電極面及化妝棉固定扣上的污垢擦拭去除。化妝棉固定扣則使用清水進行清洗。

- 清潔化妝棉固定扣時，請先從機身上拆除，並在洗後擦乾。
- 請勿使用水溶性清潔劑、酒精、稀釋劑、汽油、指甲油卸除劑等清潔。
- 請勿在殘留爽膚水或凝膠的狀態下間置本機。

3 電極面及化妝棉固定扣以外的污垢，請用乾布擦拭去除。

### 保管方法

- 長時間間置本機時，請在保養後進行妥善保管。
- 不使用時，請關閉電源並將電源插頭拔掉，妥善保管。
- 請勿存放於焗爐或加熱器附近、浴室等高溫潮濕地方、熾熱陽光下及不穩固的地方。
- 請將本機放置於兒童無法觸及的地方。

### 保養及檢查

- 經長時間間置後，請於再使用前先檢查其操作是否正常及安全。
- 本機操作發異常時，可先參照「排除故障」(P.18~P.19) 進行檢查。
- 如有故障或異常，請向產品銷售商諮詢。

### 檢查項目

狀況	可能的成因	解決方法
無法開機	沒有長按電源 / 模式按鈕	長按電源 / 模式按鈕約3秒來開啓電源
	充電	充電完成後，拔除電源插頭，長按電源/模式按鈕約3秒來開啓電源
充電後仍只能操作數分鐘	電池壽命完結 (充電次數約300次)	請聯絡當地銷售商 (P.21) ※請勿嘗試自行更換電池，否則可能會造成故障
	按下錯誤的按鈕	請長按電源 / 模式按鈕後再度開啓電源
	待機狀態 / 自動關機 (P.10)	請按下電源 / 模式按鈕
無法進行充電 ( 充電顯示燈 沒有閃爍 )	電源插頭沒有插到插座	請將電源插頭插入插座
	電源插頭沒有連接到機器	請將電源插頭的電源線插入機器中
		請同時按下強度按鈕及電源模式按鈕重新啟動電源，主機會自動開始充電
機身發熱	連續使用	請關掉電源，並讓機器休息最少1小時

狀況	可能的成因	解決方法
冰感模式沒有冰凍感覺	→ 連續使用冰感模式	→ 請關掉電源，並讓機器休息最少30分鐘
	→ 於推薦環境溫度範圍外使用時	→ 請於15°C~30°C的環境下使用
感到灼熱或疼痛	→ 設定的強度過高	→ 請按強度按鈕調低強度
	→ 電極面沒有完全貼於皮膚上	→ 使用時請將電極面完全貼於皮膚上
EMS強度太低/感覺不到	→ 設定的強度過低	→ 請按強度按鈕調高強度
	→ 皮膚的水分不足或太過乾燥	→ 請用爽膚水或凝膠調節皮膚的濕度後再使用 請將手稍微沾濕
	→ 沒有貼合於肌肉上	→ 使用時請將電極面貼於肌肉上(P.16)
灼熱 (冰感模式使用時除外)	→ 電極面長時間貼於皮膚上	→ 使用冰感模式以外的模式時，須於皮膚上滑動進行。
	→ 移動速度太慢	→ 請加快移動速度
感覺不到RF的溫熱	→ 待機狀態 / 自動關閉 (P.10)	→ 請重新啟動電源，或按電源/模式按鈕來啟動模式
	→ 皮膚的水分不足或太過乾燥	→ 請用爽膚水或凝膠調節皮膚的濕度後再使用
	→ 移動速度太快	→ 請減慢移動速度
RF、微電流、LED、冰感模式無法選擇強度		→ 能夠調節強度的只有離子、DYHP、EMS模式

## 常見問題

Q	A
每次應使用多少爽膚水或凝膠保濕霜？	以本產品特點來說，使用較多爽膚水及凝膠的溫熱效果較佳。 使用化妝棉時，建議將爽膚水完全沾滿電極頭。 凝膠請使用約為2粒珍珠大小的份量。 如感覺爽膚水及凝膠不足，建議補充份量。
是否可於入浴時使用？	本產品並非防水產品，請勿在入浴時使用。
使用後肌膚發燙	因 RF 射頻的溫熱所產生現象。 可使用冰感模式或保冷冰袋為皮膚降溫。
面部及手部感到刺痛	這是受到離子清潔、DYHP、EMS的電流刺激所致。 可按強度按鈕調節強度 請選擇個人合適的強度 首次使用或尚未適應時，請務必使用強度1。
使用清潔模式、眼部護理模式、保濕模式時感覺不到 RF 射頻的溫熱	請減慢移動電極面時速度，或嘗試加強按於皮膚上的力度。 此外，也可能因化妝棉的濕度不足引致。 請補充適量的爽膚水或凝膠。 RF射頻會間歇性啟動及關閉。顯示屏表示為 <b>RF</b> 時，RF為啟動狀態。 (僅限清潔 • 保濕模式)
化妝棉上沒有沾上污垢	肉眼無法看出的污垢也會被導出。 污垢的導出狀態及黏附狀況亦會因人而異。
RF電極面沒有熱力	RF射頻並非由電極面發熱，而是透過電流溫熱皮膚。

## ● 充電電池

- 充電電池屬耗用品。(不屬於保用範圍內)
- 如完全充電後操作時間仍非常短，表示電池壽命可能已完結。  
(電池一般可充電約300次)
- 如要更換電池，請向當地經銷商諮詢。

## ● 廢棄

- 請遵照當地政府規定棄置產品。
- 本產品採用鋰電池。

## ● 產品規格

額 定	DC9V 2.0A
功 率	4.5W
使 用 電 池	鋰蓄電池
充 電 時 間	約3小時 ※因充電環境不同，充電時間也會稍有不同。
外 形 尺 寸	機身(含化妝棉固定扣)：約W50×D55×H190(mm)
產 品 重 量	機身(含化妝棉固定扣)：約270g
材 質	機身：ABS樹脂 面板：聚碳酸酯、丙烯酸樹脂 電極頭：PET樹脂/不鏽鋼 手觸電極：ABS樹脂(鍍鎳)
生 產 國	日本
配 件	化妝棉固定扣、充電器
推 薦 環 境	15°C~30°C