

YAMAN
TOKYO JAPAN

使用手冊

家用美容器

M22全方位美顏儀



目錄

安全注意事項	1
在香港境外使用時注意事項	7
產品說明	8
使用前	9
護理方法	15
護理後	20
排除故障	21
售後服務	24
●產品規格	26




使用產品前請先仔細閱讀本使用手冊。

- 請仔細閱讀本使用手冊，確保正確及安全地使用本產品。
- 請妥善保存本使用手冊並放置於方便取閱的地方，以便日後參考使用。
- 如將本產品轉讓他人，請務必同時附上使用手冊。



安全注意事項

- 使用前請仔細閱讀「安全注意事項」內容，以確保能安全及正確地使用本產品。
- 請按照使用手冊的指示進行操作。
- 如發生異常情況，請立即停止使用並聯絡當地經銷商進行維修。
- 於故障狀態下使用，可能會有對身體造成不良影響的危險，請立即停止使用。
- 此處的注意事項列明了與安全有關的重要內容，請務必遵守。
- 為清楚列明危害及損害程度，將錯誤操作而可能發生的狀況分為「危險」、「警告」和「注意」三類。

● 注意事項的分類

 危險	不正當使用本產品會引起嚴重傷亡事故。
 警告	不正當使用本產品可能引致嚴重傷亡事故。
 注意	使用本產品時，如果進行錯誤的操作，有可能會導致人身傷害或財產損失*。 *所謂“財產損失”，是指包括房屋、傢具以及家畜、寵物的損害。

● 標示符號

	此符號表示禁止進行的事項。
	此符號表示務必遵守的事項。
	此符號表示該小心注意的事項。



危險

下列人士請勿使用：



禁止

可能會導致醫療儀器發生故障。

◆ 正在使用醫療儀器的人士：

- 起搏器等體內植入式醫用電子儀器
- 人工心肺機等植於體內使用的儀器
- 心電圖描寫器等穿戴式醫用電子儀器



警告

下列人士請勿使用：

可能會引起意外或造成其他問題。

- 患有或疑似患有心臟病或有障礙的人
- 無法表達自己意願的人
- 無法感知溫度或刺激感的人
- 患有自身免疫性疾病的人

請勿讓身體有障礙的人士單獨使用本產品。

以下人士使用前應先諮詢醫生：

- 急性病患者
- 傳染病患者
- 惡性腫瘤患者
- 發熱性疾病患者
- 高血壓或血液病患者
- 正在發燒
- 因糖尿病等高度慢性循環功能障礙而導致知覺障礙患者
- 神經障礙患者
- 皮膚病及過敏性皮炎
- 定期覆診的人士
- 過敏性體質、有接觸性皮炎或患有皮膚病患者，或使用本產品時擔心皮膚問題人士



禁止

對於以下身體部位或存在以下狀況，切勿使用：

可能會引起意外或造成其他問題。

- 皮膚有傷口、皮疹、炎症等異常情況
- 受到酒精影響
- 口腔內、陰部周圍或粘膜
- 眼球
- 上眼瞼 (COOL模式除外)
- 下眼瞼、眼尾 (EYE CARE模式和COOL模式除外)
- 喉嚨
- 隆起的痣
- 病毒性疣
- 骨折部位
- 美容治療後內出血、腫脹、結痂等部位

※美容醫療程序後兩週內，請避免使用本產品。兩週後，請諮詢醫生並僅在醫生確認後才使用。(手術如：玻尿酸注射、矽注射、肉毒桿菌、埋線拉皮、雙眼皮整形、HIFU等)

- 通過手術植入金屬的部位 (重建手術、整形手術、整容手術等)



禁止

請勿在皮膚較薄或骨頭上方的部位長時間使用。

否則可能會導致皮膚或身體出現問題。



禁止

請不要過度使用。請遵循使用手冊中的建議時間和頻率使用。

否則可能會對身體造成傷害。



禁止

使用前，請檢查及確保電極面和護理頭沒有裂痕、變形或損壞。如已破損或出現故障，請勿使用。

否則可能會導致受傷或皮膚問題。

**警告**

請勿在以下場所使用、存放或充電。

- 浴室或浴缸、淋浴間、洗臉盆或其他盛水的容器附近
 - 塵多的地方
 - 戶外或陽光直射的地方
 - 傾斜、震動不穩、易受碰撞地方
 - 無線電波或磁場較強的地方
 - 靠近易燃物質 (酒精、稀釋劑、汽油、洗甲水、噴霧等)
 - 暴露於油煙或蒸氣的地方
 - 靠近發熱器具 (爐具等) 會變熱的地方
 - 溫度會劇烈變化的地方 (靠近空調或暖爐附近)
- 否則可能會導致火災、觸電、意外、故障、翻倒或受傷

**禁止**

如充電插頭損壞，請勿使用本產品。

請聯絡當地經銷商或諮詢環球售後服務 (<https://www.ya-man.co.jp/en/support/repair/>) 並使用專用充電器。請勿連接額定電源 (DC9V 2.0A) 以外的充電器。

**禁止**

請勿在使用過程中從電源插座或主機中拔出插頭。

否則可能會因短路而導致觸電或火災。
在拔出插頭之前，請務必關閉電源。

**禁止**

請勿用於使用說明書以外其他用途及部位。

否則可能會導致故障或受傷。

**用途以外
禁止**

兒童應在監護人同意及專業人士的監督情況下使用本產品。

否則可能會導致意外或受傷。

**限制
使用對象****禁止**

請勿在低於指定環境溫度下使用。

否則可能會導致電極面粘著皮膚並讓皮膚受傷。

**禁止**

請勿讓主機在啟動狀態下閒置。

否則可能會導致火災或其他意外。

**限制
使用對象**

將主機及充電器放在兒童接觸不到的地方，不要讓他們單獨使用，也不要讓兒童玩弄。

否則可能會導致故障或受傷。

**起火注意**

請勿投入火中、加熱、高溫或高壓下充電、使用或存放。

本產品包含可充電電池。否則可能會導致發熱、著火或爆炸。

**警告****務必遵守**

如果機身跌下或損壞，請立即關閉電源並拔除電源插頭，並務必尋求維修和檢查。

否則可能有火災或觸電的危險。

**禁止拆解**

請勿自行拆解維修或改裝。

否則可能會導致起火、觸電或身體受傷。

如需維修，請聯絡當地經銷商。

**拔除插頭**

如果感覺到地震、閃電或打雷，請關閉電源並拔除電源插頭。

可能有火災或觸電的危險。

**禁止**

請使用專用的充電器。

否則可能會導致觸電、短路或火災。

**禁止使用
延長線**

請勿使用超過額定容量的電源插座或延長接線 (不要使用電源拖板)。

否則可能會導致觸電、短路、火災或故障。

**禁止使用
已損壞電
線或插頭**

請勿使用已損壞充電插頭或鬆動的插座。

否則可能會導致觸電、短路、火災或故障。
請與當地的經銷商查詢有關維修事宜。

**拔除插頭**

拔除電源插頭時，請手握插頭前端拔出。(避免接觸金屬部件。)

請勿以沾濕的雙手拔除或插入插座。

否則可能會導致觸電、短路、火災或故障。

**拔除插頭**

使用後、閒置或清潔時，請務必關閉電源並從插座上拔下電源插頭。

充電完成後，從插座上拔下充電器，否則可能會導致火災或意外。

**禁止
不當使用**

請勿損壞、加工、捆綁、扭曲或以其他方式對充電插頭施力。

否則可能會導致電線斷裂，從而引起火災或觸電。
存放前先處理電源線中的紐結。

**務必遵守**

只可連接100~240伏特交流電使用。插入電源插頭時，必須確認完全插入。

不遵守可能會導致火災、觸電或其他事故。



注意



禁止

請不要用力按壓或集中於一個部位使用。
用力按壓或集中在一個部位使用可能會損害皮膚。



禁止

請勿在駕駛時使用。
否則可能會導致意外受傷。



禁止

請勿連續使用COOL模式。
連續使用COOL模式，護理頭不能完全冷卻。
兩次護理之間至少間隔30分鐘。



務必遵守

首次使用時僅使用強度1，直到習慣使用為止。
即使感覺不到任何刺激，也只需對強度級別進行小幅調整。請使用合適的強度使用本機。
請逐步調整強度級別進行護理，否則可能會導致事故或受傷。



禁止

請勿在通電狀態下讓本機與其他美容設備或電器產品接觸。請勿與其他電子產品(電熱毯、墊布、被爐等)一起使用。

否則可能會因錯誤操作而導致意外。



禁止

請勿將本機放置於淋浴或水龍頭的高水壓下，也不要將其浸入水中。

主機防水等級 (IPX4)。請勿故意將水濺到主機上，本機不能承受來自淋浴或水龍頭的高水壓，也不能浸沒在水中，否則可能會導致機件故障。



務必遵守

請仔細檢查皮膚在護理期間是否出現任何異常。如開始感到疼痛、疲勞或在使用過程中發現任何皮膚問題，請立即停止使用。

如果護理不適合皮膚，請立即停止使用。如翌日及症狀持續，請諮詢醫生。



注意



禁止

請勿直視LED燈。使用LED燈護理上眼瞼、下眼瞼和眼尾時，務必閉上眼睛，讓電極頭距離皮膚至少5厘米。

否則可能會對眼睛或皮膚造成傷害。



務必遵守

如正在接受牙科治療或正在補牙，請選擇較低強度級別並將本機使用於其他的部位。

於臉頰或下顎使用EMS，可能會感到強烈的刺激或不適。如感到強烈不適，請諮詢醫生。



務必遵守

避免在同一部位使用超過14分鐘。

再次在同一部位使用時，請務必間隔24小時或更長時間。過度使用可能會損傷皮膚。以上建議僅供參考，請觀察皮膚狀況並相應地使用設備。



拔除插頭

如果發生電源故障，請立即關閉電源並將充電插頭從電源插座拔出。

否則可能會導致意外。

警告



務必遵守

請務必使用100~240伏特交流電以避免發生火災或觸電。

否則可能會導致起火、觸電或故障。



起火注意


使用前請務必確認插頭形狀及電壓後才使用。

否則可能會導致機身發熱、起火或故障。

● 插頭形狀、電壓可能會因地區及住宿地而有所不同。使用前請先進行確認。

● 關於電源插頭及插頭的轉換，請向經銷商查詢。


● 主機

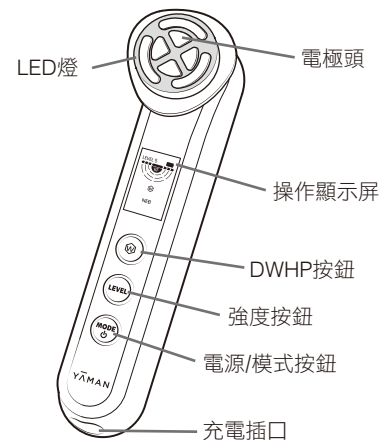

[配件]

● 化妝棉固定扣 (銀環)

※購買時，化妝棉固定扣已裝配在電極頭上。
※可將化妝棉固定在電極頭上。

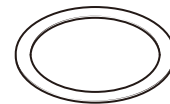


● 充電器

※主機及配件的設計和規格以提升品質為前提而進行更改，恕不另行通知。

操作顯示屏

● 顯示屏及按鈕

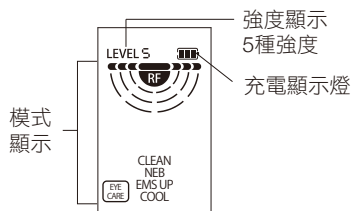

- 長按電源/模式按鈕約3秒開啟電源 (自動進入CLEAN模式開始護理)
- 在操作過程中可以短按電源/模式按鈕變更護理模式。
- CLEAN、NEB、EMS UP和EYE CARE模式均可選擇護理強度。每種模式都有5個強度級別，可以用強度按鈕進行調整。
- 在NEB模式下使用時，按DWHP按鈕可開啟或關閉DWHP。
- 長按電源/模式按鈕約3秒關閉電源。

● 模式顯示

每次按電源/模式按鈕，將按以下順序切換護理模式：

CLEAN → NEB → EMS UP → EYE CARE → COOL → CLEAN (重複)

模式	CLEAN 清潔	NEB (使用DWHP按鈕切換)		EMS UP 微電流	EYE CARE 眼部護理	COOL 冰感
		↔				
		DWHP關閉	DWHP開啟			
功能	RF射頻/ 離子導出	RF/DYHP/ LED (紅光/橙光)	RF/DYHP/ DWHP/LED (紅光/橙光)	EMS / LED (紅光)	RF射頻/ 微電流/ 眼部專用EMS	冰感/ LED(藍光)
模式顯示	LEVEL 5 RF CLEAN	LEVEL 5 RF NEB	LEVEL 5 RF NEB DWHP	LEVEL 5 RF EMS UP	LEVEL 5 RF EYE CARE	LEVEL 5 RF COOL

※在CLEAN模式下，RF和離子交替輸出。顯示時輸出RF，不顯示時輸出離子。NEB / EYE CARE模式下，顯示或不顯示與實際RF射頻輸出無關。

● 強度顯示

首次使用時請使用強度1，直至習慣使用為止。

一共有5個級別，請選擇覺得舒適的強度。

每次按下強度按鈕，強度都會變更。

● 用戶記憶功能

本產品會保存前一次護理模式及結束時使用的強度，並在下次開啟時設置相同的強度。

● 充電顯示

根據充電電量，3格的顯示燈會依序亮起/閃爍。


無線使用時：亮燈

充電使用時：熄滅

充電中：閃爍

充電完成後，充電顯示燈會長亮。

※無線使用時，如果電池電量不足，主機會發出“嗶嗶嗶”3聲提示音，充電顯示燈會閃爍3次並關閉電源。

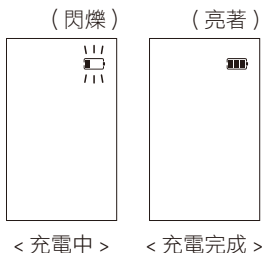

● 提醒功能

當模式的設置時間已過一半時，將聽到“嗶”聲提示。

提示您該轉換護理另一側臉頰。

● 待機狀態

CLEAN / NEB / EMS UP / EYE CARE模式結束後，會進入下一個模式的待機狀態※

下一個模式標示會開始閃爍。模式之間的待機時間約為5分鐘。

※當按下電源/模式按鈕時，將啟動下一個待機中模式。

※如果下一個模式未於5分鐘內啟動。本機會於2次“嗶”聲後自動關機。

● 自動關機

如本機未於5分鐘內操作，會進入待機模式，並會在2次“嗶”聲後自動關機。

COOL模式結束後，本機會在2次“嗶”聲後自動關機。

● 溫度感應

當皮膚或電極頭溫度升高時，因安全理由，將自動調低能量輸出。

如果溫度過高，會在10次“嗶”聲後關閉電源以確保安全。

如發生以上情況，請讓主機休息約30分鐘。

● 電流感應

監控及控制電流的輸出。

● 動作感應

當電極頭連續使用於同一部位時，動作傳感器會檢測主機的移動狀態，並為安全起見暫停能量輸出。

當主機的移動減慢時，動作傳感器可能會降低溫度。

● 防水功能

本產品具有防濺功能，可暴露在水花飛濺中，但不能承受來自淋浴或水龍頭的強烈沖擊，也不能浸沒在水中。本產品不可在洗澡時使用。建議使用時請小心。

·本產品防水等級符合JIS標準的IPX4。

·充電器不防水。

皮膚測試

※首次使用本機或護膚品時，請務必測試適應性。

1 清潔皮膚。

·用肥皂和水清洗手臂內側，然後用毛巾擦乾。

·使用本機時，請除下所有金屬產品（手錶、項鍊、戒指、耳環等），否則可能會導致事故或受傷。

2 在手臂內側塗抹水或護膚品 (爽膚水和保濕精華)，然後使用 NEB (DWHP ON) 模式護理3分鐘。

·測試後，請不要沾濕或摩擦測試部位。

如果在24小時內在測試部位出現任何皮膚異常（發紅或發燙），請停止使用本機。



注意

·使用本產品前必需進行測試，以防止出現皮膚問題。

·如測試部位出現皮疹、發紅、發癢、刺痛或其他異常，請立即停止測試並清洗該部位。

·如發現任何皮膚異常，請勿使用本產品。

充電方法

本產品為充電式，使用時可無需接駁充電線，或將充電線連接到插座即可使用。
當沒有連接充電線時使用，請務必先進行充電。

- 首次使用前或長時間未使用本機，請先將電池充滿，並確保充電指示燈已從閃爍變為長亮，表示已經充滿電。
- 確保充電插頭插口上沒有沾濕。
否則可能會導致觸電、短路、火災或機件故障。

● 充電時間

充電時間	操作時間
約3小時	約30分鐘

- * 充電時請保持在室溫約25°C。
- * 此為充滿電後的操作時間。
- * 操作時間可能因操作模式、操作強度或操作環境而異。
- * 實際充電時間會因剩餘電量和充電環境而異。

● 充電方法

- 1 將充電插頭插入主機底部的充電插口中。
- 2 將充電插頭插入電源插座。
 - 本產品只可使用附設的專用充電插頭。
 - 將充電插頭直接插入牆上插座。請勿使用延長線或拖板。
 - 充電開始時，充電顯示燈將閃爍。充電完成後，充電顯示燈會長亮。
- 3 充電完成後，將充電插頭從牆上電源插座拔出，然後從主機上拔除充電線。

護理模式

模式	功能	化妝棉	操作時間	強度	使用頻率
CLEAN	· RF · 離子導出	使用化妝棉	約3分鐘	5級	每週2-3次
NEB (使用DWHP 按鈕切換開關)	DWHP OFF · RF · DYHP · LED (紅光/橙光)	隨意	約3分鐘	5級	每週2-3次
	DWHP ON · RF · DYHP · DWHP · LED (紅光/橙光)			5級	
EMS UP	· EMS · LED (紅光)	無需化妝棉	約3分鐘	5級	
EYE CARE	· RF · 微電流 · 眼部專用EMS	隨意	約2分鐘	5級	每週5次
COOL	· COOL · LED (藍光)	無需化妝棉	約3分鐘	不適用	可每天使用


- 請務必在皮膚上滑動使用 (EYE CARE和COOL模式除外)。
- 如果連續使用冷卻模式護理，電極頭部不會完全冷卻，兩次護理之間至少相隔30分鐘。

洗臉後，請按照以下指示順序使用產品。



把化妝棉裝在電極頭上

1 從電極頭上取出化妝棉固定扣。

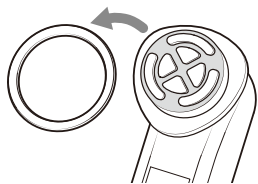

2 將化妝棉放在電極頭面，然後將固定扣向下壓在化妝棉上。

※如化妝棉固定扣難以固定在電極頭上，請使用更大更薄的化妝棉。因為厚的化妝棉將難以固定到位，所以請在使用前將它們分成一半。

※如化妝棉太厚，RF射頻護理的溫感可能受到影響，會感覺不到熱力。

3 使用爽膚水或保濕精華潤濕化妝棉。

※確保爽膚水或保濕精華完全塗滿電極頭的整個表面。

※如使用水性（清爽型）乳液，溫熱感可能會降低。

推薦護膚乳液：高效保濕抗衰老乳液。

※每次使用後，請務必用乾布徹底擦去機身上殘留的乳液或保濕精華。

基本使用方法

● 注意事項

- 請務必在皮膚上滑動使用。持續貼於一個部位，可能會導致灼傷。
- RF的溫感會根據所用護膚品類型和護理時的皮膚狀況而有變化。
- 請勿用於上眼瞼（COOL模式除外）、下眼瞼或眼尾（EYE CARE模式和COOL模式除外）。
 - ※LED燈可用於上眼瞼、下眼瞼和眼尾。閉上眼睛，讓主機與眼睛保持至少5厘米的距離。請勿直視LED燈。
- 請勿直視LED燈。
- 建議的環境溫度為15°C至30°C。
- 使用本機時，請除下所有金屬物件（手錶、項鍊、戒指、耳環等），否則可能會導致事故或受傷。
- 每次使用時請仔細清潔本機與皮膚接觸的部分，並保持機身清潔，否則可能會導致皮膚問題。

● 護理方法

1 卸妝清潔面部

※在臉上使用前，請務必先卸妝。如在化妝狀態下使用，粉底可能會導致皮膚變黑。

· 先去除皮膚上的油脂和污垢，確保皮膚處於清潔狀態。

※COOL模式可用於化妝後。

2 如有需要，請先裝上化妝棉，再塗上潤膚乳液。

※請務必更換CLEAN模式中使用的化妝棉。

3 長按電源/模式按鈕約3秒啟動電源。選擇模式和強度。

· 使用電源/模式按鈕選擇模式。

· 使用強度按鈕選擇強度級別。

※首次使用時請使用強度1，直到習慣使用為止。

4 將電極面輕輕貼於皮膚，並移到需要護理的部位上。有關詳細說明，請參閱第17-19頁。

· 在各個模式結束後會啟動待機模式（約5分鐘），當按下電源/模式按鈕時，會啟動下一個模式。

※使用過程中，請確保電極頭確切地接觸皮膚。

5 長按電源/模式按鈕約3秒關閉電源。

※COOL模式結束後，電源將自動關閉。

6 護理後，請按個人需要修護皮膚。

· 請按個人需要塗上護膚品。

※每次使用後，請參閱“護理後”（第20頁）並清潔殘留在主機上的皮脂、精華液和其他污垢。

若未能及時清潔可能會導致機件故障或皮膚問題。


皮膚上的護理方法



將電極頭沿下圖箭咀方向在皮膚上滑動。

- 在護理過程中，請適當地添加護膚品或水，以確保電極頭和皮膚間有足夠水分。如果護膚品或水量不足，刺激傳導會減弱，或導致皮膚問題。

<CLEAN / NEB 模式>

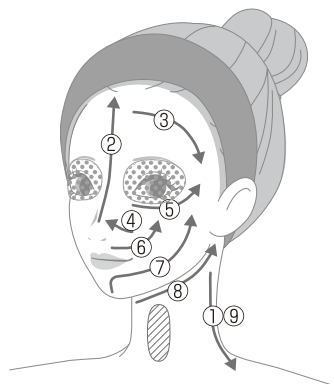- 如感覺溫度太高，請加快滑動電極頭，或可以使用化妝棉來降低溫度。
- 請確保電極頭的表面可完全接觸到皮膚。
- 使用時，請確保在皮膚上滑動。持續貼於一個部位，可能會導致灼傷或低溫灼傷。
- 請不要將電極頭放於上眼瞼、下眼瞼或眼尾部位。




-  不應進行護理的部位
-  只能使用LED燈護理的部位
(使用方法請參閱第19頁)
※閉上眼睛，讓本機距離皮膚至少5厘米。


建議滑動的速度：2厘米/秒




<EMS UP 模式>

如果感到皮膚有刺痛感，請降低強度或移動到其他部位。
在使用本機前，可以用水、爽膚水或保潔精華潤濕皮膚。
否則可能會導致皮膚受傷。

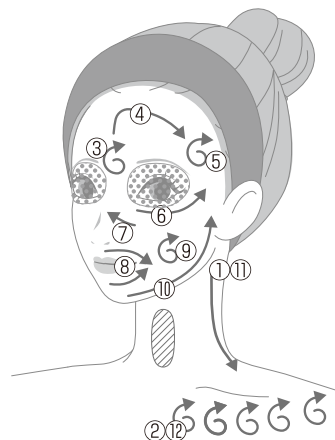


 如箭頭所示動作，打圈滑動按摩。


-  只能使用LED燈護理的部位
(使用方法請參閱第19頁)
※閉上眼睛，讓本機距離皮膚至少5厘米。



<EYE CARE 模式>

用電極頭以點按方式從眼角到眼尾方向，以(按壓→放開→移動)步驟反覆進行護理。
※請確保不要連續按壓皮膚超過3秒。
※按壓時請勿移動本機。

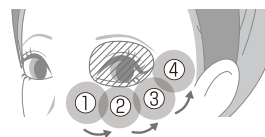

-  不應進行護理的部位：上眼瞼
※下眼瞼和眼尾可以護理。

建議按壓時間：每個部位約3秒



如感覺眼周範圍特別乾燥而需要護理，建議使用EYE CARE模式，每邊約2分鐘(共4分鐘)。

<COOL 模式>

用電極頭以點按方式(按壓→放開→移動)反覆進行護理。

※本機也可用於下眼瞼和眼尾。



●使用NEB、EMS UP或COOL模式，以LED燈護理上眼瞼、下眼瞼和眼尾。

使用LED燈時，請取出化妝棉，閉上眼睛，讓本機距離皮膚至少5厘米。



※每次使用時，請仔細清潔與皮膚接觸的部分，並時刻保持主機清潔，否則可能會導致皮膚問題。

● 清潔及保養

- 1 確保電源已關閉並從主機上拔除充電插頭。
- 2 清潔護理頭和化妝棉固定扣時，請用擰乾的濕布擦拭以去除污垢，並用水清洗化妝棉固定扣。
 - 從主機上取下化妝棉固定扣，在擦乾之前用水清洗。
 - 請勿使用酒精、稀釋劑、汽油、洗甲水或火水等溶劑、藥品类或磨粉等擦拭主機，否則可能會損壞主機表面。
 - 使用後，請徹底擦拭剩餘的乳液和保濕啫喱，確保沒有留在主機上，否則可能會導致設備故障。
- 3 用乾布擦去電極頭和化妝棉固定扣以外的污垢。

保管方法

- 長期不使用本機時，請關閉電源並從牆壁插座拔除充電插頭及主機充電線，然後再存放。
- 避免將本機存放在暖爐附近或浴室等高溫高濕的地方。此外，請不要放置不穩的位置或陽光直射的地方。
- 將本機放在兒童接觸不到的地方。
- 清潔和保養不應由兒童在沒有監督的情況下進行。

保養及檢查

- 如長期未使用，使用前請務必先確認本產品是否正常、安全地運作後再使用。
- 如果本機出現故障，請檢查“排除故障”(第21-22頁)並在安排維修前嘗試確認問題。
- 如果本機出現故障、損壞或需要維修，請聯繫當地經銷商。

排除故障

檢查項目

狀況	可能的成因及解決方法
無法開機。	<ul style="list-style-type: none"> → 長按電源/模式按鈕約3秒以開啟電源 (第16頁)。 → 電量不足。請充電 (第13頁) 或連接充電線使用。
充電後，仍只能運作數分鐘。	<ul style="list-style-type: none"> → 電量不足。請充電 (第13頁) 或連接充電線使用。 → 充電電池可能已達到其使用壽命 (大約充電次數為300次)。請諮詢當地的經銷商或環球售後服務部 (https://www.ya-man.co.jp/en/support/repair/)。* 請勿嘗試自行更換電池，否則可能導致故障。 → 可能按下錯誤的按鈕。長按電源/模式按鈕約3秒可再次開啟電源 (第16頁)。 → 處於待機或自動關機狀態 (第11頁)。按下電源/模式按鈕。 → 如在低溫下使用，電源可能會立即關閉。請連接充電線使用。
電源關閉。	<ul style="list-style-type: none"> → 如在關機前聽到3聲長嗶聲，則電池電量不足。請充電 (第13頁) 或連接充電線使用本機。 → 如本機長時間處於低溫狀態，可能會自行關閉。建議將其置於環境溫度15°C至30°C一段時間後檢查充電狀態並重試。
無法充電 (充電顯示燈沒閃爍)。	<ul style="list-style-type: none"> → 充電插頭未有充分插入主機。請將充電插頭充分插入 (第13頁)。 → 將充電插頭直接插入牆壁插座，並在電源關閉狀態下同時按下強度按鈕和電源/模式按鈕 (重置)。
主機發熱。	<ul style="list-style-type: none"> → 正在連續使用，請關閉本機並等待至少30分鐘，然後再使用。

狀況

可能的成因及解決方法

COOL模式沒有冰感。	<ul style="list-style-type: none"> → 正在持續使用COOL模式，關閉主機並等待至少30分鐘後再次使用。 → 環境溫度已超過建議範圍。請在15°C至30°C的溫度範圍內使用。
EMS引起不舒服的刺痛或疼痛。	<ul style="list-style-type: none"> → 使用強度按鈕降低強度。 → 電極頭沒有完全接觸皮膚。請使用鏡子檢查，確保整個電極頭表面接觸到皮膚。
EMS感覺弱，或完全感覺不到。	<ul style="list-style-type: none"> → 使用強度按鈕增加強度。 → 皮膚乾燥或缺乏水分。請用爽膚水或保濕精華潤濕皮膚。 → 電極頭沒有貼於肌肉上。請使用鏡子確認是否沿著肌肉移動本機(第18頁)。 → 電量不足。請充電(第13頁)或連接充電線使用。
護理溫度過高 (除COOL模式)。	<ul style="list-style-type: none"> → 電極頭持續使用在同一位置的皮膚上。除COOL模式外，使用時請務必將電極頭在皮膚上滑動。 → 電極頭移動太慢。請稍微加快移動速度。 → 熱力會因使用的護膚品或有無化妝棉而感覺不同。如感覺太熱，請嘗試以下方法： <ul style="list-style-type: none"> · 不使用化妝棉。 · 更換使用的護膚品。
感覺不到RF的溫熱。	<ul style="list-style-type: none"> → 處於待機或自動關機狀態(第11頁)。關閉電源後再啟動，或按電源/模式按鈕重啟模式。 → 皮膚乾燥或缺乏水分。請用爽膚水或保濕精華潤濕皮膚。 → 電極頭移動太快，請稍微減慢移動速度。
無法調節強度。	<ul style="list-style-type: none"> → 在COOL模式下不能調節強度級別。
無法操作。	<ul style="list-style-type: none"> → 同時按下強度按鈕和電源/模式按鈕 (重置)。

常見問題

Q	A
每次應使用多少爽膚水或保濕精華？	本產通過使用爽膚水和保濕精華來獲得更好效果。一般來說，使用化妝棉時，請確保將整個電極頭完全潤濕。 請使用約兩粒珍珠大小份量的保濕精華。 如感覺份量不足，建議補充爽膚水或保濕精華。
可在洗澡時使用嗎？另外，可用水清洗主機嗎？	本產品不可在洗澡時（浴室、浴缸）使用。 主機的防水等級符合JIS標準的IPX4，表示可以承受水花飛濺，但不能承受來自淋浴和水龍頭的強烈沖擊，也不能浸沒在水中。請勿用水清洗主機，否則可能會導致機件故障。只有化妝棉固定扣可單獨用水清洗。
CLEAN、NEB或EYE CARE模式時，無法感覺溫感？	請減慢移動電極頭的速度或加強按壓皮膚表面。 此外，也可能是化妝棉上的水分不足，請補充爽膚水或保濕精華。
在化妝棉上看不到任何污垢？	本機可導出眼睛難以看見的污垢。化妝棉上的可見污垢狀態因人而異。
可以在面膜上使用嗎？	本機可在面膜上使用（清潔模式除外）。建議配合NEB模式使用。

● 充電電池

本產品包含不可更換的電池。

- 充電電池屬耗用品（不屬於保用範圍內）。
- 充電後的操作時間變短，表示電池壽命可能快將結束。電池大約可以充電300次。
- 請聯絡當地經銷商或諮詢環球售後服務部
(<https://www.ya-man.co.jp/en/support/repair/>) 以更換電池。

● 棄置

- 請遵照當地政府規定棄置產品。
- 本產品使用鋰離子蓄電池。
有關電池處理的信息，請參閱以下棄置電池及取出電池的指引。

< 棄置電池 >

本產品採用鋰電池，是可以回收的寶貴資源。

- 電池在棄置前必須從主機中取出。
- 在取出電池之前，請務必關閉電源並拔出充電器。
- 使用螺絲刀拆除電池，請小心避免受傷。
- 取出電池時，請注意不要讓硬物損壞電池。
※否則可能會導致過熱和火災。
- 請遵守當地政府規定，妥善處理或回收本產品。

● 正確棄置本產品

此標記表示在英國和歐盟範圍內，該產品不應與其他家庭垃圾一起棄置處理。為防止不法的廢物棄置可能對環境或人類健康造成危害，請負起回收廢物以促進材料資源的可持續再利用的責任。要退回使用過的產品，請使用回收和收集系統或聯繫購買產品的零售商。他們可以將此產品用作安全環境回收。



Li-ion




<取出電池>


操作步驟 請參考下圖①至④步驟取出電池。

①使用扁平工具拆除後蓋板。


※後蓋板以強力膠固定著

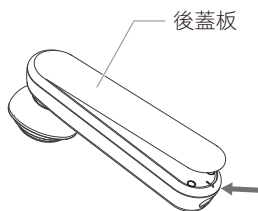

②拆除內蓋板上的6個橡膠塞和螺絲。

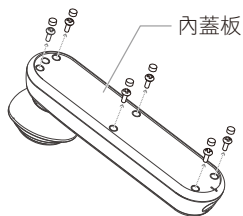


③拆下內蓋板，並從連接器中拔除電線。

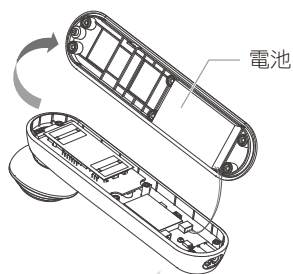

❗ 請勿剪斷電線。

④用尺子等扁平工具拆出電池。

※以強力膠固定著

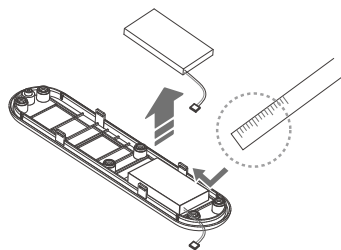

❗ 請注意避免損壞電池



⚠ 上圖用於產品廢棄時處理，不適用於維修。
請注意，自行拆除本產品可能會導致故障。

● 產品規格

額 定 輸 入	DC9V 2.0A
功 率	約18W (充電時)
電 池	鋰離子電池
充 電 時 間	大約3小時 (可能因充電環境而異)
外 形 尺 寸	主機 (連化妝棉固定扣): 約W52 x D62 x H203 (mm)
產 品 重 量	主機 (連化妝棉固定扣): 約293克
材 質	主機: ABS樹脂 顯示板: 聚碳酸酯和丙烯酸樹脂 電極頭: PET樹脂和不銹鋼 主機金屬部件: ABS樹脂 (鍍蒸鍍)
生 產 地	日本
配 件	化妝棉固定扣、充電器
建 議 環 境 溫 度	15°C ~ 30°C
防 水 級 別	符合JIS標準的IPX4級保護