

**RIORES**<sup>®</sup>

品番：dr-shot-tiny-black

品番：dr-shot-tiny-white


品番：dr-shot-tiny-gold

VIBRATION GUN

# Dr.SHOT *Tiny*

バイブレーションガン | ドクターショット タイニー

取扱説明書

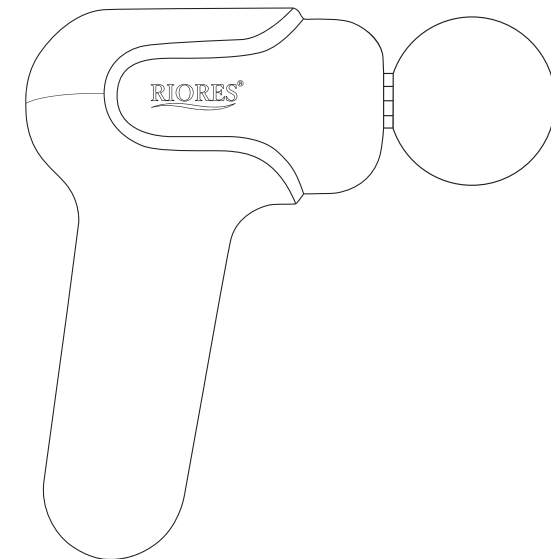

 **SOMA FACTORY**

発売元：株式会社そうまファクトリー

〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町7-1川崎日進町ビルディング10F

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

安全に使用していただくためにも、必ずこの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。

また、読み終えた取扱説明書は大切に保管してください。

# 1 使用上の注意

取扱説明書及び警告・危険・注意に関する全ての内容をよく読んで正しく使用してください。

## 警告

お取扱いを誤った場合、使用者または周囲が巻き込まれ**死亡**または**重傷**を負う恐れがあることを示します。

●下記に該当する方は使用しないでください。症状を悪化させる恐れがあります。

医師からマッサージを禁じられている人

(例) 血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など

- 本来の目的以外で本製品を使用しないでください。
- 付属の充電用USBケーブル以外は使用しないでください。
- 付属の交換用ヘッドパーツ以外を取り付けて使用しないでください。
- 本製品において発生した事故、損害などの責任は一切負いかねます。ご了承ください。

## 危険

お取扱いを誤った場合、使用者または周囲が巻き込まれ**死亡**または**重傷**を負う恐れがあり、かつその度合いが高い場合の事を指します。

- 使用前に取扱説明書をよく読み、本製品を正しく使用してください。
- 定められた使用時間を超えて使用しないでください。
  - ・同一の部位はおおむね3分以内(部位と振動レベルによる)
  - ・1回の使用時間は20分以内
- 一度使用した後は30分以上間隔を空け、連続での使用はしないでください。
- 頭・首・心臓・性器周りには使用しないでください。
- 下記に該当する方は、医師にご相談の上使用してください。

●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性腫瘍のある人●心臓に障害のある人●妊娠初期の不安定期又は出産直後の人●糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人●骨粗しょう(鬆)症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなどの急性[とう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人又は背骨が左右に曲がっている人●その他医療機関で治療中の人●けんしょう(腱鞘)炎の人

- お子様やペットには使用しないでください。
- 自分で意思表示のできない人、身体の不自由な人や自分で操作できない人には使用させないでください。
- 布団やこたつの中、毛布などをかぶせての使用はおやめください。
- 火気の近くや高温多湿な場所で使用・保管をしないでください。
- 車を運転中に使用しないでください。

## 注意

お取扱いを誤った場合、使用者または周囲が怪我等を負う、または物的損害の発生の恐れがあることを示します。

- 他の治療器と同時に使用しないでください。
- 水をかけたり濡れた手で触れないでください。
- 落下させるなど強い衝撃を与えないでください。
- 分解・修理・改造は絶対に行わないでください。
- アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤は使用しないでください。
- 10~45℃の環境で使用・保管してください。それ以上または以下の環境ではバッテリー機能が低下する恐れがあります。
- 本製品は家庭用に屋内使用を想定して設計されていますのでご注意ください。
- パソコンやテレビなどでの充電は規格によって合わない場合があります。コンセントからの充電を推奨します。




充電時のUSB電源アダプターは**DC5V、2A**のものを使用してください。また、必ず**付属のUSBケーブル**を使用してください。急速充電のタイプや、推奨している規格以上の電力を充電すると過充電が起き、不具合が発生する恐れがありますのでご注意ください。

## 2 製品仕様


※商品の仕様や外見は予告なく変更となる場合がございます。

サイズ	約165×101×57mm
重量	約387g ※ヘッドパーツ除く
素材	本体:ABS樹脂、ポリカーボネート      ヘッドパーツ:ABS樹脂、EVA
本体電源	リチウムイオン二次電池(7.2V、2000mAh)
定格入力	DC5V、2A
充電時間	約3.5時間
振動回数	約1500~2900回
生産国	中国

## 3 梱包品

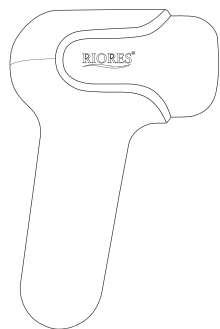

本体

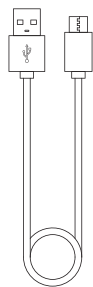


USBケーブル  
(USB Type-C)



取扱説明書  
(本書)

### 交換用ヘッドパーツ各種

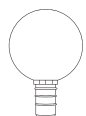


丸型



平型




円柱型

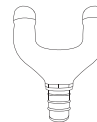


フォーク型

## 4 パーツ名称

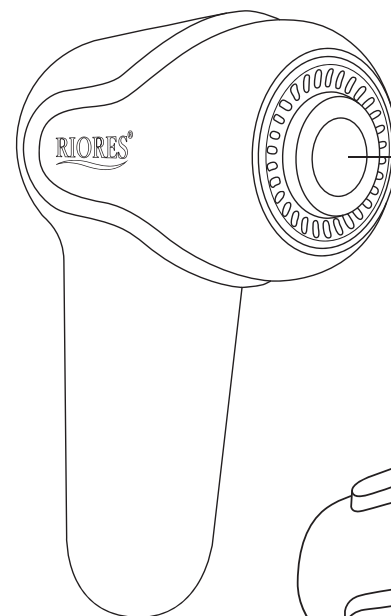

振動ヘッド部

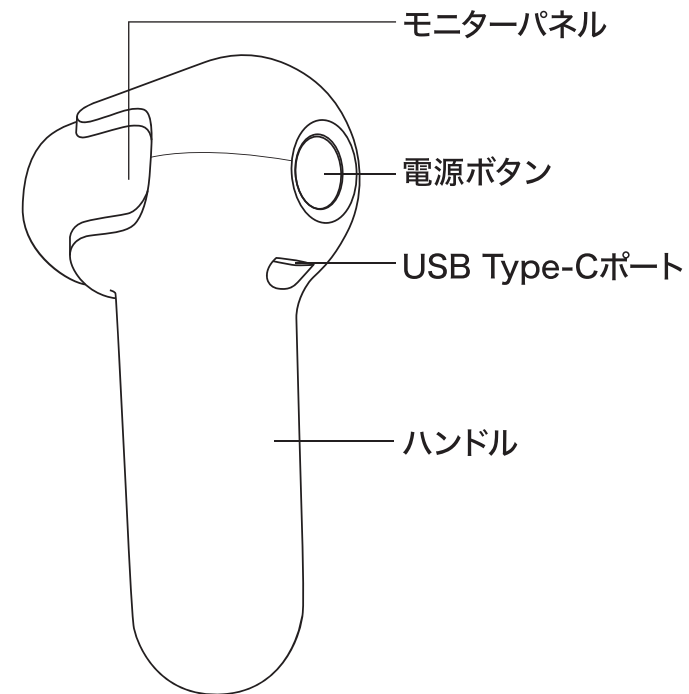

モニターパネル


電源ボタン

USB Type-Cポート

ハンドル


※USB電源アダプターは付属していません。

## 交換用ヘッドパーツ各種

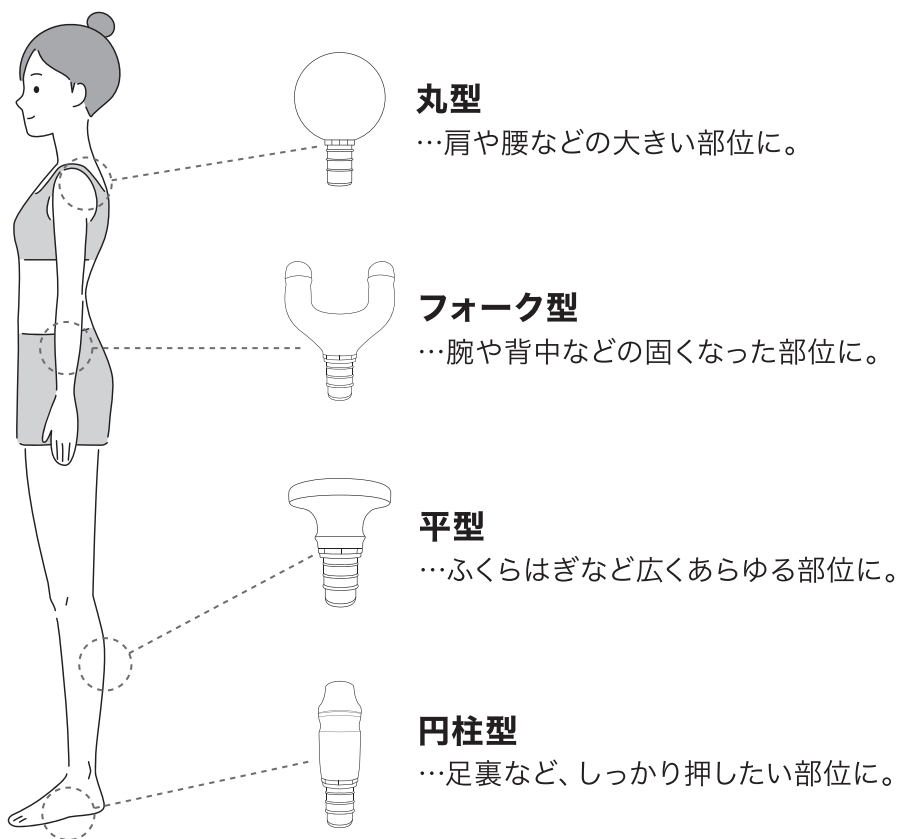


※使用部位に関してはあくまで参考です。お好みで使用してください。

## 5 モニター表示

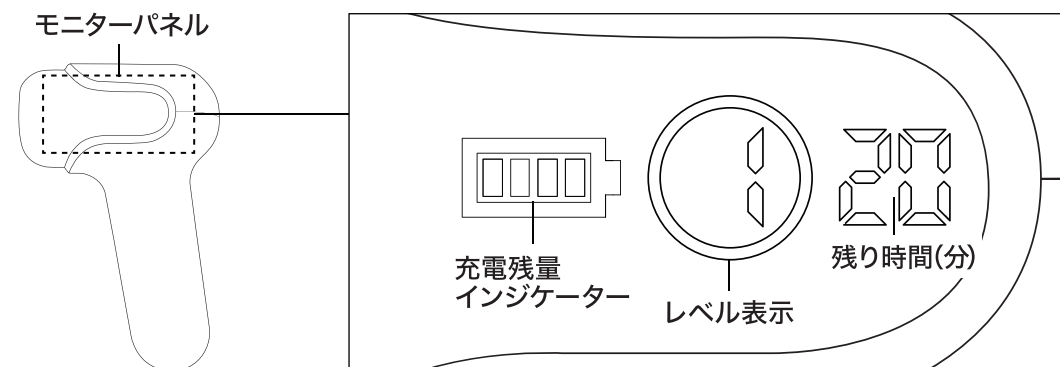


## 6 ヘッドパーツの交換方法

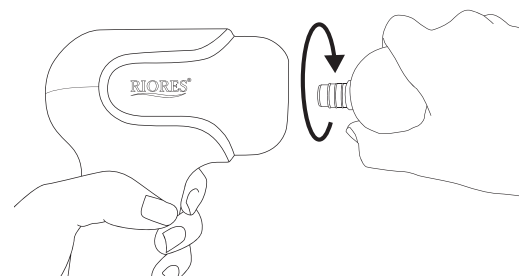

### ■取り外し方法

電源をオフにした状態でヘッド部分をしっかり持ち、少し捻りながら引き抜いてください。

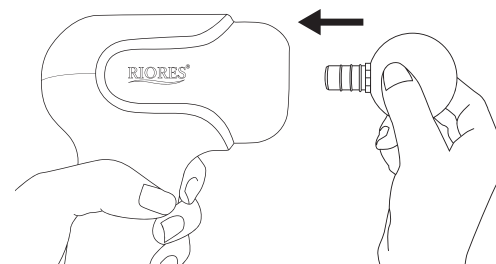


### ■取り付け方法


電源をオフにした状態で、本体の振動ヘッド部に交換用ヘッドパーツを取り付けます。根元までしっかりと差し込んで取り付けてください。

## 7 充電方法


初めてのご使用時またはモニターの充電残量インジケータが点滅した際は、電源をオフにし充電を行ってください。

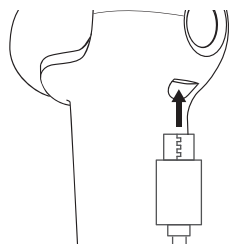

- ① 電源ボタンの下部にあるUSBポートに付属のUSBケーブルのType-Cプラグをカチッと音が鳴るまでしっかりと奥まで差し込んでください。

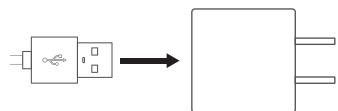

- ② USBプラグをお持ちのUSB電源アダプターに差し込み、コンセントに接続してください。

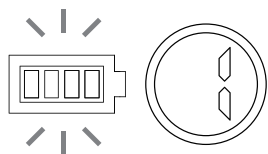


- ③ 充電が開始され、モニターパネルの充電残量インジケータが点滅します。全てのインジケータが点灯に切り替わったら充電完了です。  
※充電中は電源ボタンを押しても起動しません。



- 充電の際はUSB電源アダプターとケーブルが一体型の充電器の使用はせず、必ず付属のUSBケーブルを使用してください。
- お持ちのUSB電源アダプターで充電できない場合は別のアダプターをお試しください。
- 急速充電のタイプや、推奨している規格以上の電力を充電すると過充電が起き、不具合が発生する恐れがありますのでご注意ください。
- USB電源アダプターの規格によっては充電時間が異なります。

## 8 使用方法

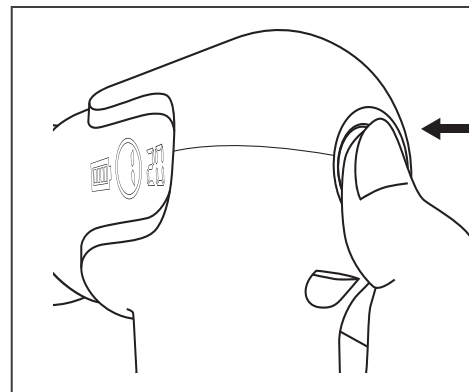

### ■電源オン/オフ

電源ボタンを約2秒間押し続ける（長押しする）と、電源がオン・オフになります。

- ① 電源をオンにするとレベル1から振動を開始します。
- ② 振動中に電源ボタンを押すと振動レベルが上がります。お好みのレベルを選択してください。
- ③ 電源をオンにしてから約20分後に自動的に電源はオフになります。

レベル1	約1500回/分
レベル2	約1700回/分
レベル3	約2000回/分
レベル4	約2300回/分
レベル5	約2600回/分
レベル6	約2900回/分

※振動レベルや残り時間はモニターパネルを参照してください。

フル充電で20分を最大約24回使用可能ですが、振動レベルや部位に押し当てる力加減、使用頻度によって異なります。



- 一度使用した後は30分以上間隔を空け、連続での使用はしないでください。

