


SH-0070

取扱説明書

- 安全のために
- 付属品・各部の名称
- 基本の使い方
- 使い終わったら
- 保証と機器について
- トラブル Q&A

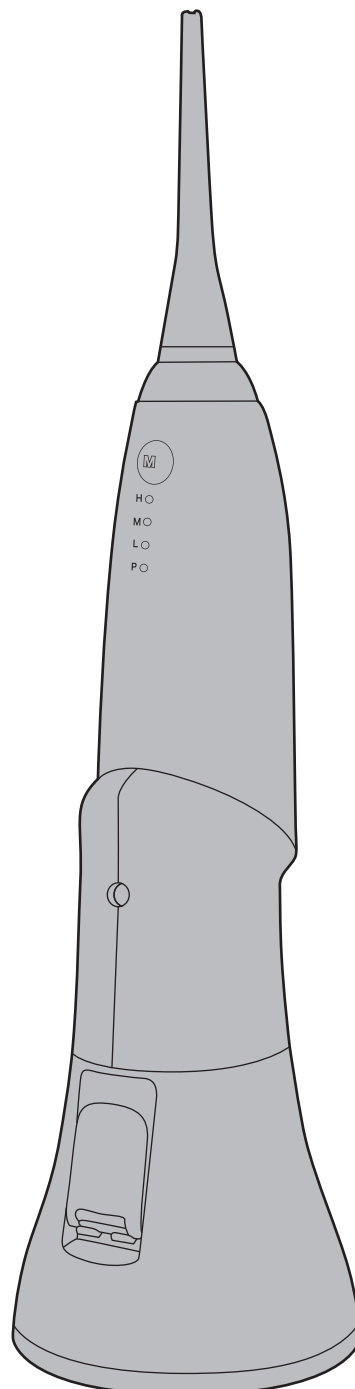

安全のために

最初に水通しをしてください。

水通しをすることでご使用いただけるようになります。

10分以上連続してのご使用はお控えください。

長時間連続して使用すると発熱し、性能に異常をきたすことがございます。

自分で操作ができない方には使用させないでください。

- ・子どもの手の届くところには置かないでください。
- ・口腔洗浄機以外の目的では使用しないでください。
(目や鼻、のどに使用すると怪我の原因となります。)

機器に異常を感じたら使用を中止してください。

本体が異常に熱い、焦げ臭いにおいがするなど、異常を感じたら使用を中止し、販売元までご連絡ください。

乾燥させてから保管してください。

使用後は本体やタンクに残った水をしっかり出し切ったら拭き上げを行い、乾燥させてから保管してください。

水に沈めないでください。

機器本体を水に沈めた状態で使用すると浸水し故障する可能性があります。

水道水かぬるま湯以外では使用しないでください。

ドライヤーやその他乾燥器具を使用しての乾燥はしないでください。

改造、分解はしないでください。

リチウムイオン電池製品の注意事項

本製品はリチウムイオン電池を使用しております。使用方法を守ってご使用ください。

アダプターの出力は2A以下のものをご使用ください。

OUTPUT 5V/2A以下のものをご使用ください。出力が高いものを使用すると故障の可能性があります。

ご使用をやめた場合は処分してください。

長時間使用せず放置すると電池が劣化して膨張することがあります。使用をやめた場合は保管せずに処分してください。

USBケーブルに異常がある場合は使用しないでください。

- ・変形、発熱、外観異常がみられるUSBケーブルは使用しないでください。
- ・充電ケーブル差し込み口に水をかけたり、濡れた状態で充電すると故障や事故の原因となりますので、しっかり水分を拭き取ってから充電してください。


高温環境での使用、充電、保管はしないでください。

高温環境でのご使用は故障の可能性がありますのでしないでください。

本体に強い衝撃を与えないようご注意ください。

強い衝撃を与えると、故障や事故の原因となりますのでご注意ください。

付属品を確認する

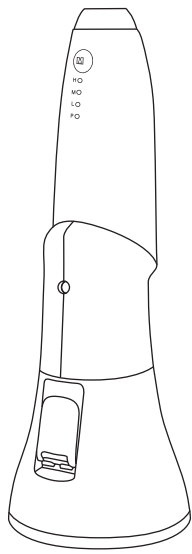

本体




ストレートノズル



アングルノズル





ネックノズル

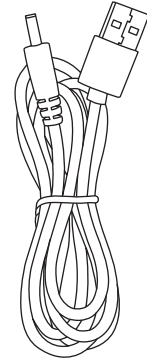

充電ケーブル


各部の名称

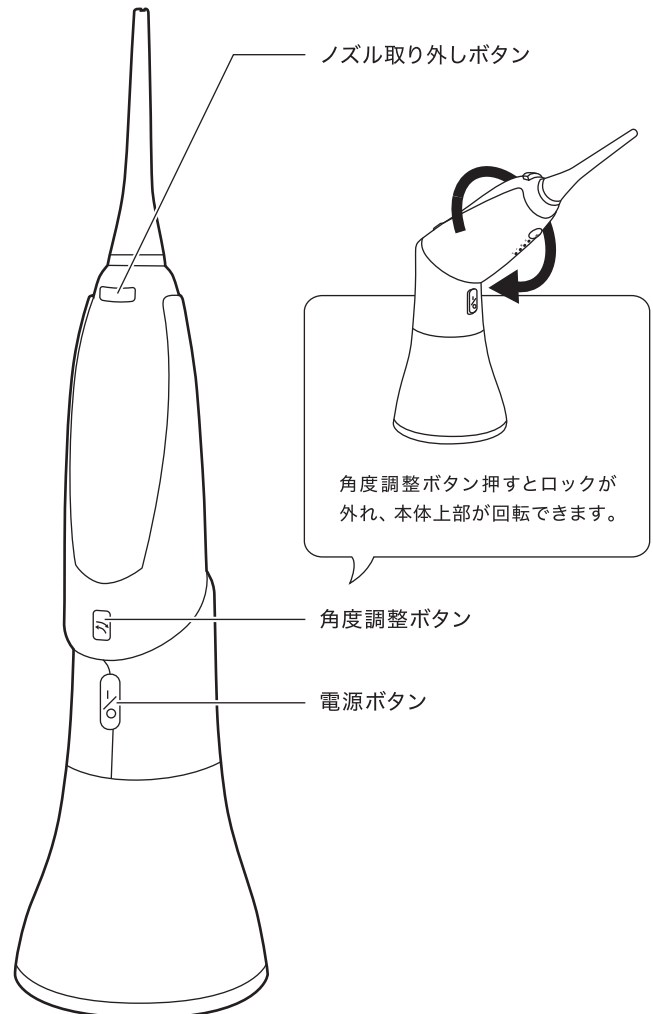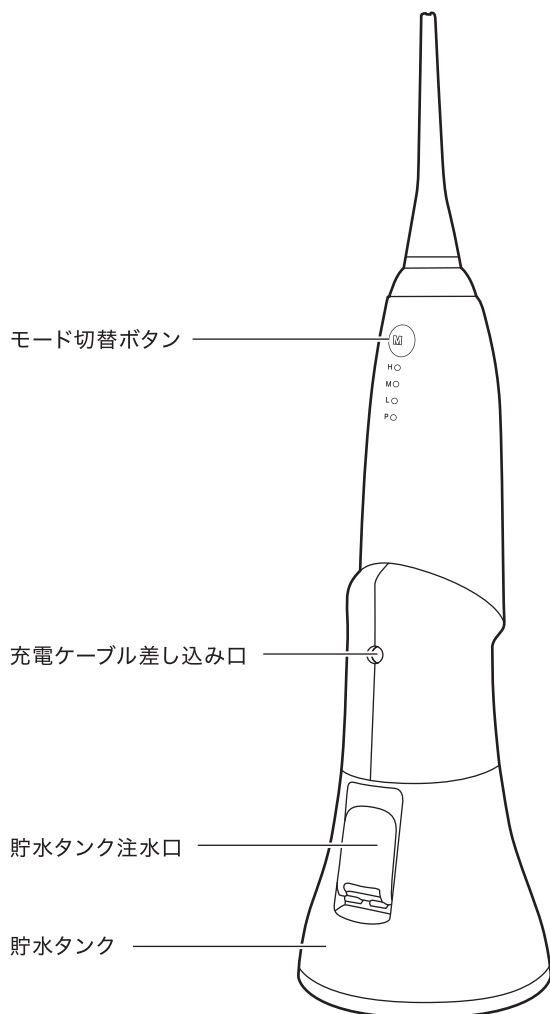

基本の使い方


1 ノズルを取り付ける

「カチッ」と音がするまで、ノズルをしっかりと差し込みます。

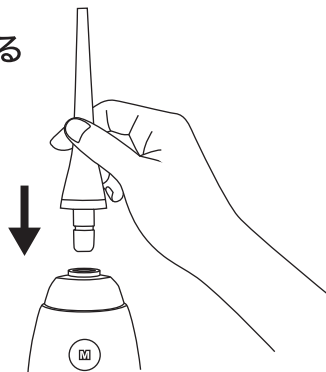

2 タンクに水を入れる


注水口のフタを開けて水を入れます。水を入れたらしっかりとフタを閉めてください。

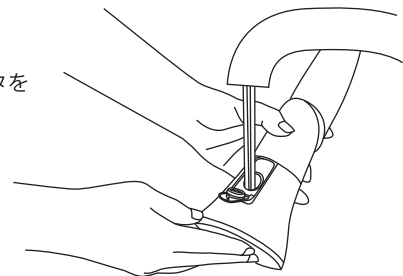

3 水圧を選んで試運転をする

モード切替ボタンを押すと選択した水圧レベルが切り替わります。お好みの水圧を選んで、洗面所や洗面器に試し運転をして強さを確認します。

H	High	強力な水流で頑固な汚れを洗浄します。
M	Medium	ノーマルモードでしっかり歯の洗浄ができます。
L	Low	初めての方や歯や歯茎が敏感な方におすすめです。
P	Pulse	水流が一定のリズムで発射され、歯茎のマッサージにもおすすめです。

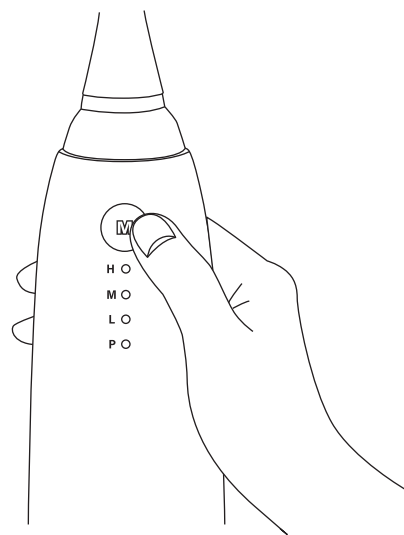

30秒お知らせタイマー機能

どのモードでも30秒おきに一瞬ストップし、1ヶ所へ水流の当てすぎ防止に役立ちます。

チャイルドロック機能

モード切替ボタンを約7秒押し続けるとチャイルドロックモードが設定されます。

4 お口の中に入れて電源を ON にする


- ①お口にノズルを入れます。
 - ②口を軽く閉じます。
 - ③電源ボタンを「ON」にします。
- ※スイッチを押すと「OFF」になります。

ノズルを口から出す際は先に「OFF」の状態にして口から出してください。




洗浄の POINT

歯と歯の間・歯と歯ぐきの間に沿って水流を当てます。表と裏の両面から水流を当てるとさらにキレイにできます。

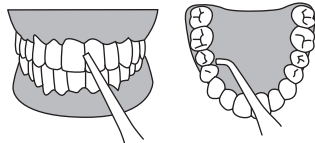


5 使い終わったら電源を OFF にしてノズルを口から出す

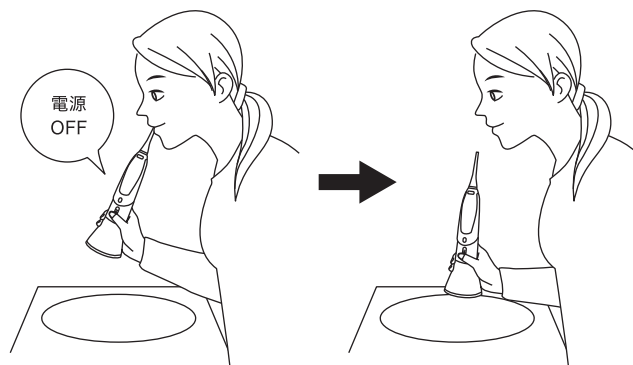


- ノズルは消耗品です。3か月を目安に交換してください。
- 使用時間をお知らせするために、30秒ごとに一瞬停止します。

ノズルの種類と最適な洗浄部位

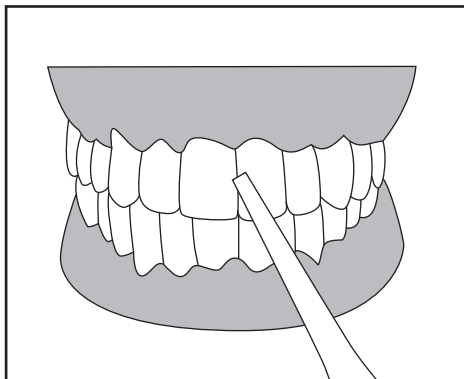


ストレートノズル

まっすぐストレートな形状で、前歯の洗浄に最適なノズルです。

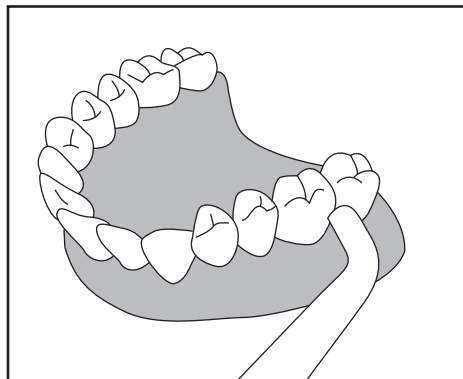

アングルノズル

先端が少し曲がった形状で、奥歯などのお手入れしづらい部分に届きやすいノズルです。

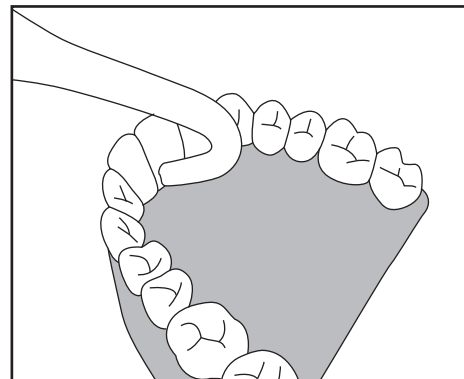


ネックノズル

先端が大きくカーブした形状で、前歯の裏などのお手入れしづらい部分に届きやすいノズルです。

使い終わったら

1 ノズルを外す

ノズルを外す際は本体とノズルを軽く拭き、ノズル取り外しボタンを押した状態で本体の上部分をしっかりと持ってノズルを上へ引っ張ってください。

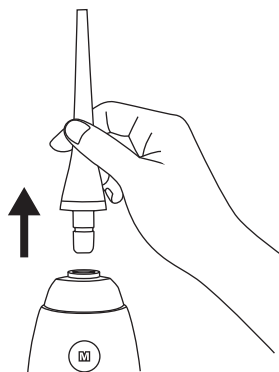

2 本体やタンクに残っている水を抜き取る


使用後は本体やタンクに水がない状態で電源を ON にして、残った水を出し切ってください。

3 本体の水気を拭き取る

本体全体の水気を拭き取ってください。充電部分は濡れたままにすると錆びたり、事故の原因となりますのでしっかり水気を拭き取ってください。

4 タンクを外して乾燥

タンクを外して乾燥させてください。水気が残っているとカビの繁殖の原因となります。

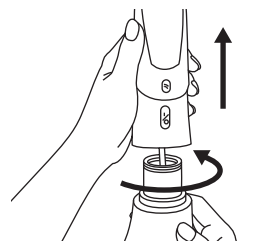

タンクは反時計回りに回すと取り外せます



タンクはフタを開けた状態で上図のように乾燥させてください

5 充電について

充電する際は充電ケーブルを本体にしっかり差し込んでください。電池残量が少ないとランプが点滅します。充電が完了するとランプが点灯します。

過充電防止機能について

ランプ点灯時は電気の流れを止めています。充電ケーブルをつないだままでも問題ありません。

※充電しながらのご使用はできません。故障や事故が発生する可能性があるため、充電中にボタンを押すなどの操作はしないでください。

保証について

初期不良または自然故障があった場合、製品が到着してから保証期間内であれば返金・交換の保証対象となりますので、お問い合わせ先にご連絡ください。保証期間を過ぎてしまった場合は対応致しかねます。ご了承ください。

保証期間	1年間 ※付属品は欠損、機能不良等の初期不良のみ		
製品到着年月日	年	月	日
お問い合わせ先	【店舗で購入されたお客様】 ご購入された販売店へご連絡ください。		【インターネット等で購入されたお客様】 注文番号と店舗名を控え、 ご購入された販売店へご連絡ください。

トラブル Q&A

水が出ない

長期間使用していない場合は水通しを行ってください。

電源が入らない

- 機器を再充電してください。
- USBアダプターを確認し、出力が2A以下かご確認ください。
- 出力が2Aより高いものを使用されると、過電流により故障の原因となります。

※ バッテリーが少なくなるとモード表示の4つのLEDライトが順番に点灯しはじめます。残量が無くなると保護機能が働き自動的に電源が切れます。

機器について

サイズ	24.3×8.6cm(ノズル含まず)
重量	260g
貯水量	260ml
充電時間(約)	3時間
使用時間(約)	30分
防水性能	IPX7
製造国	中国



発売元: 株式会社そうまファクトリー

〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町7-1川崎日進町ビルディング10F

問い合わせ先: info@soma-factory.jp