


SH-0149

取扱説明書

- 安全のために
- 付属品・各部の名称
- 基本の使い方
- 使い終わったら
- 保証と機器について
- トラブル Q&A

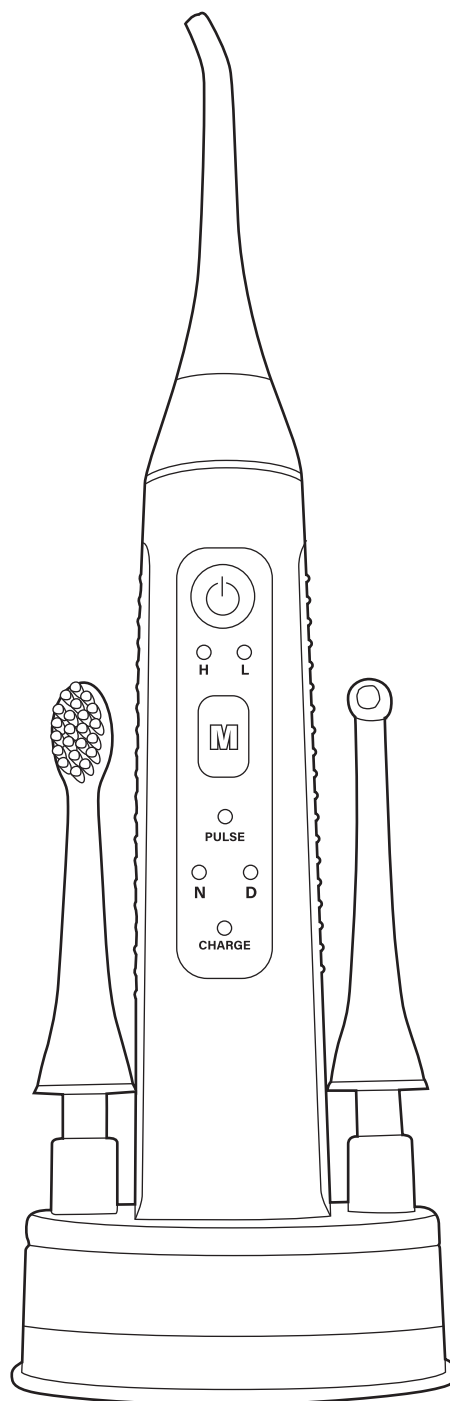

-
- ・本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 - ・ご使用前にこの取扱説明書、特に安全上の注意部分を必ずお読みください。

安全のために

最初に水通しをしてください。

水通しをすることでご使用いただけるようになります。

10分以上連続してのご使用はお控えください。

長時間連続して使用すると発熱し、性能に異常をきたす場合がございます。

自分で操作ができない方には使用させないでください。

- ・子どもの手の届くところには置かないでください。
- ・口腔洗浄機以外の目的では使用しないでください。
(目や鼻、のどに使用すると怪我の原因となります。)

機器に異常を感じたら使用を中止してください。

本体が異常に熱い、焦げ臭いにおいがするなど、異常を感じたら使用を中止し、販売元までご連絡ください。

乾燥させてから保管してください。

使用後は本体に残った水をしっかり出し切ったら拭き上げを行い、乾燥させてから保管してください。

水に沈めないでください。

機器本体を水に沈めた状態で使用すると浸水し故障する可能性があります。

水道水かぬるま湯以外では使用しないでください。

ドライヤーやその他乾燥器具を使用しての乾燥はしないでください。

改造、分解はしないでください。

リチウムイオン電池製品の注意事項

本製品はリチウムイオン電池を使用しております。使用方法を守ってご使用ください。

アダプターの出力は2A以下のものをご使用ください。

OUTPUT 5V/2A 以下のものをご使用ください。出力が高いものを使用すると故障の可能性があります。

ご使用をやめた場合は処分してください。

長時間使用せず放置すると電池が劣化して膨張することがあります。使用をやめた場合は保管せずに処分してください。

USBケーブルに異常がある場合は使用しないでください。

- ・変形、発熱、外観異常がみられるUSBケーブルは使用しないでください。
- ・充電ケーブル差し込み口に水をかけたり、濡れた状態で充電すると故障や事故の原因となりますので、しっかり水分を拭き取ってから充電してください。


高温環境での使用、充電、保管はしないでください。

高温環境でのご使用は故障の可能性がありますのでしないでください。

本体に強い衝撃を与えないようご注意ください。

強い衝撃を与えると、故障や事故の原因となりますのでご注意ください。

付属品を確認する

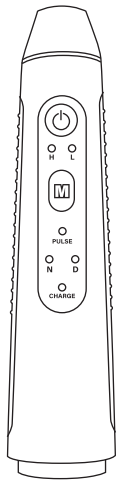

本体



フロス
ノズル




タン
ノズル




電動
歯ブラシ



コンパクト
ブラシ

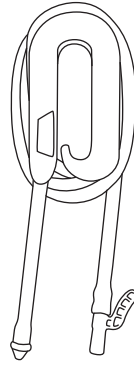


ホース

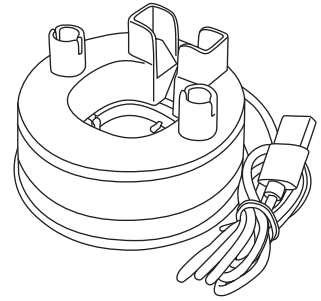

充電スタンド

各部の名称

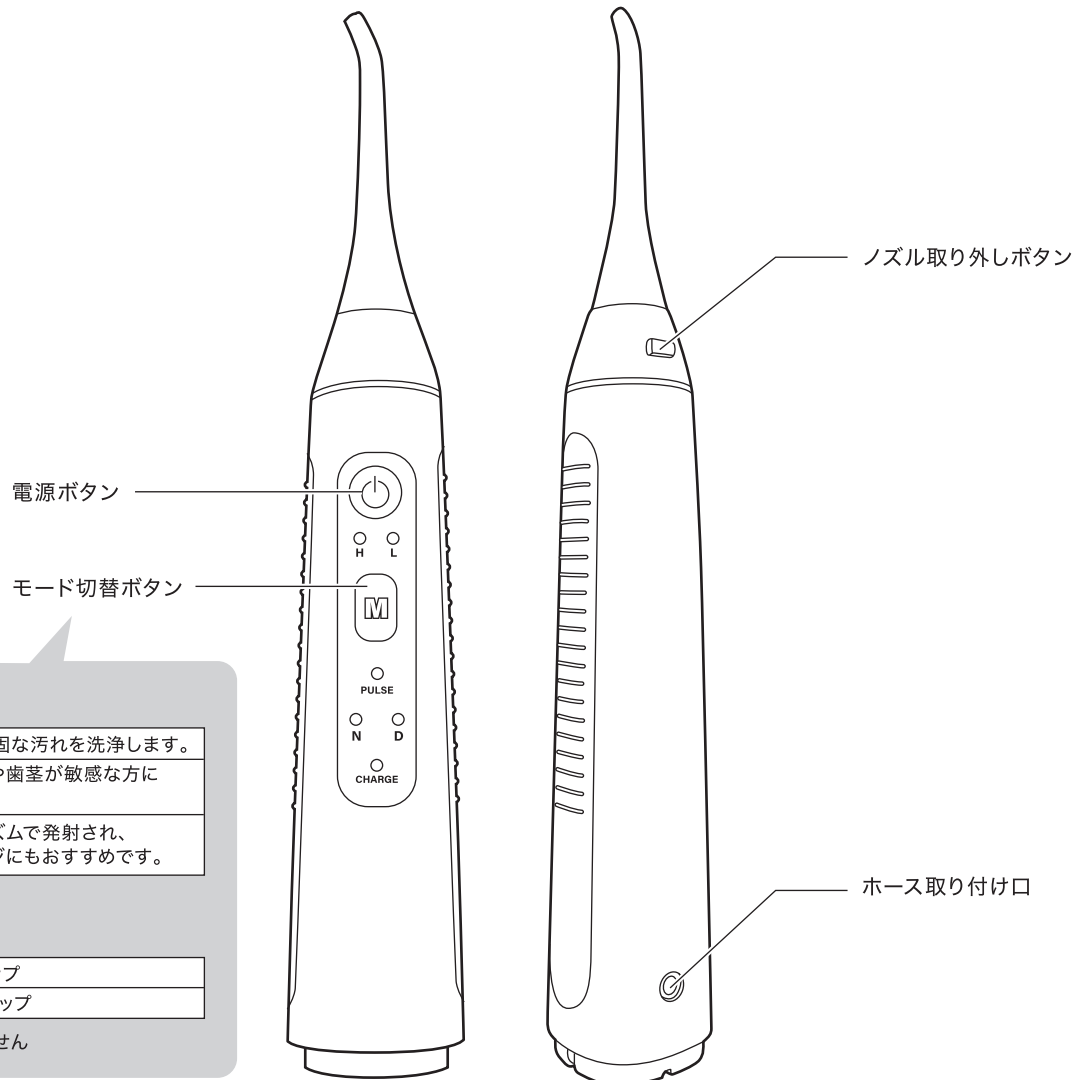

短押しで水圧レベル切替

H	High	強力な水流で頑固な汚れを洗浄します。
L	Low	初めての方や歯や歯茎が敏感な方におすすめです。
P	Pulse	水流が一定のリズムで発射され、歯茎のマッサージにもおすすめです。

長押しでオフタイマー切替


N	Normal	60秒でストップ
D	Deep	150秒でストップ

※オフタイマーの解除はできません

基本の使い方 - フロスノズル -

1 ノズルを取り付ける


「カチッ」と音がするまで、ノズルをしっかりと差し込みます。

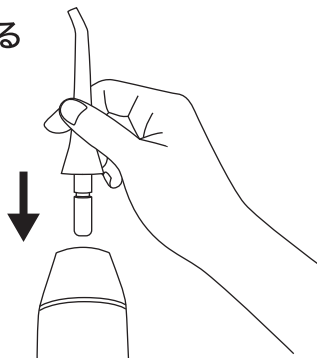

2 コップに水を入れる


3 コップにホースを固定させる

水を入れたコップにホースを差し込んでクリップで固定します。

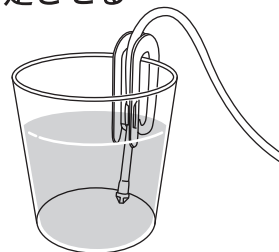

4 本体にホースを取り付ける

本体にホースをしっかりと差し込みます。

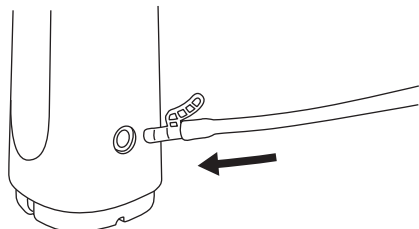

5 水圧を選んで試し運転する

好みの水圧を選んで、洗面所や洗面器に試し運転をして強さを確認します。

H	High	強力な水流で頑固な汚れを洗浄します。
L	Low	初めての方や歯や歯茎が敏感な方におすすめです。
P	Pulse	水流が一定のリズムで発射され、歯茎のマッサージにもおすすめです。

30秒お知らせタイマー機能

どのモードでも30秒おきに一瞬ストップし、1ヶ所へ水流の当てすぎ防止に役立ちます。

6 お口の中に入れて電源を ON にする


- ①お口にノズルを入れます。
 - ②口を軽く閉じます。
 - ③電源スイッチを「ON」にします。
- ※スイッチを押すと「OFF」になります。

ノズルを口から出す際は先に「OFF」の状態にして口から出してください。




洗浄の POINT

歯と歯の間・歯と歯ぐきの間に沿って水流を当てます。表と裏の両面から水流を当てるとさらにキレイにできます。

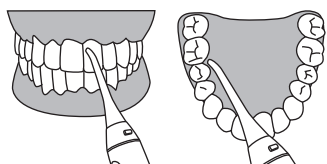

7 使い終わったら電源を OFF にしてノズルを口から出す

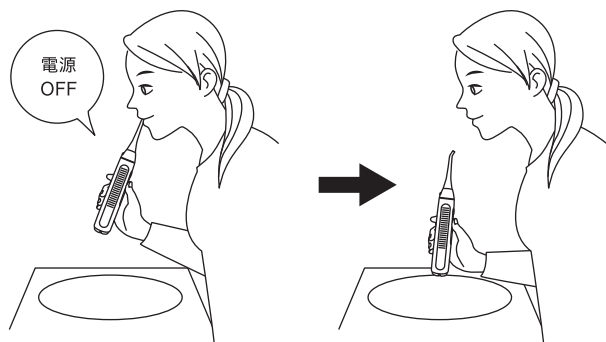


- フロスノズルは消耗品です。3か月を目安に交換してください。
- 使用時間をお知らせするために、30秒ごとに一瞬停止します。

基本の使い方 - タンノズル -

1 ノズルを取り付ける

「カチッ」と音がするまで、ノズルをしっかりと差し込みます。ノズルが正面を向くように差し込んでください。

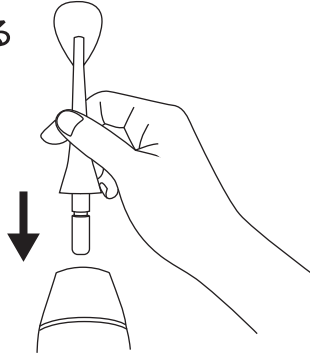

2 水圧を調整する

ご使用になる前に電源をONにして水圧を確認します。

3 お口に入れてお掃除する

舌の上にあてがい、約 30 秒を目安に前方後方と動かしながらかお掃除していきます。


ノズルを口から出す際は先に「OFF」の状態にして口から出してください。

- タンノズルは消耗品です。
2～3か月を目安に交換してください。
- 使用時間をお知らせするために、30秒ごとに一瞬停止します。

基本の使い方 - 電動歯ブラシ -

1 ブラシを取り付ける

「カチッ」と音がするまで、ブラシをしっかりと差し込みます。ブラシが正面を向くように差し込んでください。

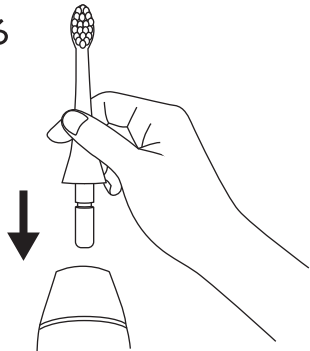

2 振動数を確認する

ご使用になる前に電源をONにして振動の強さを確認します。

H	High	高速
L	Low	低速
P	Pulse	リズム

3 お口に入れてブラッシングする

上の歯の左と右、下の歯の左と右に分けて使用

- ・ 歯の表側
- ・ 歯の噛み合わせ面
- ・ 歯の裏側


1ヶ所につき約 30 秒を目安に磨きます。

- 電動歯ブラシは消耗品です。
1～2か月を目安に交換してください。
- 使用時間をお知らせするために、30秒ごとに一瞬停止します。
- 電動歯ブラシから水は出ません。

基本の使い方 - コンパクトブラシ -

1 ブラシを取り付ける

「カチッ」と音がするまで、ブラシをしっかりと差し込みます。ブラシが正面を向くように差し込んでください。

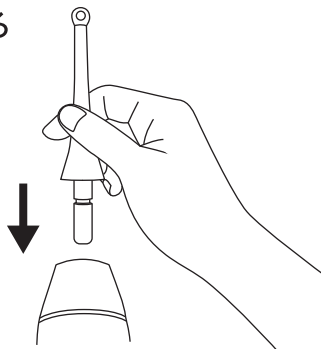

2 振動数を確認する

コンパクトブラシは低速でご使用ください。

3 お口に入れてブラッシングする

歯と歯の間、歯と歯茎の間に沿って使用します。奥歯の奥、前歯の裏など届きにくい場所もキレイにブラッシングできます。


- コンパクトブラシは消耗品です。1か月を目安に交換してください。
- 使用時間をお知らせするために、30秒ごとに一瞬停止します。
- コンパクトブラシから水は出ません。

使い終わったら

1 ノズルを外す

ノズルを外す際は本体とノズルを軽く拭き、ノズル取り外しボタンを押した状態で本体の上部分をしっかりと持ってノズルを上引っ張ってください。

※ブラシノズルを取り外す際は回さずにまっすぐ引っ張ってください。回しながら引っ張るとノズルが破損する可能性があります。

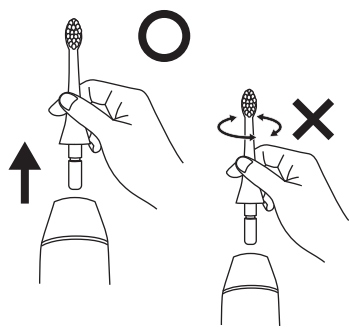

2 本体に残っている水を抜き取る

使用後はコップに水がない状態で電源ボタンをONにして、本体に残った水を出し切ってください。

3 本体の水気を拭き取る

本体全体の水気を拭き取ってください。充電部分は濡れたままにすると錆びたり、事故の原因となりますのでしっかり水気を拭き取ってください。

4 充電について

充電する際は本体をしっかりと充電台に差し込んでください。電池残量が少ないと赤ランプが点灯します。充電が完了すると緑ランプが点灯します。


過充電防止機能について

緑ランプ点灯時は電気の流れを止めています。充電ケーブルをつないだままでも問題ありません。

※充電しながらのご使用はできません。故障や事故が発生する可能性があるため、充電中にボタンを押すなどの操作はしないでください。

ホースの保管について

- ホースは抗菌性、安全性の高いシリコン素材を使用しております。
- ホースは巻いて保管してください。水を拭き上げて、クリップに巻いて保管ができます。（本体に挿したままでも充電台に挿すことができます）
- ホースは消耗品です。3ヶ月を目安に交換してください。

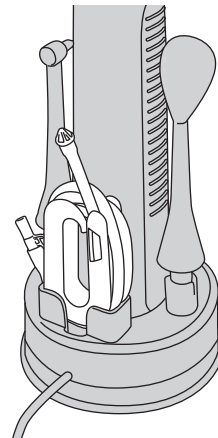

保証について

初期不良または自然故障があった場合、製品が到着してから保証期間内であれば返金・交換の保証対象となりますので、お問い合わせ先にご連絡ください。保証期間を過ぎてしまった場合は対応致しかねます。ご了承ください。

保証期間	1年間 ※付属品は欠損、機能不良等の初期不良のみ		
製品到着年月日	年	月	日
お問い合わせ先	【インターネット等で購入されたお客様】 注文番号と店舗名を控え、 ご購入された販売店へご連絡ください。		
	【店舗で購入されたお客様】 ご購入された販売店へご連絡ください。		

トラブル Q&A

水が出ない

長期間使用していない場合は水通しを行ってください。

電動歯ブラシが動かない

金属部分が汚れて、反応が悪くなっている可能性があります。ブラシの金属部分をきれいに拭いてください。それでも動かない場合は新しいブラシを使用してください。

電源が入らない

- 機器を再充電してください。
- USB アダプターを確認し、出力が2A以下かご確認ください。
※ 出力が2Aより高いものを使用されると、過電流により故障の原因となります。
- ※ 電池残量が少なくなるとCHARGE部分のLEDライトが赤く点滅します。

機器について

サイズ	19.8×3.95cm(ノズル含まず)
重量	200g
充電時間(約)	6時間
使用時間(約)	30分
防水性能	IPX7
製造国	中国



発売元: 株式会社そうまファクトリー

〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町7-1川崎日進町ビルディング10F

問い合わせ先: info@soma-factory.jp