

RIORES

品番:raviliss-lisse

Ver.2022.01

Raviliss

家庭用光脱毛器 ラヴィリス リセ

Lisse

取扱説明書



 SOMA FACTORY

発売元:株式会社そうまファクトリー

〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町7-1 川崎日進町ビルディング10F

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
安全にご使用頂く為にも、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
また、読み終えました取扱説明書は大切に保管してください。

目次

使用上の注意	P2
製品仕様	P4
梱包品	P4
パーツ名称	P5
使用前の準備	P6
肌色チャート	P7
使用方法	P8
使用後のお手入れ	P10
製品のお手入れ	P11
保管方法	P11
トラブルシューティング	P12
保証について	P14

使用上の注意

使用する前に、取扱説明書及び危険・警告・注意に関する内容をよく読んで正しく使用してください。



- 使用する際は必ず保護用メガネを装着し、目の周辺には照射しないでください。
- 照射によるフラッシュを直視、または覗き込んだり、周りの方の目や鏡・ガラスなどに向けて照射したりしないでください。



誤った取り扱いをすると、使用者または周囲の人が死亡または重症を負う恐れがあり、かつその度合いが高い場合を指します。

- 下記のような医用電子機器を使用している方は本製品を使用しないでください。

・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器 ・人工心肺など生命維持用医用電子機器 ・心電計などの装着型医用電子機器

- P7の肌色チャートをご参照いただき、使用不可のマークがある色の方、部位には使用しないでください。肌の色が濃すぎると多くの光を吸収してしまうため、熱さや痛みを感じやすい、または肌への損傷や異常を起こす場合があります。



誤った取り扱いをすると、使用者または周囲の人が死亡または重症を負う恐れが想定があることを指します。

- 本製品を本来の目的以外には使用しないでください。
- 下記に該当する方は使用を控えるか、医師にご相談の上使用してください。

- 妊娠またはその可能性のある方
- 授乳中・生理中の方
- アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、湿疹など皮膚疾患のある方
- アレルギー疾患などで皮膚が過敏な方
- 急性疾患の方、悪性腫瘍のある方
- 意思表示できない方、麻痺および知覚障害の方
- 感染症疾患の方
- 光過敏症の方
- 高血圧の方
- 糖尿病の方
- 疲労が激しい場合
- 体調が優れない場合
- 飲酒後や眠気を誘引する薬を服用している場合

- お子様や身体の不自由な方だけの使用は避けてください。未成年の方は、保護者同意の上保護者監視のもと使用してください。
- お子様の手の届く所に保管しないでください。感電や怪我の恐れがあります。
- 乳幼児やペットには使用しないでください。

●下記の部位には使用しないでください。

- | | |
|----------------|---------------------------|
| ・目元や瞼などの目の周辺部位 | ・耳周り |
| ・喉の周辺 | ・ニキビなど肌荒れのある部位 |
| ・頭部 | ・乾燥によるかゆみや日焼けなどによる炎症のある部位 |
| ・ほくろや刺青のある部位 | ・火傷や傷跡、ケロイド状の跡がある部位 |

●上記に該当しない方、部位のない方でも、ホルモンバランスや体調によって肌が過敏になったり、効果が薄れる場合があります。肌に異常が見られた場合には直ちに使用を中止し、不安な方は医師の診察を受けてください。

- 本製品使用前、使用直後は日焼け止めや制汗剤などを使用しないでください。
- 使用直後は照射面が高温になります。冷めるまで触れないでください。
- 直射日光の当たる場所、火気の近くなどでは使用・保管をしないでください。
- 保管できる環境温度は0～40℃です。それ以上・以下の場所では保管しないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。浴室などの高温多湿な場所では使用・保管をしないでください。
- 濡れた手で本製品やACアダプターに触れたり、肌が濡れた状態で使用したりしないでください。
- 通気口を塞いで使用しないでください。発煙や発火の恐れがあります。
- 衣類や髪の毛、黒い物などに照射しないでください。
- 照射面の破損など、本体に異常が見られた場合には直ちに使用を中止してください。
- ACアダプターを接続する際は、本体にACアダプタープラグを差し込んでからコンセントに接続してください。コンセントに接続した状態で本体にプラグを差し込むと、差込口から火花が発生する場合があります。
- 分解・修理・改造は絶対にしないでください。

注意

誤った取り扱いをすると、使用者または周囲の人が傷害または物損の恐れが想定されることを指します。

- 使用前は必ずムダ毛をカミソリやシェーバーなどで処理をしてください。ただし、除毛クリームや毛抜きなどは使用しないでください。
- 日焼け直後など、肌が黒くなってしまっている状態、部位には使用しないでください。
- 制汗剤や日焼け止めクリームなどを塗ったまま使用しないでください。
- ボディクリームや化粧品をつけた状態で使用しないでください。
- 照射を行わない部位であっても、指輪やブレスレットのような貴金属品等は全て外してください。
- 同じ場所に過度に照射しないでください。肌トラブルの原因となります。
- 初めて使用する際は出力レベル1から照射を始めてください。肌の状態に合わせてレベルを調節し、熱さや痛みを感じる場合はレベルを下げてください。
- 照射後は保冷剤や冷やしたタオルなどで肌をクールダウンしてください。
- 長時間使用したり出力レベル5で照射し続けると、本体が熱くなる場合がありますので、その場合は一度使用を中止してください。
- 暗い場所での使用はしないでください。

- 不安定な場所に置かないでください。本体や付属品をぶつけたり落としたりしてしまうと故障する恐れがあります。
- 本体および付属品にシンナー・ベンジン・除光液などの溶剤を使用しないでください。変色などの原因となります。
- 本製品において発生した事故、損害などの責任は一切負いかねます。ご了承ください。

製品仕様

サイズ	約165×130×70mm	照射面積	約30×10mm
重量	約215g	生産国	中国
素材	ABS樹脂		

電気的定格

【本体】

定格入力:DC12V、2A

定格消費電力:24W

【ACアダプター】


定格入力:AC100-240V、50/60Hz、0.75A

定格出力:DC12V、2A

梱包品




本体

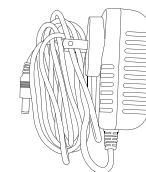

ACアダプター



保護用メガネ

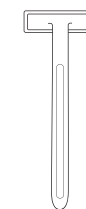


カミソリ



取扱説明書
(本書)

パーツ名称

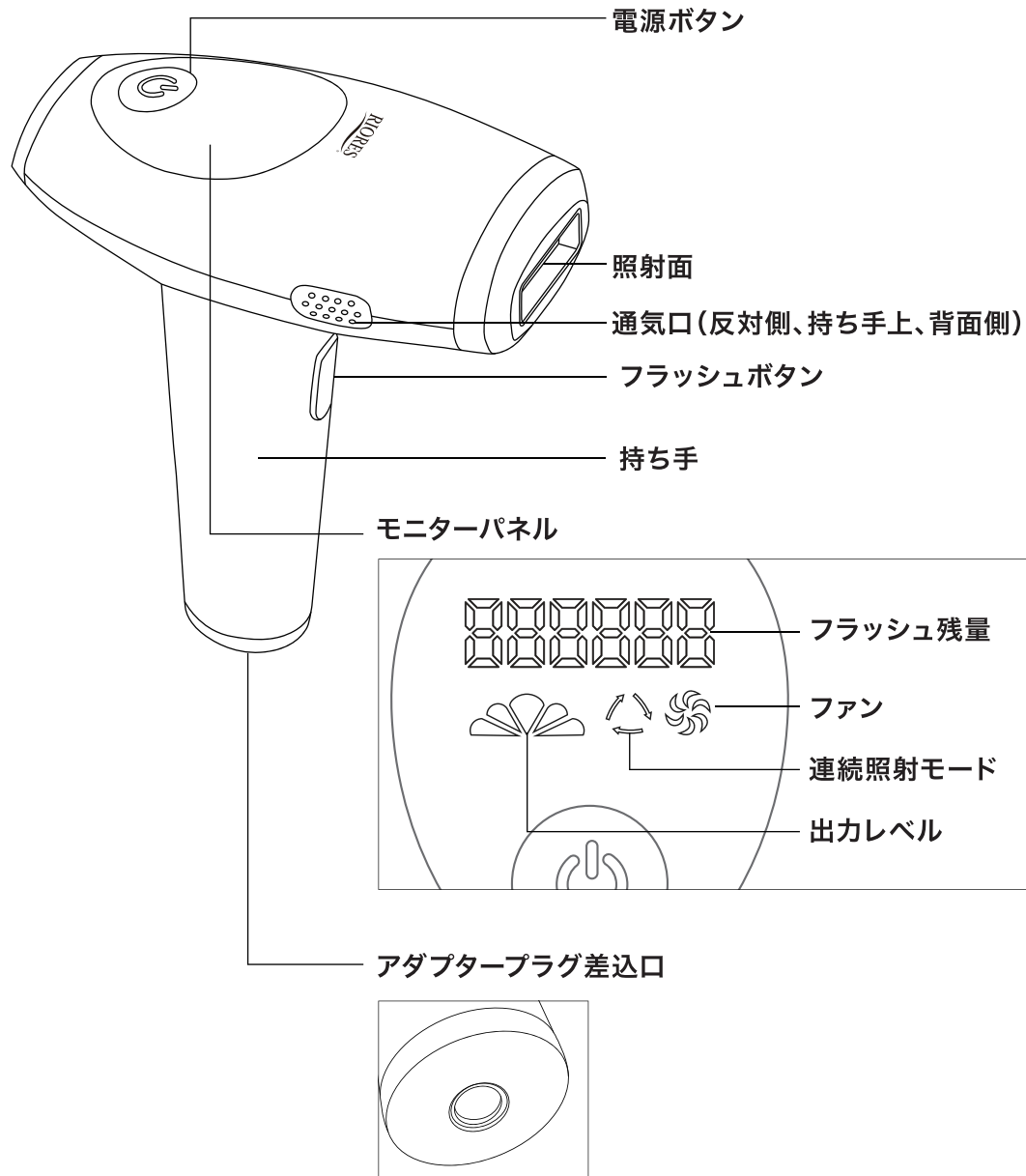

使用前の準備

カミソリやシェーバーを使用してムダ毛の処理を行い、シャワーなどで洗い流した後に清潔なタオルで水分をしっかりと拭き取ってください。ボディクリームなどは使用しないでください。

※除毛クリームや毛抜きなどでの処理はしないでください。
※日焼け止めクリームや化粧品、制汗剤、石鹸などが肌に残った状態で照射しないでください。
※事故防止のため、照射を行わない部位であっても指輪やプレスレットのような貴金属品等は全て外してください。



■照射テスト

初めて使用する、または直近で日焼けなどで肌に炎症があった場合は、照射を始める前に一部の肌でテストを行ってください。

①単発照射モードの出力レベル1で照射してください。

※使用方法についてはP8を参照してください。

②照射した部分の肌の状態を確認してください。3時間ほど経過しても肌に異常が見られなければ、全体の照射を行っていただけます。

※いきなり出力レベルを上げずに、肌の状態を見ながら1ずつレベルを上げて使用してください。

■肌色チャート

使用可能レベル




肌色

ご自身の肌をチャートに合わせていただき、実際の肌の色と比較してチャートよりも濃い色の場合は使用可能レベル以上のレベルは使用しないでください。

使用方法


- ① 本体持ち手底面にあるアダプタープラグ差込口に付属のACアダプターのプラグを差し込んでから、コンセントに接続してください。モニターパネルが3回点滅の後「OFF」と表示されます。

※コンセントに接続した状態で本体にプラグを差し込むと、差込口から火花が発生する場合があります。

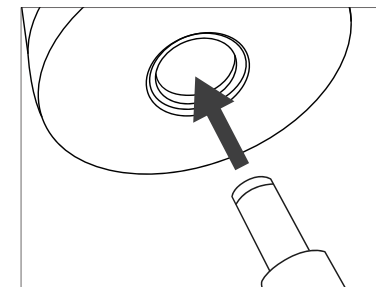


- ② 電源ボタンを約2秒以上長押しすると電源がオンになります。

※ファンの回転が開始します。

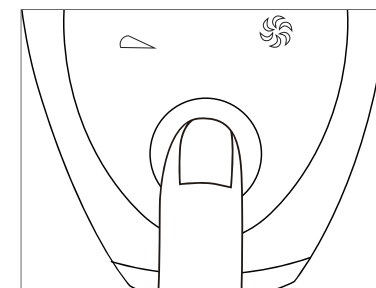

- ③ 照射を開始する前に必ず付属の保護用メガネを装着してください。

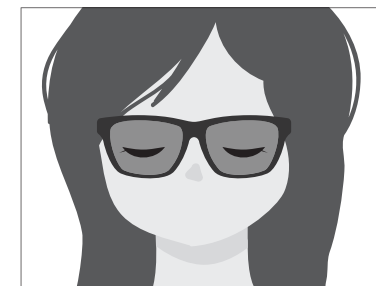

- ④ 電源ボタンを押すと出力レベルが上がり、レベル5からは下がっていきます。肌色チャートを参照し、肌の状態を確認しながらレベルを調節してください。

レベル1	
レベル2	
レベル3	
レベル4	
レベル5	

⑤照射面を肌に当てて照射を開始してください。

※照射面を直視、または覗き込んだり、目の周辺に使用したりしないでください。

※出力レベルに関わらず、1回の照射でフラッシュ残量が1つ減少します。

単発照射モード

デフォルトは単発照射モードになっています。照射面を肌に軽く当ててフラッシュボタンを1回押すと1回照射されます。

連続照射モード

フラッシュボタンを約3秒長押しすると連続照射モードになり、モニターパネルに連続照射モードのマークが表示されます。そのままフラッシュボタンを押さずに肌に当てると約2～3秒間隔で照射されます。照射面を肌に当てたままゆっくりとスライドさせてください。


※照射面が肌から離れると照射が停止します。



⑥電源ボタンを約2秒押しすと、モニターパネルに「10 s」と表示されカウントダウンが開始します。「0 s」になると電源がオフになります。

※長押ししすぎると再び電源がオンになってしまいます。「10 s」の表示になったらすぐに指を離してください。

※使用していない時間が5分以上続くと自動的に電源がオフになります。

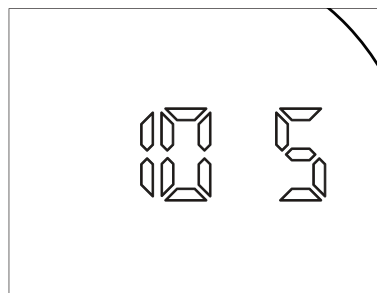

⑦照射終了後は、タオルに巻いた保冷剤や冷やしたタオルなどで肌をクールダウンさせてください。



使用後のお手入れ

照射後は、フラッシュの刺激により肌に負担がかかっている状態となっています。

- 毛穴の開きによる効果の薄れや肌への過度なダメージを防ぐため、照射後約6時間は入浴やプールなどで肌を濡らすことを避けてください。
- 化粧水などのお手入れも、最低でも1時間は時間を空けてから行ってください。
- 照射直後に制汗剤や日焼け止めクリーム、ボディクリーム、パックなどの油分の多いものは使用しないでください。
- 照射後約24時間は紫外線を浴びるのを避けてください。なるべく肌の露出を抑える、または外出を控えてください。
- 日常生活においては、肌の保湿を心掛け、日焼け止めクリームなどを使用して肌に負担がかからないようにしてください。
- 本製品を使用している期間中は、日光浴やサロンでの日焼けや、岩盤浴やサウナなどでの過度な発汗は避けてください。

■照射後の効果例

レベル	照射頻度	効果
出力レベル1	週2～3回	およそ2ヶ月後に効果の実感が得られます。
出力レベル5	週2～3回	およそ1ヶ月後に効果の実感が得られます。

※効果の実感には個人差があります。

製品のお手入れ

照射面や通気口に汚れなどが付着していると、十分な効果が得られなくなる場合があります。毎回使用後には必ずお手入れを行ってください。

- ①本体の電源がオフになっていることを確認し、ACアダプターを取り外してからお手入れを行ってください。
※使用直後は照射面が熱を持っている場合があります。冷めていることを確認してからお手入れを行ってください。
- ②照射面や通気口は乾いた柔らかい布や綿棒などで汚れや埃を優しく拭き取ってください。
※汚れが落ちにくい場合はアルコールを数滴ほど含ませてから拭き取ってください。
- ③持ち手やモニターパネル周辺は、軽く湿らせた柔らかい布で表面を優しく拭き取ってください。
※照射面、通気口、ACアダプター差込口に水分が入り込まないようにご注意ください。

●本製品は防水仕様ではありません。水洗いをしたり、直接水をかけたり浸けたりしないでください。

保管方法

- 使用しない場合は、ACアダプターを本体とコンセントから取り外して保管してください。
- 環境温度0～40℃以内の場所で保管してください。
- 火気の近くや炎天下、浴室や車内などのような高温多湿な場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 長期間使用しない場合でも、定期的にお手入れを行い正常に作動するか確認してください。

トラブルシューティング

症状	原因	解決方法
電源が入らない	ACアダプターが本体のアダプター差込口から外れている	ACアダプターを本体のACアダプター差込口に接続してください。
	ACアダプターがコンセントに接続されていない	ACアダプターをコンセントに接続してください。
	本体の故障	お問い合わせ先へご連絡ください。
電源が切れない	長押しすぎている	「10 s」と表示されたらすぐに指を離してください。(P9 使用方法⑥参照)
照射できない	照射面が肌から離れている	照射面を肌にしっかり当ててください。
	フラッシュ残量が残っていない	フラッシュ残量が0になると照射できません。
痛みが強く感じる	レベルが強すぎる	P7の肌色チャートを参照して使用可能レベル以下に下げてください。また、体調などによっても熱さや痛みを感じやすい場合があります。
	ほくろや傷跡などの部分に照射している	肌の黒い部分や皮膚の薄い部分は熱さや痛みを感じやすくなります。避けるか、白いシールなどで保護して照射してください。
照射したところが赤くなっている	レベルが強すぎる	P7の肌色チャートを参照して使用可能レベル以下に下げてください。また、体調などによっても熱さや痛みを感じやすい場合があります。
	肌がフラッシュによる熱に反応している	保冷剤や冷やしたタオルなどでクールダウンさせてください。しばらく経って赤みが消えれば問題ありません。24時間経っても赤みや痛みが消えない場合は直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。

異臭がする	照射面や通気口に埃などが付着している	電源をオフにし、乾いた柔らかい布や綿棒などで優しく拭き取ってください。
	ムダ毛の処理が完了していない	ムダ毛が残った状態で照射すると、強いフラッシュ熱で焦げたような匂いがする場合があります。

上記でも解決しない場合は、ご購入いただいた店舗までお問い合わせください。

保証について

初期不良または自然故障があった場合、製品が到着してから保証期間内であれば返金・交換の保証対象となりますので、お問い合わせ先にご連絡ください。

保証期間を過ぎてしまった場合は対応致しかねます。ご了承ください。

保証期間	1年間		
製品到着年月日	年	月	日
お問い合わせ先	【店舗で購入されたお客様】 ご購入された販売店へご連絡ください。	【インターネット等で購入されたお客様】 注文番号と店舗名を控え、 ご購入された販売店へご連絡ください。	