

جهاز ليزر سيلكي سكن لإزالة الشعر

- للاستخدام المنزلي

دليل المستخدم



شكرًا لكِ على اختيار جهاز ليزر سيلكي سكن. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز وذلك من أجل استخدامه بفعالية.

1. إرشادات السلامة

لحماية البشرة، الجهاز غير مناسبٍ لكِ:


- إذا كنت تعانين من اضطرابٍ جلدي معروف.
- إذا كنت تعانين من مرضٍ جلدي مثل التهاب الجلد التحسسي، الإكزيما، إلخ.
- إذا كنت تعانين من حساسية الضوء
- إذا كنت في فترة الحيض أو الحمل أو الإرضاع.
- إذا كنت تعانين من حروق الشمس
- إذا كنت من ذوي البشرة السوداء أو تعرضتِ لحروق الشمس (يرجى الرجوع إلى بطاقة تباين الألوان الواردة في الأسفل)
- إذا كانت لديك وحمّة سوداء أو غامقة
- إذا كنت تعانين من جلدٍ مجروح، أو من جرحٍ ملتئم أو متقشر، أو من السرطان أو الأورام الوعائية
- على العينين أو أي منطقةٍ خضعت لجراحةٍ تجميلية أو تعويضية.

2. مقدمة المنتج

1. قائمة التعبئة:

جهاز ليزر سيلكي سكن، محول الطاقة، بطاقة الضمان، دليل المستخدم.

2. وصف الجهاز

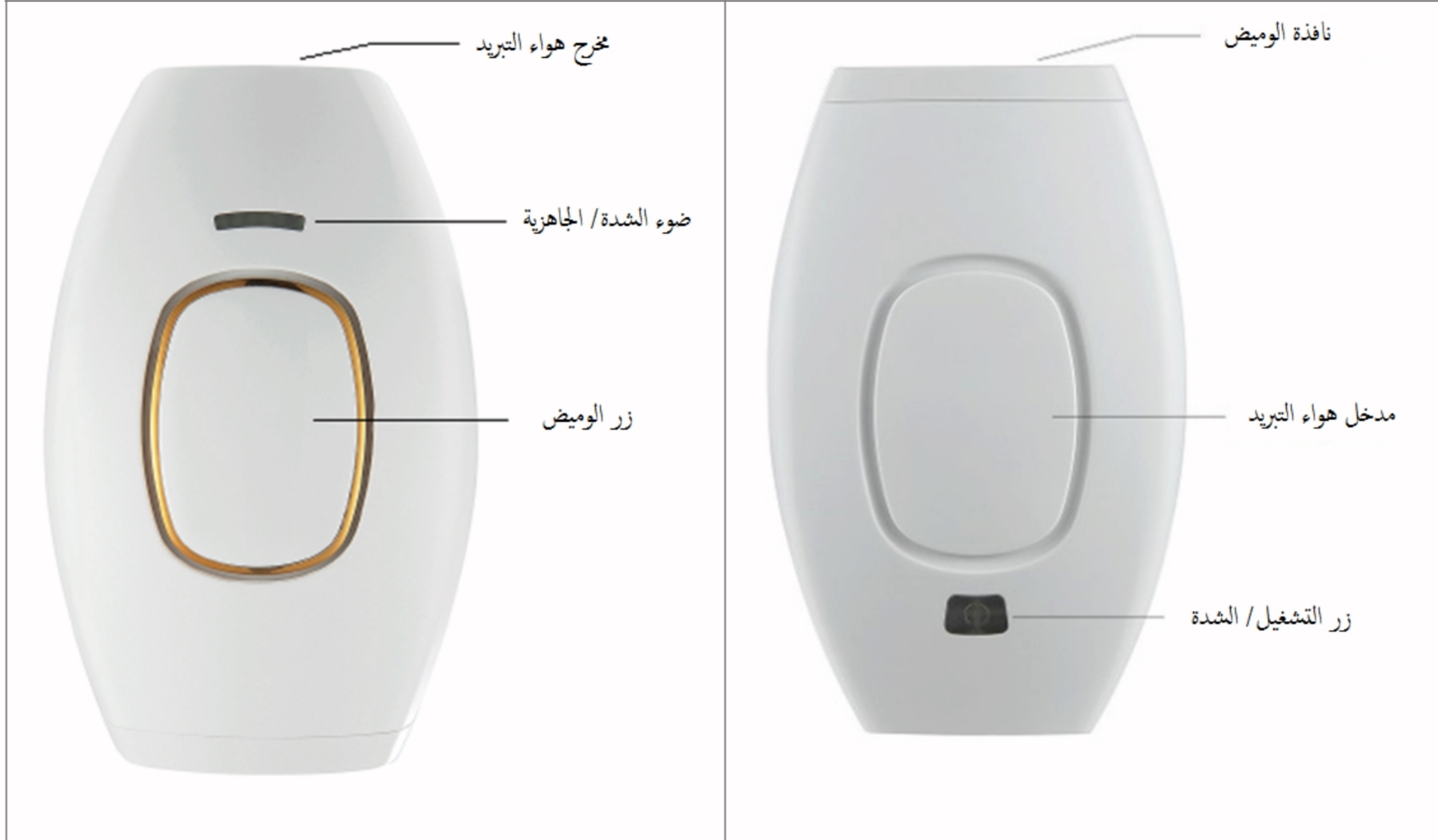

3. المواصفات الفنية

أنبوب المصباح	أنبوب من الكوارتز والزينون
مصدر الضوء	نبضات ضوئية مكثفة
تردد الطاقة	1.5 – 3.9 جول/ سم ²
حجم تركيز النبضة	33 * 10 مم ²
الطول الموجي	470 نانومتر ~ 1100 نانومتر
عدد الومضات	300000 ومضة
المحول كهربائي	AC100 ~ 240V @ 12V DC 2.5A-3A
الوزن	186 غرام
الحجم	124 * 83 * 48.5 مم ³
نطاق حرارة التشغيل	5 ~ 30 درجة مئوية
نطاق رطوبة التشغيل	الرطوبة النسبية 30% ~ 60%

4. وظائف الجهاز

- تجديد شباب البشرة
- ازالة الشعر

يمكن استخدام هذا المنتج لإزالة الشعر الزائد مثل شعر الوجه والإبط وأطراف الجسم والجبين وما إلى ذلك؛ مناسب لإزالة الشعر الأسود والشعر الداكن دون ألم، وغير مناسب لإزالة الشعر الأبيض أو الرمادي أو الأشقر (راجع بطاقة تباين الألوان)

بطاقة تباين لون الجلد والشعر

بنّي غامق/ أسود	بنّي	بنّي فاتح	بنّي متوسط	أصفر	أبيض	لون البشرة لون الشعر
X	X	X	X	X	X	أبيض/ رمادي
X	X	X	X	X	X	 أحمر
X	X	X	X	X	X	 ذهبي فاتح
X	X	√	√	√	√	 بنّي فاتح
X	X	√	√	√	√	 بنّي
X	X	√	√	√	√	 بنّي غامق
X	X	√	√	√	√	 أسود

5. تعليمات الاستخدام

4. استخدمني منديلاً مبللاً بالكحول الطبي لتنظيف العدسة
5. اضغطي على "زر التشغيل" لمدة ثانية واحدة، سيدخل الجهاز في حالة العمل (ضوء المؤشر الأخضر مضاء، ويمكنك سماع النظام وهو يعمل)

ملحوظة:

1. سترين ضوء المؤشر الأحمر مضاءً بعد بدء التشغيل.
2. عليك بعد ذلك تقريب العدسة من بشرتك، سترين ضوء المؤشر الأحمر يومض، بسبب وجود حساسٍ للقرب مدمجٍ في العدسة ، حيث سيستشعر هذا الحساس اقتراب الجسم البشري منه.
3. يجب أن يومض مؤشر الضوء الأحمر، وإلا فإن الجهاز لن يعمل. إذا لاحظت أن المؤشر الأحمر لا يومض، قربي الجهاز إلى بشرتك حتى يومض.



زر التشغيل

3. اضغطي على "زر التشغيل" لتحديد مستوى الشدة المناسب. هناك خمسة مستوياتٍ للشدة موضحةٌ بأضواء المؤشر الزرقاء. يوضح الرسم البياني أدناه مستوى الشدة من طاقة منخفضة إلى طاقة عالية، والمستوى 1 هو الحد الأدنى لشدة الطاقة، والمستوى 5 هو الحد الأقصى لشدة لطاقة. يمكن إجراء أي تعديلٍ بالتسلسل الموضح في الشكل التالي مع كل ضغطةٍ على زر التشغيل.



مستوى 2



مستوى 1




مستوى 4



مستوى 3



R = جاهز للعمل

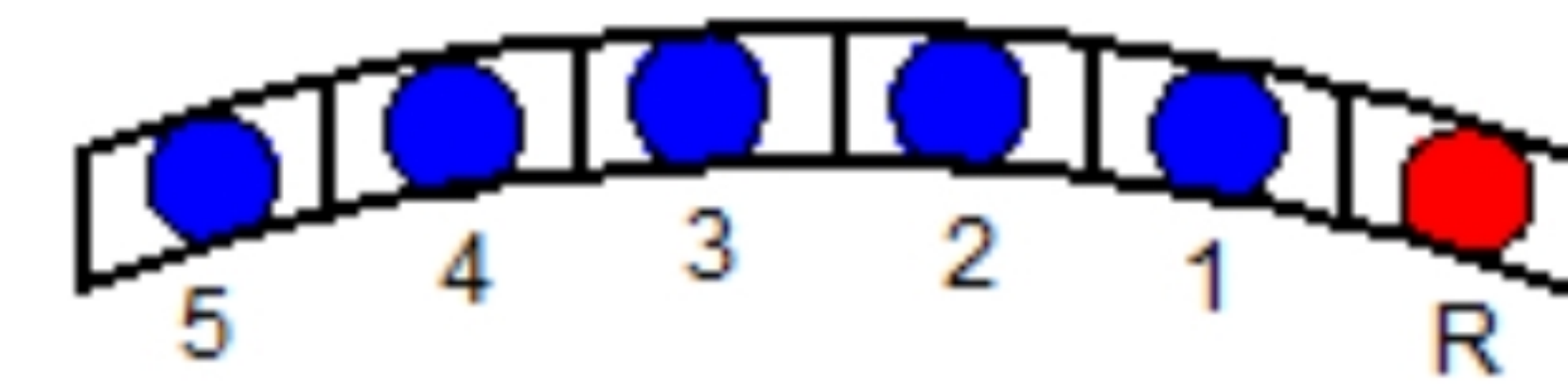

مستوى 5

4. بمجرد تعيين مستوى الجهاز حركي العدسة إلى البشرة حتى تغطيها تماماً، وسترين ضوء المؤشر الأحمر يومض. اضغطي على زر الوميض وسيومض الجهاز مرة واحدة؛ سيتم إطفاء ضوء المؤشر الأحمر لشحن الطاقة بعد كل عملية وميض، وبعد 1 ~ 3 ثوانٍ سيضيء ضوء المؤشر الأحمر للإشارة إلى أن الجهاز جاهز للاستخدام مرة أخرى.

ملحوظة:

- للحصول على نتائج مثالية، يُقترح تكرار عملية إزالة الشعر 2-3 مرات والتأكد من عدم تكرار أو إهمال أي جزءٍ من أجزاء الجسم.
- لن يعمل الجهاز بشكلٍ صحيحٍ إذا بقي ضوء المؤشر الأحمر فعالاً بدون وميض، لذا يرجى - في هذه الحالة - اتباع الخطوات التالية:
 - a. تأكدي من أن "عدسة الجهاز" قريبةً من الجلد بدرجةٍ كافية.
 - b. إذا كان ضوء المؤشر الأحمر لا يزال فعالاً، حركيه على بشرتك لمدة 3-5 ثوانٍ وتحققي مما إذا كان قد عاد إلى وظيفته الطبيعية.
 - c. يرجى إعادة تشغيل الجهاز إذا فشلت هذه العملية.
 - d. إذا لم تتمكن الخطوات المذكورة أعلاه من حل المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة العملاء.

5. إذا تُرك الجهاز دون استخدام، فإنه سينتقل إلى وضع الاستعداد بعد 5 دقائق، ما عليك سوى الضغط على زر التشغيل لتنشيطه. لاحظي أن الشدة ستعود إلى المستوى 1 عند إعادة التشغيل.
6. اضغطي على زر التشغيل لمدة ثانيتين لإطفاء الجهاز.
7. عند الانتهاء من استخدام الجهاز، يرجى تنظيف العدسة باستخدام منديلٍ مبللٍ بالكحول الطبي.

ملحوظة:

- بعد الاستخدام المتكرر للجهاز ستظهر داخل العدسة بقعةً بيضاءً من الندى. لن يؤثر ذلك على الاستخدام العادي وعمر الخدمة الجهاز.
8. التبديل بين الوضع التلقائي /الوضع اليدوي إن الوضع الافتراضي عند الإقلاع هو الوضع اليدوي، حيث عليك الضغط على زر الوميض لفترةٍ قصيرةٍ (لمدة ثانية واحدة) كي يعمل الجهاز؛ إذا كنت تريدين التبديل إلى الوضع التلقائي، عليك أن تضغطي لفترةٍ طويلةٍ (لمدة ثانيتين) على زر الوميض، حيث سيتحول اللون الأزرق من إضاءةٍ ثابتةٍ إلى إضاءةٍ وامضة، وبذلك يكون الوضع التلقائي قد أصبح فعالاً. في الوضع التلقائي، تبدأ نافذة الوميض بالعمل تلقائياً عند اكتشافها ملامسة الجهاز للبشرة، ويتوقف الوميض عند ابتعاده عنها، ويعود الوميض مجدداً عند اقترابه من البشرة مرةً أخرى؛ للرجوع من الوضع التلقائي إلى الوضع اليدوي، عليك إلى الضغط على زر الوميض لمدة ثانيتين.
 9. الحماية من ارتفاع حرارة الجهاز عند الاستخدام المستمر لفترةٍ طويلة، وعندما تكون بيئة التبريد غير مثالية، فقد يفعل الجهاز ميزة الحماية من ارتفاع الحرارة، حيث تومض جميع الأضواء الزرقاء معاً، وغالباً ما يكون الضوء الأحمر مطفاً، وتتوقف وظيفة الوميض إلى أن تعود درجة الحرارة المحيطة الداخلية إلى الوضع الطبيعي، وعندها يبدأ الجهاز بالعمل مرةً أخرى، ولكن مستوى الشدة سينخفض إلى المستوى 1، فإذا كنت بحاجة إلى مستوى شدة أعلى، يمكنك عندئذٍ إعادة ضبطه بنفسك. يتراوح وقت التبريد الداخلي بين 2 ~ 5 دقائق بعد تفعيل الحماية من ارتفاع درجة حرارة الجهاز، يعتمد الوقت المحدد على بيئة الاستخدام!

6. نصائح حول الاستخدام

10. الاختبار قبل الاستخدام

يُنصح بشدة بالتحقق من وجود رد فعلٍ سلبي عن طريق إجراء اختبارٍ جلدي قبل ساعتين من أية عمليةٍ لإزالة الشعر
طريقة الاختبار:

استخدمي الجهاز على منطقةٍ صغيرةٍ من الجلد على الجزء الداخلي من أعلى الذراع بإعداداتٍ مختلفةٍ المستوى من اقل مستوى إلى أعلى مستوى 1-2 مرة في نفس المكان. إذا شعرتِ بعد ساعتين باحمرارٍ أو حرقٍ أو ألمٍ حادٍ أو أعراضٍ أخرى، استشيري الطبيب قبل استخدام الجهاز مرةً أخرى. إذا شعرتِ بحالةٍ طفيفةٍ من عدم الراحة، استخدمي المنتج مرةً أخرى ولكن خفضي مستوى الشدة، وفي حال استمر الشعور بعدم الراحة، استشيري الطبيب قبل استخدام الجهاز مرةً أخرى.

11. خطوات التشغيل

11.1. نظفي العدسة، ثم احلقي شعر جسمك ونظفي الشعر المتبقي

11.2. شغلي الجهاز، واختاري مستوى الجهاز الأنسب لإزالة الشعر

11.3. بعد الانتهاء من إزالة الشعر، يجب تبريد الجلد باستخدام ماءٍ مثلجٍ أو منشفةٍ مبللةٍ باردة

11.4. يمكنكِ استخدام المرطب لمساعدة بشرتك على الاحتفاظ بالرطوبة بعد إزالة الشعر

11.5. يرجى الرجوع إلى جدول المقارنة المبين في الأسفل للحصول على اقتراحاتٍ حول مستوى الجهاز المناسب لجميع أنواع البشرة وللأجزاء المختلفة من الجسم.

11.6. يُنصح بشدة بعدم استخدام الجهاز عدة مراتٍ على نفس الجزء من البشرة. عليك أن تستخدميه أقل من مرتين بالتتابع على منطقةٍ واحدةٍ فقط. يجب تقليل تردد العملية عند استخدام مستوى عالي

جدول مستوى الجهاز وتباين لون البشرة

لون البشرة الأجزاء	أبيض	أصفر	بنّي متوسط	بنّي فاتح	بنّي	بنّي غامق/ أسود
الإبط	المستوى 5-3 عدد المرات 4-3	المستوى 5-3 عدد المرات 4-3	المستوى 4-3 عدد المرات 3-2	المستوى 3-2 عدد المرات 3-2	المستوى 3-2 عدد المرات 3-2	لا يمكن تطبيقه
الذراع	المستوى 5-3 عدد المرات 4-3	المستوى 4-2 عدد المرات 4-3	المستوى 4-2 عدد المرات 3-2	المستوى 3-1 عدد المرات 3-2	المستوى 3-1 عدد المرات 3-2	لا يمكن تطبيقه
الساق	المستوى 5-3 عدد المرات 4-3	المستوى 4-2 عدد المرات 4-3	المستوى 4-2 عدد المرات 3-2	المستوى 3-1 عدد المرات 3-2	المستوى 3-1 عدد المرات 3-2	لا يمكن تطبيقه
حول الفم	المستوى 4-3 عدد المرات 4-3	المستوى 3-2 عدد المرات 4-3	المستوى 3-2 عدد المرات 3-2	المستوى 2-1 عدد المرات 3-2	المستوى 2-1 عدد المرات 3-2	لا يمكن تطبيقه
الوجه	المستوى 4-3 عدد المرات 4-3	المستوى 3-2 عدد المرات 4-3	المستوى 3-2 عدد المرات 3-2	المستوى 2-1 عدد المرات 3-2	المستوى 2-1 عدد المرات 3-2	لا يمكن تطبيقه

ملحوظة:

- يستخدم لمدة 6-10 مرات كدورة لإزالة الشعر
- يستخدم مرة واحدة كل أسبوعين حتى ست مرات
- يستخدم مرة واحدة كل أربعة أسابيع عند الاستخدام 6-10 مرات
- في حال لاحظت نمو شعرٍ جديدٍ وخفيفٍ بعد استخدامه، استخدميه مرة واحدة كل 2-3 أشهر في منطقة نمو الشعر، وتابعي للحصول على نتائج مرضية.
- للحصول على أفضل النتائج، يُنصح باستخدامه عدة مراتٍ لفترةٍ من الزمن على مناطق نمو الشعر الكثيف.
- سيختلف الاستخدام من شخصٍ لآخر، استخدميه بشكلٍ أقل عندما ينمو الشعر بصورةٍ قليلةٍ في المنطقة، حوالي 30%.

7. ملاحظات تشغيل الجهاز

12. لا تستخدم الجهاز بالقرب من العين أو نحوها مباشرة.
13. احمرار الجلد أمرٌ طبيعي بعد العملية. يمكنك تبريد المنطقة بماءٍ مثلجٍ أو بمنشفةٍ مبللةٍ باردة.
14. لا تنظفي العدسة مباشرةً برذاذ الكحول
15. لا تستخدم الجهاز مع مستحضرات التجميل الأخرى مثل منتجات جل الماء.
16. حاولي ألا تتناولي أطعمةً حساسةً لليزر أثناء الجلسة (مثل السبانخ والملفوف والخردل، إلخ).
17. للحصول على أفضل النتائج، استخدميه أعلى مستوى (تحذير: فقط بعد اتباع التعليمات السابقة)
18. كلما كان لون بشرتك داكنًا قد لا يكون رد فعل الجلد واضحًا جدًا وقد يتأخر التفاعل، في هذه الحالة تأكدي من الانتظار لمدة ساعتين قبل زيادة المستوى
19. استمري في الاعتناء بترطيب بشرتك واستخدام واقي الشمس كالعادة بعد استخدام هذا المنتج.

20. تجنبى الأشعة فوق البنفسجية أثناء الاستخدام واحمى بشرتك دائماً عند الخروج فى الشمس. حاولى أيضاً تجنب التعرض الطويل لإشعاع الكمبيوتر أثناء العمل، واحمى نفسك باستخدام واقى الشمس.
21. لا تسدى مدخل ومخرج التبريد حتى لا يؤثر ذلك على تبريد الجهاز.
22. قد يتسبب التصاق الشعر بالجهاز بظهور بعض البقع الفارغة ولكنه لا يؤثر على أداء الجهاز وعلى الاستخدام العادى
23. فى مرحلة متقدمة من عمر الجهاز، سىظهر على الجدار الداخلى للعدسة درجات مختلفة من اللون الأسود، ويعود ذلك إلى عملية التقادم الطبيعى للأنايب. لا تقلقى من مواصلة الاستخدام كالمعتاد ضمن المعلمات المحددة.
24. هذا المنتج غير مقاوم للماء، لذا تجنبى ملامسته للماء.
25. فى حال ظهور أى عيب، افصلى الجهاز على الفور، إذا لاحظت أن غطاء المنتج أو العدسة مكسوره، أعيدىه إلى المصنع للصيانة.
26. لا تحفظى الجهاز بالقرب من المجالات المغناطيسية القوية أو الرطوبة أو الغبار أو فى درجات الحرارة العالية.
27. تجنبى إلحاق الضرر بالجهاز وأبعديه عن متناول الأطفال.
28. يحظر استخدامه مع تطبيقات أخرى غير مسموح بها.
29. يحظر فتح الجهاز من قبل أى شخص باستثناء الأشخاص المعتمدين لدينا وإلا فقد يتعرض الشخص إلى صدمة كهربائية.

هذا الدليل هو بمثابة مرجع فقط

