



Manuel d'utilisation
Appareil de massage Shiatsu avec fonction
chauffante 8 nœuds - Modèle Havana
Référence : SNT010



IMPORTANT: Merci de prendre connaissance de ce manuel avant toute utilisation.

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables. - Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
- N'ouvrez jamais l'appareil vous-même, hormis pour remplacer la pile. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Pour usage externe uniquement.
- N'utilisez jamais cet appareil à proximité du cœur, autour de la bouche ou sur une peau malade.
- N'utilisez pas cet appareil dans des pièces très humides (une salle de bains par exemple).
- Si vous suivez un traitement médial, demandez conseil à votre médecin avant de commencer l'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil en dormant, en conduisant ou en prenant un bain.
- Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec des éléments en métal comme une boucle de ceinture ou des bijoux.

- Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec des éléments en métal comme une boucle de ceinture ou des bijoux.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Variez la pression en fonction de vos besoin
- Si le massage est trop brutal, retirez un peu de pression.
- Les spécifications du produits peuvent changer sans préavis.

Zones de massage :




Épaules

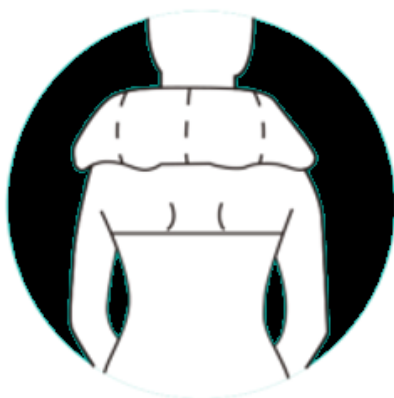


Nuque



Dos

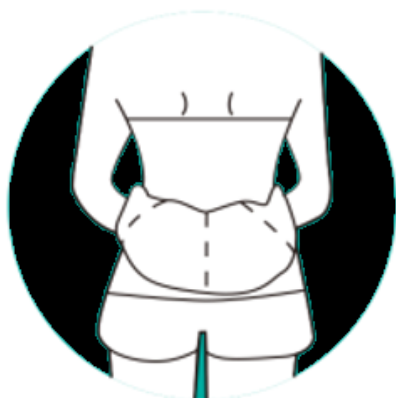

Taille

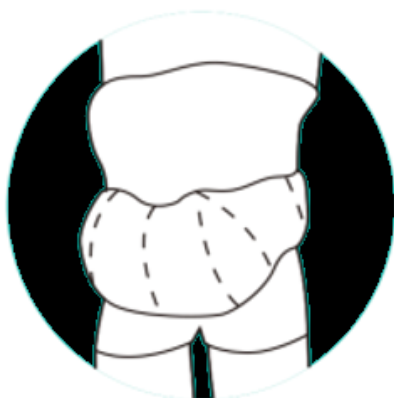

Abdomen



Cuisses



Jambes




Pieds




Mollets

Listes des pièces :



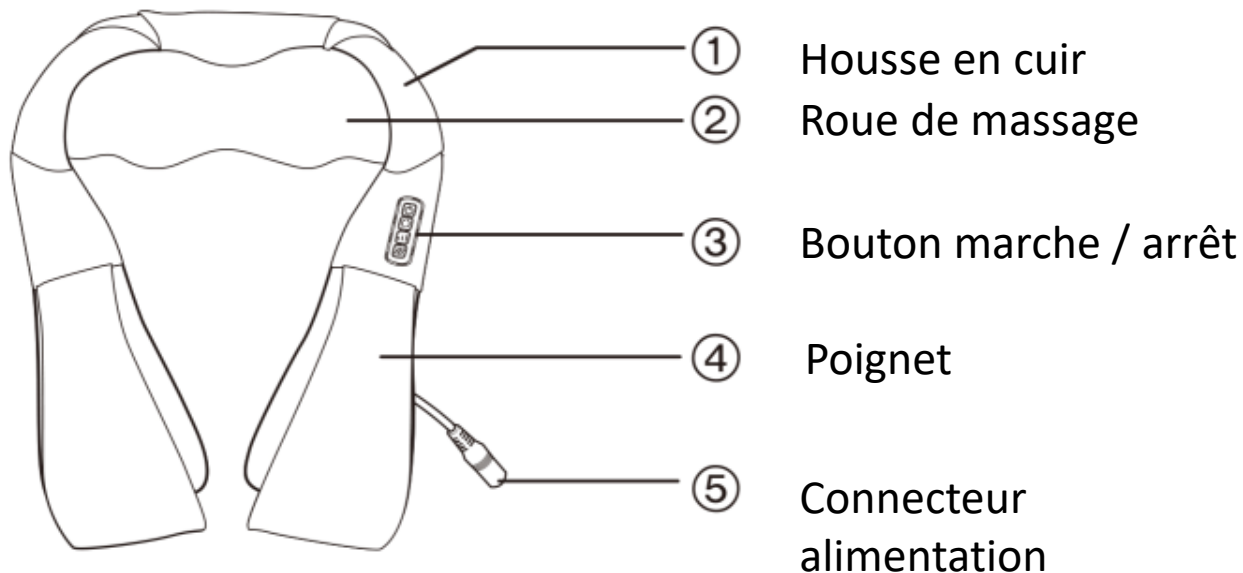

Appareil principal

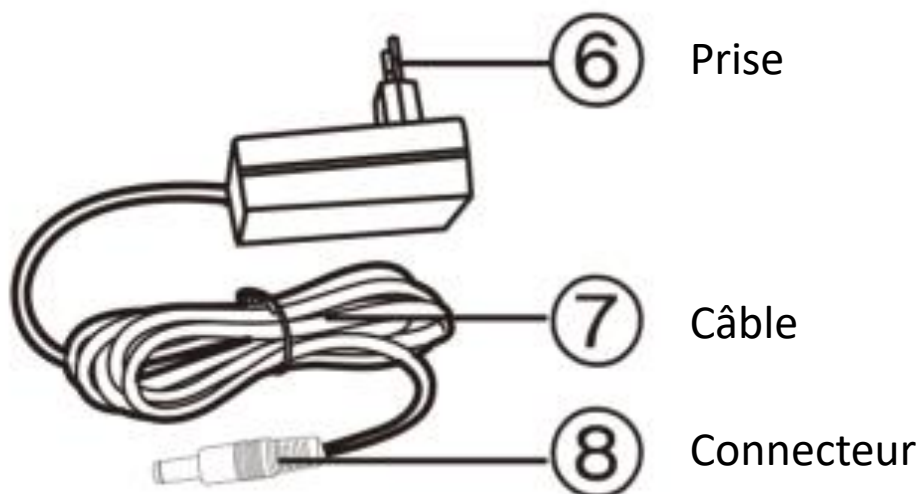

Adaptateur secteur



Guide des fonctionnalités:

	Marche / Arrêt Facile et rapide à allumer ou éteindre. Minuterie automatique après 15 minutes.
	Vitesse Vitesse du massage ajustable facilement en fonction de vos besoins.
	Sens Direction du massage ajustable facilement pour mieux cibler les endroits tendus
	Mode chaleur Activation et désactivation faciles de la fonction de chauffage.

Indications techniques:

- Tension : 12 V
- Puissance : 24 W
- Fréquence : 50 Hz

Dépannage:

Problèmes	Solutions
Impossible d'allumer l'appareil	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la prise d'alimentation est branchée à l'appareil.• Confirmez que l'interrupteur est allumé.• Confirmez que le bouton a été pressé
Arrêt soudain durant l'utilisation	<ul style="list-style-type: none">• Le masseur se termine automatiquement après 15 minutes.• Vérifiez si la prise d'alimentation s'est débranchée.• Vérifiez qu'il n'y a pas de mauvaises connexions et cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous en trouvez.• Si aucune des mesures ci-dessus ne fonctionne, couper l'alimentation principale et attendre une heure pour que le produit refroidisse.• Le masseur est doté d'une fonction de protection automatique contre la surchauffe. Si le problème persiste, cesser immédiatement d'utiliser l'appareil et demander conseil à votre revendeur.



SYNERFIT®

Copyright Synerfit ©. All Rights Reserved.
ILAN DIFFUSION | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.synerfit.eu

*Synerfit est une marque enregistrée par ILAN DIFFUSION SARL.
Produits importés par ILAN DIFFUSION SARL. Fabriqué en Chine.
Synerfit is registered by ILAN DIFFUSION SARL.
Imported by ILAN DIFFUSION SARL.
Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*