



Manuel d'utilisation
Appareil de massage des mains avec fonction
chauffante - Modèle Desira
Référence : SNT011



IMPORTANT: Merci de prendre connaissance de ce manuel avant toute utilisation.

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables. - Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
- N'ouvrez jamais l'appareil vous-même, hormis pour remplacer la pile. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Pour usage externe uniquement.
- N'utilisez jamais cet appareil à proximité du cœur, autour de la bouche ou sur une peau malade.
- N'utilisez pas cet appareil dans des pièces très humides (une salle de bains par exemple).
- Si vous suivez un traitement médial, demandez conseil à votre médecin avant de commencer l'utilisation.

- N'utilisez pas l'appareil en dormant, en conduisant ou en prenant un bain.
- Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec des éléments en métal comme une boucle de ceinture ou des bijoux.
- Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec des éléments en métal comme une boucle de ceinture ou des bijoux.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Variez la pression en fonction de vos besoin
- Si le massage est trop brutal, retirez un peu de pression.
- Les spécifications du produits peuvent changer sans préavis.


Description du produit :



Fonctionnement des touches :

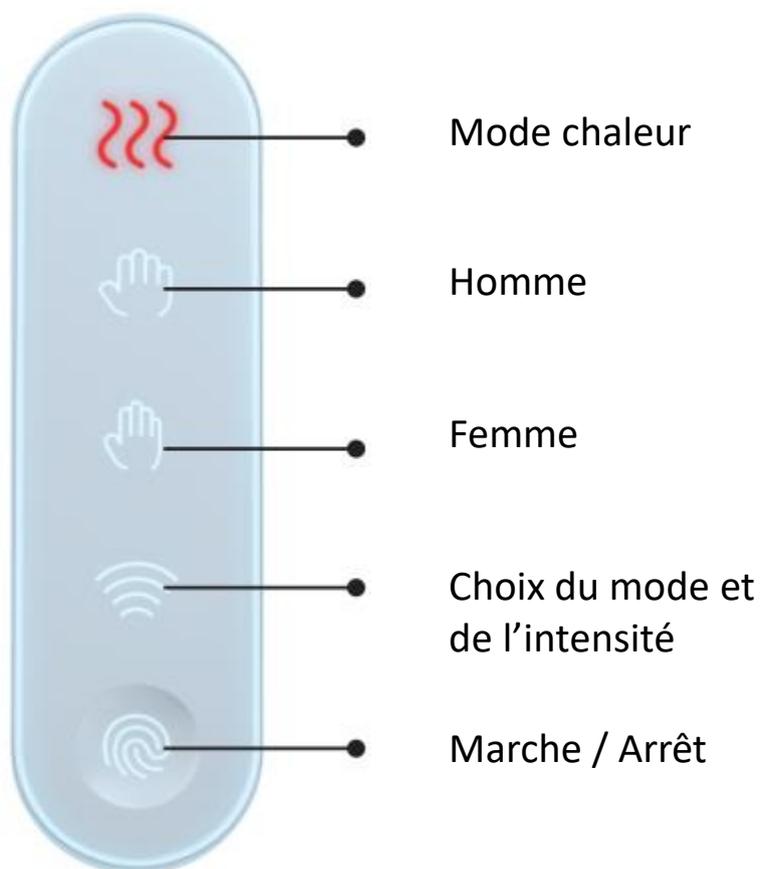

Instructions d'utilisation :

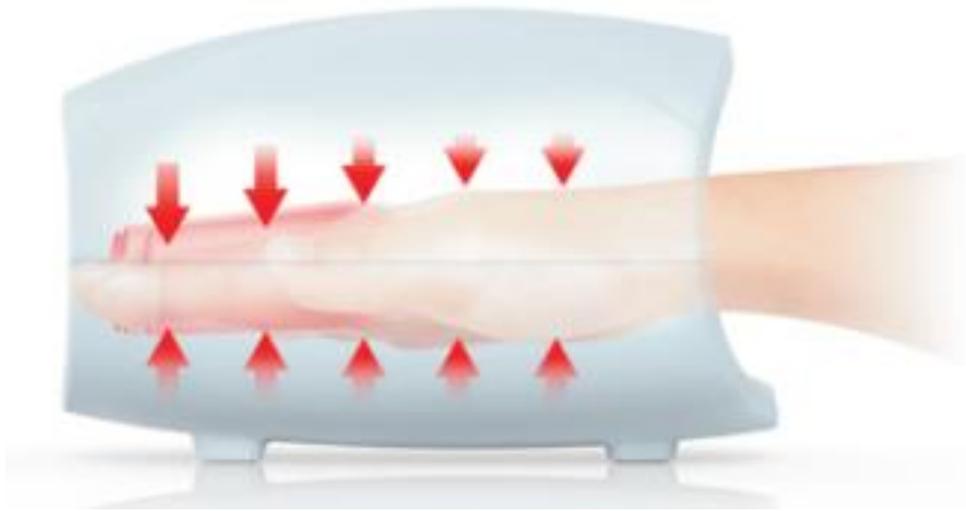

1. Placez votre main à l'intérieur de l'appareil.
2. Positionnez la paume de la main au centre du coussin de massage.
3. Appuyez sur le bouton d'allumage (🌀), tous les boutons vont s'allumer.
4. Choisissez un mode :
 - Homme 🖐️
 - Femme 🖐️
5. Appuyez sur le bouton Mode (📶). Il y a plusieurs niveaux d'intensités:
 - Doux
 - Apaisant
 - Intense
6. Pour le mode chaleur, appuyez sur (🔥) et ajustez la température.
7. Appuyez sur 🌀 pour éteindre l'appareil.

Astuces :

- ❖ Après allumage, l'appareil s'éteindra automatiquement au bout de 5 secondes si aucun autre bouton n'est utilisé.
- ❖ N'utilisez pas la machine lorsqu'elle est en charge.
- ❖ Une fois l'appareil complètement rechargé, le bouton d'allumage se mettra clignoter.
- ❖ Se masser avec des gants en plastique après application de crème pour les mains peut aider à l'absorption et la réparation de la peau.
- ❖ N'utilisez pas la fonction de chaleur trop longtemps pour éviter la surchauffe de l'appareil.

Avertissements :

- Utilisez le port USB Type-C.
- Retirez tout bijoux ou argenterie de vos mains avant utilisation pour éviter les blessures et/ou la dégradation de vos bijoux ou de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil trop longtemps; Le temps maximum recommandé pour un massage est de 30 minutes.
- N'utilisez pas ce produit en conduisant.
- N'utilisez pas ce produit après avoir consommé de l'alcool ou des somnifères.
- Recharger l'appareil avec le chargeur fourni ou un autre de la même puissance (DC5V 1 ~ 4A).
- Ce produit est destiné à un usage domestique. Ne l'utilisez pas dans un but professionnel ou médical.
- Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec de l'eau, du feu ou un environnement corrosif.
- N'introduisez pas d'objets tranchant dans la machine.
- N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillés.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, cessez votre utilisation. Contactez le service client pour la maintenance. N'essayez pas de désassembler l'appareil.
- Si vous ne vous sentez pas bien, arrêtez votre utilisation.
- N'enroulez pas l'appareil autour de vêtements lorsque vous l'utilisez.

- Pour les personnes ayant subi une chirurgie de la main, assujetties à des gonflements, des inflammations, des troubles de la congestion, des formes d'arthrites sévères, ou d'autres traumatismes, les personnes atteintes de maladies cardiaques, cérébrales, du poumon, du sang (troubles de la coagulation), d'ostéoporose ou de problèmes liés aux tissus mous, demandez conseil auprès de votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Appareil déconseillé aux femmes enceintes et aux enfants. Demandez conseil à votre médecin.

Carte de garantie :

Nom du produit		Modèle	
Nom de client		Téléphone	
Adresse			
Code postal		Date d'achat	

Consignes d'après-vente :

- 1 an de garantie offerte à partir de la date d'achat (date présente sur la facture). La garantie ne prend pas en charge l'apparence du produit.
- La maintenance effectuée durant la période active de la garantie nécessite la présentation de la carte de garantie et de la facture d'achat. (Transmission numérique des documents possible)
- Les cas suivants ne sont pas couverts par la garantie :
 1. Tous dommages causés par un facteur humain. Notamment une utilisation dans un environnement anormal, mauvaises conditions de rangement, ...
 2. Si l'appareil a été désassemblé ou réparé par un service autre que celui de la maintenance.
 3. Tous dommages liés à des problèmes de transports non maîtrisables (avion, feux, ...)
 4. Notre entreprise se réserve le droit de modifier ou de réinterpréter les clauses énoncées précédemment.



SYNERFIT®

Copyright Synerfit ©. All Rights Reserved.
ILAN DIFFUSION | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.synerfit.eu

*Synerfit est une marque enregistrée par ILAN DIFFUSION SARL.
Produits importés par ILAN DIFFUSION SARL. Fabriqué en Chine.
Synerfit is registered by ILAN DIFFUSION SARL.
Imported by ILAN DIFFUSION SARL.
Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*