



Manuel d'utilisation
Appareil de massage des pieds avec fonction
chauffante et compression d'air - Modèle
Podora
Référence : SNT013



IMPORTANT: Merci de prendre connaissance de ce manuel avant toute utilisation.

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables. - Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
- N'ouvrez jamais l'appareil vous-même, hormis pour remplacer la pile. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Pour usage externe uniquement.
- N'utilisez jamais cet appareil à proximité du cœur, autour de la bouche ou sur une peau malade.
- N'utilisez pas cet appareil dans des pièces très humides (une salle de bains par exemple).
- Si vous suivez un traitement médial, demandez conseil à votre médecin avant de commencer l'utilisation.

- N'utilisez pas l'appareil en dormant, en conduisant ou en prenant un bain.
- Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec des éléments en métal comme une boucle de ceinture ou des bijoux.
- Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec des éléments en métal comme une boucle de ceinture ou des bijoux.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Sécurité :

A. Informations importantes

- Assurez vous de lire le manuel d'utilisation en détail avant d'utiliser le produit.
- Suivez attentivement les instructions d'utilisation lorsque que vous manipulez l'appareil.
- Après utilisation ou avant de le nettoyer, débranchez la prise de courant.
- N'utilisez pas l'appareil sur des personnes ayant des problèmes de peau, des problèmes musculaires ou des problèmes de circulation sanguine.
- Gardez l'appareil éloigné des enfants ou des personnes inaptes à l'utiliser.
- Ne pas couvrir l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Arrêtez d'utiliser le produit si vous sentez un inconfort.
- Veillez à complètement arrêter l'appareil avant de le débrancher.
- Ce produit ne permet pas d'établir des diagnostics médicaux et ne remplace en aucun cas une thérapie médicale.

B. Environnement d'utilisation

- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu poussiéreux pour éviter tout dysfonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil si la température ambiante dépasse les 40°C.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- N'exposez pas l'appareil au soleil ou à une source puissante de chaleur.

C. Personnes non recommandés pour l'utilisation de ce produit:

- Consultez un médecin si vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes :
 - Vous recevez un traitement médical ou souffrez d'un problème physique.
 - Vous souffrez d'hypertension, de maladies cardio vasculaires.
 - Vous êtes atteint d'un cancer.
 - Vous êtes enceinte ou dans votre période menstruelle.
 - Vous souffrez d'ostéoporose.
 - Vous avez un pacemaker ou tout autre appareil médical implanté.
 - Vous êtes une personne mineure.

D. Boutons


- Ne manipulez pas les boutons avec les mains mouillés ou humides.
- Eloignez les boutons de l'eau ou de tout autre liquide.
- Ne vous endormez pas lorsque vous utilisez l'appareil.
- N'utilisez pas ce produit après avoir consommé de l'alcool ou si vous ne vous sentez pas bien.
- Ne placez pas vos genoux, mains, abdomen, poitrines ou tout autre partie sensible du corps sur les coussins de massage.
- Si vous constatez un dommage sur l'appareil, ne l'utilisez pas.
- N'utilisez pas l'appareil autour de vos périodes de repas (1h avant et après).
- N'utilisez pas la fonction Chaleur dans des pièces trop froides. Ajustez la température de la pièce avant.
- Evitez les changements brutaux de températures.

Garantie :

- La garantie n'est pas transférable
- Les utilisateurs bénéficient d'une garantie gratuite à partir de la date d'achat. (La housse n'est pas couverte)
- Garantie valide pendant 1 an.
- Munissez vous de la preuve d'achat et de votre carte de garantie lors de votre demande.
- La date d'achat correspond à celle présente sur votre facture.
- Cette garantie ne s'applique pas lors de prêts, échanges ou autres actions commerciales engageant des personnes autres que l'acheteur.
- Les situations suivantes ne sont pas couvertes par la garantie et font l'objet de services payants :
 1. Tous dommages causés par un facteur humain. Notamment une utilisation dans un environnement anormal, mauvaises conditions de rangement, ...
 2. Si l'appareil a été désassemblé ou réparé sans autorisation.
 3. Tous dommages liés à des problèmes de transports de la part de l'utilisateur ou de force majeurs.

Fonctionnalités :

- Design en forme d'oeuf, à la mode et élégant, léger et transportable.
- Une combinaison varié de fonctions incluant rollers, acupression, pression par air et chaleur.
- Coussin massant procurant un massage uniforme et profond.
- Housse retirable et lavable pour disposer d'un appareil propre à tout moment.
- Système d'enroulement de câble pour plus de confort.

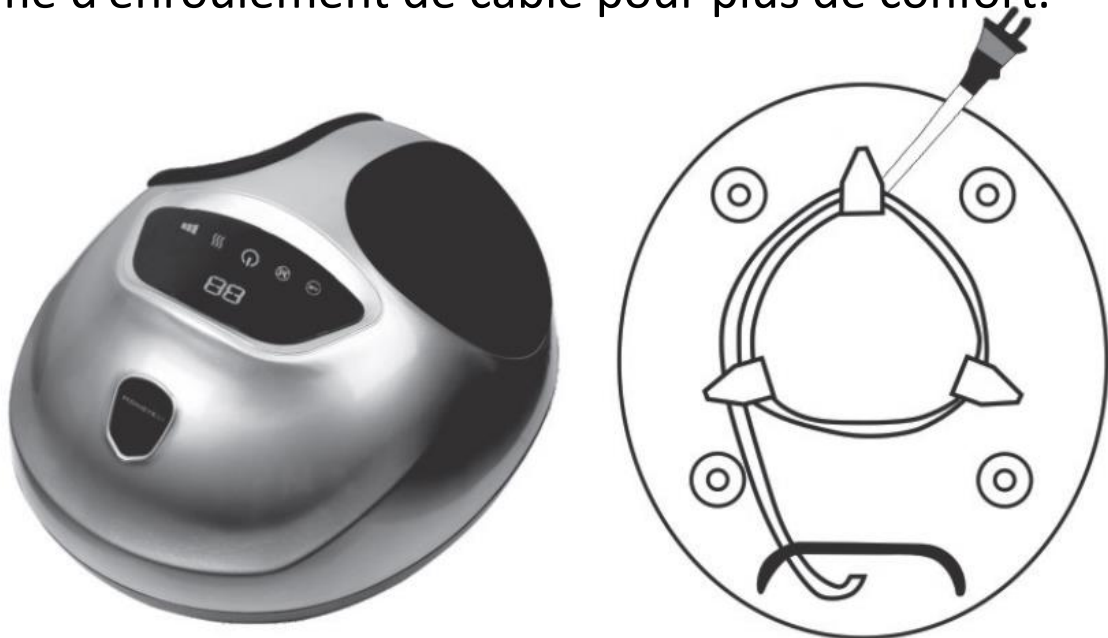

Utilisation :



Réglages :



Temps : Ajustez le temps du massage.



Modes : 3 modes; Mode 1 : rotation sens normal, Mode 2 : rotation sens inversé, Mode 3 : 1 et 2 avec air.



Marche / Arrêt



Chaleur: Pendant le massage vous pouvez ajouter le mode chaleur pour plus de confort.



Niveaux d'intensité : de 1 à 5.

A. Avant utilisation

- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé.
- Assurez vous d'être dans un environnement stable et confortable.

B. Pendant l'utilisation

- Branchez la prise de courant et connectez la à l'appareil.
- Réglages par défaut :
 - Appuyez sur Marche / Arrêt UNE FOIS. La fonction de chaleur repérée par un voyant rouge sera allumée. L'intensité sera faible, indicateur bleu. Mode 1 avec clignotement bleu.
 - Appuyez sur Marche / Arrêt UNE FOIS. Appuyez sur Chaleur UNE FOIS pour désactiver la fonction chaleur. L'indicateur rouge s'éteindra.
 - Lorsque le produit fonctionne, appuyez sur le bouton Intensité pour changer le niveau d'intensité. Un voyant bleu indique une intensité faible. Le Rouge indique une forte intensité.
 - Lorsque le produit fonctionne, appuyez sur le bouton Mode pour changer le mode. Un voyant bleu indique le mode 1. Le Rouge indique le mode 2.

Spécifications :

Nom	Airbag Heating Foot Massager
Tension nominale	220 V
Puissance nominale	45 W
Standards	GB 4706.1-2005 GB 4706.1-2008
Minuteur	15 minutes

Entretien :

A. Rangement

- Le produit doit être placé dans une la boîte colorée et rangé dans un endroit propre, sûr et bien ventilé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas tordre le cordon d'alimentation ni le bouton d'allumage.
- Ne pas suspendre le produit par le cordon.
- Evitez d'érafler le produit avec des objets tranchants.
- N'exposez pas l'appareil à de fortes températures.

B. Nettoyage

- Assurez vous que l'appareil est éteint et que le cordon est débranché avant de nettoyer.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la surface du produit.
- Ne pas suspendre le produit par le cordon.
- N'utilisez pas de produits corrosif pour nettoyer le produit.

C. Entretien

- Nettoyez régulièrement le produit et éloignez le de l'humidité.
- Merci d'utilisé une housse de protection contre la poussière (non fournie) pour éviter que la poussière ne pénètre le produit lors d'une longue période de non utilisation.

Dépannage :

Merci de vous référer aux conseils suivants et possibles solutions si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit. Vous pouvez renvoyer le produit pour qu'il soit examiné et réparé par des techniciens agréés.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le produit ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none">1. Le produit n'est pas branché.2. Vous n'avez pas appuyé sur le bouton Marche / Arrêt.	<ol style="list-style-type: none">1. Connectez l'appareil avec la prise et branchez là ou vérifiez si la connexion est correctement effectuée.2. Appuyez sur le bouton.
Le produit s'est brusquement arrêté de fonctionner.	<ol style="list-style-type: none">1. Déconnexion de l'alimentation.2. Temps d'utilisation supérieur à 15 minutes.3. Surchauffe de l'appareil.4. Trop de pression exercée sur les billes de massage entraînant l'arrêt.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez si le produit est bien connecté à l'alimentation ou non.2. Redémarrez le produit.3. Attendre qu'il refroidisse puis le redémarrer.4. Redémarrez le produit.



SYNERFIT®

Copyright Synerfit ©. All Rights Reserved.
ILAN DIFFUSION | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.synerfit.eu

*Synerfit est une marque enregistrée par ILAN DIFFUSION SARL.
Produits importés par ILAN DIFFUSION SARL. Fabriqué en Chine.
Synerfit is registered by ILAN DIFFUSION SARL.
Imported by ILAN DIFFUSION SARL.
Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*