


Vänligen starta och upplev det nu.

Huvudenheten


Masseringshuvud (fyra utbytbara)

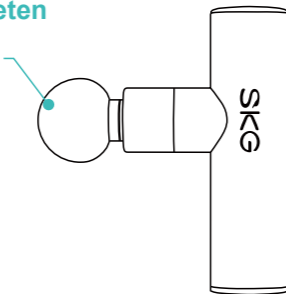

Effekt / Intensitet Nivåknapp

Tryck och håll nedtryckt i 2 sekunder: På / Av; Kort tryck för att växla intensitetsnivå

Laddningsport

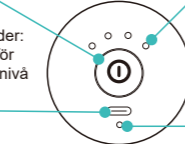

Intensitetsnivåindikator

Den indikerar intensitetsnivån för kroppsmassören. Startnivån är nivå 1 vid påslagning. Kort tryck på Power / Intensity Level-knappen för att byta intensitet från nivå 1 till nivå 4.

Laddningsindikator

Tryck och håll ned "Power / Intensitets Nivå Knappen" långt ned i 2 sekunder för att starta enheten. Standardnivån på vid ström på är Nivå 1.

Tryck kort på "Power / Intensitetsnivåknappen" för att växla intensitetsnivå. Växlingen sker fram och tillbaka från Nivå 1 till Nivå 4. Under normala effektnivåer kommer intensitetsnivåindikatorn att lysa upp i ordning.


När strömmen är låg blinkar indikatorn på nuvarande intensitetsnivå. Enheten är avstängd när den är helt urladdad.

Laddningsläge: Anslut Type-C-laddningskabeln. Den röda indikatorlampan är på när laddningen börjar, och den gröna lampan är på när enheten är fulladdad.


Den här produkten har en tidsfunktion och kommer att stängas av automatiskt efter att ha varit igång i 10 minuter.

Batteritiden på maximal intensitetsnivå är ungefär 2,5 timmar och 4 timmar på den lägsta nivån. Batteritiden varierar med olika intensitetsnivåer.


Innan första användningen rekommenderas det att ladda batteriet fullständigt

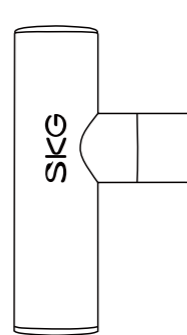

Kroppsmassageapparat

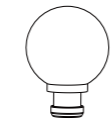


Kulformad massagehuvud för stora muskelgrupper

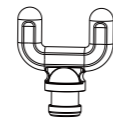

U-formad massagehuvud för ryggradsområdet



Platt massagehuvud för hela kroppen

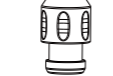

Cylindrisk massagehuvud för ledområdet



USB-C Laddningskabel

Specifikationer

Produktnamn	Body Massager F3 Lite	Nominell ingångseffekt:	10W
Modell	S4137HA	Nominell laddningsspänning:	5V=
Batterikapacitet:	650mAh / 4,81Wh		

* Observera: Denna produkt är uppladdningsbar. Ladda den med en TYPE-C-anslutning. Användare bör använda en standardladdare med en utgångseffekt på 5V = 2A.

Försiktighetsåtgärder vid återvinning

Var vänlig stöd återvinningen av uppladdningsbara batterier (litiumjonbatterier).

 Varning	<p>Batteriet som används i denna produkt är ett speciellt uppladdningsbart batteri och bör inte användas i andra produkter. Ladda inte upp det uttagna uppladdningsbara batteriet.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Overhettar inte batteriet genom att kasta det i eld. · Genomborra inte batteriet med spikar, utsätt det för tyngdkraft eller demontera det. · Anslut inte plus- och minuspolen på batteriet direkt till metall. · Förvara det inte tillsammans med halsband, hårnålar, etc. · Ladda inte upp batteriet, använd det inte och placera det inte på varma platser som spisar eller i solen. <p>Alla dessa faktorer kan orsaka värme, eld, sprickor, etc.</p>
 Warnung	<p>Förvara det uttagna batteriet utom räckhåll för spädbarn och barn för att förhindra oavsiktlig förtäring.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Vid oavsiktlig förtäring, kontakta omedelbart läkare. · Om batterivätskan läcker, vidrör inte vätskan med bara händerna och hantera den på följande sätt. · Om batterivätskan kommer i kontakt med ögonen kan det orsaka blindhet. Gnugga inte direct dina ögon med händerna, skölj dem genast med rent vatten och sök läkarvård. · Om din kropp eller dina kläder blir förorenade av batterielektrolyten kan det orsaka hudinflammation eller skador. Skölj med vatten. Om du fortsätter att känna obehag, sök omedelbart läkarvård. · Produkten kan endast demonteras vid tidpunkten för återvinning. Att inte följa detta kan leda till brand, elektriska stötar, skador och andra olyckor. Om reparationer behövs (förutom batteribyte), kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.

Det litiumjonbatteriet som används i denna produkt är en värdefull resurs som kan återvinnas. Därför ber vi dig att ta bort litiumjonbatteriet när du gör dig av med enheten och överlämna det för korrekt återvinning till en professionell organisation som hanterar återvinning av uppladdningsbara batterier.

- Batterierna måste tas bort från enheten innan den kasseras.
- Enheten måste vara avstängd när batteriet tas bort.
- Batterier ska kastas på ett säkert sätt. Steg för att ta bort batteriet

Batterier ska kastas på ett säkert sätt. Steg för att ta bort batteriet:

1. Använd verktyg för att öppna höljet.
2. Använd en sax för att klippa av batterikablarna separat.
3. Ta bort batteriet.

Rutinunderhåll

 Håll den borta från direkt solljus	 Håll den borta från höga temperaturer och fuktighet	 Håll den borta från rök och eld	 Håll den borta från kraftigt damm
----------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

* Håll den borta från hårda föremål, undvik stötar och repor.
 * Torka av utsidan av enheten med en mjuk trasa doppad i en lämplig mängd alkohol för att rengöra den.
 * Om enheten inte används under en längre tid rekommenderas det att ladda den minst en gång i månaden för att hålla batterinivån över 20%.

Säkerhetsinstruktioner

- Det rekommenderas att inte massera huden direkt med denna produkt för att inte skada huden. Använd torra och rena kläder eller täck masseringsområdet med en ren och torr handduk, tryck och förflytta sedan försiktigt massagepistolen.
- Använd endast hög hastighet och högt tryck på mjukvävnadsområdena på kroppen om det inte finns smärta eller obehag och använd inte hög hastighet eller högt tryck på huvudet eller några benområden på kroppen.
- Frekvent höghastighets- eller högttrycksapplicering på samma område kan orsaka hudskador och om det uppstår smärta eller obehag ska användningen av massagepistolen omedelbart avbrytas.
- Håll fingrar, hår eller andra kroppsdelar borta från den retraherbara delen av enheten för att undvika klämskador och skador.
- Kasta inte bort denna produkt eller använd den felaktigt.
- Gör inga ändringar på denna produkt.
- Lämna inte produkten oövervakad under användning eller laddning.
- Denna produkt är endast avsedd för användning av vuxna.
- Personer med kontraindikationer bör endast använda denna produkt med godkännande från en läkare.

Observera

- Innan du startar enheten, se till att det inte finns något hinder framför massagehuvudet. Om det hindras av yttre kraft, stanna en kort stund innan du startar igen.
- Denna produkt är inte vattentät. Exponera den inte för vatten eller andra vätskor.
- Demontera inte produkten. Om den av misstag demonteras och inte fungerar korrekt, returnera den för reparation. Alla kostnader som uppstår är användarens ansvar.
- Vid kontinuerlig användning under lång tid kan motorns yttre temperatur öka. Använd den försiktigt.
- Tappa inte enheten och utsätt den inte för stötar. Annars kan den skadas och funktionsfel kan uppstå. Om produkten visar fel på grund av fall eller stötar, kontakta kundtjänsten i rätt tid.

Varningar

! Kontraindikationer

- Använd inte för cancerpatienter
- Använd inte för patienter med intern metallfixering (det är förbjudet att använda enheten direkt vid frakturstället)
- Använd inte för patienter med osteoporos
- Använd inte för patienter med venös trombos och pulsering
- Använd inte för patienter med hjärtsjukdomar och högt blodtryck
- Använd med försiktighet hos gravida (använd inte nära underlivet)
- Använd med försiktighet hos patienter med njursten (använd inte nära området kring njurarna)
- Använd inte för patienter med kärlvidning
- Använd inte för patienter med akuta inflammationer
- Använd inte för massage av knäskålen, smalbenet, mellanfoten och andra bentillhörande områden
- Använd inte för direkt massage av ryggraden
- Använd inte för direkt massage av nackryggen
- Använd inte för direkt massage av ansiktsmusklerna
- Använd inte för patienter med medicinska elektroniska implantat i kroppen, som pacemakers
- Använd inte i fasta tillstånd, med full mage eller i berusat tillstånd
- Massera inte samma kroppsdel i mer än 4-5 minuter
- Sök läkarförordning innan användning för patienter med andra sjukdomar, som spondylos i nacke och länderyg
- Fingrar ska inte föras in i monteringshålet för massagehuvudet under användning eller vid start för att undvika skador från slag.

♥ Användningsområden

- Avslappning före och efter fysisk träning
- Rehabiliteringsträning
- Lindring av muskelsmärta och utmattnings av muskelfascia
- Att stödja fysisk träning
- Avslappning av muskelfascia och förbättring av mjukvävnadens flexibilitet

! Varning

- Använd inte den under laddning.

CE This device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
CAUTION : RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS EU Compliance Statement:
 EU Compliance Statement:
 SKG Health technology Co.,Ltd. Here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/35/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.
 UK Compliance Statement:
 SKG Health technology Co.,Ltd. Here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016.
 A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.
 Caution:

- If you experience skin irritation when using the body massager, please refrain from using it, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.
- If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from using the massager.

* The appliance it must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
 * This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 * Children shall not play with the appliance.
 * Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.