

6 programmiga, akuga kupu kasutamisejuhend

Näidiku LED tuled näitavad programmi numbrit e. intensiivsust.

Programmid on järgnevad, numbri järgi kasvavalt:

- 1-2 Naha ja kudede kergeks lõdvestamiseks, temp. u. 40 kraadi
- 3-4 Keskmine vaakum, kergemaks tööks kupuga, temp. u. 45 kraadi
- 5-6 Tugev vaakum, põhiliseks tööks kupuga, masseeriva toimega, temp. u. 50 kraadi


Soovitavad tegevused:

1. Proovige vältida massaažiõli sattumist seadmesse, mis võib seda kahjustada ning lühendada seadme eluiga.
2. Kasutage kuppu samas kohas **maks. 1 minut**. Kui tunnete ebamugavust eemaldage seade.
3. Rasedad, infarkti läbinud, proteesidega, kasvajate-, nahaallergiate-, kõrgvererõhu haiguse ja/või südamepuudulikkusega isikud peaksid seadme kasutamist vältima.
4. Seadmel on taimer tööaja piiramiseks, 20 min. Soovitame ajapiiri jälgida.


Nupud:



On/off lüliti, pikk vajutus

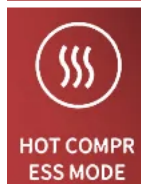

Kuuma kompressi programm

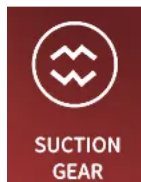

Vaakumi programmid 1-6



Vaakum-surve vabastamine