



Hurtig & effektiv restitution


Scan QR-koden nedenfor for at downloade Achedaway App'en



IOS



Android

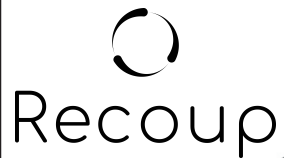

Søg efter
"Achedaway"
på App Store
eller Google Play.

Bruger manual


Restituer hurtig & effektivt

Recoup Pro Cupper

Recoup Pro Cupper er en multifunktionel dynamisk cupping massager, som kombinerer avanceret teknologi. Recoup Pro Cupper tilbyder dynamisk cupping og infrarød lysterapi i ét produkt

Den innovative kombination gør Recoup Pro Cupper til et fantastisk supplement til smerter, inflammation, blodcirkulation, spændinger og et godt velvære. Den kan også bruges med lotion for en bedre massage oplevelse.

Hvad enten du er på hjemmekontoret, til træning eller på farten tilbyder Recoup Pro Cupper en smart og behagelig måde at nyde massage og cupping behandling på, hvor som helst, når som helst.

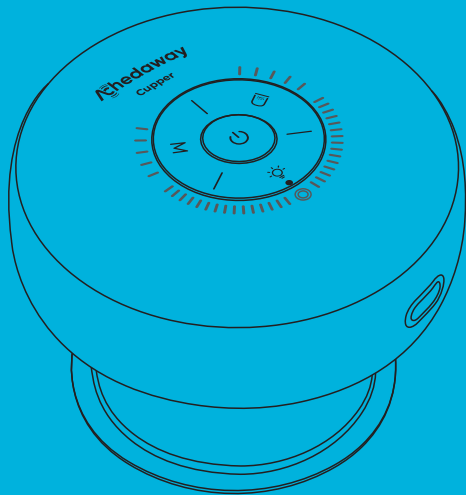


Specifikationer

Vægt:	200g
Dimensioner:	3.7×3.7×2.83 inches
Opladningsspænding	5V-2A
Suge intensitet:	-60~0 kPa
Opladningstid:	2.5 Timer
Bølgelængde:	630-670nm
Strøm	5W
Battery capacity:	3.7V / 1800mAh


Hurtig & effektiv restitution



01 | Produkt struktur

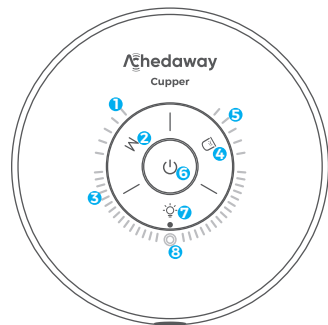

- 1 Program viser
- 2 Kontroller program
- 3 Lys der indikerer suge aktiviteten
- 4 Kontroller intensiteten
- 5 Intensitet viser
- 6 Tænd/sluk knap
- 7 Kontroller infrarød lysterapi
- 8 Opladningsviser

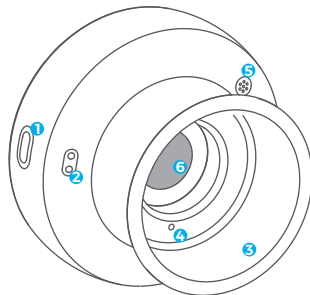

- 1 Opladningsindgang
- 2 Hul til snor
- 3 Kraftig plastik kop
- 4 Luftindgang
- 5 Luftudgang
- 6 Infrarød lysterapi zone

Dynamisk cupping teknologi

Recoup Pro Cupper udkonkurrerer almindelige cupping sæt, da den besidder en rytmisk skiftende "suck and release" funktion. Dette booster blodcirkulationen i det berørte område og gør restitutionperioden kortere

Infrarød Lysterapi

Infrarød lysterapi er en fantastisk hjælp til smertelindring og inflammation, som leverer hurtige resultater når det kommer til hud, muskler og væv – samtidig med, gør den dig og dine muskler mindre spændte og mere afslappede

Smart Massage

Recoup Pro Cupper tilbyder cupping på 5 forskellige programmer samt 5 forskellige intensitetsniveauer. Den tjener som din personlige massør og kan skræddersyes til netop dine behov.

02 | Betjeningsguide

Før brug

- Læs sikkerhedsinstruktionerne først. Du skal ikke bruge produktet, hvis det ikke er passende
- Rengør produktet med en våd klud før og efter brug. Du kan eventuelt fugte din hud med lotion eller gel for en mere behagelig oplevelse.
- Spænd koppen på maskinen og tjek om maskinen er komplet
- Brug den med snoren i for at undgå at tabe produktet og beskadige det.

Tænd/sluk knap

- Tryk og hold nede indtil den tænder/slukker. Cirka 1,5 sekunder.
- Sugening er slået til som standard. Tryk på tænd/sluk knappen for at pause/fortsætte
- Slukker automatisk efter 12 minutters brug. Tryk herefter på tænd/sluk knappen igen for at fortsætte

Infrarød Lysterapi

- Tryk på knappen for at tænde/slukke infrarød lysterapi
- Infrarød lysterapi er aktiv som standard (kan ses ved et blot lys i opladningsviseren)
- Infrarød lysterapi begynder automatisk, når koppen er suget fast til huden

Kontroller program

- Tryk på M knappen for at skifte mellem 5 forskellige suge programmer, som er vist ved forskellige grønne lys. Lyset der indikerer sugeaktiviteten vil lyse op og vise suge bevægelsen
-


M1-Vågn op tilstand

M2-Afslapningstilstand

M3-Massage tilstand

M4-Professional tilstand

M5-Kraftig tilstand

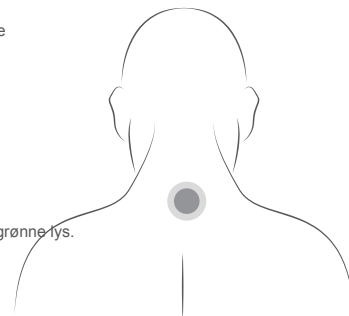


Kontroller intensiteten

- Intensitetsniveau 1 er til som standard
- Tryk for at vælge sugeintensiteten fra niveau 1 til niveau 5.
- Intensiteten vises med rødt LED lys.

Hvis du bruger lotion eller gel

Spred væsken jævnt på huden så den ikke ligger samlet før du placerer maskinen på det ønskede sted

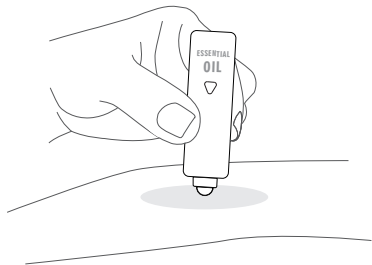

Spred jævnt så der ikke er nogle samlinger af væske


OBS! Fabrikanten er ikke ansvarlig for skade på luftpumpen i forbindelse med forkert brug af væskefulde produkter

Bomuldsfilter

Bomuldsfilteret er designet til at blokere det meste af urenhederne fra den brugte lotion eller gel, således at maskinen opretholder en indre renhed og vedligeholdelse. Du bedes efterse og erstatte bomuldsfilteret afhængig af hyppigheden af brug.


Trin 1: Skru plastik koppen af maskinen

Trin 2: Erstat bomuldsfilteret med et nyt et, og skru herefter koppen tilmage på maskinen

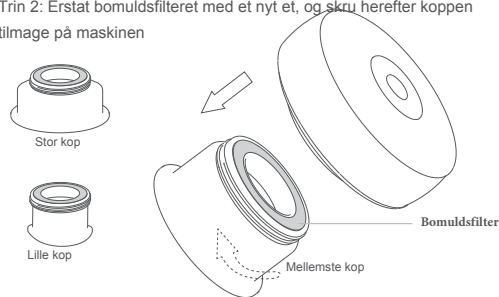

Snor


Sæt venligst snoren på og hold herved maskinen. Det gøres for at beskytte maskinen mod fald og skade.

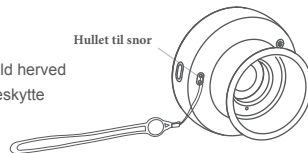

03 | ACHEDAWAY APP

Achedaway App er offentliggjort.
Der er to forskellige måder hvorpå du kan downloade den

A Søg "**Achedaway**" på din App Store eller Google Play og download.

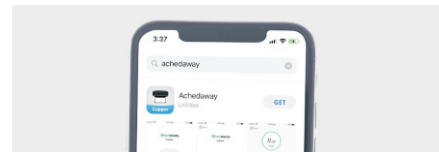

B Scan følgende QR kode nedenfor for at downloade appen




IOS




Android

Her er instruktionen til, hvordan du bruger appen

1. Når du først har downloaded appen skal du først tænder cuppen og efterfølgende trykke på "search" i appen.

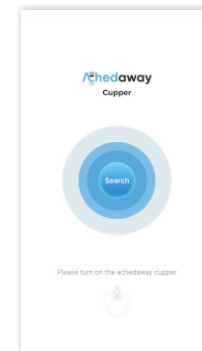


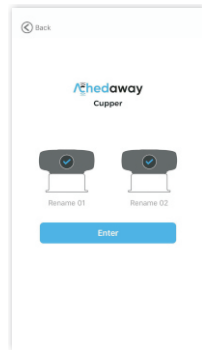


2. Tryk på den cup, som du ønsker at oprette forbindelse til. Tryk på begge 2, hvis du har 2 cupper. Det er også muligt at navngive dine cupper ved trykke langvarig på "Rename" sektionen. Når du har klaret det, så tryk "Enter".



3. I fanen "Settings" kan du en nedtæller i toppen. Den viser dig, hvor lang tid cupperen varer ved. Du kan ændre intensitetsniveauet og skifte mellem forskellige programmer. Til sidst kan du slukke/tænde for infrarød lysterapi. derudover kan du se cuppens batteriniveau i bunden.

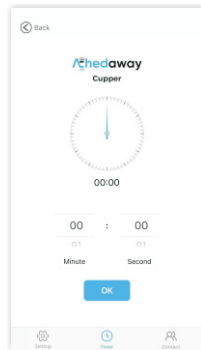


4. I fanen "Timer kan du sætte cuppens aktivitetstid fra 1 sekund til 12 minutter

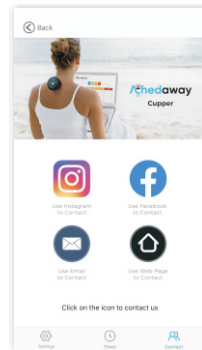

5. I samarbejde med AchedAway kan du under fanen "Contract" bruge linket til at kontakte dem på 4 forskellige måder.

04 | Opladnings guide

1. For at oplade bedes du forbinde enden af type-C opladningskablet til en adapter og den anden ende til produktet.
2. Opladningstiden er omkring 2,5 timer. Opladningsviseren viser et rødt lys under opladningen og et grønt lys, når maskinen er fuldt opladt. Som følge af miljømæssige forhold kan den præcise opladningstid variere en lille smule.
3. Hold type-C indgangen tør og ren og oplad aldrig produktet mere end 8 timer
4. Produktet kan ikke bruges når det oplader
5. Når batteriniveauet er for lavt vil maskinen automatisk slukke efter den har bippet 10 gange

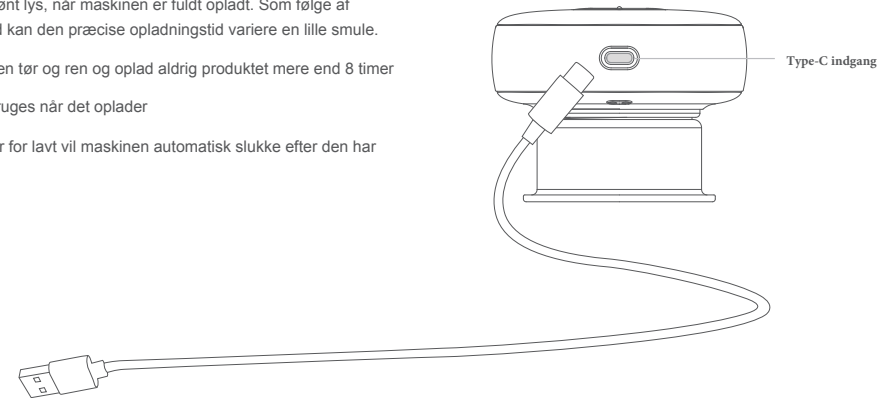


05 | Rengøring og vedligeholdelse

Venligst følg introduktionerne til at rengøre og vedligeholde produktet



Brug ikke væsker såsom vand til direkte at rense selve maskinen.

- Opbevar produktet et sikkert og tørt sted.
- Efterlad ikke produktet i tomgang.
- Brug eller opbevar ikke dette produkt på steder, der er modtagelige for vibrationer, i direkte sollys med høj temperatur og fugtighed, med vand, i nærheden af stærke elektromagnetiske felter eller andet eksplosivt mm.

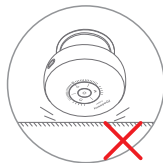

- Rengør selve maskinen med en tør ikke-vævet klud. Efter brug bedes du slukke for maskinen inden den rengøres.

Du må ikke rense selve maskinen med syreholdig og basisk rengøringsmidler, alkohol, fortyndingsmiddel, benzin, neglelakfjerner eller andre opløsningsmidler, hårde børster eller svamp af rustfri stål

06 | Produktproblemer og løsninger

Produktproblemer	Løsninger
Kan ikke tænde for maskinen	1. Hold tænd/sluk knappen nede i 1,5 sekunder 2. Oplad maskinen i 2 timer og prøv igen
Svag sugeevne	1. Geninstaller og stram plastik koppen 2. Tjek om luftindgangen/udgangen er blokeret 3. Tjek om bomuldsfilteret skal erstattes af et nyt
Kan ikke oplade	1. Prøv med en anden stikkontakt 2. Træk adapteren ud for at sikre dig, at den er på plads 3. Tjek og rens adapter indgangen, hvis der er noget snavs eller affald. 4. Erstat adapteren eller opladningskablet

Skil ikke maskinen ad og kontakt os venligst, hvis problemet ikke kan løses

07 | Sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhed

- Brug ikke produktet hvis du har medicinske implantater (pacemaker), livsopretholdende medicinsk elektronisk udstyr (kunstigt hjerte og lunger, elektrokardiogram).

- Opbevar utilgængeligt for børn

OBS



- Må ikke påføres på sår, ar eller områder nær hjertet
- Hvis der opstår ubehag, skal du stoppe med at bruge det og straks informere din læge.
- Sæt plastikkoppen jævnt på huden.
- Anbefaler kun brug på én person. For at anvende det på en anden person, skal du først slukke for maskinen og rengøre plastikkoppen.
- Undgå at bruge det på den samme kropsdel for længe (enheden slukker efter 12 minutter) for at forhindre irritation og mulig hudskade.
- Må ikke bruges på et område, hvor huden har fået blå mærker fra tidligere brug.
- Komprimer ikke kroppens indre organer med enheden for at forhindre ulykker eller fysisk ubehag.

- Brug ikke en skåret eller beskadiget plastikkop.
- Brug det ikke til medicinske effekter
- Dette produkt indeholder lithium-batterier. Du må ikke skille den ad, modificere, nedsænke den i vand eller kaste den i ild for at forhindre beskadigelse og eksplosion.
- Indhent venligst godkendelse fra lægen, hvis noget af følgende gør sig gældende:
allergier; infektionssygdomme; kropstemperatur over 38 °C; i medicinperioden; allergisk over for metaller og rødt lys; lidelser i hjertet, kranienner, blodtryk; forstyrrelse af opfattelser eller huden; sensoriske lidelser på grund af andre perifere kredsløbsforstyrrelser på højt niveau af diabetes eller andre sygdomme; kan ikke udtrykke sin egen vilje frit; bliver behandlet af en læge eller føler sig utilpas.

Det er forbudt at bruge dette produkt, hvis noget af følgende gælder:

- 1. Kvinder under graviditet eller menstruationscyklus
 2. Patienter med ondartede tumorer eller lokal skade og sårdannelse, traumatiske frakturer, åreknuder, akut suppurativ inflammation og tab af hudens elasticitet
 3. Alvorlig hjertesygdom, hjertesvigt, respirationssvigt og alvorligt ødem;
 4. Patienter med dårlig koagulationsmekanisme, spontan blødning eller blødning efter skade;
 5. Mennesker med svær hudallergi eller hudinfektionssygdomme;
 6. Alvorlig nervøsitet, høj feber, kramper, spasmer, manisk rastløshed;
 7. Område omkring hjertet, sanseorganer, private områder eller store blodkar på kroppen.



- Brug venligst dette produkt ved at følge instruktionerne.
- Det er normalt, at produktet varmes op efter at have arbejdet i lang tid.
- Rødme eller blå mærker kan forekomme efter brug af produktet, hvilket er normalt og normalt forsvinder i løbet af 2-6 dage (afhængigt af hver persons hudtype).

- Tilslut eller frakobl ikke USB-opladningskablet med våde hænder for at forhindre elektrisk stød eller ulykker.
- Brug det ikke på børn eller personer uden udtryksevne til at forhindre ulykker.
- Brug ikke dette produkt under kørsel.
- Sæt ikke produktet på det berørte område i for lang tid for at forhindre hudbetændelse.
- Batteriet vil gå ud, hvis det ikke er i brug i længere tid. Følg instruktionerne og genoplad før brug.
- Produktet indeholder batterier. Genbrug dem, når levetiden er overstået.
- Bruges bedst af personer over 16 år.

08 | Garanti

Dette produkt har et års garanti. Startdatoen for garantiperioden er baseret på produktfakturedatoen. Hvis produktet svigter på grund af materiale- eller designfejl inden for et år, reparerer eller udskifter virksomheden nye gratis, undtagen i følgende tilfælde:

1. Ukorrekt brug eller beskadigelse af produktet af brugeren.
2. Uautoriseret adskillelse og vedligeholdelse af produktet.
3. Skader på grund af brug af gaver eller tilbehør, der ikke er officielt tilbudt.
4. Den model, der er inkluderet i fakturaen, svarer ikke til modellen for det reparerede produkt eller er blevet ændret.
5. Gaver og tilbehør.
6. Uden for garantiperiode eller manglende gyldig faktura.
7. Skader forårsaget af force majeure.

09 | Oftest stillede spørgsmål

Hvor lang tid skal jeg cuppe per sted?

Det anbefales at cuppe 3 til 12 minutter per sted på kroppen. Du kan også brug tidstageren i appen til at kontrollere tiden

Hvordan slukker jeg maskinen imens the kører?

Du skal bare trykke på tænde/slukke for at stoppe maskinen

Hvor lang tid tager the for cupping-mærkerne at forsvinde?

Ifølge vores undersøgelse tager det normalt omkring 3-5 dage, før cupping-mærkerne forsvinder. Det kan tage lidt længere tid for nogle personer.