

GYMSTICK™

MASSAGE GUN



ANVÄNDARMANUAL

WWW.GYMSTICK.COM

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER


För din säkerhet, läs denna instruktion noggrant innan du använder produkten!

LADDNING

1. Ladda batteriet helt i upp till 3.5 timmar före första användning, antingen fäst vid eller separerat från enheten.
2. För att ladda, koppla DC-änden av den medföljande 16.8V adaptern till batteriets laddningsport och koppla in AC-ängen i ett vägguttag.
3. När ⚡-symbolen är röd betyder det att apparaten bör laddas.
4. När batteriet är fulladdat slutar den röda ⚡-symbolen att blinka och börjar blinka blått.
5. Batteriet kan laddas när som helst oavsett batterinivå.
6. Det är inte rekommenderat att tömma batteriet till röd nivå.
7. Genomsnittlig drifttid är 3+ timmar beroende på den hastighetsnivå och tryck som används.

ANVÄNDNING

1. Kontrollera att batteriet är laddat.
2. Tryck på av/på-knappen i 3 sekunder för att starta apparaten.
3. Massera valfri kroppsdel i valfri hastighet med det tryck som behövs.
4. Flytta den över kroppen i ca 60 sekunder per område.
5. Tryck på av/på-knappen igen för att justera hastigheten mellan 1-3 nivåer.
6. Använd inte apparaten längre än 1 timme
7. Låt apparaten vila i minst 30

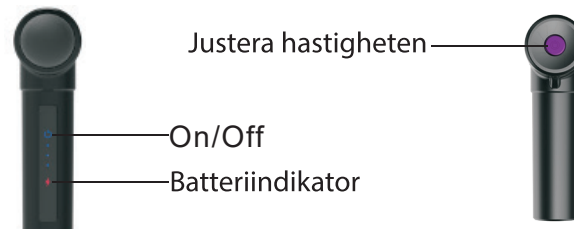

OBS:

1. När batteriet har mindre än 20% kvar kommer ⚡-symbolen längst ned på apparaten att lysa rött, vilket betyder att den behöver laddas.
2. När batteriet är laddat kommer ⚡-symbolen på apparaten att blinka blått.

RENGÖRING & FÖRVARING

1. Använd en lätt fuktad duk för att rengöra apparaten och torka med en mjuk duk.
2. För förvaring eller resor, förvara apparaten i medföljande portföjl.

INTRODUKTION



Massagepistol hjälper att lindra muskelsmär, återhämta efter hård träning, främja blodcirkulation och få bättre sömn. Med Massagepistol kan du på ett bekvämt sätt massera och relaxera olika muskler och därmed försnabba återhämtning samt förminska risker för träningskador. Välj vibrationsnivå och massagehuvud som bäst passar dig och dina mål. Den kraftiga, borstlösa 20W motorn med låg ljudvolym kommer med ett 2000mAh uppladdningsbart litiumbatteri för 3-5 timmars användning.



SPECIFIKATIONER

Model	Description	Rated Voltage	Rated Frequency	Battery Life	Charger	Battery	Amplitude
61147	MASSAGE DEVICE	16.8V	20-58Hz	3-6H	16.8V	4Batteries	8MM





MASSAGEHUVUDEN

1. Bollhuvud

för stora muskler



2. Platt huvud

för rumpa och bröst



3. U-huvud

för ryggrad och nacke



4. Spiralt fingerhuvud

för triggerpunkter och handflator



5. Tummhuvud

för vader, lår och mjuka vävnader



SÄKERHETSINSTRUKTIONER

FARA: FÖR ATT MINSKA RISK FÖR ELCHOCK, BRAND OCH PERSONSKADOR MÅSTE DENNA PRODUKT ANVÄNDAS I ENLIGHET MED FÖLJANDE INSTRUKTIONER!



1. Endast för vuxna.
2. Barn får inte leka med apparaten. Låt inte barn rengöra eller underhålla apparaten utan handledning.
3. Används endast på en torr och ren yta på kroppen, med kläder på, genom att lätt trycka och flytta den över kroppen i ca 60 sekunder per område.
4. Använd endast massageapparaten på kroppens mjuka vävnader för att inte orsaka smärta eller obehag. Använd inte på huvudet eller på något hårt eller benigt område på kroppen.
5. Använd endast de tillbehör som ger önskad effekt.
6. Blåmärken kan uppstå oavsett vilka inställningarna är och vilket tryck som använts. Kontrollera behandlade områden regelbundet och sluta använda apparaten direkt vid första tecken på smärta eller obehag.
7. Håll fingrar, hår och andra kroppsdelar borta från apparatens skaft och baksida pga. klämrisk.
8. Placera inga objekt i ventilationshålen på massagepistolen.
9. Lägg inte i vatten och låt inte vatten komma in i ventilationshålen.
10. Tappa inte och felhantera inte massageapparaten.
11. Laddas endast med den medföljande 16.8V DC-laddaren.
12. Kontrollera apparaten och batteriet före varje användning. Ändra inte apparaten på något sätt.
13. Lämna aldrig massageapparaten utan uppsikt vid användning eller laddning.

ANVÄND INTE DENNA MASSAGEPISTOL ELLER NÅGON ANNAN VIBRATIONSAPPARAT UTAN ATT HA FÅTT TILLSTÅND AV DIN LÄKARE OM NÅGON AV FÖLJANDE PUNKTER PASSAR IN PÅ DIG.



Graviditet, diabetes med komplikationer såsom neuropatiska skador eller näthinneskada, användning av pacemaker, om du nyligen har genomgått en operation, epilepsi eller migrän, diskbräck, spondylolistes eller spondylolysis, om du nyligen har gjort en ledersättning, har spiral, metallskruvar eller plattor eller om du har några andra problem med din fysiska hälsa. Bräckliga individer och barn bör ha sällskap av en vuxen när de använder apparaten. Dessa kontraindikationer betyder inte att du inte kan använda en vibrationsapparat eller träningsapparat, men vi råder dig att konsultera din läkare först.



GYMSTICK.COM

ANSVARSBEFRIELSE:

Tillverkaren har ingen skyldighet att ansvara för förlust, skada eller dylikt som påstås vara orsakad av denna produkt.

För din säkerhet, läs denna instruktion noggrant innan du använder produkten!

GARANTI

Produkten garanteras vara utan materialfel eller tillverkningsfel under ett år räknat från inköpsdatum. Garantin tillges endast ursprunglig inköpare när inhandlat hos en auktoriserad leverantör eller återförsäljare. Om produktfel uppstår under garantitiden repareras eller byts produkten till en motsvarande produkt. Garantin gäller inte om produkten använts eller förvarats felaktigt eller slarvigt.

Garantin omfattar inte:

- Skador som utförts av yttre kraft
- Intervention av obehöriga
- Felaktig montering av produkten
- Felaktigt användande

Produkten är avsedd endast för kontor och hemmabruk. Garantin gäller inte för kommersiellt bruk av något slag.

Tillverkat för:
Gymstick International Oy
Ratavartijankatu 11
15170 Lahti, FINLAND



EN 60335-2-32:2003/A2:2015 Cl. 7.1

Produkten får ej lämnas och sorteras i normalt hushållsavfall. Följ direktiver och instruktioner hos din kommunala återvinningscentral.