

ANVÄNDARMANUAL ACTIVE PILLOW

Säkerhetsanvisningar

Läs säkerhetsanvisningar noga. Vi på ActiveNordic tar inget ansvar för skador som skulle uppstå av att man inte läst manualen. Manualen finns också online på vår hemsida (activenordic.se) och kan komma att uppdateras.

Massage och säkerhet

Massage skall alltid ske med försiktighet, därav bör man alltid ta reda på och rådfråga certifierade specialister inom de område som du skall behandla. Har du sedan tidigare kända sjukdomar skall du alltid rådfråga din läkare innan du använder produkten.

Barn

Active Pillow får inte användas av barn under 12 år oavsett om det skulle vara under en vuxens uppsyn. Inte heller får de rengöra eller i annat syfte lämnas själva med massagekudden.

Laddning, batteri och elektricitet

Active Pillow skall precis som med all elektrisk utrustning innehållande batteri aldrig laddas utan uppsikt. Lämna därför aldrig din massagekudde på laddning när du inte är i närheten. En skadad enhet skall alltid hanteras varsamt och kasseras direkt vid lämpligt miljöstation och får inte laddas eller användas.

Den medföljande laddaren är en snabbbladdare med inbyggd avstängning. Koppla in laddaren, ladda i 3 timmar så är din massagekudde fullt laddad.

Massagekudden går också att använda medans laddaren är inkopplad.

För att batteriet skall bibehålla sin kapacitet och livslängd behövs det laddas minst en gång i månaden om det inte används.

Fukt och vatten

Active Pillow är inte vatten eller fukttät och skall således inte utsättas för varken fukt, vatten eller annan vätska. En vattenskadad massageapparat får inte brukas eller laddas.

Skötselråd

Massageapparaten rengörs avstängd med en trasa. Överdraget går att ta av med hjälp av att öppna dragkedjan.

Återvinning och miljö


Om produkten skall kasseras bör detta göras vid befintlig återvinningsstation. Massagekudden sorteras som elektronik innehållande batteri. Kasta aldrig en Active Pillow i sjö, hav eller annan del av naturen.

Vid minsta tveksamhet fråga vår support (support@activenordic.se) så hjälper vi dig.

Bilkörning och användning

Använd aldrig Active Pillow där din fulla uppmärksamhet krävs, exempelvis vid bilkörning.

Hur du använder din Active Pillow

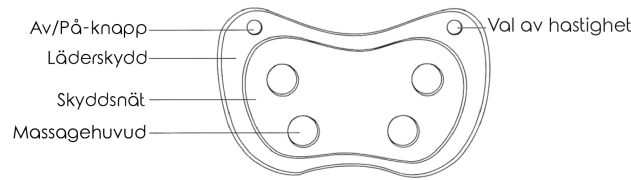

1. Se till att massagekudden är fullt laddad och placera Active Pillow i den position som lämpas bäst för den massage som skall utföras.
2. Starta genom att trycka på knappen ON/OFF en gång (uppe i högra hörnet)
3. Massagekudden startar i nivå 3 med värme, medurs rotation
4. Stäng av eller sätt på värmen med att trycka på ON/OFF-knappen två gånger. Massagepunkterna lyser rött med aktiverad värme och är släckta när värmen är avstängd.
5. Tryck en gång på ON/OF-knappen för att byta rotation på din massage, medurs eller moturs.
6. Tryck på knappen Speed (upp i vänstra hörnet) för att välja hastighet (3 hastigheter)
7. För att stänga av kudden trycks tre snabba tryck på ON/OFF-knappen (uppe i vänstra hörnet)

Notera att förstagångsanvändare skall ta det lugnt i början. Därför är en max 30- minuters massage mer än tillräcklig första veckan.

Teknisk specifikation

Modell: Active Pillow

Arbets temperatur: minimum + 10 till max + 40 grader celsius

Material: ABS + Syntetiskt läder samt bomull

Ljudnivå: 15-20 decibel (beroende på vald nivå)

Volt: 12/24DC

Garanti: 12 månaders maskingaranti från leveransdatum, 6 månaders batterigaranti

Vikt: 700 gram

Lägen: Med värme/utan värme, massage medurs, massage moturs samt 3 hastighetslägen

Vattentålig: Nej

Batterikapacitet: 2400 mAh

Kontakt och företagsinformation

Företagsnamn: VDVA AB

Organisationsnummer: 559222-6764

Onlinesupport: www.activenordic.se

E-post: support@activenordic.se

Adress (ej besöksadress):

VDVA AB

Edsvallabacken 12

12343 Farsta

VDVA

S/N: 7300009076000