

口腔ストレッチ  ウェーピングギア

S A L I O R A  
**b e a u t é**

Massage gums with near infrared power ®

サリオーラ・ボーテ

取扱説明書

ご使用の前は必ず取扱説明書をよくお読みの上、

正しくお使いください。

また、取扱説明書は大切に保管してください。

**TRUSTLEX**  
with your life

## 安全上のご注意

### ⚠ 危険

#### 人が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容

- 下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは絶対に使用しないでください。
  - ・ペースメーカー等の体内埋込型医療機器・人工心肺等の生命維持用医療機器・心電計や点滴器等の装着型の医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作をまねくおそれがあります。
  - ・本機は乾電池を使用しています。火中投入、加熱、高温での使用・放置をしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。

### ⚠ 警告

#### 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- 製品を破棄する以外は、絶対に分解や改造、修理をしないでください。火災、感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。●濡れた手で乾電池の交換をしないでください。感電やけがをすることがあります。●幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。●異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると火災・感電・けがに至るおそれがあります。●使用して気分が悪くなった場合は、使用を中止してください。事故や体調不良の原因になります。●本製品は歯茎のマッサージのために設計されています。本取扱説明書に記載されている以外の目的では使用しないでください。本製品を適切に使用できない場合は、すみやかにご使用を中止してください。また、痛みや不快が生じた場合はすみやかに医師にご相談ください。●自分で意思表示ができるない人（幼児を含む）やお体の不自由な人だけでは使用しないでください。口腔の間隔が弱い方なども使用しないでください。事故やケガの原因になります。

### ⚠ 注意

#### 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

- お子様がご使用の際には、保護者の監督のもとに行ってください。●歯や歯茎に強くあてたり、1力所に長くあてすぎたりしないでください。歯や歯茎を傷つけることがあります。歯周病がひどい人などは歯科医にご相談ください。●治療中の歯など口腔内で気になる症状がある場合は、その部位での使用はしないでください。けがの原因になります。●本製品は食器洗浄機で洗浄・乾燥しないでください。●シンナーやベンジン、アルコールは使用しないでください。故障や破損の原因になります。

## 使用上のご注意

- 本製品はパーソナルケア用であり、歯科医院や医療機関において複数の患者に使用するためのものではありません。●一般的の口腔衛生用品を初めてご使用になる場合と同様、過去2ヶ月間に口腔内の治療や歯茎の手術を受けられた場合は、本製品をご使用になる前に、あらかじめ歯科医師にご相談ください。●本製品をご使用の結果、万が一激しい出血があった場合や、本製品を使い始めて1週間経過後も出血が認められる場合には、ご使用を中止し歯科医師にご相談ください。●健康面で不安なことがある場合は、ご使用前にかかりつけの医師にご相談ください。●ボタンを押す時は、指の腹でボタンの中心部を押してください。爪で押すと故障の原因となります。

## 操作方法と使い方

### ●電源オン／オフ

電源ボタンをオンにすると、超音波振動と赤外線出力が開始し、3分後に自動でオフします。動作中にオフをしたい場合は再度電源ボタンを押してください。

① 差替用ヘッドキャップ:ピンク




② 差替用ヘッドキャップ:ピンク




③ 差替用ヘッドキャップ:ブルー

歯茎をマッサージ

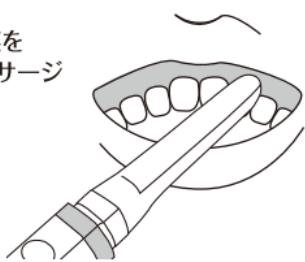


④ 差替用ヘッドキャップ:ブルー

唇をマッサージ

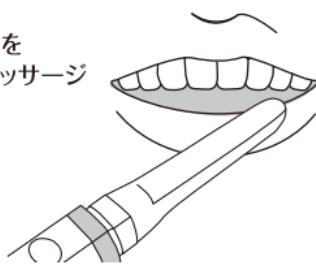

## ●ヘッドキャップについて

本体のキャップを外し、差替用のヘッドキャップをつけてご使用ください。

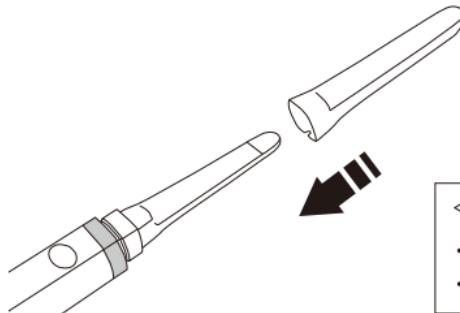


<差替用ヘッドキャップの種類>

- ・ブルー:歯茎用
- ・ピンク:美容用

## ●乾電池の替え方

本体の下部を反時計回りに回し、蓋を外します。マイナス極を頭にして2本連続で入れ、蓋を時計回りに回して閉めます。

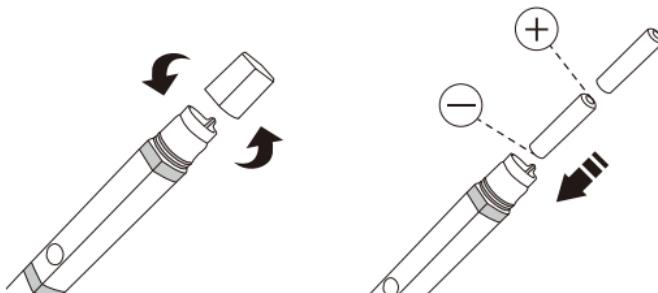


※濡れた手で電池交換は絶対にしないでください。


※使用回数(新品電池の場合)、3分の使用で150~200回。

使用後は、ヘッドキャップのみ水洗いをして  
清潔に保つように掃除をしてください。

※本体は防水加工を施していないため、  
水に近づける行為はしないでください。

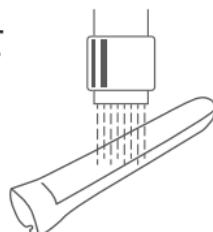

## セット内容と各部の名称

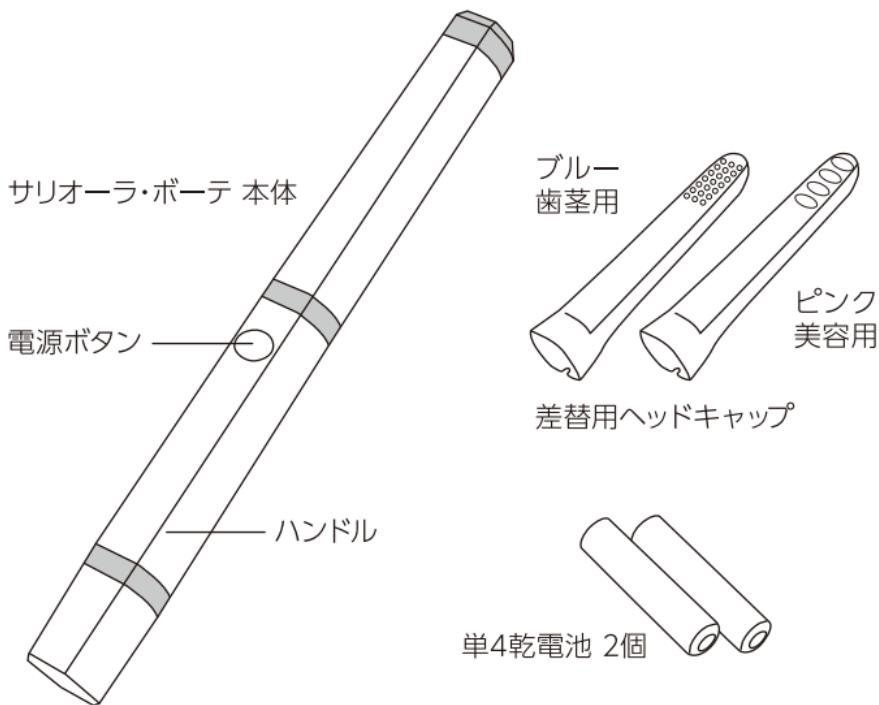

## 製品仕様

商 品 名：サリオーラ・ボーテ  
本体サイズ：長さ220mm  
              持ち手直径23.5mm  
本 体 重 量：53g  
電 源 方 式：単4乾電池2個  
使 用 温 度 范 囲：0°C～45°C

トータル使用時間：10時間以上  
消 費 電 力：約0.5w  
赤外線出力：640mW  
超音波振動：240kHz  
保 証 期 間：お買い上げより1年

# 保証書

- ・保証書は必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。
- ・保証期間はお買い上げ日から1年間です。使用中に異常が生じたときは、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

製品番号	
購入年月日	
購入先	
販売先	

本製品をご購入なさった日より1年以内、且つ正常にお取り扱いいただいた場合に無償で修理いたします。

- ・修理を申請される時、商品と本保証書を提出してください。
- ・保証期間内に下記のいずれかに該当する場合は無償修理範囲外となり、材料を別途頂戴いたしますのでご了承ください。
- ・誤操作による故障及び損傷
- ・不当修理や改造により招かれた故障及び損傷
- ・購入後、輸送、落下などによる故障及び損傷
- ・火災、地震、水災、落雷及びその他気候による故障及び損傷
- ・保証期間切れの修理にあたっては材料費やサービス料を別途頂戴いたします。
- ・本保証書は再発行しておりません。大切に保管してください。

製造元 株式会社トラストレックス

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町2-11 第2喜巴ビル2階  
TEL: (06) 6378-1611 <http://www.trustlex.co.jp>