



# UNIQE

## Bedienungsanleitung

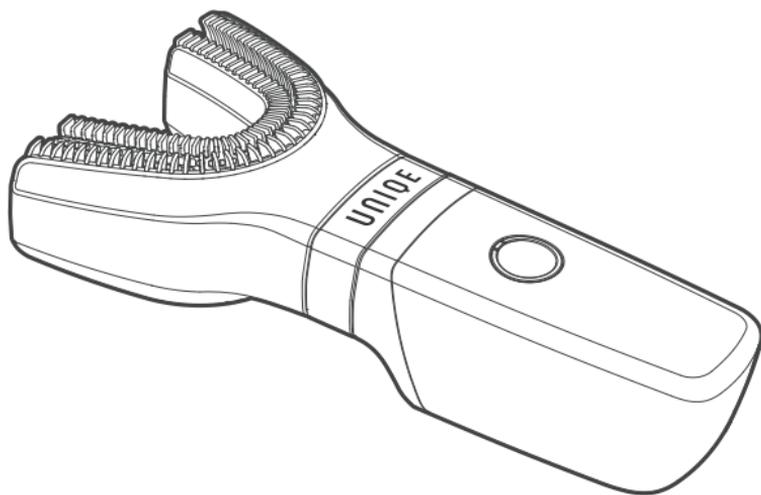

BLBR GmbH, Lil-Dagover-Ring 5 82031 Grünwald Deutschland

# Uniqe One™

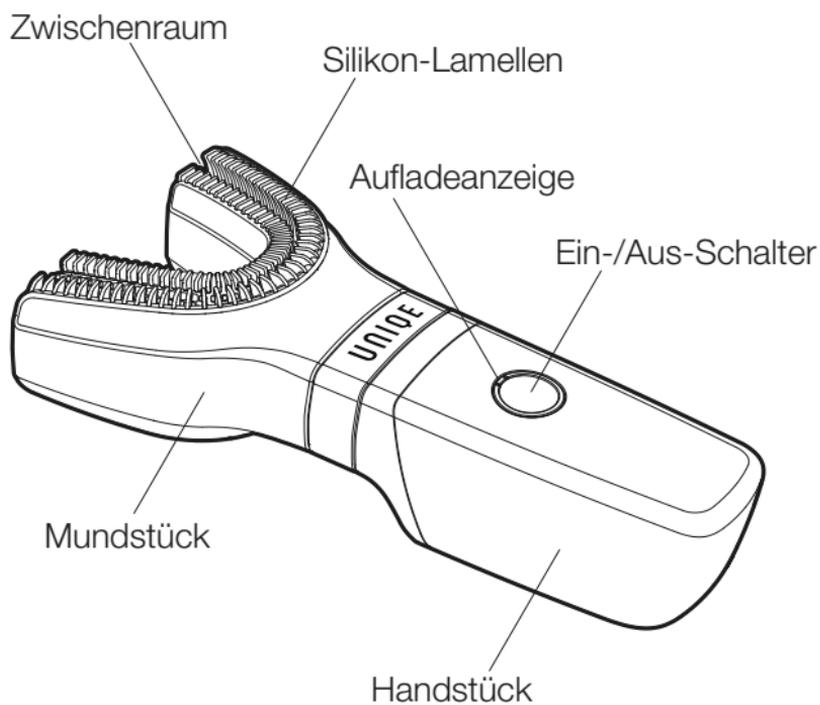

# Übersicht

1. Einführung
2. Lieferumfang
3. Unique One™-Funktionsweise
4. Laden der Unique One™
5. Befestigung des Mundstücks
6. Benutzung des Unique™-Systems
7. Reinigung der Unique One™
8. Entsorgung
9. Technische Daten

# 1. Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Unique™! Um die Unterstützung von Unique™ optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter

**[www.unique.com/yourstart](http://www.unique.com/yourstart)** .

Bevor Sie mit der Benutzung Ihrer Unique One™ beginnen, möchten wir Sie kurz um aufmerksame Beachtung folgender Hinweise bitten:

## **Gefahr**

- Halten Sie die Ladestation von jeglichen Flüssigkeiten fern. Stellen Sie die Ladestation nicht über oder direkt bei einer mit Wasser gefüllten Badewanne bzw. einem Waschbecken ab.
- Tauchen Sie die Ladestation nicht in Flüssigkeiten. Nach der Reinigung, achten Sie darauf, dass die Ladestation völlig trocken ist, bevor Sie diese wieder an die Steckdose anschließen.

## **Warnung**

- Die äußere Anschlussleitung des Transformators kann nicht ersetzt werden.
- Sollte die Leitung beschädigt sein, ist der Transformator zu entsorgen.
- Benutzen Sie die Ladestation nicht im Freien oder in der Nähe von heißen Oberflächen.
- Das Ladegerät besitzt die Schutzklasse IPX4
- Laden Sie die Unique One nur mit dem mitgelieferten kontaklosen Laderiegel (Modell Nr. LYD0501000EG1)
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Das Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Bei Beschädigungen wenden Sie sich bitte an das Service-Center unter **[www.unique.com/service](http://www.unique.com/service)** .
- Wenn nach Benutzung dieses Produkts übermäßiges Zahnfleischbluten auftritt und länger als eine Woche anhält, Unbehagen oder Schmerzen auftreten, konsultieren Sie Ihren Zahnarzt.

- Dieses Produkt ist ausschließlich zum Reinigen von Zähnen und Zahnfleisch vorgesehen. Benutzen Sie es nicht für andere Zwecke.
- Zahnbürsten können von Kindern und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.


### **Hinweis**

- Reinigen Sie das Mundstück, Handstück und die Ladestation nicht im Geschirrspüler. Den Einsatz der Ladestation können Sie im Geschirrspüler reinigen.
- Wenn in den vergangenen zwei Monaten ein chirurgischer Eingriff in Ihrem Mund- und Kieferbereich vorgenommen wurde, konsultieren Sie vor Benutzung des Produkts Ihren Zahnarzt.
- Das Produkt erfüllt die Sicherheitsstandards für elektromagnetische Geräte. Wenn Sie beispielsweise einen Herzschrittmacher oder andere ähnliche Implantate tragen, konsultieren Sie vor Benutzung dieses Produkts Ihren Arzt oder den Hersteller Ihres Implantats.
- Sollten Sie Bedenken wegen Ihrer Gesundheit haben, konsultieren Sie vor Benutzung des Produkts Ihren Arzt.
- Das Produkt ist ein Gerät zur individuellen Mundpflege und nicht für die gleichzeitige Benutzung mehrere Personen geeignet.
- Ersetzen Sie das Mundstück alle sechs Monate oder früher, wenn Anzeichen von Abnutzungen auftreten.
- Benutzen Sie nur die von Unique™ hergestellten Mundstücke.
- Technische Änderungen am Produkt sind vorbehaltenlich.

## 2. Lieferumfang

1. Mundstück in drei Größen (S, M und L)
2. Handstück
3. Ein-/Aus-Schalter
4. Ladestation
  - 4.1 Einsatz Ladestation
  - 4.2 Laderiegel Ladestation
  - 4.3 Ladestecker
5. Zahnschaum Unique Flow™ (zwei Dosen)

Hinweis: Abhängig vom gekauften Modell kann der Lieferumfang variieren.

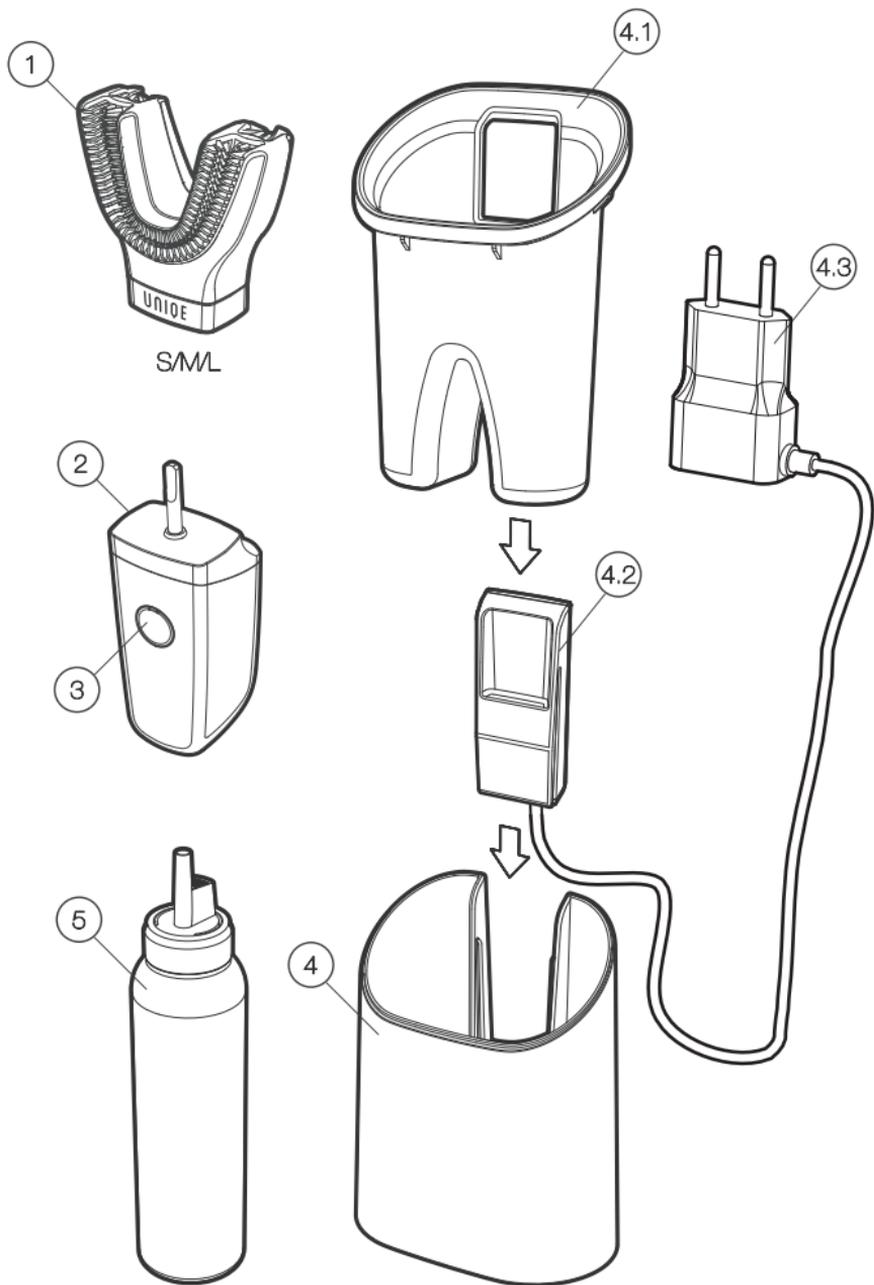

### 3. Uniqe One™-Funktionsweise


Das patentierte Uniqe™-System ermöglicht mit seinem vollautomatischen Programm die gleichzeitige und vollständige Reinigung aller Zahnflächen über den gesamten Reinigungszeitraum.

Durch das schonende Verfahren der Uniqe One™ in Kombination mit dem Zahnschaum Uniqe Flow™ werden sämtliche zu reinigenden Zahnflächen mit optimalem Druck und Winkel gleichzeitig von Beginn an erreicht und mit den essentiellen Wirkstoffen versorgt.

Das Ergebnis dieses innovativen Ansatzes ist eine der gründlichsten Zahnreinigungen bei gleichzeitiger Pflege des Zahnfleischs innerhalb von nur einer Minute. Die Wirkung ist durch wissenschaftliche Studien erwiesen.

## 4. Laden der Uniqe One™

- Stecken Sie den Ladestecker in eine Steckdose ein.
- Stellen Sie die Uniqe One™ mit dem Mundstück nach unten gerichtet und den Ein-/Aus-Schalter nach vorne zeigend in die Ladestation. Beachten Sie, dass das Handstück mit der Rückseite an den Laderiegel gelehnt ist und die Aufladeanzeige bei Ladebeginn kurz grün aufleuchtet.
- Sobald die Uniqe One™ vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Aufladeanzeige durchgehend grün.
- Gelbes Blinken bedeutet, dass der Akku fast leer ist (verbleibende Benutzungsdauer für weniger als drei Anwendungen).

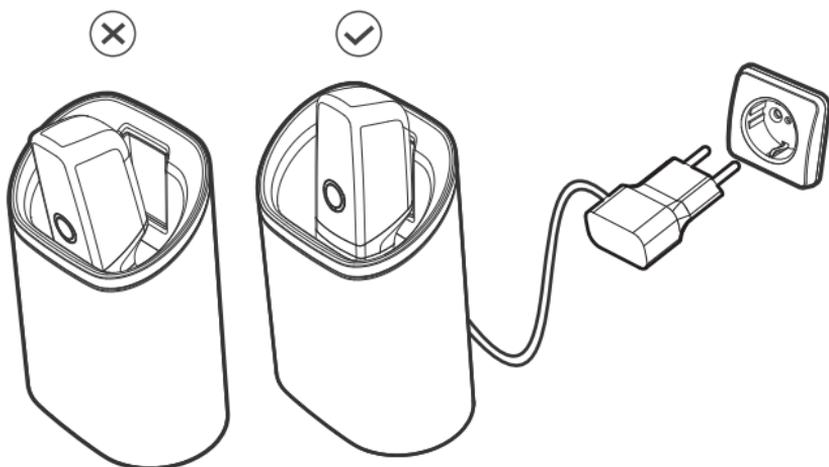


## 5. Befestigung des Mundstücks

Werkseitig wird Ihre Unique One™ mit einem aufgesteckten Mundstück der Größe M geliefert. Diese Größe ist für den überwiegenden Teil der Gebisse ausgelegt.


Wenn Sie die Größe M für Ihr Gebiss als zu klein oder zu groß empfinden, wechseln Sie einfach auf die Größe S oder L.

- Ziehen Sie das Mundstück M am Aluminiumring ab.
- Stecken Sie das neue Mundstück vollständig auf das Handstück auf. Achten Sie darauf, dass sich der Schriftzug „Unique“ auf der Vorderseite und die entsprechende Kennzeichnung S, M oder L auf der Rückseite befinden.

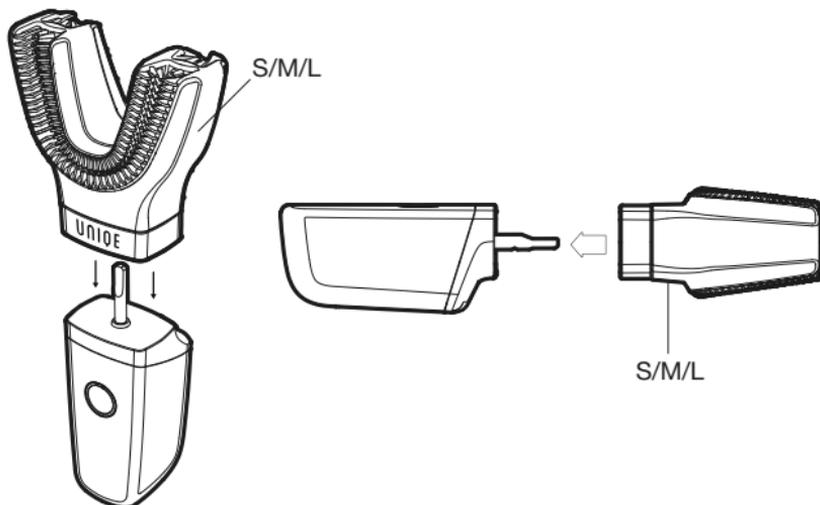


## 6. Benutzung des Unique™-Systems

- Feuchten Sie die Silikon-Lamellen unter fließendem Wasser an.
- Halten Sie die Unique Flow™-Dose mit dem Sprühknopf über die Silikon-Lamellen. Drücken Sie behutsam den Sprühknopf und füllen die Zwischenräume der Ober- und Unterseite des Mundstücks mit dem Zahnschaum aus, dass alle Lamellen gleichmäßig bedeckt sind.

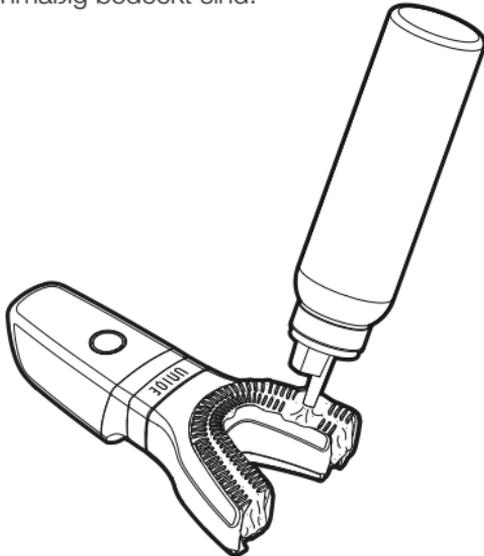

- Nehmen Sie das Mundstück in den Mund und schließen Sie diesen. Der Ein-/Aus-Schalter muss dabei nach oben zeigen. Ihre Zähne sollten sich vollständig im Zwischenraum der Silikon-Lamellen befinden.
- Schalten Sie die Unique One™ am Ein-/Aus-Schalter ein.


- Führen Sie während des Reinigungsvorgangs leicht mahrende Kaubewegungen durch ohne dabei fest zuzubeißen und ohne dass die Zähne das Mundstück verlassen.
- Führen Sie zusätzlich die Unique One™ mit der Hand leicht nach links und rechts.
- Nach 60 Sekunden schaltet sich die Unique One™ automatisch aus. Nehmen Sie das Mundstück aus dem Mund und spülen Sie das Mundstück unter fließendem Wasser gründlich ab.
- Zur Aufbewahrung und Laden stellen Sie die Unique One™ mit dem Mundstück nach unten gerichtet und den Ein-/Aus-Schalter nach vorne zeigend in die Ladestation.
- Beachten Sie, dass das Handstück mit der Rückseite an den Laderiegel gelehnt ist und die Aufladeanzeige bei Ladebeginn kurz grün aufleuchtet.

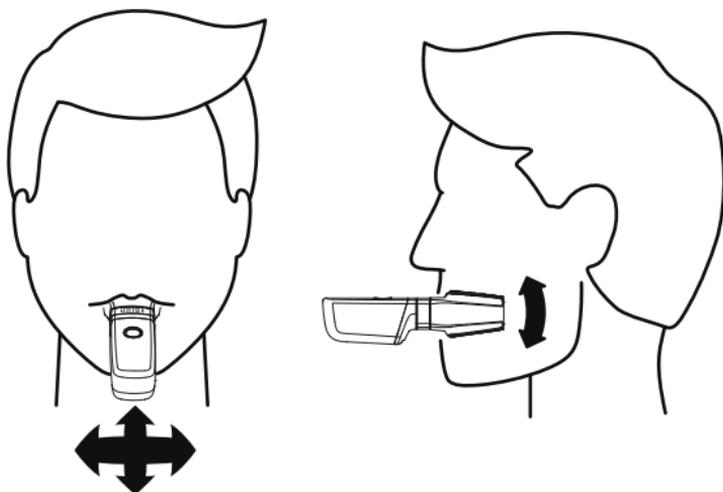

## 7. Reinigung der Unique One™

Zusätzlich empfehlen wir Ihnen die Reinigung einmal wöchentlich durchzuführen.

- Entleeren Sie den Einsatz der Ladestation und füllen Sie diesen mit frischem Wasser bis ca. zur Hälfte auf.
- Geben Sie eine Wasserstoffperoxid-Tablette (handelsübliche Gebissreinigungstablette) hinzu und warten Sie, bis sich diese vollständig aufgelöst hat.
- Stellen Sie die Unique One™ mit dem Mundstück nach unten in die Ladestation hinein. Achten Sie darauf, dass nur das Mundstück von der Flüssigkeit bedeckt ist.
- Nehmen Sie die Unique One™ nach ca. 15 Minuten heraus und spülen Sie das Mundstück unter fließendem Wasser gründlich ab.
- Entleeren Sie den Einsatz der Ladestation und spülen diesen ebenfalls gründlich aus.
- Setzen Sie die Unique One™ wieder zurück in den Einsatz ein.

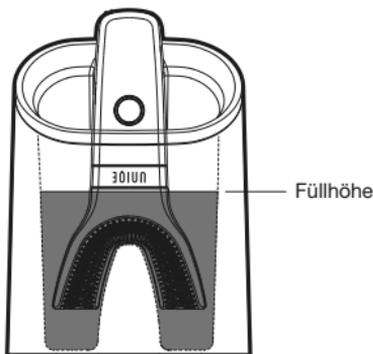

## 8. Entsorgung

- Die Unique One™ und die Unique Flow™-Dosen enthalten wertvolle Stoffe und Substanzen, die nicht in den Hausmüll gelangen dürfen. Entsorgen Sie die Unique One™ und die Unique Flow™-Dosen gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften zur Wiederverwertung in einem Recyclingbetrieb.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sortenrein.



- Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Alle Batterien und Akkus können dadurch einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden. Batterien und Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind durch dieses Zeichen und durch chemische Symbole gekennzeichnet.  
(Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber, Pb für Blei)

## 9. Technische Daten

Modellnummer:	UNQ-1
Netzteil:	Input: 100-240V ~ 50/60Hz 0,25A Max Output: 5,0V 1,0A 5,0W
Akku:	3,7V DC 250mAh
Ladestation:	Input: 5,0V
Schutzklasse:	Klasse III
Schutzgrad:	IP57(Griff/Ladestation)
Vibration:	120Hz
Timer:	60 Sekunden
Betriebsdauer:	ca. 12 Tage bei Benutzung 2x täglich
Ladezeit:	unter 3 Stunden
Konformität:	  

