

**SIZEN** 8<sup>e</sup>

**SMART RECOVERY SYSTEMS**

MANUAL DE USO

**3, 2, 1... Start Recovery!**

- 4** **Introducción**
- 5** **Características**
- 6** **Size 6e**
- 8** **Funcionamiento**
  - Inicio básico
  - Montaje
  - Dispositivo
  - Configuración
- 14** **Aplicaciones**
- 15** **Modos de masaje**
  - Modo 1: Relax
  - Modo 2: Secuencial
  - Modo 3: Doble relax
  - Modo 4: Full recovery
  - Modo 5: Doble onda
  - Modo 6: Triple pulso
- 22** **Conexión a la APP**
- 23** **Correcta manipulación**
- 24** **Mantenimiento y Limpieza**
- 25** **Especificaciones Técnicas**

## SIZEN

La técnica por presión de aire (presoterapia) es un sistema comúnmente usado tanto en el ámbito estético como en el ámbito deportivo para ayudar a aliviar hinchazones, cargas musculares y mejorar el drenaje linfático entre otras aplicaciones.

La compresión aplica un masaje suave desde los pies, potenciando el flujo corporal, siendo además capaz de producir un efecto de drenaje reductor de peso, de células de grasa o depósitos de sustancias desechables por el organismo.

Su uso ayuda a mejorar la circulación de la linfa (líquido transparente pobre en proteínas pero rico en lípidos, que recorre los vasos del sistema linfático) produciendo un efecto que “exprime” secuencialmente esos vasos desde los puntos distales a proximales, previniendo molestias de piernas y respiración y aliviando los efectos de la hinchazón.

En definitiva...  
¡Recuperándonos!

## Características

1. Pantalla digital LED amplia e intuitiva.
2. Masaje ajustable, con 6 modos dinámicos por presión de aire.
3. 8 cámaras de aire independientes que conectan con 8 canales de aire en cada accesorio.
4. Duración máxima por tratamiento de 60 min, ajustables de 5' en 5'.
5. Los accesorios están fabricados en TPU y Nailon de alta calidad.
6. Presión ajustable de 10 en 10. De 30 hasta 250 mmHg.
7. Conexión a Smartphone por Bluetooth y manejo mediante APP.
8. Auto-apagado por falta de uso y tras finalizar el programa de masaje.
9. Sin batería. Conexión a la red eléctrica.
10. No necesita montaje de mangueras.



1

2




1. Unidad principal
2. Par de botas o pants

Elementos

6

Elementos

3

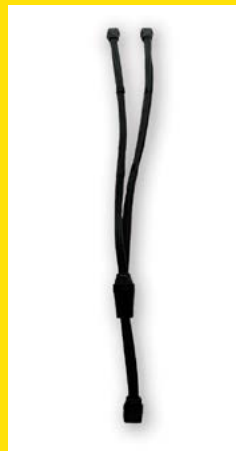

4



5




3. Mangueras de conexión
4. Conector a la red
5. QR descarga del manual de uso.

7

# SIZEN

Conecta el equipo entre sí de la siguiente manera y asegúrate que las flechas coincidan al conectarlo:

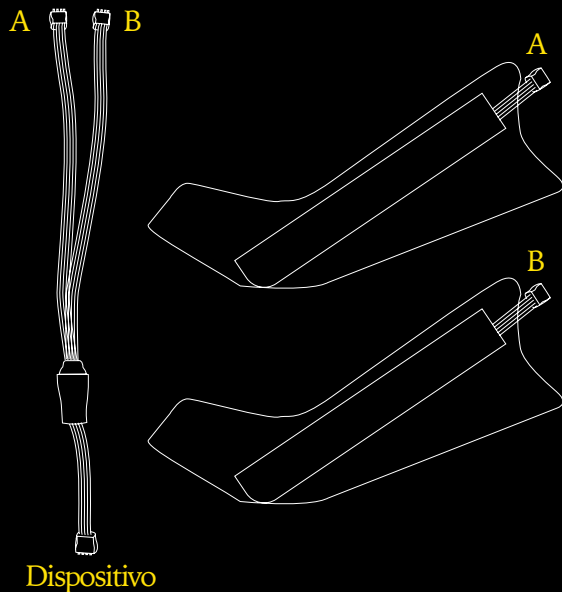

Montaje  
Funcionamiento

## Funcionamiento Inicio básico


**1.** Conecta las dos mangueras largas e iguales al conector doble, y este al dispositivo.

**2.** Colócate los accesorios tumbado/a o sentado/a, con las piernas extendidas.

**3.** Presiona el botón de encendido del dispositivo durante 3 segundos.

**4.** Ajusta el tiempo deseado, nivel de presión, modo y presione el botón de inicio.

En caso de disponer de otro accesorio (C) y conector dual (x), monta las mangueras de la siguiente manera:

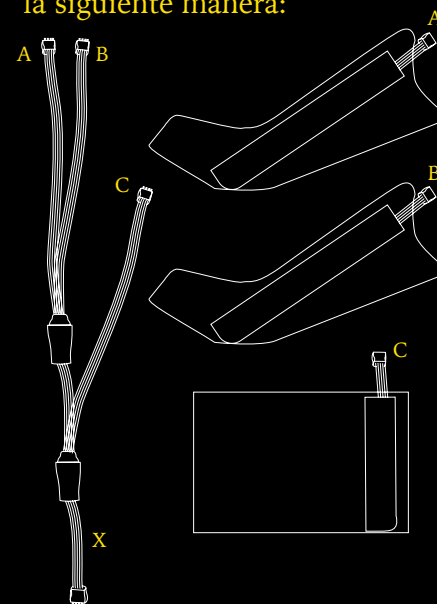

# SIZEN

**SIZEN**

### Detalles del panel de control:

- A** Conexión de las botas/pants
- B** Tiempo
- C** Presión
- D** Modos de masaje
- E** Botón de Encendido
- F** Selección cámara individual para activarla/desactivarla
- G** Activar/desactivar cámara individual
- H** Inicio/Pausa



Dispositivo  
Funcionamiento

Funcionamiento  
Dispositivo

### Botón de Encendido (I):

Pulsa el botón de encendido durante 3 segundos para poner en marcha el dispositivo. Si el equipo no está siendo usado durante un tiempo, este se apagará de forma automática para la salud de la batería; también se apagará al finalizar la sesión.

### Inicio / Pausa (H):

Presionando sobre este botón dará comienzo el programa deseado. Volviendo a pulsar, se pausará la sesión. Transcurridos unos segundos, si no se realiza ninguna acción, el equipo se apagará automáticamente.

### Activar / Desactivar cámaras (F y G):

Usa el botón "select" para seleccionar la cámara que quieres apagar (o encender en caso de tenerla apagada), con el botón "on/off" confirma la acción.

**SIZEN**

## Modos de masaje:

En el indicador **MODE** seleccione **1, 2, 3, 4, 5, 6** utilizando dicho botón para llegar al tipo de masaje que desea. Los programas **5** y **6** son exclusivos del modelo 8 PRO y 8e.

## Tiempo:

Establezca el tiempo de la sesión en el indicador **TIME** usando los botones **+** y **-**.

Dispone de un rango de tiempo de 5 a 60'.

El último tiempo usado en la última sesión es el mismo que aparecerá en la siguiente por defecto. Pulsando la opción **+** o **-** el tiempo se incrementa o reduce en intervalos de 5' cada vez que pulse.

Cuando el tiempo seleccionado termina, el dispositivo se apaga automáticamente.

## Presión:

El rango de presión inicial es de 90 mmHg, pudiendo seleccionar desde 25 hasta 250 mmHg.

En el indicador **PRESSURE**: Una pulsación en la opción **+** o **-** aumenta o reduce la presión en intervalos de 10 mmHg. La última presión utilizada será la que aparezca por defecto en el equipo.

## Cámaras de tratamiento:

Los indicativos **① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧** representan las 8 cámaras de los accesorios Sizen. El ajuste inicial usa por defecto todas las cámaras, se muestra con sus indicadores iluminados. Cuando se infla/desinfla una cámara, su indicador de luz parpadea. Para activar/desactivar una/s cámaras concretas usa los botones "select" y "on/off", detallados en la página 11.

## \_ Sistema de técnica compresiva de las extremidades:

Potencia el flujo corporal y de la linfa en brazos y piernas, a la vez que mejora la presión sobre los tejidos musculares, reduciendo considerablemente la hinchazón y la molestia. Incluso ayuda a personas con ciertas incapacidades, así como gente de avanzada edad.

## \_ Masaje deportivo:

Ayuda a desentumecer los músculos tanto antes como después de las sesiones de entrenamiento, favoreciendo la eliminación del ácido láctico.

## \_ Uso preventivo:

Ayuda a reducir las probabilidades de sufrir ciertas moléstias y acumulación de líquidos.

## \_ Flujo corporal :

Linfa y otros fluidos del organismo mediante su masaje por aire comprimido.

**Modo 1:** Relax piernas: Indicado para aplicaciones deportivas y estéticas.

**Modo 2:** Secuencial: Indicado para aplicaciones deportivas.

**Modo 3:** Doble Relax Piernas: Indicado para aplicaciones deportivas y estéticas.

**Modo 4:** Full Recovery: Indicado para aplicaciones deportivas y estéticas.

La explicación de los modos de masaje es para todos los accesorios.



## Modo 1: Relax piernas



“Relax piernas” Realiza un excelente y relajante masaje empezando por la cámara 1 de los pies. Cámara a cámara va subiendo hasta la última, y recuperar así tus piernas después de horas de pie.

## Modo 2: Secuencial



“Secuencial” Nota como cada una de las cámaras, se va inflando, y sumandose una a una, apretando finalmente toda la pierna por completo, desde el pie hasta la ingle. Es muy recomendable para drenaje linfático o bien diluir el ácido láctico después de un entrenamiento.

## Modo 3: Doble Relax piernas



“Doble Relax piernas” Infla y desinfla de dos en dos las cámaras de pies hasta ingle. Indicado para sesiones intensas de entrenamiento o una relajación superior de las piernas.

## Modo 4: Full Recovery



“Full recovery” Realiza el masaje de una forma más explosiva, inflando y desinflando las 6 cámaras a la vez, potenciando mucho la circulación. Para sentir esa sensación de masaje de una manera rápida y notoria.

**SIZEN**

## Modo 5: Doble onda

Exclusivo de los equipos 8 PRO / 8e



“Doble onda” Realiza un masaje de 2 en 2 cámaras y repetidamente realizando una doble compresión. Recibe una intensa relajación muscular, indicado para estética o deporte.

Modos de masaje  
Modo 5

Modos de masaje  
Modo 6

## Modo 6: Triple Pulso

Exclusivo de los equipos 8 PRO / 8e



“Tripe pulso” Diluye el ácido láctico además de relajar el musculo, llenando 3 cámaras y avanzando poco a poco. Una de las múltiples ventajas de disponer de 8 cámaras. Indicado para después de largas sesiones de entrenamiento.

**SIZEN**

## SIZEN

**Conexión Bluetooth para controlar tu Sizen con la APP, desde tu smartphone y de una muy sencilla.**

**Solo tienes que seguir los siguientes pasos:**


- 1** Ve a Google Play o App Store, según si tienes un dispositivo Android o Apple, y descarga la App “Tuya Smart”.
  - 2** Una vez descargada, abre la aplicación y crear tu cuenta.
  - 3** Con el registro ya realizado, selecciona el país, introduce tu usuario (email) y contraseña e inicia sesión.
  - 4** En la parte superior derecha verás el símbolo “+”, haz clic en él. Con esta acción vas a añadir tu dispositivo SIZEN.
  - 5** La aplicación buscará a través del Bluetooth tu nueva Sizen. Tendrás que permitir el acceso de “Tuya Smart” a tu Bluetooth y emparejar los dispositivos.
  - 6** Añade el dispositivo de presoterapia encontrado.
- y... ¡Ya puede controlar tu equipo Sizen!**

Connexión  
a la APP

## Correcta manipulación

\_ Cuando guardes el equipo, ten cuidado en desconectar la clavija que va del dispositivo al accesorio, desconectalo suavemente.

\_ Guarda las mangueras de una manera que no coja formas indeseadas, ya que eso podría estropear el material, y acortar su vida útil.

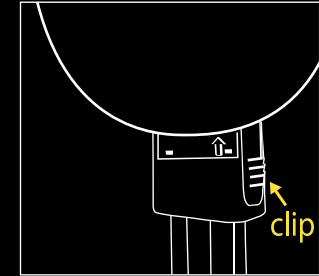

\_ Conecta siempre los conectores de las mangueras haciendo coincidir las marcas de conexión (flecha y endidura), en caso contrario podrías dañar la conexión e invalidar con ello la garantía.

\_ No desmontes, ni despegues las mangueras de su accesorio, bajo ningún concepto.

\_ No abras la cremallera de los accesorios cuando el equipo esté en funcionamiento ni el accesorio inflado. Podría producir una apertura total del accesorio causando daños en la parte del cuerpo en la que se este realizando el tratamiento y también del material.

SIZEN

## Mantenimiento y limpieza

- \_ Apaga el dispositivo antes de la limpieza.
- \_ Usa un paño seco para el dispositivo y uno ligeramente humedecido para los accesorios.
- \_ Guarda tu equipo en un lugar limpio y seco.
- \_ Protege tu equipo de la luz solar directa y fuentes de calor.
- \_ Utiliza siempre el conector a la red original, el que se incluye en este pack, de lo contrario podrías dañar el equipo.

### Advertencias:

- \_ Coloca el dispositivo sobre una superficie plana.
- \_ El equipo solo puede repararse por el Servicio Técnico de SIZEN, de lo contrario, perderá su garantía.
- \_ Puedes consultar con tu médico antes de usar Sizen si tienes dudas sobre su uso en tu cuerpo. No está diseñado para diagnosticar, tratar o curar ninguna enfermedad. **No es un producto sanitario**
- \_ Las contraindicaciones incluyen (pero no se limitan a): Enfermedades inflamatorias agudas de la piel, arritmia, erisipela, tromboflebitis profunda, edema pulmonar, trombosis venosa aguda, hipertensión inestable, uso de marcapasos.

**SIZEN**

**SIZEN**



**Cámaras:** 8 cámaras

**Tamaño:** 280 x 90 x 83 mm

**Peso:** 1,02 kg

**Consumo de energía:** 35 W

**Rango de presión:** 25-250 mmHg

**Tiempo ajustable:** 0-60 min.

**Sonoridad:** 45 dB.

**Entrada:** AC 100V-240V; 50Hz-60Hz



**Especificaciones**



Sistema de presoterapia  
de 8 cámaras  
y conexión Bluetooth.

[sizensrs.com](http://sizensrs.com)