

SIZEN 8^e

SMART RECOVERY SYSTEMS

MANUALE D'USO

3, 2, 1... Start Recovery!

- 4 Introduzione**
- 5 Caratteristiche**
- 6 Sizen 6e**
- 8 Funzionamento**
 - Avviamento di base
 - Assemblaggio
 - Dispositivo
 - Configurazione
- 14 Applicazioni**
- 15 Modalità di massaggio**
 - Modalità 1: Relax
 - Modalità 2: Sequenziale
 - Modalità 3: Doppio relax
 - Modalità 4: Full recovery
 - Modalità 5: Doppia onda
 - Modalità 6: Triplo impulso
- 22 Collegamento all'APP**
- 23 Corretta gestione**
- 24 Manutenzione e Pulizia**
- 25 Specifiche Tecniche**

SIZEN

La tecnica della pressione dell'aria (pressoterapia) è un sistema comunemente utilizzato in ambito estetico e sportivo per alleviare gofiori, affaticamento muscolare e migliorare il drenaggio linfatico, tra le altre applicazioni.

La compressione applica un massaggio delicato a partire dai piedi, aumentando il flusso sanguigno del corpo, ed è anche in grado di produrre un effetto drenante, riducendo il peso, le cellule di grasso o i depositi di sostanze smaltite dall'organismo.

Il suo utilizzo contribuisce a migliorare la circolazione della linfa (un fluido trasparente, povero di proteine ma ricco di lipidi, che si raccoglie nei vasi del sistema linfatico) producendo un effetto che "spreme" in maniera sequenziale questi vasi dai punti distali a quelli prossimali, prevenendo i disturbi alle gambe e alla respirazione e alleviando gli effetti del gonfiore.

In breve...
Ti rimette in sesto!

Introduzione

Caratteristiche

1. Display digitale a LED grande e intuitivo.
2. Massaggio regolabile, con 6 modalità dinamiche in base alla pressione dell'aria.
3. 8 camere d'aria indipendenti che si collegano a 8 canali d'aria in ciascun accessorio..
4. Durata massima per trattamento 60 minuti, regolabile da 5' a 5'.
5. Gli accessori sono realizzati in TPU e nylon di alta qualità.
6. Pressione regolabile di 10 in 10. Da 30 a 250 mmHg.
7. Connessione allo smartphone tramite Bluetooth e funzionamento tramite APP.
8. Spegnimento automatico in caso di mancato utilizzo e al termine del programma di massaggio.
9. Senza batteria, collegamento diretto alla corrente elettrica.
10. Non è necessario il montaggio dei tubi.

SIZEN



1

2




1. Unità principale
2. Un paio di stivali o pants

Elementi

6

Elementi

3

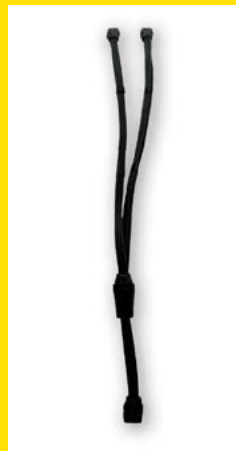

4



5




3. Tubi di collegamento
4. Connettore di rete.
5. QR download del manuale.

7

SIZEN

Collega gli apparecchi tra di loro nel seguente modo e assicurati che le frecce siano allineate quando li colleghi:

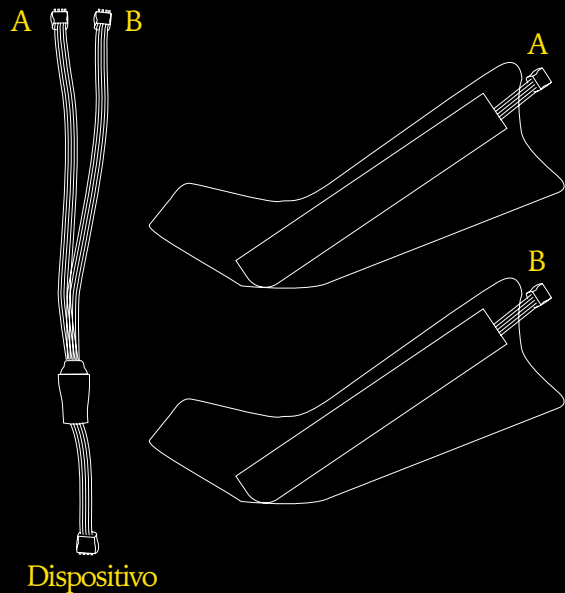

Avviamento di base
Funzionamento

Funzionamento Montaggio


1. Collegare l'accessorio al tubo di collegamento e quest'ultimo al dispositivo.

2. Posizionare gli accessori in posizione sdraiata o seduta, con le gambe distese.

3. Premere il pulsante di accensione del dispositivo per 3 secondi.

4. Impostare il tempo desiderato, il livello di pressione, la modalità e premere il pulsante di avvio.

Nel caso in cui si disponga di un altro accessorio (C) e di un connettore doppio (x), montare i tubi nel seguente modo:

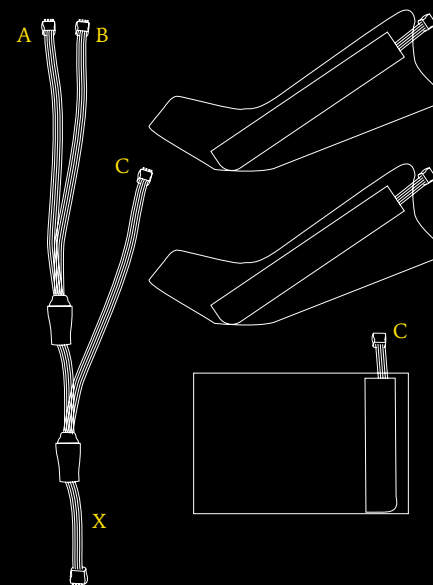

SIZEN

SIZEN

Dettagli del pannello di:

- A** Collegamento degli stivali
- B** Tempo
- C** Pressione
- D** Modalità di massaggio
- E** Pulsante di accensione
- F** Selezione camere individuale per attivarla/disattivarla
- G** Attiva/disattiva camere individuale
- H** Avvio/Pausa



Dispositivo
Funzionamento

Funzionamento
Dispositivo

Pulsante di Accensione (I):

Premere il pulsante di accensione per 3 secondi (pulsante I) per avviare il dispositivo. Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un certo periodo di tempo, si spegne automaticamente per salvaguardare la durata della batteria; si spegne anche al termine della sessione

Avvio / Pausa (H):

Premendo questo pulsante si avvia il programma desiderato. Premendo nuovamente si mette in pausa la sessione. Dopo alcuni secondi, se non si interviene, l'apparecchiatura si spegnerà automaticamente.

Attiva/Disattiva sezione (F e G):

Utilizza il pulsante "seleziona" per selezionare la sezione che desideri spegnere (o accendere nel caso sia spenta), conferma l'azione con il pulsante "on/off".

SIZEN

Modalità di massaggio:

Sull'indicatore **MODE**, selezionare **1, 2, 3, 4, 5, 6** utilizzando lo stesso pulsante per raggiungere il tipo di massaggio desiderato. I programmi 5 e 6 sono esclusivi del modello 8 PRO e 8e.

Tempo:

Impostare la durata della sessione sull'indicatore **TIME** utilizzando i pulsanti **+** e **-**.

Dispone di un intervallo di tempo compreso tra 5 e 60'. L'impostazione della durata utilizzata nell'ultima sessione è quella che apparirà di default nella sessione successiva. Premendo i pulsanti **+** o **-** il tempo aumenta o diminuisce con incrementi di 5' ad ogni pressione. Allo scadere del tempo selezionato, il dispositivo si spegne automaticamente.

Pressione:

L'intervallo di pressione iniziale è di 90 mmHg, selezionabile da 25 a 250 mmHg.

Sull'indicatore **PRESSURE**: Premendo l'opzione **+** o **-** si aumenta o si diminuisce la pressione con incrementi di 10 mmHg. L'ultima pressione utilizzata sarà quella che apparirà di default nell'apparecchiatura.

Camere di trattamento:

Gli indicatori **①②③④⑤⑥⑦⑧** rappresentano le 8 camere degli accessori Sizen. L'impostazione iniziale usa di default tutte le camere, mostrate con gli indicatori illuminati. Quando una camera viene gonfiata/sgonfiata, la relativa spia lampeggia. Per attivare/disattivare sezioni specifiche, utilizzare i pulsanti "select" e "on/off", dettagliati nella pagina 11.

_ Sistema di tecnica compressiva delle estremità:

Migliora il flusso corporeo e linfatico nelle braccia e nelle gambe, migliorando la pressione sui tessuti muscolari e riducendo significativamente il gonfiore e il fastidio. Aiuta anche le persone con determinate disabilità e gli anziani.

_ Massaggio sportivo:

Aiuta a sciogliere i muscoli prima e dopo le sessioni di allenamento, favorendo l'eliminazione dell'acido lattico.

_ Uso preventivo:

Aiuta a ridurre la possibilità di avere alcuni fastidi e l'accumulo di liquidi.

_ Flusso corporeo:

Linf e altri fluidi corporei mediante massaggi con aria compressa.

Modalità 1: Relax gambe: Adatto per applicazioni sportive ed estetiche.

Modalità 2: Sequenziale: Adatto per applicazioni sportive.

Modalità 3: Doppio Relax Gambe: Adatto per applicazioni sportive ed estetiche.

Modalità 4: Full Recovery: Adatto per applicazioni sportive ed estetiche.

Nota: La spiegazione delle modalità di massaggio riguarda tutti gli accessori Sizen 8e.

SIZEN

Modalità 1: Relax gambe



“Rilassa le gambe” Effettua un eccellente e rilassante massaggio partendo dalla sezione 1 dei piedi. Di sezione in sezione, sali fino all’ultima e recupera le tue gambe dopo ore in piedi.

Modalità 1
Modalità di massaggio

Modalità di massaggio
Modalità 2

Modalità 2: Sequenziale



“Sequenziale” Nota come ciascuna delle sezioni si gonfia e si aggiunge una dopo l’altra, comprimendo infine l’intera gamba completamente, dal piede all’inguine. È altamente consigliato per il drenaggio linfatico o per diluire l’acido lattico dopo l’allenamento.

SIZEN

SIZEN

Modalità 3: Doppio Relax gambe



“Doppio relax delle gambe” Gonfia e sgonfia a coppie le camere dai piedi all’inguine. Indicato per sessioni di allenamento intense o un relax superiore delle gambe.

Modalità 3
Modalità di massaggio

Modalità di massaggio
Modalità 4

Modalità 4: Full Recovery



“Ripresa completa” Esegui il massaggio in modo più esplosivo, gonfiando e sgonfiando contemporaneamente tutte e 6 le camere, potenziando notevolmente la circolazione. Per provare quella sensazione di massaggio in modo rapido e evidente.

SIZEN

SIZEN

Modalità 5: Doppia onda

Esclusivo per le apparecchiature 8 PRO / 8e



“Onda doppia” effettua un massaggio in gruppi di 2 camere, eseguendo ripetutamente una compressione doppia. Offre un’intensa sensazione di rilassamento muscolare, indicato per estetica o sport.

Modalità di massaggio
Modalità 5

Modalità di massaggio
Modalità 6

Modalità 6: Triplo Impulso

Esclusivo per le apparecchiature 8 PRO / 8e



“Triplo impulso” Diluisce l’acido lattico e rilassa il muscolo riempiendo 3 camere e procedendo lentamente. Uno dei tanti vantaggi di avere 8 camere. Adatto all’uso dopo lunghe sessioni di allenamento.

SIZEN

Connessione Bluetooth per controllare il tuo Sizen con l'APP, dal tuo smartphone e in modo molto semplice.


Ti basterà seguire questi passaggi:

- 1 Vai su Google Play o App Store, a seconda che abbia un dispositivo Android o Apple, e scarica l'applicazione "Tuya Smart".
 - 2 Una volta scaricata, apri l'applicazione e crea il tuo account.
 - 3 Una volta effettuata la registrazione, seleziona il Paese, inserisci il nome utente (e-mail), la password e accedi.
 - 4 In alto a destra è presente il simbolo "+", su cui fare clic. Con questa azione si aggiunge il dispositivo SIZEN.
 - 5 L'applicazione cercherà il nuovo dispositivo Sizen tramite Bluetooth. È necessario consentire l'accesso di "Tuya Smart" al Bluetooth e accoppiare i dispositivi.
 - 6 Aggiungi il dispositivo di pressoterapia trovato.
- e... Ora potrai controllare l'apparecchiatura Sizen!

Collegamento
all'APP

Quando si conserva l'apparecchiatura, fare attenzione a scollegare la spina che va dal dispositivo all'accessorio, staccandola delicatamente.

Conservare i tubi in modo da evitare forme indesiderate, che potrebbero danneggiare il materiale e ridurne la durata.

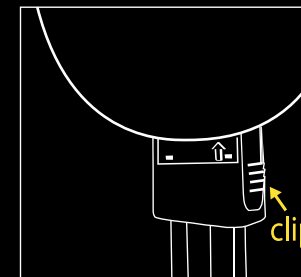

Collegare sempre i connettori dei tubi facendo coincidere i segni di connessione (freccia e scanalatura), altrimenti si potrebbe danneggiare il collegamento e invalidare la garanzia.

Non smontare o staccare in nessun caso i tubi dal loro accessorio, in nessun caso.

Non aprire la cerniera dell'accessorio quando l'apparecchiatura è in funzione o l'accessorio è gonfiato. Potrebbe causare l'apertura completa dell'accessorio, con conseguenti danni alla parte del corpo che si sta trattando e al materiale.

Manutenzione e pulizia

- _ Spegnerne il dispositivo prima di pulirlo.
- _ Utilizzare un panno asciutto per il dispositivo e un panno leggermente umido per gli accessori.
- _ Conservare l'apparecchiatura in un luogo pulito e asciutto.
- _ Proteggere l'apparecchiatura dalla luce solare diretta e dalle fonti di calore.
- _ Utilizza sempre il connettore di rete originale incluso in questo pacchetto, altrimenti potresti danneggiare l'attrezzatura.

Avvertenze:

- _ Posizionare il dispositivo su una superficie piana.
- _ L'apparecchiatura può essere riparata solo dal servizio di assistenza SIZEN, pena la perdita della garanzia.
- _ In caso di dubbi sull'uso di Sizen, si consiglia di consultare il proprio medico prima dell'utilizzo. Non è stato concepito per diagnosticare, trattare o curare alcuna malattia. **Non è un dispositivo medico.**
- _ Le controindicazioni includono (ma non sono limitate a): Malattie infiammatorie acute della pelle, aritmia, erisipela, tromboflebite profonda, edema polmonare, trombosi venosa acuta, ipertensione instabile, uso di pacemaker.

SIZEN

SIZEN



- Camere:** 8 camere
- Dimensioni:** 280 x 90 x 83 mm
- Peso:** 1,02 kg
- Consumo di energia:** 35 W
- Intervallo di pressione:** 25-250 mmHg
- Tempo di regolazione:** 0-60 min.
- Sonorità:** 45 dB.

Entrata: AC 100V-240V; 50Hz-60Hz



Specifiche



Sistema di pressoterapia a
8 camere e connessione
Bluetooth

sizensrs.com