



Kardena

CARE SOS ANLEITUNG



SCHNELLSTARTANLEITUNG

Bitte lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig die Bedienungsanleitung durch. Die Farbe des Produkts entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Produkt!

1. Vorbereitung

Bitte prüfen Sie, ob das Modell stimmt und ob das Zubehör vollständig ist. Installieren Sie die APP auf dem Mobiltelefon und fragen Sie den Händler nach Einzelheiten oder scannen Sie den APP-QR-Code in der Uhr, um ihn herunterzuladen und zu installieren.



2. Installieren Sie die Nano-SIM-Karte

Bitte verwenden Sie eine Nano-SIM-Karte, die das 4G-Netzwerk unterstützt. Legen Sie die SIM-Karte in der richtigen Ausrichtung entsprechend der Abbildung auf dem Schutzaufkleber für das Display oder der Aufforderung auf dem SIM-KARTEN-Deckel ein.

Hinweis: Schalten Sie die Uhr aus, bevor Sie die SIM-Karte einlegen, andernfalls könnte die SIM-tKarte zerstört werden.

3. Ein-/Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die Einschalttaste gedrückt

Ausschalten: Remote-Ausschalten über die APP oder Aufrufen der Einstellungsoberfläche, Wählen Sie „Herunterfahren“, wenn die Uhr im Betriebsstatus ist.

ZUR APP:

Hinweis:

Die Uhr kann keine Textnachricht an die APP senden, unterstützt jedoch das Senden von Textnachrichten von der APP im Mobiltelefon an die Uhr.

Kamera:

Foto machen.



Wählen:

Die Uhr kann unabhängig wählen, und diese Funktion kann in der APP ein- oder ausgeschaltet werden.

Thermometer:

Handgelenkmodus, Echtzeitmodus (Echtzeitmodus, d. h. die vom Temperaturfühler erfasste Echtzeittemperatur) Fernmessung der Temperatur, Fernmessung der Körpertemperatur über die APP und Anzeige der Messdaten auf der APP.

Verlaufsaufzeichnung, kann Handgelenksmessdaten anzeigen:

Erinnerung an die Temperaturmessung: Um eine genaue und effektive Temperaturmessung zu gewährleisten, berühren Sie bei der Vorbereitung der Temperaturmessung nach dem Klicken auf „Thermometer“ nicht die Sonde. Warten Sie, bis die Uhr automatisch kalibriert ist. Nachdem Sie den Aufforderungston gehört haben, startet sie Die Messung.

Nehmen Sie die Uhr beim Messen nicht ab. Nach dem Aufforderungston werden die Daten angezeigt. wenn Sie die Messung wiederholen müssen. Es wird empfohlen, das Intervall über 2 Minuten zu halten.



Herzfrequenz- und Blutdruckmessung:

Auf der Rückseite der Uhr befindet sich ein fotoelektrischer Sensor. Geben Sie die Schnittstelle für Herzfrequenz und Blutdruck ein. Das Sensorlicht schaltet sich automatisch ein zur Herzfrequenz- und Blutdruckmessung eingeschaltet. Die Mess- Zeit beträgt 30s. Nach Abschluss der Messung werden die Messdaten automatisch angezeigt.



Schrittzähler:

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Diese Funktion muss in der APP aktiviert werden. Nach dem Einschalten von Step zählt die Uhr automatisch die Schritte. Wenn Daten vorhanden sind, klicken Sie auf diese Schnittstelle, um die Anzahl der Schritte anzuzeigen.

Galerie:

Klicken Sie hier, um die von der Uhr aufgenommenen Fotos anzuzeigen. Fotos können geteilt oder gelöscht werden.

Einstellungen:

Lautstärkeeinstellungen (Medienlautstärke, Alarmlautstärke, Klingeltonlautstärke) WLAN, Mobilfunknetz, Bluetooth, Taschenlampe, herunterklappbare Einstellungen und andere Optionen im Desktop-Stil, Reinigungstools (Hintergrundanwendungen bereinigen, Cache bereinigen).



1. QR-Code scannen und herunterladen:

Klicken Sie darauf und der QR-Code wird angezeigt. Scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen.

2.Registrierungscode:

Klicken Sie darauf, um den Registrierungscode anzuzeigen. Videoanruf: In dieser Schnittstelle können Sie mit der mobilen APP einen Videoanruf tätigen.

3.SOS:

Stellen Sie 3 Notfallkontaktnummern ein. Die Uhr gibt im Notfall einen Alarm aus, nachdem die SOS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt wurde, und wählt nacheinander 3 Nummern. Wenn niemand antwortet, wählen Sie zwei Runden.

4.Sprachüberwachung:

In der APP eingestellt, wählt die Uhr aktiv die Einstellungsnummer (normalerweise die Familiennummer) und das Mobiltelefon kann den Status der Uhr abhören, aber die Uhr kann die Stimme von der APP nicht hören.

5.Nicht stören-Zeit:

Es können drei Zeiträume eingestellt werden. Die Uhr blockiert alle Anrufe und andere Geräusche während des Zeitraums (gültig von Montag bis Freitag).

SMS-Erinnerungseinstellungen: Sie können steuern, ob die Uhr die SMS-Funktion für entsprechende Alarmmeldungen öffnet (die normale Gebühr für SMS).



6.Arbeitsmodus:

3 Arbeitsmodi, der standardmäßige Normalmodus.

7.Fernabschaltung:

Nachdem die Uhr eingeschaltet ist und normal funktioniert, kann sie über die App aus der Ferne heruntergefahren werden.

8. Erinnerung an die Medikamenteneinnahme:

Sie können auf der Uhr in bestimmten Zeitabständen eine Text- oder Spracherinnerung zur Einnahme von Medikamenten einrichten.

9. Sitzerinnerung:

Nachdem Sie längere Zeit gesessen haben, ohne Sport zu treiben, können Sie das Zeitintervall einstellen, um ältere Menschen daran zu erinnern, aufzustehen und sich zu bewegen.

10. Sturzalarmfunktion:

Wenn ältere Menschen, die die Uhr tragen, hinfallen, gibt die Uhr automatisch einen Alarm aus. Einige Sekunden nach der Alarmaufforderung erhält die gebundene Mobiltelefon-APP eine Aufforderungsnachricht. Gleichzeitig wählt die Uhr automatisch die gebundene SOS-Nummer.

Während dieses Vorgangs kann die Uhr entscheiden, ob der Alarm abgebrochen werden soll.

Sie können die Erinnerungsmethode in der APP festlegen.



FEHLERBEHEBUNGEN

Wenn die Uhr zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann sie keine Verbindung zum Server herstellen und die App sendet einen Befehl, um anzuzeigen, dass das Gerät nicht mit dem Internet verbunden ist. Überprüfen Sie bitte:

1). Ob die SIM-Karte in der Uhr für den Datenfluss aktiviert ist.


2). Serverparameter sind IP und Port, ob IMEI korrekt ist. Es muss sichergestellt werden, dass der auf der Uhr angebrachte IMEI-Barcode mit der im Werk geschriebenen IMEI übereinstimmt. Kunden können SMS PW, 123456,ts# mit ihrem Mobiltelefon bearbeiten und senden Sie sie an die Uhr (Die Uhr muss mit installierter Karte eingeschaltet sein und die Textnachricht muss auf Englisch eingegeben werden).

3) Ich kann mich nicht registrieren

A. Es wird angezeigt, dass die Gerätenummer nicht existiert oder dass die Gerätenummer registriert wurde und dass dies vom Händler bearbeitet werden muss.

B. Sobald das Konto registriert wurde, d. h. das Konto bereits registriert wurde, muss der Kunde nur noch ein Konto ändern, um sich erneut zu registrieren.



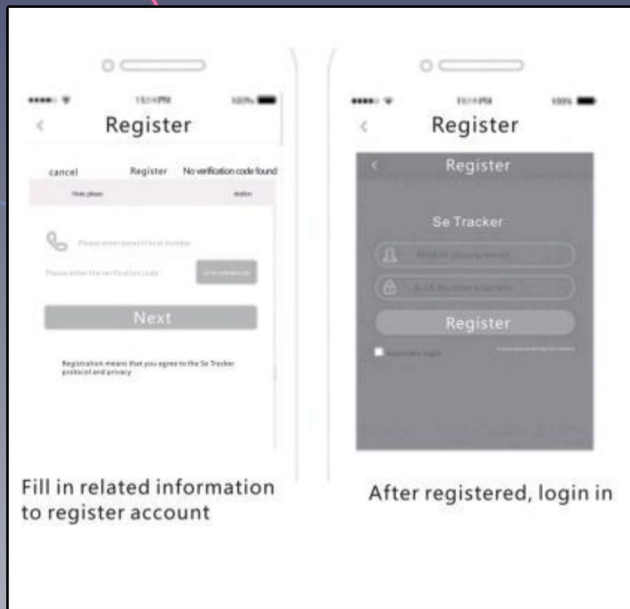

BETRIEBSANLEITUNG

Power-Taste:

1. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Uhr einzuschalten, wenn sie ausgeschaltet war.

2. Nachdem die Uhr eingeschaltet und mit dem Internet verbunden und die SOS-Nummer in der App eingestellt ist, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um 3 Nummern in einer Schleife zu wählen, und wählen Sie zweimal, wenn niemand antwortet.

3. Zurück-Taste: Durch kurzes Drücken kehren Sie zur vorherigen Benutzeroberfläche zurück.

4.App herunterladen

4.1 Überprüfen Sie den „QR-Code“ in der Uhr, scannen Sie den APP-QR-Code mit der Smartwatch, um die APP herunterzuladen.



HINWEIS:

Wenn das Scannen des QR-Codes mit WeChat oder QQ fehlschlägt, verwenden Sie bitte andere Scan-Tools, um den herunterzuladenden Code zu scannen.

Oder suchen Sie bei Google Play nach „Setracker/ Setracker2“ für Mobiltelefone mit Android-Betriebssystem, um die APP herunterzuladen. Und suchen Sie im APP Store nach „Setracker/ Setracker2“ für das IOS-System.

Hinweis: Die moderne Variante der CARE SOS nutzt die App MiwiTracker. Die klassische Variante nutzt die App Setracker 2.

4.2 Registrieren und anmelden

Bitte registrieren Sie ein Konto und melden Sie sich an, indem Sie den Anweisungen der APP folgen.


4.3 Registrierungscode

Für die Registrierung in der App benötigen Sie einen Registrierungscode. Sie erhalten diesen bei der App MiwiTracker für die moderne Variante der CARE SOS direkt per Mail. Tragen Sie dazu im Feld „E-Mail“ im Registrierungsfenster Ihre E-Mail-Adresse ein, und klicken Sie in der Zeile darunter jetzt auf "Get Code". Der Registrierungscode erreicht Sie wenige Sekunden später per Mail. Überprüfen Sie auch Ihrem Spam-Ordner, sollten Ihnen die E-Mail nicht angezeigt werden.

Bei der klassischen Variante der CARE SOS erhalten finden Sie den Registrierungscode direkt innerhalb der Registrierungsmaske der App. Tragen Sie diesen im Feld „Code“ links daneben ein.

5.3 Verknüpfen Sie die Uhr mit der APP

Nachdem das Konto erfolgreich registriert wurde, scannen Sie den Registrierungscode-Aufkleber auf der Uhr oder den in die Uhr integrierten Registrierungscode. Alternativ können Sie den 15-stelligen Registrierungscode manuell eingeben und sich dann registrieren und binden.

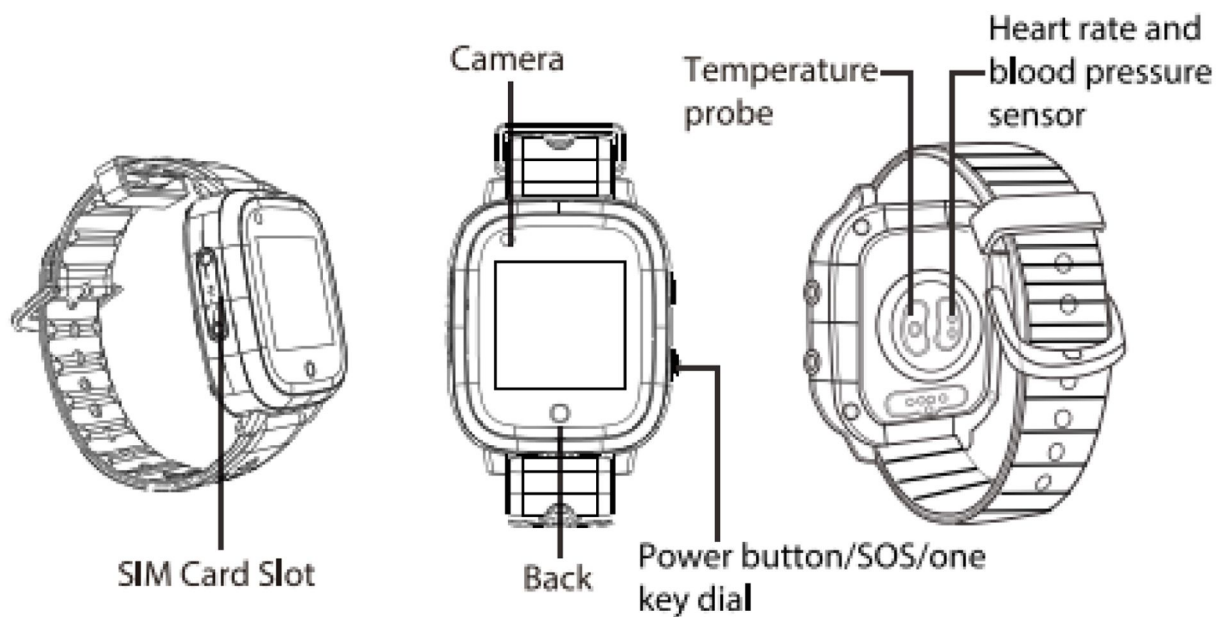

Please refer to the real product

(Sim Kartenslot, Kamera, Zurücktaste, An- und Aus Schalter/SOS, Temperatursensor, Herzfrequenz- und Blutdrucksensor) Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt

Funktionseinführung:

LBS, GPS, WIFI-Standort: Überprüfen Sie die Echtzeitposition auf der Karte in der APP.

Verlaufsverlauf:

Überprüfen Sie den Verlaufs-Fußabdruck.

Geo-Zaun:

Kann 3 Sicherheitszonen einrichten und gibt einen Alarm aus, wenn die Uhr die Sicherheitszone verlässt.

Wecker:

Es können 3 Wecker eingestellt werden

Kontakte:

Sie können 1 bis 5 Nummern im Telefonbuch festlegen, und diese 15 Nummern können als Zwei-Wege-Anruf realisiert werden.

Voice-Chat:

Klicken Sie darauf, um einen Voice-Chat oder ein Bild zu senden