

ご使用になる前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ
正しくお使いください。

PYR KNIGHT(パイラナイト)

- 品名:PYR KNIGHT(パイラナイト)
- セット内容:パイラナイト本体(IPX7防水仕様/水深1m以内、水中使用時間30分以内)、充電台座、ACアダプター、マイクロUSBコード、マルチビューティゲル(200g)、取扱説明書(保証書付き)
- 本体サイズ:長さ約240×幅42×高さ47(mm) 充電台座:高さ約105×幅66×奥行き70(mm)
- 製造元 株式会社リンクス 埼玉県所沢市緑町4-7-14

⚠ 安全に関するご注意

- 次に該当する方は本製品のご使用を避けてください。
 - ① 医用電子機器を使用している人(ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器・人工心臓など生命維持用医用電子機器・心電計などの装着型医用電子機器)
 - ② 医師の治療を受けている人
成長過程の人・急性疾患・結核性疾患・発熱している人・高血圧・伝染病疾患・悪性腫瘍・血液疾患・内臓疾患・皮膚病・アレルギー体質・アトピー性皮膚炎・皮膚トラブルがある人・敏感肌・お肌の弱い人・物理的刺激などによる病的なシミのある人・過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人・強度近視の人(-6D以上)・目や顔の手術を受けた人・目や顔に疾患がある人および治療中の人・疲労が激しい人・体調がすぐれない人・酒気帯び人・妊娠中、生理中、授乳中の人・子宮内膜症や子宮筋腫など子宮に疾患のある人・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人・眠気をさそう薬を服用中の人

- マルチビューティゲル〈フェイス&ボディ用マッサージゲル〉200g 販売名:マルチビューティゲル
- 【使用方法】適量を手に取り、肌になじませてください。PYRナイト(パイラナイト)美容機器と使用される場合は、取扱説明書をよく読んでご使用ください。
- 【全成分】水、グリセリン、ペンチレングリコール、BG、グリセリルグルコシド、1,2-ヘキサンジオール、ポリ(トリペプチド-6)、水添レシチン、セラミドNP、スフィンゴ脂質、リン脂質、カフェイン、スクワラン、グリチルリチン酸2K、アルギニン、カルボマー、PEG-60水添ヒマシ油、フェノキシエタノール
- 日本製
 - 発売元 株式会社リンクス 埼玉県所沢市緑町4-7-14
 - 製造販売元 株式会社クレシエコスメティクス 静岡県富士宮市小泉540-1/本社:東京都港区南青山2-28-6

ご不明な点やご使用上のご質問、トラブルなどございましたらフリーダイヤルまでご連絡ください。
下記のQRコードからも機能説明、使用説明の動画がご覧頂けます。

お客様お問い合わせフリーダイヤル

0120-003-024

受付時間 平日:午前10時~午後5時



【機能説明動画】




【使用説明動画】

PYR KNIGHT メンテナンスセンター サンマック
〒400-0067 山梨県甲府市長松寺町1-11
TEL 0120-003-024

Web <https://links.shop-pro.jp>

PYR KNIGHT

取扱説明書

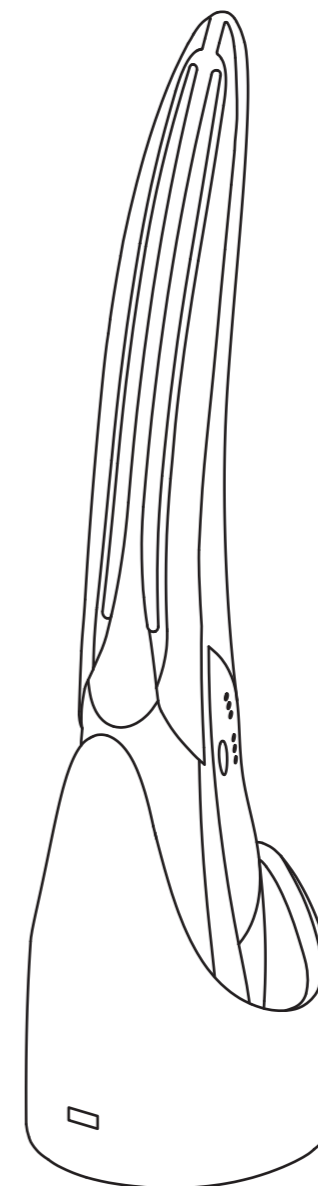

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。



はじめに

このたびは、PYR KNIGHT (パイラナイト) をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用頂くために、お使いになる前は必ずこの取扱説明書を一通りお読みください。また、お読みになった後も巻末に保証書が付いておりますので、紛失したり汚したりしないよう大切に保管してください。

目次

1	安全上の注意	2~3
2	付属部品	4
3	各部名称と操作方法	5
4	ご使用上の注意事項	6~8
5	充電方法について	9
6	充電電池について	10
7	フェイシャルトリートメント方法	11
8	ボディトリートメント方法	12~14
9	健康上のご注意	15
10	ご使用後のお手入れ方法	15
11	付録	16~17
	保証書	18

1 安全上の注意


- ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、指示に従って正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使い頂き、ご利用者や周りの方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

注意事項は、次のように区分されています。いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください！

- ⚠ **危険** 人が死亡・または重症を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容。
- ⚠ **警告** 人が死亡・または重症を負う可能性が想定される内容。
- ⚠ **注意** 人が障害を負う危険性、及び物的損害の発生などが想定される内容。

絵表示の例

⊘ 左図記号は、禁止の行為を告げるものです。

⊘ 禁止	●下記のような医療用電子機器と併用はしないでください。また、貴金属類・時計などは必ず外してください。 ①. ペースメーカー等の、体内植込型医用電子機器 ②. 人工心肺等の、生命維持用医用電子機器 ③. 心電計等の、装着型医用電子機器	
	●次のような方はご使用をお避けください。 ①. 心臓疾患のある方 ②. 妊娠中、もしくは妊娠している可能性がある方 ③. アルコールを摂取している方	
⚠ 危険	●使用時間や頻度は、取扱説明書の指示を守ってください。 ※ 過度のご使用は、身体に危害を与える原因となることがあります。 ⊘ マルチビューティゲル適量を直接パイラナイトの電極の上に乗せ、機械でお肌の上に伸ばしてご使用ください。本機は1回6分のオートタイマーとなっております。1部位について1日1回(6分)より長くご使用にならないでください。オーバートリートメントにより赤みやかゆみが出る場合がございます。	
	●次のような方は、必ず医師とご相談の上でご使用ください。 ①. 通院中の方 ⑧. 結核性疾患の方 ⑮. 38℃以上の有熱性疾患の方 ②. 原爆症の方 ⑨. 血友病患者の方 ⑯. 皮膚に異常のある方 ③. 悪性腫瘍の方 ⑩. 法定伝染病の方 ⑰. ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方 ④. 急性疾患の方 ⑪. 顔面黒皮症の方 ⑱. 妊娠中の方はご使用にならないで ⑤. 血圧異常の方 ⑫. アレルギー疾患の方 ⑲. ください。 ⑥. 18歳以下の方 ⑬. 薬を服用している方 ⑦. 感染性疾患の方 ⑭. 激しく疲労している方 ※ ご使用中に異常を感じた場合は、直ちにご使用をお止めください。	
⚠ 警告	●次のような部位へのご使用はお避けください。 ①. 粘膜の部位 ⑨. 甲状腺付近・頭部・口内 ②. 肛門や陰部 ⑩. 痛覚・知覚障害を起こしている部位 ③. 月経時の腹部 ⑪. にきびや吹出物で炎症を起こしている部位 ④. 整形手術をした部位 ⑫. 化粧品などで皮膚炎症を起こしている部位 ⑤. 眼球の上 ⑬. アトピー・湿疹などの症状がある部位 ⑥. ヒザ・ヒジなどの関節部 ⑭. 痒みや火照り、物理的刺激などによる病的なシミのある部位 ⑦. 傷口や、脱毛後間もない部位 ⑮. 金属・プラスチック・シリコンなどを体内に埋め込んである部位 ⑧. 心臓の近く	
	●本体、および付属品を勝手に修理・分解・改造しないでください。保証期間内であっても保守・修理を受けられない場合があります。 ▼作動不良を起こし、火災・火傷の原因となります。	

警告	禁止	●本来の目的や用途以外には絶対にご使用にならないでください。 ▼事故や故障の原因となります。
	禁止	●本体に異常が発生した場合は直ちにご使用を中止し必ず修理をご依頼ください。 ▼火災・火傷・事故の原因となります。
	禁止	●他の治療器との同時使用や、塗布剤(スプレー式など含む)との併用はしないでください。 ▼気分が悪くなったり、体調不良を起こすことがあります。
	禁止	●他の電気製品との併用や、強い電波や磁気の発生する場所でのご使用や保管は避けてください。 ▼ノイズによる誤作動や、故障の原因となることがあります。
	禁止	●揮発性の高いもの(ベンジン・シンナー・除光液)などの近くでは、絶対にご使用にならないでください。 ▼爆発や、火災を引き起こす恐れがあります。
	禁止	●自動車などを運転しながらのご使用はしないでください。 ▼強い刺激や、事故・故障の原因となります。
警告	禁止	●ガス漏れに気付いた時には直ちにご使用を中止し、排気をしてから電源を切り、速やかにACアダプタージャックを抜いてください。 ▼ガスに引火し、爆発や火災の原因になることがあります。 可燃性ガスに引火・爆発する恐れがありますので、部屋のガス警報器が鳴っている・ガス臭いなど、ガスが漏れている場所では使用を中止し、十分に換気を行ったうえでACアダプタージャックを抜いてください。
	禁止	●雷が鳴り出したら、直ちにご使用を中止してください。 ▼落雷によって過電流が流れ、異常出力が発生する場合があります。
	禁止	●高温になる場所(直射日光の当たる所やストーブ等の発熱器具の近くなど)や、湿気やホコリの多い場所、湯気の当たる場所(調理台・風呂場・加湿器のそばなど)でご使用、また放置しないでください。 ▼火災・感電の原因となることがあります。 パイラナイトはIPX7の防水仕様です。この基準上、お風呂でのご使用は30分以内としてください。また、入浴剤を入れた浴槽では使用しないでください。成分によって機械劣化に繋がります。ご使用後はお風呂場などの温度や湿度が高い場所には置かないようお願いいたします。(内部に結露を起こして水滴が発生し、故障する可能性があります。)
	禁止	●不安定な場所に置いたり落としたり、モノを上に乗せたりしないでください。また、操作部を必要以上に強く押ししたり、叩いたりしないでください。 ▼故障や、怪我の原因となることがあります。
	禁止	●子供の手の届く場所に保管しないでください。 ▼怪我の原因となる恐れがあります。
注意	禁止	●ACアダプタージャックや接続コードを抜く時は、濡れた手で持ったりコードを強引に引っ張らないでください。 ▼感電やショートして発火する場合があります。
	禁止	●ACアダプターコードが傷んでいたり、コンセントの差込みが緩い時はご使用にならないでください。また、タコ足配線はしないでください。 ▼感電や、ショートして発火する場合があります。
	禁止	●各コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に捻じ曲げたり、引っ張ったり、束ねたりしないでください。 ▼感電や火災の危険性があります。
	禁止	●付属のACアダプター及び付属品以外にはご使用にならないでください。 ▼火災・感電・故障の原因となります。
	禁止	●充電台座やACアダプターを濡らさないでください。 ▼万が一濡れてしまった時は直ちにご使用を中止し、水分をよく拭き取ってください。
	禁止	●ご使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。 ▼怪我や火傷・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。


2 付属部品

※開梱したらはじめに、下記の物が全てそろっている事をご確認ください。




3 各部名称と操作方法

● 本体各部名称

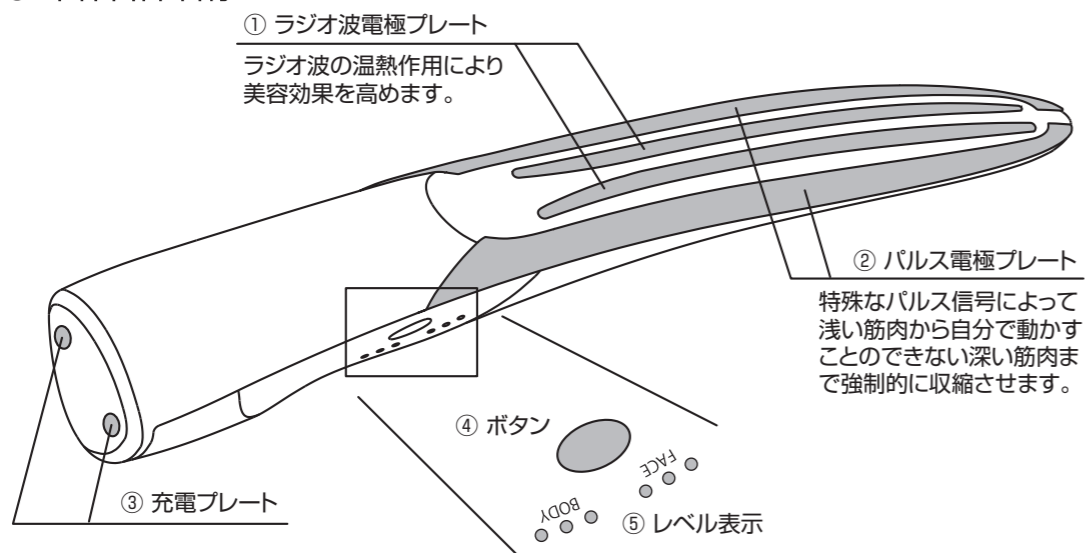

- ③ 充電台座に乗せると通電し充電を開始いたします。フル充電時間は約3時間です。
- ④ ボタンを長押しすると、「ピー」と音が鳴り電源が入ります(LEDは点滅状態)。お肌に触れると自動的にスタートします(LEDは点灯に変わります)。お肌から離すと一時停止状態になりLEDが点滅状態になります。スタートしてから6分後に「ピー」と音が鳴り終了します。途中で終了したい場合にはボタンを長押しすることで、電源を切ることができます。
- ⑤ スタート後ボタンを押すと出力レベルがアップします。押し続けるとFACE1からBODY3まで移動し、またFACE1に戻ります。
- ⑥ 本機器は安全の為、オートオフ機能を搭載しています。5分間放置したままにすると「ピー」と音が鳴り電源が切れます。


● 充電台座名称

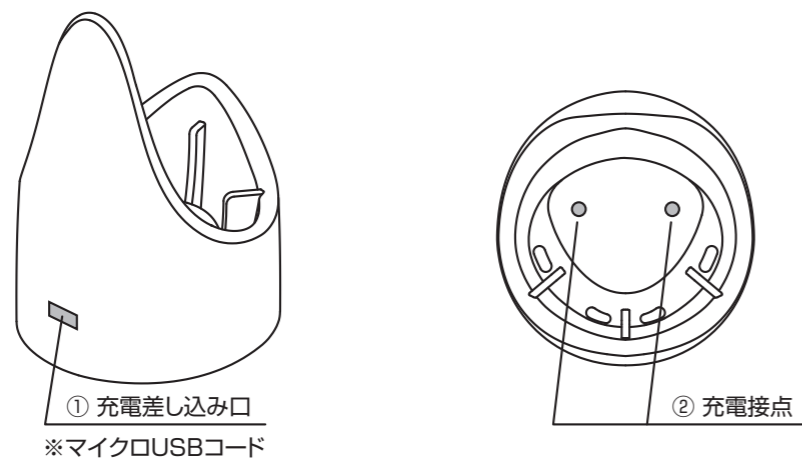


- ① ACアダプターをコンセントに差し、マイクロUSBコードを接続し反対側を充電台座に差し込みます。
- ② 本体を充電台座に乗せるとレベルランプが点滅し充電を開始します。充電が終了するとレベルランプは点灯します。

4 ご使用上の注意事項

- ① この製品は充電タイプの製品です。ご購入後、はじめてご使用になる場合は必ず充電を行ってからご使用ください。本体は防水仕様(IPX7)ですが充電台座は防水仕様ではありません。充電は室内で行ってください。
- ② ご使用前にはメイクを落とし、お肌を清潔にしてからご使用ください。
- ③ ネックレス、ピアス、指輪、腕時計などの貴金属類は外してからご使用ください。
- ④ トリートメントの際には**必ず付属の専用ゲルを塗布してからご使用ください。**
- ⑤ レベルはフェイス1(弱)から始め、お肌の状況に合わせてレベルを調整し、刺激を強く感じた場合は使用を中止してください。
- ⑥ BODYモードでの顔へのご使用はお止めください。
- ⑦ 1ヶ所に固定し続け熱くなりすぎるとお肌のトラブルとなりますので移動させながらご使用ください。ラジオ波の特性上、1ヶ所に固定し続けると熱くなりすぎて肌トラブルの原因になる恐れがございますため必ず移動させながらご使用ください。本機はレベル表示のあたりを手に持ちご使用ください。
- ⑧ 途中で塗布した専用ゲルが乾いてしまった場合には専用ゲルを付け足してください。
- ⑨ 本体を浴室、洗面所等、湿気が多い場所でのご使用後は**水滴を必ず拭き取ってから充電を行ってください。**
- ⑩ **入浴剤が入ったお風呂や温泉、サウナ、プールでのご使用はお止めください。**様々なトラブルや故障の原因になります。

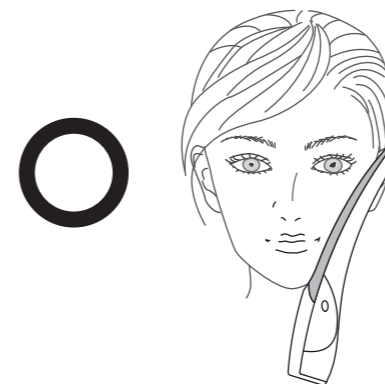

- ⑪ お肌に電極の当て方は広い面で当て移動しながらトリートメントを行ってください。

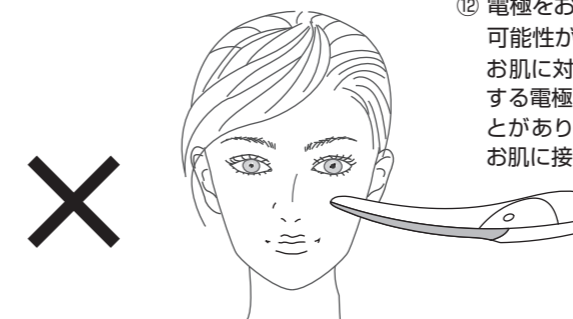

- ⑫ 電極をお肌に直角に当てないでください。火傷する可能性があり非常に危険です。お肌に対して直角に当てないでください。お肌に接する電極の面積が小さすぎると火傷を引き起こすことがあります。ラジオ波の電極が最低1cm以上はお肌に接触するようお肌に当ててご使用ください。

- ⑬ **本機器は非常にパワーが強いため専用ゲルを使用しないと火傷する可能性があり非常に危険です。必ず専用ゲルを塗布してからご使用ください。**

⑭ 本機器はお風呂の中など水中でご使用できますが、お風呂の中でも水中以外の場所、特に顔にご使用する際は必ず専用ゲルを塗布してからご使用ください。

⑮ レベルは必ず一番弱いレベルから始めてください。

⑯ 入浴剤について

本機はお風呂でご使用頂けますが、その際に**入浴剤を併用しないよう**をお願いいたします。入浴剤の成分は様々ですのでどのような現象が起こるかは特定ができませんが、様々なトラブルや故障が起こる可能性があります。


⑰ お風呂での使用について

本機を水際でご使用する際に電極部分を触れていなくても電気が水を通して手に刺激がくる場合がございますが、故障ではありません。

⑱ お風呂での使用時間について


本機は国際基準のIPX7という基準を取得しています。これは完全防水になります。但しこの基準は**30分までと決まっております**。よって**お風呂でのご使用は30分以内**をお願いいたします。また、ご使用後もお風呂場などの気温や湿度が高い場所には置かないようお願いいたします。**内部が結露を起こして水滴が発生し、故障する可能性があります**。

※右の図のこの部分は防水加工ではありません。水に沈めるとこの部分から水が入り気泡が出る場合がございます。**ここから水が入っても性能上全く問題ありません**。ご使用後少量の水が出てくることもありますが、ふき取って台座に御戻しください。

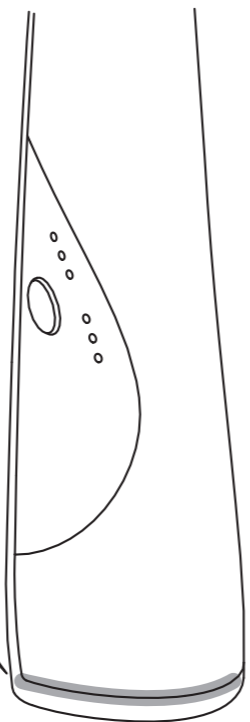

⑲ 電極部分が変色したと思った時の対処法


これは**変色ではなく酸化物の付着により色が変わったように見えるものです**。眼鏡拭きのような細かい目の布などで、水をつけてこすってください。それでも取れない場合にはエタノールなどアルコール系の溶剤を**付着部分のみ**に塗布してこすってください。また、付着物は長時間放置するほど落ちにくくなっていきます。極力お早めにふき取るようお願いいたします。

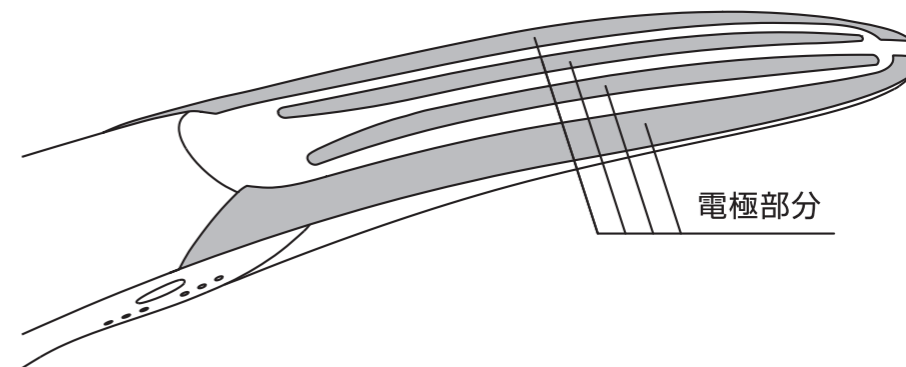

⑳ 充電プレート部に触れる(特に水中でのご使用時)

ご使用中に充電プレートに触れると若干電気の刺激を感じる事がございます。充電プレートには触れないようにご使用して頂きますようお願いいたします。

※特に水中でのご使用時はお気を付けください。

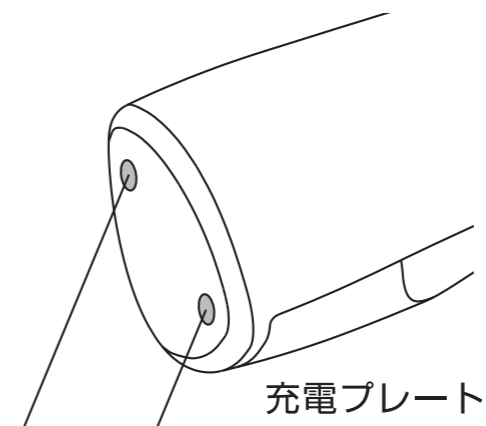

㉑ 充電プレートからの気泡について

水中でご使用される際、充電プレートから気泡が発生する場合がございますが、故障ではございません。ご使用後は十分にお拭き取りください。



5 充電方法について

● この製品は充電タイプの製品です。ご購入後はじめてご使用になる場合は充電を行ってからご使用ください。

- ① ACアダプターをコンセントに差し、マイクロUSBコードを接続し反対側を充電台座に差し込みます。
- ② ACアダプターはタコ足配線せずに、直接壁のコンセントに差しご使用ください。タコ足配線は火災の危険があります。
- ③ 充電はご使用毎にせずに、電池が消耗してから行ってください。
- ④ 充電時間は約3時間です。
- ⑤ 旅行などで数日間使用しない場合には、本体を充電台座から外すかACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ⑥ 本体を充電台座にセットすると充電を開始いたします。BODY3のランプから点滅をはじめ充電量が増えるにつれ点滅から点灯に変わっていきます。全てのランプが点灯すれば充電完了です。
- ⑦ 本体を充電台座にセットした時にランプが点灯しなかったり、1分も経過していないのにランプが全て点灯した場合は、もう一度セットしなおしてください。その際、本体の充電プレートと充電台座の充電接点がきちんと接触しているかご確認ください。
- ⑧ パイラナイトは専用台座に直立で置いて充電を行います。その際、直立の角度がズレた場合、充電の接点が触れず充電ができない場合がございます。台座に置いた際にレベルランプが光っていると充電ができております。台座に置きながらもランプが光らない場合は角度をご確認いただき置き方を調整してください。

※ご使用後充電する際は本体を十分に拭き取り乾燥させてから充電を行ってください。

※ FACE1のランプが点灯すれば充電完了です。

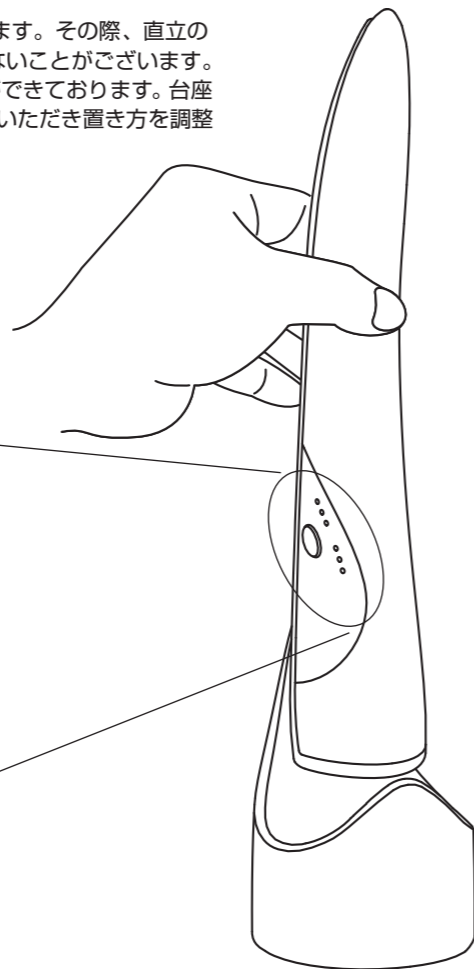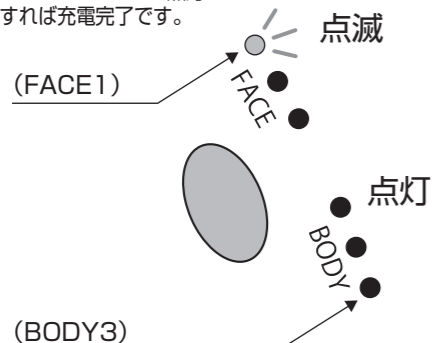

6 充電電池について

- ① 保存に最も適した温度は15℃以下です。但し冷蔵庫に入れるなどの行為はおやめください。
- ② 0℃以下では電池容量が低下します。必ず室内においてください。
- ③ 閉め切った車内など高温になる所に放置すると、急激に充電電池が劣化します。カバンに入れて車内に置くなどの行為はおやめください。
- ④ 多湿の場所での充電は故障の原因になりますのでお避けください。
- ⑤ 直射日光の当たる場所で、充電や保管はしないでください。
- ⑥ 低温から高温のような急激な温度変化はさせないでください。充電電池の使用範囲は0～45℃(最適23℃)です。また、温度変化により充電電池の早期劣化が懸念されます。(使用時間の減少等)
- ⑦ エアコンの風や暖房器具の熱が直接届く場所に置かないでください。

● 充電電池の特性について

本製品は、充電用のリチウムイオン電池を使用しております。充電電池の性質上、未使用の場合でも自己放電され充電量が低下してしまいます。充電が満たされた状態でも3ヶ月以上放置されたり、電池の充電量を使い切った状態で放置された場合は、充電ができなくなる場合がございます。充電電池を効率よくご使用いただくために、月に1度は充電を行うようにしてください。3時間充電してもご使用できる時間が極端に短くなったときは充電電池の交換時期と考えられます。

● 充電電池保護について

フル充電直後の十分に充電残量がある場合、一度本体を充電台座から外して再度充電台座に差し込んでも過充電を防ぐため(充電電池保護)、充電を終了しランプが消灯します。通常にご使用して充電を行った場合はランプが点灯します。

● 製品の廃棄について

使用済の充電電池は資源有効利用促進法に基づき、当社にて回収いたします。本体を廃棄する際は、分解せずPYR KNIGHTメンテナンスセンター サンマック(本紙裏面に記載)までご連絡ください。(送料はお客様負担となりますのでご了承ください。)充電電池が完全に放電した状態でお送りください。回収した製品はリサイクルのため返却できません。パッケージ等をゴミとして廃棄する場合は、お住いの市町村の指示に従ってください。

● リチウムイオン電池の交換について

リチウムイオン電池(有料)の交換はお客様お問い合わせフリーダイヤル(本紙裏面に記載)までご連絡ください。




Li-ion

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力をお願いします。


7 フェイシャルトリートメント方法

- ① 洗顔後のお肌に専用ゲルを塗布し、図を参考に矢印の方向にゆっくりトリートメントを行ってください。専用ゲルが少なくなると伝導が悪くなったり、刺激を受けたりしますので専用ゲルを足しながらトリートメントを行ってください。
- ② 電極はお肌にしっかり当てゆっくりと移動させるようにご使用ください。お肌に密着していないと出力しません。
- ③ レベルはFACE1～3(ランプ白)のレベルでトリートメントを行ってください。


リフトアップ

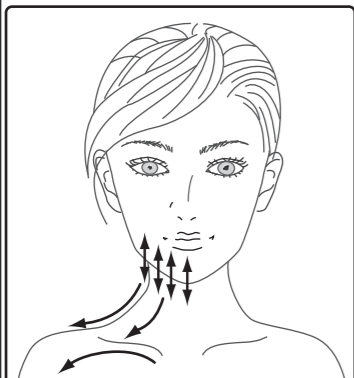

デコルテを(鎖骨下に沿って脇に向かって)押し流します。首から肩に向かって押し流します。アゴを上にあげ首の筋肉を伸ばしながらフェイスラインをほぐします。

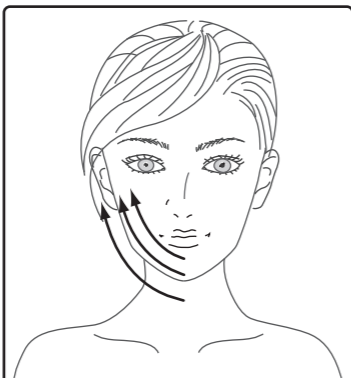


フェイスラインをアゴの先から耳の後ろまでゆっくり引き上げます。アゴからこめかみに向かってゆっくり引き上げます。

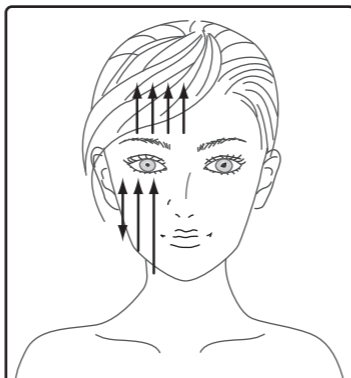

頬骨の下の咬筋に当て上下に動しながら口の開け閉めを10回程繰り返します。アゴ下から真っすぐ頬に向かって3ラインほど引き上げます。

小じわ

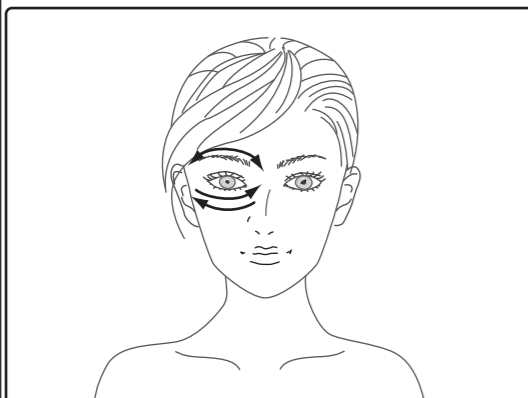

目の下と眉上を往復します。

むくみ・くすみ・クマ改善




デコルテを(鎖骨下に沿って脇に向かって)押し流します。首から肩に向かって押し流します。矢印の方向(耳の後ろ)に向かって押し流します。甲状腺の部位には当たらないように気をつけてご使用ください。


8 ボディトリートメント方法

- ① お肌に専用ゲルを塗布し、図を参考に矢印の方向にゆっくりトリートメントを行ってください。専用ゲルが少なくなると伝導が悪くなったり、刺激を受けたりしますので専用ゲルを足しながらトリートメントを行ってください。
- ② 電極はお肌にしっかり当てゆっくりと移動させるようにしてご使用ください。お肌に密着していないと出力しません。
- ③ レベルはBODY1～3(ランプ青)のレベルでトリートメントを行ってください。


O脚・X脚・骨盤

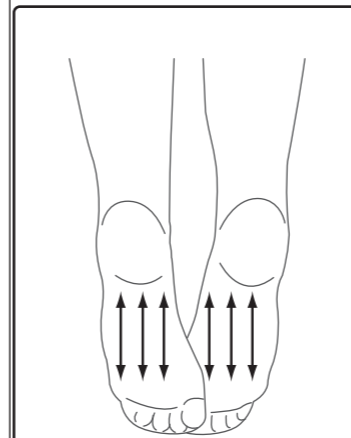


土踏まずを上下に流します。

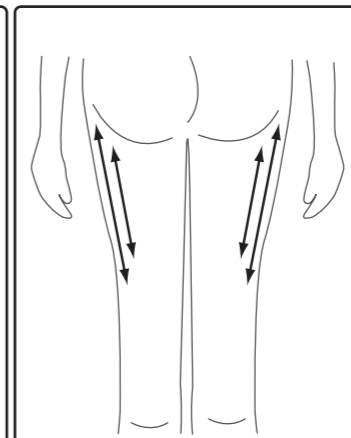


太ももの外側を上下に流します。

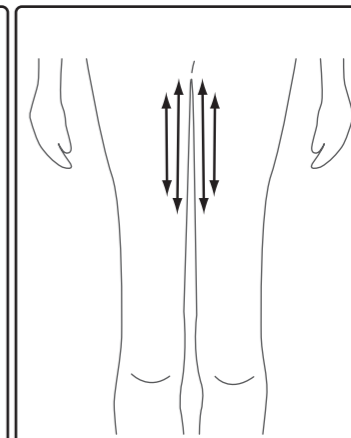


太ももの内側を上下に流します。

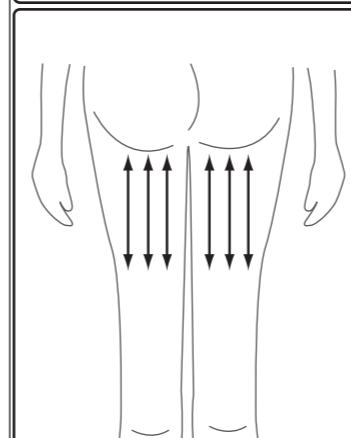

太ももの裏側を上下に流します。

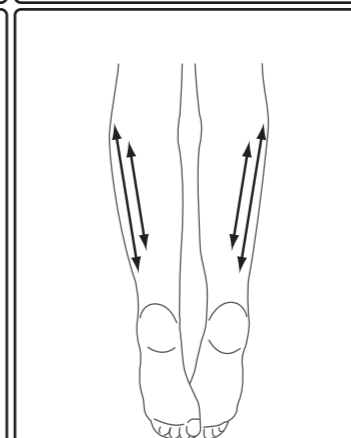


すねの筋肉をほぐすように上下に動かします。

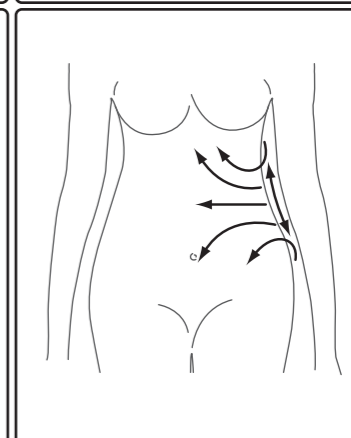


肋骨と骨盤のキワをいったりきたりなぞる。ベルトラインを締めるようにウエストラインを作る。

ヒップアップ

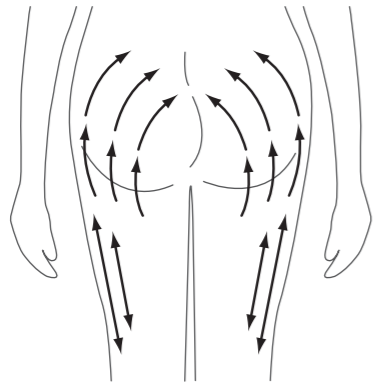


お尻の周りをこねる。
太ももの外側を上下に流します。

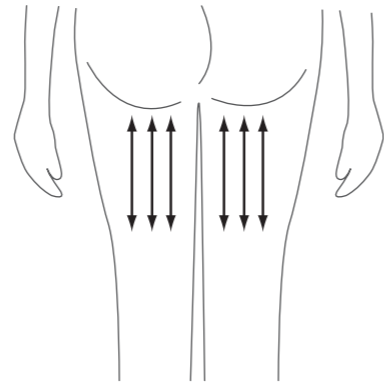


太ももの裏側を上下に流します。

ウエスト回り・腰肉

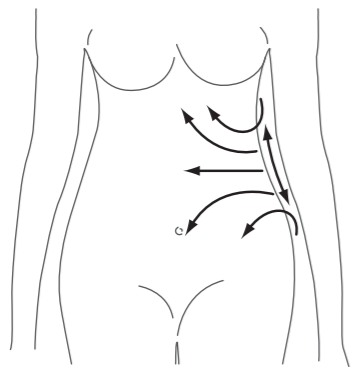


肋骨と骨盤のキワをじっくりなぞる。
ベルトラインを締めるようにウエストライン
を作る。

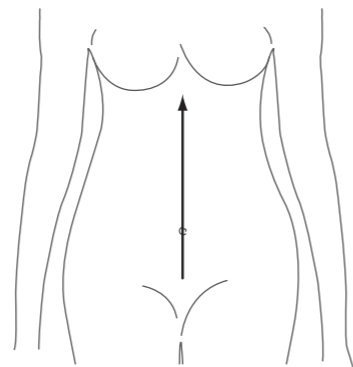


下腹部からみぞおちまで腹式呼吸をしながら往復
する。みぞおちへ向かう時にお腹を膨らませながら
当てます。

二の腕 + バストアップ

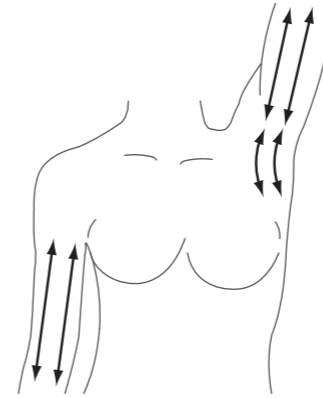


腕を上げたまま脇の下をほぐし、二の腕をじっくりなぞる。
肘から脇にかけて往復で移動し、背肉までなぞる。
二の腕の裏面も同じように当ててください。

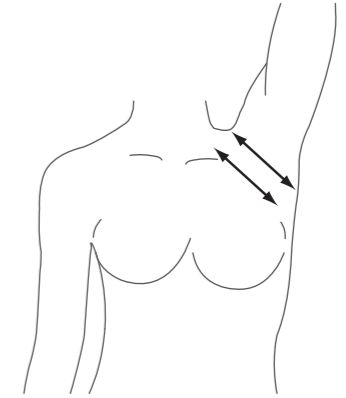


腕を上げたまま、大胸筋を往復します。

巻き肩

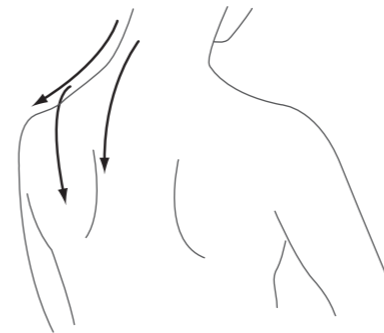

襟足部分から肩にかけて往復。
襟足部分から背骨の横に沿って往復します。

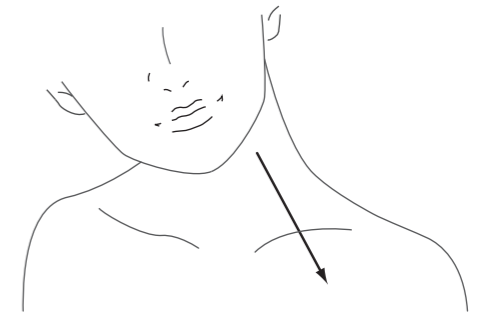

耳の後ろから鎖骨に向かって往復します。

9 健康上のご注意

● 次に該当する方は本製品のご使用を避けてください。

- ① 医用電子機器を使用している人（ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器・人工心肺など生命維持用医用電子機器・心電計などの装着型医用電子機器）
- ② 医師の治療を受けている人
成長過程の人・急性疾患・結核性疾患・発熱している人・高血圧・伝染病疾患・悪性腫瘍・血液疾患
内臓疾患・皮膚病・アレルギー体質・アトピー性皮膚炎・皮膚トラブルがある人・敏感肌、お肌の弱い人・物理的刺激などによる病的なシミのある人・過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人・強度近視の人（-6D以上）・目や顔の手術を受けた人・目や顔に疾患がある人および治療中の人・疲労が激しい人・体調がすぐれない人・酒気帯びの人・妊娠中、生理中、授乳中の人・子宮内膜症や子宮筋腫など子宮に疾患のある人・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人・眠気をさそう薬を服用中の人

10 ご使用後のお手入れ方法

● 本体

- ① 浴室、洗面所等、湿気の多い場所でのご使用後は水分を拭き取ってください。
- ② アルコール、シンナーなどの有機溶剤を用いての拭き取りはしないでください。
通常のご使用後は、必ずジェルを拭き取ってお手入れしてから充電台座にお戻しください。
お風呂でのご使用され濡れている場合も、乾いたタオルなどで水分をしっかり拭き取ってからお戻しください。但し、(P.8) ⑨のような場合にのみエタノールなどアルコール系の溶剤を目の細かい布などにとり、ジェルが付着している部分だけを拭き取ってください。
- ③ 充電プレートに汚れや専用ジェルが付着していたり濡れていると充電が出来なくなり故障の原因になります。必ず確認し汚れや水滴を拭き取ってください。水分が付着していると腐食の原因になりますので、十分にお拭き取りください。

● 充電台座

- ① お手入れする場合には、必ずマイクロUSBコードを充電台座から抜いてください。
- ② アルコール、シンナーなどの有機溶剤を用いての拭き取りはしないでください。
- ③ 充電台座が水や専用ジェルで濡れていると充電が出来なくなり故障の原因になります。必ず確認し汚れや専用ジェル・水滴を拭き取ってください。特に充電接点部は十分にお拭き取りください。

11 付録

● 日常の点検とお手入れ方法

● 本体

浴室、洗面所等、湿気の多い場所でのご使用後は水分を拭き取ってください。
アルコール、シンナーなどの有機溶剤を用いての拭き取りはしないでください。
充電プレートに汚れや専用ジェルが付着していたり濡れていると充電が出来なくなり故障の原因になります。必ず確認し汚れや水滴を拭き取ってください。水分が付着していると腐食の原因になりますので、十分にお拭き取りください。



注意

● 充電台座

お手入れする場合には、必ずマイクロUSBコードを充電台座から抜いてください。
アルコール、シンナーなどの有機溶剤を用いての拭き取りはしないでください。
充電台座が水や専用ジェルで濡れていると充電が出来なくなり故障の原因になります。必ず確認し汚れや専用ジェル・水滴を拭き取ってください。特に充電接点部は十分にお拭き取りください。

● 長期間使用しない場合

接続されているACアダプターを外し本体、充電台座とも水分を十分に拭き取り箱などにしまって、常温にて保管してください。また、精密機器ですので平坦な場所に置き衝撃は与えないでください。

● 故障かな?と思ったら

一見故障に見えても実際には故障していない場合もございます。修理サービスをご依頼される前にもう一度ご確認頂く事をお奨め致します。
ご不明点や使用上のご質問、トラブル、ご不安などございましたら取扱説明書の裏面に記載のフリーダイヤルまでご連絡ください。お客様お問い合わせフリーダイヤル 0120-003-024
※受付時間：平日10:00～17:00

● 機器本体に電源が入らない。

充電残量は十分ですか。充電台座にのせて充電されているかご確認ください。

● 充電できない。

ACアダプターとコンセント及び充電台座の接続をご確認ください。奥まできちんと差し込んでください。また、本体を充電台座にセットした時にランプが点灯しなかったり、1分も経過していないのにランプが全て点灯した場合は、もう一度セットしなおしてください。その際、本体の充電プレートと充電台座の充電接点がきちんと接触しているかご確認ください。

● 機器本体の出力が感じられない。

お肌に適度な水分がないとスタートしません。専用ジェルを適量お肌に塗布してからご使用ください。パイラナイトをご使用の際には適量のジェルを直接電極の上に乗せ、機械でジェルをお肌の上に伸ばしてご使用ください。なお、普段のお手入れとしてご使用頂く場合には適量を手に取り肌になじませてください。

● 刺激を強く感じる。

出力レベルが高くなっていませんか？ お肌のコンディションによってはご使用を中止するか、レベルを下げてください。又専用ゲルが少ない又は乾いてくると強く感じる場合がございます。専用ゲルを追加してご使用ください。

● 電極部分が変色したと思った時

これは変色ではなく酸化物の付着により色が変わったように見えるものです。眼鏡拭きのような細かい目の布などで、水をつけてこすってください。それでも取れない場合にはエタノールなどアルコール系の溶剤を付着部分のみに塗布してこすってください。また、付着物は長時間放置するほど落ちにくくなっていきます。極力お早めにふき取るようにお願いいたします。

● 充電プレートからの気泡について

水中でご使用の際、充電プレートから気泡が発生する場合がございますが、故障ではございません。ご使用後は十分にお拭き取りください。

※その他、機器に関する事は販売店にお問い合わせください。

● 定格・仕様

電源アダプター	入力:100V ~ 240V	出力:5V DC 2A	定格周波数:50Hz / 60Hz
---------	----------------	-------------	-------------------

本体 (IPX7 防水)	長さ:240mm	幅:42mm	高さ:47mm	重量:約142g	材質:ABS樹脂 BS (真鍮)
--------------	----------	--------	---------	----------	------------------

充電台座	高さ:105mm	幅:66mm	奥行き:70mm	重量:約63g	材質:ABS樹脂
------	----------	--------	----------	---------	----------

※充電時間:約3時間(目安)

● アフターサービスについて

この取扱説明書には保証書が付いております。

必ず必要事項が正しく記入されている事をお確かめの上、保証内容等をよくお読みになり大切に保管してください。

紛失されますと、保守・修理などのサービスを受けられない場合があります。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

a. 保証期間中は

お客様お問い合わせフリーダイヤル又は、お買い上げ頂いた販売店まで修理をお申し付けください。

保証規定の範囲内であれば、無償にて修理させていただきます。もし規定の範囲外であっても有償にて修理を受け賜ります。

b. 保証期間を過ぎている時は

お客様お問い合わせフリーダイヤル又は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。

修復可能な場合、有償にて修理させていただきます。

※修理をご依頼される前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、再度ご点検された上でご連絡を頂きますようお願い致します。

発売元:株式会社リンクス

〒359-1111 埼玉県所沢市緑町4-7-14