


Berrcom®



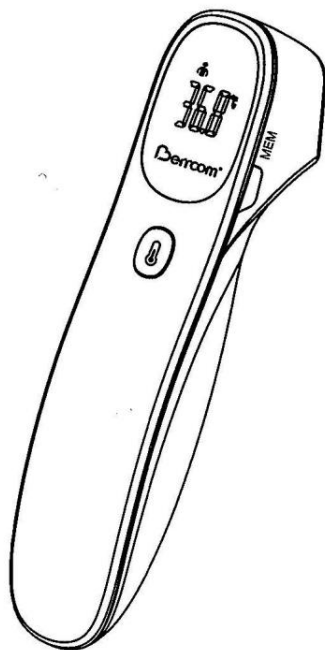


STARTMANUAL - DANSK

MODEL: JXB-311




Indstillinger og menu-funktion

1. Tænd pandetermometeret

Tryk på knappen "  " i 1 sekund – efterfølgende vil skærmpanelet tændes i fuld visning og herefter gå i standby med tegnene "---°C" eller "---°F".

Tryk herefter på "  " igen, og du vil herefter få et måleresultat på 1 sekund. Er der ikke foretaget nogen måling indenfor 30 sekunder, slukker termometeret automatisk. For at slukke termometeret skal du holde "  " knappen inde i 3 sekunder.

2. Indstilling af temperatur-tilstand


I tændt tilstand trykker du på "MODE" knappen, hvorefter displayet vil vise "  ", hvilket er kropstemperatur-tilstanden. Trykker du på "MODE" igen, vil displayet vise "  ", hvilket er objekttemperatur-tilstanden. Trykker du "MODE" en tredje gang, vil displayet vise "  ", hvilket er rumtemperatur-tilstanden.

Note: Pandetermometeret er som standard sat til kropstemperatur-tilstanden.

3. Temperatur offset indstilling

Tænd termometeret i standby-mode. Hold herefter "MODE"-knappen inde i 2 sekunder

indtil skærmen viser F4. Når "  "-symbolet blinker sammen med F4 kan du nu indstille

offset. Tryk på "MEM"-knappen for at hæve med 0,1°C (°F) eller tryk på knappen "  " for at sænke med 0,1°C (°F). Offset-værdien kan ændres fra -3°C ~ 3°C (-5,4°F ~ 5,4°F). For at gemme indstillingerne klik herefter på "MODE" to gange. Herefter går pandetermometeret tilbage til standby-tilstand.

Note: Termometeret er som standard sat til +0,0°C (°F).

4. Indstilling af temperatureenhed (°C eller °F)

Tænd pandetermometeret på knappen "⏻" og hold herefter "MODE"-knappen nede i 2 sekunder. Displayet viser nu "F4". Tryk herefter på "MODE" igen indtil skærmen viser "F5". Skift til °C ved at trykke på "MEM"-knappen. Ønsker du derimod at benytte °F, så tryk på knappen "⏻". Tryk på "MODE"-knappen for at gemme indstillingerne og vende tilbage til standby-tilstand.

5. Display af temperaturhukommelse

Tænd pandetermometeret og tryk på "MEM"-knappen. Herefter vil displayet vise de seneste målte temperaturer. Hukommelsen kan gemme op til 32 grupper af data. Tryk på "MEM"-knappen og hold den inde i 5 sekunder for at slette al historisk data – og gendan til fabriksindstillinger.

6. Feberalarm funktion

Hvis kropstemperatur-tilstanden måler en temperatur, som overstiger 38,0°C (100.4°F), vil produktet vibrere tre gange.

7. Skift af batteri


Når LED-skærmen viser det blinkende symbol "🔋" skal batteriet skiftes.

Sådan skifter du batteri:

- Åben låget forsigtigt
- Tag gamle batterier ud
- Isæt nye batterier (IKKE genopladelige batterier)

Vær meget forsigtigt når du skifter batterierne.

Ukorrekt håndtering kan forårsage skade på termometeret, hvilket fjerner produktgarantien.

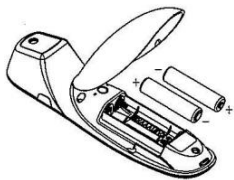

Brug aldrig genopladelige batterier, men sørg for at det er batterier til engangsbrug der benyttes.

Har du yderligere spørgsmål?

Kontakt os på kontakt@pandetermometer.dk

Vi bestræber os efter at svare på din henvendelse indenfor 24 timer.

Ha' en dejlig dag! 😊