

Lernen Sie Ihr neues MITO LIGHT® kennen

STARTER 3.0

EXPERT 3.0

BIOHACKER 3.0

MITOHACKER 3.0

BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsch



DE

Danke!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für ein von WeCare+ ausgewähltes Produkt entschieden haben.

Bei WeCare+ verstehen wir uns als Ihre Licht-Experten, die mit größter Sorgfalt und fundiertem Fachwissen die herausragendsten Produkte auswählen.

Unsere Empfehlung von Mitolight stützt sich auf seine innovative Ausrichtung und das smarte Design, das die neueste Technologie im Bereich der Lichttherapie nutzt. Es ist unser Anspruch, Ihnen durch unsere Expertise die besten Lichttherapielösungen zur Verfügung zu stellen, unterstützt durch eine informative Kundenberatung.

Bevor Sie Ihr von uns ausgewähltes Lichttherapie-Gerät in Betrieb nehmen, bitten wir Sie, die beiliegende Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen. Bitte bewahren Sie sie für zukünftige Referenzen auf, teilen Sie sie mit anderen Nutzern und folgen Sie den darin enthaltenen Anweisungen sorgfältig.

Ihr WeCare+ Team



Informationen

Das MITO LIGHT® LED-Licht ist CE-, UKCA- und RoHS-zertifiziert. Alle bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der Aufklärung und sollen nicht die Sicherheit oder Wirksamkeit des MITO LIGHT® LED-Lichts bei der Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten demonstrieren. MITO LIGHT® LED-Licht und die bereitgestellten Informationen sind kein Ersatz für eine persönliche Konsultation eines Arztes, stellen keine Diagnose von medizinischen Problemen und sollten nicht als medizinischer Ratschlag verstanden werden. Es ist unerlässlich, vor der Anwendung einen Arzt zu konsultieren, insbesondere wenn Sie eine Vorerkrankung haben oder Medikamente einnehmen. Das MITO LIGHT® LED-Licht ist nur für die Beleuchtung bestimmt. Individuelle Ergebnisse können variieren.

Inhaltsübersicht

01

Verpackungsinhalt

02

Beschreibung

03

Wie funktioniert das?

04

Zubehör

05

Wie man das Gerät benutzt

06

Erklärung der Symbole

07

Sicherheitshinweise

08

Technische daten

09

Likvidation

10

Garantie und Ansprüche

Verpackungsinhalt

- 1x LED-Licht
- 1x Netzkabel
- 1x Netzverlängerungskabel
- 1x Anschlusskabel für das Bedienfeld
- 1x Schutzbrille
- 1x Anschlussystem
- 1x Aufhängesystem
- 1x Bedienungsanleitung

Überprüfen Sie zunächst, ob die LED-Licht vollständig und nicht beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

Die Verpackungen sind recycelbar oder können dem Rohstoffrecycling zugeführt werden.

Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial vorschriftsmäßig. Sollten Sie beim Auspacken Transportschäden feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.

Beschreibung


MITO LIGHT® LED-LICHT 3.0

(im Folgenden als "Gerät" bezeichnet)

Die technischen Daten des Geräts, die Anordnung der einzelnen Elemente in den verschiedenen Modellen oder der Inhalt dieses Handbuchs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Funktionen des Produkts zu verbessern. Die Fotos zur Veranschaulichung zeigen den MITO LIGHT® Biohacker 3.0.

Das MITO LIGHT®-Gerät strahlt im **roten und nahen Infrarotspektrum**.

Es ist mit **Hochleistungs-LEDs** mit einer optimalen Auswahl an Wellenlängen ausgestattet, die vier Spitzenwerte aufweisen **660, 670, 830, 850 nm**. Alle Wellenlängenspitzen sind in einem Verhältnis von 1:1:1:1 vertreten. Durch dieses Verhältnis wird eine **große Synergie** in Form von roten und nahinfraroten Spektren erreicht.

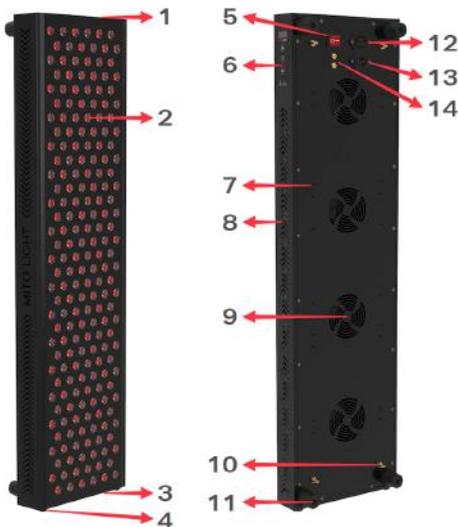

- 1 Gewinde für vertikale Aufhängung
- 2 LEDs
- 3 Löcher für den Anschluss von Geräten an der Unterseite
- 4 Untere Schutzpolster
- 5 Netzschalter
- 6 Bedienfeld
- 7 Gewinde für den Anschluss von zwei Geräten nebeneinander
- 8 Kühlungslöcher
- 9 Kühlgebläse
- 10 Griffe für horizontale Aufhängung
- 11 Rückenschutzpolster
- 12 Steckverbinder des Netzverlängerungskabel
- 13 Steckverbinder des Netzkabel
- 14 Steckverbinder für das Verbindungskabel zum Bedienfeld


Wie funktioniert das?

Rotes und nahinfrarotes Licht wird von Chromophoren in den Mitochondrien (insbesondere Cytochrom c Oxidase) absorbiert, was zu einem **Anstieg** des mitochondrialen Membranpotenzials, des Sauerstoffverbrauchs, des **Adenosintriphosphats (ATP)** und einem vorübergehenden Anstieg der reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) führt, was wiederum eine **erhöhte antioxidative Aktivität zur Folge hat**.

Es kann daher helfen, **die Energie zu steigern, die Regeneration von Muskeln, Gelenken und Sehnen zu beschleunigen, die Kollagenproduktion zu erhöhen, die Hautqualität zu verbessern, die Blutzirkulation zu verbessern** und andere positive Effekte zu erzielen.

Unterschiede bei der Verwendung von rotem (RED) und nahinfrarotem (NIR) Licht

- **Rotes Licht** wird von der Haut absorbiert. Es kann dazu beitragen, die Qualität und das Aussehen der Haut zu verbessern und die Heilung von Wunden und Narben zu beschleunigen.
- **Nahinfrarotlicht** dringt tiefer in den Körper ein. Es kann dazu beitragen, die Regeneration von Muskeln, Gelenken und Sehnen zu verbessern oder die kognitiven Funktionen zu steigern.
- Das rote und das nahe Infrarotspektrum werden am häufigsten zusammen verwendet und haben synergistische Effekte.

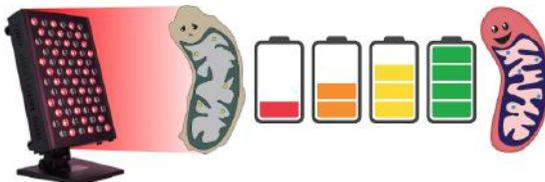

Zubehör

Netzkabel

- Sie ist für den Anschluss des Geräts an eine Steckdose vorgesehen.

Netzverlängerungskabel

- Es ist für den elektrischen Anschluss an ein anderes Gerät vorgesehen. Bei Verwendung von zwei Geräten wird es über ein Netzkabel mit dem Gerät verbunden, das an die Steckdose angeschlossen ist. Werden mehr als zwei Geräte angeschlossen, wird jedes weitere Gerät auf die gleiche Weise mit einem Verbindungskabel angeschlossen. Die maximale Anzahl von Geräten, die auf diese Weise angeschlossen werden können, hängt von der Leistungsgrenze Ihrer Steckdose ab.

Anschlusskabel für das Bedienfeld

- Es dient dazu, ein Bedienfeld mit einem anderen zu verbinden. Bei Verwendung von mehr als einem Gerät wird dieses Kabel an den Anschluss "OUTPUT" des Hauptgeräts und an den Anschluss "INPUT" des anderen Geräts angeschlossen. Wenn mehr als zwei Geräte angeschlossen sind, wird jedes weitere Gerät auf die gleiche Weise angeschlossen. Alle auf diese Weise angeschlossenene Geräte werden dann über das Bedienfeld des Hauptgeräts gesteuert.

Anschluss-System (Eisenplatte, 4x Schrauben, Inbus)

- Sie ist für den Anschluss von zwei Geräten nebeneinander vorgesehen. Die Geräte werden so nebeneinander gestellt, dass die Gewindereihe für die Verbindung auf gleicher Höhe liegt. Die Eisenplatte wird über beide Geräte gestülpt und mit vier Schrauben festgeschraubt. In die zweite Gewindereihe wird auf die gleiche Weise eine zweite Eisenplatte eingeschraubt, um eine ausreichende Festigkeit zu gewährleisten. Das Modell MITO LIGHT® Starter 3.0 hat aufgrund seiner geringeren Größe nur eine Gewindereihe für die Verbindung.

Schutzbrille

- Den Rückmeldungen von Kunden zufolge verwenden die meisten Benutzer keine Schutzbrille und halten nur die Augen während des Glanzes geschlossen. Tragen Sie jedoch immer eine Schutzbrille, sofern Ihr Arzt nichts anderes anordnet.

Aufhängesystem (Umlenkrolle mit Seil und Karabinern, Stahlseile mit Karabinern, Stahlseile mit Gewinde, Karabiner und doppelseitige Schrauben, Türhaken)

Vertikale Montage

- Zunächst werden doppelseitige Schrauben in die Gewinde auf der Oberseite des Geräts geschraubt, in die die Gewinde der Stahlseile mit Karabinerhaken eingeschraubt werden. Der Karabiner wird mit dem Karabiner des Seils verbunden, das am anderen Ende eine Umlenkrolle hat. Der Karabiner mit der Umlenkrolle wird an einem Eisenhaken an der Tür oder an einem anderen festen Punkt mit ausreichender Tragfähigkeit (z. B. an einer in der Öse mit Schraube) aufgehängt.

Vertikale Verbindung von zwei Geräten untereinander

- Auf der Oberseite des unteren Geräts müssen zunächst Schrauben mit einer Aussparung für die Befestigung angebracht werden. Diese Schrauben werden dann in die Löcher an der Unterseite der oberen Vorrichtung eingeführt, und die Aussparungen an den Schrauben werden in den engeren Teil der Löcher gesteckt, um die Vorrichtung fest an ihrem Platz zu halten.

Horizontale Montage (gilt nicht für Starter 3.0)

- Die Stahlseile mit Karabinern werden an den horizontalen Aufhängerlöchern auf der Rückseite des Geräts befestigt. Es ist dann möglich, das Gerät an zwei festen Punkten mit ausreichender Tragfähigkeit aufzuhängen.



Wie man das Gerät benutzt

1. **Beachten Sie die Sicherheitshinweise.**
2. **Befestigen** Sie das vollständig ausgepackte Gerät in der **stabilen Position**, die Sie verwenden werden.
3. **Stecken Sie das Netzkabel** in das Gerät, stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose und **schalten Sie den Netzschalter ein** (Position "I").
4. **Drücken Sie die Taste "M"** auf dem Bedienfeld, um den Lichtmodus zu wählen:
 - A) Das Display zeigt "R" (RED) - **rotes Spektrum.**
 - B) Das Display zeigt "I" (INFRARED) - **Nahinfrarotspektrum.**
 - C) Das Display zeigt "R I" - **Rotes und Nahinfrarotspektrum.**
5. **Mit der Taste "T"** können Sie die Leuchtdauer **von 1 bis 20 Minuten** einstellen.
6. **Drücken Sie die Taste "OK", um das Licht zu starten.**
7. **Setzen Sie sich täglich 10 - 20 Minuten** lang unbedeckt in einem **Abstand von 15 - 50 cm** zum Licht aus.
 - Den Rückmeldungen von Kunden zufolge verwenden die meisten Benutzer keine Schutzbrille und halten nur die Augen während des Glühens geschlossen. Tragen Sie jedoch immer eine Schutzbrille, sofern Ihr Arzt nichts anderes anordnet.
 - Je kürzer der Abstand zum Licht, desto kürzer ist die Beleuchtungszeit und umgekehrt.
 - Diese eine Lichtenwendung gilt für einen beleuchteten Bereich. Ein Bereich kann 1 - 2 Mal pro Tag beleuchtet werden. Wenn dieselbe Fläche beleuchtet wird, empfehlen wir eine Gesamtzeit von nicht mehr als 30 Minuten pro Tag.
8. **Das Licht schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus.**

Um es manuell auszuschalten, drücken Sie die Taste "OK".

 - Wenn die Uhrzeit auf 0:00 eingestellt ist, leuchtet das Licht so lange, bis Sie es manuell mit der Taste "OK" ausschalten.
9. **Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen, schalten Sie zuerst den Netzschalter aus** (Position "O") und ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose. Dadurch wird das Gerät vollständig vom Stromnetz getrennt.

Erklärung der Symbole

Im Benutzerhandbuch werden die folgenden Symbole verwendet:



Warnung vor Verletzungsgefahr oder Gesundheitsgefährdung.



Sicherheitswarnung für mögliche Schäden am Gerät/Zubehör.



Sicherheitshinweise



- Stellen Sie das Gerät auf eine feste und ebene Unterlage oder hängen Sie es sicher auf.
- Das Gerät ist nicht stabil, wenn es ohne Stütze steht. Verwenden Sie es nur an eine Wand oder einen anderen festen Punkt gelehnt, um sicherzustellen, dass es nicht herunterfällt.
- Verwenden Sie zum Aufhängen des Geräts nur das im Lieferumfang enthaltene Zubehör. Der Hersteller ist nur für die Sicherheit des in der Verpackung enthaltenen Zubehörs verantwortlich, nicht für anderes Zubehör oder die Orte, an denen es aufgehängt wird.
- Wenn Sie das Gerät mit einem Ständer aus unserem Sortiment verwenden, installieren Sie ihn bitte gemäß der Bedienungsanleitung des Ständers und sichern Sie das Gerät am Ständer, um es vor dem Herunterfallen zu schützen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Verwendungszweck.
- Das Gerät darf nicht auf der Vorderseite mit den LEDs liegen.
- Der Mindestabstand zwischen brennbaren Gegenständen und dem Gerät muss mindestens einen Meter betragen.
- Stellen Sie keine leicht entflammaren oder schmelzenden Gegenstände in der Nähe des Geräts ab.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, in der Nähe einer Badewanne oder Dusche, in der Nähe eines nassen Waschbeckens oder mit nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen und Vibrationen.
- Eine unsachgemäße Installation kann dazu führen, dass das Gerät umkippt oder herunterfällt, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör oder unsachgemäße Installation verursacht werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts, dass es sicher installiert ist. Wenn Sie sich bei der Installation unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den aufgeführten Kundenbetreuung.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät an Stellen aufzuhängen, die nicht stabil genug sind, um sein Gewicht zu tragen.
- Überprüfen Sie Ihre Anlage regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie langfristig sicher bleibt. Wenn irgendein Teil der Installation nachlässt oder sich verschlechtert, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den angegebenen Kundenbetreuung.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es sich viel bewegt und wo es versehentlich umgestoßen werden könnte.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um versehentliches Herunterfallen oder Beschädigungen zu vermeiden.

VOR DER INBETRIEBSETZUNG



- Entfernen Sie die gesamte Verpackung, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Überprüfen Sie das Gerät auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Wenn Sie Zweifel an der Beschädigung des Geräts haben, wenden Sie es nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den angegebenen Kundenbetreuung.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen.
- Schützen Sie das Gerät vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT



- Jede unsachgemäße Verwendung kann gefährlich sein!
- Das Gerät darf nur an die Netzspannung angeschlossen werden, deren Wert auf dem Typenschild angegeben ist.
- Verwenden Sie einen leicht zugänglichen Netzanschluss, damit Sie bei Bedarf schnell den Netzstecker ziehen können.
- Berühren Sie den Netzstecker und das Gerät nicht mit nassen Händen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!
- Schützen Sie das Netzkabel vor dem Kontakt mit heißen Gegenständen und offenen Flammen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Netzkabel nicht einklemmen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung, Rauch oder Geruch auftritt. Ziehen Sie beim Herausziehen des Netzsteckers nur am Stecker, nicht am Kabel!
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass das Gerät und sein Zubehör nicht sichtbar beschädigt sind. Verwenden Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den angegebenen Kundenbetreuung.
- Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder der Abdeckung an Ihren Händler oder den angegebenen Kundenbetreuung. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
- Es besteht die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlags.
- Das Gerät ist nur dann sicher vom Netz getrennt, wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG



- Das Gerät ist nur für die Beleuchtung bestimmt.
- Jede andere Verwendung ist als nicht konform zu betrachten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Erststückergefahr - kleine Teile.
- Das Gerät darf im eingeschalteten Zustand nicht abgedeckt oder in eine Verpackung eingewickelt sein.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät auf den Boden gefallen ist, übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt war oder anderweitig beschädigt wurde, darf es nicht verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden, und es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn es defekt ist oder wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Gegenwart von entflammaren Mischungen aus Narkosegasen und Luft, Sauerstoff oder Stickstoffoxid.
- Verändern Sie nichts am Gerät ohne die Zustimmung des Herstellers.
- Es besteht Verletzungsgefahr, die Gefahr eines elektrischen Schlags, Brandgefahr oder die Gefahr einer Beschädigung des Geräts.
- Dieses Gerät ist in erster Linie für den Heimgebrauch bestimmt.

ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG DES GERÄTS



- Schauen Sie nicht in die Lichtquelle, wenn Sie leuchten, und tragen Sie eine Schutzbrille.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, wenn es eingeschaltet ist.
- Wasser darf nicht auf das Gerät spritzen.
- Das Gerät darf nur in völlig trockenem Zustand verwendet werden.
- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen, schalten Sie den Netzschalter aus (Position "0") und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es ins Wasser gefallen ist oder beschädigt wurde.
- Entfernen Sie brennbare Gegenstände aus der Reichweite des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne oder Dusche, über einem nassen Waschbecken oder mit nassen Händen.

WANN DARF DAS GERÄT NICHT VERWENDET WERDEN?



- Bei akuten Entzündungsprozessen kann das Gerät nur nach Rücksprache mit einem Arzt eingesetzt werden.
- Bei schwangeren Frauen kann das Gerät nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwendet werden.
- Bei Krebspatienten kann das Gerät nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwendet werden.
- Bei Menschen mit Schilddrüsenüberfunktion kann das Gerät nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwendet werden.
- Wenn eine Person Medikamente einnimmt, die die Lichtempfindlichkeit beeinträchtigen können, darf das Gerät nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwendet werden.
- Bei Kindern darf das Gerät nur nach Rücksprache mit einem Arzt und unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Nicht anwenden bei hilflosen Personen, Kindern unter 3 Jahren, hitzeempfindlichen Personen (Personen mit Hautkrankheiten), nach Einnahme von Schmerzmitteln, Alkohol oder Drogen.

- Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben!
- Die Anwendung nach Verletzungen oder Operationen ist nur nach Rücksprache mit einem Arzt erlaubt.
- Das Gerät ist nicht für Personen mit verminderter Wärmeempfindlichkeit geeignet.
- Setzen Sie keine geschwollenen, verbrannten oder entzündeten Körperteile, Bereiche mit Hautausschlägen, Wunden oder andere empfindliche Bereiche aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Haut brennt oder unempfindlich ist.
- Wenn eine Hautreizung auftritt, beenden Sie die Anwendung und suchen Sie einen Arzt auf.

WICHTIGE HINWEISE



- Der Abstand zum Gerät hängt von der individuellen Lichtempfindlichkeit und dem jeweiligen Bedarf ab. Achten Sie immer darauf, dass der Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Gerät und dem zu beleuchtenden Körperteil nicht überschritten wird.
- Beleuchten Sie einen Bereich nicht länger als 30 Minuten pro Tag.
- Beleuchten Sie einen Bereich nicht länger als 20 Minuten am Stück aus einer Entfernung von weniger als 30 cm.
- Achten Sie immer auf Haut- und Augenreaktionen. Wenn das Licht Ihre Haut oder Augen verbrennt, schalten Sie das Gerät sofort aus und verwenden Sie es nicht.
- Medikamente, Kosmetika oder Lebensmittel können unter Umständen zu Überempfindlichkeiten oder allergischen Hautreaktionen führen. In diesem Fall muss die Beleuchtung sofort abgestellt werden.
- Bei der Bedienung des Geräts ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind und die Gefahr besteht, bei eingeschaltetem Licht einzuschlafen.
- Eine zu starke Lichtexposition kann zu Zellstress führen und ist potenziell gefährlich.
- Kinder kennen die mit elektrischen Geräten verbundenen Gefahren nicht. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht von unbeaufsichtigten Kindern benutzt wird.

REINIGUNG UND REPARATUR



- Sie dürfen das Gerät unter keinen Umständen öffnen oder anderweitig reparieren. Andernfalls ist die einwandfreie Funktion nicht gewährleistet. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift erlischt die Garantie.
- Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den angegebenen Kundenbetreuung.
- Unsachgemäße Handhabung kann zu Verletzungen, elektrischem Schlag, Brand oder Beschädigung des Geräts führen.
- Sie dürfen das Gerät nicht selbst reparieren. Es enthält keine Teile, die Sie selbst reparieren können.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht in der Spülmaschine!
- Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.
- Ziehen Sie zur Reinigung das Netzkabel ab und wischen Sie das Gerät vorsichtig mit einem Tuch ab.
- Spritzen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt auf das Gerät. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder einer Beschädigung des Geräts kommen.

LAGERUNG UND TRANSPORT



- Bevor Sie das Gerät bewegen, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es berühren.
- Lagern Sie das Gerät vorzugsweise in der Originalverpackung und an einem trockenen Ort.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es einlagern.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es giftigen Dämpfen oder flüchtigen Substanzen ausgesetzt ist.
- Achten Sie beim Transport darauf, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist und dass alle Kabel abgezogen wurden.
- Verhindern Sie, dass Gegenstände auf das Gerät treffen und herunterfallen.

IM FALLE EINES NOTFALLS



- Versuchen Sie im Falle eines Brandes des Gerätes nicht, diesen mit Wasser zu löschen. Verwenden Sie einen für elektrische Brände geeigneten Feuerlöscher.
- Wenn das Gerät Rauch, Funken oder einen starken Brandgeruch entwickelt, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den angegebenen Kundenbetreuung.
- Versuchen Sie in solchen Fällen nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu zerlegen. Dies könnte zu weiteren Schäden oder Verletzungen führen.
- Sollte das Gerät einen elektrischen Schlag verursachen, trennen Sie es sofort vom Stromnetz. Berühren Sie eine an die Stromquelle angeschlossene Person nicht direkt. Verwenden Sie einen nicht leitenden Gegenstand, um die Person von der Stromquelle zu trennen, und suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

HINWEIS

- Für die hier aufgeführten Anwendungen sind keine Nebenwirkungen bekannt, vorausgesetzt, alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung werden befolgt.
- Für alle anderen Anwendungen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, dürfen Sie dieses Gerät nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwenden.
- Dieses Gerät ist nicht für den industriellen oder klinischen Gebrauch bestimmt.
- Wenden Sie sich bei gesundheitlichen Problemen jeglicher Art an Ihren Arzt!

Woran erkenne ich, dass das Licht nicht richtig funktioniert?

- Die roten (RED) oder Nah-Infrarot (NIR) LEDs leuchten oder blinken nicht, wenn sie eingeschaltet sind.
- Nur ein Teil der roten (RED) oder Nahinfrarot-LEDs (NIR) leuchtet, wenn das rote oder Nahinfrarot-Licht eingeschaltet ist.
- Ein ungewöhnliches Lüftergeräusch ist zu hören, wenn das Rot- oder Nahinfrarotlicht eingeschaltet wird.

Wie kann ich feststellen, ob das Licht richtig funktioniert?

• Wenn das rote Spektrum (RED) eingeschaltet wird, leuchtet die Hälfte der LEDs auf und strahlt ein sichtbares, intensives rotes Licht aus. Gleichzeitig schalten sich auch die Lüfter ein. Die andere Hälfte der LEDs leuchtet nicht auf.

• Wenn das Nahinfrarotspektrum (NIR) eingeschaltet wird, leuchtet die Hälfte der LEDs auf und strahlt unsichtbares Nahinfrarotlicht aus. Dieses Spektrum ist für das menschliche Auge unsichtbar. Der ordnungsgemäße Betrieb kann über die Kamera eines Mobiltelefons überprüft werden. Das Objektiv der Kamera kann dieses Licht erkennen. Gleichzeitig schalten sich auch die Lüfter ein. Die andere Hälfte der LEDs leuchtet nicht auf.

• Wenn sowohl das rote (RED) als auch das Nahinfrarotspektrum (NIR) eingeschaltet sind, leuchten alle LEDs gleichzeitig auf. Die eine Hälfte strahlt sichtbares rotes, intensives Licht aus, die andere Hälfte unsichtbares Nahinfrarotlicht. Gleichzeitig schalten sich auch die Lüfter ein.

Technische daten

Name und Modell: MITO LIGHT® Starter 3.0 / Expert 3.0 /

Biohacker 3.0 / Mitohacker 3.0

Leistungsaufnahme: Starter 3.0 - 125 W / Expert 3.0 - 254 W /

Biohacker 3.0 - 344 W / Mitohacker 3.0 - 734 W

Verbrauch: Starter 3.0 – 0,125 kWh / Expert 3.0 – 0,254 kWh /

Biohacker 3.0 – 0,344 kWh / Mitohacker 3.0 – 0,734 kWh

Abmessungen (H x B x T): Starter 3.0 - 35 x 25 x 6,5 cm / Expert 3.0 - 66 x 25 x 6,5 cm /

Biohacker 3.0 - 92 x 25 x 6,5 cm / Mitohacker 3.0 - 92 x 41 x 6,5 cm

Gewicht: Starter 3.0 – 4,8 kg / Expert 3.0 – 6,95 kg /

Biohacker 3.0 – 9,1 kg / Mitohacker 3.0 - 15 kg

Stromeingang: AC 100-277V, 50/60Hz

Wellenlängen: 660, 670, 830, 850 nm (1:1:1:1)

Betriebsbedingungen: Temperatur zwischen 10°C und 30°C, Luftfeuchtigkeit

zwischen 40% und 60% (nicht kondensierend), Luftdruck zwischen

980 hPa und 1050 hPa, Höhe zwischen 0 und 2000 m über dem Meeresspiegel

Lagerbedingungen: Temperatur zwischen 0°C und 40°C, Luftfeuchtigkeit zwischen

40% und 60% (nicht kondensierend)

LED-Lebensdauer: 50 000 Beleuchtungsstunden

IP-Bewertung: IP20

Materialien: Metall, Kunststoff

Abstrahlwinkel: 30 Grad

Zertifizierungen: CE, UKCA, RoHS

Likvidation

Um die Umwelt zu schützen, darf das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften erfolgen.

Die umweltgerechte Entsorgung von Elektroschrott wird durch das Sammelsystem REMA System, a.s. gewährleistet. Wenn Sie Ihr Gerät entsorgen möchten, kontaktieren Sie uns unter hello@mitolight.com, und wir werden eine kostenlose weltweite Abholung Ihres Geräts an Ihrer Adresse und eine Übergabe des Geräts an eine Sammelstelle von REMA System, a.s. veranlassen.

Garantie und Ansprüche

Für MITO LIGHT® Starter 3.0, MITO LIGHT® Expert 3.0, MITO LIGHT® Biohacker 3.0, MITO LIGHT® Mitohacker 3.0 gilt eine **3-jährige Garantie**.

Wenn Sie die Ware bereits funktionsunfähig erhalten haben oder ein Problem bei der Nutzung aufgetreten ist, befolgen Sie bitte die Anweisungen auf der Seite:

www.mitolight.com/complaints-and-returns

Wir werden Ihre Beschwerde in Rekordzeit lösen!

Die Beschwerdebedingungen sind zu finden unter:

www.mitolight.com/complaint-conditions

EU-Konformitätserklärung

Produkt: MITO LIGHT® LED-Lampen

Modelle: Bulb 3.0, Starter 3.0, Expert 3.0, Biohacker 3.0, Mitohacker 3.0

Hersteller: MITO LIGHT Logistics s.r.o.

Simerova 428/3, Doudlevice, 301 00 Pilsen, Tschechische Republik

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

RICHTLINIE 2014/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)

RICHTLINIE 2014/35/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (LVD)

RICHTLINIE 2011/65/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Verweise auf die angewandten harmonisierten Normen, einschließlich des Datums der Norm, oder auf andere technische Spezifikationen, einschließlich des Datums der Spezifikationen, auf deren Grundlage die Konformität geltend gemacht wird:

EN 60335-1:2012/AC:2014/A11:2014/A13:2017/A1:2019/A14:2019/A2:2019/A15:2021

EN 60335-2-27:2013/A1:2020/A2:2020/AC:2021-11

EN 62471:2008

EN 61000-3-3:2013

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021/AC:2022-01

Diese Konformitätserklärung wird ungültig, wenn Änderungen am genannten Produkt vorgenommen werden, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden.

Unterzeichnet für und im Namen von:

MITO LIGHT Logistics s.r.o.

Karel Mencl, der Geschäftsführer

In Pilsen, 10/8/2023



MITO LIGHT Logistics s.r.o.
Simerova 428/3, 301 00 Plzeň
Česká republika
IČO: 19262680

WeCarePlus

KUNDENSERVICE

kontakt@wecareplus.de

0521 759 8370

WeCare+ GmbH
Detmolder Str. 596-598,
33699 Bielefeld