

skindion®

Dispositivo de
Rejuvenecimiento Facial
Tecnología de Microcorriente

¡Gracias!


Cuidar de ti mismo es un hermoso acto de amor propio y nos llena de alegría que hayas elegido skindion como parte de este camino.

Estamos entusiasmados por formar parte de tu viaje hacia una piel más sana y rejuvenecida.

¡Bienvenida a la comunidad skindion! Gracias por confiar en nosotros.



Conoce tu skindion

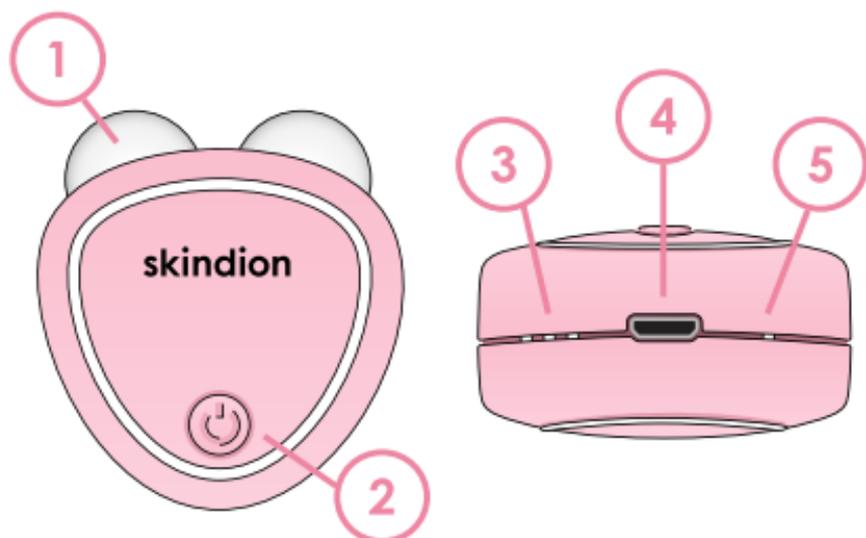

1

Esferas de Microcorriente

2

Botón de encendido Multifunción:

- ON | OFF
- Control de Intensidad
- Vibración

3

Indicador de Intensidad (3 Niveles)

4

Conexión Micro-USB

5

Indicador de Carga

1

CARGA INICIAL



Antes de usar tu skindion por primera vez, cárgalo por 3 hrs. Del lado derecho, verás una luz roja parpadear mientras carga. La luz cambiará a verde al terminar la carga. Para encenderlo, desconecta tu dispositivo **(Por seguridad no enciende estando conectado)**.

2

ON | OFF



2

Mantén presionado el botón por 2 segundos para encender o apagar tu skindion.

3

NIVELES



Para alternar la intensidad, enciende tu skindion y presiona una vez el botón. Podrás ver la luz indicando cada nivel en la parte lateral izquierda. Presiona de nuevo para cambiar entre los niveles.

4

VIBRACIÓN ON | OFF



Presiona dos veces seguidas (doble clic) para activar o desactivar la vibración de tu skindion (**por seguridad el dispositivo se apaga a los 15 minutos de uso**).

Plan de Rejuvenecimiento Facial en 5 Minutos

1

LIMPIEZA



Antes de comenzar, asegúrate de que tu rostro esté completamente limpio y libre de maquillaje o grasa. Utiliza tu limpiador facial favorito, enjuaga con agua tibia y seca bien tu piel.

2

GEL CONDUCTOR



Para garantizar una experiencia cómoda y efectiva, aplica por zona a tratar una capa uniforme de tu gel skindion.

El gel mejora la conducción de las ondas de microcorriente y mantiene tu piel suave e hidratada.

3

SELECCIONA INTENSIDAD



Skindion cuenta con 3 niveles de intensidad. Comienza con el nivel más bajo y aumenta gradualmente según te sientas cómoda.

TIP: Desactiva la vibración y coloca la lengua sobre tu dentadura al tratar la zona alrededor de la boca.

4

TONIFICA Y REJUVENECE



Desliza suavemente el dispositivo por las áreas que deseas tratar, siguiendo las líneas naturales de tu rostro. Dedicar 5 minutos a cada sesión y en poco tiempo comenzarás a ver una piel más tonificada y rejuvenecida.

Lleva tu **skindion** contigo en todo momento

Con la compra de tu skindion, incluimos nuestro Gel Conductor Hidratante de 50g. Este gel viene en una práctica **botella rellenable**, que además de ser amigable con el medio ambiente, es compacta y ligera como tu skindion.



Zona de Tratamiento: Mandíbula



Sujeta tu skindion verticalmente en el centro de tu mentón, con una esfera por encima de la mandíbula y otra por debajo. Desliza las esferas de microcorriente desde el centro hacia la oreja. Repite uniformemente de cada lado al menos 5 veces.

Zona de Tratamiento: Surco Nasogeniano



Sujeta tu skindion verticalmente y coloca ambas esferas sobre la parte inferior del Surco Nasogeniano. Desliza las esferas de abajo hacia arriba. Repite uniformemente de cada lado al menos 5 veces.

Zona de Tratamiento: Pómulo



Sujeta tu skindion verticalmente y coloca ambas esferas sobre la parte superior del surco nasogeniano. Desliza las esferas de microcorriente hacia la oreja. Repite uniformemente de cada lado al menos 5 veces.

Zona de Tratamiento: Frente



Sujeta tu skindion horizontalmente por encima de las cejas. Desliza las esferas de microcorriente hacia arriba. Repite uniformemente de extremo a extremo por la frente al menos 5 veces.

Zona de Tratamiento: Entrecejo



Sujeta tu skindion verticalmente y coloca una esfera o ambas sobre el entrecejo. Desliza las esferas de izquierda a derecha y viceversa (zig zag) de abajo hacia arriba. Repite al menos 5 veces.

Zona de Tratamiento: Papada



Sujeta tu skindion horizontalmente en la parte superior del cuello y desliza lentamente las esferas de microcorriente hacia la barbilla.

Repite al menos 5 veces
(Evitar contacto en la zona Tiroides).

Lleva tu experiencia **skindion** al siguiente nivel...


Escanea el siguiente código QR.
Te llevará directamente a un video
donde te mostraremos de forma
más detallada cómo utilizar tu
skindion y te compartiremos
consejos adicionales para
maximizar tus resultados.



<https://skindion.mx/gracias>


Descubre el Poder de la Microcorriente con **skindion**

Entendiendo tu Piel

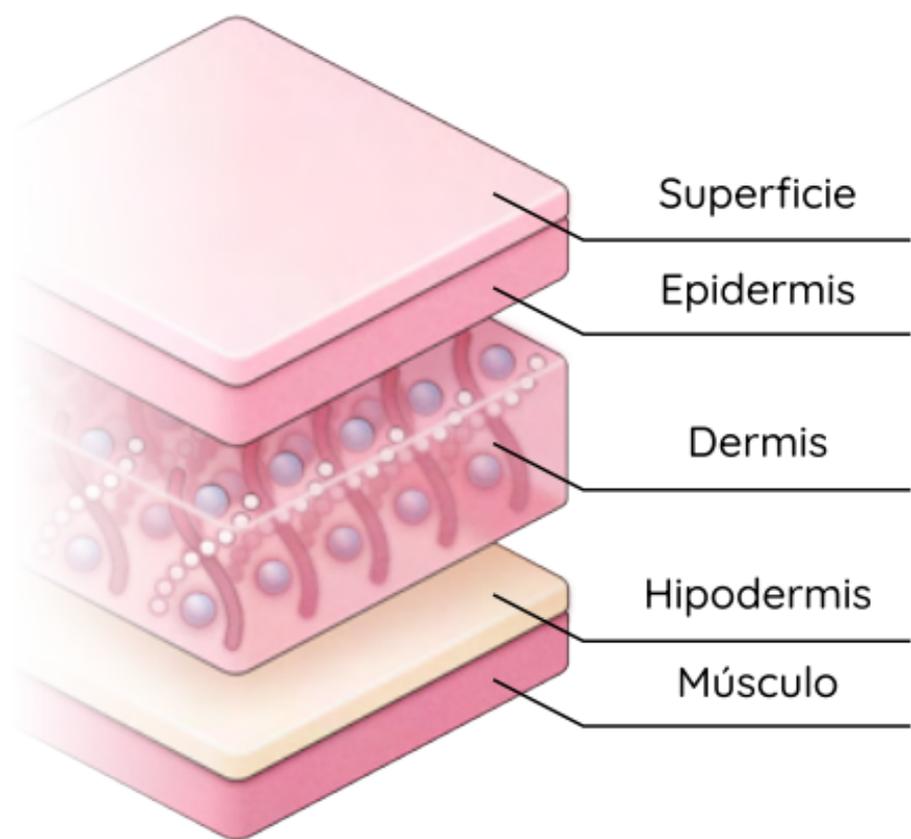

Tu piel es un conjunto complejo de capas vivas: Epidermis, dermis e hipodermis, seguido por el músculo.


Con la edad, las fibras de colágeno y elastina en tu dermis se debilitan, disminuyendo la elasticidad y firmeza de tu piel.

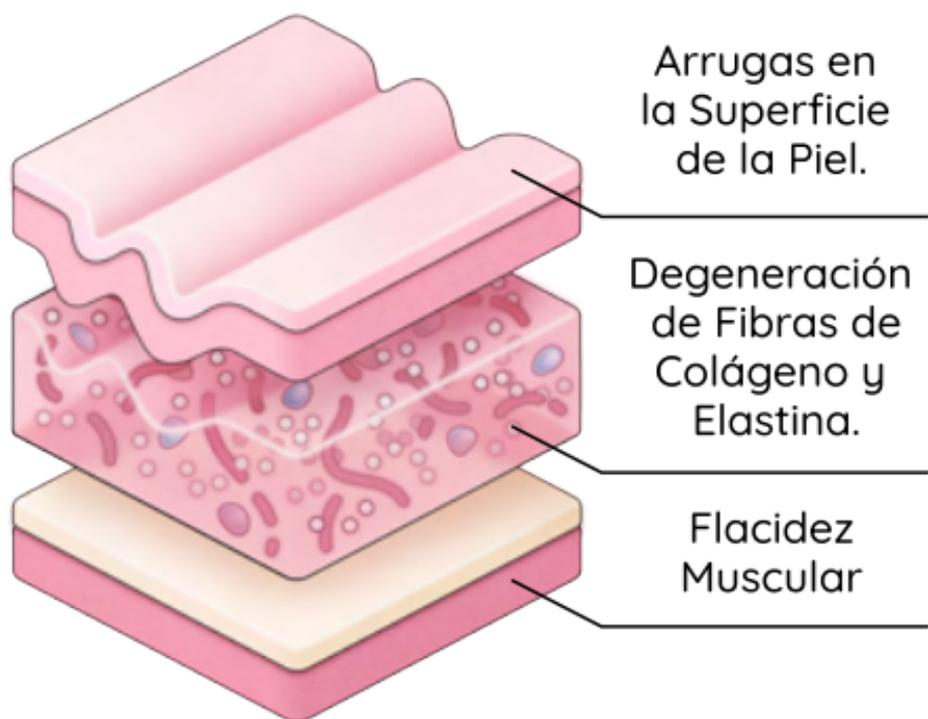

Historia de la Microcorriente

La microcorriente es una modalidad en la que se utiliza una corriente eléctrica de bajo nivel para imitar los efectos del flujo de corriente del cuerpo.

Se utilizó por primera vez en los 70's para tratar la parálisis facial. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó la microcorriente como estimulador muscular a principios de los 80's. Un uso común de la microcorriente actualmente es para el rejuvenecimiento de la piel.

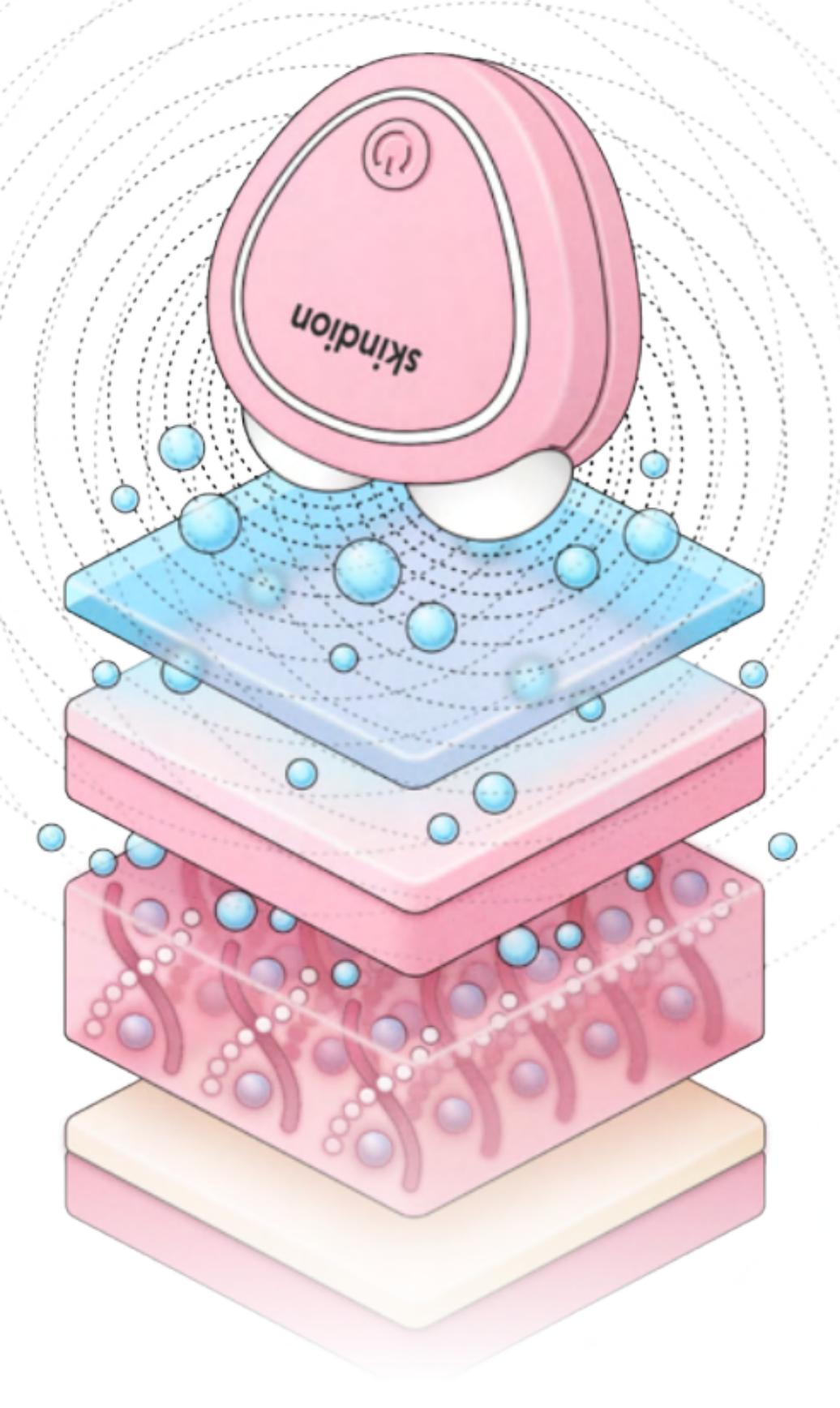


Poder de la Microcorriente

El dispositivo skindion utiliza microcorriente para transmitir suaves ondas de energía (minúsculos pulsos de electricidad) a las distintas capas de tu piel, penetrando hasta los músculos faciales. Este proceso también conocido como electroestimulación, ayuda a tonificar y dar firmeza a tu rostro, al mismo tiempo que mejora la microcirculación de tu piel y ayuda a la producción de colágeno. De esta forma, skindion tonifica, levanta y rejuvenece tu piel de forma natural desde el interior.

Descubre el Gel conductor **skindion**

El gel skindion es indispensable para lograr resultados efectivos. Con su base de agua ionizada y destilada, transmite la microcorriente de manera eficiente, preparando tu piel para un rejuvenecimiento profundo.

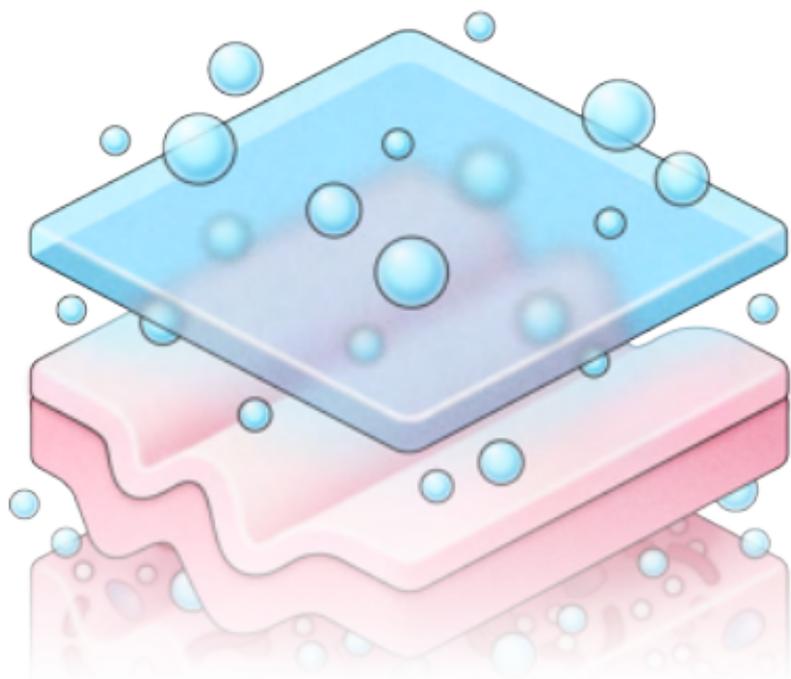



GEL CONDUCTOR HIDRATANTE

El Gel Hidratante skindion es tu aliado perfecto para lograr una piel hidratada, suave y radiante al instante. Enriquecido con ácido hialurónico, colágeno, elastina, extracto de hamamelis, áloe vera y otros nutrientes, mejorará la textura de tu piel haciéndola más tersa, reduciendo poros abiertos y disminuyendo líneas de expresión.

Puedes obtener el tuyo en:

skindion.mx/gel

Obtén un 20% de descuento en la compra de tus geles al ingresar el código: **PIELRADIANTE**



Colágeno



Ácido
Hialurónico



Elastina



Hamamelis



Aloe Vera



Vitamina
A



Vitamina
E



Agua Ionizada
y Destilada



skindion®

GEL CONDUCTOR **REGENERATIVO**

El Gel Regenerativo skindion está diseñado para reducir y combatir las manchas, cicatrices y estrías de tu piel. Gracias a su fórmula avanzada con ingredientes naturales como rosa mosqueta, centella asiática y caléndula, este gel te ayudará a renovar y revitalizar tu piel.

Puedes obtener el tuyo en:

skindion.mx/gel

Obtén un 20% de descuento en la compra de tus geles al ingresar el código: **PIELRADIANTE**



Rosa
Mosqueta



Caléndula



Centella
Asiática



Colágeno



Ácido
Hialurónico



Elastina



Vitaminas
A & E



Agua Ionizada
y Destilada



Especificaciones

Nombre: Skindion Dispositivo de Rejuvenecimiento Facial con Microcorriente | Reductor de Arrugas | Levantamiento Facial

Modelo SKU: SK-DM-101

Configuración: 3 niv. de microcorriente | 1 vibración

Dimensiones: 5.7 x 5.2 x 2.4 cm | **Peso:** 40.8g

Batería: 200mAh | 3.7v | 0.3w

Carga: 50 min. (Primera vez cargar al menos 3 hrs.)

Frecuencia: 183 Hz.

Uso por carga: 3 - 4 horas.

Limpieza: Usar microfibra ligeramente húmeda.

Advertencias

 Se apaga automáticamente después de 15 min.

 No mojar ni utilizar alcohol al limpiar.

 Desconectar para prender tu skindion
 (no enciende conectado)

 No dejar cargando más de 8 horas.

 Indicador de batería baja:
Alterna entre luz roja y verde cinco veces,
después se apaga

Contraindicaciones de Uso

- ✗ No usar en piel roja o irritada, lunares con relieve, arterias principales (ej. la carótida), vasos capilares visibles, zonas con implantes de metal, zonas con infecciones.
- ✗ No usar el dispositivo para tratar rosácea, verrugas, heridas abiertas, lesiones cancerosas, o cualquier enfermedad de la piel.
- ✗ No usar en la zona de la tiroides, ojeras, genitales e ingle.
- ✗ No usar en caso de tener un historial de epilepsia o ataques epilépticos.
- ✗ No usar si se tiene un implante médico o cualquier tipo de instrumento electrónico o prótesis.
- ✗ No usar si se ha tratado la piel con un peeling químico, tratamiento láser o cualquier otro tratamiento o procedimiento que pueda haber dañado o lesionado la piel.
- ✗ No usar si está embarazada. No se ha confirmado la seguridad en el uso durante el embarazo.
- ✗ No usar en niños menores de 18 años.



Comprometidos con tu Satisfacción

Nos comprometemos a brindarte una experiencia de 5 estrellas con cada compra. Si por alguna razón, sientes que tu experiencia no ha cumplido esa expectativa, te invitamos a contactarnos a través del chat de nuestra página web en skindion.mx/ayuda

Te ayudaremos a solucionar cualquier duda o inconveniente que puedas tener. **Evita abrir un reclamo a través de Mercado Libre u otra plataforma.** Cualquier detalle puede resolverse más rápido a través de nuestro chat con el equipo de atención personalizada. Tu satisfacción es nuestro objetivo y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar la mejor experiencia posible.

¡Estamos aquí para ti!