



SHARPER IMAGE®

SHIATSU FULL BODY



TILLYKKE MED KØBET AF DIT SHIATSU MASSAGEAPPARAT TIL FULDKROPSMASSAGE

Behold dette ark, da det har vigtige oplysninger til fremtidig reference.

Vi forbedrer løbende vores produkter, så billedet i vejledningen kan afvige lidt fra det faktiske produkt.

Distributed by and © 2021 ThreeSixty Sourcing Ltd. All rights reserved.

For US only: Distributed by and © 2021 MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618. All rights reserved. Tel: 1-800-374-2744.

Sharper Image® name and logos (including the 77 logo and Tomorrow's Tomorrow) are trademarks or registered trademarks.

Printed in China

SIKKERHEDSADVARSLER: LÆS VENLIGST DETTE FØR BRUG

- Ikke egnet for børn. Skal holdes ude af børns rækkevidde.
- Som med alle former for massager, kan blå mærker forekomme. Prøv dig frem og kontroller regelmæssigt målrettede områder. Stop med det samme, hvis du føler øget fysisk ubehag eller smerte.
- Brug ikke dette produkt, hvis du er gravid eller har en skade eller sygdom. Kontakt din læge, hvis du har en medicinsk tilstand, der kan forhindre sikker brug af dette produkt.
- Brug ikke andet tilbehør til dette produkt end det, der følger med.
- Undgå, at sove under brug af dette produkt.
- Langt hår skal holdes væk fra dette produkt, når det er i brug.
- Efterlad ikke dette produkt uden opsyn, når det er tilsluttet.
- Lad altid produktet køle af, hvis det bliver for varmt.
- Brug aldrig produktet under tæpper, hvor luftåbningen kan blokeres. Dette kan gøre produktet meget varmt, som kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
- Produktet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- Hold produktet væk fra vandkilder og opvarmede overflader.
- Rør aldrig ved stikket med våde hænder.
- Bær ikke dette produkt i ledningen.
- Se grundigt produkterne efter inden hvert brug. Hvis produktet ser ud til at være slidt, flosset/splintret, revnet eller på nogen måde ødelagt, må det ikke længere bruges, og det skal bortskaffes med det samme.

ADVARSEL OM GENOPLADELIGE BATTERIER

- Dette produkt indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
- Der er risiko for brand og personskader, hvis der stikkes hul i batteriet, eller hvis det beskadiges eller misbruges.
- Batteriet må ikke skilles ad, knuses, brændes eller kortsluttes.
- Batteriet må aldrig udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- Batteriet skal holdes væk fra brandfarlige materialer og direkte sollys.
- Batteriet må kun oplades med den medfølgende oplader, kabel og/eller adaptere.
- Genopladelige batterier må kun oplades voksne.
- Voksenopsyn er påkrævet under opladning af batteriet.
- Lad batteriet afkøle til stuetemperatur, inden det oplades.
- Batteriet skal oplades på en ikke-brandfarlig overflade og holdes væk fra brandfarlige produkter.
- Afbryd opladningen, hvis batteriet bliver varmt, svulmer op, ryger eller afgiver en stærk lugt.
- Batteriopladere, der bruges med produktet, skal regelmæssigt undersøges for beskadigelse af ledningen, stikket, kabinettet og andre dele. I tilfælde af sådanne skader, må opladere ikke bruges, før skaden er repareret.
- Genbrug eller bortskaf batteriet i henhold til den lokale lovgivning.

FARE



- For at reducere risikoen for elektrisk stød, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten straks efter brug og inden rengøring.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

VEJLEDNINGER FOR PLEJE

- Kun til pletrengøring. Tag stikket ud og tør produktet af med en fugtig klud.
- Produktet må kun lufttørres. Det må ikke tørres i tørretumbleren.
- Sørg for, at produktet er helt tørt inden det tilsluttes.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand.
- Brug ikke vaskemiddel eller sæbe under rengøringen.

- Dette produkt er ikke beregnet til behandling, helbredelse eller forebyggelse af sygdomme.
- Apparatet må kun bruges med den medfølgende vekselstrømsadapter (UDGANG DC10V 2A).
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan apparatet bruges på en sikker måde og forstår farerne ved, at bruge apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.



GENBRUG

På dette produkt finder du symbolet for sortering af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr (WEEE).

Dette betyder, at dette produkt skal håndteres i henhold til direktivet eller forordningen om lokal elektrisk og elektronisk udstyrsaffald (WEEE) for, at minimere dets indvirkning på miljøet. For yderligere oplysninger, bedes du kontakte de lokale eller regionale myndigheder. Elektroniske produkter, der ikke bortskaffes på en miljøvenlig måde, er potentielt farligt for miljøet og menneskers sundhed, da de indeholder farlige stoffer.



Batterier og akkumulatører må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Alle forbrugere er juridisk forpligtet til, at aflevere alle batterier og akkumulatører, uanset om de indeholder skadelige stoffer * eller ej, på et indsamlingssted i byen eller i en butik, så de kan bortskaffes på miljøvenligt. * Cd = cadmium; Hg = kviksølv; Pb = bly



Dette produkt overholder det gældende europæiske direktiv og nationale bestemmelser.




Dette produkt overholder den gældende lovgivning i Storbritannien."

INDHOLD

- Massageapparat
- Multifunktionsrem
- Strømadapter



Massageapparat

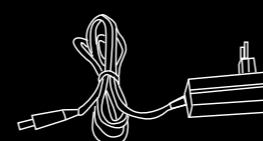

Strømadapter

FUNKTIONER


- Shiatsu massageapparat med dyb æltning
- Justerbar tryk med armstroppe
- Skift drejeretning ved, at trykke på én knap

KOM GODT I GANG

1. Sæt strømadapteren i massageapparatet og slut den derefter til en stikkontakt. 2. Massageapparatet skal lades helt op før det først tages i brug. Når massageapparatet er ladet helt op, lyser den hvide lysindikator. Massageapparatet kan bruges trådløst, når du har ladet det helt op.
3. Sæt massageapparatet på området, og hold tænd/sluk-knappen nede.
- Tryk på knappen til modsat drejning for, at massere i modsat retning.
- Tryk på hastighedsknappen for at justere lav og høj hastighed.
- Standard massagetiden er 15 minutter. Tryk på timer-knappen for, at forlænge massagen til 30 minutter.
4. Multifunktionsremmen kan tages af til fodmassage.
5. Nyd din massage!


Tænd/sluk-knap – Holdes nede for, at tænde/slukke apparatet

Timer-knap

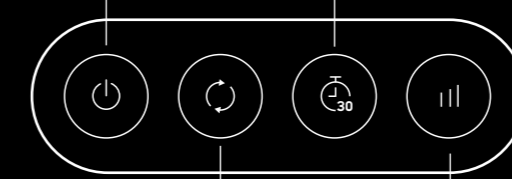


Knap til modsat drejeretning


Hastighedsknap

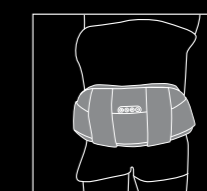


Mave

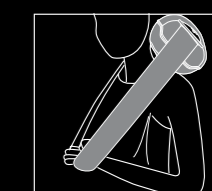


Nakke + Skuldre

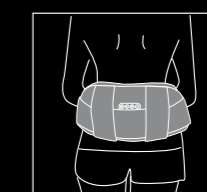


Hofte

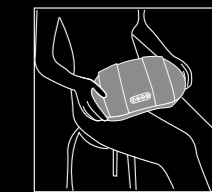

Lår

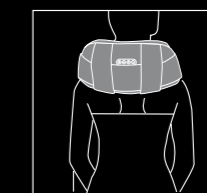


Nakke

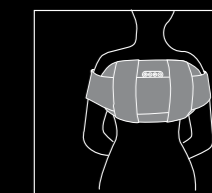

Tilbage



Fødder

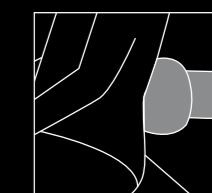

Stol