

SHARPER IMAGE®

POWERBOOST MOVE
PORTABLE PERCUSSION
MASSAGER

TILLYKKE MED DIT NYE BÆRBART POWERBOOST MASSAGEAPPARAT

Inden brug skal du sørge for, at læse alle advarselserne og vejledningerne på emballagen, dette ark og i brugsvejledningen.

Behold dette ark, da det har vigtige oplysninger til fremtidig reference.

Distributed by and © 2021 ThreeSixty Sourcing Ltd. All rights reserved.

For US only: Distributed by and © 2021 MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618. All rights reserved. Tel: 1-800-374-2744. Sharper Image® name and logos (including the 77 logo and Tomorrow's Tomorrow) are trademarks or registered trademarks. Printed in China



Dette produkt opfylder alle juridiske nationale og europæiske krav.




På dette produkt finder du symbolet for sortering af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr (EEE). Dette betyder, at dette produkt skal håndteres i henhold til europæisk direktiv 2012/19/EU til genbrug eller adskillelse for, at minimere dets indvirkning på miljøet. Brugeren har valgt mellem at give produktet til en kompetent genbrugsorganisation eller til forhandleren, når han køber et nyt elektrisk eller elektronisk udstyr.



Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Alle forbrugere er juridisk forpligtet til, at aflevere alle batterier og akkumulatorer, uanset om de indeholder skadelige stoffer * eller ej, på et indsamlingssted i byen eller i en butik, så de kan bortskaffes på miljøvenligt. * Cd = cadmium; Hg = kviksølv; Pb = bly

DU FÅR FØLGENDE


- a. Bærbart PowerBoost massageapparat
- b. Udskiftelige massageknopper (x4)
- c. USB-ladekabel

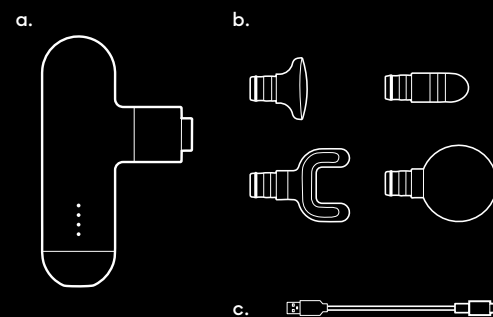

01

Sæt USB type C-siden af opladningskablet i massageapparatet, og sæt derefter den anden ende i USB-stikket på opladningskilden.


Lysindikatorerne blinker hvidt under opladning og begynder at lyse, når produktet er ladet helt op. Oplad produktet helt før brug. Massageapparatet må ikke bruges, når det oplades.

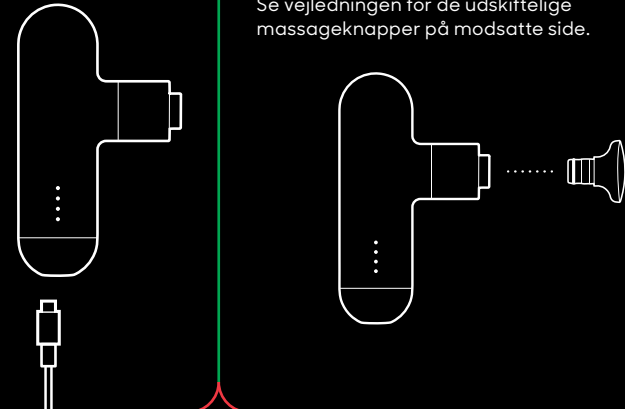

02

Vælg den ønskede massageknop og sæt den på.

Se vejledningen for de udskiftelige massageknapper på modsatte side.

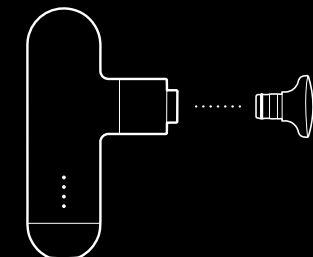


03

Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for, at tænde for massageapparatet. Tryk på knappen igen for, at skifte mellem 4 intensitetsniveauer. Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for, at slukke for massageapparatet.

Tryk to gange på tænd/sluk-knappen for, at starte funktionen Smart tryk. På denne funktion forøges massageintensiteten, når du lægger tryk på din muskel.

Knopperne tages af ved, at dreje og trække i dem.

Opladningsport

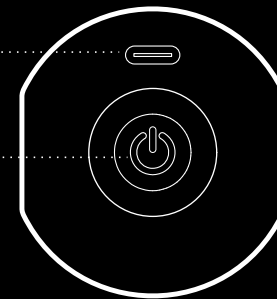


Styrke/
Intensitet-knap


04

Brug i 60 sekunder på hvert område. Produktet må ikke bruges på nakken, hovedet, hårde steder eller på knoglerne.

Brug massageapparatet i op til 10 minutter.

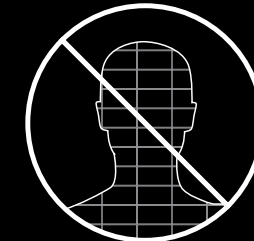


VÆLG DIT TILBEHØR

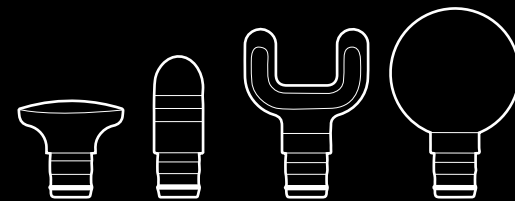


BOLD

Beregnet til generel behagelig massage på store områder.

BEREGNET TIL
Ballemuskler,
låruskler,
låruskler,
arme

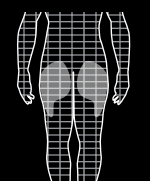


VIRKNING PÅ
MUSKEL
Lav

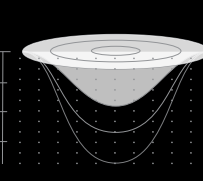


FLAD

Den hammerlignende virkning rammer dybere ind i musklerne.

BEREGNET TIL
Brystmuskler,
låruskler,
ballemuskler,
lægmuskler

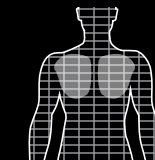


VIRKNING PÅ
MUSKEL
Medium

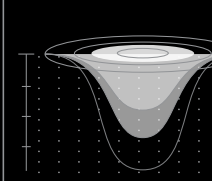



GREB

Vippes forsigtigt fra side til side for, at massere knuder og anspændte områder.

BEREGNET TIL
Nakkemuskler,
låruskler,
lægmuskler,
fødder

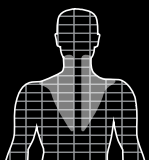


VIRKNING PÅ
MUSKEL
Høj

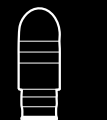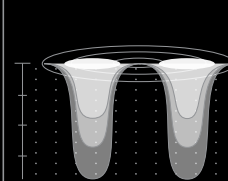


KEGLE

Denne spidse massageknop er beregnet til, at trænge mere ind i musklerne.

BEREGNET TIL
Fødder,
skulderblade,
underarme

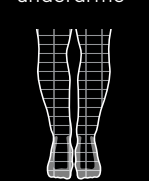

VIRKNING PÅ
MUSKEL
Høj

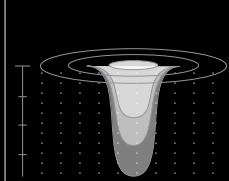

SIKKERHEDSADVARSLER:

- Ikke egnet for børn. Skal holdes ude af børns rækkevidde.
- Sørg altid for, at have en bluse/tøj på under brug. Må ikke bruges på bar hud for, at undgå mulig irritation.
- Som med alle former for massager, kan blå mærker forekomme. Prøv dig frem og kontroller regelmæssigt målrettede områder. Stop med det samme, hvis du føler øget fysisk ubehag eller smerte.
- Tænd/sluk-knappen må ikke blokeres, når produktet er i brug.
- Produktet må ikke bruges under opladning.
- Undgå, at røre monteringsområdet under brug.
- Brug ikke andet tilbehør til dette produkt end det, der følger med.
- Lad altid produktet køle af, hvis det bliver for varmt.
- Produktet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- Hold produktet væk fra vandkilder og opvarmede overflader.
- Rør aldrig ved stikket med våde hænder.
- Bær ikke dette produkt i ledningen.
- Se grundigt produkterne efter inden hvert brug. Hvis produktet ser ud til at være slidt, flosset/splintret, revnet eller på nogen måde ødelagt, må det ikke længere bruges, og det skal bortskaffes med det samme.
- Dette produkt er ikke beregnet til behandling, helbredelse eller forebyggelse af sygdomme.
- Kun til pletrensning. Træk stikket ud og tør produktet af med en fugtig klud, og lad det derefter lufttørre.
- Må kun lufttørres.
- Må aldrig puttes i en tørretumbler.

ADVARSEL OM GENOPLADELIGE BATTERIER:

- Dette produkt indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
- Der er risiko for brand og personskader, hvis der stikkes hul i batteriet, eller hvis det beskadiges eller misbruges.
- Batteriet må ikke skilles ad, knuses, brændes eller kortsluttes.
- Batteriet må aldrig udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- Batteriet skal holdes væk fra brandfarlige materialer og direkte sollys.
- Batteriet må kun oplades med den medfølgende oplader, kabel og/eller adaptere.
- Genopladelige batterier må kun oplades voksne.
- Voksenopsyn er påkrævet under opladning af batteriet.
- Lad batteriet afkøle til stuetemperatur, inden det oplades.
- Batteriet skal oplades på en ikke-brandfarlig overflade og holdes væk fra brandfarlige produkter.
- Afbryd opladningen, hvis batteriet bliver varmt, svulmer op, ryger eller afgiver en stærk lugt.
- Batteriopladere, der bruges med produktet, skal regelmæssigt undersøges for beskadigelse af ledningen, stikket, kabinettet og andre dele.
- I tilfælde af sådanne skader, må opladere ikke bruges, før skaden er repareret.
- Genbrug eller bortskaf batteriet i henhold til den lokale lovgivning.

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and 2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.



For at reducere risikoen for elektrisk stød, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten straks efter brug og inden rengøring.

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan apparatet bruges på en sikker måde og forstår farerne ved, at bruge apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.