




Elvari

KRISTALLMATTE, KRISTALLGÜRTEL & MINI

# Elvari® Bedienungsanleitung

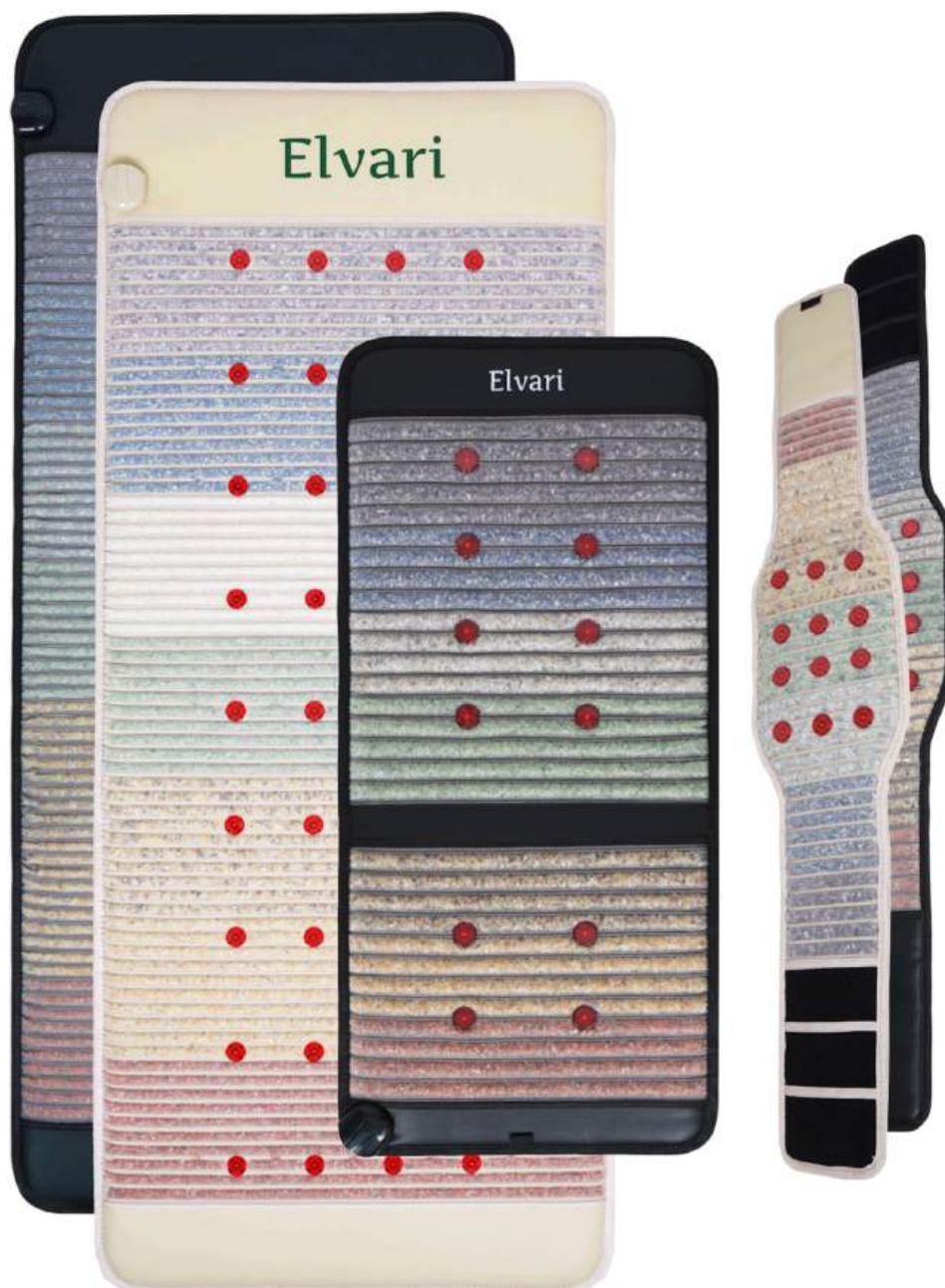

**Version:**  
**Controller:**  
**Anleitung SKU:**  
**Anleitung EAN:**

V14 - November 2024  
Elvari® Controller Pro  
ELV-00014  
4262424710125

# Inhaltsverzeichnis

Elvari® Controller Pro	Seite 2
Erste Schritte	Seite 3
Allgemeine Hinweise	Seite 4
Programmeinstellungen & Intensivprogramme	Seite 5-8
Häufige Fragen & Antworten	Seite 9
Sicherheitshinweise (Bitte vor Gebrauch vollständig lesen!)	Seite 10
Haftungsausschluss & Garantie	Seite 11
Entsorgung & Technische Daten	Seite 12-13

## Lieferumfang


<p>Elvari Kristallmatte</p> 	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kristallmatte</li><li>2. Schutzbezug</li><li>3. Elvari® Controller Pro</li><li>4. Tragetasche</li><li>5. Magnetfeld-Tester</li></ol>
<p>Elvari Kristallmatte Mini</p> 	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kristallmatte Mini</li><li>2. Elvari® Controller Pro</li><li>3. Tragetasche</li><li>4. Magnetfeld-Tester</li></ol>
<p>Elvari Kristallgürtel</p> 	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kristallgürtel</li><li>2. Elvari® Controller Pro</li><li>3. Tragetasche</li><li>4. Magnetfeld-Tester</li></ol>

*\*Allen Geräten liegen außerdem eine Bedienungsanleitung und ein Programm-Spickzettel bei.*

**Tip:** Bei dem kleinen Plastikdöschen handelt es sich um den Magnetfeld-Tester. Schalte ein Magnetfeld-Programm an und fahre mit dem Tester über die versteckten Magnetfeldspulen. Der Magnet im Döschen wird anfangen, sichtlich zu vibrieren.

Die Magnetfeldspulen wirken an verschiedenen Stellen unterschiedlich stark. Das ist normal. Mehr dazu auf Seite 6.

# Elvari® Controller Pro

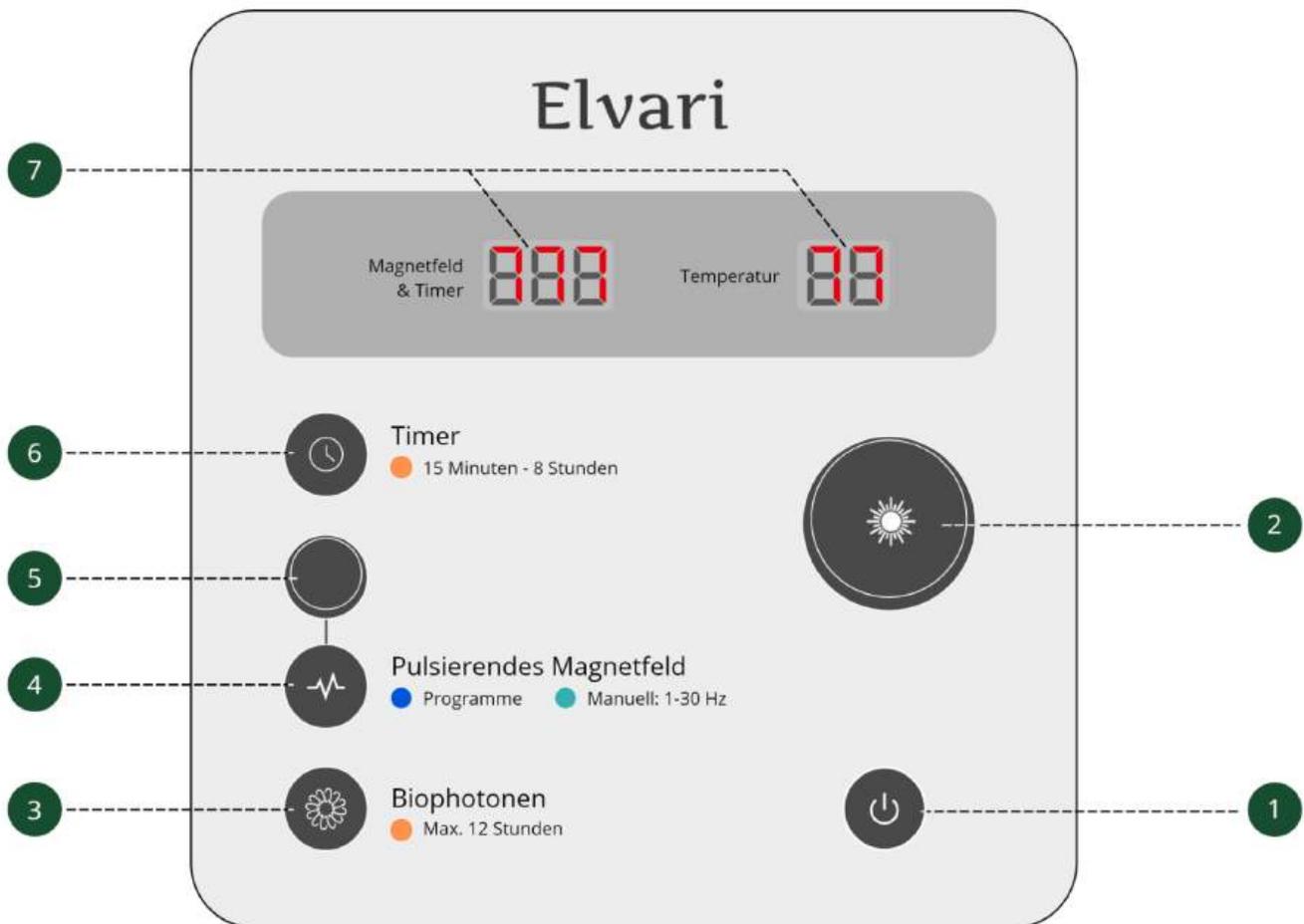

**i** Dein Controller sieht anders aus? Dann hast du wahrscheinlich noch unsere frühere Version. Kontaktiere unseren Support für weitere Informationen.

## Tasten & Regler

1. Power (An/Aus)
2. Temperatur
3. Photonen Taste
4. Magnetfeld Taste
5. Magnetfeld-Regler
6. Timer Taste
7. Displays für Programme/Zeit und Temperatur

## LED Anzeigen

- = Aktiviert (Timer & Biophotonen)
- = Voreingestellte Magnetfeldprogramme
- = Manueller Modus

# Erste Schritte



## Schritt I: Kristallgerät auspacken

Nimm dein Elvari® Gerät aus der Tragetasche, lege es auf eine ebene Fläche und entfalte es zu seiner vollständigen Länge. Entferne die Schutzfolie auf dem Controller.



## Schritt II: Mit dem Strom verbinden

Verbinde den Stecker des Controllers mit dem Gerät und stecke den Netzstecker in eine Steckdose. Schalte das Gerät an, indem du einmal auf die Power Taste (1) drückst.



## Schritt III: Programme und Timer einstellen


Wir empfehlen dir, mit allen Anwendungen gleichzeitig und auf niedriger Stufe zu beginnen, um deinen Körper einzugewöhnen:

Infrarot-Tiefenwärme: Drehe den Temperaturregler (2) im Uhrzeigersinn bis zu 40 °C. Das Display (7) zeigt die Temperatur an. Es dauert circa ~10 Minuten, um alle 18 Schichten aufzuwärmen.

Biophotonen: Drücke die Photonen-Taste (3) einmal. Das Lämpchen zeigt an, dass die Funktion aktiv ist.

Magnetfeld: Drücke die Magnetfeld-Taste (4) einmal, für die voreingestellten Magnetfeld-Programme. Auf dem Display (7) wird "PF" angezeigt. Dies ist das Programm für die Schumann Frequenz – den Herzschlag der Erde.

Zeit einstellen: Drücke die Timer-Taste (6) zweimal, um eine Laufzeit von 30 Minuten einzustellen.

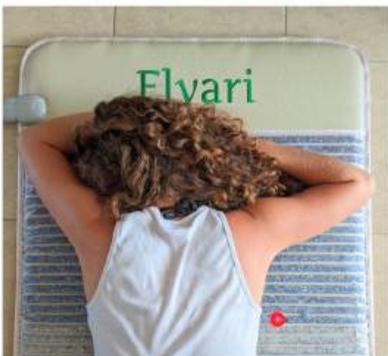

## Schritt IV: Energie tanken

Entspanne dich auf deinem Elvari® Kristallgerät – und komm einfach runter. Ohne Handy. Ohne Laptop. Der Controller schaltet nach Ablauf der 30 Minuten von selbst ab und spielt einen kurzen Ton.

Unsere Empfehlung: Nutze die ersten 14 Tage einmal pro Tag für 30-60 Minuten genau diese Einstellungen.

Gib deinem Körper Zeit, sich an das Kristallgerät zu gewöhnen. Danach kannst du anfangen, mit den Intensivprogrammen (Seite 8) zu experimentieren. Höre dabei auf dein Körpergefühl.

\*Gleiches Vorgehen für Kristallmatte/Mini/Gürtel.

# Allgemeine Hinweise

## Anwendungsplan

Woche 1-2: Nutze die empfohlenen “Erste Schritte” Programme.

Woche 2-6: Sobald du dich bereit fühlst, kannst du zu einem Magnetfeld-Programm deiner Wahl übergehen. Viele unserer Kunden wählen Programme basierend auf ihren individuellen Beschwerden. Falls du keine spezifischen Beschwerden hast, starte mit “Reinigung” (P2) und ergänze im Optimalfall mit Zeolith & Chlorella.

Ab Woche 6: Dein Körper ist nun an die Basis-Anwendung gewöhnt. Fange an, mit den Intensivprogrammen (Seite 8) zu experimentieren. Teste zudem das Nachtprogramm. Erforsche, wie längere Anwendungsdauern und höhere Temperaturen deinen Körper beeinflussen. Probiere auch Meditation in Kombination aus.

## Anwendungsempfehlungen

- Trink vor und nach Nutzung der Infrarot-Tiefenwärme und/oder des Magnetfeldes ein volles Glas Wasser. Dies ist äußerst wichtig für deinen Zellstoffwechsel.
- Starte deine Behandlung in kleinen und regelmäßigen Abständen. Steigere die Anwendungsdauer und Temperatur langsam und mit Fokus auf dein körperliches Wohlbefinden.

“Gesundheit ist ein Marathon – kein Sprint”

- Die Erfahrung unserer Kunden zeigt, dass bereits mit 2-4 Anwendungen von je 30-60 Minuten pro Woche starke Wirkungen erzielt werden können.
- Probiere ab Woche 6 auch einmal aus, auf deinem Elvari® Gerät zu schlafen. Sollte es dir zu hart sein, lege ein Baumwollhandtuch darauf, oder nutze es stattdessen lieber tagsüber. Es ist nicht notwendig auf der Matte zu schlafen.
- Ist dir die Kristallmatte zu schwer? Für einen leichteren Transport kannst du sie falten und in die Tragetasche packen. Alternativ informiere dich zur “Kristallmatte Mini” von Elvari.
- Die Biophotonen und Infrarot-Tiefenwärme können am Besten auf den Körper wirken, wenn möglichst wenig Stoff dazwischen liegt.
- Schütze dein Gerät vor Schmutz & Flecken – z.B. durch einen Topper, ein Handtuch oder auch einen Bettbezug.

**Hinweis:** Die Rückseite des Controllers wird bei Nutzung und im Standby-Modus etwas warm. Das ist ganz normal, weil ein kleiner Transformator verbaut ist.

# Programmeinstellungen

Du kannst Programme jederzeit vorzeitig beenden, indem du die Power-Taste (1) drückst und dein Elvari® Gerät damit ausschaltest.

## I. Infrarot Tiefenwärme

Infrarotwellen dringen tief bis in das Unterhautgewebe ein und können so zu besserer Durchblutung und Muskelentspannung verhelfen. Über den Temperatur-Regler (2) kannst du die Infrarot-Temperatur (0°C - 70°C) bestimmen. Die Wunschttemperatur wird auf dem rechten Display (7) angezeigt. Nach 5 Sekunden wechselt die Anzeige zum aktuellen Stand.

Du kannst das Kristallgerät nach der Eingewöhnungsphase auch über Nacht verwenden. Wir empfehlen dir dabei, eine Stunde vorher einen halben Liter Wasser zu trinken und eine maximale Temperatur von 40 Grad einzustellen.

### Unsere Empfehlung

35 °C - 40 °C: Sanft. Geeignet für lange Anwendungsdauern.

40 °C - 50 °C: Standard. Empfohlen für eine Anwendungsdauer von 60-120 Min.

50 °C - 60 °C: Erhöht. Geeignet für eine Anwendung von 10-90 Min.

60 °C - 70 °C: Intensiv. Maximum 60 Minuten. Zum Aufwärmen eine dicke Decke auf die Matte legen.

#### **i Hinweis zur Dauer der Erwärmung**

Nachdem du die Temperatur eingestellt hast, kann es bis zu 20 Minuten dauern, bis das Gerät komplett aufgeheizt ist. Grund dafür ist, dass zuerst die Infrarot-Schichten erwärmt werden.

#### **i Hinweis zum Wärmeschutzsystem**

Der Controller verfügt über eine Sicherheitssoftware, die dich vor Überhitzung und Dehydration schützt. Wenn die Temperatur länger als 3,5 Stunden über 50 °C liegt, senkt die Schutzfunktion die Temperatur automatisch auf 40 °C und das Display zeigt "--" an.

## II. Biophotonen

Die Entdeckung der Biophotonen geht zurück auf den deutsche Biophysiker Prof. Albert Popp. Er entdeckte bereits 1970, dass zahlreiche biochemische Vorgänge durch Licht gesteuert und so z.B. unsere Mitochondrien stimuliert werden können. Der dadurch beschleunigte Zellstoffwechsel kann laut Popp mehr Energie und eine bessere Regeneration zur Folge haben.

Aktiviere die Biophotonen, indem du die Photonen-Taste (3) drückst. Die maximale Laufzeit beträgt 12 Stunden. Das orange Licht zeigt an, dass das Programm aktiv ist.

### III. Magnetfeld-Programme

Das Ziel des pulsierenden Magnetfeldes ist, durch niederfrequente elektromagnetische Wellen unsere Mikrozirkulation und Zellfunktion zu verbessern. Die Wirkung ist seit 1981 bekannt und inzwischen durch hunderte internationale Studien & Doppelblindstudien erforscht.

Der Elvari® Controller Pro bietet eine Auswahl von 20 Magnetfeld-Programmen, welche du über das Drehrad (5) einstellen kannst, um unterschiedliche Bereiche zu fokussieren:

PF   Schumann-Resonanz (76min)	P10, früher PA   Muskelentspannung (60min)
P1   Abwehrkräfte (40min)	P11, früher PC   Energie (60min)
P2   Reinigung (60min)	P12, früher PE   Bewusstsein (60min)
P3   Konzentration (60min)	P13, NEU   Delta (32min)
P4   Entspannung (60min)	P14, NEU   Theta (40min)
P5   Körper-Geist-Schmerz Trennung (60min)	P15, NEU   Alpha (48min)
P6   Bindegewebe (60min)	P16, NEU   Beta (54min)
P7   Erholsamer Schlaf (7h 10min)	P17, NEU   Morgens (15min)
P8   Regeneration (7h 6min)	P18, NEU   Abends (30min)
P9   Allgemeine Stärkung (60min)	P19, NEU   Meditation (100min)


#### Du kannst das Magnetfeld auch manuell einstellen:

Wenn du die Magnetfeld-Taste (4) zweimal hintereinander drückst, gelangst du in den manuellen Modus. Nutze nun das Drehrad (5) um die genaue Frequenz in Hertz (Hz) einzustellen:

01 Hz   Entspannung	15 Hz   Körper-Geist-Schmerz
02 Hz   Endorphine	20 Hz   Energetisierung
03 Hz   Regeneration im Schlaf	25 Hz   Selbstwert
04 Hz   Wahrnehmung & Frieden	30 Hz   Zahn-Gesundheit
05 Hz   Bewusstsein	
06 Hz   Gefühl von Sicherheit	
07 Hz   Mentale Leistungsfähigkeit	
08 Hz   Konzentration	
09 Hz   Körper-Balance	
10 Hz   Körper-Geist	
11 Hz   Achtsamkeit	
13 Hz   Vitalität	

#### Position der Magnetfeldspulen:

(Gürtel, Matte, Mini)

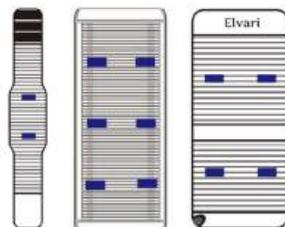

#### **i Tipp: Das pulsierende Magnetfeld wirkt über den Magnetfeldspulen besonders stark.**

Um das Magnetfeld zu testen, platziere den Tester über den oben abgebildeten Spulen. Es ist normal, dass die Wirkung an diesen Stellen am Intensivsten ist.

*Viele Anwender & Heilpraktiker sprechen den Programmen medizinische Wirkungen zu, die wir weder bestätigen noch versprechen können. Bitte wende dich dazu an deinen Facharzt.*

## IV. Negativ Ionen

In der Natur findet man stets ein gesundes Gleichgewicht aus positiven und negativen Ionen. Diese Balance kann jedoch durch extreme Umweltbedingungen und menschliche Einflüsse gestört werden. In unserem modernen Lebensstil, voll von betonierter Umwelt, synthetischer Kleidung und giftigen Baustoffen, finden sich eine Vielzahl positiv geladener Ionen. Das kann starke Auswirkungen auf die Gesundheit und auch den Hormonzustand bzw. die damit verbundene Stimmung haben.

Negative Ionen sind Moleküle, die eine zusätzliche negative elektrische Ladung besitzen, da sie mehr Elektronen als Protonen haben. Diese Ionen kommen in der Natur besonders häufig in Bereichen wie in der Nähe von Wasserfällen, am Meer, in Wäldern und nach einem Gewitter vor.

Die Elvari® Kristallgeräte verfügen über eine natürliche Mineralschicht, die durch piezoelektrische und triboelektrische Effekte konstant eine hohe Dichte an negativen Ionen freisetzen. D.h. diese Anwendung muss nicht separat eingestellt werden, sondern wird durch die Infrarot-Tiefenwärme und das Magnetfeld automatisch angeregt.

## V. Chakren Kristalle

Chakren sind bereits seit über 3.000 Jahren bekannt und werden erstmals in den antiken indischen Veden erwähnt. Der Mensch verfügt über sieben Hauptchakren, welche von Wurzelchakra bis Kronenchakra entlang der Wirbelsäule verlaufen. Die Elvari® Kristallgeräte nutzen deshalb sieben verschiedene Kristallarten, welche mit den einzelnen Chakren korrelieren und diese so aktivieren.

I. Lila Amethyst - Kronenchakra

II. Blauer Lapislazuli - Stirnchakra

III. Hellblauer Chalcedon - Halschakra

IV. Grüner Aventurin - Herzchakra

V. Gelber Achat - Nabelchakra

VI. Goldener Jadeit - Sakralchakra

VII. Roter Jaspis - Wurzelchakra

Tipp: Lege dich immer Richtung Kopfende auf die Kristallmatte, damit die Reihenfolge der Kristalle mit deinen Chakren korreliert. Die genaue Positionierung ist nicht entscheidend.

## VI. Timer

Drücke mehrfach die Timer-Taste (6), um die Nutzungsdauer einzustellen (15 Minuten bis 8 Stunden). Die eingestellte Zeit erscheint auf der linken Seite des Displays (7). Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich der Controller von selbst aus und spielt einen Hinweiston ab.

Der Hinweiston kann durch Drücken & Halten der Photonen-Taste (3) für 5 Sekunden an- und ausgeschaltet werden. Nach erfolgreicher Änderung spielt zur Bestätigung ein Ton.

# Intensivprogramme

Aus unserer Erfahrung gibt es besonders wirksame Kombinationen von Programmen für die Vitalität. Sollte dir eines davon zu lange dauern, kannst du es jederzeit vorzeitig beenden.

<b>Abwehrkräfte</b> - 2 Stunden Tiefenwärme: 40 °C Magnetfeld: P1 Biophotonen: ON	<b>Reinigung</b> - 15 Minuten Tiefenwärme: 65 °C (Decke zum Aufwärmen auflegen) Magnetfeld: P2 Biophotonen: ON
<b>Mentaler Frieden</b> - 45 Minuten Tiefenwärme: 37 °C Magnetfeld: P5 Biophotonen: ON	<b>Bindegewebe</b> - 60 Minuten Tiefenwärme: 50 °C Magnetfeld: P6 Biophotonen: ON
<b>Knochen &amp; Gelenke</b> - 60 Minuten Tiefenwärme: 60 °C Magnetfeld: P10 Biophotonen: ON	<b>Regeneration (Nachtprogramm)</b> - 8 Stunden Tiefenwärme: 35 °C Magnetfeld: P8 Biophotonen: OFF

*Viele Anwender & Heilpraktiker sprechen den Programmen medizinische Wirkungen zu, die wir weder bestätigen noch versprechen können. Bitte wende dich dazu an deinen Facharzt.*

## Studien

Viele der Anwendungen sind bereits wissenschaftlich anhand von Doppelblindstudien durch renommierte Institute erforscht. Hier findest du eine Sammlung der wichtigsten Studien und Erkenntnisse zum eigenen Forschen: [www.elvari.de/blogs/kristallmatte/studien](http://www.elvari.de/blogs/kristallmatte/studien)

## Weiterführende Links

### **Pulsierendes Magnetfeld**

[www.elvari.de/pemf](http://www.elvari.de/pemf)

### **Biophotonen**

[www.elvari.de/biophotonen](http://www.elvari.de/biophotonen)

### **Infrarot-Tiefenwärme**

[www.elvari.de/infrarot](http://www.elvari.de/infrarot)

### **Programmdetails**

[www.elvari.de/pages/programme](http://www.elvari.de/pages/programme)

### **Chakren Kristalle**

[www.elvari.de/kristalle](http://www.elvari.de/kristalle)

### **Negativ Ionen**

[www.elvari.de/negativ-ionen](http://www.elvari.de/negativ-ionen)

### **Schumann-Resonanz**

[www.elvari.de/schumann](http://www.elvari.de/schumann)

### **Aufbau der Kristallmatte**

[www.elvari.de/pages/aufbau-der-kristallmatte](http://www.elvari.de/pages/aufbau-der-kristallmatte)

# Fragen & Antworten

## **Q: Wie sind die Elvari Kristallgeräte gegen EMF/E-Smog isoliert?**

Die Kristallgeräte nutzen einen Non-EMF Heizdraht, dessen speziell verstärkte Isolierung vor elektromagnetischer Strahlung (EMF) schützt. Zudem ist eine Carbon-Schicht verbaut, welche elektromagnetische Strahlung abgeschirmt und in den Boden leitet. Der Elvari® Controller Pro verfügt zusätzlich über eine eigene E-Smog Isolierung im Gehäuse.

Bei ganz besonders hoher Elektrosensibilität empfehlen wir den Stecker zusätzlich mit etwas Aluminiumfolie zu isolieren. Mehr Informationen findest du unter [www.elvari.de/esmog](http://www.elvari.de/esmog).

## **Q: Wie oft und wie lange soll man die Kristallgeräte anwenden?**

Wir empfehlen generell eine Behandlungsdauer von 30-60 Minuten jeden Tag, oder jeden zweiten Tag. Grundsätzlich sollte aber das eigene Körpergefühl bestimmen, für welchen Zeitraum & wie oft man die einzelnen Anwendungen nutzt. Zusätzlich kann die Matte auch nachts zum Schlafen genutzt werden.

## **Q: Gibt es Nebenwirkungen, oder Kontraindikationen?**

In den folgenden Fällen raten wir von der Nutzung des Magnetfeldes aufgrund von unzureichender Studienlage, oder Kontraindikationen ab:

1. Schwangerschaft
2. Kleinkinder (Unter 7 Jahren)
3. Bei Nutzung von magnetischen/elektronischen Implantaten
4. (e.g. Herzschrittmacher, Insulinpumpen-Implantat)
5. Epilepsie & anfallsartige Nervenerkrankungen
6. Herzrhythmusstörungen und Herzerkrankungen
7. Schilddrüsenüberfunktion
8. Angina Pectoris

Alle anderen Anwendungen können unabhängig vom pulsierenden Magnetfeld eingestellt und verwendet werden.

Es kann gelegentlich zu einer "Erstverschlimmerung" kommen. Dabei kommt es zunächst zu einer subjektiven Verstärkung der Symptome, bevor die gewünschten Verbesserungen in der Vitalität eintreten. Dieser "Erstverschlimmerung Effekt" ist auch aus anderen Anwendungen bekannt und stellt per Definition eine Beseitigung von Blockaden dar.

# Sicherheitshinweise

Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise vor erstmaliger Anwendung aufmerksam durch. Deine Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn das Gerät bestimmungsgemäß verwendet wird.



## **Achtung: Gefahr eines Stromschlags durch eindringendes Wasser**

- Ziehe den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Benutzung ist.
- Schütte keine Flüssigkeiten über das Gerät.
- Ziehe den Stecker, bevor du das Gerät reinigst.
- Reinige das Gerät ausschließlich mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
- Verwende das Gerät nicht im Freien.
- Netzstecker und Bedienfeld dürfen nicht mit Nässe in Kontakt kommen (Stromschlaggefahr!). Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung trocken ist.



## **Achtung: Warnung vor Stromschlägen durch Beschädigung am Grundgerät oder am Steuerteil**

- Kontrolliere das Grundgerät, Anschlusskabel mit Stecker und Zubehör regelmäßig auf etwaige Beschädigungen.
- Verwende das Gerät niemals mit beschädigter Anschlussleitung.
- Bitte versuche auf keinen Fall das Gerät bei einer Beschädigung in Eigenregie zu reparieren.



## **Achtung: Brandgefahr**

- Bitte überwache die Temperatur sorgfältig, während das Gerät verwendet wird.
- Verwende das Gerät niemals gefaltet oder zerknittert.
- Das Gerät kann mit einem Baumwolllaken, aber nicht mit dicker Polsterung verwendet werden.
- Nicht in der Nähe von Feuer, Heizgeräten oder brennbaren Gegenständen nutzen.
- Übermäßige Hitze kann Hautreizungen oder Verbrennungen verursachen. Bitte achte während der Benutzung des Gerätes auf dein Wohlbefinden und stelle die Temperatur niedriger, wenn dir zu heiß wird.



## **Achtung: Allgemeine Gefahrenhinweise**

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn diese durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von Ihr Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu benutzen ist und Sie auf die Risiken aufmerksam gemacht wurden und die Risiken verstehen.
- Bewahre das Gerät für Kinder unzugänglich auf und lasse es sie nur unter Aufsicht benutzen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Es besteht eine Gefahr, sich an der Verpackungsfolie zu verfangen oder zu ersticken.
- Schwangere sowie Menschen mit Herzschrittmachern oder magnetischen Implantaten dürfen kein pulsierendes Magnetfeld verwenden.
- Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sollten nicht von Kindern unter 8 Jahren und nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. Sie sollten außerdem von dem Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.

- Wenn du von einer Krankheit betroffen bist, die mit einer Nebennierenschwäche einhergeht, solltest du keine hohen Temperatureinstellungen verwenden.
- Beschränke hohe Temperatureinstellungen zeitlich auf eine maximale Dauer von 60 Minuten.
- Nutze über Nacht keine hohen Temperaturen.
- Ältere Menschen und kleine Kinder sollten das Gerät in den unteren Temperatureinstellungen benutzen.

## Haftungsausschluss

Wir betonen hiermit, dass wir mit der Nutzung unserer Produkte, Geräte und Anwendungen keine Heilwirkungen versprechen können. Jeder Körper ist einzigartig und hat individuelle Bedürfnisse. Die genannten Wirkungsweisen beruhen allesamt auf Erfahrungen, die von uns & unseren Kunden in praktischer Anwendung gemacht wurden. Diese können jedoch nicht zwingend auf den Einzelfall übertragen werden.

Solltest du im Zusammenhang mit Vorerkrankungen Schmerzen verspüren, reduziere bitte zunächst die Anwendungsintensität und Dauer. Bei anhaltenden und starken Beschwerden, brich die Anwendung bitte ab und konsultiere umgehend einen Arzt, um zu klären, ob und unter welchen Umständen diese fortgesetzt werden kann.

Unsere Produkte und Anwendungen dienen deinem allgemeinen Wohlbefinden und können unterstützend wirken. Alle unsere Aussagen sind im Sinne des Heilmittelwerbegesetzes. Eine Linderung oder Beseitigung von Krankheiten können wir bei keinem unserer Produkte oder Anwendungen garantieren. Dies wäre weder gesetzlich zulässig, noch seriös.

## Gewährleistung & Garantie

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, wie im Verbraucherschutzgesetz beschrieben. Dazu leisten wir weitere 3 Jahre freiwillige Gewährleistung. Solltest du ein Problem mit deinem Gerät feststellen, bitten wir dich im ersten Schritt unseren Support zu kontaktieren. Mehr Informationen findest du unter [www.elvari.de/pages/30-tage-garantie](http://www.elvari.de/pages/30-tage-garantie) bzw. unseren AGB.

## Konformitätserklärung

Die Konformität des Produkts mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung kann unter folgender Anschrift angefordert werden:

AMBTS Consulting Ltd., Avgoustou Pikar 14, 3101 Limassol, Zypern | [support@elvari.de](mailto:support@elvari.de)

## Entsorgung



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung deutet darauf hin, dass das Produkt nicht als gewöhnlicher Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bitte bring dein ausgedientes Gerät zu einer Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten.

Durch die fachgerechte Entsorgung des Geräts leistest du einen Beitrag zur Vermeidung von eventuellen negativen Folgen und Einflüssen auf die Umwelt und die Gesundheit von Mensch und Tier, die im Fall von unsachgemäßer Entsorgung des Gerätes entstehen können. Für detaillierte Informationen über die Entsorgung und Wiederverwertung des Produkts, wende dich bitte an die zuständige städtische Stelle für Abfallentsorgung, an das Kommunalunternehmen oder schreibe unserem Support.

## Technische Daten

<b>Kristallmatte</b>	190*80*3cm
Temperaturbereich	30-70 °C
Magnetfeldstärke	150 µT
Gewicht	16 kg (18 kg Versandgewicht)
Paketmaße	82*65*15cm
Stromverbrauch	AC 280W 220V 50Hz
Schutztyp	<input type="checkbox"/> Klasse 2 Schutzisolierung

<b>Kristallmatte Mini</b>	110*50*3cm
Temperaturbereich	30-70 °C
Magnetfeldstärke	150 µT
Gewicht	6 kg (7 kg Versandgewicht)
Paketmaße	58*12*47cm
Stromverbrauch	AC 125W 220V 50Hz
Schutztyp	<input type="checkbox"/> Klasse 2 Schutzisolierung

<b>Kristallgürtel</b>	140*25*3cm
Temperaturbereich	30-70 °C
Magnetfeldstärke	150 µT
Gewicht	2 kg (4 kg Versandgewicht)
Paketmaße	65*50*33cm
Stromverbrauch	AC 70W 220V 50Hz
Schutztyp	<input type="checkbox"/> Klasse 2 Schutzisolierung

<b>Kristallmatte (Spezialversion für Therapeuten)</b>	190*65*3cm
Temperaturbereich	30-70 °C
Magnetfeldstärke	150 µT
Gewicht	12,4 kg (14.4 kg Versandgewicht)
Paketmaße	66*49*16cm
Stromverbrauch	AC 220W 220V 50Hz
Schutztyp	<input type="checkbox"/> Klasse 2 Schutzisolierung

<b>Elvari® Controller Pro</b>	34*28*8cm
Temperaturbereich	30-70 °C
Magnetfeldstärke	150 µT
Gewicht	1.3 kg (1.5 kg Versandgewicht)
Paketmaße	35*57*25cm
Stromverbrauch	AC 280W 220V 50Hz
Schutztyp	<input type="checkbox"/> Klasse 2 Schutzisolierung

Bei Fragen erreichst du uns unter [support@elvari.de](mailto:support@elvari.de). Wir antworten werktags innerhalb von 24h.



### **Elvari ist abgeleitet von Elverdal – das bedeutet "Tal der Elfen"**

Der Name stammt aus unserer Überzeugung zur  
Naturheilkunde & Alternativmedizin.

Wir sind stolz darauf hochqualitative Produkte  
wie unsere Kristallmatte herzustellen und  
gleichzeitig eine faire, nachhaltige Produktion zu  
betreiben.

Mehr Informationen unter  
[www.elvari.de/pages/herstellungsprozess](http://www.elvari.de/pages/herstellungsprozess)



© Elvari

SKU: ELV-00014 | EAN: 4262424710125

Eine Marke der AMBTS Consulting Limited  
Avogustou Pikar 14, 3101 Limassol, Zypern  
support@elvari.de