


取扱説明書

品名：IPL脱毛器

型番：AA0010

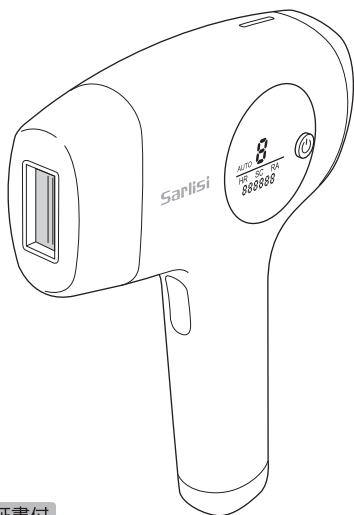

保証書付

家庭用

© 2023 SARLISI Inc. 無断複写・転載を禁じます。




もくじ

| | |
|-------------|-------|
| 安全上のご注意 | 2~5 |
| 使用上のご注意 | 5 |
| 各部のなまえ | 6 |
| お使いになる前に | 7 |
| お手入れできる部位 | 8 |
| お手入れの頻度について | 9 |
| スキントテストのしかた | 10 |
| 使いかた | 11~12 |
| 製品のお手入れ方法 | 13 |
| よくあるご質問 | 14~15 |
| 故障かな?と思ったら | 15 |
| 製品仕様 | 15 |
| 保証とアフターサービス | 裏表紙 |

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書(本書裏表紙)は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

| | |
|--|--------------------------------|
|  危険 | 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容 |
|  警告 | 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 |
|  注意 | 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容 |

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

| | |
|---|--|
|  してはいけない内容です。 |  実行しなければならない内容です。 |
|---|--|

危険



下記に該当する方は、本製品を使用しない

- ※医療用電子機器の誤作動をまねくおそれがあります。
- ・ペースメーカー、インスリンポンプなどの体内植込み型医療機器を使用されている方
 - ・人工心肺などの生命維持医療機器を使用されている方
 - ・心電計など装着型の電子医療機器を使用されている方
 - ・その他体内に医療用電子機器を装着されている方

警告



下記に該当する方は、本製品を使用しない

- ※事故や肌トラブル、体調不良などの原因となります。
- ・妊娠中や授乳中の方 ・成長期のお子様 ・皮膚知覚障害の方
 - ・糖尿病などの疾患により皮膚や感覚に異常がある方
 - ・全身性疾患や代謝性疾患で皮膚の状態が正常でない方 ・てんかんのある方
 - ・皮膚がんの既往歴がある方 ・光線過敏症の方やその既往歴がある方
 - ・1週間以内に薬を服用した方（薬により光線過敏の状態になるおそれがあります。）
 - ・生理中の方 ・ひどく疲労している方 ・心臓疾患の方
 - ・悪性腫瘍のある方や過去に皮膚の悪性腫瘍を患った方 ・血圧異常の方
 - ・急性（疼痛性）疾患の方 ・化学繊維などでかぶれた経験のある方
 - ・アトピー皮膚炎の方 ・ヘルペスなど感染症疾患の方 ・アレルギー体質の方
 - ・有熱性疾患の方 ・結核性疾患の方 ・特に肌が敏感な方 ・顔面神経痛の方
 - ・ケロイド体質の方 ・血友病疾患の方 ・狭心症のある方 ・多発性硬化症の方
 - ・紫斑病など内出血しやすい方 ・精神機能、生理機能、内臓機能の弱い方
 - ・ステロイドなどの薬物で毛細血管拡張を起こしている方
 - ・交通事故などによる頭部および眼科的後遺症のある方
 - ・白内障・緑内障・網膜剥離・眼底出血など、目の病気のある方
 - ・過去6か月以内に放射線治療や化学療法を受けた方
 - ・局部または全身に炎症のある方 ・自分の意思で動くこと、意思表示ができない方
 - ・その他、かかりつけ医に本製品を使用しないように指示を受けた方

警告

下記の部位およびその周辺部には使用しない

※肌トラブルや照射部位に重大な障害を引き起こす原因となります。

- 体内に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位
- コラーゲンを注入している部位 ・乳首、外陰部や肛門の周辺
- レーザー、各種ピーリングを行い、回復期間が過ぎていない部位
- 皮膚に傷、やけど、イボ、ニキビ、湿疹、吹出物、かゆみやほてりなどの炎症や化膿などトラブルを起こしている部位
- 整形手術、ホクロや刺青、アートメイクがある部位、傷跡の残っている部位
- 色素沈着している部位（シミ、ソバカス、ホクロ、斑点など）やメラニンの濃い部位
- 目の周囲（眉毛またはまつ毛） ・粘膜部やその周辺の毛
- 静脈瘤や欠陥機系のある部位 ・感覚、知覚障害のある部位 ・薬品を塗布している部位

次のような場合には使用しない

- 日光浴をしたあとや日焼けマシンを使用したあと ・日焼け止めクリームを使用しているとき
- 日焼けをしているか、日焼けによる皮膚への影響があるかなどがはっきりしない場合
- 入浴直後 ・ケミカルピーリングやあかすりなどの施術を受けて間もないとき（施術後、時間を十分にあげてからご使用ください）

使用前や使用中、照射部位にジェルやローションなどを塗布しない
やけどや肌トラブルの原因となります。

警告

改造・分解・修理しない

発火や異常動作によるけがの原因となります。

使用中は吸気口・排気口をふさがない

火災ややけど、故障の原因となります。

本体や電源アダプターをぬらしたり、水につけたり、水洗いしない

感電やショートによる火災の原因となります。

浴室や湿気の多い所で使用しない

感電やショートによる火災の原因となります。

浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい所に置かない

感電やショートによる火災の原因となります。

台所やストーブなど火気・熱気・湯気の近く、車の中など高温になる所、直射日光のあたる所で使用・保管しない

変色や変形、故障の原因となります。

ぬれた手で使用しない

感電やけが、故障の原因となります。

付属の電源アダプター以外は使用しない、また付属の電源アダプターを他の製品に使用しない

やけどやショートによる火災などの原因となります。

乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない

事故やけがの原因となります。

業務用として使用しない

本製品は家庭用として設計・製造されています。業務用としての使用は絶対しないてください。

油煙や引火性ガスが発生する所や燃えやすい物の近くで使用しない

爆発や火災、故障の原因となります。

 **警告**

ぬれた手で電源アダプターをコンセントから抜き差ししない

感電やけがの原因となります。

電源コードやプラグを傷めない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどをしてください。電源コードや電源プラグが破損し、火災、感電の原因となります。

電源アダプターや電源コードが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない

やけど・感電・ショートによる火災などの原因となります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

電源プラグやプラグを放置したり、不適切な場所に保管しない

やけど・感電・けがの原因となります。

本体のすき間やプラグ受部にごみやほこりを付着させたり、異物を入れない

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

自分で意思表示ができない人（幼児を含む）に使用させたり、お身体の不自由な人だけでは使用しない

事故やけがの原因となります。

子供の近くで使用しない

事故やけがの原因となります。

使用中は絶対に照射面をのぞきこんだり、人に向けたりしない

目を傷める原因となります。

本製品の使用目的以外の用途で使用したり、肌以外に照射したりしない

 **警告**

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源アダプターをコンセントから抜く

火災・感電・けがの原因となります。

交流 100-240 V で使用する

火災や感電の原因となります。

電源プラグは、根元までしっかりと差し込む

火災や感電の原因となります。

電源プラグ・プラグ・プラグ受部にほこりが付着しないように定期的に掃除する

湿気などで絶縁不良になり、火災の原因となります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

本製品の清掃時は、電源プラグをコンセントから抜いてから行う

感電・やけど・けがの原因となります。

使用頻度や使用方法は、必ず取扱説明書の内容に従う

使用中・使用後に過度な痛みや体調不良を感じたとき、発疹、発赤、かゆみ、色素沈着、水ぶくれ、炎症などの皮膚症状があらわれたとき、その他の異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、専門医に相談する

⚠ 注意



強いショックを与えたり、落としたり、激しく振ったりしない

感電・ショート・発火の原因となります。

本製品が破損または故障した場合は、使用しない

事故やけがの原因となります。

本製品は、シンナー、ベンジン、石油系洗浄剤、揮発油、アルコールなど可燃性の溶剤、薬品類、研磨剤を含んだ洗剤や熱湯を使用して清掃しない

火災ややけど、変質・変色・故障の原因となります。

収納時に電源コードを本体や電源アダプターに巻きつけない

電源コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因となります。

⚠ 注意



電源アダプターを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源アダプターを持って抜く

感電・ショート・発火の原因となります。

ご使用前に本体のボタンなどを操作し、本製品が正常に動作するか確認する

万一、損傷や異常などがある場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

使用上のご注意

- 初めてご使用になるときは、スキントテスト（肌の敏感テスト）をし、照射後30分程度様子を見て、照射部位に痛みや赤みなど、皮膚に異常がないことを確認してから使用してください。
- 照射前は、日焼け止めクリームや化粧品などは洗い落としてください。
- 身につけている貴金属やアクセサリなどをすべて外してから使用してください。
- 使用前に必ず照射部位のムダ毛を剃ってください。
- 肌の色が濃い部位には照射しないでください。
- 本製品を暗い場所で使用しないでください。照射光により、目が一時的な刺激を受け、視力を失うおそれがあります。
- 使用するときには、必ず付属の保護メガネをかけてください。また、保護メガネを着用していても照射面や照射光を直視しないでください。
- 初めてご使用になるときは、照射レベル「1」からご使用ください。
- 顔に照射するときは、照射部位から目をそらしたり目を閉じたりするなど、照射光が目に入らないようにしてください。
- 鼻の下や口元に使用する際は、鼻や唇に照射しないでください。
- VIO（デリケートゾーン）などの部位に使用するときは、照射レベルを低く設定してからご使用ください。その後、様子を見ながら調節してください。
- 同じ部位に長時間の照射や連続照射しないでください。過度に照射すると大量の熱が発生し、皮膚を傷ついたり、やけどを負うおそれがあります。
- 使用中・使用直後は照射面が熱くなりますので、触らないように十分ご注意ください。
- 連続して20分以上照射しないでください。20分間使用したら一度電源を切り、5分後に照射を再開してください。
- HRモードで同じ部位に使用する場合は、3日以上あけてから使用してください。効果を感じられない場合でも、肌を休める期間を必ず守って使用してください。肌トラブルを引き起こすおそれがあります。
- 入浴後のご使用はお控えください。
- 照射後48時間は、プール・日光浴・温泉・サウナなどは控えてください。
- 照射後、約2週間は照射部位を強い日差しにさらさないでください。

※ 本製品は、光の照射によりムダ毛ケアを行うことを目的とした家庭用光美容器です。（医療用機器ではありません）


※ 本製品の性能向上のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※ 本製品は、日本国内にて、企画を行っております。

※ 「Sarlisi」は、SARLISI株式会社の登録商標です。

各部のなまえ


本体

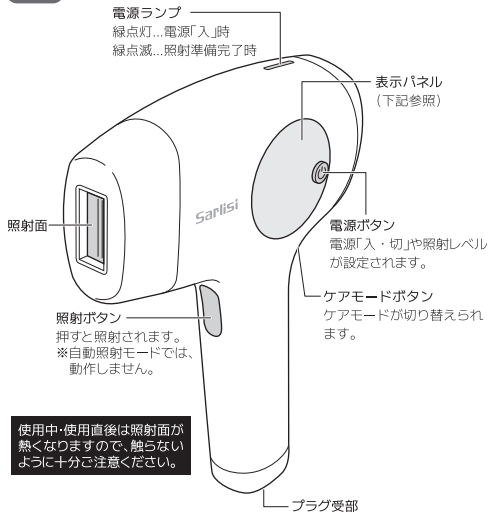


使用中・使用直後は照射面が熱くなりますので、触らないように十分ご注意ください。

※使用中は吸気口・排気口をふさがないでください。

本体後部

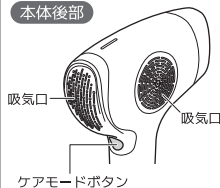

本体下部

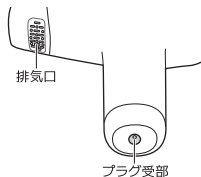

表示パネル


※説明のため、すべて表示しています。

自動照射モード

照射面を肌にあてると自動で照射されます。

ケアモード

HR…ムダ毛ケアモード
SC…スキンケアモード
RA…美白モード

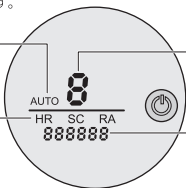


照射レベル

「1」～「9」の9段階で表示されます。

照射カウンター

残りの照射回数が表示されます。

付属品

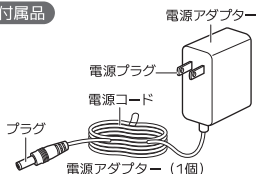

保護メガネ (1個)



シェーバー (1個)

- 取扱説明書(本書)…1部
- 使用マニュアル…1枚
(強度レベルの使用参考)
- ホク口隠しシール…1枚

お使いになる前に

⚠ 警告

- 使用頻度や使用方法は、必ず取扱説明書の内容に従ってください。
- 使用中・使用後に痛感や体調不良を感じたとき、発疹、発赤、かゆみ、色素沈着、水ぶくれ、炎症などの皮膚症状があらわれたとき、その他に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、専門医に相談してください。

ご使用前の準備と確認

※ご使用前に、必ず「安全上のご注意(2~5ページ)」をお読みいただき、記載の内容に従って正しくご使用ください。

- 1 初めて使用するときは、スキンテストをする → (10ページ)
- 2 照射部位を確認し、毛を剃る → (8ページ)
- 3 照射部位の肌の色を確認し、ケアモードや照射レベルを設定する
→ (7ページ) (12ページ)
・初めてご使用になるときは、照射レベル「1」からご使用ください。
- 4 照射前に付属の保護メガネを装着する

ご注意

- 照射するときは、必ず付属の保護メガネを着用してから照射してください。
- 保護メガネを着用していても照射面や照射光を直視しないでください。

必ず着用する



肌の色と照射レベルについて

- 肌の色によって、適した照射レベルがあります。付属の「使用マニュアル」に記載の「強度レベル使用参考」と併せてご参照ください。
- ※ 照射レベルの設定のしかたは、「照射レベルについて(12ページ)」をご参照ください。
- ※ 肌の色に適した照射レベルは目安であり、照射レベルを特定するものではありません。照射レベルは低めに設定し、様子を見ながら調節してください。

使用できる色



使用できない色


ダークブラウン

ブラックに近い
ブラウン

ブラック

お手入れできる部位

- アクセサリーやメイクなどは落として、照射する部位（皮膚）が確認できる状態で使用してください。
- 使用者自身のお手入れだけに使用し、他人に向けて使用しないでください。
- ※ 「安全上のご注意(2～5ページ)」の内容をお守りいただき、正しくご使用ください。

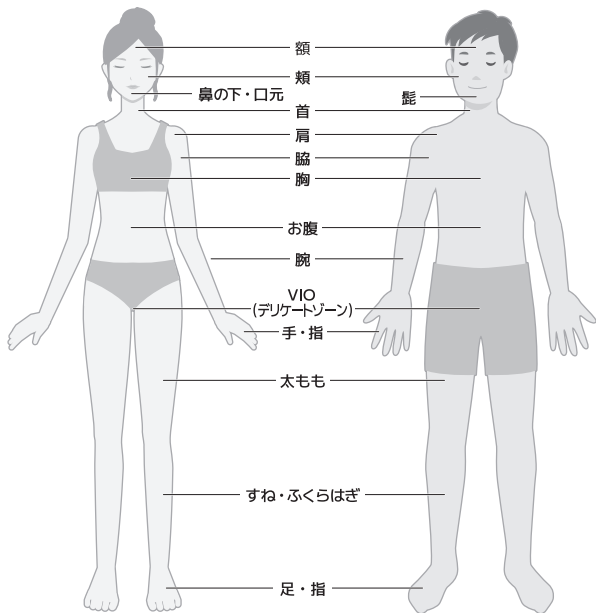

- お肌のムダ毛は、照射前にきれいに洗ってから剃ってください。
- 温かいタオルで剃る部位を数分間温めてから剃ってください。

使用できない部位

本製品は、黒いものに熱を与える仕組みとなっておりますので、日焼けした肌やタトゥーのある肌などに使用するとやけどのおそれがあります。

- 日焼けした肌には使用しないでください。
- 目や目の周囲・鼻・唇・耳・乳首・乳輪・へそ内部・外陰部・陰部・肛門・男性器には使用しないでください。
- 刺青（タトゥー）、ボディペイント、アートメイクのある部位
- シリコン注入物のある部位
- 炎症やニキビなどのある部位
- ホクホク・いぼ・そばかす・大静脈・しみ・濃い色素斑の見られる部位

お手入れの頻度について

■ HR (ムダ毛ケアモード) でご使用の場合

- 体毛の生える周期には個人差があり、部位によって異なります。また、IPL光は成長期の毛に効果がありますので、短期間での使用では効果を実感できません。より効果を実感しやすくするため、継続して行ってください。徐々に毛が細くなり目立たなくなります。

ご注意

- ・ 使用期間の途中でムダ毛が目立たなくなったら、使用を中止し、必要に応じてその都度照射を行ってください。
- ・ お手入れの回数を増やしても、脱毛効果を早めることはできません。
- ・ お手入れを中止するとムダ毛の量は徐々に元に戻ります。定期的にお手入れすることで、ムダ毛の目立たない肌を維持できます。
- ・ 2か月以上照射していない部位に使用を再開するときは、1~2週目のサイクルから始めてください。

※同じ部位に使用する場合

| 照射期間 | お手入れの頻度 | 状態 (目安) |
|--------|---------|--|
| 1~2 週目 | 1週間に2度 | 照射開始時は、効果が現れにくいです。 |
| 3~4 週目 | 1週間に2度 | ムダ毛のお手入れ「初期段階」になります。 毛が柔らかく、細くなり、自然に抜け落ち始めます。 |
| 5~6 週目 | 2週間に1度 | ムダ毛のお手入れ「中期段階」になります。 毛が目立たなくなり、産毛だけ生えてきます。 |
| 7~8 週目 | 2週間に1度 | ムダ毛のお手入れ「後期段階」になります。 毛が少なく薄くなり、新しい毛が生えてこなくなります。 |
| 8週間以降 | 4週間に1度 | 定期的にお手入れを続けることで、ムダ毛の目立たない整った肌を維持できます。 |

- 同じ部位には1度のみお手入れしてください。2度目の照射は3日以上あけてからお手入れしてください。
- ※ 1度のお手入れには、同じ箇所の照射は3回までにしてください。
- 広範囲に連続照射する際などは、1度の総使用時間が20分を超えないように照射してください。使用時間が20分を超えた場合は、一度電源を切り、5分後に照射を再開してください。

■ SC (スキんケアモード)・RA (美白モード) でご使用の場合

| 照射期間 | お手入れの頻度 | 備考 |
|------|---------|-------------------------------------|
| 1 週間 | 1~2度程度 | 1週間に1~2度程度の照射サイクルを、様子を見ながら継続してください。 |

- 同じ部位には、1日に1つのモードのみ1度使用してください。他のモードで使用するときは、必ず24時間以上あけてください。
- ※ 同じ部位に1日2度以上お手入れしないでください。
- ※ SC (スキんケアモード) とRA (美白モード) には、脱毛機能はございません。

- 本製品をはじめてご使用になるときは、必ず、肌の目立たない部位でスキンテスト（肌の敏感テスト）を行ってください。
- スキンテストを行うときは、必ず「お使いになる前に（7ページ）」の内容に従ってください。

操作方法について、詳しくは「使いかた（11ページ）」の手順をご参照ください。

1 電源アダプターを接続する

- ・電源アダプターのプラグをプラグ受部に接続し、電源アダプターをコンセントに差し込んでください。
- ・「ピー」と起動音が鳴り、表示パネルに「OFF」と表示されます。



2 電源ボタンを2秒以上押して、電源を入れる

- ・「ピッ」と起動音が鳴り、「ケアモード」・「照射レベル」・「照射回数」が表示されます。
- ・表示パネルに、ムダ毛ケアモード「HR」、照射レベル「1」が表示されていることをご確認ください。
- ・ケアモード、照射レベルの変更のしかたは、12ページをご参照ください。



3 照射面を、肌の目立たない部位にあてる

- ・肌に触れる程度に垂直に密着させてください。
- ・表示パネルと電源ランプが点滅から点滅に切り替わると照射準備完了です。



4 照射ボタンを1回押す

- ・照射面から光が照射されます。
- ※ 1度のお手入れには、同じ箇所の照射は3回までにしてください。



5 電源ボタンを2秒以上押して電源を切り、電源アダプターを抜く

6 肌のチェックを行う

- ・照射後、30分程度様子を見て、照射部位に過度な痛みや赤みが出ていないかを確認してください。
 - 照射部位や体調に異常や違和感がない場合 ➡ 本製品を継続してご使用ください。
 - 照射部位や体調に異常や違和感がある場合 ➡ 本製品の使用を中止してください。

ご注意

- ・スキンテスト後、強い痛みや赤みが発生し、1~2日間経過しても回復しない場合は使用を中止し、専門医にご相談ください。

使いかた

※ ご使用前に、必ず「安全上のご注意(2~5ページ)」および「お使いになる前に(7ページ)」をお読みいただき、記載の内容に従って正しくご使用ください。


1 電源アダプターを接続する

- 電源アダプターのプラグをプラグ受部に接続し、電源アダプターをコンセントに差し込んでください。
- 「ピー」と起動音が鳴り、表示パネルに「OFF」と表示されます。



2 電源ボタンを2秒以上押して、電源を入れる

- 「ピッ」と起動音が鳴り、「ケアモード」・「照射レベル」・「照射回数」が表示されます。
- 「ケアモード」・「照射レベル」・「自動/手動照射モード」の設定を行ってください。(12ページ)

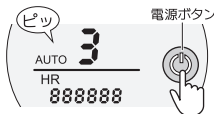

2秒以上押す

3 照射する

- 照射面を肌に触れる程度に垂直に密着させてください。表示パネルと電源ランプが点灯から点滅に切り替わり、照射準備が完了、または照射します。(照射のしかたは下記をご参照ください。)



手動モードでご使用の場合

- 照射面を照射部位にあてる
・照射準備が完了します。
- 照射ボタンを1度押す
・照射面から光が照射されます。



自動照射モードでご使用の場合

- 照射面を照射部位にあてる
・自動で照射面から光が照射されます。
- 照射後、次の部位にあてる
・同じ箇所の照射は3回までにしてください。



4 電源ボタンを2秒以上押して電源を切り、電源アダプターを抜く

- 電源を切ると「ピッ」と鳴って、表示パネルに「OFF」と表示されます。
- ご使用後は本体のお手入れを行ってください。(13ページ)

照射後のお肌について


- 照射後20分程度お肌を休ませてください。そのあと、氷水で冷やしたタオルなどで十分に冷やし、クールダウンや保湿ローションなどのご使用をおすすめします。軽い痛みを感じる場合は、30分~1時間ほど照射部位を冷やしてください。

ご注意

- 照射後すぐに、刺激性のある化粧品を使用したり、肌に負担がかかることは避けてください。
- 照射後48時間は、塩素消毒の刺激を避けるためプールに入らないでください。また、日光浴、温泉、サウナなどを控えてください。
- 照射後2週間は照射部位を強い日差しにさらさないでください。
- 使用中やご使用後に体調不良や皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、専門医にご相談ください。

ケアモードについて

- ケアモードボタンを押すたびに「HR」⇒「SC」⇒「RA」⇒「HR」…とケアモードが切り替わります。お好みのケアモードを選択してください。

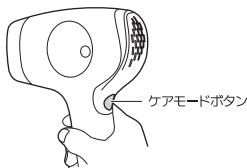

| 表示 | ケアモード | 用途 |
|----|----------|---|
| HR | ムダ毛ケアモード | ムダ毛のお手入れ(脱毛)をするとき |
| SC | スキンケアモード | スキンケアモードでお手入れするとき ※SC(スキンケアモード)には、脱毛機能はございません。 |
| RA | 美白モード | 美白モードでお手入れするとき ※RA(美白モード)には、脱毛機能はございません。 |


照射レベルについて

- 本製品は、照射レベルを「1(低い)」～「9(高い)」の9段階で設定できます。
- 照射レベルを変更するには、電源ボタンを押してください。押すたびに「1」⇒「2」…「9」⇒「1」…と切り替わります。
- ※ 本製品を初めてご使用になるときは、照射レベル「1」からご使用ください。以降は、お肌の様子を見ながら照射レベルを調節してください。
- ※ 照射レベルを高く(強く)するほど効果も高くなりますが、肌のトラブルを起こすおそれも高くなりますので、不快感を感じない程度のレベルに設定してください。
- ※ スキンテストをするときは、照射レベル「1」に設定してください。
- ※ 肌の色によって、適した照射レベルがあります。「肌の色と照射レベルについて(7ページ)」と付属の「使用マニュアル」に記載の「強度レベル使用参考」をご参照ください。



自動照射モード(AUTO)について

- 広範囲のお手入れ時など、連続して照射するときは自動照射モードでご使用ください。自動照射モード中は照射面に肌に接触させている間、一定間隔で連続照射します。
- 手動モードから自動照射モードに切り替える際は、照射面が肌に接触していないことを確認し、照射ボタンを2秒以上押してください。表示パネルに「AUTO」と表示され、自動照射モードに切り替わります。照射ボタンを2秒以上押す度に、「手動モード」と「自動照射モード」が切り替わります。
- ※ 照射面が肌から離れると、自動照射は停止します。
- ※ 自動照射モードでは、照射ボタンを押しても照射されません。

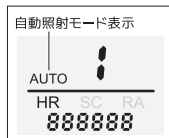

製品のお手入れ方法

- 本製品の性能を最適に保つため、毎回ご使用になる前と後に必ず製品のお手入れを行ってください。また、ご使用中にほこりや毛クズなどが付着したとき、必要に応じてお手入れを行ってください。
- 本体のお手入れを行うときは、必ず電源アダプターをコンセントと本体から抜き、本体の照射面が十分に冷めてから行ってください。

⚠ 警告


- 本体や電源アダプターをぬらしたり、水につけたり、水洗いしないでください。
- 乳幼児の手の届く場所に保管しないでください。

⚠ 注意

- シンナー、ベンジン、石油系洗剤、揮発油、アルコールなど可燃性の溶剤、薬品類、研磨剤を含んだ洗剤や熱湯を使用してお手入れを行わないでください。
- 照射面は、かたい布やスポンジなどで拭いたり、強く押し付けたりしないでください。傷がついたり、破損するおそれがあります。


本体

- 本体表面に付着した汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 吸気口、排気口、プラグ受部にほこりや毛クズなどが付着している場合は取り除いてください。
- 照射面に付着した汚れやくもりやほこりは、メガネ拭きなどの乾いた柔らかい布で、しっかり拭き取ってください。

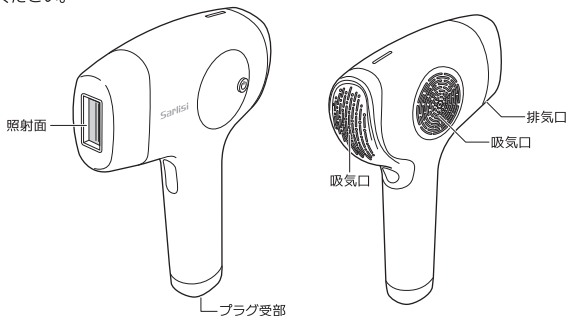

電源アダプター

- 電源プラグやプラグに付着したほこりなどを取り除いてください。

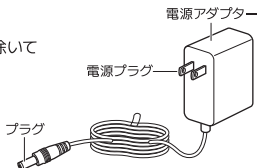

保管のしかた

- 本製品のお手入れを行ったあと、ご購入時の箱などに収納し、ほこりや湿気を避けて冷暗所に保管してください。
- ※ 乳幼児の手の届く場所に保管しないでください。

よくあるご質問

●ご使用にあたってお困りの際は、下記をご参照ください。

※使用中やご使用後に体調不良や皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、専門医にご相談ください。

| Q. ご質問 | A. 回答 |
|-----------------------------------|--|
| 照射前に、何か特別な準備が必要ですか？ | ・お肌のムダ毛は、照射前にきれいに洗ってから剃ってください。 ・温かいタオルで剃る部位を数分間温めてから剃ってください。 |
| お手入れ前に、毎回ムダ毛を剃る必要はありますか？ | 毎回剃る必要はありませんが、最初はムダ毛を剃ってからご使用ください。2度目以降は、ムダ毛が5mmぐらい伸びている場合、照射に影響が出る時に剃ってください。 |
| 照射後、ムダ毛が抜けないし、変化がありません。 | 本製品はムダ毛を目立たなくする製品です。2~3か月を目安に継続してご使用ください。 ※効果は部位や個人の体質によって異なります。 |
| 何回も使用しましたが効果がありません。 | 本製品の使用効果はムダ毛の色や太さ、個人の体質や使用部位などによって異なります。本書記載のご使用方法に従って照射しても効果がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 |
| どの照射レベルが一番脱毛効果がありますか？ | 最適な照射レベルは、体質、肌色（肌色が濃い人ほど、最適な照射レベルは低くなります）など、人によって異なります。照射レベルが高いと出力は大きくなりますが、お肌を傷つける可能性も高まりますので、まずは低いレベルから始めてください。照射レベルを高くするときは、お身体に異常がないことを確認し、一つずつレベルを上げてください。 |
| 照射時に痛みはありますか？ | 照射すると、メラニン色素が光を吸収し、熱が発生します。そのため、わずかな痛み（輪ゴムで弾かれる程度）を感じます。使用部位や肌の色によって痛みの程度は異なりますので、お客様の状況に応じて照射のレベルを調整してください。まれに、照射後に軽い痛みを感じるがありますが24時間程度で消失します。 ※肌やお身体に異常が現れた場合や強い痛みがある場合は、直ちに使用を中止、医師にご相談ください。 |
| 照射したあとに、焦げた匂いがするのですか？ | 通常現象です。照射中にメラニン色素が光に反応し熱が発生します。そのため焦げたような匂いがします。特にムダ毛をきれいに剃っていなかった場合、匂いが出やすくなります。 ※肌やお体に異常が現れた場合は、直ちに使用を中止、医師にご相談ください。 |
| 毎日使用してもいいですか？ | 毎日の使用はお控えください。体毛には成長サイクルがあり、本製品の照射は成長期の毛に効果があります。本製品を継続して使用することで、徐々にムダ毛を目立たなくする製品です。本書記載のご使用方法に従ってご使用ください。 |
| しばらく使用しなかったあとに再開するときは、どうしたらいいですか？ | 2か月以上照射していない部位に使用を再開するときは、1~2週目のサイクルから始めてください。 |
| 髭に照射しても脱毛できますか？ | 髭も他のムダ毛と同様に脱毛できます。ただし、髭は成長が早いいため、個人差はありますが他の部位よりも効果を実感できるまでに時間がかかります。 |

このような症状があるときは

※体調不良や皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、専門医にご相談ください。

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 刺すような痛みがある | <p>同じ照射レベルでも体質の違いによって痛みの感じかたが異なります。刺すような痛み（やけどのような痛み）を感じたら、照射レベルを下げてください。照射レベル「1」でも痛みを感じる場合は、本製品の使用を中止してください。</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> 皮膚が赤みを帯びている 少しやけどのような感じがする | <p>通常現象です。時間が経てば自然に消えていきます。冷たいタオルで照射部位を冷やし、化粧水や保湿クリームなどで保護してください。</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> 焦げた匂いがする | <p>通常現象です。照射中にメラニン色素が光に反応し熱が発生します。そのため焦げたような匂いがします。特にムダ毛をきれいに剃っていなかった場合、匂いが出やすくなります。</p> |

故障かな？と思ったら

※点検後、異常がある場合はお客様ご自身で修理せずにお買い上げの販売店へご相談ください。

| こんなときは | ご確認ください | 処置 |
|------------------|-------------------------|--|
| 電源が入らない | 電源アダプターがしっかりと接続されていますか。 | 電源アダプターをしっかりと接続してください。 |
| 表示パネルに何も表示されない | 電源アダプターがしっかりと接続されていますか。 | 電源アダプターをしっかりと接続してください。 |
| | 電源ボタンを2秒以上押ししましたか。 | 電源ボタンを2秒以上押ししてください。 |
| 照射ボタンを押しても照射されない | 電源が「OFF」になっていませんか。 | 電源ボタンを2秒以上押しして電源を入れてください。 |
| | 照射面を肌に密着させていますか。 | 照射面が肌に触れる程度に密着させてください。 |
| | 照射面を肌に強く押し当てていませんか。 | 照射面が肌に触れる程度に密着させてください。 |
| 電源が自動で切れる | 照射回数が0回になっていませんか。 | 本製品の使用できる総照射回数は、60万回です。60万回を超えると使用できません。 |
| | 電源アダプターがしっかりと接続されていますか。 | 電源アダプターをしっかりと接続してください。 |
| | 無操作の状態で、5分経過しましたか。 | 無操作の状態で5分経つと、安全のため自動で電源が切れます。 |

製品仕様

※本製品の性能向上のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

| | | | |
|------|--|-------|-------------------------------|
| 品名 | IPL脱毛器 | シリーズ | Ai01 |
| 型番 | AA0010 | 光源タイプ | IPL |
| 電源方式 | 交流式 | 定格電圧 | AC 100-240 V 50-60 Hz |
| 消費電力 | 48 W | 照射面積 | 約 3.9 cm ² |
| 本体質量 | 約 300 g | 外形寸法 | 約 幅 135 x 高さ 195 x 奥行 43 (mm) |
| 付属品 | 電源アダプター (1個)、保護メガネ (1個)、シェーバー (1個)、取扱説明書 (1部)、使用マニュアル (1枚)、ホク口隠しシール (1枚) | | |

保証とアフターサービス

● 保証書

必ず「お買い上げ日・販売店（ご購入サイト）」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より本体1年間です。

● 修理（交換）を依頼されるとき

■保証期間中の修理（交換）：

製品に本書とお買い上げ時のレシートまたは領収書を添えて、お買い上げの販売店（ご購入サイト）にご依頼ください。保証期間中の修理（交換）に必要な往復送料はお買い上げの販売店（ご購入サイト）が負担いたします。製品送付先は販売店（ご購入サイト）にお問い合わせください。

■保証期間が過ぎたあとの対応：

有償での対応となります。お買い上げの販売店（ご購入サイト）にお問い合わせください。

● ご不明な点や修理（交換）に関するご相談は

お買い上げの販売店（ご購入サイト）にお問い合わせください。

無料修理規定

この保証書は、本書記載内容で無料修理（交換）を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日から下記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理（交換）いたしますので、製品に本書とお買い上げ時のレシートまたは領収書を添えて、お買い上げの販売店（ご購入サイト）にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有償での対応となります。

(ア) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

(イ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。

(ウ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

(エ) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

(オ) 本書の提示がない場合。

(カ) 本書に、お買い上げ日・ご購入情報・お客様・販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

(キ) 消耗部品・付属品の交換、仕様変更等

2. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店（ご購入サイト）にご相談ください。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.

4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

| Sarlisi | | 保証書 | |
|---------|---------------------------------|-----|-------------------------|
| 品名 | IPL脱毛器 | お客様 | ふりがな お名前 |
| 型番 | AA0010 | | ご住所 |
| 保証期間 | お買い上げ日 年 月 日から 本体……………1年間 | 電話 | () |
| ご購入情報 | ご注文番号 レシート等貼り付け欄 | 販売店 | 住所・店名・ご購入サイト名 電話 |
| | | | () |

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理（交換）をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後のアフターサービス等についてご不明な点がある場合は、お買い上げの販売店（ご購入サイト）にお問い合わせください。

*レシートまたは領収書、もしくはそれに準ずるものがない場合は無効となります。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

●お受けした個人情報、保証書にご記入いただいた個人情報は、商品、サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として利用します。なお、この目的のためにSARLISI株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対してはSARLISI株式会社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

SARLISI株式会社

〒260-0027 千葉県千葉市中央区新田町12-1-602

■ TEL/FAX : 043-305-5736

■ ホームページ: <https://sarlisi.co.jp>

■ 最新の情報はこちらから

