


Sarlisi

取扱説明書

品名： 口腔洗浄器

型番： SAKK08WH/BK

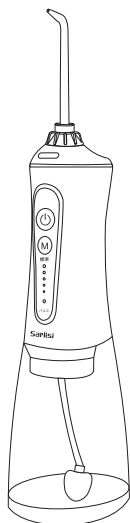

保証書付

家庭用

© 2023 SARLISI Inc. 無断複写・転載を禁じます。



もくじ

安全上のご注意	2~4
各部のなまえ	5
使いかた	6~9
製品のお手入れ方法	10
よくあるご質問	11
故障かな?と思ったら	11
製品仕様	11
保証とアフターサービス	裏表紙

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書(本書裏表紙)は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。













人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。











 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
--	--

 警告	
 充電用USBケーブルは、根元まで確実に差し込む (火災・感電・やけどの原因)	 充電用USBケーブルが傷んでいる場合は、使用しない (感電・ショート・発火・故障の原因) そのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。
 充電用USBケーブルを抜くときは、必ずUSBプラグを持って引き抜く (火災・感電・やけどの原因やコードの断線の原因)	 万が一、異常が発生した場合は、すぐに本体の電源を切って充電用USBケーブルを外す 煙・異音・悪臭がするなど、異常がある状態で使用しないでください。
 お手入れの際は、必ず電源をオフにする (感電・火災・発火・やけどの原因)	 充電用USBケーブルに水や液体がかからないようにする (感電・ショート・発火・故障の原因)
 充電用USBケーブルを引っ張って本製品を移動したり、持ち上げたりしない (感電・ショート・発火・断線の原因)	 充電用USBケーブルや、充電接続部に水が付着していないことを確認してから、使用する (感電・ショート・発火・故障の原因)
 充電用USBケーブルを束ねたままで使用しない (火災・感電の原因)	 必ず専用の充電用USBケーブルを使用する (感電・ショート・発火・故障の原因)
 充電用USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない (破損の原因)	 1日2回、1回1分までの使用目安を守る (舌や口腔内を傷める原因) 連続して使用する場合は2時間以上間隔をあけてください。 ※あくまで目安のため、ご自身の状態をよく見てご使用ください。
 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない (事故・けがの原因) 歯科医師の指示がある場合は、必ずそれに従ってください。	 本製品にヨウ素、アルカリ塩(食塩水)、または水に溶けない高濃度の洗剤などを使用しない 本製品の性能が低下し、製品寿命が短くなります。また、製品保証の対象外となります。

警告

<p>! 専用のノズルのみを使用する (事故・けがの原因)</p>	<p>⊘ 火中投入・加熱・高温での使用・放置をしない (発熱・発火・破裂の原因)</p>
<p>! 以下のような方は、歯科医師に相談の上、使用する</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歯周病の疑いがある人、治療中の歯や口腔内に気になる症状がある人は歯科医師に相談してください。 ・歯科医師から抗生物質の投薬を受けている場合は、本製品またはその他の口腔衛生補助器具を使用する前に、歯科医師に相談してください。 	<p>⊘ 本製品を水中に沈めたり放置しない (感電・ショート・発火・故障の原因)</p> <p>⊘ 本製品を乳幼児の手の届かない場所に保管し、使わせない また、子供に遊ばせない (事故・けがの原因)</p>
<p>⊘ 指定の部位以外や、以下のような部位には使用しない 目や鼻・耳・舌の裏・のどなどのデリケートな部位。 ※本製品は、強い水圧で噴射するため、これらのデリケートな部位に傷害を与える可能性があります。 ※ご自身で判断できない場合は、使用前に歯科医師にご相談ください。</p>	<p>⊘ 以下のような場所で、充電したり保管しない 浴室や浴槽、シャワーや洗面器などの水の入った容器の近く、ホコリの多い場所、直射日光のあたる場所、屋外</p> <p>⊘ 温泉や入浴剤入りのお湯、サウナで使用しない (故障の原因)</p>
<p>! 本製品をご使用前に、口腔内のアクセサリを取り外す (けがの原因)</p>	<p>⊘ ノズルは家族や他人と共用しない (感染・トラブルの原因)</p>
<p>⊘ 水タンク熱湯(40℃以下)を入れない (やけどの原因)</p>	<p>⊘ 自分で意思表示ができない人、口腔内の感覚が弱い人に使わせない また、子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける 未成年の方は保護者同意の上、保護者の監視のもと使用する (感電・けが・やけどの原因)</p>
<p>⊘ 家庭用以外の目的での使用や、過剰な連続使用はしない (業務用としての使用など) (発熱・故障の原因)</p>	
<p>⊘ 本製品の開口部に異物を入れない (故障の原因)</p>	<p>⊘ 本製品に重いものを置いたり、使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えない (けが・故障の原因)</p>
<p>⊘ 分解や修理・改造はしない (火災・感電・けがの原因)</p>	<p>⊘ 本製品は水平で安定した場所に必ず置き、不安定な場所に置かない (けが・発火・故障の原因)</p>
<p>⊘ 異臭・異常発熱したときは使用しない (破損・発火の原因)</p>	<p>⊘ 電子レンジや高圧容器に入れない (発熱・発火・破裂の原因)</p>
<p>⊘ 火のそばや直射日光の下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置しない (発熱・発火・破裂・動作不良の原因)</p>	<p>⊘ 使用するとき、使用後は乾いた布などで本体の水気をしっかりと拭く (感電・ショート・発火・故障の原因)</p>

 **注意**

 本製品にヒビや破損、不具合がある場合は使用しない (口腔内を傷める原因)	 本体を熱湯やドライヤーの熱風に晒さない (本体が変形したり溶けたりする原因)
 ノズルの先端を歯や歯茎に強く当たらない (けがの原因)	 ペットには使用しない (けがの原因)
 本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない (本体の表面に損傷を与える原因)	 口腔内に、傷などの異常がある場合は使用しない (けがの原因)
 電源を入れた状態で、他の電化製品に接触させない また、電熱機器(電気毛布・こたつなど)に近付けない (けが・故障の原因)	 使用中に気分が悪くなったり、体調に異変を感じた場合は、直ちに使用を中止する 翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。
 電源を入れた状態で放置しない また、使用後は必ず電源を切る (家具などの破損・けがの原因)	 使用後は毎回、「製品のお手入れ方法」(ページ10)を参照して、製品のお手入れを行う (口腔内トラブルや故障の原因)


※ 本製品の性能向上のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※ 本製品は、日本国内にて、企画を行っております。


※ 「Sarlisi」は、SARLISI株式会社の登録商標です。

各部のなまえ


本体

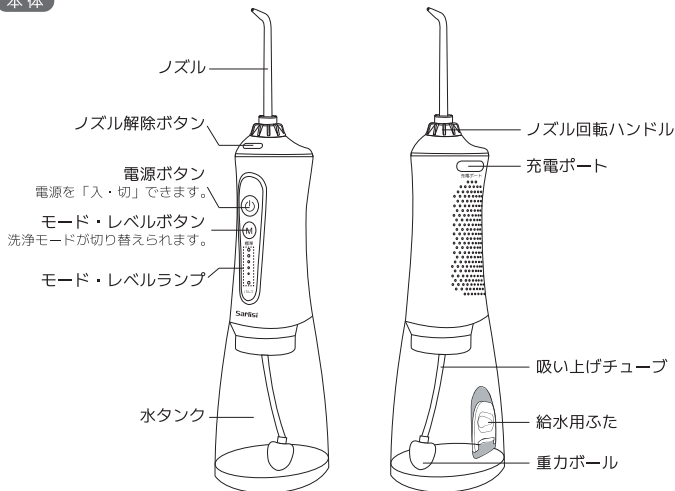


モード・レベルランプ

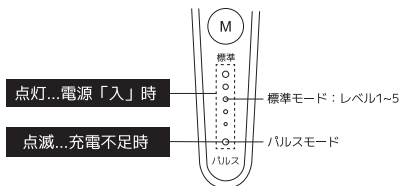

ノズル

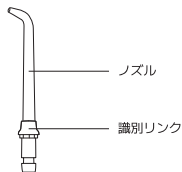

付属品

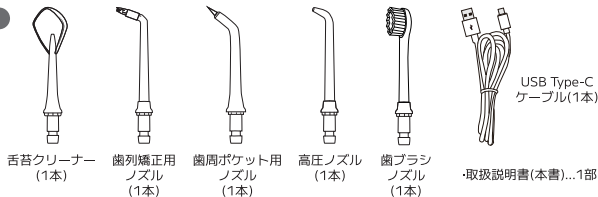

⚠ 注意

- 健康な歯茎の場合でも、使い始めは出血することがあります。これまでになかった刺激を与えたことが原因ですので、通常は1~2週間程度で出血しなくなります。万が一、2週間以上出血が続く場合は、使用を中止して歯科医師にご相談ください。

- 初めて使用する前に必ずフル充電してからお使いください。

1. ノズルを取り付ける



- ノズルの選び方は、「ノズルの選びかた」(ページ8)をご参照ください。
- ノズルの取り付けや取り外し方法は、「ノズルを取り付けと取り外し」(ページ9)をご参照ください。

- 塩、歯磨き粉、薬品などは入れない。
(けが・故障の原因)
- 水タンクに40℃以上の温水を入れられない。
(やけどの原因)



2. タンクに水を入れる

- 給水のしかたは、「給水のしかた」(ページ9)をご参照ください。
- 常に新しい水道水を使用してください。

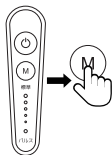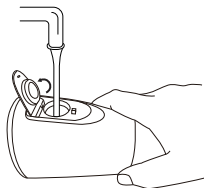

3. 洗浄モードを選択する


- 洗浄モード・レベルの変更方法は、「洗浄モード・レベルについて」(ページ9)をご参照ください。

メモリー機能

本製品にはメモリー機能が備わっており、設定した洗浄モード・レベルが記憶されるため、次回電源を入れると前回設定した洗浄モード・レベルで運転を開始します。

4. 口の中にノズルを入れ、軽くくわえる

- ノズルの先端を歯間や歯と歯茎の境目にできる限り垂直に当てます。
※けがの原因となるため、ノズルの先端を強く押し当てないでください。

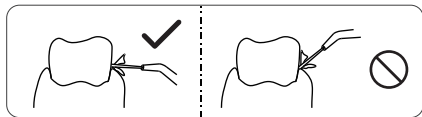


※水が飛び散るのを防ぐため、軽く口を閉じてください。



5.電源ボタンを押して電源を入れ、口腔内を洗浄する

- ・歯茎に沿って、ゆっくりと移動させながら洗浄してください。

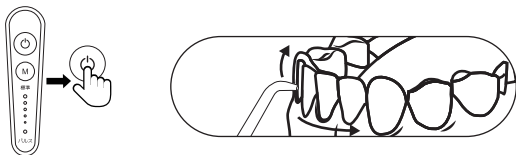


自動電源オフ

操作しない状態で約 2 分経過すると、自動的に電源が切れます。




6.電源ボタンを押して電源を切り、給水用ふたを開け、タンク内に残った水を捨てる

- ・タンク内の水は、毎回必ず捨ててください。
(雑菌などの繁殖の原因となります)

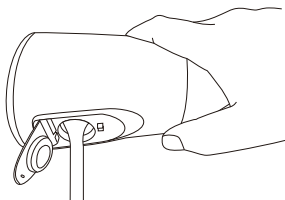

7.ノズルをシンクなどに向けて、電源ボタンを押し、タンク内の水を出し切る

- ・水が出なくなるまで、2~3秒ほど稼働させてください。

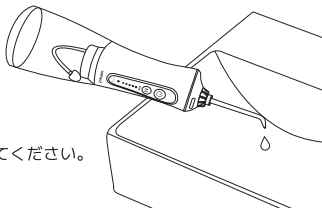

8.製品のお手入れを行う

- ・製品のお手入れ方法は、「製品のお手入れ方法」(ページ10)をご参照ください。

ノズルの選びかた

● 高圧ノズル (交換の目安: 約6カ月)

日常のクリーニング向け



● 歯周ポケット用ノズル (交換の目安: 約3カ月)

歯周ポケットに食べカスなどが溜まっている時

※けがなどの恐れがあるため、必ず「標準モード・レベル1」でご使用ください。



ポイント: 歯茎に沿って約45°で歯周ポケットに軽く当て、ゆっくりと洗浄する

● 歯列矯正用ノズル (交換の目安: 約3カ月)

歯列矯正をしている方向け

ポイント: 歯と矯正器具のすきまに差し込み、毛先を小刻みに動かす



● 舌苔クリーナー (交換の目安: 約6カ月)

舌の洗浄をしたい時

※水の流れに合わせて、舌苔を洗浄してください。



ポイント: 水を出しながら、舌に軽くあてて、奥から手前にゆっくりと数回動かしながら洗浄する

● 歯ブラシノズル (交換の目安: 約3カ月)

通常通りの歯磨きをしたい時


※水は出さずに手動でご使用ください。

※電動歯ブラシではありません。




ノズルの取り付けと取り外し方

1. ノズルの下部を、本体上部のノズル差し込み口に挿入する。
 2. 「カチッ」と音が鳴るまでしっかりと挿入する。
 3. ノズルを取り外すときは、ノズル解除ボタンを押したままノズルを取り外す。
- ※使用中は、ノズル解除ボタンを押さないでください。

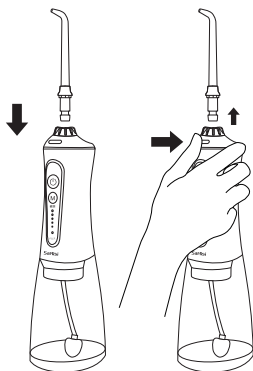

ノズル回転ハンドル

本製品は、ノズルを360°回転できる仕様のため、回転ハンドルでノズルを回して、お好みの位置に調節できます。

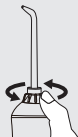

洗浄モード・レベルについて


洗浄モード	用途
標準モード	持続的に水を噴射するモードで、日常の洗浄におすすめです。 ※標準モードは、レベル1(弱い)~レベル5(強い)まで5段階で調節できます。
パルスモード	「ピュッ、ピュッ」と、少しずつ水を噴出するモードで、よりピンポイントでしっかりと洗浄したい時におすすめです。

- モード・レベルボタンを押す度に「標準モード・レベル1」→「標準モード・レベル2」→「標準モード・レベル5」→「パルスモード」→「標準モード・レベル1」の順番で切り替わります。
- 口腔洗浄器を初めてご使用になる方は「標準モード・レベル1」からお使いください。


給水のしかた

パターンA：キャップを開け、本体を水平にした状態で、タンクに水を入れてキャップを閉める。

- 塩、歯磨き粉、薬品などは入れない。(けが・故障の原因となります)
- タンクに40℃以上の温水を入れられない。(やけどの原因となります)

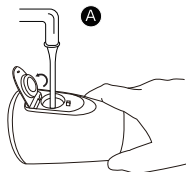

パターンB：本体上部(白い部分)を、ロック解除の矢印の方向に反時計回りに回転させ、持ち上げて取り外し、タンクに水を入れる。取り付ける際は、本体上部(白い部分)をタンクにはめて、矢印の逆方向に回転させる。

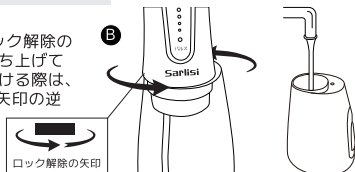

製品のお手入れ方法



注意

- 本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かないでください。
- 40℃以上の温水でタンクを洗わないでください。

・本体

乾いた布などで水気をよく拭き取ってください。

・ノズル

1. 本体から取り外して、
常温の水で洗い流してください。

※ノズルの取り外し方は、「ノズルの取り付けと取り外し方」
(ページ9)をご参照ください。

2. 乾いた布などで水気をよく
拭き取り、風通しの良いところで
乾燥させてください。




・水タンク

1. 本体から取り外して、
常温の水で洗い流してください。

※水タンクの取り外し方は、「給水のしかた」(ページ9)
をご参照ください。

2. 乾いた布などで水気をよく
拭き取り、風通しの良いところで
乾燥させてください。


※必要に応じて、綿棒などを使って水タンクの中を拭いてください。

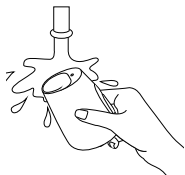

保管方法

- 本製品のお手入れを行ったあと、ノズルと水タンクを本体に取り付けて、ご購入時の箱などに収納し、ほこりや湿気を避けて冷暗所に保管してください。

※ 乳幼児の手の届く場所に保管しないでください。

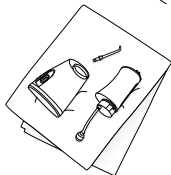

よくあるご質問

●ご使用にあたり、お困りの際は下記をご参照ください。

※使用中や使用後に、体調不良やお体に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して、専門医にご相談ください。

Q. ご質問	A. 回答
いつ使えばいいですか？	歯磨きの後のご使用をおすすめします。
1日何回使えばいいでしょうか？	理想は1日に2回、最低でも就寝前に1回のご使用をおすすめしております。
ノズルの交換頻度はどのくらいでしょうか？	3カ月を目安に交換してください。
長時間使わなくても大丈夫ですか？	電池が劣化する場合がありますため、3カ月に一度はフル充電をしてください。

故障かな？と思ったら

※点検後、異常がある場合はお客様ご自身で修理せずに、お買い上げの販売店へご相談ください。

こんなときは	考えられる原因	対処法
充電しても数分しか使えない	充電不足	フル充電してからお使いください。
	電池の寿命切れ	お買い上げの販売店にご相談ください。
動作音はするが水が出ない	ノズルに何かが詰まっている	ノズルを交換してください。
動作音がせず水も出ない	3ヶ月以上使用していなかった	16時間前後充電してからお使いください。
突然動かなくなった	操作しない状態で、約2分間経過して自動的に電源が切れた	電源ボタンを押して、再度電源を入れてください。
	連続使用により、過熱保護機能が作動した	2時間以上開けてからお使いください。

製品仕様

※本製品の性能向上のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

品名	口腔洗浄器	シリーズ	HF-P11
型番	SAKK08WH/BK	バッテリー	2,000 mAh
定格電源	5V⇄1A	充電時間	約5時間
消費電力	21 W	使用時間	約3時間
防水等級	IPX 7	タンク容量	300 ml
本体質量	約290 g	外形寸法	幅約6.9×高さ約22.6×奥行き約8.5 (cm)
付属品	取扱説明書(1部)、USB Type-C ケーブル(1本)、高圧ノズル(1本)、歯列矯正用ノズル(1本)、歯周ポケット用ノズル(1本)、舌苔クリーナー(1本)、歯ブラシノズル(1本)		

保証とアフターサービス

● 保証書

必ず「お買い上げ日・販売店（ご購入サイト）」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのと大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より本体1年間です。

● 修理（交換）を依頼される時

■ 保証期間中の修理（交換）：

製品に本書とお買い上げ時のレシートまたは領収書を添えて、お買い上げの販売店（ご購入サイト）にご依頼ください。保証期間中の修理（交換）に必要な往復送料はお買い上げの販売店（ご購入サイト）が負担いたします。製品送付先は販売店（ご購入サイト）にお問い合わせください。

■ 保証期間が過ぎたあとの対応：

有償での対応となります。お買い上げの販売店（ご購入サイト）にお問い合わせください。

● ご不明な点や修理（交換）に関するご相談は

お買い上げの販売店（ご購入サイト）にお問い合わせください。

無料修理規定

この保証書は、本書記載内容で無料修理（交換）を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日から下記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理（交換）いたしますので、製品に本書とお買い上げ時のレシートまたは領収書を添えて、お買い上げの販売店（ご購入サイト）にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有償での対応となります。

(ア) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

(イ) お買い上げ後の落下、引越越し、輸送等による故障または損傷。

(ウ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

(エ) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

(オ) 本書の提示がない場合。

(カ) 本書に、お買い上げ日・ご購入情報・お客様・販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

(キ) 消耗部品・付属品の交換、仕様変更等

2. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店（ご購入サイト）にご相談ください。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.

4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

Sarlisi		保証書	
品名	口腔洗浄器	お客様	ふりがな お名前
型番	SAKK08WH/BK		ご住所
保証期間	お買い上げ日 年 月 日から 本体……………1年間		電話 ()
ご購入情報	ご注文番号	販売店	住所・店名・ご購入サイト名
	レシート等貼り付け欄		電話 ()

● この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理（交換）をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後のアフターサービス等についてご不明な点がある場合は、お買い上げの販売店（ご購入サイト）にお問い合わせください。

※ レシートまたは領収書、もしくはそれに準ずるものがない場合は無効となります。

お客様のご個人情報の取り扱いについて

● お受けした個人情報、保証書にご記入いただいた個人情報は、商品、サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにSARLISI株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

● 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対してはSARLISI株式会社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

SARLISI株式会社

〒260-0027 千葉県千葉市中央区新田町12-1-602

■ TEL/FAX : 043-305-5736

■ ホームページ: <https://sarlisi.co.jp>

■ 最新の情報はこちらから

