


取扱説明書

品名: 温熱美顔器

型番: Sarlisi-XP122

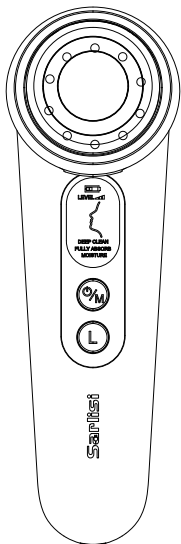

保証書付

家庭用

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 保証書(本書裏表紙)は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

もくじ


安全上のご注意	1
使用上のご注意	1
各部のなまえ	2
使いかた	3~11
使用後のお手入れ	11
充電方法	12
使用頻度	12
製品仕様	12
よくある質問と対処法	13
製品特徴	13
保証とアフターサービス	裏表紙

安全上のご注意

1. 本体が異常に熱を持っている時は、使用を中止してください。
(火傷・事故・故障の原因)
2. 本製品を落したり、強い衝撃を与えたりしないでください。
(ケガ・故障の原因)
3. 本製品の使用中、乾燥が気になる場合は、化粧水などを足してください。
4. 電源コードが破損した場合は、使用しないでください。
(ショート・火災の原因)
5. 以下のような方は、使用しないでください。
 - ・ 飲酒している場合や、薬を服用中・疲労が激しい場合
 - ・ 血圧異常の方や、感染症疾患のある方・結核症疾患の方
 - ・ 悪性腫瘍のある方・顔面神経痛の方
 - ・ アトピー性皮膚炎や接触性皮膚炎など、皮膚に既往歴のある方
 - ・ エステ・クリニックなどで、ダウンタイム(回復に要する時間)が必要な施術および、お肌に強い赤みが出る施術を2週間以内に受けた方

使用上のご注意

1. 本製品は、目や耳の周り、またはお肌が弱い箇所には使用しないでください。
2. 本製品を個人で改造・修理しないでください。故障した場合は、購入店舗までお問い合わせください。
3. 本製品は、同じ部位に10秒以上使用しないでください。
4. 本製品は、美容補助器として使用し、その他の目的では使用しないでください。
5. 本製品を初めて使用する際や、お肌が敏感な方、違和感を感じた場合などは、レベルを1に設定してご使用ください。
6. 本製品を、高温多湿な場所で使用しないでください。(故障の原因)
7. 本製品を、引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しないでください。(爆発・火災の原因)
8. 本製品を、乳幼児の手の届くところに置かないでください。また、お子様は使用しないでください。(事故や故障の原因)
9. 本製品は、絶対に水洗いしないでください。また、水に浸けたり、水をかけたりしないでください。(故障やショートの原因)
10. 本製品を、浴室や洗面所などの水がかかる場所や、湿気の多い場所で、使用したり充電したり、放置しないでください。(故障やショートの原因)

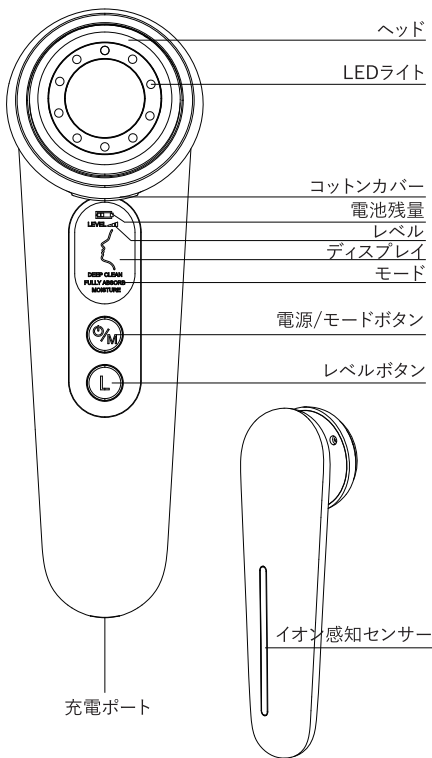


モード 1: DEEP CLEAN ディープクリーンモード

DEEP CLEAN モードでは、振動によって、洗顔やクレンジングだけでは落としにくい、肌表面や毛穴の汚れを除去するのをサポートし、古い角質や余分な皮脂にもアプローチできるため、お肌にツヤを与えます。

⚠ 注意

- ・肌トラブルを防ぐため、コットンは使い回さないでください。
- ・同じ部位には 10 秒以上使用しないでください。また、本製品は微電流を発生させるため、ご使用時にピリピリ感を感じる場合がございますので、予めご了承ください。
- ・感知センサーをしっかりと握った状態で、お肌に触れないと振動しないため、ご注意ください。

1

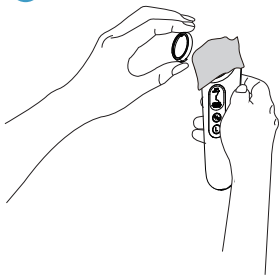

STEP1

コットンカバーを取り外し、ヘッドにコットンに乗せて、コットンカバーを装着してください。

※コットンやコットンカバーが装着しにくい場合は、ローションや化粧水でコットンを湿らせてから装着してください。



2



STEP2

ローションや化粧水をコットンにたっぷりと含ませます。
※クリームやジェル状の乳液などは使用しないでください。


3

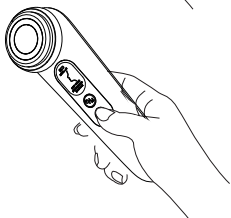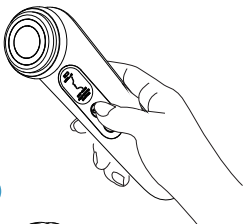

STEP3

電源 / モードボタンを2秒以上長押しして、本体の電源を入れたら、再度、電源 / モードボタンを押して「DEEP CLEAN モード」を選択してください。
※レベルボタンを押す度に、1~5のレベルを切り替えることができます。
初めて使用する際は、レベル1からお使いいただくことをお勧めします。

4

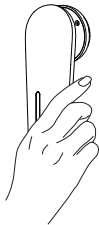

STEP4

本体裏側にある、シルバー部分の感知センサーにしっかりと触れた状態で握り、ヘッドをお肌に当てると振動します。

5



STEP5

コットンをお肌に当て、円を描くようにゆっくりと本体を動かします。
※コットンが乾いたら、ローションや化粧水を足してください。

6



STEP6

ケアが完了したら、電源 / モードボタンを2秒以上長押しして、電源を切ってから、顔を水で洗い流してください。
その後、コットンカバーを開いて、コットンを取り外し、ヘッドやコットンカバーなどは柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

モード 2 : FULLY ABSORB フリーアブソープ + 赤ライトモード

FULLY ABSORB モードでは、微細な振動と穏やかな電流により、肌にハリを取り戻す助けとなります。また、周波数 620nm の赤ライトは、紫外線をカットした赤ライトをお肌に照らすことで、お肌のツヤを取り戻すのをサポートします。

注意

- ・ FULLY ABSORB モードでは、コットンは不要なため、ローションや化粧水などと併用してください。
- ・ 同じ部位には 10 秒以上使用しないでください。また、本製品は微電流を発生させるため、ご使用時にピリピリ感を感じる場合がございますので、予めご了承ください。
- ・ 乾燥が気になるときは、ローションや化粧水などを足してください。
- ・ 感知センサーをしっかりと握った状態で、お肌に触れないと振動しないため、ご注意ください。
- ・ 週 2~3 回の使用を目安に、1 回に 2 分以上のご使用はお控えください。また、ヘッドはお肌の同じ部位に当て続けず、少しずつ移動させながらご使用ください。


1



STEP1

お顔全体にローションや化粧水を塗布します。


2

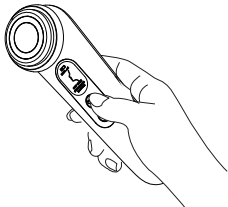

STEP2

電源 / モードボタンを2秒以上長押しして、本体の電源を入れたら、再度、電源 / モードボタンを押して「FULLY ABSORB モード」を選択してください。
※このモードを選択すると、赤ライトも点灯します。

3

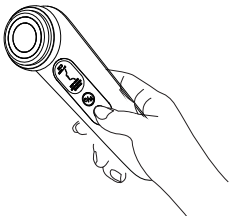

STEP3

レベルボタンを1回押す度に、レベルを1~5段階で調節することができます。
初めてお使い頂く際は、レベル1からお使いいただくことをおすすめします。

4



STEP4

感知センサー（本体裏側のシルバー部分）に触れた状態で、しっかりと握って、ヘッドを使用部位にあてると、振動します。


5



STEP5

通常通りのスキンケアを行った後、「お肌に 2~3 秒軽く押し当てる→離して、少しずつ当てる位置を変える」を繰り返しながら、ゆっくりと本体を動かします。
※動かし方は図示をご参照ください。

6

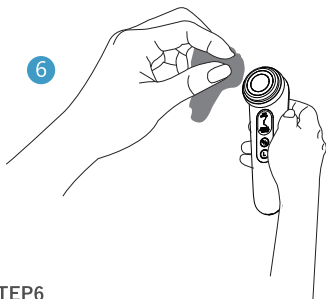

STEP6

ケアが完了したら、電源 / モードボタンを 2 秒以上長押しして、電源を切ってください。また、ヘッドやコットンカバーなどは柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

モード 3 : MOISTURE モイスチャー + 青ライトモード

MOISTURE モードでは、乳液やシートマスクの保湿成分をお肌に浸透させ、お肌を保湿します。また、周波数 450mm の青ライトは、お肌の整えるのをサポートします。

注意

- ・ MOISTURE モードでは、コットンは不要なため、乳液またはシートマスクなどと併用してください。
- ・ 同じ部位には 10 秒以上使用しないでください。また、本製品は微電流を発生させるため、ご使用時にピリピリ感を感じる場合がございますので、予めご了承ください。
- ・ 乾燥が気になるときは、乳液またはクリームなどを足してください。
- ・ 感知センサーをしっかりと握った状態で、お肌に触れないと振動しないため、ご注意ください。
- ・ 乳液と併用する場合は 1 日 1 回、シートマスクと併用する場合は週に 1~2 回のご使用をおすすめします。


1



STEP1

シートマスクをのせるか、お手持ちの乳液やクリームなどをお顔全体にまんべんなく塗布してください。


2

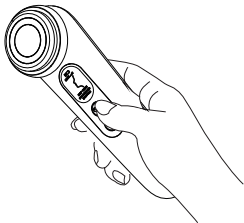

STEP2

電源 / モードボタンを2秒以上長押しして、本体の電源を入れたら、再度、電源 / モードボタンを押して「MOISTURE モード」を選択してください。
※このモードを選択すると、青ライトも点灯します。


3

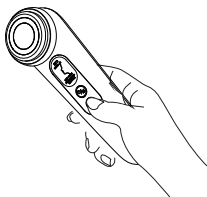

STEP3

レベルボタンを1回押す度に、レベルを1~5段階で調節することができます。
初めてお使い頂く際は、レベル1からお使いいただくことをおすすめします。

4

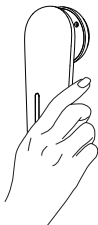

STEP4

感知センサー（本体裏側のシルバー部分）に触れた状態で、しっかりと握って、ヘッドを使用部位にあてると、振動します。

5




STEP5

図示に従って、ヘッドを軽くお肌に押し当てて、お顔の中心から外側に向かってゆっくりと本体を動かします。

※シートマスクと併用する場合は、シートマスクの上から当てて滑らせてください。

6

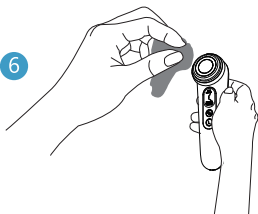

STEP6

ケアが完了したら、電源 / モードボタンを2秒以上長押しして、電源を切ってください。また、ヘッドやコットンカバーなどは柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

使用後のお手入れ

本体の電源が切れていることを確認してください。

※電源 / モードボタンを2秒以上押すか、お肌に当てていない状態で約5分経つと自動的に電源が切れます。

本体

本体の汚れは、柔らかい布やコットンなどで拭き取ってください。

※本体は水洗いできません。また、アルコールや洗剤などは使用しないでください。

ヘッド・コットンカバー

ヘッドについた美容液や汚れは、水分を含ませた布で拭き取ってください。

また、コットンカバーは水洗いして、よく乾かしてから本体に装着してください。

充電方法

1. ディスプレイの電池残量マークが点滅している場合は、充電が不足しているため、充電してください。
 2. 本製品は USB ケーブルのみ付属しております。アダプターは、5V/1A のものを使用して充電してください。
 3. 充電中は、ディスプレイが点灯し、電池残量マークが点滅します。電池残量マークの点滅が止まると充電完了となります。充電が完了したら、必ず電源を切ってから保管してください。
- ※充電中は使用しないでください。
※充電完了までは約 3 時間かかります。
※長期間使用しない場合は、乾燥した場所に保管し、約 3 ヶ月に 1 回充電を行ってください。

使用頻度

	お手軽ケア	通常ケア	念入りケア
使用時間	4分	8分	12分
モード	MOISTURE	MOISTURE or DEEP CLEAN	MOISTURE or DEEP CLEAN or FULLY ABSORB
おすすめの 使用頻度	1日1回	1日1回	週に 3~4 回

製品仕様

品名	温熱美顔器	周波数	12,000~18,000 rpm
型番	Sarlisi-XP122	バッテリー	800 mAh
電源	5V=1A	充電時間	約 3 時間
消費電力	3.5 W	使用時間	約 3 時間
本体質量	約 115 g	外形寸法	約幅 4.7×高さ 16.1×奥行き 4.4(cm)
付属品	コットンカバー（本体に装着済み）、micro USB ケーブル、取扱説明書		

よくある質問と対処法

症状	原因	対処法
電源が入らない	操作方法に誤りがある	電源 / モードボタンを2秒以上、長押ししてください
	充電中のため	充電が終わってから、ご使用ください
	充電不足	充電してください
充電できない	接続不良	充電コードを取り外し、接続し直してください
振動しない	感知センサーに触れていない	本体裏側の感知センサーにしっかりと触れてください
刺激が強い	設定レベルが強すぎる	設定レベルを下げてください
	ローションや化粧品が足りていない	ローションや化粧水を足してください

製品特徴

1. 本製品は、EMS+高頻度振動+光線療法を持ち合わせており、化粧品と併用することでより効果をもたらすことができます。
2. クレンジング効果の他、乳液やシートマスクの保湿成分の吸収を促進し、お肌にハリや弾力感を与えます。
3. 3つのモードや5段階のレベルが備わっており、用途やお肌の状態に合わせて、調節することができます。
4. 本製品は、お肌に当てていない状態で約5分経過すると、自動的に電源が切れます。
5. 本体の裏側に、イオン感知センサーが搭載されており、感知センサーを握った状態でヘッドをお肌に当てると、イオンが発生して振動します。

保証とアフターサービス

●保証書

必ず「お買い上げ日・販売店(ご購入サイト)」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのもと大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より本体1年間です。

●修理(交換)を依頼されるとき

■保証期間中の修理(交換)：

製品に本書とお買い上げ時のレシートまたは領収書を添えて、お買い上げの販売店(ご購入サイト)にご依頼ください。保証期間中の修理(交換)に必要な往復送料はお買い上げの販売店(ご購入サイト)が負担いたします。製品送付先は販売店(ご購入サイト)にお問い合わせください。

■保証期間が過ぎたあとの対応：

有償での対応となります。お買い上げの販売店(ご購入サイト)にお問い合わせください。

●ご不明な点や修理(交換)に関するご相談は

お買い上げの販売店(ご購入サイト)にお問い合わせください。

無料修理規定

この保証書は、本書記載内容で無料修理(交換)を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日から下記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理(交換)いたしますので、製品に本書とお買い上げ時のレシートまたは領収書を添えて、お買い上げの販売店(ご購入サイト)にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有償での対応となります。

(ア) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

(イ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。

(ウ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

(エ) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

(オ) 本書の提示がない場合。

(カ) 本書に、お買い上げ日・ご購入情報・お客様・販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

(キ) 消耗部品・付属品の交換、仕様変更等。

2. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店(ご購入サイト)にご相談ください。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.

4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

Sarlisi

保証書

品名	温熱美顔器	お客様	ふりがな お名前
型番	Sarlisi-XP122		ご住所
保証期間	お買い上げ日 年 月 日から 本体……………1年間	販売店	電話 ()
ご購入情報	ご注文番号 レシート等貼り付け欄		住所・店名・ご購入サイト名 電話 ()

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理(交換)をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後のアフターサービス等についてご不明な点がある場合は、お買い上げの販売店(ご購入サイト)にお問い合わせください。

※レシートまたは領収書、もしくはそれに準ずるものがない場合は無効となります。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

●お受けした個人情報、保証書にご記入いただいた個人情報は、商品、サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにSARLISI株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対してはSARLISI株式会社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

SARLISI株式会社

〒260-0027 千葉県千葉市中央区新田町12-1-602

■ TEL/FAX: 043-305-5736 ■ ホームページ: <https://sarlisi.co.jp> ■ 最新の情報はこちらから

