


**Sarlisi**

サファイア美容器

(SLS-AI06)

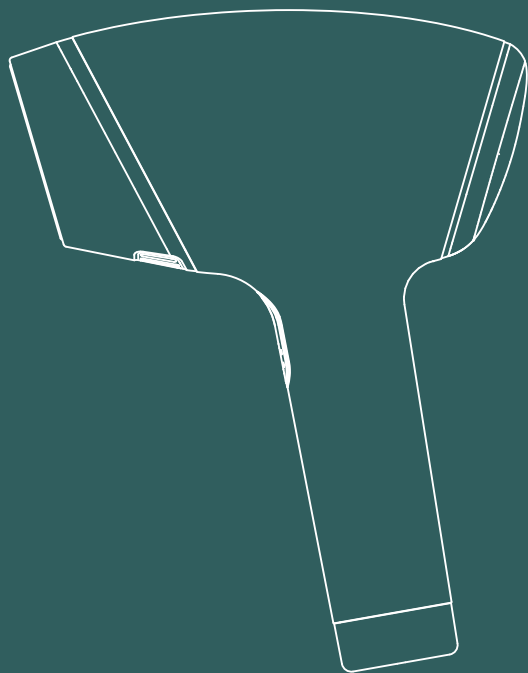

取扱説明書



# Sarlisi

## サファイア美容器

### (SLS-AI06)

このたびはSarlisi美容器をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

# CATALOG

## 目次

• 製品紹介	01
• 安全上のご注意	02
• 本体各部の名称	05
• ディスプレイ表示の説明	06
• 製品の仕様	07
• パッケージ内容	07
• 使用前の準備	08
• 使用手順	10
• モードの切替	13
• 使用後のお手入れ	14
• 清潔・メンテナンス	15
• 各部位のムダ毛ケアポイント	16
• 異常を感じた時の対処方法	17
• よくある質問と対処方法	18
• 保証期間内の修理について	19

## I Sarlisiの原理

Sarlisiは光の力を使って効果的にムダ毛ケアをします。本製品はIPL(インテンス・パルス・ライト)という特殊な波長の光をお肌照射します。毛包（ムダ毛の根本）にあるメラニン色素がこの光のエネルギーを吸収し、毛包に効果的に温熱作用を及ぼします。この作用により毛包でのムダ毛の成長を妨げます。また、IPLはお肌の線維芽細胞を活性化し、肌のハリを回復させ、しわや毛穴縮小に効果があります。ケアを継続することで肌の質を改善します。

- **ムダ毛ケア**

IPLを照射することで毛包を狙って温熱効果を与えます。この効果により体毛の成長が遅くなります。成長期の毛包に照射することで成長を妨げます。定期的に照射をすることでムダ毛の発育を妨げ、除毛することができます。ただし、永久ムダ毛ケアではありませんので、ケアを中止するとムダ毛の量は徐々に戻ります。色の薄いムダ毛や白色のムダ毛には効果がありません。

- **冷感機能**

サファイア結晶は高強度、高温耐性、高透光性と高熱伝導性などの性能を揃って、半導体冷却技術と結合し、安全で快適な冷感ムダ毛ケアを実現できる。ムダ毛ケア中、サファイアは皮膚と接触する時に表皮を冷却し、皮膚の灼熱損傷を減少し、無痛ムダ毛ケアを実現することができます。

- **光スキンケア**

IPL(インテンス・パルス・ライト)は肌ハリを改善し、若々しくします。これはIPLが皮膚にある線維芽細胞を活性化し、コラーゲンの合成を促進するからです。

- **高い安全性**

レーザーケアと比較した場合、IPLは皮膚へのダメージが少なく、ケアした当日にお化粧をしたり、顔を洗ったりすることができます。ケアを行っている最中に、輪ゴムで弾かれる程度の刺激がありますが、レーザーケアのような痛みは通常ありません。

## 安全上の注意 | SAFETY PRECAUTIONS

### ・ 次のような方は使用しないで下さい。

- 1、局部または全身に炎症のある方。
- 2、光線過敏症の方やその既往がある方。光線過敏の原因となりうる疾患にかかっている方や既往のある方。
- 3、1 週間以内に薬を服用した方。（薬により光線過敏の状態になることがあります）
- 4、ペースメーカー、インスリンポンプなどの体内植え込型医療機器を使用されている方。
- 5、人工心臓などの生命維持医療機器を使用されている方。
- 6、心電計などの装着型の電子医療機器を使用されている方。（電子医療機器の誤差動を招く恐れがあります）
- 7、妊娠中、または授乳中の方。
- 8、成長期のお子様。
- 9、糖尿病などの疾患により皮膚や感覚に異常がある方。
- 10、てんかんのある方。
- 11、皮膚がんの既往がある方。ホクロが異常に多い方。しみが異常に多い方。
- 12、その他かかりつけ医に本製品を使用しないよう指示を受けた方。

### ・ ご注意

- 1、ご使用前に本体に異常がないか確認して下さい。
- 2、万が一、お肌の色が変化（濃くなった、薄くなった）場合は使用を中止し、医師に相談してください。
- 3、ホクロや刺青、アートメイクがある部位、及びその周辺には使用しないで下さい。
- 4、日光浴をした後や日焼けマシンを使用した後には使用しないで下さい。また、日焼けクリームを使用している方は使用しないで下さい。日焼けをしたかどうか、または日焼けによる皮膚への影響があるかどうかはっきりしない場合はムダ毛ケア器を使用しないでください。時間を置いて日焼けがないことを確認してから使用してください。
- 5、体調のすぐれない時、肌に異常を感じる時は使用しないでください。
- 6、入浴直後は使用しないでください。
- 7、ケミカルピーリングやあかすりなどの施術を受けた場合は、時間を十分に空けてから使用して下さい。
- 8、しみ、そばかす、あざ、いぼのある部位など、周囲より色の濃い部位は使用しないで下さい。こうした部位は光エネルギーを吸収しやすく、皮膚を傷めます。
- 9、静脈瘤や血管奇形のある部位には使用しないでください。
- 10、美容整形や手術を受けた部位、傷跡の残っている部位には使用しないでください。

11. 傷、湿疹、毛嚢炎、虫刺され、白癬のある部位には使用しないでください。
  12. 鼻の下や口元に使用する場合は、鼻や唇に照射しないように注意してください。
  13. 顔に照射するときは、照射部位から目をそらしたり、目を閉じるなどして光が目に入らないようにしてください。
  14. 目とその周囲には使用しないでください。VIO(デリケートゾーン)などの部位に使用する場合は、低強度、低頻度での使用をおすすめします。
  15. 同じ部位に長時間照射しないで下さい。また同じ部位に連続して照射しないで下さい。過度に照射すると大量の熱が発生し、皮膚を傷たり、やけどを負う恐れがあります。
  16. 照射面を強く当てすぎないでください。照射面が皮膚に触れるとやけどを負う恐れがあります。
  17. お体が不自由な方が使用される場合は、製品の使用方法のわかる方が付き添い、または指導をしてください。
- \* 使用后、皮膚の発赤が 2 日以上続く場合は本製品の使用を停止し、病院で医師の診察を受けてください。

## ・ 危険

1. 本製品本体の中は高電圧です。危険ですから絶対に分解しないで下さい。
2. 本製品を使用する際、通風孔をふさがないで下さい。
3. 本製品や付属品は防水ではありません。浴室など湿気の多い場所で使用しないでください。また、本体や付属品を水でぬらさないでください。
4. 本製品や付属品は結露しないところに保管してください。
5. 本製品や付属品を高温になる場所に置かないでください。故障の原因となります。
6. プラグや電源コードが破損した場合は、使用しないで下さい。
7. 燃えやすい物や爆発しやすい物の近くで使用しないで下さい。


## ・ 警告

1. 使用の際、目などに照射光を向けしないで下さい。使用の際は必ず付属の保護眼鏡を着用してください。また、保護眼鏡を着用していても照射光を直射しないでください。
2. 本製品を使用する前に、身につけている指輪やブレスレットなど金属品を外してください。
3. 子供がいなくて操作してください。使用後は、子供の手が届かない場所に保管してください。
4. 本製品を使用する際はメイクや香水などをよく洗い、素肌の状態にして使用してください。

**!** 注意事項 | BE CAREFUL



肌の色が濃い方は  
使用しないでください

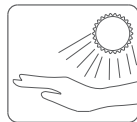

ムダモケア後2週間は照射部位を  
強い日差しにさらさないでください。



暗い環境での使用を禁止する




ご使用する際は必ず付属の  
保護眼鏡をかけて下さい



ムダモケア前に  
シェーバーでムダ毛を剃ってください



初回使用時は  
レベル1からご利用下さい

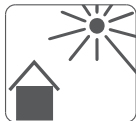


直射日光の当たる場所では  
使用しないでください  
(故障の原因になります)



本製品を強く衝撃したり  
揺れたりしないでください





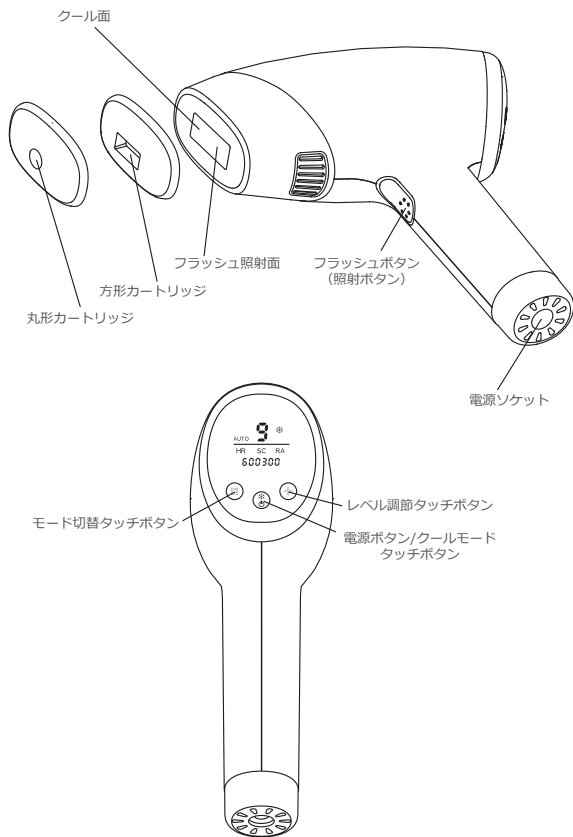

## 本体各部のなまえ | PRODUCT STRUCTURE



※ 雑物で風の出る口を塞ぐことを厳禁する。ムダ毛ケア器故障の原因になります。

## Ⅰ ディスプレイ表示の説明



液晶ディスプレイの記号	機能	パラメーター
HR	ムダ毛ケア	60万次
SC	スキンケア	
RA	美白	
AUTO	自動連続照射モード	
	クール機能	
数字 (1~9)	照射レベル表示	1~9 (9段階レベル)
6桁の数字	残り照射回数	
	モード切替タッチボタン	HR(ムダ毛ケアモード)、SC(スキンケアモード)、RA(美白モード) に切換できます。
	電源ボタン/クールモードタッチボタン	2秒長押しして、ON/OFF 1回押すと、クール機能を選択する
	レベル調節タッチボタン	レベル調節、1~9レベル

## 製品規格 | PRODUCT PARAMETER

光源タイプ	パルス光	入力	100~240V、 50~60H, <48W
照射面積(本体)	約3.2*1.1cm	操作ボタン	フラッシュボタン /ディスプレイタッチボタン
本体サイズ	約21*16*6.4CM	パッケージのサイズ	約26*20.2*11CM
総重量	約1.3kg	使用環境	温度20~35℃ 相対湿度20~90%
本体重量	約0.38kg	本体のアフターサービス	保証期間はご購入 上げ日から1年間

## パッケージ内容 | ACCESSORIES

本体	1
ACアダプター	1
取扱説明書	1
保護眼鏡	1
シェーバー	1
丸形カートリッジ	1
方形カートリッジ	1

## 使用前の準備 | PREPARE BEFORE USE



- 使用する前に徹底的に肌を清潔にし、よく乾かして肌にムダ毛、油性物質(香水、乳液、日焼け止めなど)が残らないようにしてください。
- 照射面にはホコリや体毛などの残留はなく、破損や異常はなかったことを確認してください。汚れがあれば、布で拭きとってください。製品故障や肌が荒っぽくなる原因になります。
- ムダ毛ケアする前に、ムダ毛ケア部位にジェルまたは化粧品(アロエジェルなど)を使用しないでください。

## 照射レベルの設定

本製品は家庭用ムダ毛ケアに向けて開発され、照射エネルギーは更に溫和で、9段の照射強度が配備されています。ご使用時は、肌の色や使用部位に応じて照射レベルを1~9まで調整することができます。

- 1、初回使用時はレベル1から使用することをお勧めします。ご使用時に痛みや不快感があれば照射レベルを下けてください。肌の色が濃い方は、熱をより多く吸収し、肌のアレルギーを起こす可能性があるため、肌の濃い方には低レベルで照射することをお勧めします。
- 2、本製品は1~9レベルが設定されていますので、肌の色や使用部位によって照射レベルを選んでください。

毛の色	肌の色					
	白色	ホワイ	ライトブラウン	ブラウン	ダークブラウン	ブラック
グレー/白色	×	×	×	×	×	×
レッド	×	×	×	×	×	×
金色	×	×	×	×	×	×
ライトブラウン	6-9	6-9	6-9	1-5	×	×
ブラウン	6-9	6-9	6-9	1-5	×	×
ダークブラウン	6-9	6-9	6-9	1-5	×	×
ブラック	6-9	6-9	6-9	1-5	×	×

(ご注意：×は使用できません)

ご注意：肌の色はライトブラウン・ブラウン・ダークブラウンの場合は使用できません。

ご注意：毛の色はグレー/白色・レッド・金色の場合は使用できません。

## ■皮膚の敏感度テスト

はじめて使用する際は皮膚の目立たない部位を選び、下記の手順に従いテストを行って下さい。


- ①電源を入れて下さい。
- ②照射レベルを1に設定して下さい。
- ③操作手順及び注意事項に従い、照射して下さい。
- ④照射から30分程度様子を見て、照射部位に痛みや発赤がないか確認してください。
- ⑤照射した部位に異常がなければ継続して使用できます。異常があれば使用を中止してください。


テストの結果、強い痛みや発赤が発生し、2日たっても治らない場合は使用を中止し、医師に相談してください。

## 美容器の使用手順 | INSTRUCTIONS

美容器を使用する際は、必ず付属の保護眼鏡をかけて下さい。

- 1、本製品をご使用になる前に、ムダ毛ケア部位のムダ毛を剃って下さい。次に剃った部位をよく洗い、乾かして下さい。毛包に光が到達しやすくなり、脱ムダ毛ケア効果が高まります。
- 2、付属の保護眼鏡をかけて下さい。ACアダプターのプラグを本体に差し込んでください。本体のランプが点灯し“OFF”と表示されます。

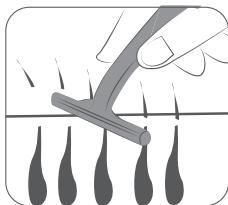

- 3、電源タッチボタンを2秒長押しすると本体が起動します。お使いになる前にディスプレイを見てモードを確かめて下さい。
- 4、モードは、使用目的に応じて切り替えて下さい。ディスプレイの「」タッチボタンを短く押すとレベルを調整できます。ムダ毛ケアの場合はディスプレイに“HR”と表示されていることを確認してください。
- 5、照射レベルは9段階で調整可能です。ディスプレイの「+」タッチボタンを短く押すとレベルを調整できます。初めてご使用になる方は、必ず「1」（一番弱いレベル）から始めてください。以降は、皮膚の様子を見ながらレベルを上げてください。レベルを上げるほど効果が強くなりますが、皮膚のトラブルを起こす恐れも高まります。不快感を感じない程度の強度に設定してください。
- 6、照射設定

(1) 手動照射モード(狭い範囲のムダ毛ケアに適しています)

美容器に電源を入れると、自動的に手動照射モードになります。照射ボタンを一回押すと一回照射されます。

(2) 自動照射モード(広い範囲のムダ毛ケアに適しています)

美容器に電源入れた後、照射ボタンを長押しすると、ディスプレイに「AUTO」と表示され、自動照射モードに切り替わります。ヘッドを照射部位に垂直に密着させると、照射が自動的にスタートします。

7、本体をまっすぐに持ち、照射面が照射部位に密着するように当てて下さい。

(1) 手動照射モードの場合

ライトが点滅するのを待って下さい。ライトが点滅したら、照射ボタンを押し、照射して下さい。照射が完了したら、次にムダ毛ケアしたい場所に本製品を当てて下さい。またライトが点滅するのを待って、点滅したら照射をして下さい。以後、同じように照射を続けて下さい。一つの部位につき 1 回照射してください。

(2) 自動照射モードの場合

照射ボタンを長押しすると、照射が開始されます。照射が完了したら、次にムダ毛ケアしたい場所に本製品を当てて下さい。また照射ボタンを長押しすると照射が開始されます。その後は同じように照射を続けて下さい。一つの部位につき 1 回照射してください。

8、冷感機能が必要な場合、電源 / クールタッチボタンを押すと、液晶ディスプレイに

❄️ マークを表示し、冷感機能を始めます。もう一回押すと、冷感機能を閉じます。

9、照射完了後、電源ボタン (照射ボタン) を 2 秒間長押しすると電源が切れます。

また、5 分間操作をしなかった場合に自動的に電源が切れます。

10、電源が OFF になったら、美容器本体から AC アダプターのプラグを外してください。

11、照射面の熱が冷めたら (約 10 分程度かかります)、アルコール成分を含まないウエットティッシュや柔らかい布などで、照射面をきれいに拭いて下さい。

12、本体をきれいに清掃した後に、本体を箱に戻してください。製品は風通しが良く湿気のない場所に保管してください。お子様の手が届かないよう注意してください。

13、ムダ毛ケア後のお肌のお手入れ



照射後 20 分程度お肌を休ませてください。その後、保湿ローションなどを  
使い照射部位に潤いを与えて下さい。軽い痛みを感じる場合は、30 分から 1 時間ほど照射部位を冷やして下さい。

## ・ 注意事項

- ① 照射後、照射した部位に化粧水や保湿クリームを使用して下さい。また、ムダ毛ケア後すぐに、刺激性のある化粧品を使用しないで下さい。
- ② ムダ毛ケア前にムダ毛ケア部位をよく水で洗い、日焼け止めクリームや化粧などを洗い流してください。照射後 48 時間は日光浴、温泉、サウナなどを控えて下さい。
- ③ ムダ毛ケア後 2 週間は照射部位を強い日差しにさらさないでください。照射部位は肌が敏感になっているので、季節にかかわらず日焼け止めクリーム (SPF30 以上) を塗ることをおすすめします。また、夜にムダ毛ケアを行うと照射直後の日焼けを防ぐことができます。
- ④ 脱ムダ毛ケア後の 48 時間以内は、塩素消毒の刺激を避けるためにプールに入らないでください。
- ⑤ 同じ部位に 1 回照射して下さい。ただし、同じ部位に連続照射はお止め下さい。
- ⑥ 本製品は、10 分以上連続して使用しないで下さい。ムダ毛ケア範囲が広い場合、数回に分けて下さい。  
10 分間使用したら一度電源を切り、10 分後に使用を再開することをお勧めします。



## モードの切替 | FUNCTION SWITCHING

- ① 美容器の使用手順に従って、電源を入れて下さい。
- ② ディスプレイの「」タッチボタンを押すと HR (ムダ毛ケアモード)、SC (スキんケアモード)、RA(美白モード)の順番で切り替わります。
- ③ フラッシュボタンを 2 秒長押しすると、ディスプレイに“AUTO”が表示点滅され、自動照射モードに切り替わります。
- ④ 冷感機能が必要な場合、電源 / クールタッチボタンを押すと、液晶ディスプレイに  マークを表示し、冷感機能が始めます。

## 操作のアドバイス

THREE FUNCTIONAL SUGGESTIONS FOR HAIR  
REMOVAL/REJUVENATION/ACNE REMOVAL

SC と RA モードは週に 1～2 回の使用をお勧めします。


同じ部位には一日の間に一つの機能しか使用できません。同じ部位に別の機能を使用した場合は、一日置いてから行ってください。

本製品は丸形カートリッジと方形カートリッジを配備し、指などの小部位にピンポイント脱毛ができます。ご使用する前には、カートリッジを照射面に置いてください。カートリッジが照射面に附着してから、照射することができます。

## 使用後のお手入れ | SKIN CARE

- 照射後、照射した部位に化粧水や保湿クリームを使用して下さい。また、ムダ毛ケア後すぐに、刺激性のある化粧品を使用しないで下さい。
- ムダ毛ケア後は香水、パックなどスクラブ入りの化粧品はご使用下さい。
- ムダ毛ケアする前にムダ毛ケア部位をよく水で洗い、日焼け止めクリームや化粧品などを洗い流してください。照射後 48 時間は日光浴、温泉、サウナなどを控えて下さい。
- ムダ毛ケア後 2 週間は照射部位を強い日差しにさらさないでください。照射部位は肌が敏感になっているので、季節にかかわらず日焼け止めクリーム (SPF30 以上) を塗ることをおすすめします。また、夜にムダ毛ケアを行うと照射直後の日焼けを防ぐことができます。
- ムダ毛ケア後の 48 時間以内は、塩素消毒の刺激を避けるためにプールに入らないでください。
- 同じ部位に 1 回照射して下さい。ただし、同じ部位に連続照射はお止め下さい。
- ムダ毛ケア器は、10 分以上連続して使用しないで下さい。ムダ毛ケア範囲が広い場合、数回に分けて下さい。10 分間使用したら一度電源を切り、10 分後に使用を再開することをお勧めします。
- ムダ毛ケア部位はムダ毛ケア後に整形手術をする場合は医師に相談してください。ご注意：すべての指示に従っていても皮膚反応が起こる可能性があります。この場合は、使用を中止して医師に相談したり、アフターサービスに連絡したりしてください。

### ■ 使用サイクル

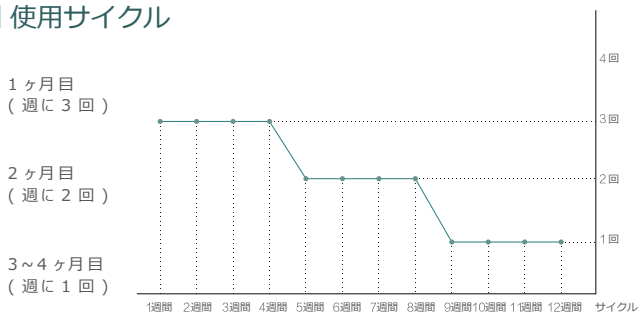

ご注意：効果は部位や個人の体質によって異なります。効果を実感できるまでに約半年から一年かかることもあるので、照射を継続してください。

## 清潔・メンテナンス | CLEANING AND MAINTENANCE

製品のムダ毛ケア効果と使用寿命を確保するために、毎回ムダ毛ケア後に本製品を清掃し、必要な時にはムダ毛ケアの間に本製品を清掃してください。正常に清潔しないと、ムダ毛ケア効果に影響する可能性があります。



- ◆ 本体を检查し、照射面と本体の清潔を確保します。
- ◆ 水洗いは絶対にしないでください。また水につけたり水をかけたりしないでください。
- ◆ アルコール、洗剤などは使わないでください。



- ◆ 電源が OFF になったら、ムダ毛ケア器本体から AC アダプターのプラグを外してください。
- ◆ 照射面の熱が冷めたら、アルコール成分を含まないワットティッシュや柔らかい布などで、照射面をきれいに拭いて下さい。
- ◆ 本体をきれいに清掃した後に、本体を箱に戻してください。製品は風通しが良く湿気のない場所に保管してください。お子様の手に届かないよう注意してください。



製品を廃棄する時は、関連規定に基づいて廃棄してください。

# ムダ毛ケアポイント | HAIR REMOVAL ESSENTIALS

本製品をご使用になる前に、ムダ毛ケアする部位のムダ毛を剃って下さい。次に剃った部位をよく洗い、乾かして下さい。

## ■ 各部位のムダ毛ケアポイント

- 脇の下のムダ毛ケア  
ムダ毛ケア前には、脇の下の汗止め、香水、乳液などを拭き取ってください。  
肌のゆるんだ部分は、まず指で肌を伸ばしてからムダ毛ケアします。照射すると、照射部位に軽い熱感を感じる場合もありますが、それは正常です。
  - ビキニラインのムダ毛ケア  
肌の色が濃い部分は低レベルで照射することをお勧めします。
  - 手足のムダ毛ケア  
骨がある部位や不整な部位は、他の部位に比べて赤く腫れ、痛みが現れやすい、それは正常です。
- ▲ 下記の部位は美容器を使用しないでください
- やけどの跡があり、色が濃い部位
  - 目の周り、しもやけやホクロのある部位
  - 日焼けした部位
- ※ 照射後48時間は日光浴、温泉、サウナなどを控えて下さい。季節にかかわらず日焼け止めクリーム（SPF30以上）を塗ることをおすすめします。
- ※ フラッシュ光を直視しないでください。

## 異常を感じた時の対処方法 | PRECAUTIONS

肌や身体へのトラブルを防ぐため、取扱説明書に従って本製品を適切にご使用ください。お客様の安全のため、使用上の注意を守ってご使用ください。よくある問題と対処方法は以下の通りです。

刺すような痛みがする	同じ照射レベルでも体質の違いによって痛み方は異なります。刺すような痛み（火傷のような痛み）を感じたら、照射レベルを下げて下さい。照射レベルが 1 の場合は、本製品の使用を中止してください。
皮膚が赤みを帯びた、または少し火傷のような感じがする	通常の見象です。時間が経てば自然に消えていきます。冷たいタオルで照射部位を冷やし、化粧水や保湿クリームなどで保護してください。
焦げた匂いがする	通常の見象です。使用する前にムダ毛をきれいに剃っていないことが原因と考えられます。使用の前に、ムダ毛をきれいに剃って下さい。

## よくある質問と対処方法 | PROBLEMS AND TREATMENT

現象	考えられる原因	対処方法
ディスプレイに何も表示されない	電源ボタンを正しい位置まで押していない。	電源ボタンを押す際、少し力を入れてください。
	電源ボタンを2秒以上押していない。	2秒以上、長押ししてください。
電源が入らない	接触不良	コードを一度全部取り外し、もう一度最初から接続してみてください。
フラッシュボタンを押しても照射しない	照射面が皮膚に密着していない。	照射面を皮膚に密着させて下さい。
	強く押し当てすぎている。	強く押し当てないでください
	電源が切れていて、ライトが点滅しない状態になっている。	電源を入れ、ライトが点滅してからもう一度照射ボタンを押してください。
使用できる照射回数が残っていない。	新しい製品に買い替えてください。	
自動的に電源がOFFになる	本製品は5分間操作をしなければ、自動的に電源がOFFになります。	電源ボタンを2秒以上長押しして、再度電源を入れて下さい。

## 保証期間内の修理について | WARRANTY

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号 氏名 購入商品 購入からの期間 故障状況

保証期間内に、修理の往復送料を店舗が負担いたします。

製品送付先は販売店にお問い合わせください。

保証期間終了後は、お客様のご要望により有償にて修理させていただきます。

その他ご不明な点がございましたら、販売店までご連絡ください。

## 保証書 | USER WARRANTY CERTIFICATE

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から1年間以内に

故障が発生した場合は、本書をご提示の上、修理を依頼してください。

本体以外の付属品は消耗品の為、保証対象外となります。

〈無償修理規約〉

- 1、取扱説明書に従った正常な状況で故障した場合は修理対応いたします。
- 2、保証期間内に故障して修理を受ける場合は、本書と購入日を証明する書類を提示の上、修理をご依頼ください。
- 3、次のような場合、保証期間内でも有償修理となります。
  - (ア) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - (イ) お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障
  - (ウ) 火災、地震その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - (エ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷。
  - (オ) 本書や購入日を証明する書類の提示がない場合。
- 4、本書は、日本国内においてのみ有効です。

品番：AI06

品名：Sarlisi サファイア美容器

修理期間：販売日から1年間

お客様氏名：

ご住所：

受注番号：





# Sarlisi

## サファイア美容器

---

このたびはSARLISI美容器をご購入いただき、誠にありがとうございます。