



Sarlisi®

## IPL光美容器Ai07取扱説明書

お客様の健康と美しさのため、  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、  
正しくお使いください。

# IPL光美容器



## CATALOG 目次

• 製品紹介	01
• 安全上のご注意	02
• 使用できる部位	07
• 製品の仕様	08
• 準備する	10
• 使いかた	12
• 使用時間	16
• メンテナンスとお手入れ	17
• よくある質問	18
• 保証期間内の修理について	20
• 証書保証書	20

## 製品紹介

### ■ Sarlisiの原理

SARLISI は光の力を使って効果的にムダ毛ケアをします。本製品は IPL( インテンス・パルス・ライト ) という特殊な波長の光をお肌に照射します。毛包 (ムダ毛の根本) にあるメラニン色素がこの光のエネルギーを吸収し、毛包に効果的に温熱作用を及ぼします。この作用により毛包でのムダ毛の成長を妨げます。また、IPL はお肌の線維芽細胞を活性化し、肌のハリを回復させ、しわや毛穴縮小に効果があります。ケアを継続することで肌の質を改善します。

### ■ 特性

#### ムダ毛ケア (HR)

IPL を照射することで毛包を狙って温熱効果を与えます。この効果により体毛の成長が遅くなります。成長期の毛包に照射することで成長を妨げます。定期的に照射をすることでムダ毛の発育を妨げ、除毛することができます。ただし、永久ムダ毛ケアではありませんので、ケアを中止するとムダ毛の量は徐々に戻ります。色の薄いムダ毛や白色のムダ毛には効果がありません。

#### 冷感機能

ムダ毛ケア中、冷感ヘッドは皮膚と接触する時に表皮を冷却し、皮膚の灼熱損傷を減少し、無痛ムダ毛ケアを実現することができます。

#### 光スキンケア (SC)

IPL( インテンス・パルス・ライト ) は肌ハリを改善し、若々しくします。これは IPL が皮膚にある線維芽細胞を活性化し、コラーゲンの合成を促進するからです。

#### 9段階調整可能

肌の色及びムダ毛の状況に合わせて出力レベルを調整することができ、安全にケアをすることができます。

#### 美肌ケア (RA)

IPL を照射することで、皮膚内のポルフィリンが単分子酸素を放出させ、皮膚内のプロピオン酸菌を死滅させます。同時に、皮脂腺を温めて肌を整え、皮脂分泌を抑えます。

#### LCD 液晶ディスプレイ

残り照射回数が見え、サロンのレベルの脱毛を自宅で安心して楽しめます。

IPL光美容器Ai07  
FOR COSMETIC AI07 IPL LIGHT  
冷感無痛、快適に脱毛

## 安全上の注意

お客様の安全のために、以下の点に注意して本製品をご使用ください

- 1、本製品本体の中は高電圧です。危険ですから絶対に分解しないで下さい。
- 2、本製品を使用する際、通風孔をふさがないで下さい。
- 3、本製品や付属品は防水ではありません。浴室など湿気の多い場所で使用しないでください。また、本体や付属品を水でぬらさないでください。
- 4、本製品や付属品は結露しないところに保管してください。
- 5、本製品や付属品を高温になる場所に置かないでください。故障の原因となります。
- 6、プラグや電源コードが破損した場合は、使用しないで下さい。
- 7、燃えやすい物や爆発しやすい物の近くで使用しないで下さい。



- 1、使用の際、目などに照射光を向けないで下さい。使用の際は必ず付属の保護眼鏡を着用してください。また、保護眼鏡を着用していても照射光を直視しないでください。
- 2、本製品を使用する前に、身につけている指輪やプレスレットなど金属品を外してください。
- 3、子供がいないところで操作してください。使用後は、子供の手が届かない場所に保管してください。
- 4、本製品を使用する際はメイクや香水などをよく洗い、素肌の状態にして使用してください。




## 肌色が「×」に該当する場合は使用しないでください

毛の色	肌の色					
	白色	ホホワイト	ライトブラウン	ブラウン	ダークブラウン	ブラック
グレー/白色	×	×	×	×	×	×
レッド	×	×	×	×	×	×
金色	×	×	×	×	×	×
ライトブラウン	✓	✓	✓	✓	×	×
ブラウン	✓	✓	✓	✓	×	×
ダークブラウン	✓	✓	✓	✓	×	×
ブラック	✓	✓	✓	✓	×	×



必ず守る

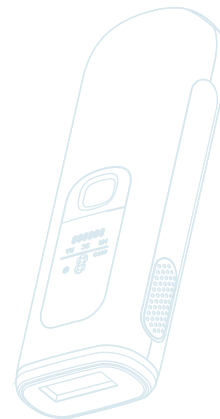

- 心身に障害をお持ちの方は、保護者の監督・指導のもとでご使用ください。
- 子供がいないところで操作してください。使用後は、子供の手が届かない場所に保管してください。
- 照射する部分の皮膚は乾かした清潔な状態にしてください。（お肌が乾かさない、清潔でないと、製品の効果に影響を与え、製品が照射しなかったり、誤って照射してしまうことがあります）
- 使用の際、目などに照射光を向けしないで下さい。使用の際は必ず付属の保護眼鏡を着用してください。また、保護眼鏡を着用していても照射光を直視しないでください。（視力に影響を与える可能性があります。）
- ムダ毛は1mmより長い場合は、使用の前にムダ毛をきれいに剃って下さい。（皮膚表面に長すぎるムダ毛があると、赤みや腫れの原因となり、ムダ毛が焦げた匂いをする、製品の使用感に影響します。）
- 本製品を初めて使用する場合は、1（最小の出力レベル）から使用を開始してください。
- 脇の下のムダ毛ケア後には、汗止めをすぐに使用しないでください。
- 定期的に照射面の清潔を保ちます。
- 風の出る口を塞いだままで使用しないでください。
- 服や髪に照射しないでください。
- ペットに使用すると怪我をする恐れがありますので、使用しないでください。
- 燃えやすい物や爆発しやすい物の近くで使用しないで下さい。



必ず守る

#### 次の点にご注意してください

- \* 製品は風通しが良く湿気のない場所に保管してください。
- \* 本製品を強く衝撃したり揺れたりしないでください。
- \* 雑物で風の出る口を塞ぐことを厳禁する。ムダ毛ケア器故障の原因になります。
- \* 本製品の使用環境は室内温度 0 ~ 40℃になります、使用する前に室内温度を確認してください。
- \* 本製品や付属品を高温になる場所に置かないでください。故障の原因となります。



禁止

#### 次のような方は使用しないで下さい

- 1、 局部または全身に炎症のある方。
- 2、 光線過敏症の方やその既往がある方。光線過敏の原因となりうる疾患にかかっている方や既往のある方。
- 3、 1 週間以内に薬を服用した方。（薬により光線過敏の状態になることがあります）
- 4、 ペースメーカー、インスリンポンプなどの体内植え込型医療機器を使用されている方。
- 5、 人工心臓などの生命維持医療機器を使用されている方。
- 6、 心電計などの装着型の電子医療機器を使用されている方。（電子医療機器の誤差動を招く恐れがあります）
- 7、 妊娠中、または授乳中の方。
- 8、 成長期のお子様。
- 9、 糖尿病などの疾患により皮膚や感覚に異常がある方。
- 10、 てんかんのある方。
- 11、 皮膚がんの既往がある方。ホクロが異常に多い方。しみが異常に多い方。
- 12、 その他かかりつけ医に本製品を使用しないよう指示を受けた方。



## ご注意




必ず守る

- 1、 ご使用前に本体に異常がないか確認して下さい。
- 2、 万が一、お肌の色の変化（濃くなった、薄くなった）場合は使用を中止し、医師に相談してください。
- 3、 ホクロや刺青、アートマークがある部位、及びその周辺には使用しないで下さい。
- 4、 日光浴をした後や日焼けマシーンを使用した後には使用しないで下さい。また、日焼けクリームを使用している方は使用しないで下さい。日焼けをしたかどうか、または日焼けによる皮膚への影響があるかどうかははっきりしない場合はムダ毛ケア器を使用しないでください。時間を置いて日焼けがないことを確認してから使用してください。
- 5、 体調のすぐれない時、肌に異常を感じる時は使用しないでください。
- 6、 入浴直後は使用しないでください。
- 7、 ケミカルピーリングやあかすりなどの施術を受けた場合は、時間を十分に空けてから使用して下さい。
- 8、 しみ、そばかす、あざ、いぼのある部位など、周囲より色の濃い部位は使用しないで下さい。こうした部位は光エネルギーを吸収しやすく、皮膚を傷めます。
- 9、 静脈瘤や血管奇形のある部位には使用しないでください。
- 10、 美容整形や手術を受けた部位、傷跡の残っている部位には使用しないでください。



**ご注意:** 上記の安全上の注意事項はすべてを網羅しているわけではありません。この製品を使用するかどうかは医師に相談してください。

## 使用できる部位

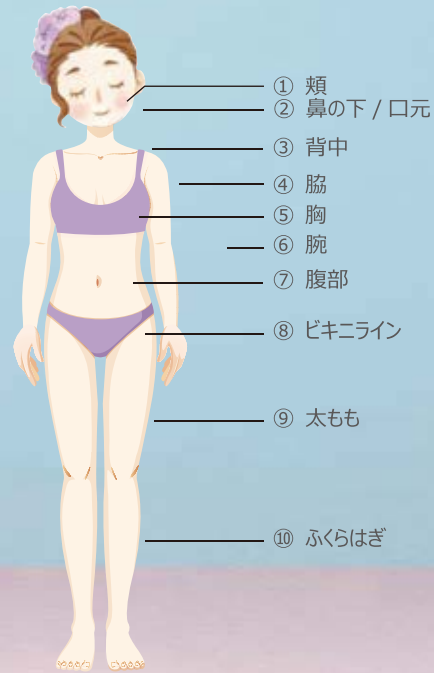

## 製品の仕様


### 本体各部のなまえ

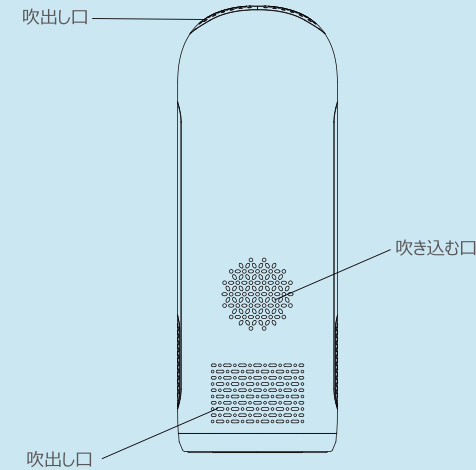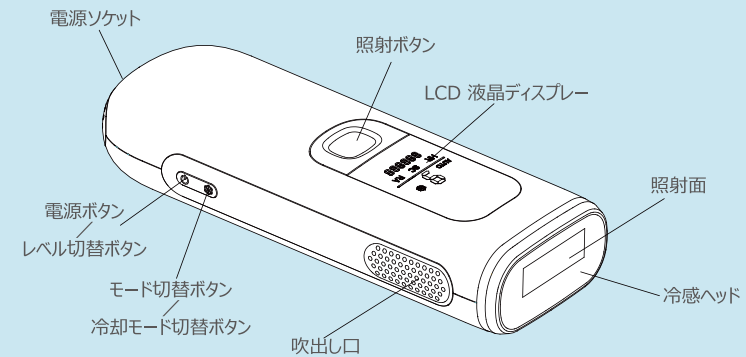

### パッケージ内容


本体	1
ACアダプター	1
取扱説明書	1
保護眼鏡	1
シエーバー	1

## ディスプレイ表示の説明

液晶ディスプレイの記号	機能	パラメーター
	HR	ムダ毛ケア
	SC	光スキンケア
	RA	美肌ケア
❄️	冷却機能	—
AUTO	自動連続照射モード	—
数字(1~9)	照射レベル表示	1~9 (9段階レベル)
6桁の数字	残り照射回数	—

## 製品の仕様

製品重量	約245g	電圧	24V
パワー	48W	照射面積	3.6 cm <sup>2</sup>
照射強度	6-18J	使用環境の相対湿度	15%-75%
使用環境の大気圧	80 kpa - 106 kpa	環境要求	直射日光を避ける
冷却方式	半導体冷却シート	波長	530-1200nm
実施基準	GB 4706.1-2005;GB 4706.15-2008		
本体サイズ	約3*6.5*18cm		

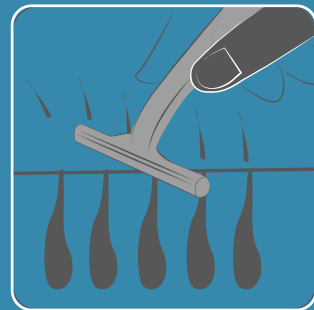

## 準備する

- 使用する前に徹底的に肌を清潔し、よく乾かして肌にムダ毛、油性物質（香水乳液、日焼け止めなど）が残らないようにしてください。
- 照射面にはホコリや体毛などの残留はなく、破損や異常はなかったことを確認してください。汚れがあれば、布で拭きとってください。製品故障や肌が荒っぽくなる原因になります。
- ムダ毛ケアする前に、ムダ毛ケア部位にジェルまたは化粧品（アロエジェルなど）を使用しないでください。
- 当製品は、25分以上連続使用しないで下さい。ケア範囲が広い場合、数回に分けて下さい。25分間使用したら一度電源を切り、30分後に使用を再開することをお勧めします。
- 使用前には下記の基準カードに基づいて、肌の色や毛の色に合わせて、肌色は適用するかしないか確認してください。
- はじめて使用する際は皮膚の目立たない部位を選び、皮膚の敏感度テストをしてください。照射から120分程度様子を見て、照射部位に痛みや発赤がないか確認してください。照射した部位に異常がなければ継続して使用できます。異常があれば使用を中止してください。



## 使いかた




本製品をご使用になる前に、ムダ毛ケア部位のムダ毛を剃って下さい。次に剃った部位をよく洗い、乾かして下さい。




注意

傷をつけないために、泡で剃ることをお勧めします。

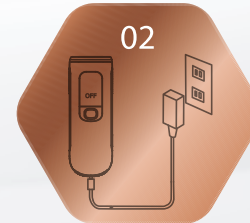

ACアダプターのプラグを本体に差し込んでください。本体のランプが点灯し“OFF”と表示されます。

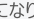

電源ボタンを3秒長押しすると本体が起動します。モード切替ボタンを短く押す、ディスプレイに“HR”が表示されるとムダ毛ケアモードになります。同時に  が表示されていると冷やしながらか照射することができます。





肌の色が濃い方は、熱をより多く吸収し、肌のアレルギーを起こす可能性があるため、肌の濃い方には低レベルで照射することをお勧めします。


肌の色	白色	ホワイ	ライトブラウン	ブラウン	ダークブラウン	ブラック
グレー/白色	×	×	×	×	×	×
レッド	×	×	×	×	×	×
金色	×	×	×	×	×	×
ライトブラウン	✓	✓	✓	✓	×	×
ブラウン	✓	✓	✓	✓	×	×
ダークブラウン	✓	✓	✓	✓	×	×
ブラック	✓	✓	✓	✓	×	×



初めてご使用になる方は、必ず「1」（一番弱いレベル）から始めてください。以降は、皮膚の様子を見ながらレベルを上げてください。レベルを上げるほど効果が強くなりますが、皮膚のトラブルを起こす恐れも高まります。不快を感じない程度の強度に設定してください。



ご使用する前に、必ず付属の保護眼鏡をかけて下さい。

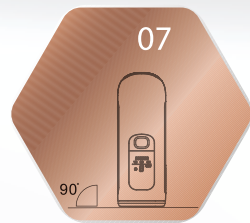


照射面に肌に垂直密着して、液晶ディスプレイが点滅するのを待って下さい。液晶ディスプレイが点滅したら、照射ボタンを押し、照射して下さい。冷却機能も搭載しておりますので、冷やしながら照射することができます。




注意

照射面が肌に密着当てないと、液晶ディスプレイが点滅せず、照射はできません。

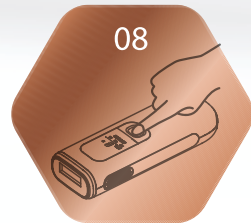


#### 照射設定

(1) 手動照射モード（狭い範囲のムダ毛ケアに適しています）美容器に電源を入れると、自動的に手動照射モードになります。照射ボタンを一回押すと一回照射されます。  
 (2) 自動照射モード（広い範囲のムダ毛ケアに適しています）美容器に電源入れた後、照射ボタンを長押しすると、ディスプレイに「AUTO」と表示され、自動照射モードに切り替わります。ヘッドを照射部位に垂直に密着させると、照射が自動的にスタートします。

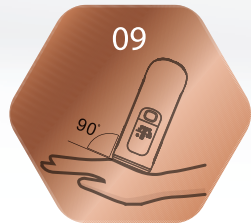

本体をまっすぐに持ち、照射面が照射部位に密着するように当てて下さい。  
 (1) 手動照射モードの場合  
 ライトが点滅するのを待って下さい。ライトが点滅したら、照射ボタンを押し、照射して下さい。照射が完了したら、次にムダ毛ケアしたい場所に本製品を当てて下さい。またライトが点滅するのを待って、点滅したら照射して下さい。以後、同じように照射を続けて下さい。一つの部位につき1回照射して下さい。  
 (2) 自動照射モードの場合  
 照射ボタンを長押しすると、照射が開始されます。照射が完了したら、次にムダ毛ケアしたい場所に本製品を当てて下さい。また照射ボタンを長押しすると照射が開始されます。その後は同じように照射を続けて下さい。一つの部位につき1回照射して下さい。

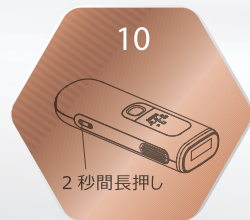

2 秒間長押し

使い終わったら、電源ボタンを 2 秒間長押しして、電源を切ります。



5 分間操作をしなかった場合に自動的に電源が切れます。



#### 光スキンケアモード

電源ボタンを 3 秒長押しすると美容器が起動します。モード切り替えボタンを短く押し、ディスプレイに“SR”が表示されるとムダ光スキンケアモードになります。顔をよく洗い、化粧水や保湿剤を肌に栄養を与えて乾かせてから、光スキンケアモードを行います。「1」（一番弱いレベル）からおすすめです。顔全体を下から上に向かってゆっくり移動しながら照射します。

使用頻度：  
毎回 2 ~ 3 回、週 1 ~ 2 回

ケア：

お肌に栄養を与えるために高い保湿効果のフェイスパックを使用することがお勧めします。また、日焼け対策や水分補給に気をつけます。



#### 美肌ケアモード

電源ボタンを 3 秒長押しすると本体が起動します。モード切り替えボタンを短く押し、ディスプレイに“RA”が表示されるとムダニキビケアモードになります。「1」（一番弱いレベル）からおすすめです。使用する前に顔をよく洗い、ニキビの膿を出した後、ニキビのある部分を 2 ショット連続照射します。

使用頻度：  
毎回 2 ~ 3 回、3 日に 1 回


ケア：

照射後は、修復効果のあるスキンケア製品やアロエベラジェルを塗ったり、普段から顔を清潔に保ち、辛いものや油分の多い食べ物を控えたりすると良いです。

## 使用時間

SC と RA モードは週に 1~2 回の使用をお勧めします。同じ部位には一日の間に一つの機能しか使用できません。同じ部位に別の機能を使用したい場合は、一日置いてから行ってください。

### ムダ毛ケアモードの使用頻度

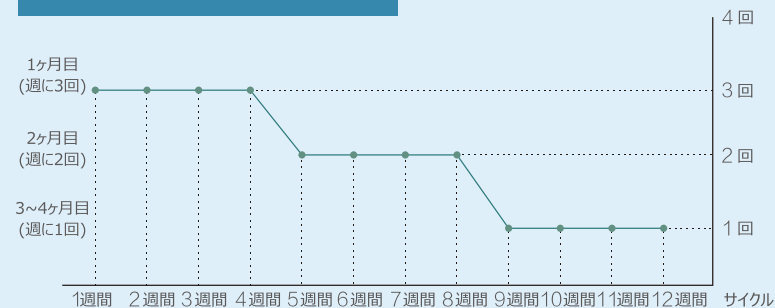

注意

効果は部位や個人の体質によって異なります。効果を実感できるまでに約半年から一年かかることもあるので、照射を継続してください。

### 脱毛後のお手入れ

- \* 脱毛後はボディローションなどで保湿してください。
- \* ムダ毛ケア後の 6 時間以内は、お風呂に入らないでください。24 時間以内は日差しを避け、日焼け止めを塗ってください、48 時間以内は塩素消毒の刺激を避けるためにプールに入らないでください。
- \* ムダ毛ケア後、肌は少し熱く、赤くなっていますが、これは正常な状態です。冷感ヘッドを使用することで、肌の不快感を和らげることができます。
- \* ムダ毛ケア後、香水、フェイスマスク、美白ボディローションやアルコールを含む刺激の強い製品を使用しないでください。
- \* ムダ毛ケア期間内は日焼け（日焼けスプレー、日焼けローションなどの使用、または日光による日焼け、人工的な日焼けなど）をしないで下さい。
- \* ムダ毛ケア後に、整形手術を受けたい場合は、医師にご相談ください（脱毛部位のみ）。
- \* 使用后、アレルギー、発疹、持続的な痛み、皮膚の病変、その他の不快感がある場合は病院で医師の診察を受けてください。

## メンテナンスとお手入れ

### メンテナンス



本製品の寿命と使用効果を確保する為に、脱毛の前後には必ず製品をクリーニングしてください。製品に付いた毛やほこりを清掃やクリーニングしないと製品の効果が十分に発揮されないことがあります。

- ◆ 本体を検査し、照射面と本体の清潔を確保します。
- ◆ 水洗いは絶対にしないでください。また水につけたり水をかけたりしないでください。アルコール、洗剤などは使わないでください。
- ◆ 本製品の電源を切らずに長時間放置すると冷感ヘッドに水滴がつくことがあります。これは正常な現象です。

### お手入れ



- ◆ 電源が OFF になったら、ムダ毛ケア器本体から AC アダプターのプラグを外してください。
- ◆ 照射面の熱が冷めたら、アルコール成分を含まないウエットティッシュや柔らかい布などで、照射面をきれいに拭いて下さい。
- ◆ 本体をきれいに清掃した後に、本体を箱に戻してください。製品は風通しが良く湿気のない場所に保管してください。お子様の手に届かないよう注意してください。

## よくある質問

### Q：永久脱毛することができますか？

A: 家庭用脱毛器は永久脱毛することができません。家庭用脱毛器の原理は毛包に一時的な休止状態を与え、毛髪の成長を遅らせます。でも時間が経てば再び生えこたがあります、これは人によって異なります。ムダ毛をケアした後、新しく生えてきた毛は細くて柔らかくなる、使い続けることで脱毛を実現します。

### Q：毎回ムダ毛をケアする前に剃る必要がありますか？

A: ムダ毛は 1mmより長い場合は、使用の前にムダ毛をきれいに剃って下さい。（ご注意：傷をつけないために、泡で剃ることをお勧めします。）

### Q：数回使って、他の人と比べると、どうして効果が出なかったのでしょうか？

A: 各人の体質が異なり、ムダ毛の太さや色の濃淡も異なります。また、使用部位や使用レベルが異なるため、効果の出る時間も当然違います。4～8週間が平均で、正確な期間は若干異なる場合があります。

### Q：レベルはどのくらいがいいのでしょうか？

A: 基準カードに基づいて、肌の色や毛の色に合わせて最適なレベルを選んでください。レベルが高ければ高いほど効果がよくなる、ケア時間も短くなります。

### Q：痛みなどありますか？

A: 同じ照射レベルでも体質の違いによって痛み方は異なります。自分の状況によって、レベル 1 からゆっくりアップしてください。

### Q：どうして使用後ムダ毛が焦げた匂いがするの？

A: 通常の現象です。使用する前にムダ毛をきれいに剃っていなかったことが原因と考えられます。使用の前に、ムダ毛をきれいに剃って下さい。

### Q：早くケア完了したいので、毎日使ってもいいですか？

A: ムダ毛の成長は周期性があるので、毎日使っても効果が早く出ないんです。普通のペースで使って下さい。



## 保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。  
受注番号または注文番号 氏名 購入商品 購入からの期間 故障状況 保証期間内に、修理の往復送料を店舗が負担いたします。  
製品送付先は販売店にお問い合わせください。  
保証期間終了後は、お客様のご要望により有償にて修理させていただきます。  
その他ご不明な点がございましたら、販売店までご連絡ください。

## 証書保証書

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から1年間以内に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、修理を依頼してください。  
本体以外の付属品は消耗品の為、保証対象外となります。

〈無償修理規約〉

- 1、取扱説明書に従った正常な状況で故障した場合は無償で修理対応いたします。
- 2、保証期間内に故障して修理を受ける場合は、本書と購入日を証明する書類を提示の上、修理をご依頼ください。
- 3、次のような場合、保証期間内でも有償修理となります。  
(ア) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷。  
(イ) お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障  
(ウ) 火災、地震その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。  
(エ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷。  
(オ) 本書や購入日を証明する書類の提示がない場合。

品番：Ai07      品名：Sarlisi IPL 光美容器  
修理期間：販売日から1年間  
お客様氏名：  
ご住所：  
受注番号：